

平成27年度（第24回）
臨床検査精度管理調査結果報告書

平成28年6月

（公社）全国労働衛生団体連合会
総合精度管理委員会
臨床検査専門委員会

..

はじめに

労働者の健康診断は、労働安全衛生法の規定により事業者による実施が義務づけられているが、多くの場合、企業外の健康診断機関によって行われている。

健康診断には、問診、診察、採血・採尿や各種生理機能検査等の実施、検体の運搬、保存、測定、健康診断結果の総合判定、さらには健康診断結果の事業場への報告および受診者個人への報告と多くのステップがあり、これらの各ステップで、医師、保健師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、医療事務担当者等多くの職種の人たちが関わっている。

そして健康診断の品質を良質なものとするためには、生産における品質管理と同様に健康診断の各ステップにおいて精緻な管理が求められる。このためひとつひとつの検査が十分な精度管理のもとで実施されることが重要である。

公益社団法人全国労働衛生団体連合会では、労働衛生検査（生物学的モニタリング検査）、臨床検査、胸部エックス線検査および腹部超音波検査に係る精度管理調査を実施しているが、本報告書は、平成27年度臨床検査に関する精度管理調査の実施結果をまとめたものである。

なお、臨床検査精度管理調査の実施細目は巻末に掲載の「平成27年度臨床検査精度管理調査実施要領」を参照されたい。

また、各精度管理調査を企画・運営・管理するために設置されている総合精度管理委員会、臨床検査精度管理調査のための臨床検査専門委員会及び評価部会の委員は次ページのとおりである。

【総合精度管理委員会委員】

委員長 清水 英佑 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター所長

副委員長 森 晃爾 産業医科大学 産業医実務研修センターセンター長

委員 伊藤 春海 福井医科大学 名誉教授 特命教授

同 圓藤 吟史 大阪市立大学 名誉教授

同 小野 良樹 (公財) 東京都予防医学協会 理事長

同 櫻井 治彦 (公財) 産業医学振興財団 理事長

同 高木 康 昭和大学医学部 教授

同 福田 崇典 (社福) 聖隷福祉事業団 常務理事

同 道永 麻里 (公社) 日本医師会 常任理事

同 森 雄一 (公財) 神奈川県予防医学協会 専門委員

【臨床検査専門委員会委員】

委員長 高木 康 昭和大学医学部 教授

委員 大久保滋夫 文京学院大学 保健医療技術学部

同 金森きよ子 文京学院大学 保健医療技術学部 准教授

同 川合 陽子 国際医療福祉大学 教授

同 久保野勝男 新潟医療福祉大学 客員教授

同 近藤 弘 関西医療大学 教授

同 佐藤 尚武 順天堂東京江東高齢者医療センター臨床検査科

同 杉山 弘 昭和大学藤が丘病院 臨床病理検査部

同 関 顯 労働衛生検査精度向上研究会 代表

同 森 雄一 (公財) 神奈川県予防医学協会 専門委員

同 山舘 周恒 人間総合科学大学 人間科学部

..

平成27年度精度管理調査結果報告

I. 平成27年度調査結果の概要

1 調査の目的

健康診断施設及び測定依頼を受ける登録衛生検査所が実施する臨床検査の検査精度を確認するとともに、必要な指導を行うことにより、信頼性の高い優良な健康診断施設及び登録衛生検査所を育成することを目的とした。

2 調査対象施設

健康診断施設及び登録衛生検査所

3 調査の対象項目（20項目）

- 1.総コレステロール 2.中性脂肪 3.尿酸 4.クレアチニン 5.AST 6.ALT
- 7.γ-GT 8.血糖 9.HDLコレステロール 10.LDLコレステロール
- 11.HbA1c
- 12.尿糖（半定量） 13.尿蛋白（半定量） 14.尿潜血（半定量）
- 15.ヘモグロビン 16.赤血球数 17.白血球数 18.ヘマトクリット 19.血小板数
- 20.平均赤血球容積

4 調査の実施方法

精度管理試料をすべての精度管理参加施設に送付して、測定結果を回答してもらい、測定値の精度を評価した。

(1) 調査項目及び送付試料数

① 総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、 γ-GT、血糖測定用	5試料
② HDLコレステロール、LDLコレステロール測定用（1試料生血清）	3試料
③ HbA1c測定用	2試料
④ 尿糖、尿蛋白、尿潜血半定量測定用	5試料
⑤ ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、 平均赤血球容積測定用（2試料新鮮血液）	4試料

注 1) 平均赤血球容積は参考調査（仮評価）とした。

注 2) 生血清試料による HDL コレステロールおよび LDL コレステロールの調査は参考調査（仮評価）とした。

注 3) 生血液試料によるヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数および平均赤血球容積までの調査は参考調査（仮評価）とした。

注 4) ヘモグロビン～平均赤血球容積を測定した後の残余の血液により、HbA1c の測定をお願いした。この調査も参考調査（仮評価）とした。

(2) 調査実施時期

試料送付 平成28年 2月 2日 (火)

報告期限 平成28年 2月12日 (金)

(3) 測定を委託している場合の送付試料の取り扱い

生化学関係の項目について全部あるいは一部を自施設では測定しないで登録衛生検査所に委託している施設については、全衛連より送付した試料のうち、外部委託する項目の試料を通常委託している登録衛生検査所に送付して測定させ、その上でその数値を回答していただいた。

5 調査参加施設数及び調査状況

平成27年度(第24回)全衛連臨床検査精度管理調査の参加施設数は364で昨年より4施設増加した。

また、外注を受けた登録衛生検査所は60施設で昨年より6施設増加した。

調査項目別の参加施設数、自施設測定数、外部機関委託施設数とそれぞれの比率および受託登録衛生検査所数は表1に示すとおりである。

調査対象とした項目は、従来通り総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、 γ -GT、血糖、HDLコレステロール、LDLコレステロール、HbA1c、尿糖(半定量)、尿蛋白(半定量)、尿潜血(半定量)、ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板、平均赤血球容積の合計20項目であった。これらの項目中、臨床化学検査では、HDLコレステロールおよびLDLコレステロールについて、前回同様に新鮮血清1種類を参考調査試料として加え、各施設では、凍結乾燥品2種類のほかに新鮮血清1種類を測定していただいた。

血液学検査では、平成18年度(第15回)調査よりヒト生血液を参考調査試料として加えているが、今回も2種類のヒト生血液を参考調査試料として、全施設でこの試料2種類を測定していただいた。

なお、平成23年度(第20回)から血液学検査用生血液2試料の残余試料について、HbA1cの測定をしていただいているが、今回も同様に測定いただいた。

全衛連精度管理調査では、試料の凍結、破損等で測定不可能な場合に限り試料を再送付しているが、今回、試料到着時に施設から問い合わせがあり、試料を再送付した施設は合計7施設であった。その内訳は、強溶血(3施設)、凍結(1施設)、1試料のラベル剥がれ(1施設)、指定時間に測定できない(1施設)および施設内で常温放置(1施設)であった。

血液学検査用試料については、測定前の試料溶血の程度を4段階に分けて回答票により報告していただいているが、溶血強度4または3以上の報告(溶血強度またはコメントの記入)のあった施設が6施設あった。試料到着時には、マイクロヘマトクリット管を用いて遠心を行い、上清に強度の溶血がないかを確認するなどの対応が必要である。強溶血を認めた場合はコメント欄に記入するだけでなく、試料再送が必要なこともあるため、全衛連に連絡していただきたい。また生血試料でのフィブリン析出が11施設から報告された。

尿検査については、363施設が参加しているが、このうち22施設が尿検査を登録衛生検査所に外部委託していた。尿検査は経時変化が大きいため、精度維持の観点から外部委託しないよう求めているので十分留意していただきたい。

表1 項目別参加施設数および委託状況

項 目	参加 施設数	自施設 測定数	構成比 (%)	外部委託 測定数	構成比 (%)	受託登録衛 生検査所数
総コレステロール	363	156	43.0%	207	57.0%	60
中性脂肪	363	156	43.0%	207	57.0%	60
尿酸	363	156	43.0%	207	57.0%	60
クレアチニン	364	157	43.1%	207	56.9%	60
AST	364	157	43.1%	207	56.9%	60
ALT	364	157	43.1%	207	56.9%	60
γ-GT	363	156	43.0%	207	57.0%	60
血糖	364	157	43.1%	207	56.9%	60
HDLコレステロール	364	156	42.9%	208	57.1%	60
LDLコレステロール	364	156	42.9%	208	57.1%	60
HbA1c	362	155	42.8%	207	57.2%	59
尿糖	363	341	93.9%	22	6.1%	15
尿蛋白	363	341	93.9%	22	6.1%	15
尿潜血	363	341	93.9%	22	6.1%	15
ヘモグロビン	361	157	43.5%	204	56.5%	60
赤血球	361	157	43.5%	204	56.5%	60
白血球	361	157	43.5%	204	56.5%	60
ヘマトクリット	361	157	43.5%	204	56.5%	60
血小板	361	157	43.5%	204	56.5%	60
平均赤血球容積	361	157	43.5%	204	56.5%	60

※生血だけの参加も参加施設数に含む。

II. 調査に使用した試料

全衛連では本調査開始当初（平成元年）からヒトプール血清を無菌処理したものを凍結試料としてきたが、ヒトプール血清の入手が極めて困難となったことなどから、平成24年度（第21回）よりこれまで使用してきたプール血清の代用としてオフクロット血清（Serum Off the Clot）を使用している。

この変更に関し、従来の精度管理調査試料と同等な評価が可能となるかどうか、事前に診断薬企業と大学病院の計6施設により、あらたに調整した試料の反応性を評価した。その結果、従来の試料と同等な反応性が確認できたことで、精度管理調査試料として使用することを決めた。

1 調査項目別試料

(1) 総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、 γ -GT、血糖測定用試料

上述の通り、試料はオフクロット血清をベースに用いたが、脂質含量が少ないため、静注用脂肪乳剤より精製した中性脂肪分画を添加し、8濃度の試料が適切な解析値評価ができる濃度勾配となるようにした。また、酵素活性レベルを高くするために、ヒト型のリコンビナント酵素を添加している。尿酸クレアチニンおよびグルコースも前回同様に添加した。調整した8濃度試料のうち、参加施設には5試料を配布した。

(2) HDL コレステロールおよび LDL コレステロール測定用試料

3 試料は凍結乾燥試料、さらに今回も 2 種類の新鮮血清を参考調査試料として加えて合計 5 試料準備したが、参加施設には 5 試料のうち、凍結乾燥試料 2 試料、新鮮血清 1 試料、合計 3 試料を配布した。

(3) HbA1c 測定用試料

今回も前回と同様調査用に作製された凍結乾燥したヒトヘモグロビン試料を用いた。

(4) 尿糖、尿蛋白、尿潜血半定量用試料

従来通り調査用に作製された凍結乾燥品である。

(5) 血液学検査用試料

従来通り各血球を個々の方法で固定し安定剤を加えた加工血液（低、中、高値）を用いた。ただし、過去に配布した試料で、白血球数低値試料において測定機器の関係もあって施設間差が大きかったことから、今回も白血球数が著しく低い試料は選択から除外している。

また今回も参考調査として2種類の生血液を加えて、参加施設には、コントロール血球 1 試料を全施設で測定していただき、残りの2試料をランダム化、生血液2試料は、全施設で測定していただくことにして、各施設には、合計4試料を配布した。

2 調査試料のランダム化

全衛連精度管理調査の最大の特徴は調査試料のランダム化である。

今回も調査試料を8濃度（または8活性値）準備し、直線性の評価が可能なように最低濃度（または最低活性値）と次に低い濃度（または活性値）の試料のいずれかおよび最高濃度（または最高活性値）と次に高い濃度（または活性値）の試料のいずれかが必ず入る条件を設定し、選択された試料を除く残りの試料をランダム化した合計5試料を各施設に送付した。

HDL、LDLコレステロール測定用試料は、凍結乾燥品3試料をランダム化して2試料、新鮮血清2試料をランダム化して1試料、合計3試料を各施設に送付した。

HbA1c測定用試料は、3試料をそれぞれランダム化して2試料を各施設に送付した。また、血液学検査用試料の生血液2試料の残血についてのHbA1c測定をお願いした。

血液学検査用試料は、3種類のコントロール血球のうち1試料を全施設で測定、残りの2試料をランダム化して合計2試料、2種類の生血液はランダム化せず全施設で測定することにして、合計4試料を各施設に配布した。

3 配付試料に関する事前確認

昨年度の「総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、 γ -GT、血糖測定用試料」において、融解直後からAST値の上昇が見られ、集計値において、CV値が大きくなる事象が報告された。このことを受けて今年度の全衛連精度管理試料を調整するにあたり、ASTの安定性に関して事前確認を行うこととした。

4種類の試作品血清試料（低濃度、高濃度、安定化剤の有無）について、融解初期値、1、2、3、4、8および24時間経過後のAST活性値を測定し変動の有無を確認した。

その結果、低濃度、高濃度、安定化剤有り、無しの全ての試作品血清試料において、融解直後からAST活性値が変動する事象は見られなかった。この結果を確認したのちこれまで通りの試料の準備を開始した。

Ⅲ. 評価基準等

臨床検査精度管理調査における参加施設の報告値評価は、従来、一般的には報告値を同一測定法群（peer group）に分類した後、平均値、標準偏差を計算して平均値 $\pm 3SD$ （または平均値 $\pm 2SD^*$ ）を越えるデータを極端値として棄却し、棄却後のデータから求めた平均値、標準偏差を基準として評価してきた。

しかし、このようにして求めた平均値が真の値（true value）を代表する目標値（target value）として適切であるか否かについては長らく論議の的になってきた。この問いに答える目的で、全衛連総合精度管理委員会・臨床検査専門委員会は、参考値検討委員会を組織して検討を行った。

第1回（平成4年度）臨床検査精度管理調査においては、総コレステロール、AST（JSCC標準化対応法）、ALT（JSCC標準化対応法）、ヘモグロビンの4項目について参考値を求めた。第2回（平成5年度）からは、日本臨床化学会（JSCC）から中性脂肪測定 of 勧告法が発表されたことから、中性脂肪の参考値を加えた。第3回（平成6年度）からは、 γ -GTの勧告法が発表されたことから、 γ -GT（JSCC標準化対応法）の参考値を加えた。血糖は第8回（平成11年度）から参考値を求めた。

そして、第9回（平成12年度）から上記7項目全ての測定法について、参考値を基準濃度として評価することにした。いずれの項目も最初に参考値を求めた年度は参考に止め、次年度から評価の基準濃度（または基準活性値）として用いた。

参考値による評価で現在までに判明したことは、参加機関の平均値と参考値が経年的に近接しており、ここ数年は極めてよく一致していることである。この結果は日常検査の精密さ、正確さが年々向上しており、極端値棄却後の参加機関の平均値を真の値を代表する目標値として用いてもほぼ問題がないことを示している。

以上のことから、平成19年度（第16回）から参考値評価を廃止し、全ての項目について同一測定法群の極端値棄却後の平均値を基準濃度（基準活性値）として用いて評価している。

なお、従来と同様に測定法分類で同一測定法群のn数が6未満の測定法で測定原理上他の平均値を用いて評価できない測定法については、計算された同一測定法群の統計量の統計的意義が乏しいことから「評価せず」としている。

* 日医調査のようにn数が著しく多い場合には、極端値を平均値 $\pm 3SD$ で棄却するが、本調査のようにn数が比較的小さい場合には、シミュレーションの結果から平均値 $\pm 2SD$ で棄却する方が適切であることが判明している。

1 評価規準

臨床検査領域における測定法、測定試薬、測定技術を含む測定装置等の進歩により、精度管理調査における報告値の施設間差は、いずれの施設で実施されている調査結果を見ても近年著しく縮小している。その結果、報告値の評価法として一般的に用いられてきた同一測定法群のSD（標準偏差）を基本とした統計学的評価法は、測定値の施設間差が縮小しても、常に同一比率でA、B、C、Dが出現し、項目により必要以上に厳

しい評価となることから、評価法に限界があることが問題となってきた。

近年、欧米において個体の生理的変動を基本とした許容誤差規準が測定法の性能評価の主流となりつつある。そこで、全衛連臨床検査専門委員会では、個体の生理的変動を基本とした許容誤差規準の利用の可能性について検討を進めてきた。

その結果、この許容誤差規準を全衛連調査における評価規準として採用できることが判明したので、平成18年度（第15回）全衛連調査から従来の評価規準を個体の生理的変動を基本とした評価規準に変更して評価することにした。この評価規準を採用して平成27年度で10年目になるが、この評価規準は全衛連の精度管理調査のみで使用されているため、評価規準設定の根拠および評価法の概要について今回も引き続いて解説する。

2 生理的変動を基本とした評価規準

(1) 生理的変動の性能評価への活用

個体の生理的変動は、個体内生理的変動と個体間生理的変動に分類されるが、その活用は、1996年、わが国の北村¹⁾が個体内生理的変動の標準偏差の1/2を測定誤差の許容範囲とする考え方を提唱したことに端を発している。現在では、その考え方が測定“精密さ”の許容誤差として国際的にも広く認識されている。その後、測定“精密さ”だけでなく、個体内生理的変動および個体間生理的変動から計算された測定値の“かたより”および精密さとかたよりを統合した“総誤差”の許容誤差が加わっている^{2), 3)}。以下にそれぞれの許容誤差に関する基本的な計算式とその解釈について示す。

① 精密さの許容誤差 $CV_A < 0.50 CV_I$

分析の変動係数 (CV_A) が、個体内生理的変動 (CV_I) の1/2以下であるべきことを示す計算式となっている。

② かたよりの許容誤差 $BA < 0.25 (CV_I^2 + CV_G^2)^{1/2}$

分析のかたより (BA) が、個体内生理的変動と個体間生理的変動 (CV_G) から求めた総変動 $[(CV_I^2 + CV_G^2)^{1/2}]$ の1/4以下であるべきことを示す計算式となっている。

③ 許容総誤差 $TEa < 1.65 (0.50 CV_I + 0.25 (CV_I^2 + CV_G^2)^{1/2})$

許容総誤差 (TEa) が、精密さの許容誤差の1.65倍（測定値の分布の片側95%信頼区間に対する係数）とかたよりの許容誤差を加算した合計値以下であるべきことを示す計算式となっている。

(2) 生理的変動のデータベース

現在、個体内生理的変動および個体間生理的変動に関する基礎データについては国内外において多くの報告が見られるが、国際的にはRicosらのデータ⁴⁾が広く知られている。Fraser³⁾は、生理的変動は人種、年齢、地域等に関係なくほぼ一定であるという十分な証拠があるので、このRicosらのデータベースを国際的に共通に活用することを提唱している。このデータベースは、米国においてもWestgardマルチルール管理法で著名なDr. Westgardにより管理法の設計の基礎データとしても利用されて

いる⁵⁾。

そこで、全衛連臨床検査専門委員会では基礎データの国際的互換性の観点から、評価規準の計算にRicosらのデータベースを使用することとした。

(3) Fraserによる性能評価段階

Fraserは欧州グループによる勧告論文²⁾の主筆者であり、1980年代初頭以来、臨床化学検査の分析上の目標に関する多くの論文を発表しており、引用文献³⁾は、彼の研究の集大成でもある。彼は上記①～③の許容誤差を、基本的な“望ましい性能”として位置づけ、この“望ましい性能”を中心として、さらにその1/2を“最適性能”、最適性能の3倍を“最低限の性能”とする3段階の評価段階を、上記①～③のそれぞれの許容誤差に設けている。彼は、これら3段階の許容誤差について以下のように述べている。すなわち、日常検査の実際の性能を考慮したとき、生理的変動から計算された“望ましい性能”を容易に満たすことができる成分については“最適性能”を評価規準として用いる必要があり、一方、“望ましい性能”を満たすことが困難な成分については“最低限の性能”を評価規準として用いる必要があると述べており、普遍性のある生理的変動という明確な根拠を基本とした、性能規準の活用を推奨しながらも、現在の技術水準を考慮した許容誤差段階の選択という柔軟性のある対応をすることを勧めている。このFraserの3段階の評価段階は、従来用いられてきた統計学的評価法の評価段階である1SD、2SD、3SDの3段階と類似した形式になっているため、利用しやすい特長がある。

3 生理的変動を基本とした評価規準の一般的解釈

以上の①精密さの許容誤差、②かたよりの許容誤差、③許容総誤差の3種類の許容誤差の適用範囲を考えると、一般的に①の精密さの許容誤差は、測定値の精密さの管理を目的とする内部精度管理用の規準として、②のかたよりの許容誤差は、主として測定値の正確さの評価を目的とする場合の規準として、③の許容総誤差は検査室認定等の規準として適切であると考えることができる。そのような観点から、全衛連臨床検査専門委員会では、評価規準の基本をかたより%の“望ましい性能”とすることとし、この性能を容易に満たすことができる成分については“最適性能”を評価規準として用い、また日常の性能がかたより%の望ましい性能を満たさない場合は、許容総誤差の望ましい性能を基本とすることにした。日本臨床化学会のクオリティマネジメント専門員会⁶⁾においても、臨床化学成分の外部精度評価（精度管理調査）における許容誤差限界としてかたよりの許容誤差（BA）を用いることが適切であると述べている。

4 全衛連調査における評価規準としての考え方

(1) 評価規準の比較および検討

平成17年度（第14回）全衛連調査結果をもとに、調査対象項目のうち臨床化学項目については比較的施設数の多い代表的な測定法の参考値（又は平均値）、標準偏差およびそのデータから計算したCV%、2CV%、3CV%、血液学検査項目については

従来の段階的評価規準（％）を用い、一方、各項目に対応する生理的変動のデータベースからかたよりの許容誤差、許容総誤差およびFraserの提唱する“最適性能”、“望ましい性能”、“最低限の性能”の3段階について計算し、平成18年度（第15回）の評価規準の基礎データとした。さらに臨床化学項目については平成18年度（第15回）全衛連の調査結果および平成18年度（第40回）日本医師会臨床検査精度管理調査（日医調査）結果報告書から、全衛連調査対象項目について同様の計算を行った。

これらの比較データについて検討を行った結果、臨床化学項目についてはかたより％の“望ましい性能”を基本的な評価規準として、精度管理調査からの日常の性能がそれよりも良好な場合には、“最適性能”を評価規準（A）とした。ただし、総コレステロールおよび血糖については、平成18年度（第15回）はいずれも“最適性能”を評価規準（A）としたが、全衛連調査結果のCV％に比較して日医調査結果のCV％が大きいため、日医調査結果との整合性を考慮して平成19年度（第16回）から“望ましい性能”を評価規準とすることとした。HbA1cについては日常の性能（CV％）が計算されたかたより％のいずれの性能規準をも超えることから、この項目に限って総誤差％の基本的な評価規準である“望ましい性能”を評価規準（A）とした。

血液学検査項目については新評価規準の初年度である平成18年度（第15回）に設定したように、赤血球数、ヘマトクリット値の2項目で従来の評価規準％がかたより％の“望ましい性能”を満たさないことから、“最低限の性能”を評価規準（A）として選択すると、その％が総誤差％の“最適性能”を超えることから、血液学検査項目間でかたより％と総誤差％の混在を避けるため、血液学検査項目全てについて総誤差％の“望ましい性能”を基本としていずれの項目も従来の評価規準％がそれよりも小さいことから、総誤差％の“最適性能”を評価規準（A）とすることにした。しかし、ここ数年の調査結果について検討を行ったところ、総誤差％の“最適性能”では、項目によりなお厳しい結果となることが判明してきたので、今回、総誤差％の“望ましい性能”の妥当性について検討した。その結果を踏まえて、評価規準の改訂を検討している。

（2） 報告最小単位による評価規準

従来の評価で、調査結果の標準偏差が、報告最小単位以下となる項目があり、必要以上に厳しい評価となっていた問題については、この評価規準でも、同様に報告最小単位から計算された％が、最小評価％（A）を超える項目が発生するため、主として米国で行われている例にならい、そのような項目については±報告最小単位による評価規準を別途設けて％評価といずれか大きい方を評価規準とする方式をとった。今回も対象となった項目は、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、HbA1c、白血球数の7項目となった。

（3） 平成27年度（第24回）全衛連精度管理調査の評価規準

（1）の評価規準の検討結果を踏まえて、A、B、C、Dの4段階の評価規準を設定し、平成19年度（第16回）全衛連調査用の評価規準を作成し、平成27年度（第24回）も、引き続き同じ評価規準を用いた。その評価規準を表2-1（臨床化学項目）、表2-2（血

液学検査項目) に示した。

参考文献

- 1) 北村元仕：精度管理の方法と問題点.臨床化学検査.医学の歩み、59分冊：383-394,1966.
- 2) Fraser CG, Hyltoft Petersen P, Ricos C, Haeckel R: Quality specifications for the imprecision and inaccuracy of analytical systems for clinical chemistry.Eur J Clin Chem Clin Biochem30:311-317,1992. .
- 3) Fraser CG著(中 甫訳):検査データの生理的変動 —原理から実践へ—. 医歯薬出版(東京),2004.
- 4) Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez a, Jimenez C V, Minchinela J, Perich c, simon M, :Current databases on biological Variation:pros,cons and progress. Scand J Clin Lab Invest 59:491-500,1999.
- 5) Westgard JO: Six Sigma Quality Design & Control. Westgard Inc.(Madison WI53717,USA),2006.
- 6) 日本臨床化学会クオリティマネジメント専門委員会:プロジェクト報告 生理的変動に基づいた臨床化学検査36項目における測定の許容誤差限界 臨床化学35：144-153,2006.

表 2-1 生理的変動を基本とした測定値の評価規準（臨床化学検査）

項 目	参考値	評価規準		評価点	評価
総コレステロール	試料番号1～8		±0～4.0%	3	A
			±4.1～8.0%	2	B
			±8.1～12.0%	1	C
			±12.1%～	0	D
中性脂肪	試料番号1～8		±0～5.3%	3	A
			±5.4～10.7%	2	B
			±10.8～16.0%	1	C
			±16.1%～	0	D
項 目	参考値	評価規準（いずれか大きい方）		評価点	評価
尿酸	試料番号1～8	±0.1 mg/dL	±0～2.4%	3	A
			±2.5～4.8%	2	B
			±4.9～7.2%	1	C
			±7.3%～	0	D
クレアチニン	試料番号1～8	±0.05 mg/dL	±0～3.4%	3	A
			±3.5～6.8%	2	B
			±6.9～10.2%	1	C
			±10.3%～	0	D
A S T	試料番号1～8	±1 U/L	±0～5.4%	3	A
			±5.5～10.8%	2	B
			±10.9～16.2%	1	C
			±16.3%～	0	D
A L T	試料番号1～8	±1 U/L	±0～6.0%	3	A
			±6.1～12.1%	2	B
			±12.2～18.1%	1	C
			±18.2%～	0	D
γ-G T	試料番号1～8	±1 U/L	±0～5.4%	3	A
			±5.5～10.8%	2	B
			±10.9～16.2%	1	C
			±16.3%～	0	D
項 目	参考値	評価規準		評価点	評価
血糖	試料番号1～8		±0～2.2%	3	A
			±2.3～4.4%	2	B
			±4.5～6.6%	1	C
			±6.7%～	0	D
項 目	平均値	評価規準		評価点	評価
HDLコレステロール	試料番号1～3		±0～2.6%	7	A
			±2.7～3.5%	6	B
			±3.6～4.4%	5	
			±4.5～5.2%	4	
			±5.3～6.5%	3	C
			±6.6～7.8%	2	
			±7.9～9.1%	1	D
			±9.2%～	0	
LDLコレステロール	試料番号1～3		±0～3.4%	7	A
			±3.5～4.5%	6	B
			±4.6～5.6%	5	
			±5.7～6.8%	4	
			±6.9～8.7%	3	C
			±8.8～10.2%	2	
			±10.3～12.0%	1	D
			±12.1%～	0	
項 目	平均値	評価規準（いずれか大きい方）		評価点	評価
H b A1c	試料番号1～3	±0.1%(結果)	±0～2.7%	7	A
			±2.8～3.6%	6	B
			±3.7～4.5%	5	
			±4.6～5.4%	4	
			±5.5～6.8%	3	C
			±6.9～8.1%	2	
			±8.2～9.5%	1	D
			±9.6%～	0	

表 2-2 生理的変動を基本とした測定値の評価規準（血液学検査）

項 目	平均値	評価規準		評価点	評価
ヘモグロビン	試料番号1～3		±0～2.1%	7	A
			±2.2～2.6%	6	B
			±2.7～3.3%	5	
			±3.4～4.1%	4	
			±4.2～5.5%	3	C
			±5.6～6.2%	2	
			±6.3～7.6%	1	D
			±7.7%～	0	
赤血球数	試料番号1～3		±0～2.2%	7	A
			±2.3～2.8%	6	B
			±2.9～3.6%	5	
			±3.7～4.4%	4	
			±4.5～5.9%	3	C
			±6.0～6.6%	2	
			±6.7～8.1%	1	D
			±8.2%～	0	
項 目	平均値	評価規準(いずれか大きい方)		評価点	評価
白血球数	試料番号1～3	±1×10 ²	±0～7.3%	7	A
			±7.4～9.1%	6	B
			±9.2～11.7%	5	
			±11.8～14.6%	4	
			±14.7～19.5%	3	C
			±19.6～21.9%	2	
			±22.0～26.8%	1	D
			±26.9%～	0	
項 目	平均値	評価規準		評価点	評価
ヘマトクリット値	試料番号1～3		±0～4.1%	7	A
			±4.2～5.2%	6	B
			±5.3～6.7%	5	
			±6.8～8.2%	4	
			±8.3～11.0%	3	C
			±11.1～12.3%	2	
			±12.4～15.2%	1	D
			±15.3%～	0	
血小板数	試料番号1～3		±0～6.7%	7	A
			±6.8～8.4%	6	B
			±8.5～10.8%	5	
			±10.9～13.4%	4	
			±13.5～17.9%	3	C
			±18.0～20.1%	2	
			±20.2～24.6%	1	D
			±24.7%～	0	
平均赤血球容積	試料番号1～3		±0～2.1%	7	A
			±2.2～2.6%	6	B
			±2.7～3.3%	5	
			±3.4～4.1%	4	
			±4.2～5.4%	3	C
			±5.5～6.1%	2	
			±6.2～7.4%	1	D
			±7.5%～	0	

IV. 評価方法

1 平均値評価

前術のとおり、全ての項目で同一測定法群（peer group）の極端値棄却後の平均値を基準濃度とし、評価範囲は生理的変動を基本とした測定値の評価規準に示した評価規準で評価した。ただし、測定原理上同一平均値が得られると判断できる測定法群は、まとめて平均値を計算してその平均値を基準濃度とした。

（1）各試料の評価点および評価

各試料の評価点および評価は、生理的変動を基本とした測定値の評価規準を前ページ（表2-1、表2-2）に示した。

（2）複数試料の評価点

1）8試料（各施設への送付は5試料）の評価点

各試料の評価点を合計し、100点満点に換算した点数をその施設の評価点とした。

5試料の評価点の例：各試料の評価点が3点（A）であった場合は、 $3 \times 5 = 15$ 点で100点満点となる。

評価点合計を100点満点に換算した換算点合計の関係は表3のとおりである。

表3 15点満点の評価点と100点満点換算点对比

評価点合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
換算点合計	6.7	13.3	20.0	26.7	33.3	40.0	46.7	53.3	60.0
評価点合計	10	11	12	13	14	15			
換算点合計	66.7	73.3	80.0	86.7	93.3	100			

2）3試料（各施設への送付は2試料）の評価点

各試料の評価点を合計し、100点満点に換算した換算点をその施設の評価点とした（3試料の評価点の例：各試料の評価点が7点（A）であった場合は、 $7 \times 2 = 14$ 点で100点満点となる。）。

評価点合計を100点満点に換算した換算点合計の関係は表4のとおりである。

表4 14点満点の評価点と100点満点換算点对比

評価点合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
換算点合計	7.1	14.3	21.4	28.6	35.7	42.9	50.0	57.1	64.3
評価点合計	10	11	12	13	14				
換算点合計	71.4	78.6	85.7	92.9	100				

3) 尿検査の評価

尿糖半定量、尿蛋白半定量および参考項目である尿潜血半定量の評価方法は従来どおりであるが、その内容は「V. 各論的考察の3. 尿検査」の項を参照されたい。

2 解析値評価

段階的に混合した試料 5 試料を送付している項目については、従来通り測定値評価に加えて、試料濃度に対する直線性、各試料間の関係、精密度などの解析値による評価を行った。

ただし、送付した試料数が 5 試料未満では解析値評価ができないため、HDL コレステロール、LDL コレステロール、ヘモグロビン A1c、ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数は、解析値評価は行わず、測定値評価のみとした。

(1) 解析値評価の種類と計算

各施設の全測定結果 (5 試料) について、施設別、項目別に以下の 5 種類の計算を行った。

1. 方向係数 $Y = a + bX$ の b (以下これを回収率という)
2. ばらつきの程度(再現性) ($\sqrt{V_E}$)
3. 測定値を含む確率楕円の長軸の傾きの正切 ($\tan\theta$)
4. パフォーマンス・インデックス1 (PI-1)
5. パフォーマンス・インデックス2 (PI-2)

(2) 解析値評価の解説

1) 回帰分析

試料濃度を X_i 、測定値を Y_i とすると、試料数から 5 組の変数ができる。

いま X を指定変数、 Y を従属変数とすると、

$$\text{回帰直線} \quad Y = a + bX$$

を求めることができる。測定値が全て平均値と一致した場合には

$$\text{回帰式は} \quad Y = 1.00X$$

となるが、実際には平均値と測定値の間に差があるため、

$$Y = a + bX \text{ という形になる。}$$

したがって、この方向係数、すなわち b によって比例系統誤差 (濃度に関係なく一定比率で生じている誤差) を推定できる。そこで、 b を回収率として評価すると、 b が 1.00 に近いほど評価点が高くなる。

一方、回帰直線が Y 軸と交わる切片 a によって一定系統誤差 (濃度に関係なく一定の大きさで生じる誤差) が推定でき、 a の値が 0 から大きくずれていると、測定値に一定の大きさでかたよりが生じていることになるので、 a でも評価できる。しかし、測定値に対する評価を試料ごとに行っているため、 a については評価項目としてとりあげていない。

また、回帰分析に対する分散分析を行って、再現性 ($\sqrt{V_E}$) を求めると、この値が小さいほど評価点が高くなる。

2) 方向係数 (回収率) b

回帰分析の手順にしたがって、次式により、方向係数 b を求め、これを回収率とした。

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

3) 再現性 $\sqrt{V_E}$

測定値 Y_i の変動 (全変動 SO) は、指定変動である平均値の変動 (回帰による変動 SR) と、測定誤差による変動 (回帰からの変動 SE) とを含んでいる。測定誤差による変動は直接求めることはできないが、全変動 SO から、回帰による SR を差し引いたものとして求めることができる。

$$\text{全 変 動} \quad \text{-----} \quad SO = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\text{回帰による変動} \quad \text{-----} \quad SR = b^2 \sum (X_i - \bar{X})^2$$

であるので、

$$\text{回帰からの変動} \quad \text{-----} \quad SE = SO - SR$$

となり、これによって測定誤差による変動を求めることができる。

この SE を自由度 ($n-2$) で割ったものの平方根 $\sqrt{V_E}$ を再現性としたが、これは σ_y x として表されたり、回帰直線に関する標準偏差ともいわれているものである。

$\sqrt{V_E}$ の値が小さければ小さいほど評価点はよくなる。この値は平均値の値によっても変わることから、できるだけ同じ条件で評価できるように、 $\sqrt{V_E}$ の評価に当っては

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum \chi_i^2}$$

に定数を掛けた数値を区切り値とした。

4) $\tan\theta$ (確率楕円の長軸の傾き角の正切)

回帰直線は、測定値群から最小2乗法によって求められるものである。測定値をグラフ上にプロットしてみると、それらの点は当然回帰直線の両側にばらついている。それから、それらの測定値を含む確率楕円を求めることができる。理想的な場合には、この確率楕円のふくらみはなくなり、回帰直線と一致するはずである。しかし、測定値のばらつきが大きくなると、このふくらみが大きくなり、さらに楕円の長軸の方向も回帰直線の方から離れてくる。

したがって、この確率楕円の長軸の傾き角によって測定のばらつきを知ることができる。実際には次式を用いて、長軸の傾き角の正切 ($\tan\theta$) によってばらつきを調べている。

$\tan\theta$ は、次式により求めた（土屋、杉田、桜井 産業医学、247, 20 1978）。

$$\tan\theta = \frac{-(\sigma^2 x - \sigma^2 y) + \sqrt{(\sigma^2 x - \sigma^2 y)^2 + 4\sigma^2 xy}}{2\sigma xy}$$

$\sigma^2 x$ 、 $\sigma^2 y$ は平均値 $\bar{X}_i$ 、測定値 Y_i の分散、 σxy は共分散で、 X_i 、 Y_i の変動（平均からの差の平方和）を自由度（ $n-1$ ）で割ったものであるが、上式で明らかのように、変動そのもので計算しても同じ結果が得られるので、変動そのもので計算した。

$\tan\theta$ による評価：

実際には測定結果一覧表から、 $\tan\theta$ の値を求めると、ほとんどの場合回収率 b の値に一致しているか、それと近い値であるが、 $\sqrt{V_E}$ の値が大きくなればなるほど、2つの間の差が大きくなる。そこで回収率は、方向係数 b とこの $\tan\theta$ の値とを合わせて総合評価することとした。

5) パフォーマンス・インデックス

Performance Index (PI) は、誤差（測定値と平均値の差）の絶対値と、平均値の比で表したもので、次の2つの計算式から求める。

$$PI-1 = \frac{\sum |Y_i - X_i|}{\sum X_i}$$

$$PI-2 = \frac{1}{n} \sum \frac{|Y_i - X_i|}{X_i}$$

PI-1は、各調査項目の5試料全部の、各平均値と測定値との間の差の絶対値の合計と、平均値の合計との比であり、PI-2はそれぞれの試料ごとの平均値と測定値との間の差の絶対値と、平均値との比を求め、5試料についての平均を求めたものである。

以上から、測定項目ごとの平均値が同程度であれば、いずれのPIも、ほぼ同じ値になるが、平均値が低濃度から高濃度までの広い範囲にわたっている場合には、PI-1とPI-2の間には、差が生じることがある。

PIは測定誤差の絶対値と、平均値との間の比を表す値であるので、当然PI値が小さければ小さい程、評価点は高くなり、PIの値が0.1以下であれば、信頼度が非常に高いと考えてよい。

(3) 評価点

5種類の解析値評価法のそれぞれについて全施設の解析値の2SD以内をA、3SD以内をB、4SD以内をC、これを超えるものをDとした。なお、配点は平均値評価と同じである。5種類の解析評価法全てが評価Aであれば、合計15点となる。これを100点満点に換算して解析値評価点とする。

評価基準を表5に、各解析パラメータを表6に示す。

表5 評価規準(1～6)の評価点と評価

		評価点	評価
範囲1	平均+4×標準偏差	3	A
範囲2	平均+3×標準偏差		
範囲3	平均+2×標準偏差	2	B
範囲4	平均+2×標準偏差	2	
範囲5	平均-3×標準偏差	1	C
範囲6	平均-4×標準偏差	1	
範囲4以上範囲3以下		3	A
範囲3より大きく範囲2以下		2	
範囲5以上範囲4より小さい		2	B
範囲2より大きく範囲1以下		1	
範囲6以上範囲5より小さい		1	C
範囲1より大きいもしくは範囲6より小さい		0	

表6 解析パラメーター

検査項目	測定法	区分	y切片	回収率	再現性	$\tan \theta$	PI1	PI2
1 総コレステロール	コレステロール酸化酵素法・ 脱水素酵素法	平均値	0.084399556	1.000560517	0.528939599	1.000172136	0.006724567	0.006733792
		標準偏差	1.787014187	0.013833958	0.314573721	0.017072831	0.006074227	0.006110392
2 中性脂肪	酵素UV法・ 比色法グリセロールを消去する方法	平均値	0.041747633	0.999739724	0.512104955	0.999936306	0.016124857	0.015631006
		標準偏差	1.641044248	0.035047946	0.263953105	0.03502396	0.012886189	0.012286257
3 AST	標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	0.023855526	0.999700429	0.439686101	0.999745633	0.008548816	0.010285255
		標準偏差	0.715398365	0.0109344	0.219510185	0.010937608	0.006760371	0.008018258
4 ALT	標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	-0.016270306	1.000925725	0.428500573	1.000982761	0.009722398	0.01198257
		標準偏差	0.559247489	0.014134557	0.204202878	0.014129211	0.008765325	0.008966522
5 γ -GT	JSCC標準化対応法	平均値	0.040880847	0.99868419	0.421276656	0.998843599	0.008552272	0.009373624
		標準偏差	0.766191801	0.013716444	0.240223858	0.013431047	0.007357229	0.007278019
6 血糖	ブドウ糖酸化酵素電極法/ヘキソナーゼ・ UV法/ブドウ糖脱水素酵素法	平均値	-0.001291955	1.001067956	0.488060629	1.001138377	0.006426559	0.006467863
		標準偏差	1.119334329	0.010266462	0.246990233	0.010263681	0.004953067	0.005041671
7 尿酸	ウリカーゼ・ヘルオキナーゼ法	平均値	-0.010038138	1.000983869	0.033555907	1.001835086	0.006630777	0.006839285
		標準偏差	0.164964529	0.026028289	0.012218635	0.022718154	0.004266446	0.004723715
8 クレアチニン	酵素法	平均値	-0.006558083	1.002013118	0.011252549	1.002097968	0.00844328	0.009471006
		標準偏差	0.034560476	0.012465443	0.006569267	0.012271254	0.005601519	0.006306971

3. 総合点評価

項目別に各施設の測定値評価点、解析値評価点を合計し、100点満点換算して総合評価点とした。

各施設に送付された評価点一覧票には、調査項目、項目ごとの測定方法（コード番号）、試料ごとの評価に用いた基準濃度である平均値、その施設の測定値、試料No.、別測定評価（A～D）、測定値評価点（換算点合計）、解析値評価点（換算点合計）、総合評価点（換算点合計）、過去3回の総合評価点を記入している。

V. 各論的考察

【臨床化学検査】

はじめに

臨床化学検査（参考調査項目も含めて）は、日本医師会臨床検査精度管理調査にあわせて、各調査項目について検量用試料（キャリブレータ）の種類（ただし酵素項目は検量法、HbA1c については標準液および検量方法の種類）の調査、およびトレーサビリティの確認に利用した標準品（ただし HbA1c、LDL コレステロールは除く）の調査を行った。

さらに本調査では、データ解析の参考とするため使用したキットの正式名称を省略しないで記入していただいている。

図 1 は酵素を除く 7 項目の検量用試料（キャリブレータ）の使用比率を第 22 回から第 24 回の 3 年間について 100% 積み上げグラフで示し、同様に図 2 は酵素項目における検量法の使用比率を同 3 年間について示した。

図 3 は酵素を含む 8 項目のトレーサビリティ確認における標準品使用比率を同 3 年間について 100% 積み上げグラフで示した。

表 7 は HbA1c の標準液および検量方法の種類について同様に過去 3 年間について施設数で示した。

平成 24 年度（第 21 回）調査までは、これらの基本データは外部受託機関が複数の施設から検査を受託している例があり、そのためそれらの数が重複して加算され、適切な比率を示さなかった。

各外部受託機関は複数の健診施設から受託していても、同一分類に属するものはそれぞれ 1 件として計算していたものを、平成 25 年度（第 22 回）からはそれぞれ独立したデータとして扱うのが良いとの考えから、施設単位での集計方法に変更した。

なお、結果の詳細については、各項目の各論においてそれぞれ述べることにする。

また、5 施設以下で評価せずとした対象の中で低評価だった施設および、試料取り違い等により原因が明らかであった施設を除き、臨床化学検査、血液学検査、尿検査ともに是正報告請求を行っている。

27 年度は 31 施設に是正報告請求を行い未回答は 6 施設であった。

是正報告の中に、単純なデータの記入・転記ミスとの回答が 8 施設より報告されたが、健診機関として頻度が多いと判断する。

日常の報告様式と異なるとはいえ、このようなことが生じない再発防止体制の整備を強くお願いしたい。

もちろん、いうまでもないが精度管理試料の取り違いは、日常の検査でも生じる可能性を秘めており、絶対にあってはならないことである。

回答された中には、精度管理調査回答票に外部委託先が誤った数値を入力したという事例があったが、検査業務を外部委託する場合であっても、結果の報告は委託元に責任があることを十分認識していただきたい。

検査実務以外で生じる問題は日常でも生じやすいことから、各施設は検査前および検査後においてもしっかり管理いただき、適切な健診サービスが提供できるよう願います。

図1 検量用(キャリブレーション)の種類

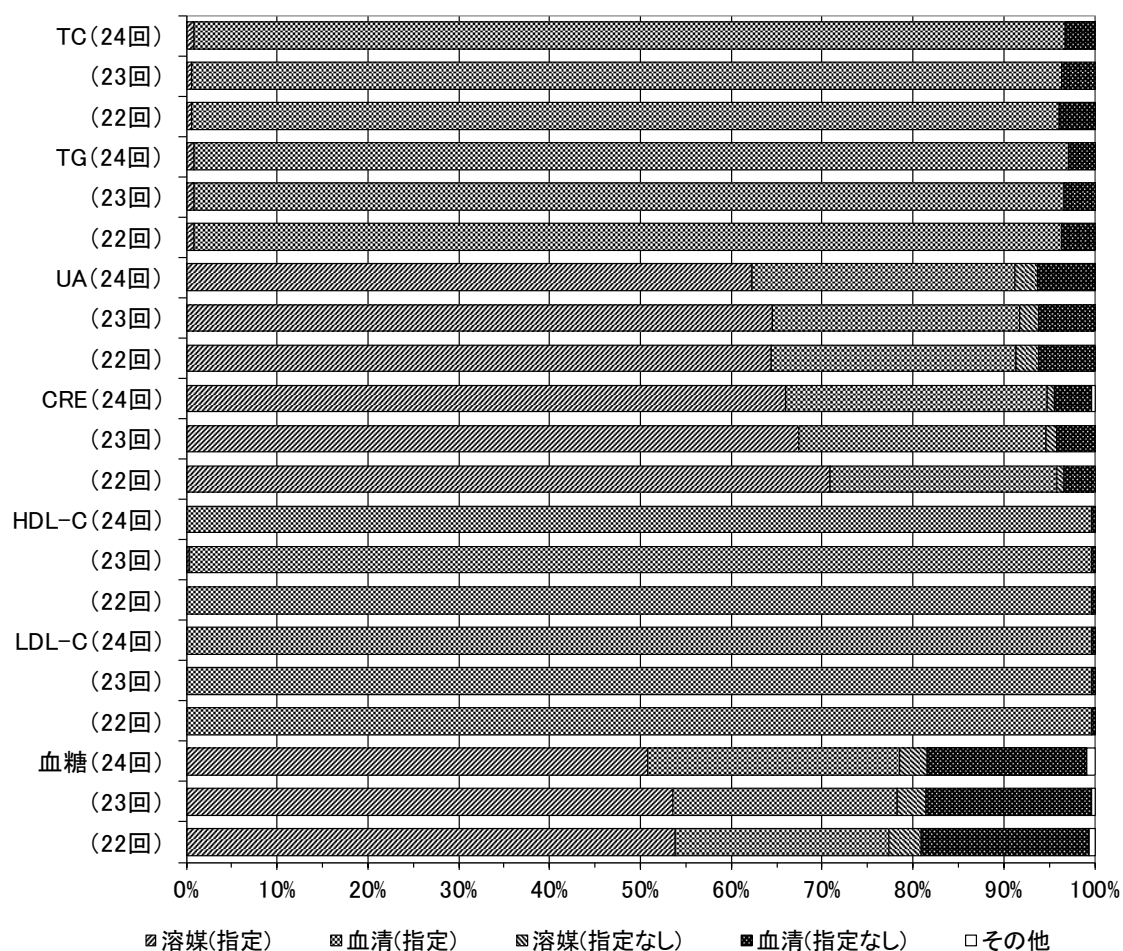


図2 酵素項目における検量法の使用比率

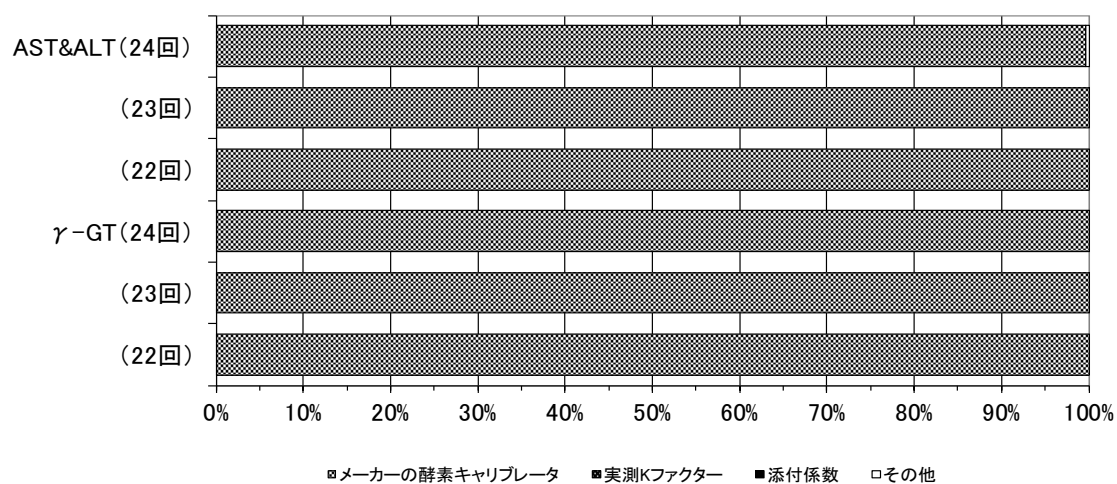


図3 トレーサビリティの確認における標準品の使用比率

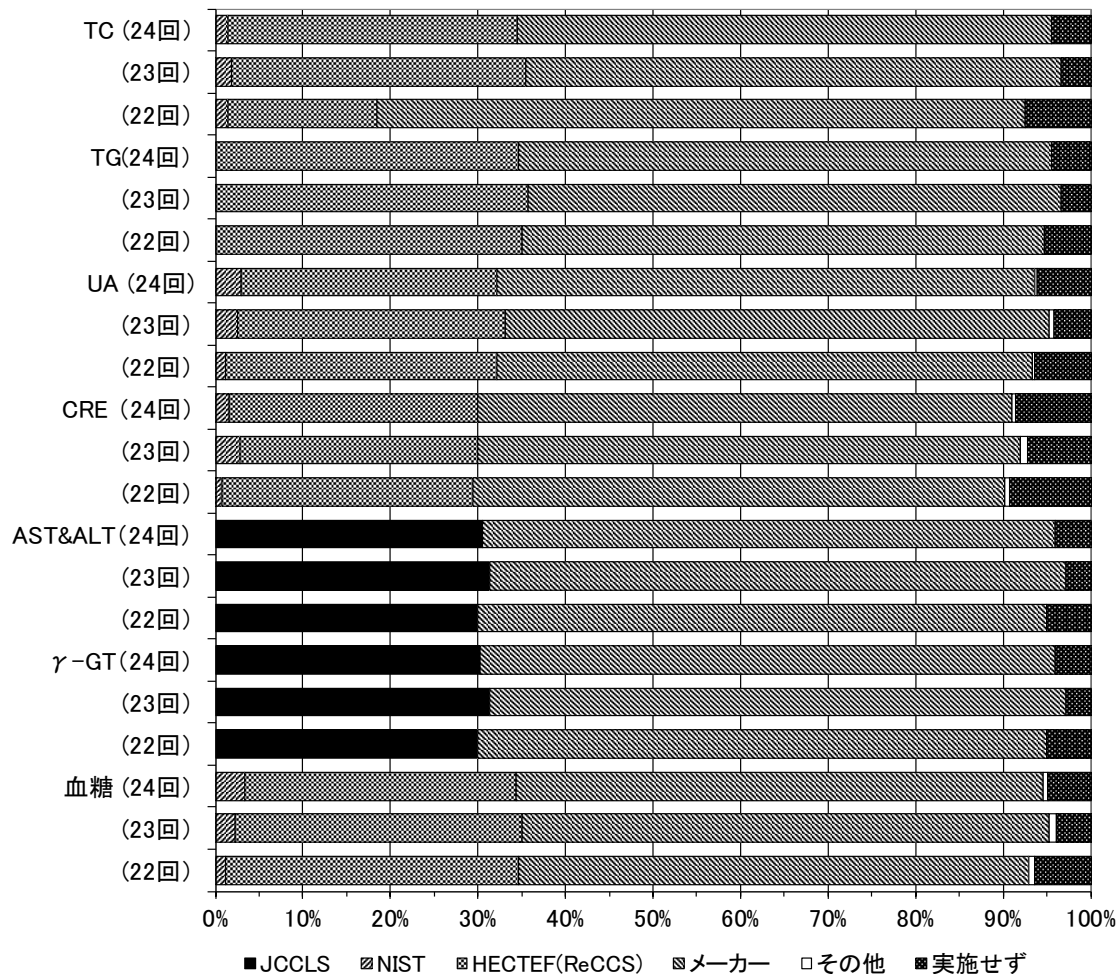


表 7 HbA_{1c}標準液、検量方法の種類(機関数)

標準液、検量方法の種類	HPLC法(不安定分画除去)			免疫学的方法			酵素法		
	第24回調査	第23回調査	第22回調査	第24回調査	第23回調査	第22回調査	第24回調査	第23回調査	第22回調査
指定表示値(そのまま使用)	100	99	103	151	150	162	111	107	92
指定表示値(変更して使用)	0	1	0	0	0	0	0	1	0
指定以外表示値(そのまま使用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定以外表示値(変更して使用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自家製標準液	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装置の係数(そのまま使用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装置の係数(補正して使用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機関数合計	100	100	103	151	150	162	111	108	92

第24回調査における図表に関する説明

1. 外部機関は複数の機関から受注している例があるが、すべての参加機関をそれぞれ独立した数として集計している。
2. HDL-Cは試薬ごとに評価を行っており、試薬によるトレーサビリティの確認ができない場合があるので、例年にならってトレーサビリティの図には含めなかった。LDL-Cは、トレーサビリティの調査は行っていないのでトレーサビリティの図には含めなかった。
3. HbA_{1c}は例年にならって機関数で表現した。ただし、今回(第24回)より免疫学的方法と酵素法を分けて集計した。

1. 総コレステロール

総コレステロールの測定には363施設が参加した。例年より3施設増え、例年の平均的な参加施設数であった。参加施設の内訳は自施設測定数が156件（42.98 %）、外部施設測定数が207件（57.02 %）である。

測定方法の分類はコレステロール酸化酵素法が自施設測定で144施設（39.7 %）、外部施設測定では182施設（50.1 %）、コレステロール脱水素酵素法では自施設測定で11施設（3.0%）、外部施設測定では25施設（6.9 %）であった。その他にドライケミストリー法ビトロス（オーソ）が1施設（0.3 %）あった。コレステロール酸化酵素法が全体の89.8 %を占め、測定方法の分類もこれまでとほぼ同様で変化はみられなかった。なお、今年もドライケミストリー法での参加施設数は1施設で、従来からの評価方法に従い、5施設以下の測定法（または測定試薬）は統計的意義が乏しくなり「評価せず」としている。

測定値の濃度範囲は試料1が平均値で117.98 mg/dL、試料8では203.90 mg/dLで昨年の濃度範囲（91.16 mg/dL～202.36 mg/dL）、一昨年の濃度範囲（82.45～220.98 mg/dL）に比べ、狭められていた。総コレステロール測定では低濃度域から約13 mg/dLの間隔で濃度が分布して、測定の直線性が確認できた。できれば、一昨年のような基準範囲をほぼ網羅する濃度範囲の試料の提供が望まれた。

試料1～8の標準偏差は1.07～1.99 mg/dLでその変動係数は0.82～1.06（%）で、昨年に比べるとバラツキがみられた。

検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は製造販売元指定の血清ベースのものが348施設（95.9 %）で最も多く使用され、その他に溶媒ベースのものが3施設（0.8 %）、製造販売元指定以外の血清ベースのものが12施設（3.3 %）であった。昨年に比べて、製造販売元指定の血清ベースのものを使用している施設が3施設増加し、また、製造販売元指定以外の血清ベースを使用している施設は僅かではあるが1施設減少した。

トレーサビリティの確認はNISTの標準品を利用しているのが5施設（1.4 %）、ReCCSの標準品が120施設（33.1 %）、企業の標準品が222施設（61.2 %）、実施していない施設が16施設（4.4 %）であった。企業の標準品を用いる施設が昨年〔220施設（61.1 %）〕、一昨年〔210施設（59.2 %）〕に比べて年々増加し、トレーサビリティを確認していない施設が昨年〔12施設（3.3 %）〕より4施設増加したが、一昨年〔18施設（5.1 %）〕、さらに前年〔26施設（7.1 %）〕に比べて減少した。

トレーサビリティの確認作業は、関連学会の指導や精度管理調査報告会の説明などによって、現在では多くの施設の精度管理業務として実施が当然になってきている。すべての施設において、年間に1から2回程度、“企業の標準品”以上で確認されることが望まれる。

今回の調査結果の総合評価点ランク別施設数は90点以上が349施設（構成比：96.1%、昨年94.7%、一昨年94.1%）、80点以上～90点未満が8施設（2.2%、昨年3.3%、一昨年2.8%）、70点以上～80点未満は0施設（0%、昨年1.4 %、一昨年1.7 %）、60点以上～70点未満は0施設（0 %、昨年0.3 %、一昨年0.8 %）、60点未満が6施設（1.7 %、昨年0.3 %、一昨年0.6 %）であった。参加数が3施設増加したが、90点以上の評価点を得た施設数が8施設増加し、よって構成比も僅かであるが上昇している。60点以上の他の点数

の分布も良好であった。しかし、60点未満の施設が昨年の1施設から6施設に増加した。

これらの施設の結果からは、測定試料の取り扱い、測定結果の登録などの間違いがあったかと判断される。昨年までは緩やかであるが、全体に施設の評価点が向上してきていたが、今回は残念である。

日常業務で精度管理が正しく実施・維持されて、高い評価点を得た施設は引き続き努力していただき、評価点が低く、是正する内容がみられた施設には改善を求め、なお一層の努力が求められる。

2. 中性脂肪

中性脂肪の測定には総コレステロールと同様に363施設の参加で、昨年より、3施設ほど増加した。参加施設数の内訳は自施設測定が156施設（42.98 %）、外部施設測定が201施設（57.02 %）である。

測定方法の分類は酵素UV法（グリセロールを消去する方法）が自施設測定で5施設（1.4 %）、外部施設測定では3施設（0.8 %）で、酵素比色法（グリセロールを消去する方法）は自施設測定で150施設（41.3 %）、外部施設測定では204施設（56.2 %）で、ドライケミストリー法ビトロス（オーソ）が自施設測定で1施設（0.3 %）であった。酵素比色法（グリセロールを消去する方法）が自施設測定と外部施設測定を合わせて97.5 %を占め、これまでと同様に日常検査での中性脂肪の主要な測定方法に採用されていた。測定方法の分類もこれまでとほぼ同様であり変化は無かった。今年もドライケミストリー法での参加施設数は1施設で、評価方法に従って、5施設以下の測定法（または測定試薬）は統計的意義が乏しくなり、「評価せず」とした。

測定値の濃度範囲は試料1が平均値で46.65 mg/dL、試料8では115.06 mg/dLで、総コレステロールと同様に昨年の濃度範囲（46.37～120.87 mg/dL）、一昨年の濃度範囲（45.75～122.75 mg/dL）に比べ、やや狭められていた。中性脂肪は低濃度域から約10 mg/dLの間隔で濃度が分布して、測定の直線性も確認できた。コレステロールと同様に昨年、一昨年のような基準範囲の下限濃度域から臨床判断値の上限濃度域付近をほぼ網羅する濃度範囲の試料の提供が望まれた。

試料1～8の標準偏差は0.99～3.10 mg/dLで、変動係数は1.74～2.70（%）で、コレステロールと同様に昨年に比べ、バラツキがみられた。

検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は製造販売元指定の血清ベースを使用しているのが350施設（96.4 %）で最も多く、溶媒ベースが3施設（0.8 %）で、製造販売元指定以外の血清ベースは10施設（2.8 %）であった。これまでと同様にすべての施設において測定試薬で最適な関係にある製造販売元指定の血清ベースの検量用試料を使用することが望まれた。

トレーサビリティの確認はReCCSの標準品を使用しているのが126施設（34.7 %）、企業の標準品は221施設（60.9 %）、実施していない施設が16施設（4.4 %）であった。トレーサビリティの確認はReCCSの標準品と企業の標準品を合わせて、95.6 %の施設で実施されていて、昨年〔348施設（96.6 %）〕とほぼ同様に推移していた。

トレーサビリティの確認を実施していない施設が、昨年〔12施設（3.3 %）〕より4施

設増加したが、一昨年〔19施設（5.3 %）〕に比べて減少した。総コレステロールと同様、トレーサビリティの確認作業は施設の精度管理業務として実施が当然となってきた。すべての施設において、年間に1から2回程度、“企業の標準品”以上で確認することが望まれた。

今回の調査結果の総合評価点ランク別施設数は90点以上が348施設（構成比：95.9 %、昨年91.1 %、一昨年95.2 %、その前92.9 %）、80点以上～90点未満が6施設（1.7%、昨年2.8 %、一昨年2.5 %、その前3.3 %）、70点以上～80点未満が2施設（0.6%、昨年4.2 %、一昨年1.1 %、その前1.4 %）、60点以上～70点未満が3施設（0.8 %、昨年1.7 %、一昨年0.6 %、その前1.6 %）、60点未満が4施設（1.1 %、昨年0.3 %、一昨年0.6 %、その前0.8 %）であった。90点以上の評価点の施設が20施設（328→348）増加し、80点以上～90点未満が4施設（10→6）減少し、70点以上～80点未満が13施設（15→2）減少し、60点以上～70点未満の施設が3施設（6→3）減少した。これらの結果から全体的には良好な方向に向かっていることが判断できた。しかし、60点未満の施設は4施設（1→4）に増加した。これらの施設の結果からは、コレステロールと同様に測定試料の取り扱い、測定結果の登録などの間違いがあったかと判断される。

これまでと同様なまとめであるが、日常業務で精度管理が正しく実施・維持されて、高い評価点を得た施設は引き続き努力していただき、評価点が低く、是正する内容がみられる施設には改善を求め、なお一層の努力が求められる。

3. 尿酸

尿酸測定には363施設が参加した。昨年に比べ3施設増加した。内訳は自施設測定が156、外部施設測定が207施設であった。全体での測定法別の分類は、ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法が99.7%（362施設）を占め、内訳は、自施設測定では99.4%（155施設）、外部施設測定では100%（207施設）がこの方法で検査を実施していた。その他の測定法としてドライケミストリー法ビストロ（オーソ）が自施設測定で1施設あった。なお、施設数5以下の測定法（または測定試薬）であるドライケミストリー法で得られた測定結果については統計量の統計学的意義が乏しいことから「評価せず」とした。

ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法による試料1から8までの平均値は、5.23～8.12 mg/dLの濃度範囲で、試料4と試料5の濃度差は0.27 mg/dLと接近しているが、他の試料については低濃度から高濃度までの濃度幅は2.97mg/dLで、平均0.44 mg/ dL程度の濃度勾配から測定の直線性が確認できた。

各試料の標準偏差は、0.05～0.07 mg/dLの範囲であり、また、全濃度域の変動係数も0.77～1.36%と昨年（0.69～1.35%）と同様に極めて良好な評価結果であった。

各施設が用いる検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は、製造販売元指定の溶媒ベースが62.2%（226施設）と最も多く、製造販売元指定の血清ベース使用が28.1%（105施設）、製造販売元指定以外の血清ベース使用が6.3%（23施設）、製造販売元指定以外の溶媒ベース使用施設が2.4%（9施設）の順であった。キャリブレータ使用比率は、製造販売元指定の溶媒または血清ベースの製品の比率は90.3%（331施設）となった。

トレーサビリティの確認は、企業の標準品が61.2%（223施設）で最多であり、次に

ReCCSの標準品が29.2%（106施設）、NISTの標準品が3.0%（11施設）、その他の標準物質が0.3%（1施設）の順で参加施設の93.9%（341施設）がトレーサビリティの確認を実施していた。各施設で日常検査時のトレーサビリティの意義がよく理解され、精度保証の確立に向けて取り組みが一層浸透した結果と考えられる。各施設は精度保証の確立にむけてさらに努力していただきたい。

調査結果の全施設の平均値、標準偏差から集計した「平均値評価」と「解析値評価」から求めた「総合評価点ランク別施設数」は、自施設測定で90点以上は145施設（92.9%、昨年88.7%）、60点以上90点未満は10施設（6.4%、昨年9.4%）、60点未満は1施設（0.6%、昨年1.9%）であった。総合評価点が60点未満の自施設測定は、昨年の3施設から今回は1施設に減少した。昨年60未満の3施設は、今回いずれも80点以上の評価点を得て、昨年の是正処置が有効に機能して改善が図られたことを確認した。今回、誤差が見受けられた1施設は、原因の究明と改善を図っていただきたい。

外部施設測定で90点以上は200施設（96.6%、昨年97.5%）、60点以上90点未満は5施設（2.4%、昨年2.0%）、60点未満が2施設（1.0%、昨年0.5%）であった。総合評価点が60点未満の外部施設測定は、昨年の1施設から今回は2施設に増加した。なお、昨年60未満の1施設は、100点の評価点を得て、昨年の是正処置が有効に機能して改善が図られたことを確認した。今回、誤差が見受けられた2施設は、誤差原因の究明と改善を図っていただきたい。

尿酸測定の試料については、昨年と同じく各試料間の濃度勾配が一定に保たれており、調査試料の濃度範囲も適切であった。今回の「総合評価点」は、90点以上を有した施設が全体の95.0%を占め、昨年の93.6%より増加した。また、トレーサビリティの確認を341施設（93.9%）が実施している。未実施の22施設は早急にトレーサビリティを確認する必要がある。測定体系のトレーサビリティ確認に注意を払い、日常検査において適正なキャリブレーションを実行していることが検査精度を維持・向上させるために重要である。

4. クレアチニン

クレアチニンには364施設が参加した。昨年に比べ4施設増加した。内訳は自施設測定が157、外部施設測定207施設であった。全体での測定法別の分類は酵素法が99.7%（362施設）を占め、内訳は、自施設測定では98.7%（155施設）、外部施設測定では100%（207施設）がこの方法で実施していた。その他の測定法としてドライケミストリー法ビストロ（オーソ）、富士ドライケム（富士フィルム）が自施設測定で2施設あった。なお、施設数5以下の測定法（または測定試薬）であるドライケミストリー法で得られた測定結果については統計量の統計学的意義が乏しいことから「評価せず」とした。

酵素法による試料1から8までの平均値は、1.11～4.82mg/dLの濃度範囲で、試料4と試料5の濃度差は0.38mg/dLと接近しているが、他の試料については低濃度域から高濃度域までの濃度幅は3.69 mg/dLで、平均0.55mg/dL程度の濃度勾配から測定の直線性が確認できた。

各試料の標準偏差は、0.02～0.05 mg/dLの範囲であり、調査項目の中でも低値を取る項目である。また、全濃度域のCVも0.81～1.81%と前回（0.63～1.34%）と同様に良好な

評価結果であった。

各施設で用いた検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は、製造販売元指定溶媒ベース使用が69.5%（240施設）と最も多く、製造販売元指定の血清ベース使用が28.9%（105施設）、製造販売元指定以外の血清ベース使用が4.1%（15施設）、製造販売元指定以外の溶媒使用施設が0.8%（3施設）、その他が0.3%（1施設）の順であった。キャリブレータの使用比率は、製造販売元指定の溶媒または血清ベースの製品の比率は98.4%（345施設）となった。

トレーサビリティの確認を実施している施設は91.5%（333施設）で、その内訳は企業の標準品が61.0%（222施設）であり、次にReCCSの標準品が28.3%（103施設）、NISTの標準品が1.7%（6施設）、その他の標準品が0.5%（2施設）であった。なお、トレーサビリティを確認している施設数は、18年度（37.8%）、19年度（65.2%）、20年度（78.7%）、21年度（80.6%）、22年度（85.7%）、23年度（86.4%）と経年的に着実に増えていたが、24年度は81.5%と減少したが25年度以降は増加している。各施設で日常検査時のトレーサビリティの意義がよく理解され、精度保証の確立に向けて取り組みが一層浸透した結果と考えられる。引き続き各施設は精度保証の確立にむけて努力していただきたい。

調査結果の全施設の平均値、標準偏差から集計した「平均値評価」と「解析値評価」から求めた「総合評価点ランク別施設数」は、自施設測定で90点以上の施設は151施設（96.2%、昨年90.6%）、60点以上90点未満は5施設（3.2%、昨年8.2%）、60点未満は1施設（0.6%、昨年1.3%）であった。総合評価点が60点未満の自施設測定は、昨年の2施設から今回は1施設に減少した。昨年60未満の2施設は、今回80点以上の評価点を得て、是正処置が有効に機能して改善が図られたことを確認した。今回、誤差が見受けられた1施設は、誤差原因の究明と改善を図っていただきたい。

外部施設測定で90点以上は202施設（97.6%、昨年91.0%）、60点以上90点未満は3施設（1.5%、昨年6.0%）、60点未満が2施設（1.0%、昨年3.0%）であった。総合評価点が60点未満の自施設測定は、昨年の6施設から大幅に減少した。なお、昨年60未満の6施設は、いずれも90点以上の評価点を得て、是正処置が有効に機能して改善が図られたことを確認した。今回、誤差が見受けられた2施設は、誤差原因の究明と改善を図っていただきたい。

クレアチニン測定の試料については、昨年と同じく各試料間の濃度勾配が一定に保たれており、調査試料の濃度範囲も適切であった。今回の「総合評価点」は、90点以上を有した施設が全体の97.0%を占め、昨年の90.8%と比べ増加した。また、トレーサビリティの確認を334施設（91.5%）が実施している。未実施の31施設は早急にトレーサビリティを確認する必要がある。

5. AST、ALT

JSCC標準化対応法を使用している施設は全参加364施設中362施設（99.5%）で、それ以外はドライケミストリー法ビトロスJとドライケミストリー法富士ドライケムの各1施設であった。これは日本医師会臨床検査精度管理調査におけるASTの94.3%、ALTの

94.4%をはるかに上回っている。

今回の試料活性はAST（20~142U/L）、ALT（17~120U/L）でASTは低活性試料、高活性試料共に前回より活性値が高くなっており、ALTでは低活性試料の活性値がやや高く、高活性試料の活性値が低くなっている。JSCC標準化対応法における同程度の活性試料の標準偏差を前回と比較すると、ASTは縮小、ALTはやや拡大している結果であった。また日本医師会臨床検査精度管理調査における近似した活性試料の1回棄却後の標準偏差と比較すると本調査の標準偏差はAST、ALT共にやや小さい結果であった。

測定値の正確さに影響を与える各施設の検量法は、図2から明らかなように企業の酵素キャリブレーションを用いている施設は第22回では100.0%、第23回は100.0%、今回の第24回も99.7%と高い利用率が保たれており、日本医師会臨床検査精度管理調査におけるJSCC標準化対応法での製造業者製品校正物質（製造販売元指定以外を含む）の利用率（99.1%）より上回っていた。

トレーサビリティの確認については図3に示すように、第22回は95.0%、第23回では97.5%、そして今回の第24回では95.9%の施設で行われており、前回より1.6%減少していた。

今回の結果で80点以上の施設は、ASTが自施設で96.1%（前回88.7%）、外部機関で99.0%（前回94.0%）、ALTが自施設で96.8%（前回92.5%）、外部機関で99.5%（前回99.5%）であった。自施設ではAST、ALT共に前回より多くなり、外部機関ではASTは前回より多く、ALTは前回と同じであった。

一方、60点未満の施設はASTが自施設で3施設（前回12施設）、外部機関で1施設（前回4施設）、ALTが自施設で2施設（前回0施設）、外部機関で1施設（前回0施設）となっており、自施設ではASTは前回と比較して9施設減少し、ALTは2施設増加した。また外部機関ではASTは前回と比較して3施設減少し、ALTは1施設増加した。

今回ASTで60点未満だった施設のうち、自施設の1施設と外部機関の1施設は検体の取り違いがあり、総合評価点はそれぞれ0点と6.7点だった。自施設の残り2施設は前回83.3点と100点だった。このうち、1施設ではトレーサビリティの確認を行っているようだが、各施設の測定値と表17の平均値を比較し、今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。また、もう1施設はトレーサビリティの確認を行っていなかった施設であった。是非トレーサビリティの確認を行って改善を図っていただきたい。ALTで60点未満だったのは検体の取り違いがあった自施設の1施設と外部機関の1施設を除いた自施設の1施設であり、前回は93.3点と好成績であった。トレーサビリティの確認を行っているようだが、今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回ASTで60点未満だったのは自施設で12施設、外部機関で4施設だった。このうち、計13施設では今回83.3~100点と改善がみられた。また自2施設は今回不参加となり、改善がなされたか確認できなかった。残り自1施設は今回66.7点と改善がなされたと言える成績ではなく、しかも3回連続して70点未満であった。トレーサビリティの確認を行っているようだが、継続的にどのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

次に解析値評価点に対しての解析では、今回ASTの解析値評価点が60点未満だったのは自施設で6施設（前回15施設）、外部機関で1施設（前回9施設）あり、自施設で9施設、外部機関でも8施設減少していた。検体の取り違いがあった施設を除くと、自1施設は3回連続して60点未満と成績の悪い施設であった。その他の自4施設は前回80～100点であり、このうち2施設は前回100点と好成績であった。解析値評価点が60点未満となる要因は、比例系統誤差によるものが多く占められているが、今回は偶発誤差が発生したと考えられる施設もあった。比例系統誤差がみられる要因は概してキャリブレーションの問題だが、偶発誤差はメンテナンス不良が主な要因となる。今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。また、ALTで解析値評価点が60点未満だったのは自施設で3施設（前回12施設）、外部機関で1施設（前回1施設）あり、自施設で9施設減少し、外部機関では前回と変わりなかった。検体の取り違いがあった施設を除いた自施設の2施設は前回93.3点、100点と好成績であった。共にトレーサビリティの確認を行っているようだが、今回は比例系統誤差がみられており、信頼性の高いデータが得られるように改善を図っていただきたい。

前回解析値評価点がASTで60点未満だったのは自施設では15施設、外部機関は9施設だった。このうち自1施設は今回も含めて3回連続60点未満と改善がなされなかった。また、20施設では80.0～100点と改善がみられ、2施設は今回不参加であった。残りの自1施設は今回66.7点と60点は超えたが、前回と同様に低値傾向であった。トレーサビリティの確認を行っているようだが、継続的にどのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。前回解析値評価点がALTで60点未満だったのは自施設では12施設、外部機関は1施設だった。このうち9施設では80～100点と改善がみられ、2施設は今回不参加であった。残り自2施設は今回共に66.7点と60点は超えたが、完全に改善がなされたとと言える成績ではなかった。さらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

最後に、トレーサビリティの確認を行っていない施設が前回より増加したという問題がある。トレーサビリティの確認を行っていない施設はここ数年減少してきたが、今回確認を行わなかったのは自施設の14施設と6施設増加した。14施設うち8施設は継続的にトレーサビリティの確認を行っていない施設であり、2施設は前回参加していない施設であった。また、前はトレーサビリティの確認を行っていたが、今回確認を行わなかったのは4施設（うち1施設は前回外部機関で参加）だった。評価点の詳細を確認すると、ASTの解析値評価点が前回の100点から今回の66.7点と大きく下げた施設があった。これはトレーサビリティの確認を行わなかったことが原因となった可能性は否定できない。是非とも次回はトレーサビリティの確認を行って、信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

以上の問題点を除き全体的にみると本調査に参加した施設のASTとALT測定の実業水準は高いといえるが、総合評価点成績が良くても解析値評価点が低い施設はさらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

6. γ -GT

JSCC標準化対応法を使用している施設は参加363施設中362施設（99.7%）、それ以外はドライケミストリー法ビトロスJの1施設のみであった。これは日本医師会臨床検査精度管理調査における95.7%を大きく上回っている。

今回の試料活性は30~144U/Lで前回と比較して低活性試料はほぼ同じ、高活性試料で低値となっている。JSCC標準化対応法における同程度の活性試料の標準偏差を前回と比較すると、やや拡大している結果であった。また日本医師会臨床検査精度管理調査における近似した活性試料の評価用標準偏差1回棄却後の標準偏差と比較すると本調査の標準偏差がやや小さい結果であった。

測定値の正確さに影響を与える各施設の検量法は、図2から明らかなように企業の酵素キャリブレーションを用いている施設は第22回では100.0%、第23回は100.0%、今回の第24回も100.0%と高い利用率が保たれており、日本医師会臨床検査精度管理調査におけるJSCC標準化対応法での製造業者製品校正物質（製造販売元指定以外を含む）の利用率（97.6%）より上回っていた。

トレーサビリティの確認については図3に示すように、第22回は95.0%、第23回では97.5%、そして今回の第24回では95.9%の施設で行われており、前回より1.6%減少していた。

今回の結果で80点以上の施設は自施設で96.1%（前回97.5%）、外部機関で99.0%（前回98.5%）と、自施設は前回より少なく、外部機関はやや多くなった。

一方、60点未満だった施設は自施設で3施設（前回0施設）、外部機関で1施設（前回0施設）であり、自施設は前回と比較して3施設増加、外部機関では1施設増加した。このうち、自施設の1施設と外部機関の1施設は検体の取り違いがあり、項目評価点は共に0点だった。自施設の残り2施設は前回80点と100点だった。2施設は共にトレーサビリティの確認を行っているようだが、各施設の測定値と表17の平均値を比較し、今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

次に解析値評価点に対しての解析では、今回60点未満だったのは自施設で5施設（前回4施設）、外部機関は2施設（前回3施設）であり、自施設で1施設増加、外部機関で1施設減少した。検体の取り違いがあった施設を除くと、自施設の4施設と外部機関の1施設であり、このうち3施設は前回100点と好成績であった。残り2施設の前回の評価点は60点、66.7点と低く、前回の測定値は今回と同様に2施設共に高値傾向であった。全施設でトレーサビリティの確認を行っているようだが、大部分の施設で比例系統誤差がみられており、また偶発誤差がみられた施設もあった。今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回解析値評価点が60点未満だったのは自施設で4施設、外部機関で3施設だった。このうち6施設は今回100点と改善が図られた。残り自1施設は73.3点であり、完全に改善がなされたとは言いがたく、さらなる努力を図っていただきたい。

以上の問題点を除き全体的にみると本調査に参加した施設の γ -GT測定の技術水準は高いと言えるが、総合評価点成績が良くても解析値評価点が低い施設はさらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

7. 血糖

血糖測定に参加機関数は364施設（前年360施設）であり、内訳は自施設測定が157施設（前年159施設）、外部機関測定が207施設（前年201施設）であった。全体での測定法別分類は、JSCC勧告法と同一測定原理のヘキソキナーゼ・UV法が89.3%（325施設・前年88.6%）であり、前年と比較し僅かに増加した。測定法別分類は自施設と外部機関で異なり、表19のように自施設ではヘキソキナーゼ・UV法、ブドウ糖酸化酵素電極法、ブドウ糖脱水素酵素法、ドライケミストリー法と4種の方法が用いられていた。外部機関ではヘキソキナーゼ・UV法が97.6%と大部分を占めており、この傾向は前年と同様であった。また測定機器は、日本電子JCA・BMシリーズ54.7%（前年51.9%）、日立ハイテクノロジー20.6%（前年23.9%）、東芝6.0%（前年5.6%）、ベックマン・コールター6.0%（前年5.3%）、エイアンドティー5.2%（前年6.1%）、アダムスグルコース（アークレイファクトリー）3.6%（前年3.6%）、協和メデックス3.3%（前年3.3%）、ビトロス（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス）0.3%（前年0.3%）、富士ドライケム0.3%（前年0.0%）であり、この傾向は前年と同様であった。5施設以下で得られた測定結果については計算値の統計学的意義が乏しいことから、ドライケミストリー法のビトロスと富士ドライケムの結果は「評価せず」とした。

配布試料1~8の濃度は平均値93.0~202.7mg/dLであり、前年の平均値92.7~205.4mg/dLとほぼ同じ範囲であった。測定値標準偏差も前年とほぼ同じであった。糖尿病診断基準の126mg/dLに近い試料3で平均値は125.8mg/dL、標準偏差は1.00 mg/dLであった。特定健康診査・特定保健指導の階層化判定基準の100mg/dLに近い試料2で平均値は109.3mg/dL、標準偏差は0.99 mg/dLであった。平均値±2SDの値は、試料3で123.8~127.8mg/dL、試料2で107.3~111.3mg /dLとなり、測定方法、試薬、機器等による差は小さく、測定値は収束していることが伺われる結果であった。

各施設が採用している測定値の正確さに影響を与える検査用試料(キャリブレーション)の種類は、製造販売元指定の溶媒ベースが50.8%（前年53.6%）と最も多く、次いで製造販売元指定の血清ベースが27.7%（前年24.7%）、製造販売元指定以外の血清ベースが17.6%（前年15.8%）、製造販売元指定以外の溶媒ベースが3.0%（前年5.6%）、磁気カード・バーコードなどのキャリブレーションが0.3%（前年0.0%）、その他が0.5%（前年0.3%）であった。トレーサビリティの確認については、企業の標準品が60.2%（前年60.3%）、ReCCSの標準品が31.0%（前年32.8%）、NISTの標準品が3.3%（前年2.2%）、その他が0.5%（前年0.8%）であり、トレーサビリティ確認を実施していない施設は18施設（4.9%）であり、前年の14施設（3.9%）より増加したことは問題であり、今後は適切なトレーサビリティ確認を実施していただきたい。

血糖測定値の評価は、同一測定法群の極端値（平均値±3SD）棄却後の平均値による測定値評価点と解析値による解析値評価点の平均値を総合評価点としている。今回自施設と外部機関で1施設ずつ極端値があり、極端値棄却後の平均値を評価に用いている。測定値評価点は、平均値を基準濃度とし評価規準は生理的変動を基本とした許容誤差規準を用いる方法で行っている。測定値の正確さの評価を目的とする“望ましい性能” 2.2%を評価規準とし、平均値±0~2.2%をA、±2.3~4.4%をB、±4.5~6.6%をC、±6.7%~をD評

価としている。自施設では総合評価点100点は84.5%（前年68.4%）、80点以上100点未満が12.9%（前年20.9%）、60点以上80点未満が0.6%（前年7.6%）、60点未満は1.9%（前年3.2%）であり前年と比較して大きく改善された。外部機関では総合評価点100点は91.3%（前年90.0%）、80点以上100点未満が7.7%（前年9.0%）、60点以上80点未満が0.5%（前年0.5%）、60点未満が0.5%（前年0.5%）と昨年と同様であった。今年度全体で総合評価点60点未満の4施設のう2施設は極端値で総合評価は0点であり、検体取り違いが考えられた。また他の2施設のうち1施設は今回56.7点であり前年は100点であったので機器のメンテナンス、試薬や標準液管理等を確認していただきたい。また、他の1施設は平成25年度に46.7点、平成26年度は73.3点、今回33.3点であったので測定方法や測定機器を十分に確認していただきたい。昨年度総合評価点が60点未満であった6施設は全て自施設であったが、その内2施設は外部機関に委託になり100点であった。他の3施設は総合評価点が100点になり、1施設は80点と大きく改善がみられた。

以上、本調査参加施設の血糖測定の技術水準は高く、概ね良好であると考えられる。

表8 測定法別分類

	自施設数	割合(%)	外部機関数	割合(%)
HK・UV法	123	78.3	202	97.6
GOD電極法	27	17.2	5	2.4
GDH電極法	5	3.2	0	0.0
ドライケミストリー法	2	1.3	0	0.0
合計	157		207	

8. HDLコレステロール

HDLコレステロールは、メタボリックシンドローム診断に重要な血液検査項目の一つであり、測定にあたっては高い精密度・正確度が要求される。

今回の精度管理調査では、HDLコレステロール項目への全参加数は364施設で、昨年より4施設増えた。その内訳は、自施設での測定が156施設（42.9%）、外部機関への委託測定が208施設（57.1%）であり、昨年より外部機関への委託施設の比率が1.3%増加した。参加施設の測定方法は1施設のみがドライケミストリー法で、他の363施設は沈殿操作を行わない方法（いわゆる直接法）であった。

直接法の内訳は、協和メデックス（メタボリードHDL-C）が183施設（50.3%、うち外部委託102施設）と最も多く、続いて積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジエントHDL、エクセライザHDL）168施設（46.2%、うち外部委託104施設）、和光純薬（LタイプワコーHDL-CM2、同CM3）10施設（2.8%、うち外部委託2施設）、シノテスト（クイックオートネオHDL-C）1施設（自施設のみ）、デンカ生研（HDL-EX N）1施設（自施設のみ）、オーソ（ドライケミストリー法ビトロス）1施設（自施設のみ）であった。

各施設が使用している試薬を以前と比較すると、協和メデックス（メタボリードHDL-

C) が3年前より、177施設、180施設、183施設と微増を続けている。本調査におけるHDLコレステロールの評価は、直接法において試薬別平均値に差が存在することから、試薬別平均値を基準濃度として、それに個人の生理的変動を基本とした評価基準を用いてきた経緯があり、今回も同様な評価法とした。従来、同一メーカーから複数の製品が販売されていたが、ほぼ1社1製品に集約化され、協和メデックス（メタボリードHDL-C）と積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジェントHDL エクセライザHDL）の2試薬の合計が351施設（96.4%）となっている。

今回の精度管理試料（凍結乾燥品）の測定試薬別平均値では、メーカー間差が前年と同様に認められたことから、新鮮血清以外の試料を用いた外部精度管理調査において正確度の確認の困難さは従来と変わらない。日本医師会の精度管理調査報告書でもこの点に配慮して、変動の小さい同一測定試薬群内での評価が行われている。全衛連の精度管理調査においても試薬別評価を行ってきており、今回も同様の評価を行った。例年通り生血清を参考試料として測定し、凍結乾燥試料と試薬別測定値の差を比較した。その結果、積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジェントHDL、エクセライザHDL）と協和メデックス（メタボリードHDL-C）の平均値を比較すると、凍結乾燥品3種類の平均値の差（mg/dl）は3.18、 5.99、 6.17で、生血清2種類の1.72、2.23より明らかに大きな差が認められた。特に、凍結乾燥品では3種類とも前年より差が若干大きくなっていた。

試薬別の変動係数（CV）は積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジェントHDL、エクセライザHDL）が1.05～1.40%、協和メデックス（メタボリードHDL-C）が1.11～1.89%で、両者とも良好な結果であった。参加各施設で使用している検量用試料（キャリブレータ）をみると、全施設において血清ベースキャリブレータが使用されており、1施設以外は試薬製造販売元指定のキャリブレータであった。また、HDLコレステロールでのトレーサビリティの確認は、企業の標準品を使用している施設が最も多く223施設（61.2%）、次いでReCCSの標準品を使用している施設が122施設（33.5%）、実施していない施設が16施設（4.4%）であった。トレーサビリティの確認を行っている施設の比率は一昨年が94.4%で、昨年は96.4%に上昇していたが、今回は若干低下して95.6%となった。

今回の総合評価点で85点以上の施設は351施設（96.4%）であり、その内訳は自施設測定151施設（95.0%）、外部委託測定200施設（100%）であった。また、60点以下は4施設（1.1%）で全て自施設測定であった。前回の60点以下の施設も4施設（自施設測定3、外部委託測定1）であったが、その4施設中2施設は昨年も60点以下であった。全体的には、85点以上の施設数は昨年とほぼ同数であったが、トレーサビリティの確認を行う施設が年々上昇し、昨年は96.4%であったが今回は若干低下して95.6%であった。

今回、総合評価点60点以下の4施設は全てトレーサビリティの確認を実施していることから、偶発誤差や試料の取り扱いについての再調査が必要と思われる。また、外部機関への依頼が57.1%で、昨年より1.3%上昇している状況から、検体採取から測定までの試料の管理を含めた総合的な精度管理の必要性を強く感じる。

9. LDLコレステロール

LDLコレステロールは、平成20年度から開始された厚生労働省の特定健診・特定保健指導に新たに組み入れられた項目であり、その精密度・正確度は保健指導対象者の選定・階層化に重要な関わりをもっている。本精度管理調査では、第17回の調査から評価に組み入れられ、今回で8年目となる。

今回の参加施設数は364施設で、昨年より5施設増加している。その内訳は自施設での測定が156施設（42.9%）で昨年より2施設減少、外部機関への委託測定が208施設（57.1%）で昨年より7施設増加している。参加施設の測定方法は1施設がドライケミストリー法で、他の363施設は全て直接法であった。

直接法の内訳は、協和メデックス（メタボリード LDL-Cが181施設（49.7%、うち外部委託101施設）で最も多く、続いて積水メディカル（コレステストN-LDL Dpタイプ、クオリジェントLDL、エクセライザLDL）166施設（45.6%、うち外部委託103施設）（前回178施設）と最も多く、続いて協和メデックス（メタボリード LDL-C）157施設（43.7%、うち外部委託104施設）、協和メデックス（デタミナーL LDL-C）2施設（0.5%、自施設のみ）、和光純薬（LタイプワコーLDL-CM）11施設（3.0%、外部委託2施設）、シノテスト（クイックオートネオLDL-C）1施設（自施設のみ）、デンカ生研（LDL-EX N）1施設（自施設のみ）、デンカ生研（デュアルCHO T&L）1施設（自施設のみ）となっている。

試薬間差を確認するため5施設以上で使用している試薬について測定値の平均値で比較すると、和光純薬（LタイプワコーLDL-CM）＞積水メディカル（コレステストN-LDL Dpタイプ、クオリジェントLDL、エクセライザLDL）＞協和メデックス（メタボリード LDL-C）の順に高値を示し、この傾向は従来と同様であった。平均値の差(mg/dl)は試料1、2、3で（8.07、10.80、13.95）であった。同様に同時に配布測定した生血清試料2種類の平均値の差（mg/dl）は（3.04、11.09）であり、前回より若干大きめの試薬間差を認めた。

試薬別測定値の標準偏差は前回同様に良好であった。

検量用試料（キャリブレータ）は、1施設を除いて血清ベースキャリブレータが使用されていた。

今回の結果で、総合評価点85点以上は362施設（99.5%）で、前回より2.3%増加した。その内訳は、自施設測定が154施設（98.7%）、外部機関測定が208施設（100%）であった。今回、60点未満の施設は皆無であった。

全体的には全衛連のLDLコレステロール測定は良好な結果であると判断されるが、当初はこの項目のトレーサビリティを確認するための認証標準物質が存在しなかったことから本サーベイではトレーサビリティの実施に関する調査を行っていない。現在は、ReCCSからCDCレファレンス法による値付けのされた認証標準物質JCCRM224-5（ReCCS）が供給されていることから、その利用状況の設問を設けるか検討したい。

平成20年から開始された厚生労働省の特定健診・特定保健指導では、一律の基準で保健指導対象者の選定・階層化を行うため、測定値の共有化が必須である。この点を十分認識して、試薬間差のないLDLコレステロール測定値を目指す必要がある。特に、参加施設数が少ないため評価対象外となっている施設は全体の測定値から自己評価を行って頂き

たい。このように、LDL-Cは試料に起因する測定値の変動要因を抱えている。特に、脂質異常症の検体を測定する際の注意事項など、試薬の添付文書を良く理解することも重要である。

10. HbA1c

HbA1c測定の参加機関数は362施設（前年358施設）であり、内訳は自施設測定が155施設（前年157施設）、外部機関測定が207施設（前年201施設）となり、前年とほぼ同様であった。1試料につき測定施設数が5施設以下の測定法（または測定試薬）については計算値の統計学的意義が乏しいことから「評価対象外」となり、03-3501の酵素法で1施設が該当した。全施設では免疫学的方法が41.7%（前回41.9%）、酵素法が30.7%（前回30.2%）、HPLC法が27.6%（前年27.9%）であった。自施設ではHPLC法が58.1%（前年56.7%）、免疫学的方法が26.5%（前年27.4%）、酵素法が15.5%（前年15.9%）であった。外部機関では免疫学的方法が53.1%（前年53.2%）、酵素法が42.0%（前年41.3%）、HPLC法が4.8%（前年5.5%）であり、自施設、外部機関において前年とほぼ同じであった。

測定法コード02-0401と02-0403（免疫学的方法協和メデックス汎用自動分析装置凍乾品、液状品）を同一群として免疫学的協和（汎用）とし、02-0402と02-0404（免疫学的方法協和メデックスDM-JACKシリーズ凍乾品、液状品）を同一群として免疫学的協和（DM）として評価した。「評価対象外」を除いた測定方法別平均値を表9に示した。

試料1、2、3は凍結乾燥品であり、試料4、5は生血液試料である。測定法の違いによるHbA1c値の分布は、試料1で5.37~5.50%、試料2で6.24~6.69%、試料3は7.47~8.07%、試料4で5.98~6.08%、試料5で5.03~5.20%となり、最大値と最小値の差は試料1で0.13%、試料2で0.45%、試料3で0.60%、試料4で0.11%、試料5で0.17%であった。前年の値は試料1で0.32%、試料2で0.66%、試料3で0.88%であったのと比較すると差が小さくなり、一昨年とほぼ同じであった。生血液試料である試料4、5については昨年と同様であり、測定方法間差は少ないことから、今回の調査試料1、2、3は凍結乾燥品であり、この試料の安定化剤が測定方法によっては反応を阻害することが知られており、このことが試料1~3の方法間差を大きくしている要因の一つであると考えられる。校正物質には凍結乾燥したヘモグロビンを用い、分析は全血を用いて装置内で溶血させ試料とする測定体系では、解決することが難しい問題と考える。

測定方法別にみると、試料1、2、3ともHPLC法アークレイ、酵素法アークレイが低値傾向、免疫学的協和（汎用）が高値傾向であったことは前年と同様であった。各測定法の平均値評価規準は試料1が0.14~0.15%、試料2が0.17~0.18%、試料3が0.20~0.22%であり、同じ測定法間におけるHbA1c値は収束していることは前年と同様であった。

標準液（キャリブレーション）及び検量方法の種類は、全施設で製造販売元指定の標準液を用い、表示値をそのまま使用していた。

HbA1cの評価規準は、第16回調査から個体の生理的変動を基本とした評価規準で評価し、日常の性能（CV%）が計算されたかたより%のいずれの性能規準をも超えることから、許容総誤差%の基本的な評価規準である“望ましい性能”を評価規準としている。各

測定法の平均値 $\pm 0\sim 2.7\%$ をA、 $\pm 2.8\sim 5.4\%$ をB、 $\pm 5.5\sim 8.1\%$ をC、 $\pm 8.2\%\sim$ をD評価としている。HbA1cは解析値評価を行わず、測定値評価のみで総合点評価をしている。凍結乾燥品の問題点はあるが、全施設において総合評価点が100点の施設は95.8%（343/358施設、昨年95.2%）であり参加機関のHbA1cの測定技術水準は高いと考えられる。しかし、60点未満は自施設で4施設、外部機関で2施設みられた。自施設のうち3施設において試料1と試料2の測定値が入れ替わって報告されたような結果であり、総合評価点は0点であった。データ記載時に誤記入された可能性が考えられるが、精度管理はデータを正確に報告することも含まれているので、データ記載時には十分注意してもらいたい。また、評価規準と比較してかたより、ばらつきのみられた機関は、分析装置のメンテナンス状況、試薬・校正物質・精度管理物質等の内部精度管理状況を確認し、さらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。前年度総合評価点が60点未満であった2施設は、今回2施設とも総合評価点100点となり良好な改善がみられた。

表 9 測定方法別平均値

方法	メーカー	試料 1	試料 2	試料 3	試料 4	試料 5
HPLC	アークレイ	5.38	6.24	7.47	6.08	5.20
	東ソー	5.42	6.42	7.72	6.08	5.09
免疫学方法	協和(汎用)	5.50	6.69	8.07	5.98	5.03
	協和(DM)	5.50	6.58	8.02	5.97	5.13
	富士レビオ	5.44	6.60	7.90	6.02	5.10
酵素法	協和メデックス	5.47	6.35	7.66	5.99	5.05
	積水メディカル	5.40	6.34	7.61	6.04	5.12
	アークレイ	5.37	6.31	7.58	6.07	5.16

【血液学検査】

はじめに

第24回血液学検査の精度管理調査は、ヘモグロビン量、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値、血小板数、平均赤血球容積（MCV）について実施した。

参加施設数は、ヘモグロビン量、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値、血小板数、MCVは361施設（昨年359施設）であり、昨年よりも2施設増加した。内訳は、自施設測定157施設（43.5%）で、昨年よりも2施設減少し、外部施設測定は204施設（56.5%）で昨年よりも5施設増加した。受託施設数は60であった。

なお、加工血液によるMCV、生血液試料によるヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、MCVの調査は参考調査（仮評価）とした。

1. 血液学検査評価方法

血液学検査の評価方法は、平成12年度（第9回）調査から従来のSD評価を測定値にもとづく%評価（渡辺 清明 他、臨床病理42:764～766,1994）に変更して評価を行い、第15回からは、個体の生理的変動を基本とした評価規準に変更した。この評価規準の概要および従来の評価基準との比較は第16回報告書の表2-2、表2-3に示した。なお、今回送付した試料に関する具体的な平均値および平均値評価規準は本報告書の調査項目の測定方法別平均値および評価基準一覧に示した（表18）。

2. 測定試料

測定試料として、昨年と同様に血液精度管理用に調製された試料3種を用意し、それらのうち2試料をランダムに組み合わせて各施設に送付した。報告された測定結果は、測定法別、測定機種別、自施設測定、外部施設測定別に集計した。

3. 調査項目

(1) ヘモグロビン量

各施設からの自己申告の結果から、ヘモグロビン量の測定方法は、①シアンメトヘモグロビン法 16施設（昨年19施設）、②非シアン界面活性剤法 340施設（昨年332施設）、③その他5施設（昨年8施設）であった。なお、③その他の5施設の測定方法を確認したところ、4施設はノンシアン系（測定機器：JAB512,514、JAA702、JAR409）、1施設は不明（JAB512）であった。これら5施設は自施設が使用している測定装置・試薬でのヘモグロビン測定原理を理解しておく必要がある。

過去の調査結果から、ヘモグロビン量の平均値を測定法別に比較したところ、非シアン界面活性剤法と、シアンメトヘモグロビン法との間に統計学に有意な差は認められなかった。さらに、ヘモグロビン測定値の変動係数は、非シアン界面活性剤法、シアンメトヘモグロビン法ともに1～2%と、良好だったことから、臨床検査専門委員会で検討した結果、第12回からは測定法別ではなく全施設をまとめて評価することになった。その結果、評価点ランク別の構成比をみると、全施設（361施設）において90点以上が97.2%（351/361）《前回：96.7%（347/359）》、80点以上が98.0%（354/361）《前回：98.9%

(355/359) 》であった。また、60点未満の低い評価を受けた施設が0.3% (1/359) 《前回：1.1% (4/361) 》であった。

(2)赤血球数

赤血球数測定法の原理は、電気抵抗方式と光散乱方式とに大別される。赤血球数は、過去の調査結果で電気抵抗方式においても機種間差が認められたので機種別に評価している。試料に精度管理用加工血液試料を使用すると、非シース方式の機種がシース方式よりも赤血球数が低値を示す。参加全施設数は361だったが、機種別に評価するためユーザー数が少ない（5施設以下）機種は、評価せずとした。したがって評価対象施設数は340施設であった。赤血球数の機種別の評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が100%(340/340)《前回：99.1% (334/337) 》であった。60点未満の低い評価を受けた施設はなかった《前回：0.9% (3/337) 》。

(3)白血球数

施設数5施設以下の機種を除く評価対象は340施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が100% (340/340) 《前回：99.4% (335/337) 》であった。60点未満の低い評価を受けた施設はなかった《前回：0.3% (1/337) 》。

(4)ヘマトクリット値

施設数5施設以下の機種を除く評価対象は340施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が100% (340/340) 《前回：99.4% (335/337) 》であった。60点未満の低い評価を受けた施設はなかった《前回：0.9% (3/337) 》。

第20回から、ヘマトクリット値の評価基準は、以前に採用されていた臨床的許容限界に基づく評価基準との整合性、およびヘマトクリット値は自動血球分析装置の測定原理上、赤血球数の影響も受けることから、評価基準を「生理的変動（総誤差%）最適」から「生理的変動（総誤差%）望ましい」に変更した。

(5)血小板数

施設数5施設以下の機種を除く評価対象は340施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が98.5% (335/340) 《前回：98.5% (332/337) 》、60点以上が99.7% (339/340) 《前回：99.1% (336/337) 》であった。60点未満の低い評価を受けた施設は0.3% (1/340) 《前回：0.9% (3/337) 》であった。

(6) MCV

施設数5施設以下の機種を除く評価対象は340施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が99.1% (337/340) 《前回：98.5% (332/337) 》、60点以上が99.7% (339/340) 《前回：99.1% (336/337) 》

であった。60点未満の低い評価を受けた施設は0.3%（1/340）《前回：0.9%（3/337）》であった。

まとめ

赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値、血小板数、MCVは、調査試料に起因する機種間差が存在し、加工血液を用いている本調査の成績評価は機種別に行っている。

機種別施設数が5施設以下の場合は評価ができないため、全衛連では測定原理の影響を受けない生血液を用いた参考調査を実施して導入を検討してきた。しかし、全衛連参加施設における検体検査の外部委託率は高く、これにともなう搬送および経時的な測定値への影響を無視できない調査項目（白血球数）があるため、本調査用試料を変更するまでには至っていない。ただし、新鮮血液試料は、HbA1cとの共用、異常値が報告された際の検証などにおける有用性は高く、参考調査試料として採用している。第9回からは白血球数・ヘマトクリット値・血小板数、第18回からMCVの評価が加わった。

配布試料については、試料到着後、全衛連に何らかの連絡があった施設（7施設）には、新しい試料を再送することなどで対応した。連絡の内訳は、①強溶血（3施設）、②凍結（1施設）、③施設内の連携不良のため常温放置（1施設）、④1試料のラベル剥れ（1施設）、⑤指定時間に測定できないとの相談（1施設）であった。これらのうち、5施設（①～③）に試料を再送した。これら以外に、連絡はなかったが加工血で溶血強度を4（強度の溶血）または3（中程度の溶血）と報告書に記載した施設（6施設）があった。

連絡があった施設7施設および加工血溶血強度4または3と記載した6施設の計13施設のうち、10施設はすべての血球計数項目の評価は100点であった。これら以外の3施設のうち、2施設は血小板の評価のみ57.1点および78.6点であったが、他項目は100点であった。

一方、溶血を認めたとの連絡があり、全衛連から試料を再送した3施設のうち、1施設は再送した試料が凍結したことから、今回は不参加となった。一方、他の2施設は外部委託先から溶血の指摘があったため、全衛連に連絡したと記載されていた。

これら2施設のうち1施設は、試料到着時に加工血（試料16,17）には溶血を認めず、新鮮血（試料18,19）に溶血強度4を認め、他の1施設は試料到着時の加工血には溶血強度2（軽度の溶血）を認め、新鮮血には溶血を認めなかった。これらの施設については、参加施設が試料の状態を確認後、その試料が外部委託施設に搬送され状態を確認するまでの間に溶血したことが推察される。

参加施設で確認される溶血の原因には、試料運送中の不手際による冷凍などが疑われる。試料到着時にマイクロヘマトクリット管を用いて遠心を行ない、上清に強度の溶血がないかを確認するなどの対応が必要である。強溶血を認めた場合は、コメント欄に記入するだけでなく、試料再送が必要なこともあるため、全衛連に連絡していただきたい。また、今回は参加施設への到着時には溶血を認めなかった試料が、外部委託機関で溶血が確認された例が複数あった。参加施設では、試料到着後、外部委託業者に引き継ぐまでの試料保管に十分に留意し、また受託機関は検体の搬送および搬送後の試料の取り扱いに細心の注意を払う必要がある。

加工血液に関しては、血小板凝集、フィブリン析出などに関する自動血球分析装置のフ

ラッキングメッセージ出現に関する記載はなかった。

【参考調査】

1. 新鮮血液試料についての調査

本調査では血球計数項目の精度管理本調査試料に加工血液を使用している。

加工血液は各血球を種々の程度で固定、また安定化剤の添加などを行っているため、新鮮抗凝固血液に比べて保存安定性は優れている。しかし血球固定時の細胞変性や添加薬剤などの影響により、調査試料に起因する機種間差が生じることがある。そこで第15回調査から新鮮抗凝固血液（生血液）を用いて、参考調査を実施している。

本年度も昨年と同様に、2種類の新鮮血液試料を準備して各施設に配布した。

調査用試料は輸血用保存液CPDA（citrate phosphate dextrose adenine）入り採血バッグに静脈血を採取し、さらにEDTA-2Kを終濃度1.5mg/mlになるように添加して調製した。

第16回、第17回の参考調査結果では、赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数は、採血3日後まで白血球数が低値化傾向を示すものの平均値±3SDの範囲内に分布した。測定時刻は配付2日後の午前11～12時に指定した。

生血液試料に関する報告書へのコメント記入内容は、フィブリン析出（11施設）、凝集（1施設）、凍結（1施設）、全衛連への連絡内容は、強溶血（3施設）、凍結（1施設）、施設内の連携不良のため常温放置（1施設）、1試料のラベル剥れ（1施設）、指定時間に測定できないとの相談（1施設）であった。溶血強度3または4は計2施設あった。

各施設における試料受領日は、発送（採血）1日後は264施設（73.1%）、2日後は94施設（26.1%）、3日後は1施設（0.3%）、受領日未記入等が2施設（0.7%）であった。また、測定日は、1日後pm測定は2施設（0.6%）、2日後am測定は236施設（65.4%）、2日後pm測定は108施設（29.9%）、3日後am測定は7施設（1.9%）、3日後pm測定は4施設（1.1%）、測定日未記入等が4施設（1.1%）であった。

未記入等の施設には、受領日・測定日が7日後であった1施設（0.3%）が含まれる。この施設は新鮮血液に溶血・凝固を認め、試料が再送されたためであった。

2日後pmまでに測定したのは346施設（95.9%）、3日後に測定したのは11施設（3%）であったが、試料は2日後までにこれら全施設に到着していた。

新鮮血試料による調査方法については、搬送時間、測定時刻などと集計値の関連性などについて慎重に検討し、本調査への導入の可否を検討する必要がある

【尿検査】

はじめに

第24回の尿精度管理調査の参加施設数は363施設であり、前年より4施設増加した。今回も検査を外部委託した施設は22施設あり、15の登録衛生検査所が受託していた。

表10は本調査開始以来の尿検査の外部委託状況をまとめたものである。

表10 尿検査の外部委託回答施設数

回数	年 度	対象施設数	外部委託施設数(%)		受託検査機関数
1	平成4年	213	37	17.4	—
2	平成5年	218	48	22.0	—
3	平成6年	257	不明	—	—
4	平成7年	273	40	14.7	—
5	平成8年	283	20	7.1	16
6	平成9年	296	14	4.7	12
7	平成10年	296	16	5.4	14
8	平成11年	316	14	4.4	14
9	平成12年	318	19	6.0	14
10	平成13年	325	8	2.5	8
11	平成14年	337	7	2.1	4
12	平成15年	335	13	3.9	10
13	平成16年	333	0	0.0	0
14	平成17年	337	0	0.0	0
15	平成18年	334	0	0.0	0
16	平成19年	361	0	0.0	0
17	平成20年	358	0	0.0	0
18	平成21年	355	0	0.0	0
19	平成22年	361	0	0.0	0
20	平成23年	359	16	4.5	14
21	平成24年	365	22	6.0	17
22	平成25年	357	20	5.6	14
23	平成26年	359	24	6.7	17
24	平成27年	363	22	6.1	15

尿検査は、経時変化が大きいため、精度確保の観点から基本的に外部委託をしてはいけないし、検査所も受託してはいけないことになっている。そうしたことごとを何度かコメントしてきた結果、平成16年（13回調査）から平成22年（19回調査）までは外部委託の回答がゼロになった。当時、この結果について本当に外部委託検査ゼロならばよいが・・・と述べてきたが、平成23年（20回調査）から再び外部委託の回答が見られるようになった。一時期ゼロ報告されたことは、一体何だったのだろうか。

過日、臨床検査の検体を全て外部委託している某人間ドック健診施設を訪問したことがある。勿論、尿検査も外注の例外ではなかった。この施設では、毎日8便の検体収集と2時間以内の検査結果の回答を求め、ドック診察時にはすべての検査データが判定医の手元に届いていた。ドック健診という比較的数量少ない検体数と、クリニックの近隣に検査所があり、検体収集の搬送等に惜しみない労力と費用をかけた結果ではないかと推察できる。

しかし、通常の一般健診や特殊健診を巡回健診として実施している場合、このような外部委託の方法は先ず不可能であろう。それにも関わらず今回も22施設は、尿検査を外部委託していた。

1. 評価方法

尿検査の評価は、例年のごとく各試料について下記のように評点している。

基準値と一致したものを [A] : 5点

1 ランク異なったものを [B] : 4点

2 ランク以上離れたものを [Z] : 0点

各項目とも配布した5試料が全てA評価の場合、合計25点になる。得られた点数を機械的に4倍し100点満点に換算したのが評価点である。

2. 結果及び考察

(1) 尿検査の方法

検査項目別・測定法別の結果を 表11に示す。

尿糖・蛋白・潜血検査とも、全施設で試験紙法を採用。試験紙法は、その色調変化を肉眼で判定する「目視判定法」と、専用機器で比色判定する「機器判定法」がある。今回は何故か検査項目によって目視判定法（以下、目視判定）と機器判定法（以下、機器判定）が異なっている施設があった。その結果、目視判定は尿糖検査177施設（48.8%）、尿蛋白・潜血検査が176施設（48.5%）であり、機器判定が尿糖検査186施設（51.5%）、尿蛋白・潜血検査が187施設（51.5%）であった。

全体としては、僅かではあるが機器判定法が増えてきている。

表11 項目別・測定法別尿検査の方法

	尿 糖 検 査		尿 蛋 白 検 査		尿 潜 血 検 査	
試験紙・目視判定法	177	48.8%	176	48.5%	176	48.5%
〃 ・機器判定法	186	51.2%	187	51.5%	187	51.5%
合 計	363	100.0%	363	100.0%	363	100.0%

(2) 項目別・測定法別検査結果

表12は、調査項目別・測定法別検査結果である。

「90点以上」の良好な施設は、尿糖検査で目視判定が67.8%、機器判定では93.5%であった。同様に尿蛋白検査では94.3%・100.0%、尿潜血検査では88.1%・92.5%であり、何れの項目でも機器判定の方が良好な結果を示した。

一方、「60点未満」の低得点施設は、尿糖検査で4施設（目視判定：4、機器判定：0）、尿蛋白検査は2施設（目視判定：2、機器判定：0）、尿潜血検査では1施設（目視判定：1、機器判定：0）であり、昨年度とは全く逆の結果であった。

目視判定の場合、検査台上の照度が800～1000LUX程度に確保されていないと誤判定する。直射日光が当たる明るすぎる検査台では陽性率が減少し、逆に暗すぎると陽性率が増加する。廊下やトイレの片隅などは200～300LUX程度、通常の事務室でも300～400LUX程度の照度しかないのが殆どである。不特定な巡回健診会場で目視判定する場合は、補助照明や標準試料の使用等、適正な検査条件を選択することが重要である。

表12 項目別測定法別検査結果（得点別施設数及びその比率）

項目	測定法	90点以上	80～89点	70～79点	60～69点	60点未満	合計
尿糖	試験紙・目視判定法	120	50	1	2	4	177
		67.8%	28.2%	0.6%	1.1%	2.3%	100.0%
	〃・機器判定法	174	11	1	0	0	186
		93.5%	5.9%	0.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	合計	294	61	2	2	4	363
		81.0%	16.8%	0.6%	0.6%	1.1%	100.0%
尿蛋白	試験紙・目視判定法	166	6	2	0	2	176
		94.3%	3.4%	1.1%	0.0%	1.1%	100.0%
	〃・機器判定法	187	0	0	0	0	187
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	合計	353	6	2	0	2	363
		97.2%	1.7%	0.6%	0.0%	0.6%	100.0%
尿潜血	試験紙・目視判定法	155	20	0	0	1	176
		88.1%	11.4%	0.0%	0.0%	0.6%	100.0%
	〃・機器判定法	173	14	0	0	0	187
		92.5%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	合計	328	34	0	0	1	359
		90.4%	9.4%	0.0%	0.0%	0.3%	100.0%

（３）メーカー別にみた尿半定量値

日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の「尿試験紙検討委員会」が中心となって、学会・関係団体・メーカーで試験紙の判定表示値の統一化を進めてきた合意点は、下記の通りである。

① 尿蛋白・尿ブドウ糖試験部分は半定量値（mg/dL）で表示する。

定性値（－、±、1＋…）を付記するか否かは各メーカーの判断に委ねる。

ただし、付記する場合、蛋白は30mg/dL、ブドウ糖は100mg/dLを（1＋）とする。

② 尿潜血試験部分は原則として比色表に定性値（－、±、1＋…）のみを表示し、添付文書に定性値とヘモグロビン濃度（mg/dL）、または赤血球数（個/μL）の関係を記載する。

（1＋）に相当するヘモグロビン濃度は、0.06mg/dLとし、赤血球数に換算すると約20個/μLとなる。

これを受けて各メーカーの試験紙は、表13に示したように（1＋）レベルでの判定基準が揃えられた。健診の場合、多くは（1＋）以上を「要精検・要2次検査」と判定するので、試験紙の相違によるスクリーニング結果に判定誤差が生じることはないと思われる。

本サーベイでは、従来から（－）、（±）、（1＋）、（2＋）、（3＋）等の定性判定によらず、メーカーが示したそれぞれの半定量値の結果から、尿糖の場合6段階、尿蛋白・尿潜血の場合7段階に再区分した数値で回答を求めている。その結果、メーカー毎の定性

判定基準の相違によって評価への影響が出ていないか慎重に検討してきたが特に問題点が生じたことはなかった。少なくとも、使用している試験紙の相違で検査結果が不利になる事例は発生していないとみてよい。評点結果が悪かったのは、「判定の不確かさ」、或いは「検体のとり違い」・「転記ミス」等に起因した結果であると思われる。

表13 尿試験紙メーカー別半定量値

	製造元(販売元)名	試験紙名	判定時間	±	1+	2+	3+	4+	5+
尿	栄研化学(同)	ウロペーパーⅢ栄研	60秒	50	100	250	500	2000	—
	ロツシュ・D **	BMテスト 3-Ⅲ	30～60秒	50	100	300	1000	—	—
	和光純薬(同*)	ブレテスト	30秒	—	100	250	500	2000	—
	アークレイファクトリー(三和化学*)	ファグノス・Uテスト	60秒	50	100	200	500	1000	—
	テルモ(同)	ウリエース	30秒	50	100	500	2000	—	—
	東洋濾紙	ウロピース	30秒	50	100	250	500	1000	—
	東洋濾紙(三和化学)	U-テストビジュアル	30秒	50	100	250	500	1000	—
	シーメンス・HCD **	エームス尿検査試験紙	30秒	—	100	250	500	1000	2000
尿 蛋 白	栄研化学(同)	ウロペーパーⅢ栄研	直後	15	30	100	300	1000	—
	ロツシュ・D **	BMテスト 3-Ⅲ	30～60秒	—	30	100	500	—	—
	和光純薬(同*)	ブレテスト	30秒	10～20	30	100	300	1000	—
	アークレイファクトリー	ファグノス・Uテスト	60秒	15	30	100	300	1000	—
	テルモ(同)	ウリエース	10秒	15	30	100	250	1000	—
	東洋濾紙	ウロピース	30秒	15	30	100	300	1000	—
	東洋濾紙(三和化学)	U-テストビジュアル	30秒	15	30	100	300	1000	—
	シーメンス・HCD **	エームス尿検査試験紙	0～60秒	15	30	100	300	1000	—
尿 潜 血	栄研化学(同)	ウロペーパーⅢ栄研	30秒	0.03	0.06	0.15	0.75	—	—
	ロツシュ・D **	BMテスト 3-Ⅲ	30～60秒	(10)	(20)	(50)	(250)	—	—
	和光純薬(同*)	ブレテスト	30～60秒	—	0.06	0.15	0.75	—	—
	アークレイファクトリー	ファグノス・Uテスト	60秒	—	0.06	0.2	1	—	—
	テルモ(同)	ウリエース	20秒	—	0.06	0.15	0.75	—	—
	東洋濾紙(協和メディックス)	ウロピース	30秒	0.03	0.06	0.15	0.75	—	—
	東洋濾紙(三和化学)	U-テストビジュアル	45秒	0.03	0.06	0.2	1	—	—
	シーメンス・HCD **	エームス尿検査試験紙	60秒	0.03	0.06	0.135	0.405	—	—

(注) *: 発売元 **: 販売元 () 内の単位: 赤血球 個/μL

(4) 項目別・試験紙メーカー別・測定法別評点結果

各項目について試験紙メーカー別・測定方法別にみた評点結果を、85点以上、70～84点、60～69点、60点未満の4群に分けて集計した結果が、表14である。

尿糖検査の「60点未満」の施設は目視判定で4施設(栄研:2、テルモ:2)に対して、

機器判定ではゼロ。尿蛋白検査では、目視判定は2施設(栄研：2)、機器判定はゼロ。尿潜血検査でも、目視判定で1（和光純薬：1）施設、機器判定ではこれもゼロであった。

機器判定では60点未満は各項目ともゼロであったが、目視判定では、3検査合計で7施設に見られた。前年度とは全く逆な結果を得た。

表14 項目別・試験紙メーカー別・判定法別評価結果

	試験紙メーカー	試験紙・目視判定法					試験紙・機器判定法				
		実施数	85点以上	70～84	60～69	60点未満	実施数	85点以上	70～84	60～69	60点未満
尿	02 栄研化学	83	69	12	0	2	123	120	3	0	0
	06 関東化学	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	07 協和メデックス	9	8	1	0	0	-	-	-	-	-
	09 シスメックス	1	1	0	0	-	3	3	0	0	0
	22 ロシュ・D	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンス・HCD	27	26	0	1	0	23	17	6	0	0
	32 和光純薬	17	14	2	1	0	4	4	0	0	0
	38 アークレイ	1	1	0	0	0	33	33	0	0	0
	60 テルモ	5	2	1	0	2	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙(協和M)	31	31	0	0	0	-	-	-	-	-
	合 計 (363施設)	177	155	16	2	4	186	177	9	0	0
			87.6%	9.0%	1.1%	2.3%		95.2%	4.8%	0.0%	0.0%
尿蛋白	02 栄研化学	83	80	1	0	2	123	123	0	0	0
	06 関東化学	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	07 協和メデックス	9	9	0	0	0	-	-	-	-	-
	09 シスメックス	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0
	22 ロシュ・D	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンス・HCD	26	26	0	0	0	24	24	0	0	0
	32 和光純薬	17	16	1	0	0	4	4	0	0	0
	38 アークレイ	1	1	0	0	0	33	33	0	0	0
	60 テルモ	5	4	1	0	0	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙(協和M)	31	31	0	0	0	-	-	-	-	-
	合 計 (363施設)	176	171	3	0	2	187	187	0	0	0
			97.2%	1.7%	0.0%	1.1%		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
尿潜血	02 栄研化学	82	82	0	0	0	123	122	1	0	0
	06 関東化学	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	07 協和メデックス	9	9	0	0	0	-	-	-	-	-
	09 シスメックス	1	1	0	0	-	3	3	0	0	0
	22 ロシュ・D	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンス・HCD	28	28	0	0	0	24	24	0	0	0
	32 和光純薬	17	16	0	0	1	4	4	0	0	0
	38 アークレイ	1	1	0	0	0	33	33	0	0	0
	60 テルモ	5	5	0	0	0	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙(協和M)	29	29	0	0	0	-	-	-	-	-
	62 東洋濾紙(三和化)	1	1	0	0	0					
	合 計 (363施設)	176	175	0	0	1	187	186	1	0	0
			99.4%	0.0%	0.0%	0.6%		99.5%	0.5%	0.0%	0.0%

[注] D：ダイアグノスティックスの略 HCD：ヘルスケアダイアグノスティックスの略 M：メディックスの略

(5) 項目別・評価点ランク別にみた経年比(20回～24回)

表15は、第20回以降24回までの評価点結果を、5段階ランク別とその推移を全施設、自施設検査、外部委託検査毎に見たものである。経年変化(回数毎)について全施設・自施設・外部委託を一覧すると、数値上若干の上下はあるものの大きな変化は見られなかった。自施設検査・外部委託検査では外部委託の方が良好な結果であった。

表15 項目別・評価点ランク別 施設数(全施設・自施設検査・外部委託検査)

	項 目	得点	90点以上		80～89点		70～79点		60～69点		60点未満		合 計	
		回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
全 施 設	尿 糖	24回	294	81.8%	61	16.8%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.1%	363	100.0%
		23回	300	83.6%	48	13.4%	4	1.1%	2	0.6%	5	1.4%	359	100.0%
		22回	284	79.6%	57	16.0%	7	2.0%	2	0.6%	7	2.0%	357	100.0%
		21回	283	77.5%	65	17.8%	8	2.2%	5	1.4%	4	1.1%	365	100.0%
		20回	301	83.8%	52	14.5%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.1%	359	100.0%
	尿蛋白	24回	353	97.2%	6	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	363	100.0%
		23回	345	96.1%	12	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	359	100.0%
		22回	342	95.8%	8	1.7%	5	1.4%	1	0.3%	3	0.8%	357	100.0%
		21回	348	95.3%	13	3.6%	2	0.5%	2	0.5%	0	0.0%	365	100.0%
		20回	348	96.9%	9	2.5%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	359	100.0%
	尿潜血	24回	328	90.4%	34	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	363	100.0%
		23回	324	90.3%	28	7.8%	5	1.4%	0	0.0%	2	0.6%	359	100.0%
		22回	330	92.4%	16	4.5%	6	1.7%	2	0.6%	3	0.8%	357	100.0%
		21回	327	89.6%	28	7.7%	7	1.9%	0	0.0%	3	0.8%	365	100.0%
		20回	347	96.9%	11	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	358	100.0%
自 施 設 検 査	尿 糖	24回	273	80.1%	60	17.6%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.2%	341	100.0%
		23回	277	82.7%	47	14.0%	4	1.2%	2	0.6%	5	1.5%	335	100.0%
		22回	266	78.9%	56	16.6%	7	2.1%	2	0.6%	6	1.8%	337	100.0%
		21回	262	76.4%	64	18.7%	8	2.3%	5	1.5%	4	1.2%	343	100.0%
		20回	285	83.1%	52	15.2%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.2%	343	100.0%
	尿蛋白	24回	331	97.1%	6	1.8%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	341	100.0%
		23回	321	95.8%	12	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	335	100.0%
		22回	323	95.8%	6	1.8%	5	1.5%	1	0.3%	2	0.6%	337	100.0%
		21回	326	95.0%	13	3.8%	2	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	343	100.0%
		20回	332	96.8%	9	2.6%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	343	100.0%
	尿潜血	24回	306	89.7%	34	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	341	100.0%
		23回	300	89.6%	28	8.4%	5	1.5%	0	0.0%	2	0.6%	335	100.0%
		22回	311	92.3%	16	4.7%	6	1.8%	1	0.3%	3	0.9%	337	100.0%
		21回	307	89.5%	26	7.6%	7		0	0.0%	3	0.9%	343	100.0%
		20回	332	97.1%	10	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	342	100.0%
外 部 委 託 検 査	尿 糖	24回	21	95.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		23回	23	95.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
		22回	18	90.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	20	100.0%
		21回	21	95.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		20回	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%
	尿蛋白	24回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		23回	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
		22回	19	95.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	20	100.0%
		21回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		20回	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%
	尿潜血	24回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		23回	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
		22回	19	95.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	20	100.0%
		21回	20	90.9%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		20回	15	93.8%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%

(6) ゼロ評価のある健診機関

表16は、配布した5試料中にゼロ評価「Z」が、1以上あった健診機関の一覧である。

尿糖検査での「Z評価」は、20年度11施設、21年度14施設、22年度13施設、23年度6施設、24年度17施設、25年度16施設、26年度10施設、そして27年度は8施設であった。

「Z評価」が2以上あると項目別評価点は60点以下になるが今回は次の4施設に見られた。12015施設：16点、13008施設：36点、73004施設：40点、13078施設：52点。このうち、ゴシックで表示した13008施設は、前年も尿糖検査に「Z評価」が2個あり、56点であった。16008施設は、今回尿糖に「Z評価」が1個あり68点であったが、前回まで3年連続して尿潜血検査に「Z評価」が1～2個あり、24年：76点、25年：60点、26年：76点であった施設である。項目こそ変わったが4年連続して「Z評価」があったことになる。検査の方法・手順等に何らかの問題点が伏在していないだろうか。

尿蛋白検査での「Z評価」は、20年度26施設、21年度7施設、22年度8施設、23年度3施設、24年度5施設、25年度9施設、26年度3施設、そして27年度は5施設であった。

「Z評価」が2以上あったのは2施設、43004施設：32点、23001施設：52点であった。

尿潜血検査での「Z評価」は、20年度10施設、21年度9施設、22年度7施設、23年度1施設、24年度16施設、25年度11施設、26年度6施設、今年27年度は2施設であり大きく減少した。そのうち「Z評価」が2以上あったのは1施設、38008施設の56点であった。しかも、この38008施設は、網掛けしたように全ての項目に「Z評価」が見られたことに注視したい。

表16 ゼロ点評価のある施設一覧（尿糖・尿蛋白・尿潜血）

項目	施設コード	測定方法	機器コード	試験紙メーカー	評価点	評価内容				
尿糖	02004	試験紙・機器判定法	LBJ806	シーメンス・HCD	72.0	A	B	B	Z	A
	12015	試験紙・目視判定法	AAZ901	栄研化学	16.0	Z	Z	B	Z	Z
	13008	〃	AAZ901	テルモ	36.0	A	Z	B	Z	Z
	13078	〃	〃	〃	52.0	A	Z	Z	B	B
	16008	〃	〃	シーメンス・HCD	68.0	A	B	B	B	Z
	23051	〃	〃	栄研化学	72.0	A	B	B	Z	A
	38008	〃	〃	和光純薬	68.0	A	B	B	Z	B
尿蛋白	73004	〃	〃	栄研化学	40.0	Z	Z	A	A	Z
	12015	〃	〃	栄研化学	76.0	A	B	Z	A	A
	13080	〃	〃	テルモ	72.0	Z	A	B	B	A
	23001	〃	〃	栄研化学	52.0	B	A	Z	Z	B
	38008	〃	〃	和光純薬	80.0	Z	A	A	A	A
尿潜血	43004	〃	〃	栄研化学	32.0	Z	Z	B	B	Z
	13002	試験紙・機器判定法	LBU301	栄研化学	80.0	Z	A	A	A	A
	38008	試験紙・目視判定法	AAZ901	和光純薬	56.0	A	A	Z	Z	B

(注) 網掛けした38008施設は、3項目にゼロ点評価（Z評価）がある施設

ゴシック表示した13008施設は、前23回の調査結果時の尿糖検査結果にも「Z評価」があった

ゴシック表示した16008施設は、前23回、及び22・21回の調査結果時の尿潜血検査結果にも「Z評価」があった

まとめ

尿検査は、臨床化学検査や血液検査等と比較して、簡単に扱われる傾向は否定できない。そのため、初心者がまず取り組む検査というイメージも強い。

尿検査用試験紙は、容器の開封直後から劣化が始まる。試験紙の適切な保管・管理が大切である。まして試薬部分に触れることは絶対にあってはならない。試験紙を尿中に浸漬後判定（dip and read）する基本、項目ごとに異なる判定時間の厳守、照度等の検査環境等も大切である。受診者自身に放尿中の尿を試験紙にかけてもらいこれを検査判定するとか、少ない尿をガーゼや綿棒等で試験紙に擦りつけるような検査をしてはいけない。

目視判定する場合の検査台上の照度は800～1,000LXなくては誤判定することは既述した。検査室や外部委託先に検体を送付するときの温度管理も大切である。尿は、時間経過とともに外気温等の影響を受けて細菌が繁殖し変性することを忘れてはならない。

精度管理調査用検体は、こうした劣悪な条件下で検査することは無いであろう。しかも、習熟したベテラン技師が検査することも多い……。それにも関わらず60点未満、70点未満の得点を取得することがある。はたして日常の検査ではどうであろうか？

日常の検査も、精度管理調査用検体では実施しない手順や方法で行ってはいけない。

適正な検査を行うべく「標準作業書」の使用は必須である。その「標準作業書」は、最新の条件で更新されたものでなくてはならないし、検査担当者全員で共有しされていることが不可欠である。

尿検査は、基本的な検査である。基本的な検査だけに大切にしたい検査でもある。

VI. 第24回精度管理調査試料測定結果（1）

1. 表17 調査項目の測定法別試料ごとの参加施設数、標準偏差、平均値
項目別、測定法別測定値の平均値 ± 2 SD以内の施設数、標準偏差、平均値の一覧。

ここで示した標準偏差は、調査項目欄で示した測定法群に属する24回精度管理調査の測定値から実際に計算された統計量で、全衛連調査における項目別、同一測定法群別の現行の技術水準と見なされる。

なお、表17の調査項目欄で、[]内の番号は測定コード番号であり、表19に測定法コード番号の測定方法名、実施施設数を載せている。

2. 表18 調査項目の測定法別試料ごとの平均値および平均値評価規準
評価規準として用いた平均値（基準濃度）と評価範囲として用いた評価規準の一覧表。

「平均値評価規準」の値は、「Ⅲ.評価規準等」で示した表2-1、および表2-2の評価Aの評価規準（%）を実際の濃度に換算して示している。

この表に示されている評価規準は評価範囲を示すもので、表17に示した現行の技術水準とは異なるので注意されたい。

3. 表19 調査項目別・測定方法別実施件数

測定法分類による「評価せず」は、施設数が5施設以下の試料で計算された標準偏差は統計的意義が乏しいことからあくまでも参考であり、これらの項目および測定法群は「評価せず」と備考欄に記載した。

なお、26年度より複数の施設の検査を受託している検査施設を、受託している施設数で計上するか、同一の検査方法であるため、検査施設ごとに1として計上するかについて検討し、検査施設への集約は行わず、参加施設単位で計上することとしている。

表17 調査項目の測定法別測定施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
総コレステロール [11・21] コレステロール酸化酵素法・脱水素酵素法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	1.25	1.07	1.09	1.45	1.20	1.37	1.56	1.99
	平均値	117.98	130.69	143.55	156.52	164.93	178.11	191.01	203.90
総コレステロール [81] ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	123.00	0.00	149.00	0.00	173.00	189.00	203.00	0.00
中性脂肪 [11・21] 酵素UV法・比色法グリセロールを消去する方法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	1.00	0.99	1.57	1.80	1.94	2.42	2.74	3.10
	平均値	46.65	57.02	67.23	77.28	84.56	94.14	105.10	115.06
中性脂肪 [81] ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	59.00	0.00	79.00	0.00	95.00	102.00	110.00	0.00
尿酸 [31] ウリカーゼ・ヘルオキシダーゼ法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.07	0.07
	平均値	5.23	5.67	6.10	6.53	6.80	7.24	7.68	8.12
尿酸 [81] ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	5.30	0.00	6.10	0.00	6.90	7.30	7.70	0.00
クレアチニン [21] 酵素法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05
	平均値	1.11	1.66	2.21	2.76	3.14	3.70	4.27	4.82
クレアチニン [81] ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	1.15	0.00	2.18	0.00	3.15	3.82	4.48	0.00
クレアチニン [82] ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	施設数	0	1	1	1	0	1	0	1
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	0.00	1.60	2.10	2.70	0.00	3.60	0.00	4.60
AST [11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	0.61	0.74	0.83	0.88	0.80	0.93	1.19	1.79
	平均値	20.14	38.09	56.25	74.58	86.61	104.94	123.52	141.79
AST [82] ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	施設数	0	1	1	1	0	1	0	1
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	0.00	35.00	50.00	66.00	0.00	95.00	0.00	131.00
AST [85] ドライケミストリー法ヒトロスJ(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	19.00	0.00	53.00	0.00	82.00	100.00	119.00	0.00
ALT [11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	0.62	0.53	0.77	0.93	0.77	0.92	1.14	2.01
	平均値	16.71	32.09	47.58	63.14	73.45	89.25	104.98	120.34
ALT [82] ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	施設数	0	1	1	1	0	1	0	1
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	0.00	35.00	57.00	71.00	0.00	101.00	0.00	131.00
ALT [85] ドライケミストリー法ヒトロスJ(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	22.00	0.00	52.00	0.00	74.00	87.00	103.00	0.00
γ-GT [11] JSCC標準化対応法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	0.57	0.65	0.78	1.22	0.72	1.07	1.35	1.73
	平均値	29.63	46.82	64.01	81.21	92.69	110.07	127.59	144.32
γ-GT [85] ドライケミストリー法ヒトロスJ(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	28.00	0.00	64.00	0.00	94.00	112.00	130.00	0.00
血糖 [12・21・31] ブドウ糖酸化酵素電極法/ヘキナーゼ・UV法/ブドウ糖脱水素酵素法	施設数	147	158	147	110	122	148	148	155
	標準偏差	1.01	0.99	1.00	1.34	0.87	1.17	1.58	1.68
	平均値	92.95	109.32	125.81	142.30	153.43	169.64	186.32	202.71

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
血糖 [81] ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	施設数	1	0	1	0	1	1	1	0
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	94.00	0.00	126.00	0.00	154.00	173.00	191.00	0.00
血糖 [82] ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	施設数	0	1	1	1	0	1	0	1
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	0.00	115.00	130.00	150.00	0.00	181.00	0.00	210.00
HDLコレステロール [01-0403] 沈殿操作を行わない方法 協和メ テックス(メタボリッドHDL-C)	施設数	69	81	80	70	50			
	標準偏差	0.45	0.47	0.68	0.57	0.44			
	平均値	32.25	44.91	50.63	51.64	32.71			
HDLコレステロール [01-0801] 沈殿操作を行わない方法 シノテスト (クイックオートネオHDL-C)	施設数	1	1	0	1	0			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	36.00	52.00	0.00	53.00	0.00			
HDLコレステロール [01-1201] 沈殿操作を行わない方法 積水メ ディカル(コレステストN-HDL クオリゼン)	施設数	69	65	64	52	51			
	標準偏差	0.67	0.60	0.63	0.83	0.56			
	平均値	35.43	50.90	56.80	53.36	34.94			
HDLコレステロール [01-1301] 沈殿操作を行わない方法 テンカ 生研(EX N)	施設数	0	1	1	0	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	0.00	47.00	54.00	0.00	33.00			
HDLコレステロール [01-2303] 沈殿操作を行わない方法 和光 純薬(ライフワークHDL-CM2)	施設数	1	0	1	1	0			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	34.00	0.00	54.00	52.00	0.00			
HDLコレステロール [01-2304] 沈殿操作を行わない方法 和光 純薬(ライフワークHDL-CM3)	施設数	7	4	7	4	5			
	標準偏差	0.49	0.71	0.45	0.43	1.17			
	平均値	34.43	48.00	53.71	51.25	33.80			
HDLコレステロール [08-2801] ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	施設数	1	1	0	1	0			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	32.00	43.00	0.00	50.00	0.00			
LDLコレステロール [01-0401] 協和メテックス(テタミナーL LDL-C)	施設数	1	1	2	1	0			
	標準偏差	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00			
	平均値	75.00	105.00	128.50	156.00	0.00			
LDLコレステロール [01-0403] 協和メテックス(メタボリッド LDL-C)	施設数	69	79	78	69	50			
	標準偏差	0.72	0.85	1.07	1.65	1.22			
	平均値	74.48	105.58	127.93	156.44	123.30			
LDLコレステロール [01-0801] シノテスト(クイックオートネオLDL-C)	施設数	1	1	0	1	0			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	78.00	111.00	0.00	164.00	0.00			
LDLコレステロール [01-1201] 積水メディカル(コレステストLDL クオリ ゼントLDL エクセライザLDL)	施設数	66	64	64	52	49			
	標準偏差	0.87	1.42	1.47	2.42	1.33			
	平均値	77.34	110.62	136.47	164.07	135.49			
LDLコレステロール [01-1301] テンカ生研(LDL-EX N)	施設数	0	1	1	1	0			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	0.00	129.00	161.00	178.00	0.00			
LDLコレステロール [01-1302] テンカ生研(デュアルCHO T&L)	施設数	0	1	1	0	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	0.00	110.00	137.00	0.00	136.00			
LDLコレステロール [01-2302] 和光純薬(ライフワークLDL-CM)	施設数	10	5	7	4	7			
	標準偏差	0.92	2.23	1.03	2.06	1.07			
	平均値	82.50	116.20	141.71	159.50	135.17			
LDLコレステロール [01-2801] オーソ(ヒトロスマイクロチップdLDL)	施設数	1	1	0	1	0			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	76.00	114.00	0.00	158.00	0.00			
HbA1c [01-2701] HPLC法アークレイ	施設数	15	18	17	23	23			
	標準偏差	0.07	0.10	0.10	0.11	0.06			
	平均値	5.38	6.24	7.47	6.08	5.20			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
HbA1c [01-2901] HPLC法東ソー	施設数	56	50	44	72	72			
	標準偏差	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06			
	平均値	5.42	6.42	7.72	6.08	5.09			
HbA1c [02-0401・03] 免疫学的方法協和メックス(汎用 自動分析装置)凍乾品・液状品	施設数	21	25	23	31	31			
	標準偏差	0.01	0.06	0.06	0.07	0.06			
	平均値	5.50	6.69	8.07	5.98	5.03			
HbA1c [02-0402・04] 免疫学的方法協和メックス(DM- JACKシリーズ)凍乾品・液状品	施設数	19	19	20	28	28			
	標準偏差	0.07	0.06	0.07	0.10	0.07			
	平均値	5.50	6.58	8.02	5.97	5.13			
HbA1c [02-2401] 免疫学的方法富士レビオ	施設数	8	9	10	12	12			
	標準偏差	0.05	0.00	0.00	0.04	0.01			
	平均値	5.44	6.60	7.90	6.02	5.10			
HbA1c [03-0401] 酵素法協和メックス	施設数	18	17	19	24	24			
	標準偏差	0.04	0.05	0.07	0.11	0.08			
	平均値	5.47	6.35	7.66	5.99	5.05			
HbA1c [03-1201] 酵素法積水メディカル	施設数	6	5	9	9	9			
	標準偏差	0.00	0.08	0.07	0.07	0.06			
	平均値	5.40	6.34	7.61	6.04	5.12			
HbA1c [03-2701] 酵素法アークレイ(スポットケム)	施設数	7	11	10	13	13			
	標準偏差	0.04	0.08	0.06	0.05	0.05			
	平均値	5.37	6.31	7.58	6.07	5.16			
HbA1c [03-3501] 酵素法日本電子	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	5.40	6.50	0.00	6.00	5.10			
ヘモグロビン [1・2・9] シアンメヘモグロビン法/非シアン界面 活性剤法/その他(比色法/ノニシア 赤血球	施設数	217	110	128	216	216			
	標準偏差	0.10	0.06	0.13	0.06	0.09			
	平均値	13.36	7.43	17.52	9.39	11.70			
日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	459.00	291.00	0.00	357.00	368.00			
赤血球 シスメックスJAB511	施設数	3	3	0	3	3			
	標準偏差	3.56	4.32	0.00	2.62	2.94			
	平均値	445.00	283.00	0.00	349.67	361.00			
赤血球 シスメックスJAB512	施設数	138	73	83	138	138			
	標準偏差	1.73	1.02	2.33	1.85	1.80			
	平均値	457.17	294.07	534.21	354.30	365.25			
赤血球 シスメックスJAB514	施設数	26	8	18	26	26			
	標準偏差	2.57	3.89	4.43	2.40	2.55			
	平均値	452.00	288.12	534.06	352.20	362.79			
赤血球 シスメックスJAB516	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	6.50	3.00	0.00	3.50	8.00			
	平均値	455.50	289.00	0.00	352.50	366.00			
赤血球 シスメックスJAB517	施設数	27	16	13	27	27			
	標準偏差	4.04	2.56	3.27	2.99	3.25			
	平均値	455.46	287.20	532.62	352.86	364.36			
赤血球 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	437.00	0.00	516.00	340.00	349.00			
赤血球 ベックマンコールター-JAJ005	施設数	2	0	2	1	1			
	標準偏差	2.50	0.00	2.00	0.00	0.00			
	平均値	455.50	0.00	542.00	348.00	361.00			
赤血球 ベックマンコールター-JAJ011	施設数	6	0	6	6	6			
	標準偏差	5.12	0.00	8.28	3.96	4.60			
	平均値	454.67	0.00	533.67	353.00	362.17			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
赤血球 ベックマンコールターJAJ012	施設数	4	2	2	4	4			
	標準偏差	8.02	5.50	2.50	5.52	3.77			
	平均値	447.50	282.50	527.50	354.00	363.25			
赤血球 シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	442.00	285.00	0.00	358.00	372.00			
赤血球 アボットジャパンJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	3.09	1.00	3.00	3.12	2.94			
	平均値	448.67	283.00	529.00	352.83	360.00			
赤血球 アボットジャパンJAR409	施設数	2	1	1	2	2			
	標準偏差	5.50	0.00	0.00	4.50	6.00			
	平均値	457.50	288.00	541.00	354.50	364.00			
赤血球 日本光電JAS303	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	455.00	297.00	0.00	367.00	371.00			
白血球 日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	57.00	31.00	0.00	73.00	36.00			
白血球 シスメックスJAB511	施設数	3	3	0	3	3			
	標準偏差	0.82	0.47	0.00	0.94	1.25			
	平均値	55.00	28.33	0.00	72.67	36.33			
白血球 シスメックスJAB512	施設数	138	73	83	138	138			
	標準偏差	0.58	0.48	1.76	1.40	0.88			
	平均値	57.14	28.69	152.36	73.19	36.71			
白血球 シスメックスJAB514	施設数	26	8	18	26	26			
	標準偏差	0.87	0.66	2.56	1.13	0.61			
	平均値	58.31	28.25	162.67	72.92	36.04			
白血球 シスメックスJAB516	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	2.50	0.50	0.00	1.00	0.50			
	平均値	57.50	28.50	0.00	72.00	35.50			
白血球 シスメックスJAB517	施設数	27	16	13	27	27			
	標準偏差	0.60	0.60	2.31	1.30	0.92			
	平均値	56.99	28.12	155.46	74.93	37.40			
白血球 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	61.00	0.00	159.00	72.00	36.00			
白血球 ベックマンコールターJAJ005	施設数	2	0	2	1	1			
	標準偏差	1.00	0.00	3.50	0.00	0.00			
	平均値	61.00	0.00	161.50	74.00	38.00			
白血球 ベックマンコールターJAJ011	施設数	6	0	6	6	6			
	標準偏差	0.00	0.00	2.00	0.94	0.69			
	平均値	61.00	0.00	158.00	73.33	36.83			
白血球 ベックマンコールターJAJ012	施設数	4	2	2	4	4			
	標準偏差	0.71	0.50	1.00	2.29	1.48			
	平均値	61.00	33.50	161.00	69.50	34.75			
白血球 シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	52.00	26.00	0.00	68.00	34.00			
白血球 アボットジャパンJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	1.08	0.00	4.00	3.19	1.55			
	平均値	54.50	29.00	144.00	70.50	35.17			
白血球 アボットジャパンJAR409	施設数	2	1	1	2	2			
	標準偏差	1.00	0.00	0.00	7.50	4.00			
	平均値	56.00	28.00	155.00	65.50	32.00			

(1)臨床化学・血液学検査

検査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
白血球 日本光電JAS303	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	55.00	31.00	0.00	69.00	35.00			
ヘマトクリット 日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	42.10	24.10	0.00	29.80	35.50			
ヘマトクリット シスメックスJAB511	施設数	3	3	0	3	3			
	標準偏差	0.22	0.28	0.00	0.08	0.12			
	平均値	34.50	19.90	0.00	29.10	33.47			
ヘマトクリット シスメックスJAB512	施設数	138	73	83	138	138			
	標準偏差	0.26	0.17	0.32	0.34	0.36			
	平均値	38.26	22.37	48.97	29.90	34.35			
ヘマトクリット シスメックスJAB514	施設数	26	8	18	26	26			
	標準偏差	0.43	0.28	0.40	0.34	0.37			
	平均値	37.37	21.90	47.77	29.80	34.20			
ヘマトクリット シスメックスJAB516	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	0.40	0.20	0.00	0.40	0.80			
	平均値	37.00	21.70	0.00	29.30	34.00			
ヘマトクリット シスメックスJAB517	施設数	27	16	13	27	27			
	標準偏差	0.42	0.16	0.72	0.39	0.50			
	平均値	37.87	21.69	48.15	30.19	34.54			
ヘマトクリット 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	36.10	0.00	47.50	29.30	34.70			
ヘマトクリット ベックマンコールターJAJ005	施設数	2	0	2	1	1			
	標準偏差	0.85	0.00	1.25	0.00	0.00			
	平均値	39.25	0.00	51.95	28.90	35.20			
ヘマトクリット ベックマンコールターJAJ011	施設数	6	0	6	6	6			
	標準偏差	0.37	0.00	0.41	0.63	0.65			
	平均値	39.13	0.00	51.12	29.40	35.05			
ヘマトクリット ベックマンコールターJAJ012	施設数	4	2	2	4	4			
	標準偏差	0.50	0.20	0.25	0.54	0.51			
	平均値	39.28	22.60	51.05	30.22	35.72			
ヘマトクリット シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	35.30	20.30	0.00	31.70	36.50			
ヘマトクリット アボットジヤパンJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	0.22	0.05	0.25	0.26	0.27			
	平均値	35.80	20.45	46.65	30.33	35.18			
ヘマトクリット アボットジヤパンJAR409	施設数	2	1	1	2	2			
	標準偏差	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00			
	平均値	34.30	19.30	44.60	30.40	35.20			
ヘマトクリット 日本光電JAS303	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	39.10	22.90	0.00	29.40	34.90			
血小板 日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	30.50	11.30	0.00	28.40	20.30			
血小板 シスメックスJAB511	施設数	3	3	0	3	3			
	標準偏差	1.39	0.67	0.00	0.90	0.73			
	平均値	27.47	10.70	0.00	27.07	18.70			
血小板 シスメックスJAB512	施設数	138	73	83	138	138			
	標準偏差	0.39	0.25	1.13	0.67	0.40			
	平均値	26.13	10.24	71.29	28.88	19.87			

(1)臨床化学・血液学検査

検査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
血小板 シスメックスJAB514	施設数	26	8	18	26	26			
	標準偏差	0.70	0.30	1.32	0.54	0.40			
	平均値	26.08	9.98	70.98	28.08	19.21			
血小板 シスメックスJAB516	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	1.30	1.30	0.00	0.10	0.30			
	平均値	24.70	9.30	0.00	26.40	18.20			
血小板 シスメックスJAB517	施設数	27	16	13	27	27			
	標準偏差	0.62	0.63	0.96	0.45	0.51			
	平均値	26.79	9.65	73.18	28.22	19.51			
血小板 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	26.10	0.00	69.10	28.50	19.00			
血小板 ベックマンコールターJAJ005	施設数	2	0	2	1	1			
	標準偏差	0.35	0.00	0.30	0.00	0.00			
	平均値	21.75	0.00	59.30	25.50	17.10			
血小板 ベックマンコールターJAJ011	施設数	6	0	6	6	6			
	標準偏差	0.40	0.00	1.24	0.81	0.39			
	平均値	23.22	0.00	60.65	26.20	18.32			
血小板 ベックマンコールターJAJ012	施設数	4	2	2	4	4			
	標準偏差	0.29	0.00	0.25	0.75	0.64			
	平均値	23.68	9.40	62.25	24.72	17.20			
血小板 シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	20.90	8.40	0.00	25.50	18.20			
血小板 アボットシヤパンJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	0.51	0.25	1.40	0.73	0.35			
	平均値	26.68	11.65	68.50	28.67	19.62			
血小板 アボットシヤパンJAR409	施設数	2	1	1	2	2			
	標準偏差	0.30	0.00	0.00	0.00	0.35			
	平均値	26.80	12.80	71.10	26.10	17.85			
血小板 日本光電JAS303	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	34.50	14.30	0.00	32.80	22.70			
平均赤血球容積 日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	92.40	83.40	0.00	84.60	96.10			
平均赤血球容積 シスメックスJAB511	施設数	3	3	0	3	3			
	標準偏差	0.22	0.22	0.00	0.45	0.45			
	平均値	77.50	70.30	0.00	83.23	92.73			
平均赤血球容積 シスメックスJAB512	施設数	138	73	83	138	138			
	標準偏差	0.58	0.53	0.64	0.95	1.01			
	平均値	83.67	76.05	91.59	84.33	94.00			
平均赤血球容積 シスメックスJAB514	施設数	26	8	18	26	26			
	標準偏差	0.76	0.89	0.62	0.66	0.85			
	平均値	82.45	76.03	89.45	84.72	94.36			
平均赤血球容積 シスメックスJAB516	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	0.25	0.10	0.00	0.30	0.15			
	平均値	81.25	75.10	0.00	83.10	92.85			
平均赤血球容積 シスメックスJAB517	施設数	27	16	13	27	27			
	標準偏差	0.76	0.53	0.90	0.83	0.98			
	平均値	83.05	75.50	90.35	85.65	95.09			
平均赤血球容積 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	82.60	0.00	92.10	86.20	99.40			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
平均赤血球容積 ヘックマンコールドーJAJ005	施設数	2	0	2	1	1			
	標準偏差	0.05	0.00	0.40	0.00	0.00			
	平均値	84.75	0.00	94.30	83.10	97.50			
平均赤血球容積 ヘックマンコールドーJAJ011	施設数	6	0	6	6	6			
	標準偏差	1.11	0.00	1.12	1.90	2.13			
	平均値	86.07	0.00	95.82	83.27	96.80			
平均赤血球容積 ヘックマンコールドーJAJ012	施設数	4	2	2	4	4			
	標準偏差	1.04	0.80	0.85	1.19	0.80			
	平均値	87.85	79.90	97.05	85.40	98.52			
平均赤血球容積 シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	79.70	71.00	0.00	88.50	98.20			
平均赤血球容積 アホットジャハンJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	0.62	0.05	0.70	0.12	0.31			
	平均値	80.08	72.25	88.40	85.97	97.62			
平均赤血球容積 アホットジャハンJAR409	施設数	2	1	1	2	2			
	標準偏差	1.30	0.00	0.00	1.45	1.65			
	平均値	74.80	66.90	82.30	85.65	96.85			
平均赤血球容積 日本光電JAS303	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	85.90	77.10	0.00	80.10	94.10			

(2)尿検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
尿糖 [1・2] 試験紙法肉眼判定・機器判定	施設数	356	356	176	184	181	178	182	178
	標準偏差	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均値	1	3	3	3	4	4	1	4
尿蛋白 [1・2] 試験紙法肉眼判定・機器判定	施設数	356	356	176	184	181	178	182	178
	標準偏差	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均値	3	1	3	4	3	4	4	1
尿潜血 [1・2] 試験紙法肉眼判定・機器判定	施設数	356	356	176	184	181	178	182	178
	標準偏差	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均値	1	1	3	2	1	2	2	3

表18 調査項目別・測定方法別・平均値および平均値評価規準

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目・測定法	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
総コレステロール [11・21]	平均値	117.98	130.69	143.55	156.52	164.93	178.11	191.01	203.90
コレステロール酸化酵素法・脱水素酵素法	平均値 評価規準	4.72 5.23	5.23 5.74	5.74 6.26	6.26 6.60	6.60 7.12	7.12 7.64	7.64 8.16	8.16
中性脂肪 [11・21]	平均値	46.65	57.02	67.23	77.28	84.56	94.14	105.10	115.06
酵素UV法・比色法グリセロールを消去する方法	平均値 評価規準	2.47 3.02	3.02 3.56	3.56 4.10	4.10 4.48	4.48 4.99	4.99 5.57	5.57 6.10	6.10
尿酸 [31]	平均値	5.23	5.67	6.10	6.53	6.80	7.24	7.68	8.12
ウリカーゼ・ヘルオキシダーゼ法	平均値 評価規準	0.13 0.14	0.14 0.15	0.15 0.16	0.16 0.16	0.16 0.17	0.17 0.18	0.18 0.19	0.19
クレアチニン [21]	平均値	1.11	1.66	2.21	2.76	3.14	3.70	4.27	4.82
酵素法	平均値 評価規準	0.05 0.06	0.06 0.08	0.08 0.09	0.09 0.11	0.11 0.13	0.13 0.15	0.15 0.16	0.16
AST [11]	平均値	20.14	38.09	56.25	74.58	86.61	104.94	123.52	141.79
標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値 評価規準	1.09 2.06	2.06 3.04	3.04 4.03	4.03 4.68	4.68 5.67	5.67 6.67	6.67 7.66	7.66
ALT [11]	平均値	16.71	32.09	47.58	63.14	73.45	89.25	104.98	120.34
標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値 評価規準	1.00 1.93	1.93 2.85	2.85 3.79	3.79 4.41	4.41 5.36	5.36 6.30	6.30 7.22	7.22
γ-GT [11]	平均値	29.63	46.82	64.01	81.21	92.69	110.07	127.59	144.33
JSCC標準化対応法	平均値 評価規準	1.60 2.53	2.53 3.46	3.46 4.39	4.39 5.01	5.01 5.94	5.94 6.89	6.89 7.79	7.79
血糖 [12・21・31]	平均値	92.95	109.32	125.81	142.30	153.43	169.64	186.32	202.71
ブドウ糖酸化酵素電極法/ヘキサーゼ・IIV法/ブドウ糖脱水素酵素法	平均値 評価規準	2.04 2.41	2.41 2.77	2.77 3.13	3.13 3.38	3.38 3.73	3.73 4.10	4.10 4.46	4.46
HDLコレステロール [01-0403]	平均値	32.25	44.91	50.63	51.64	32.71			
沈殿操作を行わない方法 協和メテックス(メタボリッドHDL-C)	平均値 評価規準	0.84 1.17	1.17 1.32	1.32 1.34	1.34 0.85	0.85			
HDLコレステロール [01-1201]	平均値	35.43	50.90	56.80	53.36	34.94			
沈殿操作を行わない方法 積水メディカル(コレステステN-HDL-クオリシエン)	平均値 評価規準	0.92 1.32	1.32 1.48	1.48 1.39	1.39 0.91	0.91			
LDLコレステロール [01-0403]	平均値	74.48	105.58	127.93	156.44	123.30			
協和メテックス(メタボリッド LDL-C)	平均値 評価規準	2.53 3.59	3.59 4.35	4.35 5.32	5.32 4.19	4.19			
LDLコレステロール [01-1201]	平均値	77.34	110.62	136.47	164.07	135.49			
積水メディカル(コレステステLDL-クオリシエン)LDL-エクセライザLDL)	平均値 評価規準	2.63 3.76	3.76 4.64	4.64 5.58	5.58 4.61	4.61			
LDLコレステロール [01-2302]	平均値	82.50	116.20	141.71	159.50	135.17			
和光純薬(LタイプLDL-CM)	平均値 評価規準	2.81 3.95	3.95 4.82	4.82 5.42	5.42 4.60	4.60			
HbA1c [01-2701]	平均値	5.38	6.24	7.47	6.08	5.20			
HPLC法アーグレイ	平均値 評価規準	0.15 0.17	0.17 0.20	0.20 0.16	0.16 0.14	0.14			
HbA1c [01-2901]	平均値	5.42	6.42	7.72	6.08	5.09			
HPLC法東ソー	平均値 評価規準	0.15 0.17	0.17 0.21	0.21 0.16	0.16 0.14	0.14			
HbA1c [02-0401・03]	平均値	5.50	6.69	8.07	5.98	5.03			
免疫学的方法協和メテックス(汎用自動分析装置)凍乾品・液状品	平均値 評価規準	0.15 0.18	0.18 0.22	0.22 0.16	0.16 0.14	0.14			
HbA1c [02-0402・04]	平均値	5.50	6.58	8.02	5.97	5.13			
免疫学的方法協和メテックス(DM-JACKシリーズ)凍乾品・液状品	平均値 評価規準	0.15 0.18	0.18 0.22	0.22 0.16	0.16 0.14	0.14			
HbA1c [02-2401]	平均値	5.44	6.60	7.90	6.02	5.10			
免疫学的方法富士レボ	平均値 評価規準	0.15 0.18	0.18 0.21	0.21 0.16	0.16 0.14	0.14			
HbA1c [03-0401]	平均値	5.47	6.35	7.66	5.99	5.05			
酵素法協和メテックス	平均値 評価規準	0.15 0.17	0.17 0.21	0.21 0.16	0.16 0.14	0.14			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目・測定法	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
HbA1c [03-1201] 酵素法積水メディカル	平均値	5.40	6.34	7.61	6.04	5.12			
	平均値	0.15	0.17	0.21	0.16	0.14			
	評価規準								
HbA1c [03-2701] 酵素法アークレイ(スポットケム)	平均値	5.37	6.31	7.58	6.07	5.16			
	平均値	0.14	0.17	0.20	0.16	0.14			
	評価規準								
ヘモグロビン [1・2・9] シアンメトヘモグロビン法/非シアン界面 活性割法/その他(比色法/ノニシア)	平均値	13.36	7.43	17.52	9.39	11.70			
	平均値	0.28	0.16	0.37	0.20	0.25			
	評価規準								
赤血球 シスメックスJAB512	平均値	457.17	294.07	534.21	354.30	365.25			
	平均値	10.06	6.47	11.75	7.79	8.04			
	評価規準								
赤血球 シスメックスJAB514	平均値	452.00	288.13	534.06	352.20	362.79			
	平均値	9.94	6.34	11.75	7.75	7.98			
	評価規準								
赤血球 シスメックスJAB517	平均値	455.46	287.20	532.62	352.86	364.36			
	平均値	10.02	6.32	11.72	7.76	8.02			
	評価規準								
赤血球 ベックマンコールター-JAJ011	平均値	454.67	0.00	533.67	353.00	362.17			
	平均値	10.00	0.00	11.74	7.77	7.97			
	評価規準								
白血球 シスメックスJAB512	平均値	57.14	28.69	152.36	73.19	36.71			
	平均値	4.17	2.09	11.12	5.34	2.68			
	評価規準								
白血球 シスメックスJAB514	平均値	58.31	28.25	162.67	72.92	36.04			
	平均値	4.26	2.06	11.87	5.32	2.63			
	評価規準								
白血球 シスメックスJAB517	平均値	56.99	28.13	155.46	74.93	37.40			
	平均値	4.16	2.05	11.35	5.47	2.73			
	評価規準								
白血球 ベックマンコールター-JAJ011	平均値	61.00	0.00	158.00	73.33	36.83			
	平均値	4.45	0.00	11.53	5.35	2.69			
	評価規準								
ヘマトクリット シスメックスJAB512	平均値	38.26	22.37	48.97	29.90	34.35			
	平均値	1.57	0.92	2.01	1.23	1.41			
	評価規準								
ヘマトクリット シスメックスJAB514	平均値	37.37	21.90	47.77	29.80	34.20			
	平均値	1.53	0.90	1.96	1.22	1.40			
	評価規準								
ヘマトクリット シスメックスJAB517	平均値	37.87	21.69	48.15	30.19	34.54			
	平均値	1.55	0.89	1.97	1.24	1.42			
	評価規準								
ヘマトクリット ベックマンコールター-JAJ011	平均値	39.13	0.00	51.12	29.40	35.05			
	平均値	1.60	0.00	2.10	1.21	1.44			
	評価規準								
血小板 シスメックスJAB512	平均値	26.13	10.24	71.29	28.88	19.87			
	平均値	1.75	0.69	4.78	1.93	1.33			
	評価規準								
血小板 シスメックスJAB514	平均値	26.08	9.98	70.98	28.08	19.21			
	平均値	1.75	0.67	4.76	1.88	1.29			
	評価規準								
血小板 シスメックスJAB517	平均値	26.79	9.65	73.18	28.22	19.51			
	平均値	1.79	0.65	4.90	1.89	1.31			
	評価規準								
血小板 ベックマンコールター-JAJ011	平均値	23.22	0.00	60.65	26.20	18.32			
	平均値	1.56	0.00	4.06	1.76	1.23			
	評価規準								

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目・測定法	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
平均赤血球容積 シスメックスJAB512	平均値	83.67	76.05	91.59	84.33	94.00			
	平均値 評価規準	1.76	1.60	1.92	1.77	1.97			
平均赤血球容積 シスメックスJAB514	平均値	82.45	76.03	89.45	84.72	94.36			
	平均値 評価規準	1.73	1.60	1.88	1.78	1.98			
平均赤血球容積 シスメックスJAB517	平均値	83.05	75.50	90.35	85.65	95.09			
	平均値 評価規準	1.74	1.59	1.90	1.80	2.00			
平均赤血球容積 ヘックマンコールター-JAJ011	平均値	86.07	0.00	95.82	83.27	96.80			
	平均値 評価規準	1.81	0.00	2.01	1.75	2.03			

(2)尿検査

調査項目・測定法	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
尿糖 [1・2] 試験紙法肉眼判定・機器判定	平均値	1	3	3	3	4	4	1	4
	平均値 評価規準	-	-	-	-	-	-	-	-
尿蛋白 [1・2] 試験紙法肉眼判定・機器判定	平均値	3	1	3	4	3	4	4	1
	平均値 評価規準	-	-	-	-	-	-	-	-
尿潜血 [1・2] 試験紙法肉眼判定・機器判定	平均値	1	1	3	2	1	2	2	3
	平均値 評価規準	-	-	-	-	-	-	-	-

表19 調査項目別・測定方法別実施件数

調査項目	測定法コード	測定方法名	実施施設	備考
総コレステロール	11	コレステロール酸化酵素法	326	
	21	コレステロール脱水素酵素法	36	
	81	ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	1	評価せず
中性脂肪	11	酵素UV法グリセロールを消去する方法	8	
	21	酵素比色法グリセロールを消去する方法	354	
	81	ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	1	評価せず
尿酸	31	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	362	
	81	ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	1	評価せず
クレアチニン	21	酵素法	362	
	81	ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	1	評価せず
	82	ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	1	評価せず
AST	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	362	
	82	ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	1	評価せず
	85	ドライケミストリー法ヒトロスJ(オーソ)	1	評価せず
ALT	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	362	
	82	ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	1	評価せず
	85	ドライケミストリー法ヒトロスJ(オーソ)	1	評価せず
γ-GT	11	JSCC標準化対応法	362	
	85	ドライケミストリー法ヒトロスJ(オーソ)	1	評価せず
血糖	12	ブドウ糖酸化酵素電極法	32	
	21	ヘキソナーゼ・UV法	325	
	31	ブドウ糖脱水素酵素法	5	
	81	ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	1	評価せず
	82	ドライケミストリー法富士ドライケム(富士フィルム)	1	評価せず
HDLコレステロール	01-0403	沈殿操作を行わない方法 協和メックス(メタボリト HDL-C)	183	
	01-0801	沈殿操作を行わない方法 シノテスト(クイックオートネオHDL-C)	1	評価せず
	01-1201	沈殿操作を行わない方法 積水メディカル(コレステストN-HDL クオリシエントHDL エクセライザHDL)	168	
	01-1301	沈殿操作を行わない方法 テンカ生研(EX N)	1	評価せず
	01-2303	沈殿操作を行わない方法 和光純薬(Lタイプワーク-HDL-CM2)	1	評価せず
	01-2304	沈殿操作を行わない方法 和光純薬(Lタイプワーク-HDL-CM3)	9	評価せず
	08-2801	ドライケミストリー法ヒトロス(オーソ)	1	評価せず
LDLコレステロール	01-0401	協和メックス(テタミナーL LDL-C)	2	評価せず
	01-0403	協和メックス(メタボリト LDL-C)	181	
	01-0801	シノテスト(クイックオートネオLDL-C)	1	評価せず
	01-1201	積水メディカル(コレステストLDL クオリシエントLDL エクセライザLDL)	166	
	01-1301	テンカ生研(LDL-EX N)	1	評価せず
	01-1302	テンカ生研(デュアルCHO T&L)	1	評価せず
	01-2302	和光純薬(LタイプLDL-CM)	11	
	01-2801	オーソ(ヒトロスマイクロチップdLDL)	1	評価せず
HbA1c	01-2701	HPLC法アークレイ	25	
	01-2901	HPLC法東ソー	75	
	02-0401	免疫学的方法協和メックス(汎用自動分析装置)凍乾品	68	
	02-0402	免疫学的方法協和メックス(DM-JACKシリーズ)凍乾品	3	
	02-0403	免疫学的方法協和メックス(汎用自動分析装置)液状品	26	
	02-0404	免疫学的方法協和メックス(DM-JACKシリーズ)液状品	26	
	02-2401	免疫学的方法富士レビオ	28	
	03-0401	酵素法協和メックス	60	
	03-1201	酵素法積水メディカル	10	
	03-2701	酵素法アークレイ(スポットケム)	40	
尿糖	03-3501	酵素法日本電子	1	評価せず
尿蛋白	1	試験紙法肉眼判定	177	
	2	試験紙法機器判定	186	
尿蛋白	1	試験紙法肉眼判定	176	
	2	試験紙法機器判定	187	

表19 調査項目別・測定方法別実施件数

調査項目	測定法コード	測定方法名	実施施設	備考
尿潜血	1	試験紙法肉眼判定	176	
	2	試験紙法機器判定	187	
ヘモグロビン	1	シアンメヘモグロビン法	16	
	2	非シアン界面活性剤法	340	
	9	その他(比色法[ノニシアン法]/比色法[四級アンモニウム塩法]/SLSヘモグロビン法)	5	
赤血球		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	277	
		JAB514	26	
		JAB516	2	評価せず
		JAB517	31	
		JAC910	1	評価せず
		JAJ005	2	評価せず
		JAJ011	6	
		JAJ012	4	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
		JAS303	1	評価せず
白血球		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	277	
		JAB514	26	
		JAB516	2	評価せず
		JAB517	31	
		JAC910	1	評価せず
		JAJ005	2	評価せず
		JAJ011	6	
		JAJ012	4	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
		JAS303	1	評価せず
ヘマトクリット		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	277	
		JAB514	26	
		JAB516	2	評価せず
		JAB517	31	
		JAC910	1	評価せず
		JAJ005	2	評価せず
		JAJ011	6	
		JAJ012	4	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
		JAS303	1	評価せず

表19 調査項目別・測定方法別実施件数

調査項目	測定法コード	測定方法名	実施施設	備考
血小板		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	277	
		JAB514	26	
		JAB516	2	評価せず
		JAB517	31	
		JAC910	1	評価せず
		JAJ005	2	評価せず
		JAJ011	6	
		JAJ012	4	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
		JAS303	1	評価せず
平均赤血球容積		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	277	
		JAB514	26	
		JAB516	2	評価せず
		JAB517	31	
		JAC910	1	評価せず
		JAJ005	2	評価せず
		JAJ011	6	
		JAJ012	4	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
		JAS303	1	評価せず

VII. 第24回精度管理調査試料測定結果（2）

調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比

付表 1－1（全施設）

付表 1－2（自施設測定）

付表 1－3（外部機関測定）

測定法別の評価点ランク別施設数、構成比

付表 2－1（全施設）

付表 2－2（自施設測定）

付表 2－3（外部機関測定）

尿検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比

付表 3－1（尿糖）

付表 3－2（尿蛋白）

付表 3－3（尿潜血）

付表 1-1 調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比(全施設分)

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合 計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	24回	349	96.1%	8	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	363	100.0%
	23回	341	94.7%	12	3.3%	5	1.4%	1	0.3%	1	0.3%	360	100.0%
	22回	334	94.1%	10	2.8%	6	1.7%	3	0.8%	2	0.6%	355	100.0%
中性脂肪	24回	348	95.9%	6	1.7%	2	0.6%	3	0.8%	4	1.1%	363	100.0%
	23回	328	91.1%	10	2.8%	15	4.2%	6	1.7%	1	0.3%	360	100.0%
	22回	340	95.2%	9	2.5%	4	1.1%	2	0.6%	2	0.6%	357	100.0%
尿酸	24回	345	95.0%	9	2.5%	5	1.4%	1	0.3%	3	0.8%	363	100.0%
	23回	337	93.6%	14	3.9%	4	1.1%	1	0.3%	4	1.1%	360	100.0%
	22回	329	92.2%	12	3.4%	6	1.7%	5	1.4%	5	1.4%	357	100.0%
クレアチニン	24回	353	97.0%	5	1.4%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.8%	364	100.0%
	23回	327	90.8%	3	0.8%	7	1.9%	15	4.2%	8	2.2%	360	100.0%
	22回	335	93.8%	19	5.3%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	357	100.0%
AST	24回	351	96.4%	5	1.4%	3	0.8%	1	0.3%	4	1.1%	364	100.0%
	23回	316	87.8%	14	3.9%	13	3.6%	1	0.3%	16	4.4%	360	100.0%
	22回	317	88.8%	16	4.5%	12	3.4%	8	2.2%	4	1.1%	357	100.0%
ALT	24回	353	97.0%	5	1.4%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.8%	364	100.0%
	23回	338	93.9%	9	2.5%	4	1.1%	9	2.5%	0	0.0%	360	100.0%
	22回	331	92.7%	19	5.3%	4	1.1%	2	0.6%	1	0.3%	357	100.0%
γ-GT	24回	349	96.1%	6	1.7%	3	0.8%	1	0.3%	4	1.1%	363	100.0%
	23回	338	93.9%	15	4.2%	5	1.4%	2	0.6%	0	0.0%	360	100.0%
	22回	325	91.0%	15	4.2%	10	2.8%	7	2.0%	0	0.0%	357	100.0%
血糖	24回	349	95.9%	9	2.5%	2	0.5%	0	0.0%	4	1.1%	364	100.0%
	23回	332	92.2%	9	2.5%	7	1.9%	6	1.7%	6	1.7%	360	100.0%
	22回	324	90.8%	17	4.8%	5	1.4%	5	1.4%	6	1.7%	357	100.0%
HDLコレステロール	24回	344	94.5%	7	1.9%	8	2.2%	1	0.3%	4	1.1%	364	100.0%
	23回	340	94.4%	10	2.8%	5	1.4%	1	0.3%	4	1.1%	360	100.0%
	22回	337	94.1%	12	3.4%	8	2.2%	0	0.0%	1	0.3%	358	100.0%
LDLコレステロール	24回	362	99.5%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	364	100.0%
	23回	352	98.1%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.1%	359	100.0%
	22回	355	99.2%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	358	100.0%
HbA 1c	24回	352	97.2%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.6%	6	1.7%	362	100.0%
	23回	346	96.6%	4	1.1%	4	1.1%	2	0.6%	2	0.6%	358	100.0%
	22回	348	97.5%	2	0.6%	3	0.8%	1	0.3%	3	0.8%	357	100.0%
尿糖	24回	294	81.0%	61	16.8%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.1%	363	100.0%
	23回	300	83.6%	48	13.4%	4	1.1%	2	0.6%	5	1.4%	359	100.0%
	22回	285	79.8%	57	16.0%	5	1.4%	3	0.8%	7	2.0%	357	100.0%
尿蛋白	24回	353	97.2%	6	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	363	100.0%
	23回	345	96.1%	12	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	359	100.0%
	22回	345	96.6%	6	1.7%	3	0.8%	1	0.3%	2	0.6%	357	100.0%
尿潜血	24回	328	90.4%	34	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	363	100.0%
	23回	324	90.3%	28	7.8%	5	1.4%	0	0.0%	2	0.6%	359	100.0%
	22回	332	93.0%	16	4.5%	5	1.4%	2	0.6%	2	0.6%	357	100.0%
ヘモグロビン	24回	351	97.2%	3	0.8%	2	0.6%	1	0.3%	4	1.1%	361	100.0%
	23回	347	96.7%	8	2.2%	3	0.8%	0	0.0%	1	0.3%	359	100.0%
	22回	341	95.5%	5	1.4%	6	1.7%	3	0.8%	2	0.6%	357	100.0%
赤血球	24回	358	99.2%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100.0%
	23回	355	98.9%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	359	100.0%
	22回	352	98.6%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	357	100.0%
白血球	24回	361	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100.0%
	23回	357	99.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	359	100.0%
	22回	352	98.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	4	1.1%	357	100.0%
ヘマトクリット	24回	361	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100.0%
	23回	355	98.9%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	3	0.8%	359	100.0%
	22回	354	99.2%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	357	100.0%
血小板	24回	351	97.2%	2	0.6%	7	1.9%	0	0.0%	1	0.3%	361	100.0%
	23回	352	98.1%	2	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	3	0.8%	359	100.0%
	22回	348	97.5%	4	1.1%	2	0.6%	1	0.3%	2	0.6%	357	100.0%
平均赤血球容積	24回	356	98.6%	2	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	361	100.0%
	23回	345	96.1%	9	2.5%	3	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	359	100.0%
	22回	338	94.7%	5	1.4%	10	2.8%	2	0.6%	2	0.6%	357	100.0%

付表 1-2 調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比(自施設分)

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合 計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	24回	151	96.8%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	156	100.0%
	23回	141	88.7%	11	6.9%	5	3.1%	1	0.6%	1	0.6%	159	100.0%
	22回	139	89.1%	8	5.1%	6	3.8%	1	0.6%	2	1.3%	156	100.0%
中性脂肪	24回	145	92.9%	5	3.2%	1	0.6%	2	1.3%	3	1.9%	156	100.0%
	23回	133	83.6%	9	5.7%	11	6.9%	5	3.1%	1	0.6%	159	100.0%
	22回	145	91.8%	5	3.2%	4	2.5%	2	1.3%	2	1.3%	158	100.0%
尿酸	24回	145	92.9%	5	3.2%	4	2.6%	1	0.6%	1	0.6%	156	100.0%
	23回	141	88.7%	11	6.9%	3	1.9%	1	0.6%	3	1.9%	159	100.0%
	22回	134	84.8%	9	5.7%	6	3.8%	4	2.5%	5	3.2%	158	100.0%
クレアチニン	24回	151	96.2%	3	1.9%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.6%	157	100.0%
	23回	144	90.6%	2	1.3%	4	2.5%	7	4.4%	2	1.3%	159	100.0%
	22回	146	92.4%	9	5.7%	2	1.3%	1	0.6%	0	0.0%	158	100.0%
AST	24回	146	93.0%	5	3.2%	2	1.3%	1	0.6%	3	1.9%	157	100.0%
	23回	128	80.5%	13	8.2%	6	3.8%	0	0.0%	12	7.5%	159	100.0%
	22回	134	84.8%	10	6.3%	5	3.2%	5	3.2%	4	2.5%	158	100.0%
ALT	24回	148	94.3%	4	2.5%	3	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	157	100.0%
	23回	142	89.3%	5	3.1%	4	2.5%	8	5.0%	0	0.0%	159	100.0%
	22回	143	90.5%	11	7.0%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	158	100.0%
γ-GT	24回	147	94.2%	3	1.9%	3	1.9%	0	0.0%	3	1.9%	156	100.0%
	23回	145	91.2%	10	6.3%	2	1.3%	2	1.3%	0	0.0%	159	100.0%
	22回	134	84.8%	10	6.3%	9	5.7%	5	3.2%	0	0.0%	158	100.0%
血糖	24回	147	93.6%	6	3.8%	1	0.6%	0	0.0%	3	1.9%	157	100.0%
	23回	135	84.9%	7	4.4%	7	4.4%	5	3.1%	5	3.1%	159	100.0%
	22回	128	81.0%	14	8.9%	5	3.2%	5	3.2%	6	3.8%	158	100.0%
HDLコレステロール	24回	140	89.7%	6	3.8%	6	3.8%	1	0.6%	3	1.9%	156	100.0%
	23回	142	89.3%	9	5.7%	4	2.5%	1	0.6%	3	1.9%	159	100.0%
	22回	143	90.5%	8	5.1%	6	3.8%	0	0.0%	1	0.6%	158	100.0%
LDLコレステロール	24回	154	98.7%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	156	100.0%
	23回	154	97.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	3	1.9%	158	100.0%
	22回	156	98.7%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	158	100.0%
HbA 1c	24回	147	94.8%	1	0.6%	1	0.6%	2	1.3%	4	2.6%	155	100.0%
	23回	148	94.3%	2	1.3%	4	2.5%	2	1.3%	1	0.6%	157	100.0%
	22回	151	96.2%	2	1.3%	2	1.3%	1	0.6%	1	0.6%	157	100.0%
尿糖	24回	273	80.1%	60	17.6%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.2%	341	100.0%
	23回	277	82.7%	47	14.0%	4	1.2%	2	0.6%	5	1.5%	335	100.0%
	22回	267	79.2%	56	16.6%	5	1.5%	3	0.9%	6	1.8%	337	100.0%
尿蛋白	24回	331	97.1%	6	1.8%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	341	100.0%
	23回	321	95.8%	12	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	335	100.0%
	22回	326	96.7%	6	1.8%	3	0.9%	1	0.3%	1	0.3%	337	100.0%
尿潜血	24回	306	89.7%	34	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	341	100.0%
	23回	300	89.6%	28	8.4%	5	1.5%	0	0.0%	2	0.6%	335	100.0%
	22回	313	92.9%	16	4.7%	5	1.5%	1	0.3%	2	0.6%	337	100.0%
ヘモグロビン	24回	147	93.6%	3	1.9%	2	1.3%	1	0.6%	4	2.5%	157	100.0%
	23回	150	93.8%	6	3.8%	3	1.9%	0	0.0%	1	0.6%	160	100.0%
	22回	145	91.2%	5	3.1%	6	3.8%	3	1.9%	0	0.0%	159	100.0%
赤血球	24回	154	98.1%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%
	23回	156	97.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%	160	100.0%
	22回	156	98.1%	2	1.3%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	159	100.0%
白血球	24回	157	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%
	23回	158	98.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	160	100.0%
	22回	156	98.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	2	1.3%	159	100.0%
ヘマトクリット	24回	157	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%
	23回	156	97.5%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	3	1.9%	160	100.0%
	22回	159	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	159	100.0%
血小板	24回	152	96.8%	1	0.6%	3	1.9%	0	0.0%	1	0.6%	157	100.0%
	23回	154	96.3%	1	0.6%	2	1.3%	0	0.0%	3	1.9%	160	100.0%
	22回	153	96.2%	4	2.5%	1	0.6%	1	0.6%	0	0.0%	159	100.0%
平均赤血球容積	24回	154	98.1%	2	1.3%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%
	23回	153	95.6%	2	1.3%	3	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	160	100.0%
	22回	152	95.6%	4	2.5%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.6%	159	100.0%

付表 1-3 調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比(外部施設分)

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合 計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	24回	198	95.7%	5	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.9%	207	100.0%
	23回	200	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	201	100.0%
	22回	195	98.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	199	100.0%
中性脂肪	24回	203	98.1%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	207	100.0%
	23回	195	97.0%	1	0.5%	4	2.0%	1	0.5%	0	0.0%	201	100.0%
	22回	195	98.0%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
尿酸	24回	200	96.6%	4	1.9%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
	23回	196	97.5%	3	1.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	201	100.0%
	22回	195	98.0%	3	1.5%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	199	100.0%
クレアチニン	24回	202	97.6%	2	1.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
	23回	183	91.0%	1	0.5%	3	1.5%	8	4.0%	6	3.0%	201	100.0%
	22回	189	95.0%	10	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
	24回	205	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	23回	188	93.5%	1	0.5%	7	3.5%	1	0.5%	4	2.0%	201	100.0%
	22回	183	92.0%	6	3.0%	7	3.5%	3	1.5%	0	0.0%	199	100.0%
ALT	24回	205	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	23回	196	97.5%	4	2.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	201	100.0%
	22回	188	94.5%	8	4.0%	0	0.0%	2	1.0%	1	0.5%	199	100.0%
γ-GT	24回	202	97.6%	3	1.4%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	207	100.0%
	23回	193	96.0%	5	2.5%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	201	100.0%
	22回	191	96.0%	5	2.5%	1	0.5%	2	1.0%	0	0.0%	199	100.0%
血糖	24回	202	97.6%	3	1.4%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	23回	197	98.0%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	201	100.0%
	22回	196	98.5%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
HDLコレステロール	24回	204	98.1%	1	0.5%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	208	100.0%
	23回	198	98.5%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	201	100.0%
	22回	194	97.0%	4	2.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	200	100.0%
LDLコレステロール	24回	208	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	208	100.0%
	23回	198	98.5%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	201	100.0%
	22回	199	99.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	200	100.0%
HbA 1c	24回	205	99.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
	23回	198	98.5%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	201	100.0%
	22回	197	98.5%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	200	100.0%
尿糖	24回	21	95.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
	23回	23	95.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
	22回	18	90.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	20	100.0%
尿蛋白	24回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
	23回	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
	22回	19	95.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	20	100.0%
尿潜血	24回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
	23回	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
	22回	19	95.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	20	100.0%
ヘモグロビン	24回	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
	23回	197	99.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
	22回	196	99.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	198	100.0%
赤血球	24回	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
	23回	199	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
	22回	196	99.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	198	100.0%
白血球	24回	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
	23回	199	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
	22回	196	99.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	198	100.0%
ヘマトクリット	24回	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
	23回	199	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
	22回	195	98.5%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	198	100.0%
血小板	24回	199	97.5%	1	0.5%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
	23回	198	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
	22回	195	98.5%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	198	100.0%
平均赤血球容積	24回	202	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	204	100.0%
	23回	192	96.5%	7	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100.0%
	22回	186	93.9%	1	0.5%	8	4.0%	2	1.0%	1	0.5%	198	100.0%

付表 2-1 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	11	320	98.2%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.9%	326	89.8%
	21	32	88.9%	1	2.8%	0	0.0%	3	8.3%	36	9.9%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	353	97.2%	4	1.1%	0	0.0%	6	1.7%	363	100.0%
中性脂肪	11	7	87.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.2%
	21	343	96.9%	4	1.1%	3	0.8%	4	1.1%	354	97.5%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	351	96.7%	5	1.4%	3	0.8%	4	1.1%	363	100.0%
尿酸	31	349	96.4%	9	2.5%	1	0.3%	3	0.8%	362	99.7%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	350	96.4%	9	2.5%	1	0.3%	3	0.8%	363	100.0%
クレアチニン	21	353	97.5%	6	1.7%	0	0.0%	3	0.8%	362	99.5%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	355	97.5%	6	1.6%	0	0.0%	3	0.8%	364	100.0%
AST	11	351	97.0%	6	1.7%	1	0.3%	4	1.1%	362	99.5%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	85	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	353	97.0%	6	1.6%	1	0.3%	4	1.1%	364	100.0%
ALT	11	355	98.1%	4	1.1%	0	0.0%	3	0.8%	362	99.5%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	85	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	357	98.1%	4	1.1%	0	0.0%	3	0.8%	364	100.0%
γ-GT	11	352	97.2%	5	1.4%	1	0.3%	4	1.1%	362	99.7%
	85	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	353	97.2%	5	1.4%	1	0.3%	4	1.1%	363	100.0%
血糖	12	29	90.6%	2	6.3%	0	0.0%	1	3.1%	32	8.8%
	21	319	98.2%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.9%	325	89.3%
	31	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	355	97.5%	5	1.4%	0	0.0%	4	1.1%	364	100.0%
HDLコレステロール	01-0403	177	96.7%	4	2.2%	0	0.0%	2	1.1%	183	50.3%
	01-0801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-1201	161	95.8%	4	2.4%	1	0.6%	2	1.2%	168	46.2%
	01-1301	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-2303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-2304	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%
	08-2801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	351	96.4%	8	2.2%	1	0.3%	4	1.1%	364	100.0%
LDLコレステロール	01-0401	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%
	01-0403	181	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	181	49.7%
	01-0801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-1201	164	98.8%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	166	45.6%
	01-1301	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-1302	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-2302	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.0%
	01-2801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	362	99.5%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	364	100.0%
HbA1c	01-2701	22	88.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.0%	25	6.9%
	01-2901	73	97.3%	1	1.3%	1	1.3%	0	0.0%	75	20.7%
	02-0401	68	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	18.8%
	02-0402	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	02-0403	25	96.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	26	7.2%
	02-0404	25	96.2%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	26	7.2%
	02-2401	28	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	7.7%
	03-0401	58	96.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	60	16.6%
	03-1201	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%
	03-2701	40	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	11.0%
	03-3501	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	353	97.5%	1	0.3%	2	0.6%	6	1.7%	362	100.0%

付表 2-1 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
尿糖	1	155	87.6%	16	9.0%	2	1.1%	4	2.3%	177	48.8%
	2	177	95.2%	9	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	186	51.2%
	計	332	91.5%	25	6.9%	2	0.6%	4	1.1%	363	100.0%
尿蛋白	1	171	97.2%	3	1.7%	0	0.0%	2	1.1%	176	48.5%
	2	187	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	187	51.5%
	計	358	98.6%	3	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	363	100.0%
尿潜血	1	175	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	176	48.5%
	2	186	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	187	51.5%
	計	361	99.4%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	363	100.0%
ヘモグロビン	1	13	81.3%	1	6.3%	0	0.0%	2	12.5%	16	4.4%
	2	337	99.1%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.6%	340	94.2%
	9	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%
	計	354	98.1%	2	0.6%	1	0.3%	4	1.1%	361	100.0%
赤血球	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	277	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	277	76.7%
	JAB514	26	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.2%
	JAB516	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAB517	31	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	8.6%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAJ011	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	361	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100.0%
白血球	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	277	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	277	76.7%
	JAB514	26	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.2%
	JAB516	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAB517	31	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	8.6%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAJ011	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	361	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100.0%

付表 2-1 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
ヘマトクリット	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	277	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	277	76.7%
	JAB514	26	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.2%
	JAB516	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAB517	31	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	8.6%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAJ011	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	361	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100.0%
血小板	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	276	99.6%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	277	76.7%
	JAB514	26	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.2%
	JAB516	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAB517	27	87.1%	3	9.7%	0	0.0%	1	3.2%	31	8.6%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAJ011	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	353	97.8%	7	1.9%	0	0.0%	1	0.3%	361	100.0%
平均赤血球容積	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	276	99.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	277	76.7%
	JAB514	24	92.3%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.2%
	JAB516	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAB517	31	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	8.6%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAJ011	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	358	99.2%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	361	100.0%

付表 2-2 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	11	142	98.6%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.7%	144	92.3%
	21	9	81.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	9.1%	11	7.1%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	152	97.4%	2	1.3%	0	0.0%	2	1.3%	156	100.0%
中性脂肪	11	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%
	21	142	94.7%	3	2.0%	2	1.3%	3	2.0%	150	96.2%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	147	94.2%	4	2.6%	2	1.3%	3	1.9%	156	100.0%
尿酸	31	148	95.5%	5	3.2%	1	0.6%	1	0.6%	155	99.4%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	149	95.5%	5	3.2%	1	0.6%	1	0.6%	156	100.0%
クレアチニン	21	150	96.8%	4	2.6%	0	0.0%	1	0.6%	155	98.7%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	152	96.8%	4	2.5%	0	0.0%	1	0.6%	157	100.0%
AST	11	146	94.2%	5	3.2%	1	0.6%	3	1.9%	155	98.7%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	85	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	148	94.3%	5	3.2%	1	0.6%	3	1.9%	157	100.0%
ALT	11	150	96.8%	3	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	155	98.7%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	85	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	152	96.8%	3	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	157	100.0%
γ-GT	11	147	94.8%	5	3.2%	0	0.0%	3	1.9%	155	99.4%
	85	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	148	94.9%	5	3.2%	0	0.0%	3	1.9%	156	100.0%
血糖	12	25	92.6%	1	3.7%	0	0.0%	1	3.7%	27	17.2%
	21	118	95.9%	3	2.4%	0	0.0%	2	1.6%	123	78.3%
	31	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%
	81	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	150	95.5%	4	2.5%	0	0.0%	3	1.9%	157	100.0%
HDLコレステロール	01-0403	77	95.1%	3	3.7%	0	0.0%	1	1.2%	81	51.9%
	01-0801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	01-1201	58	90.6%	3	4.7%	1	1.6%	2	3.1%	64	41.0%
	01-1301	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	01-2303	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-2304	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	5.1%
	08-2801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	146	93.6%	6	3.8%	1	0.6%	3	1.9%	156	100.0%
LDLコレステロール	01-0401	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	01-0403	79	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	50.6%
	01-0801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	01-1201	60	96.8%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	62	39.7%
	01-1301	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	01-1302	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	01-2302	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.8%
	01-2801	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	154	98.7%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	156	100.0%
HbA1c	01-2701	19	86.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.6%	22	14.2%
	01-2901	66	97.1%	1	1.5%	1	1.5%	0	0.0%	68	43.9%
	02-0401	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	3.9%
	02-0402	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	02-0403	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.5%
	02-0404	21	95.5%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	22	14.2%
	02-2401	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.6%
	03-0401	8	88.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	9	5.8%
	03-1201	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	6.5%
	03-2701	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.6%
	03-3501	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	148	95.5%	1	0.6%	2	1.3%	4	2.6%	155	100.0%

付表 2-2 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
尿糖	1	154	87.5%	16	9.1%	2	1.1%	4	2.3%	176	51.6%
	2	156	94.5%	9	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	165	48.4%
	計	310	90.9%	25	7.3%	2	0.6%	4	1.2%	341	100.0%
尿蛋白	1	170	97.1%	3	1.7%	0	0.0%	2	1.1%	175	51.3%
	2	166	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	166	48.7%
	計	336	98.5%	3	0.9%	0	0.0%	2	0.6%	341	100.0%
尿潜血	1	174	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	175	51.3%
	2	165	99.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	166	48.7%
	計	339	99.4%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	341	100.0%
ヘモグロビン	1	12	80.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%	15	9.6%
	2	135	97.8%	0	0.0%	1	0.7%	2	1.4%	138	87.9%
	9	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.5%
	計	150	95.5%	2	1.3%	1	0.6%	4	2.5%	157	100.0%
赤血球	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%
	JAB512	86	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	54.8%
	JAB514	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB517	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAJ011	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.5%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	157	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%
白血球	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%
	JAB512	86	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	54.8%
	JAB514	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB517	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAJ011	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.5%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	157	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%

付表 2-2 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
ヘマトクリット	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%
	JAB512	86	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	54.8%
	JAB514	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB517	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAJ011	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.5%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	157	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%
血小板	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB511	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%
	JAB512	86	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	54.8%
	JAB514	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAB516	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB517	22	91.7%	1	4.2%	0	0.0%	1	4.2%	24	15.3%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAJ011	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.5%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	153	97.5%	3	1.9%	0	0.0%	1	0.6%	157	100.0%
平均赤血球容積	JAA702	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB511	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%
	JAB512	86	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	54.8%
	JAB514	23	95.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAB517	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	15.3%
	JAC910	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAJ005	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAJ011	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%
	JAJ012	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.5%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAS303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	計	156	99.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	157	100.0%

付表 2-3 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（外部施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	11	178	97.8%	2	1.1%	0	0.0%	2	1.1%	182	87.9%
	21	23	92.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	25	12.1%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	201	97.1%	2	1.0%	0	0.0%	4	1.9%	207	100.0%
中性脂肪	11	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%
	21	201	98.5%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	204	98.6%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	204	98.6%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	207	100.0%
尿酸	31	201	97.1%	4	1.9%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	201	97.1%	4	1.9%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
クレアチニン	21	203	98.1%	2	1.0%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	82	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	203	98.1%	2	1.0%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
AST	11	205	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	82	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	85	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	205	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
ALT	11	205	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	82	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	85	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	205	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
γ-GT	11	205	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	207	100.0%
	85	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	205	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	207	100.0%
血糖	12	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.4%
	21	201	99.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	202	97.6%
	31	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	82	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	205	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
HDLコレステロール	01-0403	100	98.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	1.0%	102	49.0%
	01-0801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-1201	103	99.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	104	50.0%
	01-1301	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-2303	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	01-2304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	08-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	205	98.6%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	208	100.0%
LDLコレステロール	01-0401	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-0403	102	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	49.0%
	01-0801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-1201	104	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	104	50.0%
	01-1301	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-1302	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-2302	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	01-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	208	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	208	100.0%
HbA1c	01-2701	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%
	01-2901	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.4%
	02-0401	62	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	62	30.0%
	02-0402	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	02-0403	18	94.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	19	9.2%
	02-0404	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.9%
	02-2401	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	11.6%
	03-0401	50	98.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	51	24.6%
	03-1201	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	03-2701	36	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	17.4%
	03-3501	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	205	99.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%

付表 2-3 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（外部施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
尿糖	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%
	2	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	95.5%
	計	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
尿蛋白	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%
	2	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	95.5%
	計	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
尿潜血	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%
	2	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	95.5%
	計	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
ヘモグロビン	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	2	202	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	99.0%
	9	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	計	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
赤血球	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	191	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	191	93.6%
	JAB514	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAB517	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.4%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ005	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS303	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
白血球	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	191	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	191	93.6%
	JAB514	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAB517	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.4%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ005	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS303	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%

付表 2-3 測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（外部施設）

調査項目 ヘマトクリット	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合 計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
ヘマトクリット	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	191	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	191	93.6%
	JAB514	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAB517	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.4%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ005	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS303	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	204	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
血小板	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	190	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	191	93.6%
	JAB514	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB516	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAB517	5	71.4%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.4%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ005	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS303	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	200	98.0%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100.0%
平均赤血球容積	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	190	99.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	191	93.6%
	JAB514	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAB517	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.4%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ005	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS303	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	202	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	204	100.0%

付表３－１ 尿糖検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙 製造元	85点以上		70点以上 85点未満		60点以上 70点未満		60点未満		合 計	
測定方法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
試験紙法 (肉眼)	02	69	83.1%	12	14.5%	0	0.0%	2	2.4%	83	46.9%
	06	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	07	8	88.9%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.1%
	09	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	22	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.1%
	29	26	96.3%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	27	15.3%
	32	14	82.4%	2	11.8%	1	5.9%	0	0.0%	17	9.6%
	38	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	60	2	40.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	40.0%	5	2.8%
	61	31	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	17.5%
	合計	155	87.6%	16	9.0%	2	1.1%	4	2.3%	177	100.0%
試験紙法 (機器)	02	120	97.6%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	123	66.1%
	09	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%
	29	17	73.9%	6	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	23	12.4%
	32	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.2%
	38	33	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	17.7%
	合計	177	95.2%	9	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	186	100.0%

付表３－２ 尿蛋白検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙 製造元	85点以上		70点以上 85点未満		60点以上 70点未満		60点未満		合 計	
測定方法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
試験紙法 (肉眼)	02	80	96.4%	1	1.2%	0	0.0%	2	2.4%	83	47.2%
	06	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	07	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.1%
	09	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	22	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.1%
	29	26	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	14.8%
	32	16	94.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	17	9.7%
	38	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	60	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.8%
	61	31	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	17.6%
	合計	171	97.2%	3	1.7%	0	0.0%	2	1.1%	176	100.0%
試験紙法 (機器)	02	123	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	123	65.8%
	09	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%
	29	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	12.8%
	32	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%
	38	33	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	17.6%
	合計	187	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	187	100.0%

付表３－３ 尿潜血検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙 製造元	85点以上		70点以上 85点未満		60点以上 70点未満		60点未満		合 計	
測定方法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
試験紙法 (肉眼)	02	82	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	82	46.6%
	06	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	07	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.1%
	09	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	22	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.1%
	29	28	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	15.9%
	32	16	94.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	17	9.7%
	38	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	60	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.8%
	61	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	16.5%
	62	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
合計		175	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	176	100.0%
試験紙法 (機器)	02	122	99.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	123	65.8%
	09	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%
	29	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	12.8%
	32	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%
	38	33	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	17.6%
合計		186	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	187	100.0%

付表 4 臨床検査精度管理調査評価結果一覧

注) 項目の※表示は測定を外部機関に委託

注) 同測定法、同測定機器5施設以下も評価

付表 4 臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設 コード	総コレス テロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
01001	96.7	96.7	96.7	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3
01002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	92.0	96.0							98.0
01007	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 80.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.2
01013	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7
01017	83.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9
01018	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
01019	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	92.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.3
01023	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
01025	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	99.6
01027	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
02001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
02003	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
02004	50.0	100.0	73.3	93.3	90.0	100.0	90.0	90.0	100.0	92.9	100.0	72.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	91.6
03001	96.7	100.0	96.7	100.0	93.3	100.0	100.0	96.7	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.0
03004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	88.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.1
03006	100.0	100.0	96.7	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
04001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.3
04004	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1
04006	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 70.0	※ 57.1	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	94.4
04008	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
04009	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
04010	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
04012	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 92.9	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.6
04015	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
06001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 78.6	99.2
06004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	96.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.8
07002	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0							100.0
07004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
07007	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
07008	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.0
08001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
08002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.9
08003	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	71.4	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.9
08006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	96.0	64.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.5
08009	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	99.6

施設 コード	総コレス テロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均	
08010	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	
09001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	57.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.7
09004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 85.7	※ 100.0	99.0
09005	100.0	100.0	100.0	93.3	93.3	86.7	96.7	33.3	100.0	100.0	85.7	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	78.6	100.0	92.2
09007	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
09008	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
09009	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
09010	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
09011	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
09012	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
09013	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	71.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.8
09014	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
09016	96.7	93.3	76.7	100.0	100.0	93.3	70.0	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0								94.6
10001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.9
10002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
10003	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	92.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9
10004	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10005	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
10007	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
11004	※ 100.0	※ 76.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 90.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.2
11005	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 76.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 92.9	※ 100.0	96.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 71.4	※ 100.0	95.4
11006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11007	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
11010	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	57.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.7
11011	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
11016	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
11020	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
11021	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
11023	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
11025	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 71.4	※ 100.0	※ 100.0	88.0	92.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.8
12001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12002	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	99.6
12003	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.1
12006	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
12008	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
12010	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0

施設 コード	総コレ ステロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
12011	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	96.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 78.6	※ 100.0	98.7
12012	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	96.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
12013	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
12014	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.2
12015	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	16.0	76.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	93.4
12016	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	78.6	99.3
12018	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
13001	※ 96.7	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.2
13002	100.0	66.7	96.7	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.9
13003	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
13004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
13005	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	96.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.5
13006	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
13007	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
13008	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	36.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.6
13010	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
13013	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
13014	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
13015	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	96.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
13016	※ 6.7	※ 3.3	※ 3.3	※ 0.0	※ 0.0	※ 0.0	※ 0.0	※ 0.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0				※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	50.8
13017	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
13021	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
13022	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
13024	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
13026	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
13028	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
13033	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
13035	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
13036	※ 86.7	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.9
13038	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
13039	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	88.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
13045	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
13049	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	96.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
13051	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
13052	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	98.5
13053	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2
13054	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8

施設 コード	総コレス テロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平均
13055	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	92.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
13056	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 76.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.3
13061	100.0	100.0	93.3	86.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9
13063	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
13064	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.2
13067	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
13071	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 78.6	※ 100.0	98.3
13074	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	58.2
13077	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
13078	※ 83.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	52.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.4
13079	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.3
13080	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	72.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.5
13082	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
13083	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	92.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.4
13084	100.0	56.7	90.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	91.6
13088	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.0
13089	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
13090	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
13094	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
13095	93.3	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2
13100	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
13101	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
13103	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
13107	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	96.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
13108	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	96.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
13109	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
13115	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
13123	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	88.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
14001	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	64.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	78.6	100.0	95.9
14002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
14003	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1
14004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
14005	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
14006	※ 90.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	96.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.3
14007	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
14010	93.3	93.3	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1
14018	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8

施設 コード	総コレ ステロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
14022	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
14023	※ 80.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	92.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.3
14024	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2
14025	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
14026	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	92.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.4
14027	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	57.1	100.0	97.7
14029	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.4
14030	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
14034	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.6
15001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
15004	96.7	100.0	63.3	90.0	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	96.8
15006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2
15007	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
15008	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
15010	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
15011	93.3	83.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4
15012	100.0	100.0	86.7	96.7	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7
16002	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
16004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.8
16005	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.0
16006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4
16008	※ 40.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	68.0	96.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	94.0
17001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3
17003	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
18001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
18003	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
20001	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	92.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
20002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
20003	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
20004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
20005	100.0	100.0	86.7	100.0	100.0	96.7	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9
20007	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
21001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
21002	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
21004	100.0	100.0	100.0	100.0	53.3	73.3	56.7	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.6
21005	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
21006	100.0	100.0	100.0	96.7	96.7	100.0	100.0	100.0	85.7	100.0	100.0	88.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1

施設 コード	総コレ ステロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
22001	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4
22002	100.0	90.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3
22003	100.0	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
22004	90.0	100.0	73.3	96.7	100.0	100.0	100.0	86.7	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.4
22006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1
22007	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
22010	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	96.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.8
22011	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
22012	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
22015	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
22017	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
22018	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4
22019	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
23001	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	52.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.9
23002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
23003	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	86.7	100.0	73.3	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.4
23005	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
23006	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
23007	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
23008	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4
23009	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	96.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
23011	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
23012	※ 100.0	※ 100.0	※ 83.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
23015	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4
23016	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
23017	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2
23018	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 46.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.2
23019	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
23020	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
23022	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.1
23024	96.7	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5
23026	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
23029	100.0	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
23030	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
23032	※ 93.3	※ 100.0	※ 83.3	※ 90.0	※ 90.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.7
23037	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
23038	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6

施設 コード	総コレス テロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
23039	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
23040	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
23042	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
23051				100.0	100.0	100.0		100.0	※ 100.0	※ 100.0		72.0	100.0	92.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.9
24001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
24002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
24003	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
25002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
25003	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
26001	93.3	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.8
26002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 85.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
26003	86.7	100.0	100.0	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2
26005	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 92.9	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
26006	100.0	100.0	100.0	100.0	83.3	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.1
26009	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
26012	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
27001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
27002	※ 100.0	※ 100.0	※ 40.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	95.6
27003	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
27004	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	42.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.8
27005	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
27006	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
27007	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	92.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
27009	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
27010	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
27013	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
27014	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
27018	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	96.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.5
27020	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
27023	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 50.0	84.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	94.8
27031	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 57.1	98.9
27037	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
27038	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
27041	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
27042	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
27044	100.0	100.0	96.7	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2

施設 コード	総コレス テロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
27045	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
27046	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	86.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7
27048	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
27049	96.7	93.3	100.0	80.0	90.0	100.0	76.7	86.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	95.2
27051	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
27052	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
28001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.9
28002	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28003	100.0	93.3	100.0	100.0	86.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9
28007	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	88.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.1
28008	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.3
28011	100.0	86.7	96.7	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4
28014	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	96.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
28015	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	96.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
28016	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28017	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28018	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
28019	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	92.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
28022	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
28024	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
28029	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
28031	100.0	76.7	90.0	93.3	100.0	90.0	90.0	93.3	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.1
28033	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
28034	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
30004	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	98.2
30005	100.0	93.3	100.0	100.0	96.7	76.7	40.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.5
30006	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	96.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
31002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	96.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.8
31003	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
31005	100.0	96.7	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.8
32001	100.0	100.0	100.0	96.7	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	99.5
32002	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
32003	93.3	66.7	96.7	100.0	46.7	100.0	90.0	86.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	71.4	100.0	92.2
33001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.4
33002	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 71.4	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.1
33004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
33005	100.0	100.0	100.0	100.0	86.7	100.0	80.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	92.9	85.7	100.0	100.0	100.0	85.7	96.6

施設 コード	総コレス テロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
33008	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	86.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9
33009	100.0	93.3	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	98.3
33014	※ 100.0	※ 100.0	※ 76.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.8
34001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	96.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.9
34002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
34003	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.0
34004	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1
34005	※ 100.0	※ 100.0	※ 90.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.8
34009	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
34010	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	64.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1
34011	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7
34012	100.0	100.0	83.3	100.0	93.3	93.3	100.0	100.0	100.0	78.6	64.3	100.0	92.0	88.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.0
34013	※ 100.0	※ 93.3	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.7
34015	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5
35001	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0
35006	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	92.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
36002	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
37001	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.6
37004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
37005	100.0	100.0	100.0	96.7	76.7	100.0	100.0	100.0	85.7	100.0	92.9	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.3
37007	100.0	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	96.0	96.0	92.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.0
37009	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	88.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4
38004	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	73.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2
38006	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 96.7	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 92.9	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 92.9	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.5
38007	93.3	100.0	100.0	100.0	96.7	86.7	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4
38008	※ 90.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	68.0	80.0	56.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	94.4
39001	100.0	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
39002	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
39003	100.0	86.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3
39004	100.0	100.0	86.7	100.0	96.7	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.8
40001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
40002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
40004	※ 40.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.8
40005	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	78.6	100.0	100.0	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.3
40006	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	96.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.0
40007	100.0	100.0	96.7	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
40009	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	99.6

施設 コード	総コレス テロール	中性 脂肪	尿酸	クレアチ ニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロ ビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球 容積	全試料 平 均
40011	100.0	100.0	100.0	96.7	70.0	30.0	100.0	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.6
40013	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.5
40015	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
40021	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
40022	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
40025	※ 100.0	※ 100.0	※ 86.7	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 60.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 42.9	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	93.8
40026	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
40027	100.0	96.7	96.7	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3
40028	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	88.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.1
40029	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.6
40030	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.0
40031	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 92.9	88.0	92.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.3
40034	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.8
40035	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	88.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.6
41001	※ 100.0	※ 100.0	※ 83.3	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	97.9
41002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.2
42001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
42002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
43001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	56.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.1
43003	100.0	40.0	86.7	90.0	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	100.0	94.5
43004	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	40.0	32.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	93.3
43007	※ 56.7	※ 60.0	※ 96.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 80.0	※ 100.0	※ 86.7	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	96.0	100.0	88.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 71.4	※ 100.0	91.3
44001	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	84.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.5
44002	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0	100.0	100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	100.0
45002	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4
46001	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	92.0	100.0	96.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	99.4
46004	100.0	100.0	100.0	70.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.3
47001	100.0	83.3	96.7	100.0	66.7	76.7	100.0	100.0	78.6	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.4
47002	※ 100.0	※ 100.0	※ 93.3	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	84.0	100.0	92.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	※ 100.0	98.4
47004	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.8
47005	100.0	93.3	100.0	100.0	90.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	98.2
47006	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	90.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.9
48512	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.3

付表 5 試料別測定結果一覧(自施設測定)

[1]総コレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
01001	11	119	----	145	159	----	----	194	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01013	11	----	131	142	----	165	----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01017	21	----	131	144	----	167	----	189	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	66.7	83.3
01018	11	----	131	144	----	165	----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01023	11	119	----	144	159	----	----	193	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01025	11	119	----	146	----	167	180	193	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	11	123	134	----	----	173	182	----	213	B	A	--	--	B	A	--	B	80.0	20.0	50.0
03001	11	118	----	144	158	----	----	194	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
03006	11	116	----	142	----	164	176	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04004	21	----	129	143	155	----	177	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04008	11	118	131	----	157	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	11	118	131	----	----	165	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	11	----	131	143	----	164	----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	11	----	130	143	----	164	----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	11	----	132	145	----	166	----	193	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	11	----	131	144	----	166	----	192	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08001	11	115	----	141	----	162	176	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	11	----	126	139	152	----	172	----	198	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	60.0	80.0
08006	11	118	----	144	----	165	179	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	11	118	----	144	157	----	----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	11	----	130	144	157	----	179	----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
09001	11	119	----	146	158	----	----	193	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	11	116	130	----	155	----	178	190	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09012	11	118	----	144	----	164	178	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	11	119	131	----	159	----	180	194	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
09016	11	----	131	144	----	166	----	194	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
10003	11	118	131	----	156	----	177	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	11	----	132	145	158	----	180	----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	11	119	----	144	----	166	179	193	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10007	21	117	----	142	154	----	----	190	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	11	118	131	----	----	165	178	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	11	119	132	----	158	----	180	193	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	11	117	130	----	157	----	179	190	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	11	118	131	----	----	165	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	11	118	131	----	----	165	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	11	119	131	----	----	165	179	----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12001	11	118	----	144	----	165	178	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	11	118	131	----	156	----	178	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	11	117	----	142	----	164	177	189	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	11	118	----	143	158	----	----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13002	11	116	129	----	----	162	176	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13003	11	117	130	----	----	164	177	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	11	118	131	----	157	----	179	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	21	----	131	143	----	165	----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	11	118	----	143	----	165	178	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13053	11	119	132	----	159	----	180	194	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13061	11	----	129	143	154	----	176	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13064	11	----	130	143	----	164	----	190	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	21	190	----	157	178	----	----	131	118	D	--	C	D	--	--	D	D	6.7	0.0	3.3
13084	11	116	128	----	----	163	176	----	200	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13094	11	----	130	144	----	165	----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	11	121	133	----	----	169	181	----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13100	21	118	----	143	156	----	----	189	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[1]総コレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
13103	11	118	-----	144	-----	165	180	190	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
14001	11	115	-----	142	-----	163	176	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14003	11	-----	131	144	-----	167	-----	192	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14010	11	121	134	-----	-----	170	182	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
14027	11	118	131	-----	-----	166	180	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	11	117	-----	143	-----	165	178	191	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	11	-----	130	143	-----	165	-----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	11	-----	131	144	157	-----	178	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
15006	11	-----	128	141	-----	164	-----	188	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15011	11	119	-----	145	155	-----	-----	193	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
15012	11	116	-----	144	155	-----	-----	190	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
16002	11	118	131	-----	-----	166	180	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16006	11	-----	130	142	-----	164	-----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	11	117	-----	141	156	-----	-----	189	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
18001	11	119	-----	146	-----	165	180	193	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	11	118	129	-----	155	-----	178	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20007	11	-----	131	144	-----	165	-----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	11	-----	131	144	-----	165	-----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	11	-----	132	144	158	-----	178	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21005	11	118	131	-----	157	-----	178	191	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	11	116	130	-----	-----	163	176	-----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
22001	11	117	129	-----	154	-----	175	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
22002	11	118	-----	144	-----	167	178	192	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22003	11	-----	128	140	-----	163	-----	188	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22004	11	-----	133	145	-----	165	-----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	80.0	90.0
22006	11	117	131	-----	157	-----	178	192	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22011	11	117	129	-----	153	-----	176	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22012	11	118	-----	145	-----	165	179	192	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	11	118	131	-----	157	-----	177	192	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22018	11	118	-----	144	157	-----	-----	192	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23003	11	-----	131	144	157	-----	177	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23008	11	118	-----	143	156	-----	-----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23011	11	118	132	-----	158	-----	180	192	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	11	-----	132	145	157	-----	179	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23016	11	119	133	-----	-----	167	180	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23017	11	-----	132	145	-----	166	-----	193	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	11	118	131	-----	157	-----	180	192	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	21	-----	131	145	156	-----	177	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23024	21	-----	130	142	155	-----	176	-----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
23029	11	119	132	-----	-----	167	181	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24003	11	-----	132	145	158	-----	180	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	11	118	131	-----	-----	165	178	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	11	-----	130	143	-----	164	-----	188	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
26003	11	-----	131	143	-----	162	-----	190	200	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	73.3	86.7
26006	11	118	130	-----	-----	164	177	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26009	21	116	129	-----	155	-----	176	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27004	11	120	-----	145	159	-----	-----	192	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27013	21	-----	131	143	156	-----	178	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	11	117	129	-----	-----	164	177	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27020	11	-----	131	144	-----	165	-----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	11	118	130	-----	156	-----	177	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27046	11	120	-----	146	160	-----	-----	195	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
27049	11	118	129	-----	158	-----	178	191	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7

[1]総コレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
28002	11	118	131	-----	156	-----	178	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28003	11	119	-----	145	-----	167	179	195	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28011	11	117	131	-----	-----	165	178	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28016	11	118	-----	143	156	-----	-----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28017	11	-----	131	144	157	-----	180	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	11	119	132	-----	-----	167	179	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28033	11	116	-----	142	-----	165	177	191	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28034	11	-----	131	144	157	-----	179	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	11	-----	131	142	156	-----	178	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30005	11	119	-----	144	158	-----	-----	191	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
31005	11	119	132	-----	-----	167	180	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32001	11	-----	130	143	158	-----	179	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32002	11	118	-----	144	-----	166	179	192	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	11	117	129	-----	-----	167	179	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
33001	11	-----	131	143	156	-----	177	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33005	11	-----	130	142	156	-----	177	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33008	11	117	-----	142	155	-----	-----	190	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
33009	11	-----	131	144	-----	165	-----	192	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34004	11	-----	131	144	-----	164	-----	192	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34009	11	117	130	-----	-----	165	177	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	11	116	-----	142	-----	163	177	190	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	11	119	131	-----	-----	165	179	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	11	119	132	-----	-----	166	181	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34015	11	119	-----	144	-----	165	179	192	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
35001	11	-----	132	145	158	-----	180	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37005	11	118	130	-----	157	-----	177	191	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37007	11	118	-----	143	-----	165	178	191	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37009	11	119	132	-----	-----	165	178	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	11	-----	131	144	157	-----	178	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38007	11	-----	132	144	-----	166	-----	193	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
39001	11	-----	129	142	155	-----	176	-----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39002	11	117	-----	143	156	-----	-----	192	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	11	-----	131	144	157	-----	180	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39004	11	117	130	-----	-----	162	177	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40005	11	118	130	-----	-----	165	178	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40007	11	-----	130	142	-----	163	-----	190	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40009	11	118	130	-----	156	-----	178	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	11	116	129	-----	-----	164	176	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40021	11	119	131	-----	159	-----	180	193	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40027	11	119	133	-----	-----	166	180	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
43001	11	117	-----	143	155	-----	-----	190	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
43003	11	119	-----	144	-----	165	179	191	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
44001	81	123	-----	149	-----	173	189	203	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	11	-----	130	144	157	-----	178	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
46004	11	-----	128	141	154	-----	175	-----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
47001	11	118	-----	142	155	-----	-----	190	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47004	11	116	-----	144	-----	165	177	190	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
47005	11	119	-----	145	157	-----	-----	192	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47006	21	116	130	-----	156	-----	177	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
48512	11	-----	132	145	-----	167	-----	193	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[2]中性脂肪 自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	46	----	66	78	----	----	103	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01013	21	----	58	69	----	87	----	108	118	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01017	21	----	58	68	----	85	----	106	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01018	21	----	57	67	----	85	----	105	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01023	21	46	----	66	77	----	----	102	114	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01025	21	46	----	66	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	21	48	57	----	----	84	93	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
03001	21	46	----	68	80	----	----	109	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03006	21	47	----	67	----	85	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04004	11	----	59	70	80	----	98	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04008	21	47	57	----	77	----	94	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	21	47	57	----	----	84	95	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	21	----	57	67	----	84	----	106	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	21	----	57	67	----	83	----	104	114	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	21	----	57	68	----	86	----	108	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	21	----	55	64	----	80	----	99	109	--	A	A	--	B	--	B	A	86.7	73.3	80.0
08001	21	47	----	68	----	85	97	107	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	21	----	56	66	77	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08006	21	47	----	69	----	87	97	108	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	21	46	----	67	78	----	----	107	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	21	----	58	68	79	----	96	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
09001	21	46	----	67	77	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	21	46	55	----	74	----	91	101	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09012	21	47	----	68	----	85	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	11	46	56	----	75	----	90	102	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09016	21	----	58	69	----	88	----	110	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
10003	21	47	57	----	77	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	21	----	57	67	77	----	93	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	21	48	----	68	----	85	95	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10007	21	48	----	68	79	----	----	108	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	21	47	57	----	----	84	94	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	21	45	55	----	76	----	93	103	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	21	46	56	----	76	----	91	102	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	21	47	58	----	----	86	96	----	117	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	21	47	58	----	----	86	96	----	117	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	21	47	58	----	----	84	95	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12001	21	47	----	67	----	86	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	21	47	57	----	78	----	95	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	21	46	----	68	----	84	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	21	47	----	64	76	----	----	101	112	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
13002	21	44	53	----	----	78	88	----	108	B	B	--	--	B	B	--	B	66.7	66.7	66.7
13003	21	46	57	----	----	86	96	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	21	47	57	----	78	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	21	----	57	68	----	85	----	105	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	21	48	----	68	----	85	96	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13053	21	46	55	----	75	----	91	100	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13061	11	----	56	66	76	----	92	----	112	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13064	21	----	58	68	----	86	----	106	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	21	105	----	77	94	----	----	57	47	D	--	C	D	--	--	D	D	6.7	0.0	3.3
13084	21	44	53	----	----	78	87	----	106	B	B	--	--	B	B	--	B	66.7	46.7	56.7
13094	21	----	56	66	----	83	----	103	113	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	21	49	58	----	----	86	96	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13100	21	47	----	67	77	----	----	105	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[2]中性脂肪 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13103	21	48	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14001	21	47	----	69	----	87	98	108	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14003	21	----	58	66	----	82	----	102	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	80.0	90.0
14010	21	46	57	----	----	87	97	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
14027	21	46	57	----	----	83	94	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	21	47	----	68	----	87	98	109	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	21	----	57	69	----	86	----	109	118	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	21	----	59	69	80	----	99	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15006	21	----	57	67	----	86	----	107	118	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15011	11	48	----	70	81	----	----	111	121	A	--	A	A	--	--	B	A	93.3	73.3	83.3
15012	21	46	----	69	79	----	----	108	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
16002	21	47	58	----	----	87	98	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16006	21	----	58	68	----	86	----	108	118	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	21	46	----	66	77	----	----	104	112	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
18001	21	46	----	67	----	84	93	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	11	48	58	----	80	----	98	109	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20007	21	----	57	67	----	85	----	106	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	21	----	57	67	----	85	----	106	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	21	----	57	67	78	----	96	----	118	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21005	21	47	57	----	77	----	95	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	21	45	55	----	----	81	90	----	110	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
22001	21	47	58	----	79	----	97	108	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22002	21	45	----	64	----	80	90	100	----	A	--	A	--	B	A	A	--	93.3	86.7	90.0
22003	21	----	57	67	----	83	----	104	113	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22004	21	----	57	67	----	85	----	105	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22006	21	45	56	----	76	----	90	101	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22011	21	45	55	----	74	----	90	100	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3
22012	21	47	----	67	----	85	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	21	46	56	----	75	----	91	101	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22018	21	47	----	66	76	----	----	102	112	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23003	21	----	56	65	76	----	92	----	111	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23008	21	47	----	66	76	----	----	102	112	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23011	21	46	57	----	78	----	93	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	21	----	56	67	76	----	91	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
23016	21	46	57	----	----	83	93	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
23017	21	----	57	68	----	86	----	107	118	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	21	46	55	----	75	----	92	102	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	21	----	55	64	74	----	90	----	109	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
23024	21	----	57	67	78	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23029	21	47	56	----	----	83	92	----	113	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24003	21	----	57	66	77	----	93	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	21	47	58	----	----	86	96	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	21	----	58	68	----	87	----	108	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26003	21	----	58	69	----	86	----	109	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26006	21	48	58	----	----	87	97	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26009	21	47	58	----	78	----	95	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27004	21	48	----	68	80	----	----	108	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27013	21	----	58	68	78	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	21	46	56	----	----	85	95	----	117	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27020	21	----	57	67	----	85	----	106	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	21	47	57	----	78	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27046	21	47	----	68	77	----	----	103	112	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27049	21	48	58	----	80	----	94	108	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3

[2]中性脂肪 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28002	21	46	57	----	78	----	96	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28003	21	45	----	64	----	81	90	100	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
28011	21	45	55	----	----	80	89	----	109	A	A	--	--	B	B	--	A	86.7	86.7	86.7
28016	21	47	----	67	77	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28017	21	----	57	66	77	----	93	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	21	45	55	----	----	79	89	----	108	A	A	--	--	B	B	--	B	80.0	73.3	76.7
28033	21	46	----	66	----	83	93	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28034	21	----	57	67	78	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	21	----	56	65	74	----	91	----	111	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30005	21	45	----	65	74	----	----	100	109	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
31005	21	47	57	----	----	81	91	----	112	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
32001	21	----	59	69	80	----	98	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32002	21	47	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	21	45	53	----	----	76	90	----	108	A	B	--	--	B	A	--	B	80.0	53.3	66.7
33001	21	----	57	67	78	----	96	----	117	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33005	21	----	56	66	76	----	93	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33008	21	47	----	66	76	----	----	102	111	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
33009	21	----	55	65	----	80	----	100	111	--	A	A	--	B	--	A	A	93.3	93.3	93.3
34004	21	----	56	65	----	81	----	102	112	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34009	21	47	57	----	----	84	95	----	117	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	21	46	----	67	----	85	96	107	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	21	48	57	----	----	85	96	----	117	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	21	47	57	----	----	86	97	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34015	21	48	----	70	----	88	99	109	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
35001	21	----	56	66	75	----	92	----	111	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37005	21	49	58	----	80	----	97	109	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37007	21	48	----	69	----	87	98	109	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37009	21	47	58	----	----	84	94	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	21	----	55	65	75	----	91	----	109	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38007	21	----	60	69	----	87	----	107	117	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39001	21	----	57	67	78	----	96	----	117	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39002	21	47	----	67	78	----	----	108	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	21	----	55	65	74	----	90	----	109	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	73.3	86.7
39004	21	47	58	----	----	86	97	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40005	21	45	55	----	----	80	90	----	110	A	A	--	--	B	A	--	A	93.3	86.7	90.0
40007	21	----	59	68	----	86	----	109	118	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40009	21	48	59	----	81	----	99	109	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	21	46	56	----	----	85	95	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40021	21	48	58	----	80	----	98	108	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40027	21	46	57	----	----	83	93	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
43001	21	47	----	68	79	----	----	107	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
43003	21	45	----	145	----	81	90	100	----	A	--	D	--	A	A	A	--	80.0	0.0	40.0
44001	81	59	----	79	----	95	102	110	----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	21	----	58	66	76	----	93	----	112	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
46004	21	----	54	65	75	----	91	----	112	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
47001	21	47	----	71	81	----	----	111	120	A	--	B	A	--	--	B	A	86.7	80.0	83.3
47004	21	46	----	67	----	84	93	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
47005	21	45	----	65	74	----	----	100	110	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
47006	21	47	57	----	77	----	93	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
48512	21	----	57	66	----	83	----	101	112	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[3]尿酸 自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	31	5.2	-----	6.1	6.6	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01013	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01017	31	-----	5.6	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01018	31	-----	5.7	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01023	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01025	31	5.3	-----	6.1	-----	6.8	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	31	5.4	5.8	-----	-----	6.9	7.5	-----	8.2	B	A	--	--	A	B	--	A	86.7	60.0	73.3
03001	31	5.1	-----	6	6.5	-----	-----	7.7	8.1	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
03006	31	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
04004	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04008	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.8	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	31	5.3	5.7	-----	-----	6.9	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	31	-----	5.7	6.1	-----	6.9	-----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	31	-----	5.6	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	31	-----	5.6	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08001	31	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.3	7.8	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	31	-----	5.6	6	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08006	31	5.2	-----	6.1	-----	6.8	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
09001	31	5.2	-----	6	6.5	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	31	5.2	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09012	31	5.3	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09016	31	-----	5.8	6.2	-----	7	-----	7.9	8.3	--	A	A	--	B	--	B	A	86.7	66.7	76.7
10003	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	31	5.3	-----	6.1	-----	6.8	7.3	7.8	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10007	31	5.3	-----	6.1	6.6	-----	-----	7.7	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	31	5.3	5.7	-----	-----	6.8	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	31	5.2	5.7	-----	6.5	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	31	5.2	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	31	5.2	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	31	5.3	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
12001	31	5.2	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	31	5.2	5.7	-----	6.5	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	31	5.2	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	31	5.3	-----	6.1	6.6	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13002	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
13003	31	5.2	5.7	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	31	-----	5.7	6.2	-----	6.9	-----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	31	5.3	-----	6.2	-----	6.9	7.4	7.8	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
13053	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13061	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13064	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	31	7.7	-----	6.6	7.3	-----	-----	5.7	5.3	D	--	D	D	--	--	D	D	0.0	0.0	0.0
13084	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	86.7	90.0
13094	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	31	5.3	5.7	-----	-----	6.8	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13100	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[3]尿酸 自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13103	31	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.3	7.8	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14001	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	86.7	90.0
14003	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14010	31	5.2	5.7	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14027	31	5.2	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	31	5.2	-----	6	-----	6.8	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	31	-----	5.6	6.1	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	31	-----	5.4	5.9	6.3	-----	7	-----	7.9	--	B	B	B	--	B	--	B	66.7	60.0	63.3
15006	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15011	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15012	31	5.1	-----	6.1	6.6	-----	-----	7.7	8.2	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	80.0	86.7
16002	31	5.3	5.8	-----	-----	6.9	7.3	-----	8.3	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
16006	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.8	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	31	5.3	-----	6.2	6.6	-----	-----	7.8	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
18001	31	5.2	-----	6	-----	6.8	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.2	7.5	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	80.0	86.7
20007	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	31	-----	5.6	6	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21005	31	5.2	5.7	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	31	5.3	5.7	-----	-----	6.9	7.3	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
22001	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22002	31	5.2	-----	6.1	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22003	31	-----	5.7	6.1	-----	6.9	-----	7.8	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22004	31	-----	5.7	6.1	-----	6.7	-----	7.5	7.9	--	A	A	--	A	--	A	B	93.3	53.3	73.3
22006	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22011	31	5.2	5.7	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22012	31	5.2	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.2	7.8	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
22018	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23003	31	-----	5.8	6.2	6.7	-----	7.4	-----	8.4	--	A	A	B	--	A	--	B	86.7	53.3	70.0
23008	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23011	31	5.2	5.7	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23016	31	5.2	5.7	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23017	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23024	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
23029	31	5.3	5.7	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24003	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	31	5.2	5.7	-----	-----	6.8	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	31	-----	5.7	6.1	-----	6.9	-----	7.8	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26003	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26006	31	5.2	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26009	31	5.2	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27004	31	5.2	-----	6	6.5	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27013	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
27020	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	31	5.2	5.6	-----	6.6	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
27046	31	5.3	-----	6.2	6.6	-----	-----	7.8	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27049	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[3]尿酸 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28002	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28003	31	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28011	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
28016	31	5.3	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28017	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	86.7	90.0
28033	31	5.3	-----	6.1	-----	6.8	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28034	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30005	31	5.3	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
31005	31	5.3	5.7	-----	-----	6.8	7.3	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32001	31	-----	5.7	6.2	6.6	-----	7.4	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32002	31	5.2	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	31	5.2	5.7	-----	-----	6.9	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
33001	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33005	31	-----	5.7	6.2	6.6	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33008	31	5.3	-----	6.2	6.6	-----	-----	7.8	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
33009	31	-----	5.8	6.2	-----	6.8	-----	7.8	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
34004	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34009	31	5.2	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	31	5.2	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	31	5.2	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	80.0	83.3
34015	31	5.4	-----	6.2	-----	6.9	7.3	7.7	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	86.7	90.0
35001	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37005	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.8	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37007	31	5.3	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37009	31	5.3	5.8	-----	-----	6.9	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	31	-----	5.6	6	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38007	31	-----	5.7	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39001	31	-----	5.8	6.2	6.6	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39002	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	31	-----	5.7	6.1	6.6	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39004	31	5.2	5.7	-----	-----	6.7	7.2	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	B	93.3	80.0	86.7
40005	31	5.2	5.7	-----	-----	6.8	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40007	31	-----	5.7	6	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
40009	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	31	5.3	5.7	-----	-----	6.9	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40021	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40027	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
43001	31	5.2	-----	6.2	6.6	-----	-----	7.7	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
43003	31	5.4	-----	6.2	-----	6.9	7.4	7.8	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	80.0	86.7
44001	81	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.3	7.7	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	31	-----	5.6	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
46004	31	-----	5.7	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
47001	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8.1	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
47004	31	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
47005	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47006	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
48512	31	-----	5.7	6.1	-----	6.9	-----	7.8	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[4]クレアチニン 自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	1.11	----	2.24	2.79	----	----	4.27	4.88	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01013	21	----	1.7	2.25	----	3.21	----	4.27	4.88	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01017	21	----	1.65	2.18	----	3.09	----	4.22	4.73	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01018	21	----	1.62	2.18	----	3.12	----	4.25	4.82	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01023	21	1.12	----	2.25	2.8	----	----	4.27	4.85	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01025	21	1.14	----	2.25	----	3.16	3.75	4.31	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	21	1.13	1.7	----	----	3.24	3.73	----	4.86	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
03001	21	1.08	----	2.18	2.74	----	----	4.29	4.83	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03006	21	1.05	----	2.17	----	3.13	3.68	4.24	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	100.0	96.7
04004	21	----	1.67	2.24	2.81	----	3.72	----	4.85	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04008	21	1.06	1.61	----	2.73	----	3.69	4.28	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	21	1.06	1.61	----	----	3.11	3.68	----	4.84	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	21	----	1.62	2.19	----	3.11	----	4.27	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	21	----	1.64	2.19	----	3.12	----	4.28	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	21	----	1.64	2.18	----	3.11	----	4.23	4.78	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	21	----	1.67	2.22	----	3.15	----	4.25	4.79	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08001	21	1.13	----	2.23	----	3.17	3.71	4.27	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	21	----	1.66	2.2	2.77	----	3.68	----	4.76	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08006	21	1.12	----	2.23	----	3.16	3.71	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	21	1.11	----	2.23	2.77	----	----	4.29	4.85	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	21	----	1.67	2.25	2.8	----	3.72	----	4.89	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
09001	21	1.11	----	2.22	2.76	----	----	4.28	4.85	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	21	1.06	1.6	----	2.7	----	3.64	4.18	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3
09012	21	1.11	----	2.24	----	3.17	3.68	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	21	1.15	1.7	----	2.82	----	3.74	4.3	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09016	21	----	1.68	2.25	----	3.18	----	4.29	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10003	21	1.1	1.66	----	2.74	----	3.71	4.25	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	21	----	1.66	2.23	2.77	----	3.7	----	4.88	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	21	1.11	----	2.21	----	3.15	3.7	4.27	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10007	21	1.1	----	2.16	2.68	----	----	4.21	4.73	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	21	1.09	1.64	----	----	3.14	3.71	----	4.85	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	21	1.07	1.63	----	2.74	----	3.67	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	21	1.1	1.65	----	2.75	----	3.66	4.22	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	21	1.11	1.66	----	----	3.13	3.68	----	4.78	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	21	1.11	1.66	----	----	3.13	3.68	----	4.78	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	21	1.07	1.62	----	----	3.12	3.69	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12001	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.7	4.29	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	21	1.11	1.66	----	2.76	----	3.71	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	21	1.12	----	2.23	----	3.14	3.71	4.24	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	21	1.13	----	2.25	2.81	----	----	4.32	4.91	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13002	21	1.1	1.66	----	----	3.14	3.7	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13003	21	1.1	1.65	----	----	3.15	3.7	----	4.84	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	21	1.12	1.65	----	2.76	----	3.71	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	21	----	1.63	2.18	----	3.09	----	4.21	4.75	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	21	1.08	----	2.21	----	3.15	3.72	4.32	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13053	21	1.12	1.67	----	2.8	----	3.76	4.33	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13061	21	----	1.6	2.14	2.69	----	3.59	----	4.72	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	73.3	86.7
13064	21	----	1.66	2.23	----	3.15	----	4.29	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	21	4.21	----	2.73	3.65	----	----	1.62	1.09	D	--	D	D	--	--	D	D	0.0	0.0	0.0
13084	21	1.11	1.66	----	----	3.14	3.71	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13094	21	----	1.63	2.2	----	3.14	----	4.25	4.82	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	21	1.05	1.59	----	----	3.06	3.61	----	4.73	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	73.3	80.0
13100	21	1.1	----	2.19	2.75	----	----	4.24	4.79	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13103	21	1.09	----	2.2	----	3.13	3.71	4.29	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[4]クレアチニン 自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14001	21	1.12	----	2.21	----	3.12	3.67	4.21	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14003	21	----	1.65	2.22	----	3.16	----	4.27	4.84	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14010	21	1.11	1.67	----	----	3.18	3.77	----	4.91	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14027	21	1.12	1.66	----	----	3.16	3.71	----	4.82	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	21	1.1	----	2.18	----	3.11	3.65	4.2	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	21	----	1.65	2.21	----	3.15	----	4.31	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	21	----	1.62	2.17	2.71	----	3.62	----	4.71	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	80.0	90.0
15006	21	----	1.66	2.23	----	3.17	----	4.32	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15011	21	1.14	----	2.23	2.79	----	----	4.32	4.87	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15012	21	1.12	----	2.18	2.79	----	----	4.27	4.84	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
16002	21	1.13	1.69	----	----	3.17	3.73	----	4.82	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16006	21	----	1.65	2.19	----	3.12	----	4.27	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	21	1.15	----	2.28	2.83	----	----	4.31	4.84	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
18001	21	1.11	----	2.23	----	3.16	3.71	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	21	1.08	1.63	----	2.72	----	3.71	4.23	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20007	21	----	1.68	2.22	----	3.16	----	4.27	4.84	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	21	----	1.67	2.23	----	3.15	----	4.26	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	21	----	1.69	2.24	2.82	----	3.73	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21005	21	1.12	1.67	----	2.77	----	3.69	4.25	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	21	1.12	1.66	----	----	3.18	3.68	----	4.78	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
22001	21	1.13	1.66	----	2.79	----	3.75	4.31	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22002	21	1.12	----	2.25	----	3.19	3.74	4.34	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22003	21	----	1.67	2.21	----	3.15	----	4.28	4.84	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22004	21	----	1.73	2.28	----	3.17	----	4.3	4.84	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	100.0	96.7
22006	21	1.12	1.66	----	2.78	----	3.71	4.29	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22011	21	1.14	1.71	----	2.81	----	3.73	4.31	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22012	21	1.11	----	2.22	----	3.14	3.68	4.25	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	21	1.12	1.66	----	2.78	----	3.7	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22018	21	1.1	----	2.22	2.79	----	----	4.29	4.84	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23003	21	----	1.7	2.29	2.88	----	3.8	----	4.97	--	A	B	B	--	A	--	A	86.7	53.3	70.0
23008	21	1.12	----	2.25	2.8	----	----	4.32	4.88	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23011	21	1.12	1.68	----	2.81	----	3.74	4.3	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	21	----	1.67	2.24	2.8	----	3.7	----	4.85	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23016	21	1.11	1.66	----	----	3.16	3.71	----	4.89	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23017	21	----	1.65	2.21	----	3.16	----	4.3	4.86	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	21	1.12	1.68	----	2.8	----	3.74	4.3	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	21	----	1.66	2.24	2.76	----	3.72	----	4.89	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23024	21	----	1.66	2.2	2.76	----	3.7	----	4.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23029	21	1.11	1.66	----	----	3.15	3.71	----	4.84	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23051	82	----	1.6	2.1	2.7	----	3.6	----	4.6	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
24003	21	----	1.7	2.26	2.8	----	3.74	----	4.82	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	21	1.11	1.66	----	----	3.15	3.72	----	4.84	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	21	----	1.68	2.24	----	3.2	----	4.35	4.89	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26003	21	----	1.63	2.17	----	3.1	----	4.18	4.73	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26006	21	1.07	1.63	----	----	3.13	3.72	----	4.82	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26009	21	1.05	1.6	----	2.72	----	3.68	4.24	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	93.3	93.3
27004	21	1.12	----	2.21	2.77	----	----	4.25	4.83	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27013	21	----	1.63	2.18	2.74	----	3.66	----	4.78	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	21	1.09	1.63	----	----	3.12	3.69	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27020	21	----	1.67	2.22	----	3.15	----	4.28	4.86	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	21	1.13	1.68	----	2.8	----	3.73	4.28	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27046	21	1.14	----	2.27	2.81	----	----	4.3	4.83	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27049	21	1.1	1.64	----	2.77	----	3.55	4.22	----	A	A	--	A	--	B	A	--	93.3	66.7	80.0
28002	21	1.1	1.64	----	2.73	----	3.67	4.22	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[4]クレアチニン 自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28003	21	1.07	----	2.17	----	3.12	3.68	4.25	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28011	21	1.17	1.72	----	----	3.17	3.72	----	4.83	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	100.0	93.3
28016	21	1.1	----	2.2	2.73	----	----	4.24	4.79	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28017	21	----	1.66	2.23	2.77	----	3.72	----	4.88	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	21	1.12	1.69	----	----	3.14	3.68	----	4.74	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
28033	21	1.12	----	2.24	----	3.14	3.72	4.27	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28034	21	----	1.65	2.23	2.76	----	3.71	----	4.81	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	21	----	1.71	2.26	2.81	----	3.71	----	4.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
30005	21	1.12	----	2.24	2.8	----	----	4.3	4.89	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
31005	21	1.11	1.65	----	----	3.12	3.68	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32001	21	----	1.65	2.19	2.78	----	3.72	----	4.78	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
32002	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.71	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	21	1.13	1.67	----	----	3.21	3.75	----	4.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33001	21	----	1.66	2.2	2.76	----	3.68	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33005	21	----	1.67	2.21	2.77	----	3.7	----	4.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33008	21	1.1	----	2.22	2.76	----	----	4.24	4.74	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
33009	21	----	1.67	2.23	----	3.17	----	4.33	4.89	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34004	21	----	1.66	2.21	----	3.13	----	4.28	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34009	21	1.11	1.66	----	----	3.11	3.65	----	4.81	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	21	1.08	----	2.17	----	3.09	3.65	4.22	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	21	1.11	1.64	----	----	3.09	3.64	----	4.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	21	1.08	1.63	----	----	3.09	3.67	----	4.78	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34015	21	1.09	----	2.18	----	3.1	3.67	4.22	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
35001	21	----	1.61	2.14	2.69	----	3.62	----	4.73	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
37005	21	1.07	1.62	----	2.73	----	3.66	4.17	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
37007	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.71	4.27	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37009	21	1.12	1.67	----	----	3.15	3.71	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	21	----	1.64	2.2	2.76	----	3.7	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38007	21	----	1.65	2.24	----	3.16	----	4.29	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39001	21	----	1.66	2.21	2.77	----	3.7	----	4.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39002	21	1.11	----	2.19	2.74	----	----	4.23	4.78	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	21	----	1.63	2.18	2.73	----	3.67	----	4.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39004	21	1.14	1.7	----	----	3.15	3.75	----	4.84	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40005	21	1.1	1.64	----	----	3.12	3.69	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40007	21	----	1.72	2.24	----	3.19	----	4.26	4.84	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	100.0	96.7
40009	21	1.12	1.67	----	2.78	----	3.72	4.29	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	21	1.13	1.72	----	----	3.2	3.74	----	4.9	A	B	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
40021	21	1.12	1.65	----	2.72	----	3.64	4.2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3
40027	21	1.11	1.65	----	----	3.13	3.66	----	4.81	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
43001	21	1.12	----	2.23	2.79	----	----	4.31	4.86	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
43003	21	1.12	----	2.25	----	3.21	3.79	4.37	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	80.0	90.0
44001	81	1.15	----	2.18	----	3.15	3.82	4.48	----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	21	----	1.68	2.23	2.78	----	3.68	----	4.78	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
46004	21	----	1.68	2.26	2.86	----	3.81	----	5	--	A	A	B	--	A	--	B	86.7	53.3	70.0
47001	21	1.14	----	2.22	2.79	----	----	4.27	4.78	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47004	21	1.09	----	2.2	----	3.14	3.71	4.24	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
47005	21	1.09	----	2.19	2.72	----	----	4.2	4.73	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47006	21	1.05	1.6	----	2.71	----	3.64	4.23	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
48512	21	----	1.7	2.25	----	3.18	----	4.29	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[5]AST 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	20	----	56	76	----	----	124	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01013	11	----	38	55	----	87	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01017	11	----	39	57	----	88	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01018	11	----	38	55	----	85	----	122	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01023	11	20	----	56	75	----	----	123	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01025	11	21	----	57	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	11	20	39	----	----	89	108	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	80.0	90.0
03001	11	21	----	56	76	----	----	126	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
03006	11	20	----	56	----	87	103	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04004	11	----	40	59	76	----	106	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	80.0	90.0
04008	11	20	38	----	74	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	11	20	38	----	----	86	104	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	11	----	38	57	----	87	----	124	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	11	----	38	56	----	86	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	11	----	38	56	----	87	----	124	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	11	----	38	56	----	87	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08001	11	20	----	56	----	86	104	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	11	----	38	56	75	----	106	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08006	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	11	20	----	56	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	11	----	39	57	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
09001	11	20	----	57	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	11	19	36	----	75	----	105	124	----	B	B	--	A	--	A	A	--	86.7	100.0	93.3
09012	11	20	----	57	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	11	20	38	----	76	----	106	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09016	11	----	38	56	----	88	----	125	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10003	11	20	38	----	74	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	11	----	38	56	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10007	11	21	----	57	75	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	11	20	38	----	----	86	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	11	20	39	----	75	----	106	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	11	20	38	----	74	----	104	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	11	20	37	----	----	87	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	11	20	37	----	----	87	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	11	20	38	----	----	86	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12001	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	11	20	39	----	75	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	11	20	----	56	----	86	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	11	20	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13002	11	20	38	----	----	88	108	----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	66.7	83.3
13003	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	11	20	38	----	74	----	105	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	11	----	39	58	----	88	----	124	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	11	20	----	57	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13053	11	21	40	----	76	----	106	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
13061	11	----	39	56	76	----	106	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13064	11	----	38	56	----	87	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	11	125	----	76	107	----	----	40	22	D	--	D	D	--	--	D	D	0.0	0.0	0.0
13084	11	20	38	----	----	87	107	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13094	11	----	38	57	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	11	20	38	----	----	86	104	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13100	11	21	----	57	75	----	----	126	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
13103	11	21	----	56	----	86	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14001	11	20	----	56	----	86	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[5]AST 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14003	11	----	39	57	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14010	11	20	39	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14027	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	11	----	38	56	----	88	----	124	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	11	----	39	56	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15006	11	----	37	56	----	86	----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15011	11	20	----	56	74	----	----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15012	11	20	----	57	75	----	----	125	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
16002	11	20	37	----	----	86	104	----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16006	11	----	38	56	----	86	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	11	20	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
18001	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	11	21	39	----	75	----	107	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20007	11	----	38	56	----	87	----	123	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	11	----	38	56	----	87	----	123	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	11	----	40	59	77	----	110	----	151	--	A	A	A	--	A	--	B	93.3	13.3	53.3
21005	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	11	20	37	----	----	87	103	----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
22001	11	20	37	----	74	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22002	11	19	----	56	----	86	105	123	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	100.0	96.7
22003	11	----	38	55	----	85	----	122	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
22004	11	----	37	55	----	85	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22006	11	20	38	----	74	----	104	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22011	11	20	38	----	75	----	106	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22012	11	20	----	56	----	86	104	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	11	20	37	----	74	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22018	11	19	----	56	74	----	----	122	141	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
23003	11	----	38	56	74	----	105	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23008	11	21	----	57	75	----	----	125	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23011	11	20	38	----	75	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	11	----	38	56	74	----	105	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23016	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23017	11	----	39	58	----	88	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	11	20	38	----	75	----	106	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	11	----	37	55	73	----	104	----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23024	11	----	38	56	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23029	11	19	37	----	----	85	103	----	139	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	93.3	93.3
23051	82	----	35	50	66	----	95	----	131	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
24003	11	----	37	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	11	----	39	56	----	86	----	124	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
26003	11	----	37	54	----	84	----	120	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	66.7	83.3
26006	11	21	40	----	----	90	108	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	66.7	83.3
26009	11	21	38	----	75	----	104	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27004	11	20	----	55	74	----	----	122	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27013	11	----	39	57	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	11	21	39	----	----	89	107	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27020	11	----	38	56	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	11	19	38	----	74	----	104	122	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	100.0	96.7
27046	11	20	----	56	75	----	----	125	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27049	11	19	37	----	73	----	103	120	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
28002	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28003	11	21	----	57	----	89	108	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	73.3	86.7
28011	11	20	37	----	----	87	104	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[5]AST 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 方法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28016	11	20	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28017	11	----	38	56	75	----	105	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	11	20	38	----	----	87	105	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28033	11	20	----	55	----	86	103	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28034	11	----	38	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	11	----	38	56	74	----	104	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30005	11	21	----	58	74	----	----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
31005	11	19	38	----	----	86	106	----	141	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	93.3	93.3
32001	11	----	38	57	75	----	107	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
32002	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	11	21	40	----	----	92	108	----	149	A	A	--	--	B	A	--	A	93.3	0.0	46.7
33001	11	----	38	56	74	----	105	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33005	11	----	37	54	73	----	102	----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	73.3	86.7
33008	11	20	----	56	73	----	----	122	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
33009	11	----	38	56	----	87	----	124	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34004	11	----	37	55	----	85	----	121	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	80.0	90.0
34009	11	20	38	----	----	86	104	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	11	20	----	55	----	85	104	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	11	20	38	----	----	85	103	----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	11	20	38	----	----	85	103	----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
34015	11	20	----	56	----	86	104	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
35001	11	----	38	56	75	----	105	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37005	11	21	39	----	77	----	108	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	53.3	76.7
37007	11	20	----	57	----	88	107	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
37009	11	20	37	----	----	86	103	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	11	----	37	55	74	----	105	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38007	11	----	37	56	----	87	----	122	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
39001	11	----	37	56	75	----	106	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
39002	11	20	----	56	75	----	----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	11	----	39	58	75	----	106	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39004	11	19	37	----	----	85	104	----	140	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
40005	11	20	38	----	----	87	106	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40007	11	----	38	56	----	86	----	124	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40009	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	11	20	37	----	----	84	101	----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	40.0	70.0
40021	11	20	37	----	74	----	106	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40027	11	19	37	----	----	85	104	----	141	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
43001	11	20	----	56	75	----	----	125	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
43003	11	20	----	57	----	88	107	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
44001	85	19	----	53	----	82	100	119	----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	11	----	38	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
46004	11	----	39	57	76	----	107	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
47001	11	24	----	59	76	----	----	123	143	D	--	A	A	--	--	A	A	80.0	53.3	66.7
47004	11	20	----	55	----	86	106	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
47005	11	19	----	57	74	----	----	125	144	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	86.7	90.0
47006	11	21	39	----	76	----	106	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
48512	11	----	38	56	----	87	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[6]ALT 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	17	----	48	64	----	----	104	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01013	11	----	33	47	----	73	----	104	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01017	11	----	32	48	----	74	----	106	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01018	11	----	31	47	----	72	----	103	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01023	11	17	----	46	62	----	----	103	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01025	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	11	16	32	----	----	74	91	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
03001	11	17	----	48	63	----	----	104	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03006	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04004	11	----	32	46	62	----	87	----	117	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
04008	11	17	32	----	63	----	88	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	11	17	32	----	----	72	89	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	11	----	32	47	----	73	----	105	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	11	----	32	47	----	73	----	104	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	11	----	33	48	----	74	----	106	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	11	----	32	48	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08001	11	17	----	48	----	73	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	11	----	31	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08006	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	11	17	----	47	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	11	----	33	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
09001	11	17	----	48	64	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	11	15	31	----	61	----	87	102	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	80.0	86.7
09012	11	16	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	11	17	33	----	64	----	91	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09016	11	----	32	47	----	74	----	107	123	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
10003	11	17	33	----	64	----	91	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	11	----	32	47	64	----	89	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	11	16	----	47	----	73	88	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10007	11	17	----	47	62	----	----	103	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	11	17	32	----	----	73	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	11	17	32	----	64	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	11	17	33	----	63	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	11	16	31	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	11	16	31	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	11	17	32	----	----	72	88	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12001	11	17	----	47	----	74	89	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	11	17	32	----	63	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	11	17	----	47	----	72	88	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	11	16	----	47	64	----	----	106	123	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
13002	11	17	32	----	----	73	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13003	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	11	----	31	47	----	73	----	104	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	11	16	----	47	----	73	89	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13053	11	17	33	----	65	----	91	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13061	11	----	32	48	64	----	90	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13064	11	----	32	47	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	11	103	----	62	89	----	----	32	17	D	--	D	D	--	--	D	D	0.0	0.0	0.0
13084	11	17	32	----	----	73	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13094	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	11	16	32	----	----	72	87	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13100	11	17	----	47	63	----	----	107	122	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13103	11	17	----	47	----	73	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14001	11	16	----	47	----	72	87	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[6]ALT 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14003	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14010	11	17	32	----	----	75	89	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
14027	11	16	32	----	----	74	90	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	11	16	----	47	----	73	89	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	11	----	32	47	----	73	----	103	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	11	----	32	47	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15006	11	----	32	48	----	73	----	103	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15011	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15012	11	16	----	46	62	----	----	103	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
16002	11	16	31	----	----	73	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16006	11	----	32	47	----	73	----	104	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	11	16	----	47	63	----	----	105	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
18001	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	11	15	32	----	63	----	89	105	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	100.0	96.7
20007	11	----	32	47	----	73	----	104	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	11	----	32	48	----	73	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	11	----	34	50	66	----	93	----	126	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	46.7	73.3
21005	11	16	32	----	63	----	89	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	11	17	33	----	----	74	89	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
22001	11	16	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22002	11	17	----	48	----	73	89	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22003	11	----	32	48	----	73	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22004	11	----	32	47	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22006	11	16	32	----	64	----	91	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22011	11	16	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22012	11	16	----	48	----	73	88	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	11	16	32	----	64	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22018	11	16	----	47	62	----	----	104	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23003	11	----	31	46	61	----	86	----	117	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	73.3	86.7
23008	11	17	----	49	64	----	----	108	124	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
23011	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	11	----	32	47	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23016	11	17	32	----	----	74	90	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23017	11	----	33	48	----	74	----	106	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	11	17	33	----	64	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	11	----	32	47	62	----	88	----	118	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23024	11	----	32	47	63	----	90	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23029	11	16	31	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23051	82	----	35	57	71	----	101	----	131	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
24003	11	----	32	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	11	----	33	49	----	75	----	107	123	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26003	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26006	11	16	32	----	----	73	89	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26009	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27004	11	16	----	48	64	----	----	105	122	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27013	11	----	33	48	64	----	90	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	11	17	32	----	----	75	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27020	11	----	32	48	----	73	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27046	11	15	----	45	62	----	----	103	118	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	80.0	86.7
27049	11	16	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28002	11	17	33	----	64	----	91	108	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28003	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28011	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[6]ALT 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28016	11	17	----	48	63	----	----	106	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28017	11	----	32	48	63	----	90	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	11	16	32	----	----	72	90	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	80.0	90.0
28033	11	17	----	48	----	72	88	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
28034	11	----	32	48	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	11	----	32	47	62	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30005	11	19	----	49	64	----	----	108	124	C	--	A	A	--	--	A	A	86.7	66.7	76.7
31005	11	16	32	----	----	74	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32001	11	----	32	48	65	----	90	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32002	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	11	16	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33001	11	----	32	48	64	----	90	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33005	11	----	32	48	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33008	11	16	----	47	63	----	----	104	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
33009	11	----	32	47	----	73	----	103	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34004	11	----	32	48	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34009	11	16	32	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	11	17	32	----	----	74	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	11	17	31	----	----	72	87	----	117	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
34015	11	17	----	48	----	73	89	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
35001	11	----	32	48	63	----	89	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37005	11	17	32	----	63	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37007	11	16	----	48	----	75	91	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37009	11	17	32	----	----	72	88	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	11	----	33	49	64	----	91	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38007	11	----	31	46	----	71	----	101	117	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	73.3	86.7
39001	11	----	33	49	65	----	92	----	123	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39002	11	17	----	47	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	11	----	33	48	64	----	90	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39004	11	17	32	----	----	72	89	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40005	11	17	31	----	----	74	88	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
40007	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40009	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	11	15	30	----	----	65	77	----	103	B	B	--	--	B	C	--	C	53.3	6.7	30.0
40021	11	16	32	----	62	----	89	103	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40027	11	17	32	----	----	74	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
43001	11	17	----	49	65	----	----	107	124	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
43003	11	16	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
44001	85	22	----	52	----	74	87	103	----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	11	----	32	47	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
46004	11	----	34	49	65	----	92	----	123	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
47001	11	19	----	50	63	----	----	105	123	C	--	A	A	--	--	A	A	86.7	66.7	76.7
47004	11	16	----	46	----	72	87	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
47005	11	17	----	47	61	----	----	104	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
47006	11	16	33	----	64	----	90	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
48512	11	----	33	48	----	76	----	107	123	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[7] γ -GT 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測定値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	30	----	64	81	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01013	11	----	47	64	----	92	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01017	11	----	46	64	----	92	----	126	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01018	11	----	47	65	----	93	----	129	146	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01023	11	29	----	63	80	----	----	126	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01025	11	30	----	63	----	92	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	11	31	47	----	----	95	109	----	149	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	80.0	90.0
03001	11	29	----	63	81	----	----	128	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03006	11	29	----	63	----	91	108	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04004	11	----	46	63	80	----	108	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04008	11	29	46	----	81	----	111	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	11	29	47	----	----	93	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	11	----	45	63	----	92	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08001	11	29	----	64	----	93	111	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	11	----	46	64	82	----	112	----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
08006	11	30	----	65	----	94	112	130	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	11	30	----	64	81	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	11	----	46	63	80	----	109	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
09001	11	29	----	64	81	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	11	28	46	----	80	----	109	127	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	100.0	96.7
09012	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	11	31	49	----	83	----	113	131	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	80.0	90.0
09016	11	----	50	67	----	97	----	133	150	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	46.7	70.0
10003	11	29	47	----	81	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	11	----	47	64	81	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	11	29	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10007	11	29	----	63	80	----	----	125	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	11	30	47	----	----	93	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	11	29	46	----	80	----	108	126	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	11	29	46	----	80	----	108	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	11	30	47	----	----	93	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	11	30	47	----	----	93	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	11	30	46	----	----	93	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12001	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	11	29	47	----	81	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	11	30	----	64	----	93	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	11	30	----	65	82	----	----	129	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13002	11	29	47	----	----	94	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13003	11	29	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	11	30	47	----	82	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	11	----	47	64	----	92	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	11	29	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13053	11	30	47	----	82	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13061	11	----	46	64	81	----	111	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13064	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	11	125	----	80	109	----	----	45	28	D	--	D	D	--	--	D	D	0.0	0.0	0.0
13084	11	29	47	----	----	93	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13094	11	----	47	64	----	92	----	127	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	11	30	47	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13100	11	30	----	64	80	----	----	127	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13103	11	29	----	64	----	93	111	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14001	11	29	----	64	----	93	111	129	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[7] γ -GT 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測定値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14003	11	----	47	64	----	92	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14010	11	29	46	----	----	92	109	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14027	11	30	47	----	----	94	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	11	29	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	11	----	46	63	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	11	----	46	64	81	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15006	11	----	46	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15011	11	30	----	65	82	----	----	129	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15012	11	28	----	63	80	----	----	127	145	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
16002	11	29	46	----	----	91	108	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16006	11	----	47	64	----	92	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	11	29	----	64	82	----	----	128	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
18001	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	11	30	47	----	81	----	109	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20007	11	----	47	64	----	93	----	128	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	11	----	49	68	86	----	117	----	151	--	A	B	B	--	B	--	A	80.0	33.3	56.7
21005	11	30	47	----	81	----	109	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	11	30	48	----	----	94	111	----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
22001	11	30	47	----	81	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22002	11	30	----	65	----	94	112	130	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22003	11	----	47	63	----	92	----	126	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22004	11	----	48	64	----	93	----	129	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22006	11	30	48	----	83	----	112	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22011	11	30	47	----	83	----	112	130	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22012	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	11	30	47	----	81	----	111	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22018	11	30	----	64	81	----	----	129	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23003	11	----	46	63	79	----	107	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23008	11	29	----	65	82	----	----	129	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23011	11	30	47	----	81	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	11	----	47	64	81	----	110	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23016	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23017	11	----	47	63	----	91	----	127	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	11	30	48	----	83	----	112	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	11	----	46	63	80	----	108	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23024	11	----	47	64	81	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23029	11	30	47	----	----	94	111	----	147	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24003	11	----	48	65	81	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	11	30	47	----	----	93	109	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	11	----	47	64	----	92	----	128	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26003	11	----	46	62	----	91	----	125	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26006	11	30	47	----	----	91	108	----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
26009	11	29	46	----	82	----	111	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27004	11	30	----	63	81	----	----	125	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
27013	11	----	46	64	80	----	110	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	11	29	46	----	----	93	109	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
27020	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	11	30	47	----	83	----	112	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27046	11	30	----	65	82	----	----	129	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27049	11	29	46	----	81	----	104	126	----	A	A	--	A	--	B	A	--	93.3	60.0	76.7
28002	11	30	47	----	82	----	111	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28003	11	30	----	63	----	92	109	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28011	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28016	11	30	----	64	82	----	----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[7] γ -GT 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 注	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28017	11	----	47	64	81	----	109	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	11	30	48	----	----	95	113	----	148	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	80.0	90.0
28033	11	30	----	65	----	93	111	129	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28034	11	----	47	64	82	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	11	----	47	64	81	----	111	----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30005	11	29	----	64	81	----	----	106	145	A	--	A	A	--	--	D	A	80.0	0.0	40.0
31005	11	29	46	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32001	11	----	47	65	81	----	111	----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32002	11	30	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	11	28	46	----	----	93	108	----	142	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	86.7	90.0
33001	11	----	47	64	81	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33005	11	----	48	66	84	----	114	----	149	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	60.0	80.0
33008	11	31	----	67	84	----	----	131	148	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	73.3	86.7
33009	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34004	11	----	47	64	----	93	----	128	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34009	11	30	47	----	----	92	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	11	29	----	64	----	94	111	129	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	11	30	47	----	----	93	111	----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	11	29	46	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34015	11	30	----	64	----	93	111	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
35001	11	----	45	63	80	----	108	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37005	11	30	47	----	81	----	111	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37007	11	30	----	64	----	93	112	130	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37009	11	30	47	----	----	92	109	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	11	----	48	67	84	----	114	----	150	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	46.7	73.3
38007	11	----	46	63	----	91	----	125	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39001	11	----	47	64	81	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39002	11	29	----	64	82	----	----	129	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	11	----	47	64	81	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39004	11	30	48	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40005	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40007	11	----	46	63	----	92	----	128	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40009	11	30	47	----	82	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	11	29	47	----	----	92	110	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40021	11	29	45	----	81	----	109	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40027	11	30	47	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
43001	11	30	----	65	82	----	----	128	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
43003	11	29	----	64	----	92	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
44001	85	28	----	64	----	94	112	130	----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	11	----	47	62	79	----	107	----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	60.0	80.0
46004	11	----	47	65	83	----	112	----	147	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
47001	11	29	----	64	82	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47004	11	30	----	65	----	95	114	130	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	80.0	90.0
47005	11	29	----	64	80	----	----	125	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47006	11	28	45	----	80	----	107	126	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
48512	11	----	48	66	----	94	----	129	147	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[8]血糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 日	測定値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
01001	21	93	----	126	142	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01013	21	----	108	124	----	151	----	185	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01017	21	----	110	125	----	152	----	187	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
01018	21	----	109	125	----	153	----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01023	21	93	----	126	142	----	----	185	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01025	21	93	----	126	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
02004	21	95	109	----	----	152	169	----	203	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	86.7	90.0
03001	21	93	----	127	145	----	----	188	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
03006	21	93	----	125	----	154	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04004	21	----	109	125	142	----	168	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04008	21	93	108	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
04009	21	93	109	----	----	153	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04010	12	----	107	124	----	151	----	184	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04015	12	----	107	124	----	151	----	184	200	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07002	21	----	110	127	----	156	----	189	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07008	21	----	110	126	----	154	----	187	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08001	21	93	----	126	----	154	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08003	21	----	108	125	141	----	169	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08006	21	94	----	127	----	154	172	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
08009	21	93	----	126	143	----	----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
08010	31	----	108	125	141	----	169	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
09001	21	94	----	126	142	----	----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09005	12	88	104	----	135	----	162	178	----	C	C	--	C	--	C	C	--	33.3	33.3	33.3
09012	21	93	----	125	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09013	21	92	108	----	141	----	168	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09016	21	----	110	126	----	154	----	187	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10003	21	94	111	----	144	----	172	189	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
10004	31	----	109	126	141	----	169	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10005	12	92	----	127	----	152	168	185	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
10007	12	91	----	124	140	----	----	184	200	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11006	21	94	110	----	----	155	172	----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11010	21	92	108	----	140	----	167	185	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11011	21	93	110	----	144	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11016	21	93	110	----	----	154	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11020	21	93	110	----	----	154	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
11023	12	92	107	----	----	151	168	----	200	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12001	21	93	----	126	----	154	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12002	12	93	109	----	143	----	170	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12008	21	92	----	126	----	154	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12016	21	93	----	126	143	----	----	186	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13002	12	92	109	----	----	151	168	----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13003	21	94	110	----	----	154	172	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13017	21	93	109	----	142	----	169	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13026	12	----	108	125	----	153	----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13052	21	94	----	127	----	154	171	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13053	12	93	108	----	141	----	169	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13061	21	----	110	126	142	----	170	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13064	21	----	110	126	----	153	----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13074	21	188	----	143	171	----	----	110	94	D	--	D	D	--	--	D	D	0.0	0.0	0.0
13084	12	92	109	----	----	151	168	----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13094	21	----	109	126	----	153	----	185	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13095	12	92	109	----	----	153	170	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13100	21	94	----	127	144	----	----	189	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13103	21	94	----	126	----	155	171	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14001	21	93	----	127	----	155	168	185	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	80.0	90.0

[8]血糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 日	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
14003	12	----	109	126	----	153	----	185	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14010	21	93	110	----	----	153	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14027	21	94	110	----	----	154	171	----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14030	21	93	----	126	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15001	21	----	110	126	----	154	----	187	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15004	31	----	110	126	142	----	170	----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	80.0	90.0
15006	21	----	109	126	----	155	----	185	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
15011	21	93	----	126	144	----	----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15012	21	93	----	125	143	----	----	188	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
16002	21	93	109	----	----	154	171	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16006	21	----	110	126	----	153	----	187	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17001	12	91	----	123	140	----	----	184	199	A	--	B	A	--	--	A	A	93.3	86.7	90.0
18001	21	93	----	125	----	152	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20005	21	93	110	----	141	----	171	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
20007	21	----	109	126	----	153	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21002	12	----	109	126	----	153	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
21004	21	----	108	125	140	----	169	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21005	21	93	109	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
21006	21	92	108	----	----	152	168	----	200	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
22001	12	92	108	----	141	----	169	185	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22002	21	93	----	127	----	154	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22003	21	----	110	126	----	154	----	187	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22004	21	----	111	126	----	154	----	185	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	73.3	86.7
22006	21	93	109	----	143	----	168	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
22011	21	92	109	----	142	----	168	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22012	21	93	----	126	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22017	21	93	109	----	142	----	170	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22018	21	92	----	125	142	----	----	185	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23003	21	----	112	129	146	----	174	----	207	--	B	B	B	--	B	--	A	73.3	73.3	73.3
23008	21	94	----	127	143	----	----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23011	21	93	109	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23015	12	----	109	125	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23016	21	93	109	----	----	153	170	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23017	21	----	109	126	----	153	----	185	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23019	21	93	109	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23020	21	----	109	125	141	----	168	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23024	21	----	109	125	142	----	169	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23029	21	94	111	----	----	154	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23051	82	----	115	130	150	----	181	----	210	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
24003	21	----	109	125	141	----	169	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25003	21	93	110	----	----	153	169	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26001	21	----	110	127	----	154	----	187	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26003	21	----	111	127	----	154	----	187	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26006	21	93	109	----	----	153	169	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26009	21	93	110	----	144	----	171	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27004	21	94	----	127	145	----	----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27013	21	----	110	126	143	----	171	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27014	21	93	109	----	----	153	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27020	21	----	109	126	----	153	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27044	31	92	109	----	143	----	169	185	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27046	21	93	----	126	142	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27049	21	95	111	----	145	----	169	190	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	80.0	86.7
28002	12	93	110	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28003	12	92	----	124	----	152	169	185	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28011	21	93	109	----	----	153	169	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[8]血糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
28016	21	93	----	125	141	----	----	185	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28017	21	----	109	126	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28031	21	92	108	----	----	150	168	----	201	A	A	--	--	B	A	--	A	93.3	93.3	93.3
28033	12	92	----	125	----	153	168	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28034	21	----	109	126	142	----	169	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30004	21	----	112	126	142	----	173	----	206	--	B	A	A	--	A	--	A	93.3	66.7	80.0
30005	21	94	----	127	144	----	----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
31005	21	92	109	----	----	152	168	----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32001	21	----	111	127	145	----	172	----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
32002	21	93	----	126	----	153	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
32003	21	91	106	----	----	152	166	----	200	A	B	--	--	A	A	--	A	93.3	80.0	86.7
33001	12	----	111	125	143	----	171	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
33005	12	----	107	124	139	----	167	----	201	--	A	A	B	--	A	--	A	93.3	93.3	93.3
33008	21	92	----	125	142	----	----	185	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
33009	21	----	109	125	----	152	----	185	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34004	21	----	109	125	----	153	----	186	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34009	12	93	109	----	----	153	169	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34010	21	94	----	126	----	155	171	189	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34011	21	93	110	----	----	153	170	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34012	21	94	110	----	----	154	171	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34015	21	93	----	126	----	154	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
35001	21	----	108	125	141	----	169	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37005	12	92	109	----	142	----	170	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
37007	21	95	----	128	----	156	173	191	----	B	--	A	--	A	A	B	--	86.7	73.3	80.0
37009	21	93	109	----	----	155	172	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38004	31	----	109	124	141	----	169	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38007	21	----	110	125	----	153	----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39001	21	----	109	125	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39002	21	93	----	126	143	----	----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
39003	21	----	111	128	144	----	173	----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
39004	21	93	110	----	----	153	168	----	200	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
40005	21	91	108	----	----	152	169	----	200	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40007	21	----	111	127	----	155	----	189	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40009	21	94	110	----	143	----	171	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40011	21	94	111	----	----	155	173	----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40021	21	92	108	----	141	----	169	184	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40027	21	92	108	----	----	152	168	----	200	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
43001	21	96	----	129	147	----	----	192	209	B	--	B	B	--	--	B	B	66.7	46.7	56.7
43003	12	93	----	124	----	153	168	184	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
44001	81	94	----	126	----	154	173	191	----	--	--	--	--	--	--	--	--	=====	=====	=====
45002	21	----	110	126	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
46004	21	----	109	126	143	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
47001	21	93	----	126	141	----	----	185	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47004	12	93	----	125	----	153	171	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
47005	21	92	----	124	141	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47006	21	93	109	----	143	----	171	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
48512	12	----	107	124	----	150	----	183	198	--	A	A	--	B	--	A	B	86.7	73.3	80.0

[9]HDLコレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
01013	01-1201	----	51	57	54	----	--	A	A	--	--	100.0
01017	01-1201	36	----	56	54	----	A	--	A	--	--	100.0
01018	01-1201	----	51	57	53	----	--	A	A	--	--	100.0
01023	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
01025	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
02004	01-0403	32	45	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
03001	01-0403	----	46	53	53	----	--	A	B	--	--	78.6
03006	01-1201	36	----	58	55	----	A	--	A	--	--	100.0
04004	01-0403	33	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
04008	01-1201	----	51	57	54	----	--	A	A	--	--	100.0
04009	01-1201	36	----	57	54	----	A	--	A	--	--	100.0
04010	01-1201	36	----	57	54	----	A	--	A	--	--	100.0
04015	01-1201	----	51	57	53	----	--	A	A	--	--	100.0
07002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
07008	01-1201	34	----	56	----	34	B	--	A	--	--	85.7
08001	01-1201	36	50	----	54	----	A	A	--	--	--	100.0
08003	01-1201	34	49	----	----	33	B	B	--	--	--	71.4
08006	01-1201	36	----	56	----	35	A	--	A	--	--	100.0
08009	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
08010	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
09001	01-0403	33	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
09005	01-1201	35	----	56	53	----	A	--	A	--	--	100.0
09012	01-1201	----	50	56	52	----	--	A	A	--	--	100.0
09013	01-0403	----	47	52	53	----	--	B	B	--	--	71.4
09016	01-1201	----	52	58	54	----	--	A	A	--	--	100.0
10003	01-1201	36	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
10004	01-0403	----	45	50	52	----	--	A	A	--	--	100.0
10005	01-0403	32	----	50	51	----	A	--	A	--	--	100.0
10007	01-0403	32	----	50	----	32	A	--	A	--	--	100.0
11006	01-1201	36	----	58	53	----	A	--	A	--	--	100.0
11010	01-0403	----	43	48	49	----	--	B	C	--	--	57.1
11011	01-0403	----	44	49	51	----	--	A	B	--	--	92.9
11016	01-1201	----	51	57	----	36	--	A	A	--	--	100.0
11020	01-1201	----	51	57	----	36	--	A	A	--	--	100.0
11023	01-1201	36	----	57	54	----	A	--	A	--	--	100.0
12001	01-1301	----	47	54	----	33	--	--	--	--	--	=====
12002	01-1201	35	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
12008	01-0403	33	46	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
12016	01-0403	----	45	51	51	----	--	A	A	--	--	100.0
13002	01-0403	----	44	50	51	----	--	A	A	--	--	100.0
13003	01-1201	----	51	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
13017	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
13026	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13052	01-1201	37	52	----	----	35	B	A	--	--	--	78.6
13053	01-0403	----	44	50	52	----	--	A	A	--	--	100.0
13061	01-1201	35	----	56	----	35	A	--	A	--	--	100.0
13064	01-1201	39	50	----	53	----	D	A	--	--	--	50.0
13074	01-1201	36	----	57	54	----	A	--	A	--	--	100.0
13084	01-0403	32	----	50	----	31	A	--	A	--	--	100.0
13094	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
13095	01-1201	36	52	----	54	----	A	A	--	--	--	100.0
13100	01-1201	----	51	57	54	----	--	A	A	--	--	100.0
13103	01-1201	36	51	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
14001	01-1201	----	51	56	----	33	--	A	A	--	--	100.0
14003	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0

[9]HDLコレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14010	01-0403	----	44	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
14027	01-0403	----	45	----	52	----	--	A	--	--	--	100.0
14030	01-1201	35	50	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
15001	01-1201	35	51	----	----	34	A	A	--	--	--	100.0
15004	01-0403	----	45	51	51	----	--	A	A	--	--	100.0
15006	01-1201	36	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
15011	01-1201	35	----	55	----	34	A	--	B	--	--	92.9
15012	01-1201	35	50	----	----	34	A	A	--	--	--	100.0
16002	01-1201	----	51	57	21	----	--	A	A	--	--	100.0
16006	01-1201	----	51	57	----	36	--	A	A	--	--	100.0
17001	01-0403	33	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
18001	01-0403	32	----	50	----	33	A	--	A	--	--	100.0
20005	01-2304	34	----	54	----	33	--	--	--	--	--	=====
20007	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
21002	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
21004	01-0801	36	52	----	53	----	--	--	--	--	--	=====
21005	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
21006	01-0403	31	44	----	50	----	B	A	--	--	--	85.7
22001	01-2304	35	----	53	----	34	--	--	--	--	--	=====
22002	01-0403	32	45	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
22003	01-1201	36	----	56	52	----	A	--	A	--	--	100.0
22004	01-2304	35	----	53	52	----	--	--	--	--	--	=====
22006	01-0403	32	43	----	52	----	A	B	--	--	--	85.7
22011	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
22012	01-0403	32	----	50	----	32	A	--	A	--	--	100.0
22017	01-0403	----	45	51	51	----	--	A	A	--	--	100.0
22018	01-0403	----	46	52	----	32	--	A	B	--	--	92.9
23003	01-2304	35	49	----	----	36	--	--	--	--	--	=====
23008	01-0403	32	----	51	51	----	A	--	A	--	--	100.0
23011	01-1201	35	----	56	----	34	A	--	A	--	--	100.0
23015	01-0403	----	45	50	51	----	--	A	A	--	--	100.0
23016	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
23017	01-0403	31	----	50	51	----	B	--	A	--	--	85.7
23019	01-0403	32	----	51	----	32	A	--	A	--	--	100.0
23020	01-0403	33	45	----	50	----	A	A	--	--	--	100.0
23024	01-1201	35	----	56	52	----	A	--	A	--	--	100.0
23029	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
24003	01-0403	----	45	50	52	----	--	A	A	--	--	100.0
25003	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
26001	01-0403	----	45	50	----	32	--	A	A	--	--	100.0
26003	01-1201	35	50	----	----	34	A	A	--	--	--	100.0
26006	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
26009	01-1201	36	----	57	53	----	A	--	A	--	--	100.0
27004	01-1201	36	50	----	----	36	A	A	--	--	--	100.0
27013	01-1201	35	----	57	53	----	A	--	A	--	--	100.0
27014	01-1201	35	51	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
27020	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
27044	01-0403	32	45	----	----	32	A	A	--	--	--	100.0
27046	01-0403	33	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
27049	01-1201	36	----	56	----	35	A	--	A	--	--	100.0
28002	01-1201	----	51	56	53	----	--	A	A	--	--	100.0
28003	01-0403	----	45	50	----	32	--	A	A	--	--	100.0
28011	01-0403	32	----	51	51	----	A	--	A	--	--	100.0
28016	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
28017	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
28031	01-0403	33	----	52	----	33	A	--	B	--	--	92.9

[9]HDLコレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28033	01-1201	35	51	-----	53	-----	A	A	--	--	--	100.0
28034	01-1201	-----	51	57	55	-----	--	A	A	--	--	100.0
30004	01-0403	-----	44	50	-----	32	--	A	A	--	--	100.0
30005	01-0403	32	45	-----	-----	32	A	A	--	--	--	100.0
31005	01-0403	33	45	-----	52	-----	A	A	--	--	--	100.0
32001	01-0403	32	45	-----	52	-----	A	A	--	--	--	100.0
32002	01-0403	-----	46	52	54	-----	--	A	B	--	--	92.9
32003	01-0403	32	45	-----	52	-----	A	A	--	--	--	100.0
33001	01-0403	32	-----	50	51	-----	A	--	A	--	--	100.0
33005	01-0403	-----	44	51	-----	32	--	A	A	--	--	100.0
33008	01-0403	33	-----	51	51	-----	A	--	A	--	--	100.0
33009	01-0403	-----	45	50	51	-----	--	A	A	--	--	100.0
34004	01-0403	-----	44	49	51	-----	--	A	B	--	--	92.9
34009	01-1201	36	51	-----	-----	36	A	A	--	--	--	100.0
34010	01-1201	38	-----	57	-----	35	C	--	A	--	--	64.3
34011	01-1201	36	-----	57	-----	35	A	--	A	--	--	100.0
34012	01-1201	-----	51	57	54	-----	--	A	A	--	--	100.0
34015	01-0403	-----	45	51	-----	33	--	A	A	--	--	100.0
35001	01-0403	-----	45	50	-----	33	--	A	A	--	--	100.0
37005	01-1201	-----	51	59	55	-----	--	A	B	--	--	85.7
37007	01-2304	34	-----	54	51	-----	--	--	--	--	--	=====
37009	01-0403	33	-----	51	-----	-----	A	--	A	--	--	100.0
38004	01-0403	32	45	-----	-----	32	A	A	--	--	--	100.0
38007	01-0403	32	-----	49	51	-----	A	--	B	--	--	92.9
39001	01-1201	-----	52	58	-----	35	--	A	A	--	--	100.0
39002	01-0403	-----	45	51	52	-----	--	A	A	--	--	100.0
39003	01-0403	32	-----	50	51	-----	A	--	A	--	--	100.0
39004	01-1201	35	50	-----	-----	34	A	A	--	--	--	100.0
40005	01-0403	-----	47	51	52	-----	--	B	A	--	--	78.6
40007	01-2304	34	47	-----	51	-----	--	--	--	--	--	=====
40009	01-2304	-----	48	54	-----	33	--	--	--	--	--	=====
40011	01-1201	34	51	-----	52	-----	B	A	--	--	--	85.7
40021	01-1201	36	-----	58	-----	37	A	--	A	--	--	100.0
40027	01-0403	32	45	-----	52	-----	A	A	--	--	--	100.0
43001	01-2304	-----	48	54	-----	33	--	--	--	--	--	=====
43003	01-0403	-----	46	51	-----	32	--	A	A	--	--	100.0
44001	08-2801	32	43	-----	50	-----	--	--	--	--	--	=====
45002	01-0403	-----	44	50	51	-----	--	A	A	--	--	100.0
46004	01-1201	35	50	-----	53	-----	A	A	--	--	--	100.0
47001	01-1201	34	-----	55	51	-----	B	--	B	--	--	78.6
47004	01-1201	-----	50	56	-----	35	--	A	A	--	--	100.0
47005	01-0403	32	45	-----	51	-----	A	A	--	--	--	100.0
47006	01-1201	33	49	-----	-----	34	C	B	--	--	--	50.0
48512	01-0403	-----	45	51	52	-----	--	A	A	--	--	100.0

[10]LDLコレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	01-0403	74	105	----	158	----	A	A	--	--	--	100.0
01013	01-1201	----	111	135	161	----	--	A	A	--	--	100.0
01017	01-1201	78	----	135	164	----	A	--	A	--	--	100.0
01018	01-1201	----	111	136	165	----	--	A	A	--	--	100.0
01023	01-0403	73	----	126	154	----	A	--	A	--	--	100.0
01025	01-0403	74	105	----	----	123	A	A	--	--	--	100.0
02004	01-0403	77	110	----	162	----	A	B	--	--	--	92.9
03001	01-0403	----	106	130	159	----	--	A	A	--	--	100.0
03006	01-1201	79	----	141	169	----	A	--	A	--	--	100.0
04004	01-0403	75	106	----	157	----	A	A	--	--	--	100.0
04008	01-1201	----	110	136	163	----	--	A	A	--	--	100.0
04009	01-1201	78	----	136	162	----	A	--	A	--	--	100.0
04010	01-1201	77	----	137	165	----	A	--	A	--	--	100.0
04015	01-1201	----	112	137	166	----	--	A	A	--	--	100.0
07002	01-0403	75	106	----	158	----	A	A	--	--	--	100.0
07008	01-1201	77	----	138	----	138	A	--	A	--	--	100.0
08001	01-1201	75	109	----	161	----	A	A	--	--	--	100.0
08003	01-1201	76	109	----	----	131	A	A	--	--	--	100.0
08006	01-1201	80	----	136	----	137	B	--	A	--	--	92.9
08009	01-0403	75	105	----	----	123	A	A	--	--	--	100.0
08010	01-1201	77	112	----	----	137	A	A	--	--	--	100.0
09001	01-0403	74	105	----	----	123	A	A	--	--	--	100.0
09005	01-1201	77	----	134	162	----	A	--	A	--	--	100.0
09012	01-1201	----	111	136	164	----	--	A	A	--	--	100.0
09013	01-0403	----	106	128	154	----	--	A	A	--	--	100.0
09016	01-1201	----	113	139	166	----	--	A	A	--	--	100.0
10003	01-1201	77	113	----	----	135	A	A	--	--	--	100.0
10004	01-0403	----	106	128	156	----	--	A	A	--	--	100.0
10005	01-0403	73	----	127	154	----	A	--	A	--	--	100.0
10007	01-0403	74	----	128	----	123	A	--	A	--	--	100.0
11006	01-1201	78	----	138	165	----	A	--	A	--	--	100.0
11010	01-0403	----	104	126	155	----	--	A	A	--	--	100.0
11011	01-0403	----	103	126	155	----	--	A	A	--	--	100.0
11016	01-1201	----	109	135	----	135	--	A	A	--	--	100.0
11020	01-1201	----	109	135	----	135	--	A	A	--	--	100.0
11023	01-1201	77	----	135	162	----	A	--	A	--	--	100.0
12001	01-1302	----	110	137	----	136	--	--	--	--	--	=====
12002	01-1201	79	----	137	----	136	A	--	A	--	--	100.0
12008	01-0403	75	106	----	----	123	A	A	--	--	--	100.0
12016	01-0403	----	104	127	156	----	--	A	A	--	--	100.0
13002	01-0403	----	106	128	156	----	--	A	A	--	--	100.0
13003	01-1201	----	111	137	----	135	--	A	A	--	--	100.0
13017	01-0403	----	105	128	----	123	--	A	A	--	--	100.0
13026	01-1201	78	111	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
13052	01-1201	79	113	----	----	137	A	A	--	--	--	100.0
13053	01-0403	----	107	128	158	----	--	A	A	--	--	100.0
13061	01-1201	76	----	136	----	133	A	--	A	--	--	100.0
13064	01-1201	82	110	----	159	----	B	A	--	--	--	78.6
13074	01-1201	77	----	136	166	----	A	--	A	--	--	100.0
13084	01-0403	75	----	128	----	122	A	--	A	--	--	100.0
13094	01-0403	75	107	----	----	125	A	A	--	--	--	100.0
13095	01-1201	78	111	----	165	----	A	A	--	--	--	100.0
13100	01-1201	----	110	135	163	----	--	A	A	--	--	100.0
13103	01-1201	79	112	----	166	----	A	A	--	--	--	100.0
14001	01-1201	----	114	141	----	137	--	A	A	--	--	100.0
14003	01-0403	75	106	----	160	----	A	A	--	--	--	100.0

[10]LDLコレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14010	01-0403	----	105	128	----	124	--	A	A	--	--	100.0
14027	01-0403	----	106	----	155	----	--	A	--	--	--	100.0
14030	01-1201	77	110	----	165	----	A	A	--	--	--	100.0
15001	01-2302	83	118	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
15004	01-1301	----	129	161	178	----	--	--	--	--	--	=====
15006	01-1201	79	----	140	----	136	A	--	A	--	--	100.0
15011	01-2302	82	----	143	----	136	A	--	A	--	--	100.0
15012	01-2302	82	117	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
16002	01-1201	----	112	139	63	----	--	A	A	--	--	100.0
16006	01-1201	----	110	137	----	138	--	A	A	--	--	100.0
17001	01-0403	74	----	127	----	122	A	--	A	--	--	100.0
18001	01-0403	74	----	127	----	123	A	--	A	--	--	100.0
20005	01-2302	82	----	141	----	133	A	--	A	--	--	100.0
20007	01-0403	74	----	127	157	----	A	--	A	--	--	100.0
21002	01-0403	----	106	128	156	----	--	A	A	--	--	100.0
21004	01-0801	78	111	----	164	----	--	--	--	--	--	=====
21005	01-0403	74	----	128	----	123	A	--	A	--	--	100.0
21006	01-0403	74	105	----	156	----	A	A	--	--	--	100.0
22001	01-2302	82	----	140	----	135	A	--	A	--	--	100.0
22002	01-0403	74	105	----	153	----	A	A	--	--	--	100.0
22003	01-1201	77	----	136	164	----	A	--	A	--	--	100.0
22004	01-0403	75	----	125	160	----	A	--	A	--	--	100.0
22006	01-0403	75	104	----	160	----	A	A	--	--	--	100.0
22011	01-0403	----	103	126	----	121	--	A	A	--	--	100.0
22012	01-0403	75	----	127	----	123	A	--	A	--	--	100.0
22017	01-0403	----	105	127	156	----	--	A	A	--	--	100.0
22018	01-0403	----	106	130	----	122	--	A	A	--	--	100.0
23003	01-2302	81	112	----	----	131	A	B	--	--	--	92.9
23008	01-0403	75	----	129	156	----	A	--	A	--	--	100.0
23011	01-1201	77	----	136	----	135	A	--	A	--	--	100.0
23015	01-0403	----	105	127	154	----	--	A	A	--	--	100.0
23016	01-0403	74	105	----	----	123	A	A	--	--	--	100.0
23017	01-0403	75	----	128	156	----	A	--	A	--	--	100.0
23019	01-0403	75	----	129	----	123	A	--	A	--	--	100.0
23020	01-0403	74	106	----	154	----	A	A	--	--	--	100.0
23024	01-1201	77	----	135	162	----	A	--	A	--	--	100.0
23029	01-0403	75	106	----	157	----	A	A	--	--	--	100.0
24003	01-0401	----	105	127	156	----	--	--	--	--	--	=====
25003	01-0403	----	106	128	----	124	--	A	A	--	--	100.0
26001	01-0403	----	103	125	----	121	--	A	A	--	--	100.0
26003	01-1201	78	111	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
26006	01-0403	----	107	130	----	125	--	A	A	--	--	100.0
26009	01-1201	77	----	137	165	----	A	--	A	--	--	100.0
27004	01-1201	77	111	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
27013	01-1201	77	----	136	163	----	A	--	A	--	--	100.0
27014	01-1201	77	109	----	164	----	A	A	--	--	--	100.0
27020	01-0403	----	106	128	157	----	--	A	A	--	--	100.0
27044	01-0403	74	105	----	----	125	A	A	--	--	--	100.0
27046	01-0403	76	----	129	158	----	A	--	A	--	--	100.0
27049	01-1201	77	----	135	----	135	A	--	A	--	--	100.0
28002	01-1201	----	110	135	164	----	--	A	A	--	--	100.0
28003	01-0403	----	105	128	----	122	--	A	A	--	--	100.0
28011	01-0403	75	----	131	155	----	A	--	A	--	--	100.0
28016	01-0403	----	105	128	156	----	--	A	A	--	--	100.0
28017	01-0403	75	----	128	----	123	A	--	A	--	--	100.0
28031	01-0403	76	----	129	----	125	A	--	A	--	--	100.0

[10]LDLコレステロール 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28033	01-1201	76	109	-----	160	-----	A	A	--	--	--	100.0
28034	01-1201	-----	109	136	165	-----	--	A	A	--	--	100.0
30004	01-0403	-----	104	129	-----	126	--	A	A	--	--	100.0
30005	01-0403	74	105	-----	-----	123	A	A	--	--	--	100.0
31005	01-0403	74	105	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100.0
32001	01-0403	73	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
32002	01-0403	-----	105	128	158	-----	--	A	A	--	--	100.0
32003	01-0403	73	103	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100.0
33001	01-0403	75	-----	130	157	-----	A	--	A	--	--	100.0
33005	01-0403	-----	103	127	-----	121	--	A	A	--	--	100.0
33008	01-0403	74	-----	130	156	-----	A	--	A	--	--	100.0
33009	01-0403	-----	105	127	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
34004	01-0403	-----	105	127	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
34009	01-1201	76	110	-----	-----	135	A	A	--	--	--	100.0
34010	01-1201	79	-----	136	-----	134	A	--	A	--	--	100.0
34011	01-1201	76	-----	135	-----	133	A	--	A	--	--	100.0
34012	01-1201	-----	116	142	172	-----	--	B	B	--	--	78.6
34015	01-0403	-----	107	129	-----	127	--	A	A	--	--	100.0
35001	01-0403	-----	107	128	-----	125	--	A	A	--	--	100.0
37005	01-1201	-----	113	140	168	-----	--	A	A	--	--	100.0
37007	01-2302	84	-----	143	159	-----	A	--	A	--	--	100.0
37009	01-0401	75	-----	130	-----	-----	--	--	--	--	--	=====
38004	01-0403	75	105	-----	-----	123	A	A	--	--	--	100.0
38007	01-0403	74	-----	128	155	-----	A	--	A	--	--	100.0
39001	01-1201	-----	113	139	-----	136	--	A	A	--	--	100.0
39002	01-0403	-----	107	130	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
39003	01-0403	73	-----	127	153	-----	A	--	A	--	--	100.0
39004	01-1201	78	108	-----	-----	132	A	A	--	--	--	100.0
40005	01-0403	-----	106	128	158	-----	--	A	A	--	--	100.0
40007	01-2302	82	118	-----	158	-----	A	A	--	--	--	100.0
40009	01-2302	-----	116	141	-----	135	--	A	A	--	--	100.0
40011	01-1201	77	110	-----	163	-----	A	A	--	--	--	100.0
40021	01-1201	78	-----	137	-----	135	A	--	A	--	--	100.0
40027	01-0403	73	105	-----	155	-----	A	A	--	--	--	100.0
43001	01-1201	-----	110	137	-----	135	--	A	A	--	--	100.0
43003	01-0403	-----	106	128	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
44001	01-2801	76	114	-----	158	-----	--	--	--	--	--	=====
45002	01-0403	-----	104	126	155	-----	--	A	A	--	--	100.0
46004	01-1201	80	113	-----	167	-----	B	A	--	--	--	92.9
47001	01-1201	76	-----	136	159	-----	A	--	A	--	--	100.0
47004	01-1201	-----	113	140	-----	139	--	A	A	--	--	100.0
47005	01-0403	74	106	-----	159	-----	A	A	--	--	--	100.0
47006	01-1201	77	111	-----	-----	136	A	A	--	--	--	100.0
48512	01-0403	-----	107	128	157	-----	--	A	A	--	--	100.0

[11]HbA1C 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	02-0404	5.5	-----	8.0	6.0	5.2	A	--	A	--	--	100.0
01013	01-2901	5.2	6.2	-----	5.9	4.9	B	B	--	--	--	78.6
01017	02-2401	5.4	6.6	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
01018	02-0401	5.5	-----	8.0	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
01023	02-0404	-----	6.6	8.0	6.0	5.2	--	A	A	--	--	100.0
01025	02-0403	5.5	-----	8.0	5.9	4.9	A	--	A	--	--	100.0
02004	01-2701	5.3	-----	7.5	5.6	4.7	A	--	A	--	--	100.0
03001	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
03006	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
04004	01-2901	5.5	-----	7.7	6.2	5.1	A	--	A	--	--	100.0
04008	01-2901	5.4	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
04009	01-2901	-----	6.5	7.7	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
04010	01-2901	5.5	-----	7.8	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
04015	01-2901	-----	6.6	7.8	6.1	5.2	--	B	A	--	--	92.9
07002	02-0404	-----	6.6	8.0	-----	-----	--	A	A	--	--	100.0
07008	03-1201	5.4	-----	7.5	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
08001	01-2701	-----	6.2	7.5	6.3	5.3	--	A	A	--	--	100.0
08003	01-2701	-----	6.3	7.5	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
08006	03-1201	5.4	-----	7.6	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
08009	02-0403	5.5	6.7	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
08010	01-2901	5.4	-----	7.8	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
09001	02-0403	5.5	6.7	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
09005	01-2701	-----	6.0	7.3	5.9	5.1	--	B	A	--	--	85.7
09012	03-0401	5.5	-----	7.6	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
09013	02-0404	5.4	6.5	-----	5.9	5.1	A	A	--	--	--	100.0
10003	02-0401	5.6	6.7	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
10004	02-0404	5.5	-----	8.1	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
10005	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
10007	01-2901	5.4	-----	7.8	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
11006	02-0401	-----	6.8	8.1	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
11010	03-0401	-----	6.3	7.6	5.8	4.9	--	A	A	--	--	100.0
11011	02-0404	-----	6.6	8.1	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
11016	01-2901	5.5	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
11020	01-2901	5.5	6.5	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
11023	01-2901	-----	6.5	7.7	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
12001	03-3501	5.4	6.5	-----	6.0	5.1	--	--	--	--	--	=====
12002	01-2701	5.4	6.3	-----	6.2	5.3	A	A	--	--	--	100.0
12008	03-2701	-----	6.3	7.6	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
12016	01-2901	5.5	-----	7.8	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
13002	01-2701	-----	7.5	6.2	6.2	5.2	--	D	D	--	--	0.0
13003	01-2701	5.4	6.3	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
13017	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13026	01-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13052	01-2701	5.4	6.3	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
13053	01-2901	-----	6.4	7.7	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
13054	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
13061	03-2701	5.3	6.3	-----	6.0	5.2	A	A	--	--	--	100.0
13064	03-0401	-----	6.3	7.7	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13074	02-2401	5.4	-----	7.9	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
13084	01-2701	-----	7.5	6.2	6.2	5.2	--	D	D	--	--	0.0
13094	03-0401	5.5	-----	7.7	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
13095	01-2901	5.4	6.4	-----	6.2	5.2	A	A	--	--	--	100.0
13100	02-2401	5.5	6.6	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
13103	02-0404	5.6	6.7	-----	5.9	5.1	A	A	--	--	--	100.0
14001	02-0404	5.6	-----	7.4	6.2	5.3	A	--	C	--	--	64.3
14003	01-2701	-----	6.3	7.7	6.0	5.2	--	A	B	--	--	92.9

[11]HbA1C 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14010	03-0401	5.4	6.3	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
14027	03-1201	5.4	-----	7.7	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
14030	03-1201	5.4	-----	7.7	6.3	5.2	A	--	A	--	--	100.0
15001	03-1201	5.5	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
15004	01-2901	-----	6.3	7.6	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
15006	01-2901	-----	6.4	7.7	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
15011	01-2901	5.5	6.4	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
15012	01-2901	5.5	6.5	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
16002	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
16006	01-2901	5.4	-----	7.5	6.0	5.0	A	--	B	--	--	92.9
17001	01-2901	-----	6.5	7.8	6.2	5.2	--	A	A	--	--	100.0
18001	02-0404	-----	6.6	8.0	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
20005	03-1201	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
20007	02-0404	-----	6.6	8.1	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
21002	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
21004	01-2901	5.4	6.3	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
21005	02-0401	-----	6.7	8.1	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
21006	02-0404	-----	6.6	8.0	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
22001	01-2901	5.4	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
22002	01-2901	5.4	-----	7.8	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
22003	01-2901	5.4	6.4	-----	6.2	5.1	A	A	--	--	--	100.0
22004	01-2901	5.3	6.2	-----	6.0	5.0	A	B	--	--	--	92.9
22006	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
22011	01-2901	5.4	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
22012	02-0401	-----	6.6	8.0	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
22017	01-2901	5.4	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
22018	01-2901	5.4	-----	7.7	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
23003	02-0404	5.5	6.5	-----	6.0	5.2	A	A	--	--	--	100.0
23008	02-0404	5.5	-----	8.0	5.9	5.1	A	--	A	--	--	100.0
23011	01-2901	-----	6.5	7.8	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
23015	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
23016	02-0403	5.5	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
23017	01-2901	5.5	-----	7.7	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
23019	01-2901	5.4	6.3	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
23020	01-2901	5.5	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
23024	01-2701	-----	6.2	7.5	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
24003	02-0404	5.5	6.6	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
25003	02-0403	5.5	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
26001	02-0402	5.5	-----	7.9	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
26003	01-2701	5.5	6.4	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
26006	03-0401	7.7	6.4	-----	6.2	5.1	D	A	--	--	--	50.0
26009	01-2901	5.3	-----	7.6	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
27004	01-2901	5.4	-----	7.7	6.2	5.2	A	--	A	--	--	100.0
27013	02-2401	5.4	-----	7.9	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
27014	03-0401	5.4	6.3	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
27020	02-0403	-----	6.6	8.0	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
27044	01-2701	5.3	6.2	-----	6.0	5.2	A	A	--	--	--	100.0
27046	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
27049	01-2901	5.4	-----	7.7	-----	-----	A	--	A	--	--	100.0
28002	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
28003	01-2901	5.4	-----	7.7	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
28011	02-0404	-----	6.4	7.9	6.1	5.2	--	B	A	--	--	92.9
28016	03-0401	5.5	-----	7.7	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
28017	01-2901	5.4	6.3	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
28031	01-2901	5.4	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
28033	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0

[11]HbA1C 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28034	03-2701	----	6.4	7.6	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
30004	02-0404	5.5	-----	8.1	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
30005	01-2901	----	6.4	7.7	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
31005	02-0404	----	6.5	8.0	5.9	5.1	--	A	A	--	--	100.0
32001	01-2901	----	6.5	7.7	-----	-----	--	A	A	--	--	100.0
32002	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
32003	01-2901	----	6.5	7.8	6.1	5.0	--	A	A	--	--	100.0
33001	01-2701	----	7.5	6.2	6.3	5.3	--	D	D	--	--	0.0
33005	01-2901	5.4	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
33008	02-0404	5.6	-----	8.1	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
33009	02-0402	----	6.5	8.0	5.8	5.2	--	A	A	--	--	100.0
34004	02-0404	5.5	6.6	-----	5.9	5.1	A	A	--	--	--	100.0
34009	01-2901	5.5	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
34010	01-2901	5.5	6.5	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
34011	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
34012	01-2901	----	6.7	8.1	6.2	5.2	--	B	B	--	--	64.3
34015	02-0401	----	6.6	8.0	5.9	4.9	--	A	A	--	--	100.0
35001	02-0403	5.5	-----	8.1	6.1	5.0	A	--	A	--	--	100.0
37005	01-2901	5.6	-----	7.9	6.2	5.2	B	--	A	--	--	92.9
37007	01-2901	5.5	6.4	-----	6.1	5.0	A	A	--	--	--	100.0
37009	03-1201	----	6.3	7.6	-----	-----	--	A	A	--	--	100.0
38004	01-2901	5.4	-----	7.6	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
38007	02-0404	5.4	6.5	-----	5.8	5.1	A	A	--	--	--	100.0
39001	01-2901	----	6.4	7.7	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
39002	03-1201	----	6.4	7.7	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
39003	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
39004	01-2701	5.4	-----	7.5	6.0	5.2	A	--	A	--	--	100.0
40005	01-2901	----	6.4	7.7	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
40007	02-0404	5.4	-----	7.9	5.8	5.0	A	--	A	--	--	100.0
40009	01-2901	----	6.3	7.6	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
40011	01-2701	5.3	-----	7.4	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
40021	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
40027	03-0401	5.5	-----	7.6	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
43001	03-1201	----	6.2	7.5	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
43003	01-2701	5.4	6.3	-----	6.1	5.3	A	A	--	--	--	100.0
44001	01-2901	----	6.4	7.7	6.2	5.2	--	A	A	--	--	100.0
45002	02-0404	5.4	-----	8.0	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
46004	03-1201	----	6.4	7.6	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
47001	01-2701	5.4	6.3	-----	6.0	5.2	A	A	--	--	--	100.0
47004	01-2701	5.5	-----	7.5	5.9	5.2	A	--	A	--	--	100.0
47005	01-2701	----	6.1	7.3	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
47006	01-2701	5.3	-----	7.4	-----	-----	A	--	A	--	--	100.0
48512	01-2901	5.4	-----	7.7	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0

[12]尿糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
01001	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
01002	1	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
01013	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
01017	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
01018	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
01019	1	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
01023	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
01025	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
01027	1	1	3	3	----	5	----	1	----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
02003	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
02004	2	1	4	4	----	----	1	1	----	A	B	B	--	--	Z	A	--	72.0
03001	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
03004	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
03006	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
04001	2	1	3	3	----	5	----	1	----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
04004	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
04006	2	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
04008	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
04009	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
04010	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
04012	1	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
04015	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
06001	1	1	4	----	3	5	----	----	5	A	B	--	A	B	--	--	B	88.0
06004	1	1	4	----	4	----	4	1	----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
07002	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
07004	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
07007	1	1	4	3	----	4	----	----	5	A	B	A	--	A	--	--	B	92.0
07008	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
08001	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
08002	1	1	3	----	3	----	5	----	5	A	A	--	A	--	B	--	B	92.0
08003	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
08006	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
08009	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
08010	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
09001	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09005	1	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
09007	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
09008	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
09009	1	1	4	4	----	5	----	----	4	A	B	B	--	B	--	--	A	88.0
09010	1	1	4	4	----	5	----	1	----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
09011	1	1	3	4	----	4	----	----	4	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
09012	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
09013	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09014	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
09016	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10001	1	1	4	----	4	5	----	----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
10002	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10003	1	1	3	3	----	5	----	----	5	A	A	A	--	B	--	--	B	92.0
10004	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
10005	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10007	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
11002	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11004	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
11005	2	1	3	3	----	5	----	1	----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
11006	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11007	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0

[12]尿糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
11010	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11011	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11016	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
11020	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
11021	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11023	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11025	1	1	4	4	----	----	5	1	----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
12001	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
12002	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
12003	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
12006	1	1	4	4	----	4	----	----	4	A	B	B	--	A	--	--	A	92.0
12008	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
12010	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
12011	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
12012	1	1	4	4	----	----	5	1	----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
12013	1	1	3	3	----	5	----	----	4	A	A	A	--	B	--	--	A	96.0
12014	1	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
12015	1	4	1	----	4	----	1	4	----	Z	Z	--	B	--	Z	Z	--	16.0
12016	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
12018	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13001	1	1	4	----	3	----	5	1	----	A	B	--	A	--	B	A	--	92.0
13002	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13003	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13004	1	1	4	----	3	----	4	1	----	A	B	--	A	--	A	A	--	96.0
13005	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13006	1	1	3	3	----	----	5	1	----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
13007	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13008	1	1	5	----	4	7	----	----	7	A	Z	--	B	Z	--	--	Z	36.0
13010	2	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
13014	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13015	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13017	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13021	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13022	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13024	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13026	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13028	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13033	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13035	1	1	4	----	4	5	----	----	4	A	B	--	B	B	--	--	A	88.0
13036	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13038	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13039	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13045	2	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13049	1	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
13051	1	1	4	----	4	----	4	----	4	A	B	--	B	--	A	--	A	92.0
13052	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13053	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13054	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13055	1	1	3	4	----	----	5	1	----	A	A	B	--	--	B	A	--	92.0
13056	1	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
13061	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13063	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13064	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13067	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13074	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13077	1	1	4	4	----	----	4	1	----	A	B	B	--	--	A	A	--	92.0

[12]尿糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 日	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
13078	1	1	5	5	----	5	----	----	5	A	Z	Z	--	B	--	--	B	52.0
13079	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13080	1	1	3	----	3	----	5	----	5	A	A	--	A	--	B	--	B	92.0
13082	1	1	4	4	----	----	5	1	----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
13083	1	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
13084	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13088	1	1	4	----	4	----	4	----	5	A	B	--	B	--	A	--	B	88.0
13090	1	1	4	----	4	5	----	----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
13094	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13095	2	1	3	4	----	5	----	1	----	A	A	B	--	B	--	A	--	92.0
13100	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13101	1	1	4	----	4	----	4	1	----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
13103	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13107	1	1	3	4	----	----	4	1	----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
13108	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13109	1	1	4	3	----	4	----	1	----	A	B	A	--	A	--	A	--	96.0
13115	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13123	1	1	4	4	----	4	----	----	5	A	B	B	--	A	--	--	B	88.0
14001	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14002	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
14003	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
14004	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14005	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
14006	1	1	3	----	2	----	4	----	4	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
14007	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
14010	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14018	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14022	1	1	3	----	4	----	4	----	4	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
14023	1	1	4	3	----	5	----	1	----	A	B	A	--	B	--	A	--	92.0
14024	1	1	4	----	3	5	----	----	4	A	B	--	A	B	--	--	A	92.0
14025	1	1	4	4	----	4	----	----	5	A	B	B	--	A	--	--	B	88.0
14026	1	1	3	----	3	5	----	----	5	A	A	--	A	B	--	--	B	92.0
14027	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
14029	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
14030	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14034	2	1	4	----	4	5	----	----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
15001	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
15004	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
15006	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
15007	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
15008	1	1	4	----	4	4	----	----	4	A	B	--	B	A	--	--	A	92.0
15010	1	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
15011	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
15012	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
16002	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
16004	1	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
16005	1	1	4	4	----	4	----	1	----	A	B	B	--	A	--	A	--	92.0
16006	2	1	3	3	----	----	5	1	----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
16008	1	1	4	4	----	5	----	----	6	A	B	B	--	B	--	--	Z	68.0
17001	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
18001	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
18003	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20001	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
20002	2	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
20003	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
20004	1	1	3	4	----	5	----	1	----	A	A	B	--	B	--	A	--	92.0

[12]尿糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 日	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
20005	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20007	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
21001	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
21002	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
21004	1	1	3	4	----	4	----	----	4	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
21005	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
21006	2	1	3	----	4	----	5	----	5	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
22001	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22002	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22003	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22004	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22006	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22010	1	1	4	----	3	----	5	----	5	A	B	--	A	--	B	--	B	88.0
22011	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
22012	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
22015	1	1	4	4	----	5	----	1	----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
22017	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22018	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
22019	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
23001	1	1	4	4	----	----	4	1	----	A	B	B	--	--	A	A	--	92.0
23002	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
23003	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23005	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
23006	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23007	1	1	4	4	----	4	----	1	----	A	B	B	--	A	--	A	--	92.0
23008	2	1	3	3	----	----	5	1	----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
23009	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23011	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23012	1	1	3	----	4	----	4	1	----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
23015	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23016	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23017	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23018	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23019	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23020	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23022	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23024	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23029	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23032	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
23038	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23039	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23040	1	1	3	----	4	----	5	----	4	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
23042	1	1	4	----	4	----	4	----	5	A	B	--	B	--	A	--	B	88.0
23051	1	1	4	----	4	----	7	1	----	A	B	--	B	--	Z	A	--	72.0
24001	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
24002	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
24003	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
25001	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
25003	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
26001	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
26003	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
26005	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
26006	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
26009	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
26012	2	1	3	----	3	5	----	----	5	A	A	--	A	B	--	--	B	92.0
27001	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0

[12]尿糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
27002	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
27003	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27004	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27005	1	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
27006	1	1	4	4	----	----	5	1	----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
27007	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27010	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27013	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27014	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27018	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
27020	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27023	2	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
27031	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27037	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27038	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27041	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27042	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27044	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27045	2	1	3	3	----	4	----	----	5	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
27046	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27049	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27051	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28001	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28002	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28003	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28007	1	1	4	2	----	4	----	----	5	A	B	B	--	A	--	--	B	88.0
28008	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28011	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
28014	1	1	4	3	----	4	----	1	----	A	B	A	--	A	--	A	--	96.0
28015	1	1	4	4	----	4	----	----	5	A	B	B	--	A	--	--	B	88.0
28016	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28017	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28018	1	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
28019	1	1	4	3	----	----	4	1	----	A	B	A	--	--	A	A	--	96.0
28024	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28029	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28031	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28033	2	1	3	3	----	4	----	----	5	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
28034	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
30004	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
30005	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
30006	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
31002	1	1	4	4	----	----	5	1	----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
31003	1	1	4	4	----	5	----	----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
31005	1	1	3	----	3	----	4	----	5	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
32001	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
32002	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
32003	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33001	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33002	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
33004	1	1	3	----	4	5	----	----	4	A	A	--	B	B	--	--	A	92.0
33005	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
33008	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
33009	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33014	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
34001	1	1	3	----	4	----	4	1	----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0

[12]尿糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 日	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
34002	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
34003	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
34004	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34005	1	1	4	4	----	----	5	1	----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
34009	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34010	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34011	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34012	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
34013	2	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
34015	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
35001	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
35006	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
37001	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
37004	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
37005	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
37007	2	1	3	4	----	4	----	1	----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
37009	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
38004	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
38006	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
38007	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
38008	1	1	4	----	4	----	7	----	5	A	B	--	B	--	Z	--	B	68.0
39001	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
39002	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
39003	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
39004	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40001	1	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40002	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40005	2	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
40006	1	1	4	----	4	4	----	----	4	A	B	--	B	A	--	--	A	92.0
40007	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
40009	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
40011	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40015	1	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
40021	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40022	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
40025	1	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
40027	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40028	1	1	4	4	----	----	5	1	----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
40029	1	1	3	3	----	3	----	1	----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
40030	2	1	3	3	----	5	----	----	5	A	A	A	--	B	--	--	B	92.0
40031	1	1	4	4	----	5	----	1	----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
40034	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40035	1	1	4	4	----	5	----	1	----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
41001	1	1	4	----	4	5	----	----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
41002	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
42002	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
43001	1	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
43003	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
43004	1	3	1	3	----	----	4	3	----	Z	Z	A	--	--	A	Z	--	40.0
43007	2	1	3	----	3	----	5	----	4	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
44001	2	1	4	----	4	----	5	----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
44002	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
45002	1	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
46001	2	1	3	----	3	5	----	----	5	A	A	--	A	B	--	--	B	92.0
46004	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
47001	2	1	3	3	----	5	----	----	5	A	A	A	--	B	--	--	B	92.0
47002	2	1	4	----	4	5	----	----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0

[12]尿糖 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
47004	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
47005	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
47006	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
48512	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0

[13]尿蛋白 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
01001	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
01002	1	3	1	----	5	----	5	----	1	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
01013	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
01017	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
01018	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
01019	1	2	1	3	----	2	----	----	1	B	A	A	--	B	--	--	A	92.0
01023	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
01025	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
01027	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
02003	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
02004	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
03001	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
03004	1	2	1	----	3	----	3	4	----	B	A	--	B	--	B	A	--	88.0
03006	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
04001	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
04004	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
04006	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
04008	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
04009	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
04010	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
04012	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
04015	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
06001	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
06004	1	3	1	----	4	----	4	5	----	A	A	--	A	--	A	B	--	96.0
07002	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
07004	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
07007	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
07008	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
08001	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
08002	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
08003	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
08006	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
08009	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
08010	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
09001	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09005	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
09007	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
09008	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
09009	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
09010	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09011	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
09012	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
09013	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09014	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
09016	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10001	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
10002	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10003	1	2	1	2	----	3	----	----	1	B	A	B	--	A	--	--	A	92.0
10004	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
10005	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10007	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
11002	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11004	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
11005	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
11006	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11007	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0

[13]尿蛋白 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
11010	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11011	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11016	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
11020	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
11021	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11023	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11025	1	2	1	2	----	----	4	4	----	B	A	B	--	--	A	A	--	92.0
12001	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
12002	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
12003	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
12006	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
12008	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
12010	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
12011	1	2	1	----	4	3	----	----	1	B	A	--	A	A	--	--	A	96.0
12012	1	4	1	3	----	----	4	4	----	B	A	A	--	--	A	A	--	96.0
12013	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
12014	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
12015	1	3	2	----	1	----	4	4	----	A	B	--	Z	--	A	A	--	76.0
12016	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
12018	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13001	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13002	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13003	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13004	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13005	1	2	1	----	4	----	4	4	----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
13006	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13007	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13008	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13010	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13014	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13015	1	2	1	----	4	----	4	4	----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
13017	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13021	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13022	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13024	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13026	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13028	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13033	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13035	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13036	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13038	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13039	1	4	1	3	----	4	----	5	----	B	A	A	--	B	--	B	--	88.0
13045	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13049	1	2	1	----	4	----	4	----	1	B	A	--	A	--	A	--	A	96.0
13051	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13052	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13053	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13054	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13055	1	2	1	3	----	----	5	4	----	B	A	A	--	--	B	A	--	92.0
13056	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13061	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13063	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13064	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13067	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13074	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13077	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0

[13]尿蛋白 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
13078	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13079	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13080	1	1	1	----	3	----	3	----	1	Z	A	--	B	--	B	--	A	72.0
13082	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13083	1	2	1	2	----	3	----	----	1	B	A	B	--	A	--	--	A	92.0
13084	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13088	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13090	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13094	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13095	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13100	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13101	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13103	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13107	1	2	1	3	----	----	4	4	----	B	A	A	--	--	A	A	--	96.0
13108	1	3	1	----	5	3	----	----	1	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
13109	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13115	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13123	1	4	1	4	----	4	----	----	1	B	A	B	--	B	--	--	A	88.0
14001	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14002	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
14003	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
14004	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14005	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
14006	1	3	1	----	4	----	5	----	1	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
14007	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
14010	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14018	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14022	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
14023	1	2	1	3	----	2	----	4	----	B	A	A	--	B	--	A	--	92.0
14024	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14025	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14026	1	2	1	----	4	2	----	----	1	B	A	--	A	B	--	--	A	92.0
14027	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
14029	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
14030	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14034	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
15001	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
15004	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
15006	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
15007	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
15008	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
15010	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
15011	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
15012	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
16002	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
16004	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
16005	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
16006	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
16008	1	3	1	2	----	3	----	----	1	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
17001	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
18001	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
18003	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20001	1	3	1	----	5	----	5	----	1	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
20002	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20003	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
20004	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0

[13]尿蛋白 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
20005	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20007	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
21001	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
21002	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
21004	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
21005	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
21006	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
22001	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22002	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22003	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22004	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22006	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22010	1	2	1	----	4	----	4	----	1	B	A	--	A	--	A	--	A	96.0
22011	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
22012	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
22015	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22017	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22018	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
22019	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
23001	1	2	1	1	----	----	2	3	----	B	A	Z	--	--	Z	B	--	52.0
23002	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23003	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23005	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
23006	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23007	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
23008	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23009	1	2	1	----	4	----	4	4	----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
23011	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23012	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23015	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23016	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23017	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23018	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23019	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23020	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23022	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23024	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23029	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23032	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
23038	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23039	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23040	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23042	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23051	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
24001	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
24002	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
24003	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
25001	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
25003	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
26001	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
26003	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
26005	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
26006	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
26009	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
26012	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27001	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0

[13]尿蛋白 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
27002	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27003	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27004	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27005	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
27006	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27007	1	3	2	----	5	----	4	----	1	A	B	--	B	--	A	--	A	92.0
27010	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27013	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27014	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27018	1	3	1	----	5	----	4	4	----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
27020	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27023	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27031	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27037	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27038	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27041	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27042	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27044	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27045	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
27046	2	3	1	3	----	3	----	5	----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
27049	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27051	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28001	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28002	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28003	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28007	1	2	1	2	----	2	----	----	1	B	A	B	--	B	--	--	A	88.0
28008	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28011	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
28014	1	3	1	4	----	3	----	4	----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
28015	1	3	1	3	----	2	----	----	1	A	A	A	--	B	--	--	A	96.0
28016	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28017	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28018	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
28019	1	3	1	2	----	----	5	4	----	A	A	B	--	--	B	A	--	92.0
28024	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28029	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28031	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28033	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
28034	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
30004	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
30005	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
30006	2	3	1	3	----	----	5	4	----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
31002	1	2	1	3	----	----	4	4	----	B	A	A	--	--	A	A	--	96.0
31003	1	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
31005	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
32001	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
32002	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
32003	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33001	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33002	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
33004	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
33005	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
33008	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
33009	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33014	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
34001	1	3	1	----	5	----	4	4	----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0

[13]尿蛋白 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
34002	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
34003	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
34004	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34005	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
34009	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34010	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34011	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34012	2	3	1	----	5	----	5	----	1	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
34013	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
34015	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
35001	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
35006	1	2	1	----	3	----	4	4	----	B	A	--	B	--	A	A	--	92.0
37001	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
37004	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
37005	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
37007	2	2	1	3	----	3	----	4	----	B	A	A	--	A	--	A	--	96.0
37009	2	2	1	----	4	----	4	4	----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
38004	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
38006	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
38007	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
38008	1	1	1	----	4	----	4	----	1	Z	A	--	A	--	A	--	A	80.0
39001	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
39002	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
39003	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
39004	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40001	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40002	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40005	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
40006	1	3	1	----	4	4	----	----	1	A	A	--	A	B	--	--	A	96.0
40007	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
40009	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
40011	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40015	1	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
40021	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40022	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
40025	1	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
40027	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40028	1	2	1	2	----	----	4	3	----	B	A	B	--	--	A	B	--	88.0
40029	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40030	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
40031	1	2	1	2	----	3	----	4	----	B	A	B	--	A	--	A	--	92.0
40034	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40035	1	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
41001	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
41002	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
42002	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
43001	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
43003	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
43004	1	1	4	4	----	----	5	2	----	Z	Z	B	--	--	B	Z	--	32.0
43007	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
44001	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
44002	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
45002	1	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
46001	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
46004	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
47001	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
47002	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0

[13]尿蛋白 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
47004	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
47005	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
47006	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
48512	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0

[14]尿潜血 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
01001	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
01002	1	1	1	----	2	----	2	----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
01013	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
01017	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
01018	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
01019	1	1	1	4	----	1	----	----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
01023	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
01025	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
01027	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
02003	2	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
02004	2	1	1	4	----	----	3	3	----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
03001	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
03004	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
03006	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
04001	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
04004	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
04006	2	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
04008	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
04009	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
04010	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
04012	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
04015	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
06001	1	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
06004	1	1	1	----	2	----	3	3	----	A	A	--	A	--	B	B	--	92.0
07002	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
07004	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
07007	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
07008	1	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
08001	2	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
08002	1	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
08003	2	1	1	----	3	----	2	2	----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
08006	1	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
08009	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
08010	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
09001	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09005	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
09007	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
09008	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
09009	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
09010	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09011	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
09012	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
09013	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09014	2	1	1	4	----	----	3	3	----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
09016	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10001	1	1	1	----	2	1	----	----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
10002	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10003	1	1	1	4	----	1	----	----	3	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
10004	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
10005	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
10007	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
11002	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11004	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
11005	2	1	1	2	----	1	----	2	----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
11006	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11007	1	1	1	3	----	1	----	----	2	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0

[14]尿潜血 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
11010	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11011	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11016	2	1	1	----	2	1	----	----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
11020	2	1	1	3	----	1	----	----	2	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
11021	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
11023	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
11025	1	1	1	4	----	----	3	3	----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
12001	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
12002	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
12003	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
12006	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
12008	2	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
12010	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
12011	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
12012	1	1	1	4	----	----	2	3	----	A	A	B	--	--	A	B	--	92.0
12013	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
12014	1	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
12015	1	2	1	----	1	----	2	2	----	B	A	--	B	--	A	A	--	92.0
12016	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
12018	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13001	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13002	2	3	1	----	2	----	2	2	----	Z	A	--	A	--	A	A	--	80.0
13003	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13004	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13005	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13006	1	1	1	4	----	----	3	3	----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
13007	2	1	1	2	----	----	2	2	----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
13008	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13010	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13014	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13015	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13017	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13021	2	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
13022	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13024	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13026	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13028	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13033	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13035	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13036	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13038	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13039	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13045	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13049	1	1	1	----	2	----	2	----	2	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
13051	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13052	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13053	2	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13054	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13055	1	1	1	4	----	----	2	3	----	A	A	B	--	--	A	B	--	92.0
13056	1	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
13061	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13063	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13064	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
13067	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13074	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13077	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0

[14]尿潜血 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
13078	1	1	1	3	----	1	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
13079	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13080	1	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
13082	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13083	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13084	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13088	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13090	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13094	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13095	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13100	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
13101	1	1	1	----	2	----	2	3	----	A	A	--	A	--	A	B	--	96.0
13103	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13107	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
13108	1	1	1	----	2	1	----	----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
13109	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13115	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
13123	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14001	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14002	1	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
14003	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
14004	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14005	1	1	1	----	2	----	3	2	----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
14006	1	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
14007	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
14010	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14018	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
14022	1	1	1	----	2	----	2	----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
14023	1	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
14024	1	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
14025	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
14026	1	1	1	----	3	1	----	----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
14027	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
14029	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
14030	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
14034	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
15001	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
15004	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
15006	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
15007	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
15008	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
15010	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
15011	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
15012	2	1	1	3	----	1	----	3	----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
16002	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
16004	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
16005	1	1	1	3	----	1	----	3	----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
16006	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
16008	1	1	1	4	----	1	----	----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
17001	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
18001	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
18003	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20001	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
20002	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20003	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
20004	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0

[14]尿潜血 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
20005	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
20007	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
21001	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
21002	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
21004	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
21005	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
21006	2	1	1	----	1	----	2	----	3	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
22001	1	1	1	----	3	1	----	----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
22002	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22003	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22004	2	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
22006	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22010	1	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
22011	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
22012	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
22015	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
22017	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
22018	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
22019	1	1	1	----	3	1	----	----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
23001	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23002	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23003	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23005	1	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
23006	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23007	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
23008	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23009	1	1	1	----	3	----	2	2	----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
23011	2	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
23012	1	1	1	----	2	----	2	3	----	A	A	--	A	--	A	B	--	96.0
23015	1	1	1	4	----	1	----	----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
23016	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23017	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23018	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23019	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23020	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23022	1	1	1	3	----	1	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
23024	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23029	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
23032	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
23038	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23039	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23040	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23042	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23051	1	1	1	----	3	----	3	2	----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
24001	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
24002	1	1	1	3	----	1	----	----	2	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
24003	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
25001	1	1	1	----	2	1	----	----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
25003	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
26001	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
26003	2	1	1	3	----	1	----	3	----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
26005	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
26006	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
26009	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
26012	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27001	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0

[14]尿潜血 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
27002	1	1	1	----	2	----	3	3	----	A	A	--	A	--	B	B	--	92.0
27003	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27004	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27005	1	1	1	3	----	1	----	----	2	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
27006	1	1	1	4	----	----	3	3	----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
27007	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27010	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27013	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27014	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27018	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
27020	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
27023	2	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
27031	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27037	1	1	1	----	2	----	1	3	----	A	A	--	A	--	B	B	--	92.0
27038	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27041	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27042	2	1	1	3	----	----	3	3	----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
27044	2	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
27045	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
27046	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27049	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
27051	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28001	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28002	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28003	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28007	1	1	1	4	----	1	----	----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
28008	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28011	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
28014	1	1	1	3	----	1	----	3	----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
28015	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
28016	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28017	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
28018	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
28019	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28024	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28029	2	1	1	3	----	1	----	3	----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
28031	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
28033	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
28034	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
30004	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
30005	2	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
30006	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
31002	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
31003	1	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
31005	1	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
32001	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
32002	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
32003	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33001	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33002	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
33004	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
33005	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
33008	1	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
33009	1	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
33014	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
34001	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0

[14]尿潜血 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
34002	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
34003	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
34004	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34005	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
34009	2	1	1	3	----	1	----	----	2	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
34010	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
34011	2	1	1	3	----	1	----	----	2	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
34012	2	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
34013	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
34015	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
35001	1	1	1	4	----	----	3	3	----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
35006	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
37001	1	1	1	----	2	----	3	3	----	A	A	--	A	--	B	B	--	92.0
37004	2	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
37005	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
37007	2	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
37009	2	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
38004	2	1	1	3	----	----	3	3	----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
38006	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
38007	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
38008	1	1	1	----	4	----	4	----	4	A	A	--	Z	--	Z	--	B	56.0
39001	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
39002	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
39003	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
39004	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40001	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40002	2	1	1	----	2	1	----	----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
40005	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
40006	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40007	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
40009	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
40011	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
40015	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
40021	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40022	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
40025	1	1	1	----	2	----	2	----	2	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
40027	2	1	1	----	2	1	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
40028	1	1	1	4	----	----	3	3	----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
40029	1	1	1	3	----	1	----	3	----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
40030	2	1	1	4	----	1	----	----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
40031	1	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
40034	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
40035	1	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
41001	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
41002	2	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
42002	1	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
43001	1	1	1	----	3	----	3	3	----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
43003	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
43004	1	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
43007	2	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
44001	2	1	1	----	3	----	3	----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
44002	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
45002	1	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
46001	2	1	1	----	2	1	----	----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
46004	2	1	1	----	3	----	3	----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
47001	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
47002	2	1	1	----	3	1	----	----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0

[14]尿潜血 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定 法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
47004	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
47005	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
47006	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
48512	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0

[15]ヘモグロビン 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
01013	1	13.1	----	17.2	9.3	11.5	A	--	A	--	--	100.0
01017	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
01018	2	13.3	----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
01023	2	13.3	----	17.5	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
01025	2	13.6	7.4	----	9.4	12.0	A	A	--	--	--	100.0
02004	2	13.4	----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
03001	2	13.4	7.4	----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
03006	2	13.4	----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
04004	2	13.3	7.4	----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
04008	2	13.3	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
04009	2	13.3	7.4	----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
04010	2	13.3	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
04015	2	13.3	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
07008	2	13.5	----	17.7	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
08001	1	13.4	7.4	----	9.6	12.1	A	A	--	--	--	100.0
08003	2	13.4	----	17.6	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
08006	2	13.0	----	16.9	9.3	11.6	B	--	B	--	--	64.3
08009	2	13.5	7.5	----	9.6	12.0	A	A	--	--	--	100.0
08010	2	13.4	----	17.8	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
09001	2	13.0	----	16.8	9.3	11.5	B	--	C	--	--	57.1
09005	2	13.2	7.3	----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
09012	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
09013	2	13.3	----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
10003	2	13.3	----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
10004	9	13.4	----	17.5	9.7	12.0	A	--	A	--	--	100.0
10005	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
10007	2	13.4	----	17.6	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
11006	2	13.3	----	17.6	9.5	11.7	A	--	A	--	--	100.0
11010	2	13.3	7.4	----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
11011	2	13.4	7.4	----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
11016	2	13.3	----	17.5	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
11020	2	13.3	----	17.5	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
11023	2	13.2	----	17.4	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
12001	2	13.3	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
12002	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
12008	2	13.4	----	17.6	9.5	11.9	A	--	A	--	--	100.0
12016	2	13.2	----	17.3	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
13002	2	13.2	----	17.4	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
13003	2	13.4	----	17.5	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13017	2	13.4	----	17.6	9.5	11.9	A	--	A	--	--	100.0
13026	2	13.4	7.5	----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
13052	2	13.2	7.4	----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13053	2	13.4	7.4	----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13054	2	13.3	7.4	----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13061	2	13.4	----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13064	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13074	2	13.4	----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13084	2	13.2	----	17.3	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13094	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13095	2	13.3	----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13100	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13103	2	13.3	----	17.4	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
14001	2	13.4	----	17.6	9.5	11.9	A	--	A	--	--	100.0
14003	2	13.4	----	17.6	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
14010	2	13.4	7.5	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0

[15]ヘモグロビン 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14024	2	13.3	7.4	----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
14027	2	13.3	7.3	----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
14030	2	13.5	----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
15001	2	13.4	----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
15004	2	13.5	7.5	----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
15006	2	13.4	----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
15011	2	13.4	----	17.7	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
15012	2	13.4	7.4	----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
16002	2	13.5	----	17.7	9.5	11.9	A	--	A	--	--	100.0
16006	2	13.4	----	17.6	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
17001	2	13.3	7.4	----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
18001	2	13.4	7.3	----	9.6	11.9	A	A	--	--	--	100.0
20005	2	13.5	7.5	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
20007	2	13.4	----	17.7	9.5	11.7	A	--	A	--	--	100.0
21002	2	13.4	----	17.6	9.5	11.7	A	--	A	--	--	100.0
21004	1	13.3	----	17.4	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
21005	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
21006	2	13.2	----	17.3	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
22001	2	13.4	7.4	----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
22002	2	13.2	----	17.4	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
22003	2	13.4	7.4	----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
22004	2	13.1	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
22006	2	13.4	----	17.5	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
22011	2	13.2	----	17.3	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
22012	2	13.4	----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
22017	2	13.2	----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
22018	2	13.4	----	17.4	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
23003	1	13.1	7.3	----	9.3	11.5	A	A	--	--	--	100.0
23008	1	13.2	----	17.2	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
23011	1	13.1	7.3	----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23015	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
23016	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23017	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23019	2	13.5	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
23020	2	13.4	----	17.6	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
23024	2	13.5	7.5	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23051	1	14.0	7.7	----	10.0	12.5	C	B	--	--	--	50.0
24003	2	13.5	7.4	----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
25003	2	13.4	----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
26001	2	12.8	----	16.9	9.2	11.5	C	--	B	--	--	50.0
26003	2	13.3	7.4	----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
26006	2	13.3	7.4	----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
26009	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27001	9	13.6	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27004	1	12.8	----	16.6	9.3	11.5	C	--	C	--	--	42.9
27013	2	13.4	7.6	----	9.6	11.9	A	B	--	--	--	92.9
27014	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27020	2	13.4	----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27044	2	13.4	----	17.6	9.4	11.9	A	--	A	--	--	100.0
27046	1	13.3	----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27049	1	13.2	7.4	----	9.4	12.0	A	A	--	--	--	100.0
28002	2	13.3	----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
28003	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
28011	2	13.2	7.5	----	9.5	11.9	A	A	--	--	--	100.0
28016	2	13.4	7.4	----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
28017	2	13.4	----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0

[15]ヘモグロビン 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28031	1	13.3	-----	17.3	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
28033	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
28034	2	13.5	-----	17.6	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
30004	2	13.1	7.3	-----	9.2	11.6	A	A	--	--	--	100.0
30005	2	13.3	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
31005	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
32001	2	13.5	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
32002	2	13.3	-----	17.5	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
32003	2	13.2	7.3	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
33001	1	13.1	-----	16.9	9.2	11.5	A	--	B	--	--	78.6
33005	2	13.7	7.5	-----	9.7	12.0	B	A	--	--	--	92.9
33008	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
33009	1	13.2	-----	17.0	9.3	11.7	A	--	B	--	--	85.7
34004	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
34009	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
34010	2	13.3	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
34011	9	13.0	-----	17.1	9.2	11.5	B	--	B	--	--	78.6
34012	2	13.6	7.6	-----	9.6	12.1	A	B	--	--	--	92.9
34015	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
35001	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
37005	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
37007	2	13.7	7.6	-----	9.8	12.2	B	B	--	--	--	85.7
37009	1	13.1	-----	17.0	-----	-----	A	--	B	--	--	85.7
38004	2	13.6	-----	17.6	9.6	12.0	A	--	A	--	--	100.0
38007	1	13.2	-----	17.2	9.5	11.7	A	--	A	--	--	100.0
39001	2	13.4	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
39002	2	13.3	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
39003	2	13.5	-----	17.7	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
39004	2	13.3	7.3	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
40005	2	13.5	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
40007	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40009	2	13.5	7.5	-----	9.6	11.9	A	A	--	--	--	100.0
40011	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40021	2	13.3	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
40027	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
43001	2	13.4	-----	17.5	9.5	11.9	A	--	A	--	--	100.0
43003	2	13.4	7.5	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
44001	2	13.2	-----	17.3	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
45002	2	13.4	7.5	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
46004	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
47001	2	13.3	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
47004	2	13.3	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
47005	2	13.3	-----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
47006	9	13.4	-----	17.7	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
48512	2	13.5	7.5	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0

[16]赤血球 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	JAB512	456	----	532	351	366	A	--	A	--	--	100.0
01013	JAJ011	459	----	540	358	364	A	--	A	--	--	100.0
01017	JAB512	454	294	----	353	362	A	A	--	--	--	100.0
01018	JAB512	459	----	532	354	364	A	--	A	--	--	100.0
01023	JAB514	451	----	533	352	361	A	--	A	--	--	100.0
01025	JAB517	461	287	----	351	367	A	A	--	--	--	100.0
02004	JAB514	454	----	539	352	367	A	--	A	--	--	100.0
03001	JAB517	453	284	----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
03006	JAB512	456	----	532	355	364	A	--	A	--	--	100.0
04004	JAB512	456	295	----	352	363	A	A	--	--	--	100.0
04008	JAB512	457	294	----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
04009	JAB512	458	295	----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
04010	JAB512	456	295	----	353	366	A	A	--	--	--	100.0
04015	JAB514	456	294	----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
07008	JAB517	456	----	537	351	361	A	--	A	--	--	100.0
08001	JAB517	456	284	----	356	366	A	A	--	--	--	100.0
08003	JAB512	454	----	532	355	361	A	--	A	--	--	100.0
08006	JAJ011	462	----	541	357	369	A	--	A	--	--	100.0
08009	JAB517	460	290	----	353	370	A	A	--	--	--	100.0
08010	JAB512	456	----	536	357	363	A	--	A	--	--	100.0
09001	JAJ012	450	----	530	355	364	--	--	--	--	--	=====
09005	JAB511	442	277	----	346	358	--	--	--	--	--	=====
09012	JAB512	458	----	535	354	366	A	--	A	--	--	100.0
09013	JAB514	450	----	534	349	361	A	--	A	--	--	100.0
10003	JAB512	458	----	531	354	366	A	--	A	--	--	100.0
10004	JAR409	452	----	541	350	358	--	--	--	--	--	=====
10005	JAB512	454	----	532	354	362	A	--	A	--	--	100.0
10007	JAB512	461	----	539	357	369	A	--	A	--	--	100.0
11006	JAB512	455	----	530	353	365	A	--	A	--	--	100.0
11010	JAB512	453	296	----	355	362	A	A	--	--	--	100.0
11011	JAB512	458	295	----	351	368	A	A	--	--	--	100.0
11016	JAB512	457	----	535	355	367	A	--	A	--	--	100.0
11020	JAB512	457	----	535	353	365	A	--	A	--	--	100.0
11023	JAB514	452	----	533	353	363	A	--	A	--	--	100.0
12001	JAB517	456	290	----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
12002	JAB512	456	293	----	355	365	A	A	--	--	--	100.0
12008	JAB517	454	----	531	352	363	A	--	A	--	--	100.0
12016	JAB514	451	----	533	349	362	A	--	A	--	--	100.0
13002	JAB514	454	----	538	352	363	A	--	A	--	--	100.0
13003	JAB517	457	----	536	353	366	A	--	A	--	--	100.0
13017	JAB512	459	----	532	351	365	A	--	A	--	--	100.0
13026	JAB512	458	294	----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
13052	JAB514	452	291	----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
13053	JAB512	454	295	----	353	368	A	A	--	--	--	100.0
13054	JAB514	450	283	----	347	359	A	A	--	--	--	100.0
13061	JAB512	455	----	533	352	363	A	--	A	--	--	100.0
13064	JAB512	458	293	----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
13074	JAB512	455	----	531	353	364	A	--	A	--	--	100.0
13084	JAB514	454	----	530	355	362	A	--	A	--	--	100.0
13094	JAB512	458	----	534	353	365	A	--	A	--	--	100.0
13095	JAB514	461	----	543	355	367	A	--	A	--	--	100.0
13100	JAB512	456	294	----	356	365	A	A	--	--	--	100.0
13103	JAB512	456	----	533	354	363	A	--	A	--	--	100.0
14001	JAB517	459	----	537	356	364	A	--	A	--	--	100.0
14003	JAB512	459	----	537	354	364	A	--	A	--	--	100.0
14010	JAB512	457	294	----	354	364	A	A	--	--	--	100.0

[16]赤血球 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14024	JAB512	461	296	----	359	368	A	A	--	--	--	100.0
14027	JAB517	453	286	----	353	360	A	A	--	--	--	100.0
14030	JAB512	457	----	536	355	369	A	--	A	--	--	100.0
15001	JAB517	451	----	532	349	363	A	--	A	--	--	100.0
15004	JAB512	456	292	----	353	361	A	A	--	--	--	100.0
15006	JAB512	459	----	533	351	367	A	--	A	--	--	100.0
15011	JAB512	463	----	538	355	367	A	--	A	--	--	100.0
15012	JAB514	450	284	----	352	359	A	A	--	--	--	100.0
16002	JAB512	458	----	534	352	365	A	--	A	--	--	100.0
16006	JAB512	459	----	537	357	368	A	--	A	--	--	100.0
17001	JAB512	458	294	----	353	366	A	A	--	--	--	100.0
18001	JAB517	454	288	----	357	368	A	A	--	--	--	100.0
20005	JAB512	457	296	----	352	364	A	A	--	--	--	100.0
20007	JAB512	457	----	537	356	365	A	--	A	--	--	100.0
21002	JAB512	459	----	536	356	365	A	--	A	--	--	100.0
21004	JAB512	457	----	531	355	364	A	--	A	--	--	100.0
21005	JAB512	458	----	536	355	365	A	--	A	--	--	100.0
21006	JAB517	453	----	532	351	362	A	--	A	--	--	100.0
22001	JAB517	458	288	----	355	365	A	A	--	--	--	100.0
22002	JAB514	453	----	531	354	362	A	--	A	--	--	100.0
22003	JAB517	454	287	----	352	366	A	A	--	--	--	100.0
22004	JAB511	450	287	----	352	365	--	--	--	--	--	=====
22006	JAB512	461	----	536	355	366	A	--	A	--	--	100.0
22011	JAB514	450	----	530	351	362	A	--	A	--	--	100.0
22012	JAB512	458	----	535	356	364	A	--	A	--	--	100.0
22017	JAB514	455	----	535	352	364	A	--	A	--	--	100.0
22018	JAB517	452	----	528	351	361	A	--	A	--	--	100.0
23003	JAB514	455	285	----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
23008	JAJ011	449	----	525	347	358	A	--	A	--	--	100.0
23011	JAJ012	455	288	----	356	365	--	--	--	--	--	=====
23015	JAB512	453	----	531	354	362	A	--	A	--	--	100.0
23016	JAB512	458	295	----	354	365	A	A	--	--	--	100.0
23017	JAB512	456	293	----	354	366	A	A	--	--	--	100.0
23019	JAB512	454	----	531	354	362	A	--	A	--	--	100.0
23020	JAB512	461	----	536	356	368	A	--	A	--	--	100.0
23024	JAB512	454	294	----	354	365	A	A	--	--	--	100.0
23051	JAS303	455	297	----	367	371	--	--	--	--	--	=====
24003	JAB517	460	288	----	354	367	A	A	--	--	--	100.0
25003	JAB512	457	----	535	353	364	A	--	A	--	--	100.0
26001	JAC910	437	----	516	340	349	--	--	--	--	--	=====
26003	JAB512	451	291	----	350	359	A	A	--	--	--	100.0
26006	JAB512	460	295	----	354	366	A	A	--	--	--	100.0
26009	JAB512	456	294	----	356	367	A	A	--	--	--	100.0
27001	JAA702	459	291	----	357	368	--	--	--	--	--	=====
27004	JAJ012	451	----	525	360	367	--	--	--	--	--	=====
27013	JAR408	446	282	----	352	356	--	--	--	--	--	=====
27014	JAB512	458	----	536	356	368	A	--	A	--	--	100.0
27020	JAB512	459	----	537	355	365	A	--	A	--	--	100.0
27044	JAB517	449	----	528	347	358	A	--	A	--	--	100.0
27046	JAB514	450	----	531	347	357	A	--	A	--	--	100.0
27049	JAJ012	434	277	----	345	357	--	--	--	--	--	=====
28002	JAB512	457	----	533	352	365	A	--	A	--	--	100.0
28003	JAB512	456	293	----	354	365	A	A	--	--	--	100.0
28011	JAJ803	442	285	----	358	372	--	--	--	--	--	=====
28016	JAB512	458	293	----	354	366	A	A	--	--	--	100.0
28017	JAB512	460	----	538	358	367	A	--	A	--	--	100.0

[16]赤血球 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28031	JAB514	455	-----	538	353	361	A	--	A	--	--	100.0
28033	JAB512	456	294	-----	351	364	A	A	--	--	--	100.0
28034	JAB512	456	-----	540	357	366	A	--	A	--	--	100.0
30004	JAB517	448	283	-----	348	354	A	A	--	--	--	100.0
30005	JAB511	443	285	-----	351	360	--	--	--	--	--	=====
31005	JAB512	456	292	-----	353	365	A	A	--	--	--	100.0
32001	JAB512	459	-----	540	355	367	A	--	A	--	--	100.0
32002	JAB514	444	-----	526	350	361	A	--	A	--	--	100.0
32003	JAB516	462	292	-----	356	374	--	--	--	--	--	=====
33001	JAJ011	457	-----	535	354	365	A	--	A	--	--	100.0
33005	JAB517	466	295	-----	366	373	B	B	--	--	--	85.7
33008	JAB512	458	292	-----	355	367	A	A	--	--	--	100.0
33009	JAJ011	448	-----	520	349	355	A	--	B	--	--	92.9
34004	JAB512	458	-----	536	354	365	A	--	A	--	--	100.0
34009	JAB517	457	-----	537	358	365	A	--	A	--	--	100.0
34010	JAB512	462	-----	538	358	368	A	--	A	--	--	100.0
34011	JAB514	461	-----	542	357	370	A	--	A	--	--	100.0
34012	JAB512	455	293	-----	354	369	A	A	--	--	--	100.0
34015	JAB512	460	296	-----	359	369	A	A	--	--	--	100.0
35001	JAB512	457	295	-----	355	365	A	A	--	--	--	100.0
37005	JAB514	451	287	-----	351	365	A	A	--	--	--	100.0
37007	JAR409	463	288	-----	359	370	--	--	--	--	--	=====
37009	JAJ005	458	-----	544	-----	-----	--	--	--	--	--	=====
38004	JAR408	453	-----	532	357	363	--	--	--	--	--	=====
38007	JAJ005	453	-----	540	348	361	--	--	--	--	--	=====
39001	JAB512	457	-----	538	355	367	A	--	A	--	--	100.0
39002	JAB512	457	293	-----	351	359	A	A	--	--	--	100.0
39003	JAB512	459	-----	538	355	366	A	--	A	--	--	100.0
39004	JAB512	458	297	-----	357	367	A	A	--	--	--	100.0
40005	JAB512	457	294	-----	354	364	A	A	--	--	--	100.0
40007	JAB512	460	-----	537	356	366	A	--	A	--	--	100.0
40009	JAB517	458	287	-----	356	368	A	A	--	--	--	100.0
40011	JAB512	456	-----	532	349	360	A	--	A	--	--	100.0
40021	JAB512	455	-----	534	353	351	A	--	A	--	--	100.0
40027	JAB512	457	294	-----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
43001	JAB517	463	-----	535	356	367	A	--	A	--	--	100.0
43003	JAB512	459	295	-----	355	367	A	A	--	--	--	100.0
44001	JAB514	450	-----	532	353	365	A	--	A	--	--	100.0
45002	JAB512	462	295	-----	357	367	A	A	--	--	--	100.0
46004	JAB512	458	-----	538	356	365	A	--	A	--	--	100.0
47001	JAB514	453	288	-----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
47004	JAB512	456	-----	533	354	361	A	--	A	--	--	100.0
47005	JAB514	440	-----	520	343	352	B	--	B	--	--	85.7
47006	JAB512	460	-----	542	359	371	A	--	A	--	--	100.0
48512	JAB517	461	292	-----	358	366	A	A	--	--	--	100.0

[17]白血球 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	JAB512	57	----	155	75	37	A	--	A	--	--	100.0
01013	JAJ011	61	----	158	75	37	A	--	A	--	--	100.0
01017	JAB512	57	29	----	73	39	A	A	--	--	--	100.0
01018	JAB512	57	----	150	72	36	A	--	A	--	--	100.0
01023	JAB514	59	----	160	73	37	A	--	A	--	--	100.0
01025	JAB517	58	29	----	76	39	A	A	--	--	--	100.0
02004	JAB514	57	----	166	74	35	A	--	A	--	--	100.0
03001	JAB517	56	28	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
03006	JAB512	57	----	153	75	37	A	--	A	--	--	100.0
04004	JAB512	58	29	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
04008	JAB512	58	29	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
04009	JAB512	58	29	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
04010	JAB512	57	28	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
04015	JAB514	58	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
07008	JAB517	57	----	159	76	37	A	--	A	--	--	100.0
08001	JAB517	57	28	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
08003	JAB512	56	----	151	67	35	A	--	A	--	--	100.0
08006	JAJ011	61	----	160	72	37	A	--	A	--	--	100.0
08009	JAB517	57	28	----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
08010	JAB512	56	----	149	73	37	A	--	A	--	--	100.0
09001	JAJ012	61	----	160	68	33	--	--	--	--	--	=====
09005	JAB511	54	28	----	72	35	--	--	--	--	--	=====
09012	JAB512	57	----	152	73	36	A	--	A	--	--	100.0
09013	JAB514	60	----	166	74	35	A	--	A	--	--	100.0
10003	JAB512	59	----	151	71	36	A	--	A	--	--	100.0
10004	JAR409	57	----	155	73	36	--	--	--	--	--	=====
10005	JAB512	58	----	155	75	36	A	--	A	--	--	100.0
10007	JAB512	57	----	155	74	37	A	--	A	--	--	100.0
11006	JAB512	58	----	154	74	37	A	--	A	--	--	100.0
11010	JAB512	59	29	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
11011	JAB512	57	29	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
11016	JAB512	57	----	154	76	38	A	--	A	--	--	100.0
11020	JAB512	57	----	154	73	35	A	--	A	--	--	100.0
11023	JAB514	58	----	159	71	36	A	--	A	--	--	100.0
12001	JAB517	57	29	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
12002	JAB512	56	28	----	72	37	A	A	--	--	--	100.0
12008	JAB517	55	----	152	71	35	A	--	A	--	--	100.0
12016	JAB514	58	----	160	72	36	A	--	A	--	--	100.0
13002	JAB514	60	----	162	71	36	A	--	A	--	--	100.0
13003	JAB517	57	----	154	76	37	A	--	A	--	--	100.0
13017	JAB512	57	----	152	74	38	A	--	A	--	--	100.0
13026	JAB512	56	28	----	74	36	A	A	--	--	--	100.0
13052	JAB514	58	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
13053	JAB512	57	29	----	76	37	A	A	--	--	--	100.0
13054	JAB514	57	28	----	70	36	A	A	--	--	--	100.0
13061	JAB512	55	----	153	74	37	A	--	A	--	--	100.0
13064	JAB512	57	29	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
13074	JAB512	57	----	150	73	37	A	--	A	--	--	100.0
13084	JAB514	59	----	165	71	36	A	--	A	--	--	100.0
13094	JAB512	57	----	152	73	36	A	--	A	--	--	100.0
13095	JAB514	60	----	164	74	36	A	--	A	--	--	100.0
13100	JAB512	58	29	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
13103	JAB512	58	----	154	74	36	A	--	A	--	--	100.0
14001	JAB517	57	----	156	75	38	A	--	A	--	--	100.0
14003	JAB512	57	----	152	72	37	A	--	A	--	--	100.0
14010	JAB512	57	29	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0

[17]白血球 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14024	JAB512	60	30	----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
14027	JAB517	57	28	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
14030	JAB512	57	----	152	75	38	A	--	A	--	--	100.0
15001	JAB517	57	----	156	76	39	A	--	A	--	--	100.0
15004	JAB512	54	28	----	69	34	A	A	--	--	--	100.0
15006	JAB512	58	----	154	71	35	A	--	A	--	--	100.0
15011	JAB512	57	----	151	73	36	A	--	A	--	--	100.0
15012	JAB514	57	29	----	74	36	A	A	--	--	--	100.0
16002	JAB512	57	----	154	75	38	A	--	A	--	--	100.0
16006	JAB512	57	----	151	73	37	A	--	A	--	--	100.0
17001	JAB512	57	28	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
18001	JAB517	57	28	----	77	38	A	A	--	--	--	100.0
20005	JAB512	57	30	----	76	38	A	A	--	--	--	100.0
20007	JAB512	57	----	154	72	37	A	--	A	--	--	100.0
21002	JAB512	57	----	153	73	37	A	--	A	--	--	100.0
21004	JAB512	54	----	144	69	33	A	--	A	--	--	100.0
21005	JAB512	57	----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
21006	JAB517	56	----	153	75	37	A	--	A	--	--	100.0
22001	JAB517	57	29	----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
22002	JAB514	59	----	159	74	38	A	--	A	--	--	100.0
22003	JAB517	57	28	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
22004	JAB511	55	28	----	72	38	--	--	--	--	--	=====
22006	JAB512	58	----	153	74	37	A	--	A	--	--	100.0
22011	JAB514	58	----	161	72	36	A	--	A	--	--	100.0
22012	JAB512	57	----	153	72	38	A	--	A	--	--	100.0
22017	JAB514	59	----	162	73	37	A	--	A	--	--	100.0
22018	JAB517	58	----	157	77	38	A	--	A	--	--	100.0
23003	JAB514	58	28	----	74	35	A	A	--	--	--	100.0
23008	JAJ011	62	----	157	73	36	A	--	A	--	--	100.0
23011	JAJ012	61	34	----	73	37	--	--	--	--	--	=====
23015	JAB512	55	----	148	73	37	A	--	A	--	--	100.0
23016	JAB512	57	29	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
23017	JAB512	58	29	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
23019	JAB512	57	----	154	74	36	A	--	A	--	--	100.0
23020	JAB512	58	----	153	74	38	A	--	A	--	--	100.0
23024	JAB512	57	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
23051	JAS303	55	31	----	69	35	--	--	--	--	--	=====
24003	JAB517	57	27	----	76	37	A	A	--	--	--	100.0
25003	JAB512	57	----	153	74	37	A	--	A	--	--	100.0
26001	JAC910	61	----	159	72	36	--	--	--	--	--	=====
26003	JAB512	56	28	----	71	32	A	A	--	--	--	100.0
26006	JAB512	56	29	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
26009	JAB512	56	29	----	71	36	A	A	--	--	--	100.0
27001	JAA702	57	31	----	73	36	--	--	--	--	--	=====
27004	JAJ012	62	----	162	70	35	--	--	--	--	--	=====
27013	JAR408	55	29	----	73	36	--	--	--	--	--	=====
27014	JAB512	57	----	148	71	35	A	--	A	--	--	100.0
27020	JAB512	57	----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
27044	JAB517	57	----	156	76	38	A	--	A	--	--	100.0
27046	JAB514	58	----	163	73	37	A	--	A	--	--	100.0
27049	JAJ012	60	33	----	67	34	--	--	--	--	--	=====
28002	JAB512	57	----	151	74	37	A	--	A	--	--	100.0
28003	JAB512	57	28	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
28011	JAJ803	52	26	----	68	34	--	--	--	--	--	=====
28016	JAB512	58	29	----	76	37	A	A	--	--	--	100.0
28017	JAB512	57	----	153	74	37	A	--	A	--	--	100.0

[17]白血球 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28031	JAB514	58	----	162	72	36	A	--	A	--	--	100.0
28033	JAB512	57	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
28034	JAB512	56	----	149	74	36	A	--	A	--	--	100.0
30004	JAB517	55	28	----	74	38	A	A	--	--	--	100.0
30005	JAB511	56	29	----	74	36	--	--	--	--	--	=====
31005	JAB512	58	28	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
32001	JAB512	56	----	153	77	38	A	--	A	--	--	100.0
32002	JAB514	59	----	167	75	37	A	--	A	--	--	100.0
32003	JAB516	55	29	----	71	35	--	--	--	--	--	=====
33001	JAJ011	61	----	157	73	37	A	--	A	--	--	100.0
33005	JAB517	59	28	----	79	39	A	A	--	--	--	100.0
33008	JAB512	57	28	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
33009	JAJ011	61	----	155	74	38	A	--	A	--	--	100.0
34004	JAB512	57	----	152	72	37	A	--	A	--	--	100.0
34009	JAB517	57	----	155	74	37	A	--	A	--	--	100.0
34010	JAB512	57	----	159	76	38	A	--	A	--	--	100.0
34011	JAB514	59	----	165	75	38	A	--	A	--	--	100.0
34012	JAB512	58	29	----	74	38	A	A	--	--	--	100.0
34015	JAB512	57	29	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
35001	JAB512	56	28	----	70	37	A	A	--	--	--	100.0
37005	JAB514	58	27	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
37007	JAR409	55	28	----	58	28	--	--	--	--	--	=====
37009	JAJ005	60	----	158	----	----	--	--	--	--	--	=====
38004	JAR408	53	----	140	66	33	--	--	--	--	--	=====
38007	JAJ005	62	----	165	74	38	--	--	--	--	--	=====
39001	JAB512	59	----	156	73	38	A	--	A	--	--	100.0
39002	JAB512	57	29	----	75	39	A	A	--	--	--	100.0
39003	JAB512	57	----	153	75	38	A	--	A	--	--	100.0
39004	JAB512	58	28	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
40005	JAB512	57	29	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
40007	JAB512	58	----	155	72	36	A	--	A	--	--	100.0
40009	JAB517	57	28	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
40011	JAB512	58	----	153	72	36	A	--	A	--	--	100.0
40021	JAB512	58	----	155	57	23	A	--	A	--	--	100.0
40027	JAB512	57	29	----	72	37	A	A	--	--	--	100.0
43001	JAB517	58	----	159	75	37	A	--	A	--	--	100.0
43003	JAB512	57	28	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
44001	JAB514	57	----	165	72	37	A	--	A	--	--	100.0
45002	JAB512	58	28	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
46004	JAB512	57	----	150	71	36	A	--	A	--	--	100.0
47001	JAB514	58	28	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
47004	JAB512	57	----	154	71	35	A	--	A	--	--	100.0
47005	JAB514	58	----	163	73	36	A	--	A	--	--	100.0
47006	JAB512	57	----	147	75	36	A	--	A	--	--	100.0
48512	JAB517	58	29	----	76	38	A	A	--	--	--	100.0

[18]ヘマトクリット 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	JAB512	37.9	-----	48.3	29.3	34.0	A	--	A	--	--	100.0
01013	JAJ011	39.5	-----	51.9	30.1	35.9	A	--	A	--	--	100.0
01017	JAB512	38.1	22.4	-----	30.9	35.2	A	A	--	--	--	100.0
01018	JAB512	38.5	-----	48.9	30.6	35.0	A	--	A	--	--	100.0
01023	JAB514	37.4	-----	48.1	29.9	34.4	A	--	A	--	--	100.0
01025	JAB517	38.1	21.6	-----	29.8	34.3	A	A	--	--	--	100.0
02004	JAB514	37.4	-----	48.2	29.8	34.4	A	--	A	--	--	100.0
03001	JAB517	37.8	21.6	-----	30.4	34.7	A	A	--	--	--	100.0
03006	JAB512	38.3	-----	48.9	29.4	33.9	A	--	A	--	--	100.0
04004	JAB512	38.4	22.6	-----	29.9	34.2	A	A	--	--	--	100.0
04008	JAB512	38.4	22.4	-----	30.0	34.5	A	A	--	--	--	100.0
04009	JAB512	38.4	22.4	-----	30.1	34.3	A	A	--	--	--	100.0
04010	JAB512	38.2	22.3	-----	29.9	34.5	A	A	--	--	--	100.0
04015	JAB514	37.9	22.1	-----	30.1	34.5	A	A	--	--	--	100.0
07008	JAB517	38.2	-----	49.0	29.5	34.8	A	--	A	--	--	100.0
08001	JAB517	38.1	21.4	-----	30.9	35.2	A	A	--	--	--	100.0
08003	JAB512	38.3	-----	48.8	30.2	34.4	A	--	A	--	--	100.0
08006	JAJ011	39.5	-----	51.3	29.7	35.6	A	--	A	--	--	100.0
08009	JAB517	37.8	21.6	-----	30.3	35.6	A	A	--	--	--	100.0
08010	JAB512	38.0	-----	48.9	29.7	33.8	A	--	A	--	--	100.0
09001	JAJ012	39.2	-----	50.8	29.7	35.1	--	--	--	--	--	=====
09005	JAB511	34.4	19.5	-----	29.0	33.3	--	--	--	--	--	=====
09012	JAB512	38.1	-----	49.0	29.8	34.1	A	--	A	--	--	100.0
09013	JAB514	37.0	-----	47.8	29.4	33.8	A	--	A	--	--	100.0
10003	JAB512	38.0	-----	47.9	30.3	34.7	A	--	A	--	--	100.0
10004	JAR409	34.5	-----	44.6	30.6	35.2	--	--	--	--	--	=====
10005	JAB512	38.5	-----	49.6	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
10007	JAB512	38.8	-----	49.7	30.2	34.7	A	--	A	--	--	100.0
11006	JAB512	37.6	-----	48.0	29.9	34.9	A	--	A	--	--	100.0
11010	JAB512	38.1	22.5	-----	30.0	34.3	A	A	--	--	--	100.0
11011	JAB512	38.4	22.5	-----	29.8	34.6	A	A	--	--	--	100.0
11016	JAB512	37.9	-----	48.6	29.8	34.1	A	--	A	--	--	100.0
11020	JAB512	37.9	-----	48.6	29.6	33.9	A	--	A	--	--	100.0
11023	JAB514	37.1	-----	47.7	29.7	34.2	A	--	A	--	--	100.0
12001	JAB517	37.9	21.9	-----	29.9	34.0	A	A	--	--	--	100.0
12002	JAB512	38.0	22.1	-----	29.9	34.1	A	A	--	--	--	100.0
12008	JAB517	38.2	-----	48.5	30.4	34.9	A	--	A	--	--	100.0
12016	JAB514	37.9	-----	48.7	29.5	34.0	A	--	A	--	--	100.0
13002	JAB514	37.4	-----	48.1	30.2	34.3	A	--	A	--	--	100.0
13003	JAB517	38.2	-----	48.9	30.2	34.3	A	--	A	--	--	100.0
13017	JAB512	38.6	-----	49.0	30.1	34.5	A	--	A	--	--	100.0
13026	JAB512	37.9	22.1	-----	29.5	33.9	A	A	--	--	--	100.0
13052	JAB514	38.3	22.4	-----	30.4	34.8	A	A	--	--	--	100.0
13053	JAB512	37.8	22.3	-----	29.3	33.8	A	A	--	--	--	100.0
13054	JAB514	37.7	21.8	-----	29.7	34.2	A	A	--	--	--	100.0
13061	JAB512	38.5	-----	49.5	30.0	34.4	A	--	A	--	--	100.0
13064	JAB512	38.3	22.2	-----	29.9	34.1	A	A	--	--	--	100.0
13074	JAB512	38.0	-----	48.6	29.4	33.9	A	--	A	--	--	100.0
13084	JAB514	37.4	-----	47.5	30.2	34.2	A	--	A	--	--	100.0
13094	JAB512	39.0	-----	49.2	30.4	34.5	A	--	A	--	--	100.0
13095	JAB514	38.2	-----	48.9	30.0	34.5	A	--	A	--	--	100.0
13100	JAB512	38.2	22.6	-----	29.6	33.8	A	A	--	--	--	100.0
13103	JAB512	37.6	-----	48.3	30.5	34.9	A	--	A	--	--	100.0
14001	JAB517	38.5	-----	49.2	31.0	34.9	A	--	A	--	--	100.0
14003	JAB512	38.4	-----	49.2	29.7	34.0	A	--	A	--	--	100.0
14010	JAB512	38.0	22.2	-----	29.8	34.1	A	A	--	--	--	100.0

[18]ヘマトクリット 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14024	JAB512	38.9	22.6	----	30.0	34.3	A	A	--	--	--	100.0
14027	JAB517	37.9	21.5	----	30.1	34.3	A	A	--	--	--	100.0
14030	JAB512	37.8	----	48.8	29.5	34.3	A	--	A	--	--	100.0
15001	JAB517	36.9	----	47.4	30.0	34.6	A	--	A	--	--	100.0
15004	JAB512	37.5	21.7	----	29.1	33.0	A	A	--	--	--	100.0
15006	JAB512	38.8	----	49.4	29.5	34.3	A	--	A	--	--	100.0
15011	JAB512	38.4	----	48.6	29.6	34.1	A	--	A	--	--	100.0
15012	JAB514	36.7	21.4	----	29.4	33.3	A	A	--	--	--	100.0
16002	JAB512	37.9	----	48.6	29.4	33.7	A	--	A	--	--	100.0
16006	JAB512	38.2	----	49.1	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
17001	JAB512	37.9	22.1	----	29.4	34.1	A	A	--	--	--	100.0
18001	JAB517	37.6	21.6	----	31.1	35.7	A	A	--	--	--	100.0
20005	JAB512	38.2	22.5	----	29.3	33.6	A	A	--	--	--	100.0
20007	JAB512	38.2	----	49.2	29.8	33.9	A	--	A	--	--	100.0
21002	JAB512	38.3	----	49.1	29.8	34.3	A	--	A	--	--	100.0
21004	JAB512	38.4	----	48.9	30.0	34.3	A	--	A	--	--	100.0
21005	JAB512	38.2	----	49.2	29.8	34.1	A	--	A	--	--	100.0
21006	JAB517	37.3	----	47.7	29.9	34.4	A	--	A	--	--	100.0
22001	JAB517	38.5	21.9	----	30.1	34.4	A	A	--	--	--	100.0
22002	JAB514	37.6	----	47.9	30.2	34.2	A	--	A	--	--	100.0
22003	JAB517	38.0	21.7	----	30.3	34.5	A	A	--	--	--	100.0
22004	JAB511	34.8	20.1	----	29.1	33.6	--	--	--	--	--	=====
22006	JAB512	38.3	----	49.0	29.6	33.8	A	--	A	--	--	100.0
22011	JAB514	37.2	----	47.5	29.7	34.1	A	--	A	--	--	100.0
22012	JAB512	38.4	----	49.0	29.8	34.1	A	--	A	--	--	100.0
22017	JAB514	36.9	----	47.3	29.4	33.9	A	--	A	--	--	100.0
22018	JAB517	37.0	----	47.2	29.9	33.7	A	--	A	--	--	100.0
23003	JAB514	37.4	21.8	----	30.2	34.4	A	A	--	--	--	100.0
23008	JAJ011	39.2	----	50.8	29.2	35.2	A	--	A	--	--	100.0
23011	JAJ012	39.3	22.8	----	30.9	36.0	--	--	--	--	--	=====
23015	JAB512	38.2	----	49.1	30.0	34.2	A	--	A	--	--	100.0
23016	JAB512	38.3	22.5	----	30.0	34.5	A	A	--	--	--	100.0
23017	JAB512	38.6	22.5	----	29.9	34.5	A	A	--	--	--	100.0
23019	JAB512	38.1	----	48.9	29.6	33.7	A	--	A	--	--	100.0
23020	JAB512	38.2	----	48.7	29.6	34.4	A	--	A	--	--	100.0
23024	JAB512	38.4	22.6	----	29.7	34.3	A	A	--	--	--	100.0
23051	JAS303	39.1	22.9	----	29.4	34.9	--	--	--	--	--	=====
24003	JAB517	37.9	21.7	----	30.2	34.8	A	A	--	--	--	100.0
25003	JAB512	38.3	----	49.3	30.4	34.5	A	--	A	--	--	100.0
26001	JAC910	36.1	----	47.5	29.3	34.7	--	--	--	--	--	=====
26003	JAB512	37.7	22.1	----	29.2	33.0	A	A	--	--	--	100.0
26006	JAB512	38.8	22.6	----	30.6	34.7	A	A	--	--	--	100.0
26009	JAB512	38.0	22.3	----	30.1	34.5	A	A	--	--	--	100.0
27001	JAA702	42.1	24.1	----	29.8	35.5	--	--	--	--	--	=====
27004	JAJ012	40.0	----	51.3	30.6	36.4	--	--	--	--	--	=====
27013	JAR408	35.9	20.4	----	30.2	34.8	--	--	--	--	--	=====
27014	JAB512	38.0	----	48.7	30.6	35.2	A	--	A	--	--	100.0
27020	JAB512	38.3	----	49.2	30.0	34.3	A	--	A	--	--	100.0
27044	JAB517	36.5	----	46.9	29.3	33.7	A	--	A	--	--	100.0
27046	JAB514	37.3	----	47.5	29.3	33.5	A	--	A	--	--	100.0
27049	JAJ012	38.6	22.4	----	29.7	35.4	--	--	--	--	--	=====
28002	JAB512	38.1	----	48.8	29.9	34.5	A	--	A	--	--	100.0
28003	JAB512	37.9	22.1	----	29.6	34.2	A	A	--	--	--	100.0
28011	JAJ803	35.3	20.3	----	31.7	36.5	--	--	--	--	--	=====
28016	JAB512	38.4	22.4	----	29.9	34.3	A	A	--	--	--	100.0
28017	JAB512	38.3	----	49.0	30.3	34.3	A	--	A	--	--	100.0

[18]ヘマトクリット 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28031	JAB514	37.1	-----	47.6	29.7	33.9	A	--	A	--	--	100.0
28033	JAB512	38.7	22.5	-----	29.6	34.3	A	A	--	--	--	100.0
28034	JAB512	38.6	-----	50.1	30.4	34.6	A	--	A	--	--	100.0
30004	JAB517	37.3	21.5	-----	29.5	33.8	A	A	--	--	--	100.0
30005	JAB511	34.3	20.1	-----	29.2	33.5	--	--	--	--	--	=====
31005	JAB512	38.1	22.2	-----	29.5	34.0	A	A	--	--	--	100.0
32001	JAB512	37.8	-----	48.4	29.1	33.5	A	--	A	--	--	100.0
32002	JAB514	36.2	-----	46.7	29.5	33.5	A	--	A	--	--	100.0
32003	JAB516	37.4	21.9	-----	29.7	34.8	--	--	--	--	--	=====
33001	JAJ011	38.8	-----	50.8	28.4	34.1	A	--	A	--	--	100.0
33005	JAB517	37.7	21.8	-----	30.4	35.0	A	A	--	--	--	100.0
33008	JAB512	38.4	22.3	-----	30.0	34.3	A	A	--	--	--	100.0
33009	JAJ011	39.3	-----	50.7	30.1	35.2	A	--	A	--	--	100.0
34004	JAB512	38.4	-----	49.2	29.8	34.3	A	--	A	--	--	100.0
34009	JAB517	37.8	-----	48.4	30.5	34.5	A	--	A	--	--	100.0
34010	JAB512	38.4	-----	49.0	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
34011	JAB514	37.7	-----	48.0	30.3	35.0	A	--	A	--	--	100.0
34012	JAB512	38.5	22.5	-----	29.7	34.4	A	A	--	--	--	100.0
34015	JAB512	38.4	22.4	-----	29.9	34.1	A	A	--	--	--	100.0
35001	JAB512	38.2	22.4	-----	29.7	34.4	A	A	--	--	--	100.0
37005	JAB514	36.8	21.8	-----	29.8	34.4	A	A	--	--	--	100.0
37007	JAR409	34.1	19.3	-----	30.2	35.2	--	--	--	--	--	=====
37009	JAJ005	40.1	-----	53.2	-----	-----	--	--	--	--	--	=====
38004	JAR408	35.5	-----	46.4	30.7	35.4	--	--	--	--	--	=====
38007	JAJ005	38.4	-----	50.7	28.9	35.2	--	--	--	--	--	=====
39001	JAB512	38.3	-----	49.5	29.7	34.4	A	--	A	--	--	100.0
39002	JAB512	37.8	22.1	-----	29.3	33.4	A	A	--	--	--	100.0
39003	JAB512	38.3	-----	49.2	29.6	34.0	A	--	A	--	--	100.0
39004	JAB512	38.3	22.5	-----	30.0	34.2	A	A	--	--	--	100.0
40005	JAB512	38.6	22.6	-----	29.8	34.5	A	A	--	--	--	100.0
40007	JAB512	38.1	-----	48.8	29.3	34.0	A	--	A	--	--	100.0
40009	JAB517	38.4	22.0	-----	30.5	35.0	A	A	--	--	--	100.0
40011	JAB512	38.2	-----	48.9	28.8	33.2	A	--	A	--	--	100.0
40021	JAB512	38.2	-----	49.0	29.3	36.1	A	--	A	--	--	100.0
40027	JAB512	38.5	22.5	-----	29.8	34.2	A	A	--	--	--	100.0
43001	JAB517	38.5	-----	48.7	29.5	33.8	A	--	A	--	--	100.0
43003	JAB512	38.2	22.2	-----	29.8	34.4	A	A	--	--	--	100.0
44001	JAB514	37.3	-----	48.0	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
45002	JAB512	38.6	22.5	-----	29.5	34.2	A	A	--	--	--	100.0
46004	JAB512	37.7	-----	48.4	29.2	33.6	A	--	A	--	--	100.0
47001	JAB514	37.6	22.1	-----	30.0	34.7	A	A	--	--	--	100.0
47004	JAB512	38.2	-----	49.1	29.6	34.1	A	--	A	--	--	100.0
47005	JAB514	36.6	-----	47.0	29.1	33.7	A	--	A	--	--	100.0
47006	JAB512	38.7	-----	49.7	30.4	34.9	A	--	A	--	--	100.0
48512	JAB517	38.0	21.9	-----	30.5	34.7	A	A	--	--	--	100.0

[19]血小板 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	JAB512	25.8	-----	70.9	28.0	18.7	A	--	A	--	--	100.0
01013	JAJ011	23.8	-----	60.8	25.9	18.3	A	--	A	--	--	100.0
01017	JAB512	26.3	10.3	-----	29.1	19.5	A	A	--	--	--	100.0
01018	JAB512	26.1	-----	71.3	29.7	20.3	A	--	A	--	--	100.0
01023	JAB514	25.1	-----	69.5	28.2	19.1	A	--	A	--	--	100.0
01025	JAB517	27.2	10.4	-----	28.2	18.8	A	B	--	--	--	92.9
02004	JAB514	25.2	-----	70.8	27.3	19.5	A	--	A	--	--	100.0
03001	JAB517	26.1	9.7	-----	28.3	19.8	A	A	--	--	--	100.0
03006	JAB512	26.8	-----	74.0	28.9	20.3	A	--	A	--	--	100.0
04004	JAB512	26.0	10.3	-----	29.7	19.3	A	A	--	--	--	100.0
04008	JAB512	26.7	10.6	-----	29.1	19.9	A	A	--	--	--	100.0
04009	JAB512	26.8	10.5	-----	29.5	20.1	A	A	--	--	--	100.0
04010	JAB512	26.1	10.3	-----	28.8	19.6	A	A	--	--	--	100.0
04015	JAB514	26.4	10.3	-----	28.9	19.9	A	A	--	--	--	100.0
07008	JAB517	26.5	-----	74.4	28.1	19.1	A	--	A	--	--	100.0
08001	JAB517	27.1	10.2	-----	28.1	18.6	A	A	--	--	--	100.0
08003	JAB512	26.4	-----	70.4	28.1	19.9	A	--	A	--	--	100.0
08006	JAJ011	23.6	-----	62.4	26.8	18.5	A	--	A	--	--	100.0
08009	JAB517	25.8	8.9	-----	28.2	20.0	A	B	--	--	--	92.9
08010	JAB512	25.2	-----	69.8	28.7	19.5	A	--	A	--	--	100.0
09001	JAJ012	23.8	-----	62.0	24.3	16.8	--	--	--	--	--	=====
09005	JAB511	25.5	9.8	-----	25.9	17.7	--	--	--	--	--	=====
09012	JAB512	26.0	-----	71.3	29.6	20.1	A	--	A	--	--	100.0
09013	JAB514	26.2	-----	72.2	27.7	19.4	A	--	A	--	--	100.0
10003	JAB512	25.5	-----	70.6	29.1	20.6	A	--	A	--	--	100.0
10004	JAR409	27.1	-----	71.1	26.1	17.5	--	--	--	--	--	=====
10005	JAB512	26.4	-----	71.5	28.6	19.9	A	--	A	--	--	100.0
10007	JAB512	26.4	-----	73.8	29.3	20.5	A	--	A	--	--	100.0
11006	JAB512	26.0	-----	69.0	29.2	20.1	A	--	A	--	--	100.0
11010	JAB512	26.8	10.1	-----	28.7	20.4	A	A	--	--	--	100.0
11011	JAB512	25.3	10.0	-----	27.9	19.1	A	A	--	--	--	100.0
11016	JAB512	26.5	-----	73.0	28.9	19.9	A	--	A	--	--	100.0
11020	JAB512	26.4	-----	73.0	29.4	19.7	A	--	A	--	--	100.0
11023	JAB514	26.1	-----	71.5	28.0	19.0	A	--	A	--	--	100.0
12001	JAB517	26.6	9.8	-----	28.7	19.5	A	A	--	--	--	100.0
12002	JAB512	25.3	9.5	-----	28.1	19.7	A	B	--	--	--	92.9
12008	JAB517	26.1	-----	73.0	27.4	19.0	A	--	A	--	--	100.0
12016	JAB514	25.8	-----	70.0	27.7	19.5	A	--	A	--	--	100.0
13002	JAB514	24.8	-----	70.7	27.7	18.5	A	--	A	--	--	100.0
13003	JAB517	26.6	-----	72.0	28.5	19.6	A	--	A	--	--	100.0
13017	JAB512	26.0	-----	71.3	29.9	19.7	A	--	A	--	--	100.0
13026	JAB512	25.5	10.2	-----	28.8	19.6	A	A	--	--	--	100.0
13052	JAB514	26.5	9.8	-----	27.7	19.0	A	A	--	--	--	100.0
13053	JAB512	27.3	10.4	-----	28.3	19.7	A	A	--	--	--	100.0
13054	JAB514	26.3	9.8	-----	28.6	19.5	A	A	--	--	--	100.0
13061	JAB512	25.5	-----	71.0	27.8	19.1	A	--	A	--	--	100.0
13064	JAB512	26.0	10.3	-----	29.3	19.9	A	A	--	--	--	100.0
13074	JAB512	26.1	-----	69.5	28.6	19.2	A	--	A	--	--	100.0
13084	JAB514	26.0	-----	69.4	28.1	19.1	A	--	A	--	--	100.0
13094	JAB512	26.4	-----	72.2	29.8	20.4	A	--	A	--	--	100.0
13095	JAB514	27.2	-----	73.3	28.5	19.1	A	--	A	--	--	100.0
13100	JAB512	25.8	10.4	-----	28.4	19.7	A	A	--	--	--	100.0
13103	JAB512	26.4	-----	70.7	28.7	19.7	A	--	A	--	--	100.0
14001	JAB517	23.7	-----	71.9	25.5	17.9	B	--	A	--	--	78.6
14003	JAB512	26.0	-----	71.5	31.2	20.3	A	--	A	--	--	100.0
14010	JAB512	26.1	10.0	-----	29.6	20.1	A	A	--	--	--	100.0

[19]血小板 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14024	JAB512	25.7	9.9	----	29.4	19.9	A	A	--	--	--	100.0
14027	JAB517	23.6	8.6	----	27.8	19.1	B	B	--	--	--	57.1
14030	JAB512	26.8	----	71.1	28.4	20.0	A	--	A	--	--	100.0
15001	JAB517	25.9	----	73.8	27.8	19.6	A	--	A	--	--	100.0
15004	JAB512	26.6	10.2	----	29.1	20.0	A	A	--	--	--	100.0
15006	JAB512	26.3	----	70.8	28.5	19.4	A	--	A	--	--	100.0
15011	JAB512	25.0	----	69.1	27.8	19.3	A	--	A	--	--	100.0
15012	JAB514	25.2	9.5	----	27.7	18.7	A	A	--	--	--	100.0
16002	JAB512	26.5	----	70.0	28.9	19.6	A	--	A	--	--	100.0
16006	JAB512	25.9	----	71.6	27.7	19.6	A	--	A	--	--	100.0
17001	JAB512	25.9	10.1	----	28.8	20.0	A	A	--	--	--	100.0
18001	JAB517	27.4	10.2	----	28.1	19.9	A	A	--	--	--	100.0
20005	JAB512	26.3	10.1	----	27.2	19.4	A	A	--	--	--	100.0
20007	JAB512	26.3	----	72.3	29.4	20.0	A	--	A	--	--	100.0
21002	JAB512	26.4	----	72.4	29.5	20.1	A	--	A	--	--	100.0
21004	JAB512	26.5	----	71.6	27.4	19.3	A	--	A	--	--	100.0
21005	JAB512	26.3	----	72.0	29.4	20.2	A	--	A	--	--	100.0
21006	JAB517	27.4	----	76.4	28.8	19.6	A	--	A	--	--	100.0
22001	JAB517	26.1	9.5	----	28.3	19.9	A	A	--	--	--	100.0
22002	JAB514	26.9	----	71.0	27.7	19.5	A	--	A	--	--	100.0
22003	JAB517	27.4	10.1	----	28.1	19.8	A	A	--	--	--	100.0
22004	JAB511	28.4	11.4	----	28.1	19.4	--	--	--	--	--	=====
22006	JAB512	25.9	----	68.4	27.9	19.7	A	--	A	--	--	100.0
22011	JAB514	26.8	----	71.3	28.5	19.0	A	--	A	--	--	100.0
22012	JAB512	26.1	----	72.8	29.0	20.1	A	--	A	--	--	100.0
22017	JAB514	25.5	----	71.0	27.4	19.7	A	--	A	--	--	100.0
22018	JAB517	28.2	----	74.4	29.1	20.0	A	--	A	--	--	100.0
23003	JAB514	27.0	10.3	----	27.8	19.2	A	A	--	--	--	100.0
23008	JAJ011	22.8	----	59.3	26.6	18.2	A	--	A	--	--	100.0
23011	JAJ012	23.4	9.4	----	26.0	18.3	--	--	--	--	--	=====
23015	JAB512	25.4	----	69.3	28.9	19.5	A	--	A	--	--	100.0
23016	JAB512	25.8	10.1	----	29.1	20.1	A	A	--	--	--	100.0
23017	JAB512	26.2	10.5	----	28.5	19.6	A	A	--	--	--	100.0
23019	JAB512	26.1	----	71.0	28.5	19.7	A	--	A	--	--	100.0
23020	JAB512	26.0	----	71.4	29.5	20.4	A	--	A	--	--	100.0
23024	JAB512	26.0	10.2	----	27.6	19.8	A	A	--	--	--	100.0
23051	JAS303	34.5	14.3	----	32.8	22.7	--	--	--	--	--	=====
24003	JAB517	27.5	10.2	----	28.5	19.9	A	A	--	--	--	100.0
25003	JAB512	26.5	----	71.5	29.3	20.5	A	--	A	--	--	100.0
26001	JAC910	26.1	----	69.1	28.5	19.0	--	--	--	--	--	=====
26003	JAB512	25.4	10.1	----	27.7	19.1	A	A	--	--	--	100.0
26006	JAB512	26.9	10.5	----	27.2	19.2	A	A	--	--	--	100.0
26009	JAB512	25.8	10.3	----	27.9	20.0	A	A	--	--	--	100.0
27001	JAA702	30.5	11.3	----	28.4	20.3	--	--	--	--	--	=====
27004	JAJ012	24.1	----	62.5	24.5	17.0	--	--	--	--	--	=====
27013	JAR408	26.7	11.9	----	28.2	19.3	--	--	--	--	--	=====
27014	JAB512	26.2	----	71.9	29.8	20.4	A	--	A	--	--	100.0
27020	JAB512	26.3	----	71.9	29.5	20.4	A	--	A	--	--	100.0
27044	JAB517	27.0	----	73.8	27.4	19.1	A	--	A	--	--	100.0
27046	JAB514	26.3	----	73.8	29.2	19.9	A	--	A	--	--	100.0
27049	JAJ012	23.4	9.4	----	24.1	16.7	--	--	--	--	--	=====
28002	JAB512	25.3	----	70.6	28.9	19.6	A	--	A	--	--	100.0
28003	JAB512	26.5	10.6	----	29.4	21.2	A	A	--	--	--	100.0
28011	JAJ803	20.9	8.4	----	25.5	18.2	--	--	--	--	--	=====
28016	JAB512	26.0	10.3	----	28.7	19.9	A	A	--	--	--	100.0
28017	JAB512	25.5	----	70.8	27.9	19.3	A	--	A	--	--	100.0

[19]血小板 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測定値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28031	JAB514	26.3	-----	74.7	28.2	19.6	A	--	A	--	--	100.0
28033	JAB512	26.1	10.4	-----	29.7	20.0	A	A	--	--	--	100.0
28034	JAB512	25.7	-----	71.1	28.5	19.3	A	--	A	--	--	100.0
30004	JAB517	26.7	10.3	-----	27.9	18.6	A	B	--	--	--	92.9
30005	JAB511	28.5	10.9	-----	27.2	19.0	--	--	--	--	--	=====
31005	JAB512	26.2	9.6	-----	30.1	19.4	A	A	--	--	--	100.0
32001	JAB512	26.4	-----	72.8	30.2	20.4	A	--	A	--	--	100.0
32002	JAB514	25.9	-----	69.8	28.4	19.1	A	--	A	--	--	100.0
32003	JAB516	23.4	8.0	-----	26.3	17.9	--	--	--	--	--	=====
33001	JAJ011	23.1	-----	61.4	27.4	19.0	A	--	A	--	--	100.0
33005	JAB517	26.7	9.5	-----	28.1	20.4	A	A	--	--	--	100.0
33008	JAB512	25.5	9.8	-----	28.0	19.7	A	A	--	--	--	100.0
33009	JAJ011	22.7	-----	58.8	25.4	17.7	A	--	A	--	--	100.0
34004	JAB512	25.9	-----	71.8	29.2	20.1	A	--	A	--	--	100.0
34009	JAB517	26.9	-----	73.0	28.7	19.9	A	--	A	--	--	100.0
34010	JAB512	26.1	-----	71.2	29.6	20.4	A	--	A	--	--	100.0
34011	JAB514	26.7	-----	72.5	29.2	20.4	A	--	A	--	--	100.0
34012	JAB512	25.4	9.6	-----	28.4	19.1	A	A	--	--	--	100.0
34015	JAB512	25.4	9.9	-----	29.0	20.0	A	A	--	--	--	100.0
35001	JAB512	26.5	9.9	-----	28.2	19.5	A	A	--	--	--	100.0
37005	JAB514	25.6	9.8	-----	27.8	19.2	A	A	--	--	--	100.0
37007	JAR409	26.5	12.8	-----	26.1	18.2	--	--	--	--	--	=====
37009	JAJ005	21.4	-----	59.6	-----	-----	--	--	--	--	--	=====
38004	JAR408	27.3	-----	69.9	29.7	20.1	--	--	--	--	--	=====
38007	JAJ005	22.1	-----	59.0	25.5	17.1	--	--	--	--	--	=====
39001	JAB512	25.1	-----	69.0	28.6	19.2	A	--	A	--	--	100.0
39002	JAB512	26.6	10.5	-----	28.0	18.7	A	A	--	--	--	100.0
39003	JAB512	26.3	-----	73.1	29.5	19.7	A	--	A	--	--	100.0
39004	JAB512	26.4	10.7	-----	29.5	19.7	A	A	--	--	--	100.0
40005	JAB512	26.0	10.1	-----	29.0	19.8	A	A	--	--	--	100.0
40007	JAB512	26.7	-----	72.8	27.8	19.8	A	--	A	--	--	100.0
40009	JAB517	27.2	10.3	-----	26.1	18.6	A	B	--	--	--	92.9
40011	JAB512	26.3	-----	71.7	28.1	18.8	A	--	A	--	--	100.0
40021	JAB512	26.9	-----	73.6	26.8	18.4	A	--	A	--	--	100.0
40027	JAB512	26.7	10.5	-----	29.5	20.4	A	A	--	--	--	100.0
43001	JAB517	27.8	-----	74.4	29.2	19.5	A	--	A	--	--	100.0
43003	JAB512	24.8	9.2	-----	27.8	18.2	A	B	--	--	--	85.7
44001	JAB514	25.7	-----	70.9	25.9	18.1	A	--	A	--	--	100.0
45002	JAB512	25.3	9.9	-----	27.8	19.4	A	A	--	--	--	100.0
46004	JAB512	25.6	-----	71.0	28.6	18.9	A	--	A	--	--	100.0
47001	JAB514	27.0	9.9	-----	27.8	18.8	A	A	--	--	--	100.0
47004	JAB512	27.2	-----	74.7	29.0	20.0	A	--	A	--	--	100.0
47005	JAB514	24.7	-----	69.0	27.2	18.3	A	--	A	--	--	100.0
47006	JAB512	25.5	-----	72.2	30.4	19.9	A	--	A	--	--	100.0
48512	JAB517	26.6	9.4	-----	28.2	19.6	A	A	--	--	--	100.0

[20]平均赤血球容積 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01001	JAB512	83.1	----	90.8	83.5	92.9	A	--	A	--	--	100.0
01013	JAJ011	86.2	----	96.1	83.9	98.6	A	--	A	--	--	100.0
01017	JAB512	83.9	76.2	----	87.5	97.2	A	A	--	--	--	100.0
01018	JAB512	83.9	----	91.9	86.4	96.2	A	--	A	--	--	100.0
01023	JAB514	82.9	----	90.2	84.9	95.3	A	--	A	--	--	100.0
01025	JAB517	82.6	75.3	----	84.9	93.5	A	A	--	--	--	100.0
02004	JAB514	82.0	----	89.0	85.0	94.0	A	--	A	--	--	100.0
03001	JAB517	83.4	76.0	----	86.0	95.5	A	A	--	--	--	100.0
03006	JAB512	84.0	----	91.9	82.8	93.1	A	--	A	--	--	100.0
04004	JAB512	84.2	76.6	----	84.9	94.2	A	A	--	--	--	100.0
04008	JAB512	84.0	76.2	----	84.5	94.3	A	A	--	--	--	100.0
04009	JAB512	83.8	75.9	----	84.8	93.7	A	A	--	--	--	100.0
04010	JAB512	83.8	75.6	----	84.7	94.3	A	A	--	--	--	100.0
04015	JAB514	83.1	75.2	----	84.8	94.8	A	A	--	--	--	100.0
07008	JAB517	83.8	----	91.2	84.0	96.4	A	--	A	--	--	100.0
08001	JAB517	83.6	75.4	----	86.8	96.2	A	A	--	--	--	100.0
08003	JAB512	84.4	----	91.7	85.1	95.3	A	--	A	--	--	100.0
08006	JAJ011	85.4	----	94.8	83.3	96.4	A	--	A	--	--	100.0
08009	JAB517	82.1	74.5	----	85.8	96.2	A	A	--	--	--	100.0
08010	JAB512	83.3	----	91.2	83.2	93.1	A	--	A	--	--	100.0
09001	JAJ012	87.5	----	96.2	83.6	97.2	--	--	--	--	--	=====
09005	JAB511	77.8	70.4	----	83.8	93.0	--	--	--	--	--	=====
09012	JAB512	83.2	----	91.6	84.2	93.2	A	--	A	--	--	100.0
09013	JAB514	82.3	----	89.4	84.1	93.6	A	--	A	--	--	100.0
10003	JAB512	83.0	----	90.2	85.6	94.8	A	--	A	--	--	100.0
10004	JAR409	76.1	----	82.3	87.1	98.5	--	--	--	--	--	=====
10005	JAB512	84.9	----	93.1	84.6	94.9	A	--	A	--	--	100.0
10007	JAB512	84.2	----	92.2	84.6	94.0	A	--	A	--	--	100.0
11006	JAB512	82.6	----	90.6	84.7	95.6	A	--	A	--	--	100.0
11010	JAB512	84.1	76.0	----	84.5	94.8	A	A	--	--	--	100.0
11011	JAB512	83.8	76.1	----	84.9	94.0	A	A	--	--	--	100.0
11016	JAB512	82.9	----	90.8	83.9	92.9	A	--	A	--	--	100.0
11020	JAB512	82.9	----	90.8	83.9	92.9	A	--	A	--	--	100.0
11023	JAB514	82.1	----	89.5	84.1	94.2	A	--	A	--	--	100.0
12001	JAB517	83.1	75.5	----	84.9	93.9	A	A	--	--	--	100.0
12002	JAB512	83.3	75.4	----	84.2	93.4	A	A	--	--	--	100.0
12008	JAB517	84.3	----	91.3	86.4	96.1	A	--	A	--	--	100.0
12016	JAB514	84.3	----	91.8	83.9	93.9	B	--	B	--	--	78.6
13002	JAB514	82.4	----	89.4	85.8	94.5	A	--	A	--	--	100.0
13003	JAB517	83.6	----	91.2	85.4	93.8	A	--	A	--	--	100.0
13017	JAB512	84.1	----	92.1	85.8	94.5	A	--	A	--	--	100.0
13026	JAB512	82.8	75.2	----	83.6	93.1	A	A	--	--	--	100.0
13052	JAB514	84.7	77.0	----	86.1	95.6	B	A	--	--	--	85.7
13053	JAB512	83.3	75.6	----	83.0	91.8	A	A	--	--	--	100.0
13054	JAB514	83.8	77.0	----	85.6	95.3	A	A	--	--	--	100.0
13061	JAB512	84.6	----	92.9	85.2	94.8	A	--	A	--	--	100.0
13064	JAB512	83.5	75.8	----	84.3	93.7	A	A	--	--	--	100.0
13074	JAB512	83.5	----	91.5	83.3	93.1	A	--	A	--	--	100.0
13084	JAB514	82.2	----	89.6	85.1	94.5	A	--	A	--	--	100.0
13094	JAB512	85.2	----	92.1	86.1	94.5	A	--	A	--	--	100.0
13095	JAB514	82.9	----	90.1	84.5	94.0	A	--	A	--	--	100.0
13100	JAB512	83.8	76.9	----	83.1	92.6	A	A	--	--	--	100.0
13103	JAB512	82.5	----	90.6	86.2	96.2	A	--	A	--	--	100.0
14001	JAB517	83.9	----	91.6	87.1	95.9	A	--	A	--	--	100.0
14003	JAB512	83.7	----	91.6	83.9	93.4	A	--	A	--	--	100.0
14010	JAB512	83.2	75.5	----	84.2	93.7	A	A	--	--	--	100.0

[20]平均赤血球容積 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
14024	JAB512	84.4	76.4	----	83.6	93.2	A	A	--	--	--	100.0
14027	JAB517	83.7	75.2	----	85.3	95.3	A	A	--	--	--	100.0
14030	JAB512	82.7	----	91.0	83.1	93.0	A	--	A	--	--	100.0
15001	JAB517	81.8	----	89.1	86.0	95.3	A	--	A	--	--	100.0
15004	JAB512	82.2	74.3	----	82.4	91.4	A	B	--	--	--	92.9
15006	JAB512	84.5	----	92.7	84.0	93.0	A	--	A	--	--	100.0
15011	JAB512	82.9	----	90.3	83.4	92.9	A	--	A	--	--	100.0
15012	JAB514	81.6	75.4	----	83.5	92.8	A	A	--	--	--	100.0
16002	JAB512	82.8	----	91.0	83.5	92.3	A	--	A	--	--	100.0
16006	JAB512	83.2	----	91.4	83.8	93.2	A	--	A	--	--	100.0
17001	JAB512	82.8	75.2	----	83.2	93.2	A	A	--	--	--	100.0
18001	JAB517	82.8	75.0	----	87.1	97.0	A	A	--	--	--	100.0
20005	JAB512	83.6	76.1	----	83.2	92.5	A	A	--	--	--	100.0
20007	JAB512	83.6	----	91.6	83.7	92.9	A	--	A	--	--	100.0
21002	JAB512	83.4	----	91.5	83.7	94.0	A	--	A	--	--	100.0
21004	JAB512	84.0	----	92.0	84.4	94.2	A	--	A	--	--	100.0
21005	JAB512	83.4	----	91.8	83.9	93.4	A	--	A	--	--	100.0
21006	JAB517	82.5	----	89.7	85.3	95.1	A	--	A	--	--	100.0
22001	JAB517	83.6	76.1	----	85.0	93.2	A	A	--	--	--	100.0
22002	JAB514	83.0	----	90.2	85.3	94.5	A	--	A	--	--	100.0
22003	JAB517	83.7	75.6	----	86.1	94.3	A	A	--	--	--	100.0
22004	JAB511	77.3	70.0	----	82.7	92.1	--	--	--	--	--	=====
22006	JAB512	83.1	----	91.4	83.4	92.3	A	--	A	--	--	100.0
22011	JAB514	82.7	----	89.6	84.9	94.5	A	--	A	--	--	100.0
22012	JAB512	83.8	----	91.6	83.7	93.7	A	--	A	--	--	100.0
22017	JAB514	81.1	----	88.4	83.5	93.1	A	--	A	--	--	100.0
22018	JAB517	82.0	----	89.5	85.2	92.3	A	--	A	--	--	100.0
23003	JAB514	82.2	76.5	----	85.6	94.8	A	A	--	--	--	100.0
23008	JAJ011	87.3	----	96.7	84.2	98.4	A	--	A	--	--	100.0
23011	JAJ012	86.3	79.1	----	86.7	98.6	--	--	--	--	--	=====
23015	JAB512	84.3	----	92.5	84.7	94.5	A	--	A	--	--	100.0
23016	JAB512	83.6	76.3	----	84.8	94.5	A	A	--	--	--	100.0
23017	JAB512	84.6	76.8	----	84.5	94.3	A	A	--	--	--	100.0
23019	JAB512	84.0	----	92.1	83.6	93.2	A	--	A	--	--	100.0
23020	JAB512	82.9	----	90.9	83.1	93.5	A	--	A	--	--	100.0
23024	JAB512	84.5	76.8	----	83.8	93.9	A	A	--	--	--	100.0
23051	JAS303	85.9	77.1	----	80.1	94.1	--	--	--	--	--	=====
24003	JAB517	82.3	75.3	----	85.3	94.8	A	A	--	--	--	100.0
25003	JAB512	83.8	----	92.1	86.1	94.8	A	--	A	--	--	100.0
26001	JAC910	82.6	----	92.1	86.2	99.4	--	--	--	--	--	=====
26003	JAB512	83.6	75.9	----	83.4	91.9	A	A	--	--	--	100.0
26006	JAB512	84.3	76.6	----	86.4	94.8	A	A	--	--	--	100.0
26009	JAB512	83.3	75.9	----	84.6	94.0	A	A	--	--	--	100.0
27001	JAA702	92.4	83.4	----	84.6	96.1	--	--	--	--	--	=====
27004	JAJ012	88.7	----	97.9	85.1	99.1	--	--	--	--	--	=====
27013	JAR408	80.5	72.2	----	85.8	97.7	--	--	--	--	--	=====
27014	JAB512	83.0	----	90.8	86.0	95.7	A	--	A	--	--	100.0
27020	JAB512	83.4	----	91.6	84.5	94.0	A	--	A	--	--	100.0
27044	JAB517	81.5	----	88.9	84.2	94.0	A	--	A	--	--	100.0
27046	JAB514	82.9	----	89.5	84.4	93.8	A	--	A	--	--	100.0
27049	JAJ012	88.9	80.7	----	86.2	99.2	--	--	--	--	--	=====
28002	JAB512	83.4	----	91.6	84.9	94.5	A	--	A	--	--	100.0
28003	JAB512	83.2	75.4	----	83.7	93.8	A	A	--	--	--	100.0
28011	JAJ803	79.7	71.0	----	88.5	98.2	--	--	--	--	--	=====
28016	JAB512	83.8	76.3	----	84.5	93.8	A	A	--	--	--	100.0
28017	JAB512	83.3	----	91.1	84.6	93.5	A	--	A	--	--	100.0

[20]平均赤血球容積 自施設測定結果一覧

施設 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
		試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
28031	JAB514	81.5	-----	88.5	84.1	93.9	A	--	A	--	--	100.0
28033	JAB512	84.9	76.5	-----	84.3	94.2	A	A	--	--	--	100.0
28034	JAB512	84.6	-----	92.8	85.2	94.5	A	--	A	--	--	100.0
30004	JAB517	83.3	76.0	-----	84.8	95.5	A	A	--	--	--	100.0
30005	JAB511	77.4	70.5	-----	83.2	93.1	--	--	--	--	--	=====
31005	JAB512	83.6	76.0	-----	83.9	93.2	A	A	--	--	--	100.0
32001	JAB512	82.4	-----	89.6	82.0	91.1	A	--	B	--	--	92.9
32002	JAB514	81.5	-----	88.8	84.3	92.8	A	--	A	--	--	100.0
32003	JAB516	81.0	75.0	-----	83.4	93.0	--	--	--	--	--	=====
33001	JAJ011	84.9	-----	94.9	80.1	93.4	A	--	A	--	--	100.0
33005	JAB517	80.9	73.9	-----	83.1	93.8	B	B	--	--	--	85.7
33008	JAB512	83.9	76.2	-----	84.4	93.6	A	A	--	--	--	100.0
33009	JAJ011	87.7	-----	97.7	86.2	99.2	A	--	A	--	--	100.0
34004	JAB512	83.4	-----	91.5	84.5	94.3	A	--	A	--	--	100.0
34009	JAB517	82.6	-----	90.2	85.2	94.8	A	--	A	--	--	100.0
34010	JAB512	83.1	-----	91.1	83.5	93.2	A	--	A	--	--	100.0
34011	JAB514	81.8	-----	88.6	84.9	94.6	A	--	A	--	--	100.0
34012	JAB512	84.6	76.8	-----	83.8	93.2	A	A	--	--	--	100.0
34015	JAB512	83.5	75.7	-----	83.3	92.4	A	A	--	--	--	100.0
35001	JAB512	83.6	75.9	-----	83.7	94.2	A	A	--	--	--	100.0
37005	JAB514	81.6	76.0	-----	84.9	94.2	A	A	--	--	--	100.0
37007	JAR409	73.5	66.9	-----	84.2	95.2	--	--	--	--	--	=====
37009	JAJ005	84.8	-----	94.7	-----	-----	--	--	--	--	--	=====
38004	JAR408	79.2	-----	87.7	86.0	97.2	--	--	--	--	--	=====
38007	JAJ005	84.7	-----	93.9	83.1	97.5	--	--	--	--	--	=====
39001	JAB512	83.8	-----	92.0	83.7	93.7	A	--	A	--	--	100.0
39002	JAB512	82.7	75.4	-----	83.5	93.0	A	A	--	--	--	100.0
39003	JAB512	83.4	-----	91.4	83.3	92.7	A	--	A	--	--	100.0
39004	JAB512	83.6	75.8	-----	84.0	93.2	A	A	--	--	--	100.0
40005	JAB512	84.5	76.9	-----	84.2	94.8	A	A	--	--	--	100.0
40007	JAB512	82.8	-----	90.9	82.3	92.9	A	--	A	--	--	100.0
40009	JAB517	84.0	76.3	-----	86.0	95.4	A	A	--	--	--	100.0
40011	JAB512	83.8	-----	91.9	82.5	92.2	A	--	A	--	--	100.0
40021	JAB512	83.8	-----	91.9	82.8	102.8	A	--	A	--	--	100.0
40027	JAB512	84.2	76.5	-----	83.9	93.4	A	A	--	--	--	100.0
43001	JAB517	82.9	-----	90.4	82.9	92.2	A	--	A	--	--	100.0
43003	JAB512	83.2	75.3	-----	83.9	93.7	A	A	--	--	--	100.0
44001	JAB514	82.9	-----	90.2	84.7	94.0	A	--	A	--	--	100.0
45002	JAB512	83.5	76.3	-----	82.6	93.2	A	A	--	--	--	100.0
46004	JAB512	82.3	-----	89.9	82.0	92.1	A	--	A	--	--	100.0
47001	JAB514	83.0	76.7	-----	85.0	95.6	A	A	--	--	--	100.0
47004	JAB512	83.8	-----	92.1	83.6	94.5	A	--	A	--	--	100.0
47005	JAB514	83.2	-----	90.4	84.8	95.7	A	--	A	--	--	100.0
47006	JAB512	84.1	-----	91.7	84.7	94.1	A	--	A	--	--	100.0
48512	JAB517	82.6	75.2	-----	85.2	94.7	A	A	--	--	--	100.0

付表 6 試料別測定結果一覧(外部機関測定)

[1]総コレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	11	119	131	----	----	166	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	21	----	130	144	----	164	----	189	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01019	052	11	----	131	143	157	----	178	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	11	117	----	143	156	----	----	191	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	11	----	131	143	----	165	----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02003	110	11	----	131	144	----	164	----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	11	118	131	----	----	166	179	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	11	118	----	144	158	----	----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04006	185	11	118	----	144	156	----	----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04012	002	11	119	----	144	----	167	181	193	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
06001	136	11	----	130	143	156	----	177	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	11	118	----	144	----	165	178	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
07004	062	11	118	----	143	157	----	----	191	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	11	----	133	145	158	----	180	----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08002	008	11	118	132	----	156	----	178	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	11	117	----	143	155	----	----	190	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	21	118	----	143	156	----	----	189	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	11	117	131	----	156	----	177	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09009	008	11	117	----	142	155	----	----	190	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	11	118	----	144	157	----	----	192	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	11	----	131	144	----	166	----	192	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	11	117	130	----	----	164	177	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	11	----	131	144	----	166	----	192	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	11	118	----	144	157	----	----	192	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	11	119	131	----	156	----	178	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11004	160	11	117	129	----	155	----	177	189	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11005	175	11	119	----	143	156	----	----	191	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11007	008	11	----	131	144	----	166	----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	11	----	131	144	----	167	----	192	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	11	119	132	----	----	166	180	----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	11	121	134	----	----	169	183	----	209	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	73.3	86.7
12006	008	11	117	----	142	155	----	----	190	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	11	118	131	----	----	165	178	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	11	118	----	144	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	11	117	----	142	155	----	----	189	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	11	----	130	144	156	----	178	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	11	118	----	142	156	----	----	190	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12015	041	21	118	131	----	----	165	178	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12018	041	21	119	----	144	----	164	177	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	21	118	131	----	155	----	178	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
13004	068	11	118	----	144	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	11	118	----	144	157	----	----	192	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	11	118	131	----	157	----	179	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	11	118	----	144	----	166	179	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	11	118	131	----	----	166	179	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	11	118	----	144	156	----	----	191	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	11	118	131	----	157	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	11	----	130	142	----	164	----	190	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	11	118	131	----	156	----	178	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	21	204	191	----	144	----	157	118	----	D	D	--	C	--	C	D	--	13.3	0.0	6.7
13021	002	11	----	131	144	----	166	----	192	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	11	----	130	143	156	----	177	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	11	----	131	144	157	----	179	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	21	118	----	144	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13033	087	11	117	130	----	156	----	178	190	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	11	117	----	143	155	----	----	189	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	11	121	134	----	----	170	183	----	209	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	73.3	86.7
13038	002	11	118	131	----	157	----	179	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[1]総コレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13039	002	11	118	131	----	----	166	179	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	11	118	----	144	157	----	----	192	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	11	118	----	144	157	----	----	192	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	11	118	----	143	----	164	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	11	117	130	----	----	164	176	----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13055	002	11	118	131	----	157	----	179	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	11	116	----	142	----	164	176	189	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13063	050	21	118	----	143	156	----	----	188	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
13067	008	11	117	131	----	----	166	178	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	11	117	----	143	156	----	----	190	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13077	008	11	----	130	143	----	164	----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	11	121	134	----	160	----	183	196	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	66.7	83.3
13079	041	21	----	131	144	156	----	178	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13080	008	11	117	----	142	----	165	177	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13082	008	11	118	131	----	156	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	11	117	130	----	----	164	177	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13088	154	11	119	132	----	----	166	180	----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13089	002	11	118	----	144	----	166	179	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	11	117	131	----	156	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	11	118	----	144	----	166	179	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	21	----	130	143	155	----	176	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	11	118	----	143	----	164	178	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13109	008	11	----	131	143	----	165	----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	21	----	131	144	156	----	178	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13123	008	11	----	130	144	----	164	----	190	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	11	117	130	----	----	164	176	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	11	----	130	143	155	----	177	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	11	----	131	144	----	163	----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	11	----	134	147	----	169	----	196	209	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	80.0	90.0
14007	041	21	----	131	144	156	----	178	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	11	----	130	143	----	165	----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	11	----	134	147	160	----	183	----	209	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
14023	006	11	120	134	----	----	170	183	----	209	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	60.0	80.0
14024	008	11	117	130	----	----	164	177	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14025	006	11	----	134	147	160	----	183	----	208	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
14026	008	11	118	----	142	----	164	176	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14029	041	21	----	131	144	156	----	178	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14034	006	11	121	----	147	160	----	----	196	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
15007	008	11	119	131	----	----	164	179	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	11	118	131	----	157	----	179	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	11	118	----	144	----	166	179	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	11	----	131	143	157	----	179	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16005	006	11	121	----	147	----	169	182	196	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
16008	089	11	117	----	142	155	----	----	189	102	A	--	A	A	--	--	A	D	80.0	0.0	40.0
17003	190	11	117	130	----	----	164	178	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	11	119	----	144	----	166	180	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	11	121	----	147	160	----	----	195	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
20002	128	11	118	----	144	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	11	118	----	143	156	----	----	190	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	11	----	130	143	156	----	178	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	11	118	131	----	157	----	178	190	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	21	118	----	143	----	166	177	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22010	006	11	121	----	147	----	169	182	195	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
22015	008	11	----	130	143	----	166	----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	11	120	134	----	----	169	182	----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
23001	057	21	----	130	143	----	164	----	189	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
23002	172	11	118	131	----	----	165	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	11	118	131	----	157	----	179	192	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[1]総コレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23006	088	11	119	133	----	159	----	180	193	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	11	117	----	144	----	165	178	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23009	088	11	119	133	----	159	----	180	193	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	11	118	----	145	----	167	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23018	008	11	118	----	144	----	164	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23022	006	11	121	134	----	----	170	183	----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	73.3	86.7
23026	088	11	119	----	146	----	167	180	193	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	11	119	----	146	----	167	180	193	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	11	118	----	146	----	166	180	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
23037	088	11	119	133	----	----	167	180	----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23038	169	11	----	131	144	157	----	179	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23039	169	11	117	130	----	157	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	11	118	131	----	157	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	11	118	131	----	----	165	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	11	118	----	144	157	----	----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	11	----	131	143	156	----	178	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	11	118	----	143	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	11	118	----	143	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	11	----	131	144	----	165	----	192	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	21	117	131	----	----	165	178	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	11	118	----	144	156	----	----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	11	----	130	144	155	----	177	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	11	117	----	142	155	----	----	189	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27003	068	11	118	131	----	156	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	11	118	----	143	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	11	----	131	144	----	165	----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	21	118	----	143	----	165	178	190	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27009	008	11	----	130	143	156	----	177	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	11	118	131	----	156	----	178	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	11	118	----	143	156	----	----	191	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	11	----	131	142	----	164	----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27031	090	11	----	130	143	----	164	----	191	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27037	068	11	118	----	144	156	----	----	191	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	21	118	131	----	156	----	178	190	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	11	----	129	143	156	----	177	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	11	118	----	143	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27045	068	11	118	----	144	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	11	----	131	144	----	165	----	191	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	11	----	131	144	157	----	179	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	11	----	131	144	156	----	178	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	11	118	----	142	156	----	----	191	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28007	197	11	116	130	----	156	----	177	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28008	090	11	118	----	143	156	----	----	191	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28014	008	11	118	130	----	156	----	178	190	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	11	118	----	144	----	166	179	192	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	11	----	130	143	----	165	----	191	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	11	----	131	144	157	----	179	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	11	----	131	144	----	166	----	192	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	11	121	----	147	160	----	----	196	209	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
28029	068	11	118	131	----	----	165	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	11	118	----	143	----	165	178	191	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	11	118	131	----	----	165	178	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
31003	008	11	----	131	143	156	----	179	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	11	120	132	----	159	----	180	194	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33004	008	11	118	131	----	156	----	179	191	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33014	112	11	----	132	144	----	166	----	191	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34001	008	11	118	131	----	----	165	179	----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	11	----	131	143	156	----	179	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[1]総コレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34003	008	11	118	-----	143	156	-----	-----	191	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34005	112	11	118	-----	144	-----	165	179	192	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34013	112	11	-----	131	145	157	-----	178	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
35006	109	11	-----	133	147	-----	167	-----	194	208	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
36002	161	11	-----	129	143	-----	164	-----	190	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
37001	058	11	-----	128	140	155	-----	175	-----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37004	008	11	117	130	-----	155	-----	176	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
38006	054	11	117	131	-----	-----	165	178	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38008	006	11	120	134	-----	160	-----	183	195	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	80.0	90.0
40001	193	11	-----	130	143	156	-----	176	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40002	193	11	-----	132	143	-----	164	-----	191	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40004	165	21	177	-----	143	-----	164	177	189	-----	D	--	A	--	A	A	A	--	80.0	0.0	40.0
40006	165	21	117	130	-----	156	-----	177	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40013	109	11	-----	133	146	159	-----	181	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40015	008	11	-----	130	142	-----	165	-----	189	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40022	165	21	-----	130	143	155	-----	177	-----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40025	109	11	120	133	-----	159	-----	181	194	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40026	165	21	-----	130	143	155	-----	177	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40028	068	11	-----	131	144	156	-----	178	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40029	069	11	-----	130	143	-----	165	-----	190	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40030	109	11	-----	133	146	159	-----	180	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40031	151	11	-----	131	142	-----	163	-----	191	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
40034	193	11	118	-----	143	-----	164	177	190	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40035	165	21	117	-----	143	156	-----	-----	191	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
41001	073	11	117	130	-----	-----	163	178	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
41002	008	11	117	-----	143	-----	165	178	190	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
42001	165	21	117	130	-----	-----	165	177	-----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
42002	008	11	118	-----	143	-----	164	178	191	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43004	146	21	120	132	-----	158	-----	180	193	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43007	095	11	123	138	-----	-----	173	184	-----	206	B	B	--	--	B	A	--	A	80.0	33.3	56.7
44002	193	11	118	130	-----	156	-----	178	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
46001	193	11	117	-----	142	155	-----	-----	190	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47002	109	11	120	-----	146	159	-----	-----	193	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[2] 中性脂肪 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	21	47	57	----	----	85	95	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	21	----	58	68	----	86	----	106	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01019	052	21	----	58	68	78	----	95	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	21	47	----	67	78	----	----	105	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	21	----	57	68	----	84	----	104	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02003	110	21	----	57	68	----	86	----	108	118	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	21	47	57	----	----	84	94	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	21	47	----	66	77	----	----	103	112	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04006	185	21	47	----	66	75	----	----	102	111	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04012	002	21	46	----	66	----	82	92	102	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
06001	136	21	----	57	67	76	----	93	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	21	47	----	67	----	84	95	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
07004	062	21	47	----	67	77	----	----	105	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	21	----	57	68	79	----	98	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
08002	008	21	47	57	----	77	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	21	46	----	68	78	----	----	106	117	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	21	48	----	69	78	----	----	105	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	21	47	57	----	78	----	95	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09009	008	21	47	----	66	77	----	----	104	114	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	21	47	----	67	78	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	21	----	57	67	----	84	----	104	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	21	46	58	----	----	85	95	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	21	----	57	67	----	84	----	104	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	21	47	----	67	78	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	21	48	57	----	76	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11004	160	21	45	54	----	73	----	89	99	----	A	A	--	B	--	B	B	--	80.0	73.3	76.7
11005	175	21	46	----	64	74	----	----	100	109	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	73.3	86.7
11007	008	21	----	58	67	----	84	----	106	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	21	----	57	67	----	86	----	107	117	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	21	46	56	----	----	84	95	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	21	46	57	----	----	86	97	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12006	008	21	47	----	67	77	----	----	105	114	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	21	48	58	----	----	84	94	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	21	46	----	67	----	86	96	107	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	21	47	----	66	76	----	----	103	113	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	21	----	56	66	76	----	93	----	113	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	21	46	----	68	78	----	----	106	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12015	041	21	47	57	----	----	85	95	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12018	041	21	47	----	67	----	84	95	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	21	47	57	----	77	----	95	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13004	068	21	47	----	68	----	86	96	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	21	47	----	67	78	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	21	47	57	----	78	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	21	47	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	21	47	57	----	----	84	94	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	21	47	----	67	76	----	----	103	113	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	21	46	57	----	78	----	96	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	21	----	57	67	----	84	----	104	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	21	47	57	----	77	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	21	116	105	----	67	----	77	47	----	D	D	--	C	--	D	D	--	6.7	0.0	3.3
13021	002	21	----	57	67	----	84	----	104	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	21	----	57	67	77	----	94	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	21	----	57	67	78	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	21	47	----	67	----	84	95	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13033	087	21	46	56	----	76	----	93	103	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	21	47	----	67	77	----	----	105	114	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	21	46	57	----	----	87	97	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13038	002	21	47	57	----	78	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[2] 中性脂肪 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13039	002	21	47	57	----	----	84	94	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	21	47	----	67	78	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	21	47	----	67	78	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	21	47	----	67	----	85	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	21	47	57	----	----	84	93	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13055	002	21	47	57	----	78	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	11	46	----	66	----	82	92	101	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13063	050	21	47	----	68	77	----	----	104	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13067	008	21	47	57	----	----	84	94	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	21	47	----	68	78	----	----	105	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13077	008	21	----	57	67	----	83	----	104	113	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	21	47	58	----	79	----	97	108	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13079	041	21	----	57	68	78	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13080	008	21	47	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13082	008	21	47	57	----	77	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	21	47	57	----	----	84	93	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13088	154	11	46	56	----	----	80	91	----	111	A	A	--	--	B	A	--	A	93.3	93.3	93.3
13089	002	21	47	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	21	47	57	----	77	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	21	47	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	21	----	57	67	77	----	94	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	21	48	----	67	----	84	94	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13109	008	21	----	57	67	----	85	----	104	114	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	21	----	57	67	78	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13123	008	21	----	57	67	----	84	----	105	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	21	47	57	----	----	84	93	----	113	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	21	----	57	67	77	----	94	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	21	----	58	68	----	87	----	107	117	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	21	----	57	68	----	86	----	108	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14007	041	21	----	57	67	78	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	21	----	57	66	----	83	----	104	113	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	21	----	58	68	79	----	97	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14023	006	21	46	57	----	----	87	97	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
14024	008	21	47	57	----	----	83	93	----	113	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14025	006	21	----	58	68	79	----	97	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14026	008	21	47	----	66	----	83	94	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14029	041	21	----	57	67	78	----	95	----	117	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14034	006	21	46	----	68	79	----	----	108	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15007	008	21	47	57	----	----	84	93	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	21	47	57	----	78	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	21	47	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	21	----	57	67	77	----	94	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16005	006	21	46	----	68	----	86	97	108	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16008	089	21	47	----	66	76	----	----	103	113	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17003	190	21	47	57	----	----	86	96	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	21	47	----	67	----	84	95	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	21	46	----	68	79	----	----	108	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20002	128	21	46	----	67	----	84	95	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	21	47	----	68	78	----	----	106	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	21	----	58	68	78	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	21	47	57	----	77	----	95	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	21	47	----	68	----	85	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22010	006	21	46	----	68	----	86	97	108	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22015	008	21	----	57	67	----	84	----	104	114	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	21	46	57	----	----	86	97	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23001	057	21	----	58	68	----	84	----	105	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23002	172	21	47	57	----	----	85	95	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	21	47	57	----	78	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[2] 中性脂肪 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23006	088	21	46	57	----	78	----	93	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	21	45	----	66	----	81	91	101	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23009	088	21	46	57	----	78	----	93	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	21	45	----	65	----	82	92	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23018	008	21	47	----	67	----	84	94	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23022	006	21	46	57	----	----	87	97	----	118	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23026	088	21	46	----	67	----	83	93	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	21	46	----	67	----	83	93	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	21	46	----	66	----	83	93	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23037	088	21	46	57	----	----	83	93	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
23038	169	21	----	56	65	76	----	90	----	113	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
23039	169	21	45	56	----	76	----	91	101	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	21	47	57	----	77	----	94	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	21	47	58	----	----	86	96	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	21	46	----	65	77	----	----	102	112	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	21	----	58	67	77	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	21	48	----	67	----	84	94	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	21	47	----	68	----	86	96	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	21	----	58	68	----	86	----	106	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	21	47	57	----	----	84	95	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	21	47	----	68	78	----	----	106	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	21	----	57	66	77	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	21	47	----	68	77	----	----	106	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27003	068	21	47	58	----	78	----	96	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	21	48	----	67	----	84	94	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	21	----	58	68	----	86	----	106	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	21	47	----	68	----	85	94	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27009	008	21	----	57	67	76	----	93	----	113	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	21	47	57	----	77	----	95	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	21	48	----	67	77	----	----	105	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	21	----	59	69	----	87	----	109	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27031	090	21	----	58	70	----	87	----	109	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27037	068	21	47	----	68	78	----	----	106	116	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	21	47	58	----	78	----	94	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	21	----	56	66	77	----	95	----	117	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	21	47	----	67	----	83	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27045	068	21	47	----	68	----	86	96	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	21	----	58	68	----	86	----	106	116	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	21	----	57	67	78	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	21	----	58	68	78	----	96	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	21	48	----	69	80	----	----	109	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28007	197	21	46	56	----	76	----	93	103	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28008	090	21	48	----	69	80	----	----	109	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28014	008	21	47	57	----	77	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	21	47	----	67	----	84	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	21	----	57	67	----	83	----	104	114	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	21	----	57	67	78	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	21	----	57	67	----	84	----	104	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	21	46	----	68	79	----	----	108	118	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28029	068	21	47	58	----	----	86	96	----	115	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	21	47	----	68	----	86	96	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	21	47	57	----	----	84	94	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
31003	008	21	----	57	67	77	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	11	47	57	----	80	----	96	109	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33004	008	21	47	57	----	77	----	94	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33014	112	21	----	58	69	----	87	----	108	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34001	008	21	47	57	----	----	84	94	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	21	----	57	67	77	----	94	----	114	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[2]中性脂肪 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
34003	008	21	47	----	68	77	----	----	105	114	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34005	112	21	48	----	70	----	88	99	109	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34013	112	21	----	59	70	81	----	99	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
35006	109	21	----	56	67	----	83	----	104	115	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
36002	161	21	----	58	68	----	87	----	108	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
37001	058	21	----	57	69	80	----	97	----	118	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37004	008	21	47	58	----	78	----	95	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
38006	054	21	48	57	----	----	84	94	----	114	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38008	006	21	46	57	----	79	----	97	108	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40001	193	21	----	58	67	78	----	94	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40002	193	21	----	58	68	----	84	----	105	113	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40004	165	21	47	----	67	----	84	94	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40006	165	21	47	58	----	77	----	94	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40013	109	21	----	56	67	79	----	93	----	115	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
40015	008	21	----	57	66	----	83	----	103	113	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40022	165	21	----	58	69	78	----	95	----	117	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40025	109	21	46	56	----	78	----	93	104	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40026	165	21	----	57	68	77	----	95	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40028	068	21	----	58	68	78	----	96	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40029	069	21	----	58	68	----	85	----	105	114	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40030	109	21	----	57	67	78	----	93	----	116	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40031	151	21	----	59	69	----	87	----	110	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40034	193	21	48	----	68	----	85	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40035	165	21	47	----	67	77	----	----	106	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
41001	073	21	45	54	----	----	81	91	----	111	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
41002	008	21	47	----	66	----	83	94	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
42001	165	21	47	57	----	----	84	95	----	116	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
42002	008	21	48	----	68	----	85	95	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43004	146	21	46	56	----	76	----	92	102	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43007	095	21	50	60	----	----	91	101	----	123	B	A	--	--	B	B	--	B	73.3	46.7	60.0
44002	193	21	48	58	----	78	----	95	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
46001	193	21	48	----	68	78	----	----	106	117	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47002	109	21	46	----	67	78	----	----	104	115	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[3]尿酸 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01019	052	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.3	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02003	110	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	31	5.2	----	6	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04006	185	31	5.2	----	6	6.5	----	----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04012	002	31	5.2	----	6	----	6.7	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
06001	136	31	----	5.7	6.2	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
07004	062	31	5.3	----	6.1	6.5	----	----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	31	----	5.7	6.1	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08002	008	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	31	5.3	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	31	5.3	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09009	008	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	31	5.3	5.7	----	6.5	----	7.3	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11004	160	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.3	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11005	175	31	5.3	----	6.2	6.6	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11007	008	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12006	008	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	31	5.3	5.7	----	----	6.8	7.3	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12015	041	31	5.3	5.7	----	----	6.9	7.3	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12018	041	31	5.3	----	6.2	----	6.9	7.3	7.8	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	31	5.3	5.7	----	6.5	----	7.2	7.6	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3
13004	068	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	31	8.2	7.8	----	6.2	----	6.6	5.3	----	D	D	--	C	--	D	D	--	6.7	0.0	3.3
13021	002	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.3	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	31	5.3	----	6.2	----	6.9	7.3	7.8	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13033	087	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13038	002	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[3]尿酸 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13039	002	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13055	002	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13063	050	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13067	008	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13077	008	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.6	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13079	041	31	----	5.7	6.2	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13080	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13082	008	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13088	154	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13089	002	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13109	008	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	31	----	5.7	6.2	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13123	008	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14007	041	31	----	5.7	6.2	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14023	006	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14024	008	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14025	006	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14026	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14029	041	31	----	5.7	6.2	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14034	006	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15007	008	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16005	006	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16008	089	31	5.3	----	6.2	6.6	----	----	7.8	8.3	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
17003	190	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20002	128	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	31	5.3	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.3	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.6	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	31	5.3	----	6.1	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
22010	006	31	5.2	----	6	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22015	008	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23001	057	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23002	172	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[3]尿酸 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23006	088	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.6	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.3	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
23009	088	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.6	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	31	5.1	----	6	----	6.8	7.1	7.5	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	73.3	83.3
23018	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23022	006	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23026	088	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	31	5.1	----	6	----	6.8	7.1	7.5	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	73.3	83.3
23037	088	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23038	169	31	----	5.7	6	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23039	169	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	31	5.2	----	6	6.5	----	----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	31	----	5.7	6.1	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	31	5.3	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	31	----	5.7	6.1	----	6.9	----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.3	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	6.1	8.1	A	--	A	A	--	--	D	A	80.0	0.0	40.0
27003	068	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	31	5.3	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	31	5.3	----	6.1	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
27009	008	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.6	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	31	5.3	----	6.1	6.6	----	----	7.7	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27031	090	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27037	068	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	31	5.2	5.6	----	6.5	----	7.3	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	31	----	5.6	6	6.4	----	7.2	----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	31	5.3	----	6.1	----	6.8	7.2	7.6	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
27045	068	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	31	5.2	----	6.1	6.6	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28007	197	31	5.3	5.7	----	6.6	----	7.3	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28008	090	31	5.2	----	6.1	6.6	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28014	008	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.3	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28029	068	31	5.2	5.7	----	----	6.8	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	31	5.3	5.7	----	----	6.8	7.3	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
31003	008	31	----	5.7	6.1	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	31	5.3	5.6	----	6.5	----	7.3	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
33004	008	31	5.3	5.7	----	6.6	----	7.3	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33014	112	31	----	5.8	6.3	----	7	----	7.8	8.3	--	A	B	--	B	--	A	A	86.7	66.7	76.7
34001	008	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	31	----	5.7	6.1	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[3]尿酸 外部施設測定結果一覧

施設		外部機関		測定 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点	
34003	008	31	5.3	----	6.1	6.6	----	----	7.7	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
34005	112	31	5.4	----	6.2	----	6.9	7.3	7.7	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	86.7	90.0	
34013	112	31	----	5.8	6.2	6.6	----	7.3	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3	
35006	109	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
36002	161	31	----	5.7	6.2	----	6.9	----	7.8	8.3	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7	
37001	058	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3	
37004	008	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
38006	054	31	5.2	5.6	----	----	6.7	7.3	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7	
38008	006	31	5.2	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
40001	193	31	----	5.7	6.1	6.6	----	7.3	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40002	193	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
40004	165	31	5.2	----	6.1	----	6.7	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
40006	165	31	5.3	5.7	----	6.5	----	7.2	7.8	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3	
40013	109	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40015	008	31	----	5.6	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
40022	165	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40025	109	31	5.1	5.7	----	6.5	----	7.2	7.5	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	80.0	86.7	
40026	165	31	----	5.7	6.1	6.6	----	7.2	----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40028	068	31	----	5.7	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40029	069	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
40030	109	31	----	5.6	6.1	6.5	----	7.2	----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40031	151	31	----	5.7	6.1	----	6.8	----	7.7	8.2	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
40034	193	31	5.3	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
40035	165	31	5.3	----	6.1	6.6	----	----	7.8	8.2	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
41001	073	31	5.1	5.5	----	----	6.7	7.1	----	8	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	80.0	83.3	
41002	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.2	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
42001	165	31	5.2	5.6	----	----	6.8	7.2	----	8.2	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
42002	008	31	5.2	----	6.1	----	6.8	7.3	7.7	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
43004	146	31	5.3	5.7	----	6.5	----	7.2	7.7	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
43007	095	31	5.2	5.7	----	----	6.9	7.2	----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7	
44002	193	31	5.3	5.7	----	6.6	----	7.3	7.8	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
46001	193	31	5.3	----	6.1	6.6	----	----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
47002	109	31	5.2	----	6.1	6.5	----	----	7.5	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3	

[4]クレアチニン 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
01002	008	21	1.07	1.63	----	----	3.13	3.73	----	4.87	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	21	----	1.63	2.19	----	3.02	----	4.21	4.71	--	A	A	--	B	--	A	A	93.3	66.7	80.0
01019	052	21	----	1.62	2.18	2.73	----	3.67	----	4.81	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	21	1.07	----	2.18	2.73	----	----	4.25	4.82	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	21	----	1.66	2.21	----	3.14	----	4.28	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02003	110	21	----	1.7	2.24	----	3.16	----	4.31	4.84	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	21	1.12	1.65	----	----	3.15	3.71	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	21	1.06	----	2.16	2.69	----	----	4.17	4.72	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
04006	185	21	1.07	----	2.15	2.7	----	----	4.18	4.71	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
04012	002	21	1.06	----	2.15	----	3.07	3.61	4.19	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
06001	136	21	----	1.62	2.18	2.74	----	3.69	----	4.85	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	21	1.1	----	2.21	----	3.18	3.74	4.32	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
07004	062	21	1.12	----	2.23	2.8	----	----	4.3	4.85	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	21	----	1.67	2.21	2.75	----	3.7	----	4.85	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08002	008	21	1.1	1.64	----	2.78	----	3.7	4.27	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	21	1.13	----	2.24	2.76	----	----	4.28	4.85	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	21	1.1	----	2.18	2.74	----	----	4.23	4.77	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	21	1.12	1.67	----	2.78	----	3.7	4.29	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09009	008	21	1.1	----	2.18	2.74	----	----	4.25	4.82	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	21	1.12	----	2.23	2.76	----	----	4.26	4.83	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	21	----	1.65	2.23	----	3.15	----	4.26	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	21	1.11	1.65	----	----	3.18	3.71	----	4.86	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	21	----	1.65	2.23	----	3.15	----	4.26	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	21	1.12	----	2.23	2.75	----	----	4.26	4.81	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	21	1.11	1.65	----	2.78	----	3.72	4.3	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11004	160	21	1.1	1.66	----	2.77	----	3.72	4.3	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11005	175	21	1.11	----	2.19	2.79	----	----	4.3	4.84	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11007	008	21	----	1.66	2.2	----	3.16	----	4.3	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	21	----	1.65	2.22	----	3.16	----	4.29	4.85	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	21	1.08	1.62	----	----	3.12	3.67	----	4.78	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	21	1.11	1.67	----	----	3.17	3.76	----	4.91	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12006	008	21	1.08	----	2.2	2.74	----	----	4.27	4.84	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	21	1.09	1.64	----	----	3.14	3.71	----	4.85	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	21	1.11	----	2.23	----	3.16	3.71	4.29	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	21	1.1	----	2.21	2.79	----	----	4.3	4.81	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	21	----	1.63	2.2	2.74	----	3.69	----	4.82	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	21	1.13	----	2.23	2.77	----	----	4.27	4.84	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12015	041	21	1.08	1.62	----	----	3.09	3.66	----	4.76	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12018	041	21	1.08	----	2.15	----	3.08	3.63	4.21	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	21	1.09	1.64	----	2.73	----	3.69	4.24	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13004	068	21	1.13	----	2.23	----	3.15	3.72	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	21	1.12	----	2.23	2.76	----	----	4.26	4.81	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	21	1.12	1.65	----	2.75	----	3.71	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.71	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	21	1.12	1.65	----	----	3.15	3.71	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	21	1.11	----	2.2	2.75	----	----	4.27	4.86	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	21	1.11	1.66	----	2.77	----	3.71	4.29	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	21	----	1.65	2.21	----	3.13	----	4.25	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	21	1.1	1.63	----	2.77	----	3.7	4.29	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	21	4.78	4.22	----	2.18	----	2.73	1.08	----	D	D	--	D	--	D	D	--	0.0	0.0	0.0
13021	002	21	----	1.65	2.23	----	3.15	----	4.26	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	21	----	1.63	2.19	2.73	----	3.69	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	21	----	1.65	2.23	2.76	----	3.71	----	4.81	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	21	1.08	----	2.17	----	3.09	3.65	4.22	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13033	087	21	1.07	1.63	----	2.74	----	3.69	4.25	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	21	1.1	----	2.18	2.74	----	----	4.25	4.81	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	21	1.11	1.67	----	----	3.18	3.77	----	4.91	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13038	002	21	1.12	1.65	----	2.75	----	3.71	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[4]クレアチニン 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13039	002	21	1.12	1.65	----	----	3.15	3.71	----	4.81	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	21	1.12	----	2.23	2.75	----	----	4.26	4.83	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	21	1.12	----	2.23	2.75	----	----	4.26	4.81	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	21	1.07	----	2.21	----	3.13	3.68	4.25	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	21	1.09	1.64	----	----	3.1	3.68	----	4.84	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13055	002	21	1.12	1.65	----	2.76	----	3.71	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	21	1.06	----	2.13	----	3.06	3.61	4.13	----	A	--	B	--	A	A	A	--	93.3	60.0	76.7
13063	050	21	1.09	----	2.17	2.75	----	----	4.22	4.78	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13067	008	21	1.07	1.66	----	----	3.14	3.7	----	4.81	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	21	1.14	----	2.25	2.76	----	----	4.28	4.84	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13077	008	21	----	1.64	2.19	----	3.15	----	4.3	4.84	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	21	1.11	1.67	----	2.8	----	3.75	4.35	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13079	041	21	----	1.63	2.17	2.73	----	3.66	----	4.77	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13080	008	21	1.07	----	2.18	----	3.11	3.69	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13082	008	21	1.1	1.63	----	2.77	----	3.67	4.25	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	21	1.1	1.62	----	----	3.12	3.68	----	4.82	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13088	154	21	1.1	1.65	----	----	3.14	3.68	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13089	002	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.71	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	21	1.09	1.63	----	2.73	----	3.68	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.71	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	21	----	1.64	2.19	2.75	----	3.68	----	4.77	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	21	1.09	----	2.19	----	3.12	3.7	4.25	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13109	008	21	----	1.64	2.21	----	3.13	----	4.28	4.82	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	21	----	1.62	2.17	2.71	----	3.66	----	4.77	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13123	008	21	----	1.65	2.2	----	3.14	----	4.28	4.84	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	21	1.07	1.63	----	----	3.11	3.67	----	4.81	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	21	----	1.62	2.19	2.75	----	3.68	----	4.81	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	21	----	1.7	2.26	----	3.21	----	4.3	4.86	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	21	----	1.67	2.22	----	3.18	----	4.35	4.91	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
14007	041	21	----	1.62	2.17	2.73	----	3.65	----	4.76	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	21	----	1.65	2.21	----	3.15	----	4.3	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	21	----	1.67	2.23	2.8	----	3.77	----	4.91	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14023	006	21	1.11	1.67	----	----	3.18	3.76	----	4.91	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14024	008	21	1.08	1.63	----	----	3.12	3.69	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14025	006	21	----	1.67	2.22	2.79	----	3.77	----	4.91	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
14026	008	21	1.08	----	2.2	----	3.13	3.69	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14029	041	21	----	1.62	2.17	2.72	----	3.65	----	4.79	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14034	006	21	1.11	----	2.23	2.79	----	----	4.33	4.91	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15007	008	21	1.1	1.65	----	----	3.11	3.68	----	4.84	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	21	1.12	1.65	----	2.75	----	3.71	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.71	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	21	----	1.62	2.18	2.73	----	3.68	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16005	006	21	1.11	----	2.23	----	3.17	3.76	4.35	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16008	089	21	1.07	----	2.18	2.76	----	----	4.31	4.88	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
17003	190	21	1.11	1.67	----	----	3.17	3.73	----	4.85	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	21	1.1	----	2.21	----	3.18	3.74	4.3	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	21	1.11	----	2.22	2.8	----	----	4.33	4.91	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20002	128	21	1.12	----	2.23	----	3.16	3.69	4.27	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	21	1.1	----	2.18	2.73	----	----	4.22	4.77	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	21	----	1.64	2.18	2.73	----	3.66	----	4.77	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	21	1.12	1.67	----	2.78	----	3.69	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	21	1.1	----	2.17	----	3.11	3.63	4.21	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22010	006	21	1.11	----	2.22	----	3.18	3.77	4.35	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
22015	008	21	----	1.65	2.21	----	3.17	----	4.31	4.86	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	21	1.11	1.67	----	----	3.18	3.76	----	4.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23001	057	21	----	1.66	2.2	----	3.12	----	4.23	4.78	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23002	172	21	1.13	1.68	----	----	3.16	3.7	----	4.86	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	21	1.12	1.65	----	2.75	----	3.71	4.26	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[4] クレアチニン 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	
23006	088	21	1.11	1.66	----	2.77	----	3.71	4.28	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	21	1.1	----	2.21	----	3.12	3.68	4.24	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23009	088	21	1.11	1.66	----	2.77	----	3.71	4.28	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	21	1.15	----	2.24	----	3.15	3.69	4.24	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23018	008	21	1.08	----	2.74	----	3.1	3.69	4.27	----	A	--	D	--	A	A	A	--	80.0	13.3	46.7
23022	006	21	1.11	1.67	----	----	3.18	3.77	----	4.91	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23026	088	21	1.11	----	2.23	----	3.16	3.71	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	21	1.11	----	2.23	----	3.16	3.71	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	21	1.16	----	2.25	----	3.13	3.68	4.22	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	86.7	90.0
23037	088	21	1.11	1.66	----	----	3.16	3.71	----	4.89	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23038	169	21	----	1.64	2.21	2.74	----	3.69	----	4.81	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23039	169	21	1.11	1.65	----	2.72	----	3.67	4.22	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	21	1.11	1.66	----	2.76	----	3.73	4.27	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	21	1.13	1.66	----	----	3.15	3.72	----	4.83	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	21	1.1	----	2.23	2.73	----	----	4.23	4.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	21	----	1.64	2.2	2.76	----	3.71	----	4.85	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	21	1.09	----	2.2	----	3.14	3.71	4.3	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	21	1.11	----	2.22	----	3.15	3.72	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	21	----	1.63	2.2	----	3.14	----	4.25	4.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	21	1.1	1.63	----	----	3.09	3.65	----	4.77	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	21	1.13	----	2.23	2.76	----	----	4.27	4.83	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	21	----	1.62	2.19	2.74	----	3.7	----	4.84	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	21	1.07	----	2.18	2.73	----	----	4.26	4.82	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27003	068	21	1.13	1.66	----	2.76	----	3.72	4.27	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	21	1.09	----	2.2	----	3.14	3.71	4.3	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	21	----	1.66	2.23	----	3.15	----	4.27	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	21	1.1	----	2.17	----	3.09	3.66	4.22	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27009	008	21	----	1.65	2.19	2.77	----	3.72	----	4.85	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	21	1.12	1.66	----	2.78	----	3.71	4.29	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	21	1.09	----	2.2	2.76	----	----	4.3	4.85	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	21	----	1.63	2.18	----	3.13	----	4.28	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27031	090	21	----	1.63	2.18	----	3.13	----	4.27	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27037	068	21	1.13	----	2.23	2.76	----	----	4.27	4.83	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	21	1.1	1.63	----	2.74	----	3.65	4.21	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	21	----	1.62	2.2	2.73	----	3.69	----	4.82	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	21	1.1	----	2.21	----	3.13	3.68	4.25	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27045	068	21	1.13	----	2.23	----	3.15	3.72	4.27	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	21	----	1.66	2.23	----	3.15	----	4.27	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	21	----	1.65	2.23	2.76	----	3.71	----	4.81	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	21	----	1.66	2.23	2.76	----	3.72	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	21	1.07	----	2.18	2.75	----	----	4.26	4.82	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28007	197	21	1.12	1.66	----	2.77	----	3.72	4.27	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28008	090	21	1.07	----	2.17	2.75	----	----	4.27	4.82	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28014	008	21	1.11	1.65	----	2.77	----	3.72	4.31	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	21	1.12	----	2.23	----	3.15	3.71	4.26	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	21	----	1.65	2.21	----	3.13	----	4.25	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	21	----	1.65	2.23	2.76	----	3.71	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	21	----	1.65	2.23	----	3.15	----	4.26	4.83	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	21	1.11	----	2.22	2.79	----	----	4.33	4.91	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28029	068	21	1.13	1.66	----	----	3.15	3.72	----	4.82	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	21	1.11	----	2.22	----	3.15	3.72	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	21	1.09	1.64	----	----	3.16	3.71	----	4.86	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
31003	008	21	----	1.64	2.21	2.78	----	3.7	----	4.88	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	21	1.13	1.65	----	2.77	----	3.68	4.27	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33004	008	21	1.1	1.65	----	2.77	----	3.73	4.33	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33014	112	21	----	1.62	2.18	----	3.1	----	4.21	4.78	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34001	008	21	1.1	1.65	----	----	3.18	3.74	----	4.88	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	21	----	1.65	2.21	2.78	----	3.74	----	4.84	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[4]クレアチニン 外部施設測定結果一覧

施設		外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点	
34003	008	21	1.09	----	2.2	2.74	----	----	4.27	4.86	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
34005	112	21	1.09	----	2.19	----	3.1	3.67	4.22	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
34013	112	21	----	1.64	2.18	2.72	----	3.66	----	4.77	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
35006	109	21	----	1.65	2.23	----	3.13	----	4.22	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
36002	161	21	----	1.63	2.19	----	3.16	----	4.26	4.84	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
37001	058	21	----	1.62	2.17	2.74	----	3.69	----	4.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
37004	008	21	1.07	1.62	----	2.73	----	3.67	4.27	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
38006	054	21	1.11	1.64	----	----	3.11	3.73	----	4.87	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7	
38008	006	21	1.11	1.67	----	2.8	----	3.77	4.35	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
40001	193	21	----	1.65	2.21	2.78	----	3.73	----	4.87	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40002	193	21	----	1.65	2.2	----	3.16	----	4.29	4.86	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
40004	165	21	1.07	----	2.18	----	3.08	3.62	4.24	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
40006	165	21	1.1	1.65	----	2.71	----	3.66	4.21	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
40013	109	21	----	1.66	2.25	2.77	----	3.67	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7	
40015	008	21	----	1.63	2.19	----	3.12	----	4.25	4.81	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
40022	165	21	----	1.62	2.17	2.71	----	3.62	----	4.75	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40025	109	21	1.13	1.65	----	2.75	----	3.67	4.2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7	
40026	165	21	----	1.62	2.19	2.74	----	3.65	----	4.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40028	068	21	----	1.66	2.23	2.76	----	3.72	----	4.83	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
40029	069	21	----	1.65	2.21	----	3.16	----	4.3	4.87	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
40030	109	21	----	1.66	2.24	2.75	----	3.66	----	4.82	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7	
40031	151	21	----	1.73	2.27	----	3.18	----	4.32	4.79	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	80.0	86.7	
40034	193	21	1.09	----	2.21	----	3.16	3.73	4.3	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
40035	165	21	1.09	----	2.2	2.74	----	----	4.19	4.78	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
41001	073	21	1.1	1.65	----	----	3.1	3.66	----	4.78	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
41002	008	21	1.11	----	2.22	----	3.14	3.69	4.28	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
42001	165	21	1.08	1.65	----	----	3.12	3.64	----	4.76	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
42002	008	21	1.1	----	2.2	----	3.13	3.72	4.32	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
43004	146	21	1.13	1.68	----	2.78	----	3.72	4.29	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
43007	095	21	1.1	1.66	----	----	3.11	3.67	----	4.77	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0	
44002	193	21	1.09	1.66	----	2.79	----	3.73	4.32	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0	
46001	193	21	1.09	----	2.2	2.77	----	----	4.29	4.86	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0	
47002	109	21	1.12	----	2.23	2.75	----	----	4.24	4.82	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0	

[5]AST 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	11	20	38	----	----	86	104	----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	11	----	39	57	----	86	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01019	052	11	----	38	56	74	----	104	----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	11	20	----	56	74	----	----	123	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	11	----	37	55	----	86	----	122	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02003	110	11	----	38	56	----	87	----	124	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	11	21	----	57	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04006	185	11	21	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04012	002	11	21	----	57	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
06001	136	11	----	38	56	74	----	106	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
07004	062	11	20	----	56	74	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	11	----	38	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08002	008	11	20	38	----	75	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	11	20	----	56	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	11	21	----	57	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	11	20	39	----	75	----	105	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09009	008	11	20	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	11	20	----	56	74	----	----	123	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	11	----	38	56	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	11	----	38	56	----	87	----	122	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	11	20	----	56	74	----	----	122	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	11	19	38	----	74	----	105	123	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	100.0	96.7
11004	160	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11005	175	11	19	----	54	72	----	----	122	137	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	60.0	76.7
11007	008	11	----	37	56	----	86	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	11	----	39	57	----	87	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	11	20	39	----	----	87	106	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	11	20	39	----	----	88	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
12006	008	11	20	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	11	20	38	----	----	86	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	11	20	----	57	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	11	----	38	57	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	11	20	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12015	041	11	21	40	----	----	88	107	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	93.3	96.7
12018	041	11	21	----	58	----	88	107	125	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	11	21	39	----	75	----	105	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13004	068	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	11	20	----	56	74	----	----	122	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	11	20	38	----	74	----	105	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	11	20	----	56	74	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	11	20	38	----	75	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	11	----	38	56	----	86	----	122	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	11	20	38	----	75	----	105	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	11	144	126	----	58	----	76	22	----	D	D	--	D	--	D	D	--	0.0	0.0	0.0
13021	002	11	----	38	56	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	11	----	38	55	74	----	105	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	11	----	38	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	11	21	----	58	----	89	107	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
13033	087	11	21	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	11	20	----	56	74	----	----	123	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	11	21	39	----	----	88	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13038	002	11	20	38	----	74	----	105	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[5]AST 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13039	002	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	11	20	----	56	74	----	----	123	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	11	20	----	56	74	----	----	122	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	11	20	----	56	----	86	104	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	11	19	38	----	----	86	104	----	141	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
13055	002	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	11	21	----	57	----	88	106	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13063	050	11	21	----	57	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13067	008	11	20	37	----	----	87	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	11	20	----	55	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13077	008	11	----	37	55	----	85	----	122	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	11	20	39	----	75	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13079	041	11	----	40	58	76	----	107	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13080	008	11	19	----	56	----	86	104	123	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	100.0	96.7
13082	008	11	20	38	----	74	----	104	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	11	19	37	----	----	85	103	----	140	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	93.3	93.3
13088	154	11	20	38	----	----	87	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13089	002	11	20	----	56	----	87	105	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	11	20	37	----	74	----	104	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	11	----	39	57	75	----	106	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	11	20	----	56	----	86	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13109	008	11	----	37	56	----	86	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	11	----	40	58	76	----	107	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13123	008	11	----	38	56	----	85	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	11	20	38	----	----	87	104	----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	11	----	38	56	74	----	104	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	11	----	38	56	----	87	----	124	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	11	----	39	56	----	87	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14007	041	11	----	40	58	76	----	107	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	11	----	38	56	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	11	----	39	57	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14023	006	11	21	39	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14024	008	11	19	37	----	----	86	104	----	140	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100.0	96.7
14025	006	11	----	39	56	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14026	008	11	20	----	56	----	87	104	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14029	041	11	----	40	58	76	----	107	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
14034	006	11	20	----	56	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15007	008	11	20	38	----	----	87	106	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	11	----	39	56	74	----	104	----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
16005	006	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16008	089	11	20	----	55	74	----	----	123	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17003	190	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	11	20	----	57	75	----	----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20002	128	11	20	----	56	----	86	105	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	11	21	----	57	75	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	11	----	39	57	75	----	106	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	11	21	----	57	----	86	106	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22010	006	11	21	----	56	----	88	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22015	008	11	----	38	56	----	86	----	122	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	11	20	39	----	----	88	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23001	057	11	----	39	56	----	87	----	124	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23002	172	11	20	38	----	----	86	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[5]AST 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
23006	088	11	20	38	----	75	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	11	20	----	56	----	86	104	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23009	088	11	20	38	----	75	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	11	20	----	55	----	85	104	121	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23018	008	11	20	----	56	----	86	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23022	006	11	21	39	----	----	87	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23026	088	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	11	20	----	56	----	86	104	120	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	80.0	90.0
23037	088	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23038	169	11	----	37	57	74	----	103	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
23039	169	11	21	38	----	74	----	104	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	11	20	38	----	75	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	11	20	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	11	21	----	56	75	----	----	123	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	11	----	38	56	74	----	105	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	11	20	----	56	----	86	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	11	----	38	56	----	87	----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	11	21	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	11	20	----	56	75	----	----	123	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	11	----	39	57	75	----	107	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	11	19	----	56	73	----	----	123	141	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
27003	068	11	20	38	----	75	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	11	20	----	56	----	86	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	11	----	38	56	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	11	21	----	57	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27009	008	11	----	37	56	74	----	104	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	11	20	----	56	74	----	----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	11	----	40	58	----	89	----	126	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
27031	090	11	----	40	58	----	90	----	126	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
27037	068	11	20	----	56	75	----	----	123	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	11	21	39	----	75	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	11	----	39	57	76	----	107	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	11	20	----	57	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27045	068	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	11	----	38	56	----	87	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	11	----	38	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	11	----	38	56	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	11	21	----	58	77	----	----	126	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
28007	197	11	20	37	----	73	----	103	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28008	090	11	21	----	58	77	----	----	126	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
28014	008	11	20	38	----	73	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	11	20	----	56	----	87	105	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	11	----	38	56	----	87	----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	11	----	38	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	11	----	38	56	----	87	----	122	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	11	20	----	57	75	----	----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28029	068	11	20	38	----	----	87	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	11	20	38	----	----	86	104	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
31003	008	11	----	38	56	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	11	21	39	----	76	----	106	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33004	008	11	20	38	----	74	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33014	112	11	----	38	57	----	88	----	123	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34001	008	11	20	38	----	----	86	105	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	11	----	38	56	74	----	105	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[5]AST 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34003	008	11	20	----	56	74	----	----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34005	112	11	20	----	56	----	86	104	122	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34013	112	11	----	38	56	74	----	104	----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
35006	109	11	----	37	55	----	85	----	122	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
36002	161	11	----	38	57	----	87	----	124	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
37001	058	11	----	37	56	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37004	008	11	19	37	----	73	----	103	122	----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	93.3	93.3
38006	054	11	20	39	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38008	006	11	20	39	----	75	----	105	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40001	193	11	----	38	57	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40002	193	11	----	38	56	----	86	----	124	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40004	165	11	21	----	57	----	86	106	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40006	165	11	21	38	----	75	----	105	123	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40013	109	11	----	37	55	74	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40015	008	11	----	37	55	----	86	----	122	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40022	165	11	----	39	57	75	----	106	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40025	109	11	20	38	----	74	----	104	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40026	165	11	----	38	57	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40028	068	11	----	38	56	75	----	105	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40029	069	11	----	38	56	----	87	----	124	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40030	109	11	----	37	55	74	----	104	----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40031	151	11	----	38	56	----	87	----	125	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40034	193	11	20	----	56	----	87	105	124	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40035	165	11	21	----	57	75	----	----	123	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
41001	073	11	19	37	----	----	85	103	----	139	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	93.3	93.3
41002	008	11	20	----	56	----	86	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
42001	165	11	21	38	----	----	87	105	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
42002	008	11	20	----	56	----	87	105	123	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43004	146	11	20	38	----	74	----	105	122	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43007	095	11	21	39	----	----	87	104	----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
44002	193	11	20	38	----	75	----	106	124	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
46001	193	11	20	----	57	74	----	----	123	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47002	109	11	20	----	56	74	----	----	122	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[6]ALT 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
01002	008	11	16	31	----	----	72	87	----	119	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	11	----	32	47	----	74	----	106	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01019	052	11	----	32	47	62	----	88	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	11	16	----	47	62	----	----	103	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	11	----	31	47	----	73	----	104	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
02003	110	11	----	32	48	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	11	17	32	----	----	74	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	11	18	----	48	64	----	----	107	122	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
04006	185	11	17	----	48	64	----	----	105	123	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
04012	002	11	18	----	48	----	75	90	107	----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	100.0	96.7
06001	136	11	----	32	48	63	----	89	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	11	17	----	48	----	74	90	107	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
07004	062	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	11	----	32	47	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08002	008	11	17	33	----	64	----	91	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	11	17	----	46	62	----	----	104	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	11	16	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09009	008	11	16	----	47	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	11	17	----	48	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	11	17	31	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	11	17	----	48	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	11	16	32	----	63	----	91	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11004	160	11	17	33	----	63	----	91	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11005	175	11	16	----	46	63	----	----	104	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11007	008	11	----	32	47	----	74	----	106	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	11	----	32	47	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	11	17	32	----	----	74	90	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12006	008	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	11	17	32	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	11	17	----	47	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	11	16	----	47	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	11	----	32	48	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	11	17	----	46	61	----	----	104	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
12015	041	11	17	31	----	----	72	87	----	117	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
12018	041	11	17	----	46	----	71	88	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	11	17	32	----	63	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13004	068	11	17	----	48	----	74	89	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	11	17	----	48	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	11	17	32	----	----	74	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	11	17	----	48	64	----	----	106	122	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	11	17	32	----	63	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	11	----	32	48	----	75	----	106	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	11	17	33	----	64	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	11	119	103	----	47	----	62	16	----	D	D	--	D	--	D	D	--	0.0	0.0	0.0
13021	002	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	11	----	33	48	63	----	90	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	11	----	32	48	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	11	17	----	47	----	73	88	103	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13033	087	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	11	17	----	48	63	----	----	105	122	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	11	17	33	----	----	75	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13038	002	11	17	32	----	63	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[6]ALT 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13039	002	11	17	32	----	----	74	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	11	17	----	48	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	11	17	----	48	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	11	16	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	11	16	31	----	----	74	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13055	002	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	11	17	----	48	----	75	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13063	050	11	17	----	48	63	----	----	107	122	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13067	008	11	16	32	----	----	74	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	11	17	----	46	62	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	93.3	96.7
13077	008	11	----	31	47	----	73	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	11	17	33	----	64	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13079	041	11	----	32	47	62	----	87	----	118	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13080	008	11	16	----	47	----	73	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13082	008	11	17	33	----	63	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	11	16	31	----	----	72	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13088	154	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13089	002	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	11	16	32	----	64	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	11	----	33	48	63	----	90	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13109	008	11	----	33	48	----	74	----	107	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	11	----	31	47	62	----	88	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13123	008	11	----	33	48	----	74	----	106	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	11	17	32	----	----	74	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	11	----	32	48	64	----	90	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	11	----	32	47	----	72	----	104	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	11	----	33	48	----	74	----	105	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14007	041	11	----	31	46	61	----	87	----	118	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	11	----	32	47	----	73	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	11	----	33	48	64	----	90	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14023	006	11	17	33	----	----	75	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14024	008	11	16	32	----	----	73	90	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14025	006	11	----	33	48	64	----	90	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14026	008	11	16	----	48	----	74	91	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14029	041	11	----	32	47	62	----	88	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14034	006	11	17	----	48	64	----	----	106	122	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15007	008	11	17	33	----	----	74	91	----	123	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	11	17	32	----	63	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	11	----	32	47	63	----	89	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16005	006	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16008	089	11	17	----	47	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17003	190	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	11	17	----	47	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	11	17	----	48	63	----	----	106	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20002	128	11	17	----	48	----	73	88	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	11	----	32	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	11	16	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22010	006	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22015	008	11	----	32	47	----	74	----	106	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23001	057	11	----	32	49	----	74	----	106	122	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23002	172	11	16	32	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	11	17	32	----	63	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[6]ALT 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
23006	088	11	17	32	----	64	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23009	088	11	17	32	----	64	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	11	17	----	47	----	73	88	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23018	008	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23022	006	11	17	32	----	----	74	90	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23026	088	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	11	17	----	47	----	73	89	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23037	088	11	17	32	----	----	74	90	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23038	169	11	----	32	48	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23039	169	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	11	17	33	----	64	----	91	107	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	11	17	32	----	----	74	89	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	11	17	----	47	63	----	----	106	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	11	----	32	47	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	11	17	----	47	----	73	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	11	17	----	47	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	11	17	33	----	----	74	90	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	11	----	33	48	63	----	90	----	122	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	11	16	----	47	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27003	068	11	17	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	11	17	----	47	----	73	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	11	----	32	48	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27009	008	11	----	32	47	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	11	16	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	11	17	----	47	63	----	----	105	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	11	----	32	47	----	73	----	103	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27031	090	11	----	32	47	----	73	----	103	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27037	068	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	11	17	33	----	63	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	11	----	32	48	63	----	90	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27045	068	11	17	----	48	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	11	----	32	48	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	11	----	32	48	63	----	90	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	11	----	32	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	11	16	----	47	63	----	----	103	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28007	197	11	17	32	----	62	----	88	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28008	090	11	16	----	47	63	----	----	104	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28014	008	11	16	33	----	63	----	91	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	11	----	32	48	63	----	90	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28029	068	11	17	32	----	----	74	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	11	17	----	47	----	74	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	11	17	32	----	----	73	90	----	121	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
31003	008	11	----	32	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	11	17	32	----	63	----	88	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33004	008	11	17	32	----	63	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33014	112	11	----	32	48	----	74	----	105	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34001	008	11	16	32	----	----	74	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	11	----	32	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[6]ALT 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34003	008	11	17	----	48	63	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34005	112	11	17	----	48	----	73	89	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34013	112	11	----	32	48	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
35006	109	11	----	32	48	----	73	----	104	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
36002	161	11	----	32	48	----	74	----	105	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
37001	058	11	----	32	47	63	----	89	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37004	008	11	16	32	----	63	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
38006	054	11	17	32	----	----	72	89	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
38008	006	11	17	33	----	64	----	90	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40001	193	11	----	32	47	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40002	193	11	----	32	47	----	73	----	104	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40004	165	11	17	----	48	----	74	90	106	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40006	165	11	17	33	----	64	----	89	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40013	109	11	----	32	47	62	----	89	----	119	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40015	008	11	----	31	47	----	73	----	103	120	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40022	165	11	----	33	48	64	----	91	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40025	109	11	17	31	----	62	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40026	165	11	----	33	49	64	----	90	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40028	068	11	----	32	48	63	----	89	----	121	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40029	069	11	----	31	47	----	73	----	104	119	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40030	109	11	----	32	47	63	----	89	----	120	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40031	151	11	----	32	48	----	74	----	106	121	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40034	193	11	16	----	47	----	73	88	104	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40035	165	11	17	----	49	64	----	----	105	121	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
41001	073	11	17	32	----	----	73	89	----	120	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
41002	008	11	17	----	47	----	75	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
42001	165	11	17	33	----	----	75	90	----	122	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
42002	008	11	17	----	48	----	74	90	105	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43004	146	11	17	32	----	64	----	90	106	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43007	095	11	19	33	----	----	73	88	----	119	C	A	--	--	A	A	--	A	86.7	73.3	80.0
44002	193	11	17	32	----	64	----	89	105	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
46001	193	11	17	----	47	62	----	----	104	119	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47002	109	11	17	----	47	63	----	----	106	120	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[7] γ -GT 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	11	29	46	----	----	92	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	11	----	46	64	----	92	----	127	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
01019	052	11	----	47	64	82	----	111	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	11	29	----	64	82	----	----	128	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	11	----	47	64	----	93	----	127	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02003	110	11	----	47	65	----	95	----	130	146	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	11	30	----	65	81	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04006	185	11	30	----	65	81	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04012	002	11	30	----	64	----	92	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
06001	136	11	----	47	64	82	----	111	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	11	30	----	64	----	92	109	129	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
07004	062	11	30	----	64	81	----	----	128	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	11	----	47	65	82	----	112	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08002	008	11	29	47	----	81	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	11	30	----	63	81	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	11	29	----	64	81	----	----	126	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	11	30	47	----	81	----	109	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09009	008	11	29	----	64	80	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	11	30	----	64	82	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	11	----	47	64	----	93	----	128	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	11	30	----	64	82	----	----	128	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	11	29	47	----	82	----	110	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11004	160	11	30	48	----	83	----	112	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11005	175	11	29	----	63	81	----	----	126	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11007	008	11	----	47	64	----	93	----	129	146	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	11	----	47	64	----	92	----	127	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	11	29	46	----	----	91	109	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	11	29	46	----	----	92	109	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12006	008	11	29	----	64	81	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	11	29	47	----	----	93	111	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	11	29	----	64	82	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	11	----	47	64	81	----	109	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	11	30	----	64	81	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12015	041	11	29	45	----	----	91	108	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12018	041	11	29	----	63	----	90	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	11	30	47	----	81	----	111	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13004	068	11	30	----	64	----	93	109	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	11	30	----	64	82	----	----	128	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	11	30	47	----	82	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	11	29	----	64	81	----	----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	11	30	47	----	81	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	11	30	47	----	81	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	11	143	126	----	63	----	80	29	----	D	D	--	D	--	D	D	--	0.0	0.0	0.0
13021	002	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	11	----	47	64	81	----	110	----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	11	----	47	64	82	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	11	29	----	63	----	91	108	125	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13033	087	11	30	47	----	81	----	109	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	11	30	----	64	81	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	11	29	46	----	----	92	109	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13038	002	11	30	47	----	82	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[7] γ -GT 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
13039	002	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	11	30	----	64	82	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	11	30	----	64	82	----	----	128	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	11	29	----	63	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	11	30	47	----	----	93	110	----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13055	002	11	30	47	----	82	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13063	050	11	30	----	64	81	----	----	126	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13067	008	11	29	47	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	11	30	----	63	81	----	----	126	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13077	008	11	----	46	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	11	29	46	----	80	----	109	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13079	041	11	----	46	63	80	----	108	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13080	008	11	30	----	64	----	93	111	129	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13082	008	11	29	47	----	82	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	11	30	47	----	----	93	112	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13088	154	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13089	002	11	30	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	11	29	47	----	81	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	11	30	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	11	----	47	64	81	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	11	30	----	64	----	94	109	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
13109	008	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	11	----	45	63	80	----	109	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13123	008	11	----	46	64	----	93	----	127	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	11	29	47	----	----	93	111	----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	11	----	47	64	81	----	111	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	11	----	47	65	----	94	----	129	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	11	----	46	63	----	92	----	126	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14007	041	11	----	45	63	80	----	108	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	11	----	46	63	80	----	109	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14023	006	11	29	46	----	----	92	109	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14024	008	11	29	47	----	----	93	111	----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14025	006	11	----	46	63	80	----	109	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14026	008	11	29	----	65	----	92	111	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
14029	041	11	----	45	63	79	----	108	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14034	006	11	30	----	63	80	----	----	125	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15007	008	11	29	47	----	----	92	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	11	30	47	----	82	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	11	----	46	63	81	----	110	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16005	006	11	29	----	63	----	92	109	125	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16008	089	11	30	----	64	82	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17003	190	11	30	47	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	11	29	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	11	29	----	63	80	----	----	125	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20002	128	11	30	----	64	----	92	109	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	11	29	----	64	81	----	----	126	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	11	----	46	64	81	----	109	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	11	30	47	----	81	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	11	29	----	64	----	92	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22010	006	11	29	----	63	----	92	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22015	008	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	11	29	46	----	----	92	109	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23001	057	11	----	47	65	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23002	172	11	30	47	----	----	93	109	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	11	30	47	----	82	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[7] γ -GT 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23006	088	11	30	47	----	81	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	11	30	----	64	----	92	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23009	088	11	30	47	----	81	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	11	29	----	64	----	93	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23018	008	11	29	----	63	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23022	006	11	29	46	----	----	92	109	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23026	088	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	11	29	----	64	----	92	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23037	088	11	30	47	----	----	93	110	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23038	169	11	----	47	64	81	----	109	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23039	169	11	30	47	----	80	----	108	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	11	29	47	----	80	----	111	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	11	30	47	----	----	93	109	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	11	30	----	64	80	----	----	126	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	11	----	47	64	81	----	111	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	11	29	----	64	----	93	111	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	11	30	----	64	----	93	109	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	11	----	47	64	----	92	----	127	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	11	29	46	----	----	92	109	----	143	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	11	30	----	64	82	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	11	----	47	63	80	----	110	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	11	30	----	64	82	----	----	128	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27003	068	11	30	47	----	82	----	109	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	11	29	----	64	----	93	111	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	11	29	----	63	----	91	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27009	008	11	----	47	64	81	----	111	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	11	30	47	----	82	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	11	29	----	64	81	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	11	----	48	64	----	92	----	125	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	73.3	86.7
27031	090	11	----	47	64	----	91	----	124	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	73.3	86.7
27037	068	11	30	----	64	82	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	11	30	46	----	81	----	109	126	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	11	----	47	64	80	----	109	----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	11	30	----	64	----	93	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27045	068	11	30	----	64	----	93	109	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	11	----	47	64	82	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	11	----	47	64	82	----	109	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	11	30	----	64	80	----	----	124	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	73.3	86.7
28007	197	11	30	47	----	82	----	111	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28008	090	11	30	----	64	80	----	----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
28014	008	11	29	47	----	81	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	11	30	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	11	----	47	64	----	93	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	11	----	47	64	82	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	11	----	47	64	----	93	----	128	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	11	29	----	63	80	----	----	125	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28029	068	11	30	47	----	----	93	109	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	11	30	----	64	----	93	109	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	11	30	47	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
31003	008	11	----	47	64	81	----	111	----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	11	30	47	----	82	----	110	130	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
33004	008	11	30	47	----	81	----	111	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33014	112	11	----	48	66	----	94	----	130	148	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34001	008	11	29	47	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	11	----	47	64	81	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[7] γ -GT 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34003	008	11	30	----	64	81	----	----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34005	112	11	30	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34013	112	11	----	47	64	81	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
35006	109	11	----	47	64	----	92	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
36002	161	11	----	47	64	----	93	----	126	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
37001	058	11	----	46	63	81	----	110	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37004	008	11	29	47	----	81	----	110	128	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
38006	054	11	30	47	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38008	006	11	29	47	----	80	----	109	125	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40001	193	11	----	47	64	82	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40002	193	11	----	47	65	----	93	----	128	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40004	165	11	29	----	63	----	91	109	126	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40006	165	11	30	46	----	80	----	110	126	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40013	109	11	----	48	64	82	----	111	----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40015	008	11	----	47	64	----	92	----	127	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40022	165	11	----	46	63	80	----	109	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40025	109	11	31	48	----	63	----	111	128	----	A	A	--	D	--	A	A	--	80.0	40.0	60.0
40026	165	11	----	46	64	80	----	108	----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40028	068	11	----	47	64	82	----	109	----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40029	069	11	----	47	64	----	93	----	128	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40030	109	11	----	47	64	82	----	110	----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40031	151	11	----	47	64	----	93	----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40034	193	11	29	----	64	----	93	110	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40035	165	11	30	----	64	81	----	----	126	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
41001	073	11	30	47	----	----	92	109	----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
41002	008	11	30	----	64	----	92	110	127	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
42001	165	11	30	46	----	----	91	108	----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
42002	008	11	29	----	64	----	93	111	128	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43004	146	11	30	47	----	81	----	110	127	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43007	095	11	29	46	----	----	93	110	----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
44002	193	11	30	47	----	82	----	111	129	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
46001	193	11	30	----	64	81	----	----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47002	109	11	30	----	65	82	----	----	128	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[8]血糖 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
01002	008	21	94	109	-----	-----	153	170	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01007	130	21	-----	108	125	-----	153	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	73.3	86.7
01019	052	21	-----	109	126	142	-----	170	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
01027	052	21	93	-----	126	142	-----	-----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02001	008	21	-----	111	127	-----	155	-----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
02003	110	12	-----	110	125	-----	154	-----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
03004	002	21	93	109	-----	-----	153	169	-----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
04001	185	21	91	-----	124	140	-----	-----	184	200	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
04006	185	12	90	-----	123	139	-----	-----	182	198	B	--	B	B	--	--	B	B	66.7	73.3	70.0
04012	002	21	91	-----	123	-----	151	167	182	-----	A	--	B	--	A	A	B	--	86.7	86.7	86.7
06001	136	12	-----	109	125	142	-----	170	-----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
06004	008	21	94	-----	127	-----	155	172	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
07004	062	21	93	-----	126	143	-----	-----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
07007	174	21	-----	111	128	143	-----	172	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
08002	008	21	94	111	-----	144	-----	172	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
09004	075	21	93	-----	125	142	-----	-----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09007	168	21	94	-----	126	143	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09008	062	21	93	110	-----	142	-----	171	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
09009	008	21	94	-----	127	144	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09010	002	21	93	-----	126	142	-----	-----	186	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09011	002	21	-----	109	126	-----	153	-----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
09014	075	21	92	109	-----	-----	153	169	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
10001	002	21	-----	109	126	-----	153	-----	186	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
10002	002	21	93	-----	126	142	-----	-----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11002	008	21	94	111	-----	144	-----	172	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
11004	160	12	89	107	-----	140	-----	167	184	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
11005	175	21	93	-----	124	143	-----	-----	185	200	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
11007	008	21	-----	111	127	-----	155	-----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11021	176	21	-----	109	126	-----	154	-----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
11025	100	21	93	108	-----	-----	152	169	-----	200	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12003	006	21	93	110	-----	-----	153	170	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12006	008	21	94	-----	127	143	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12010	122	21	93	110	-----	-----	154	170	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12011	111	21	93	-----	126	-----	154	171	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
12012	008	21	94	-----	126	143	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12013	087	21	-----	109	126	142	-----	169	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12014	075	21	92	-----	125	142	-----	-----	185	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
12015	041	21	94	110	-----	-----	155	172	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
12018	041	21	94	-----	127	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13001	050	21	95	111	-----	144	-----	172	189	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	100.0	96.7
13004	068	21	92	-----	126	-----	154	170	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13005	002	21	93	-----	126	142	-----	-----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13006	002	21	93	109	-----	142	-----	169	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13007	002	21	93	-----	126	-----	153	169	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13008	002	21	93	109	-----	-----	153	169	-----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13010	008	21	94	-----	126	144	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13013	111	21	93	110	-----	143	-----	171	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13014	008	21	-----	110	127	-----	154	-----	187	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13015	008	21	94	110	-----	144	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13016	041	21	204	188	-----	127	-----	144	94	-----	D	D	--	D	--	D	D	--	0.0	0.0	0.0
13021	002	21	-----	109	126	-----	153	-----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13022	008	21	-----	111	127	143	-----	171	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13024	002	21	-----	109	126	142	-----	169	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13028	041	21	94	-----	127	-----	155	172	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13033	087	21	93	109	-----	142	-----	169	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13035	008	21	94	-----	127	143	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13036	006	21	93	110	-----	-----	153	170	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13038	002	21	93	109	-----	142	-----	169	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[8]血糖 外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13039	002	21	93	109	----	----	153	169	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13045	002	21	93	----	126	142	----	----	186	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13049	002	21	93	----	126	142	----	----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13051	008	21	94	----	127	----	155	172	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13054	008	21	94	110	----	----	154	171	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13055	002	21	93	109	----	142	----	169	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13056	012	21	94	----	126	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13063	050	21	95	----	127	144	----	----	189	205	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
13067	008	21	94	111	----	----	155	171	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13071	075	21	93	----	126	142	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13077	008	21	----	111	127	----	155	----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13078	006	21	93	110	----	142	----	170	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13079	041	21	----	110	127	144	----	171	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13080	008	21	94	----	126	----	154	171	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13082	008	21	94	110	----	144	----	171	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13083	008	21	94	110	----	----	154	170	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13088	154	21	93	109	----	----	153	169	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13089	002	21	93	----	126	----	153	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13090	008	21	94	111	----	144	----	171	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13101	002	21	93	----	126	----	153	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13107	050	21	----	110	126	143	----	171	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13108	008	21	94	----	126	----	154	171	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
13109	008	21	----	111	127	----	154	----	188	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
13115	041	21	----	110	127	143	----	171	----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
13123	008	21	----	111	127	----	155	----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14002	008	21	94	110	----	----	154	171	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14004	008	21	----	110	127	143	----	170	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14005	137	21	----	110	127	----	155	----	188	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14006	006	21	----	110	126	----	153	----	187	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14007	041	21	----	110	127	144	----	171	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14018	008	21	----	111	127	----	154	----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
14022	006	21	----	110	126	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14023	006	21	93	110	----	----	153	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14024	008	21	93	110	----	----	154	170	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14025	006	21	----	110	126	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14026	008	21	93	----	127	----	155	172	189	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
14029	041	21	----	110	127	144	----	172	----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
14034	006	21	93	----	126	142	----	----	187	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
15007	008	21	94	111	----	----	155	172	----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
15008	002	21	93	109	----	142	----	169	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
15010	002	21	93	----	126	----	153	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16004	171	21	----	109	125	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
16005	006	21	93	----	126	----	153	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
16008	089	21	94	----	127	144	----	----	189	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
17003	190	21	94	110	----	----	154	172	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
18003	008	21	94	----	127	----	155	172	189	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20001	006	21	93	----	126	142	----	----	187	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20002	128	21	93	----	126	----	153	170	185	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
20003	081	21	94	----	126	143	----	----	188	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
20004	081	21	----	110	126	143	----	171	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
21001	172	21	93	109	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22007	144	21	94	----	126	----	154	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22010	006	21	93	----	126	----	153	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
22015	008	21	----	111	127	----	155	----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
22019	006	21	93	110	----	----	153	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23001	057	21	----	109	125	----	153	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
23002	172	21	93	109	----	----	153	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23005	002	21	93	109	----	142	----	169	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0

[8]血糖 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測定値								試料NO別判定値								測定値 評価点	解析値 評価点	総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8			
23006	088	21	93	109	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23007	169	21	92	----	124	----	152	167	185	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23009	088	21	93	109	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23012	083	21	93	----	126	----	153	169	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23018	008	21	94	----	127	----	155	171	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23022	006	21	93	110	----	----	153	170	----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23026	088	21	93	----	126	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23030	088	21	93	----	126	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23032	083	21	92	----	126	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23037	088	21	93	109	----	----	153	170	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23038	169	21	----	108	125	141	----	168	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
23039	169	21	93	109	----	140	----	168	185	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23040	008	21	94	111	----	144	----	172	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
23042	068	21	92	109	----	----	154	170	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
24001	169	21	92	----	125	141	----	----	184	200	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
24002	122	21	----	110	126	143	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
25001	122	21	93	----	126	----	154	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
25002	126	21	93	----	126	----	153	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
26002	024	21	----	110	126	----	154	----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
26005	009	21	94	110	----	----	155	171	----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
26012	068	21	92	----	126	143	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27001	029	21	----	110	126	143	----	171	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27002	008	21	93	----	125	142	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27003	068	21	92	109	----	143	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27005	122	21	93	----	126	----	154	170	187	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27006	068	21	----	109	126	----	154	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27007	009	21	94	----	127	----	154	171	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27009	008	21	----	111	127	144	----	172	----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27010	094	21	93	110	----	142	----	169	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27018	060	21	93	----	126	143	----	----	187	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27023	090	21	----	109	125	----	153	----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27031	090	21	----	109	125	----	153	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27037	068	21	92	----	126	143	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27038	009	21	94	110	----	143	----	171	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27041	029	21	----	110	126	142	----	170	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27042	102	21	93	----	126	----	153	168	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27045	068	21	92	----	126	----	154	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
27048	068	21	----	109	126	----	154	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
27051	002	21	----	109	126	142	----	169	----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
27052	068	21	----	109	126	143	----	170	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28001	090	21	93	----	125	142	----	----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28007	197	12	92	109	----	140	----	168	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	93.3	96.7
28008	090	21	93	----	125	142	----	----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28014	008	21	94	111	----	144	----	171	189	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28015	002	21	93	----	126	----	153	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
28018	102	21	----	108	126	----	152	----	185	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28019	002	21	----	109	126	142	----	169	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
28022	198	21	----	109	126	----	153	----	186	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28024	006	21	93	----	126	142	----	----	187	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
28029	068	21	92	109	----	----	154	170	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
30006	173	21	93	----	126	----	153	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
31002	008	21	93	110	----	----	155	171	----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
31003	008	21	----	110	126	143	----	171	----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
33002	065	21	93	109	----	143	----	169	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
33004	008	21	93	110	----	143	----	171	189	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3
33014	112	21	----	110	126	----	154	----	187	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
34001	008	21	94	111	----	----	155	172	----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
34002	008	21	----	111	126	143	----	172	----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0

[8]血糖 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34003	008	21	93	----	126	143	----	----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
34005	112	21	93	----	126	----	154	169	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
34013	112	21	----	109	126	143	----	170	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
35006	109	21	----	109	124	----	152	----	185	199	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
36002	161	21	----	109	125	----	153	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
37001	058	21	----	109	126	142	----	170	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
37004	008	21	93	109	----	142	----	170	186	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
38006	054	21	92	109	----	----	154	169	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
38008	006	21	93	110	----	142	----	170	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40001	193	21	----	110	127	143	----	172	----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40002	193	21	----	110	127	----	155	----	188	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40004	165	21	94	----	127	----	156	170	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40006	165	21	94	110	----	143	----	172	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40013	109	21	----	108	125	141	----	169	----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40015	008	21	----	109	125	----	154	----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40022	165	21	----	111	128	145	----	172	----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40025	109	21	93	109	----	141	----	169	185	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40026	165	21	----	110	127	144	----	171	----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40028	068	21	----	109	126	143	----	170	----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40029	069	21	----	111	127	----	154	----	189	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	100.0	100.0
40030	109	21	----	108	125	140	----	168	----	200	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	100.0	100.0
40031	151	21	----	110	127	----	155	----	189	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
40034	193	21	94	----	127	----	155	171	188	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
40035	165	21	95	----	127	143	----	----	188	206	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	93.3	93.3
41001	073	21	92	109	----	----	153	169	----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
41002	008	21	93	----	125	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
42001	165	21	93	110	----	----	155	172	----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	100.0	100.0
42002	008	21	93	----	125	----	153	170	186	----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43004	146	21	94	110	----	143	----	171	187	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
43007	095	21	95	112	----	----	156	173	----	204	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	86.7	86.7
44002	193	21	94	110	----	143	----	171	188	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	100.0	100.0
46001	193	21	94	----	127	144	----	----	188	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0
47002	109	21	92	----	125	141	----	----	184	200	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	100.0	100.0

[9]HDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01002	008	01-1201	36	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
01007	130	01-1201	36	50	----	54	----	A	A	--	--	--	100.0
01019	052	01-1201	35	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	01-1201	35	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
02001	008	01-1201	35	----	58	53	----	A	--	A	--	--	100.0
02003	110	01-1201	36	51	----	----	36	A	A	--	--	--	100.0
03004	002	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
04001	185	01-0403	32	45	----	----	32	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	01-0403	31	----	48	----	32	B	--	C	--	--	57.1
04012	002	01-0403	32	45	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
06001	136	01-1201	35	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
06004	008	01-1201	36	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	01-1201	----	50	56	----	35	--	A	A	--	--	100.0
07007	174	01-0403	----	44	50	51	----	--	A	A	--	--	100.0
08002	008	01-1201	----	52	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
09004	075	01-0403	33	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
09007	168	01-1201	35	----	56	53	----	A	--	A	--	--	100.0
09008	062	01-1201	----	51	56	53	----	--	A	A	--	--	100.0
09009	008	01-1201	35	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
09010	002	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
09011	002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	01-0403	33	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
10002	002	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	01-1201	----	52	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
11004	160	01-0403	32	44	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
11005	175	01-0403	----	45	49	----	33	--	A	B	--	--	92.9
11007	008	01-1201	----	51	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
11021	176	01-0403	32	----	51	51	----	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	01-0403	31	43	----	----	30	B	B	--	--	--	71.4
12003	006	01-0403	----	44	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
12006	008	01-1201	----	52	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0
12010	122	01-1201	36	----	57	53	----	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	01-0403	----	45	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
12012	008	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
12013	087	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
12014	075	01-0403	----	46	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
12015	041	01-1201	----	52	57	54	----	--	A	A	--	--	100.0
12018	041	01-1201	----	51	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
13001	050	01-1201	35	50	----	54	----	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
13007	002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
13010	008	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	01-0403	32	----	50	51	----	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	01-1201	36	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	01-1201	35	51	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	01-1201	36	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
13022	008	01-1201	35	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	01-0403	32	45	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
13035	008	01-1201	----	52	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0

[9]HDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13036	006	01-0403	32	44	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
13038	002	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
13039	002	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
13045	002	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
13049	002	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	01-1201	36	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13054	008	01-1201	----	52	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0
13055	002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	01-1201	36	----	56	53	----	A	--	A	--	--	100.0
13063	050	01-1201	35	----	56	53	----	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	01-0403	----	46	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
13077	008	01-1201	36	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	01-0403	----	44	50	51	----	--	A	A	--	--	100.0
13079	041	01-1201	36	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	01-1201	----	52	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0
13082	008	01-1201	35	52	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	01-1201	36	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
13089	002	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
13090	008	01-1201	36	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
13107	050	01-1201	35	50	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
13108	008	01-1201	35	52	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	01-1201	----	52	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0
13115	041	01-1201	36	----	57	----	36	A	--	A	--	--	100.0
13123	008	01-1201	----	51	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
14002	008	01-1201	35	----	58	53	----	A	--	A	--	--	100.0
14004	008	01-1201	----	51	58	54	----	--	A	A	--	--	100.0
14005	137	01-1201	35	51	----	54	----	A	A	--	--	--	100.0
14006	006	01-0403	32	44	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
14007	041	01-1201	----	51	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
14018	008	01-1201	35	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
14022	006	01-0403	----	44	50	51	----	--	A	A	--	--	100.0
14023	006	01-0403	32	44	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
14024	008	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
14025	006	01-0403	32	44	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
14026	008	01-1201	35	51	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	01-1201	36	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	01-0403	32	----	50	----	33	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	01-1201	----	52	58	54	----	--	A	A	--	--	100.0
15008	002	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	01-1201	----	51	57	54	----	--	A	A	--	--	100.0
16005	006	01-0403	----	44	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
16008	089	01-1201	36	52	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
17003	190	01-1201	35	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
18003	008	01-1201	----	52	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
20001	006	01-0403	----	44	50	51	----	--	A	A	--	--	100.0
20002	128	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
20003	081	01-1201	----	51	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
20004	081	01-1201	35	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	01-1201	36	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
22010	006	01-0403	32	----	50	----	33	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	01-1201	35	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0

[9]HDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
22019	006	01-0403	32	----	50	51	----	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	01-1201	----	50	56	----	35	--	A	A	--	--	100.0
23002	172	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
23005	002	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
23006	088	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	01-0403	----	45	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
23009	088	01-0403	32	----	50	52	----	A	--	A	--	--	100.0
23012	083	01-0403	----	45	51	53	----	--	A	A	--	--	100.0
23018	008	01-1201	35	51	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	01-0403	32	44	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	01-0403	----	45	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
23030	088	01-0403	----	45	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
23032	083	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	01-0403	32	----	50	----	33	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	01-0403	----	45	51	51	----	--	A	A	--	--	100.0
23039	169	01-0403	32	----	50	51	----	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	01-1201	35	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
23051	169	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
24001	169	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
24002	122	01-1201	36	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
25001	122	01-1201	----	51	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
25002	126	01-0403	33	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
26002	024	01-1201	34	51	----	53	----	B	A	--	--	--	85.7
26005	009	01-1201	35	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
26012	068	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
27001	029	01-1201	----	51	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
27002	008	01-1201	----	51	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
27003	068	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	01-1201	36	----	57	53	----	A	--	A	--	--	100.0
27006	068	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
27007	009	01-1201	35	51	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
27009	008	01-1201	36	52	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
27010	094	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
27018	060	01-1201	36	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
27023	090	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
27031	090	01-0403	33	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
27037	068	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
27038	009	01-1201	35	----	56	53	----	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	01-1201	35	51	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	01-0403	----	45	51	----	32	--	A	A	--	--	100.0
27045	068	01-0403	32	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
27051	002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
28001	090	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
28007	197	01-1201	----	52	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
28008	090	01-0403	33	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	01-1201	----	51	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
28015	002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
28018	102	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
28019	002	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	01-1201	----	51	57	55	----	--	A	A	--	--	100.0
28024	006	01-0403	32	44	----	51	----	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	01-0403	32	45	----	52	----	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	01-0403	33	45	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0

[9]HDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
31002	008	01-1201	36	52	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	01-1201	----	52	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0
33002	065	01-1201	34	49	----	52	----	B	B	--	--	--	71.4
33004	008	01-1201	36	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
33014	112	01-0403	----	45	51	----	33	--	A	A	--	--	100.0
34001	008	01-1201	----	51	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0
34002	008	01-1201	36	52	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	01-1201	36	----	58	53	----	A	--	A	--	--	100.0
34005	112	01-0403	33	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
34013	112	01-0403	----	45	51	52	----	--	A	A	--	--	100.0
35006	109	01-0403	32	----	50	51	----	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	01-0403	33	45	----	----	33	A	A	--	--	--	100.0
37001	058	01-1201	36	----	56	----	35	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	01-1201	----	52	58	53	----	--	A	A	--	--	100.0
38006	054	01-0403	33	----	52	52	----	A	--	B	--	--	92.9
38008	006	01-0403	----	44	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
40001	193	01-1201	36	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	01-1201	36	----	57	53	----	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	01-1201	35	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	01-1201	35	----	56	53	----	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	01-0403	----	44	50	----	33	--	A	A	--	--	100.0
40015	008	01-1201	35	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
40022	165	01-1201	35	----	57	54	----	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	01-1201	35	51	----	54	----	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0
40029	069	01-1201	----	51	57	----	35	--	A	A	--	--	100.0
40030	109	01-0403	32	45	----	----	32	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	01-2304	34	----	54	51	----	--	--	--	--	--	=====
40034	193	01-1201	36	52	----	53	----	A	A	--	--	--	100.0
40035	165	01-1201	35	50	----	----	35	A	A	--	--	--	100.0
41001	073	01-0403	32	----	51	52	----	A	--	A	--	--	100.0
41002	008	01-1201	35	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	01-1201	35	50	----	54	----	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	01-1201	35	----	58	----	35	A	--	A	--	--	100.0
43004	146	01-1201	35	50	----	----	34	A	A	--	--	--	100.0
43007	095	01-2303	34	----	54	52	----	--	--	--	--	--	=====
44002	193	01-1201	----	52	58	----	35	--	A	A	--	--	100.0
46001	193	01-1201	36	----	57	----	35	A	--	A	--	--	100.0
47002	109	01-0403	32	----	51	----	33	A	--	A	--	--	100.0

[10]LDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01002	008	01-1201	78	-----	139	-----	138	A	--	A	--	--	100.0
01007	130	01-1201	79	110	-----	166	-----	A	A	--	--	--	100.0
01019	052	01-1201	77	-----	136	-----	136	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	01-1201	77	111	-----	-----	136	A	A	--	--	--	100.0
02001	008	01-1201	77	-----	137	164	-----	A	--	A	--	--	100.0
02003	110	01-1201	78	111	-----	-----	138	A	A	--	--	--	100.0
03004	002	01-0403	74	-----	128	156	-----	A	--	A	--	--	100.0
04001	185	01-0403	75	105	-----	-----	124	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	01-0403	75	-----	126	-----	123	A	--	A	--	--	100.0
04012	002	01-0403	74	104	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
06001	136	01-1201	77	-----	136	-----	135	A	--	A	--	--	100.0
06004	008	01-1201	78	-----	139	-----	137	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	01-1201	-----	111	136	-----	136	--	A	A	--	--	100.0
07007	174	01-0403	-----	106	128	158	-----	--	A	A	--	--	100.0
08002	008	01-1201	-----	111	138	165	-----	--	A	A	--	--	100.0
09004	075	01-0403	74	-----	128	155	-----	A	--	A	--	--	100.0
09007	168	01-1201	77	-----	137	162	-----	A	--	A	--	--	100.0
09008	062	01-1201	-----	111	136	163	-----	--	A	A	--	--	100.0
09009	008	01-1201	77	111	-----	-----	134	A	A	--	--	--	100.0
09010	002	01-0403	-----	105	128	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
09011	002	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	01-0403	75	105	-----	-----	124	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	01-0403	-----	105	126	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
10002	002	01-0403	74	-----	128	-----	123	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	01-1201	-----	111	138	166	-----	--	A	A	--	--	100.0
11004	160	01-0403	75	106	-----	160	-----	A	A	--	--	--	100.0
11005	175	01-0403	-----	107	128	-----	127	--	A	A	--	--	100.0
11007	008	01-1201	-----	111	138	166	-----	--	A	A	--	--	100.0
11021	176	01-0403	75	-----	128	155	-----	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	01-0403	74	105	-----	-----	122	A	A	--	--	--	100.0
12003	006	01-0403	-----	106	128	-----	124	--	A	A	--	--	100.0
12006	008	01-1201	-----	111	138	-----	135	--	A	A	--	--	100.0
12010	122	01-1201	78	-----	138	165	-----	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	01-0403	-----	105	128	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
12012	008	01-1201	78	111	-----	-----	136	A	A	--	--	--	100.0
12013	087	01-0403	75	-----	130	-----	125	A	--	A	--	--	100.0
12014	075	01-0403	-----	105	128	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
12015	041	01-1201	-----	110	136	166	-----	--	A	A	--	--	100.0
12018	041	01-1201	-----	110	135	-----	136	--	A	A	--	--	100.0
13001	050	01-1201	77	110	-----	163	-----	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	01-0403	74	-----	127	-----	124	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	01-0403	74	-----	126	-----	123	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	01-0403	74	105	-----	-----	123	A	A	--	--	--	100.0
13007	002	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	01-0403	-----	105	126	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
13010	008	01-1201	77	111	-----	-----	135	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	01-0403	75	-----	128	157	-----	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	01-1201	77	-----	138	-----	134	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	01-1201	77	111	-----	164	-----	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	01-1201	76	-----	135	-----	134	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	01-0403	-----	105	126	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
13022	008	01-1201	77	112	-----	-----	134	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	01-1201	76	110	-----	-----	135	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	01-0403	75	107	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100.0
13035	008	01-1201	-----	112	139	-----	134	--	A	A	--	--	100.0

[10]LDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13036	006	01-0403	75	106	----	----	124	A	A	--	--	--	100.0
13038	002	01-0403	----	105	126	----	123	--	A	A	--	--	100.0
13039	002	01-0403	----	105	128	----	123	--	A	A	--	--	100.0
13045	002	01-0403	74	----	128	156	----	A	--	A	--	--	100.0
13049	002	01-0403	74	----	126	156	----	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	01-1201	77	111	----	----	134	A	A	--	--	--	100.0
13054	008	01-1201	----	111	138	----	135	--	A	A	--	--	100.0
13055	002	01-0403	74	105	----	156	----	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	01-1201	77	----	134	161	----	A	--	A	--	--	100.0
13063	050	01-1201	77	----	136	164	----	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	01-1201	77	111	----	----	134	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	01-0403	----	106	128	156	----	--	A	A	--	--	100.0
13077	008	01-1201	77	----	138	----	135	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	01-0403	----	106	128	157	----	--	A	A	--	--	100.0
13079	041	01-1201	76	110	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	01-1201	----	112	138	----	134	--	A	A	--	--	100.0
13082	008	01-1201	77	112	----	165	----	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	01-1201	78	112	----	----	135	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	01-0403	75	----	128	----	123	A	--	A	--	--	100.0
13089	002	01-0403	74	----	126	----	123	A	--	A	--	--	100.0
13090	008	01-1201	77	111	----	----	134	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	01-0403	----	105	128	----	123	--	A	A	--	--	100.0
13107	050	01-1201	77	109	----	----	135	A	A	--	--	--	100.0
13108	008	01-1201	77	112	----	165	----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	01-1201	----	112	138	----	135	--	A	A	--	--	100.0
13115	041	01-1201	76	----	136	----	136	A	--	A	--	--	100.0
13123	008	01-1201	----	111	137	165	----	--	A	A	--	--	100.0
14002	008	01-1201	78	----	138	166	----	A	--	A	--	--	100.0
14004	008	01-1201	----	112	139	165	----	--	A	A	--	--	100.0
14005	137	01-1201	78	113	----	163	----	A	A	--	--	--	100.0
14006	006	01-0403	75	106	----	158	----	A	A	--	--	--	100.0
14007	041	01-1201	----	109	137	----	136	--	A	A	--	--	100.0
14018	008	01-1201	78	----	139	----	135	A	--	A	--	--	100.0
14022	006	01-0403	----	106	128	157	----	--	A	A	--	--	100.0
14023	006	01-0403	75	106	----	158	----	A	A	--	--	--	100.0
14024	008	01-1201	77	112	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
14025	006	01-0403	75	106	----	----	124	A	A	--	--	--	100.0
14026	008	01-1201	77	111	----	164	----	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	01-1201	77	110	----	----	134	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	01-0403	75	----	128	----	124	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	01-1201	----	113	140	167	----	--	A	A	--	--	100.0
15008	002	01-0403	74	105	----	----	123	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	01-0403	74	----	126	----	123	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	01-1201	----	111	137	165	----	--	A	A	--	--	100.0
16005	006	01-0403	----	106	128	----	124	--	A	A	--	--	100.0
16008	089	01-1201	77	111	----	163	----	A	A	--	--	--	100.0
17003	190	01-1201	78	111	----	----	135	A	A	--	--	--	100.0
18003	008	01-1201	----	112	139	167	----	--	A	A	--	--	100.0
20001	006	01-0403	----	106	128	158	----	--	A	A	--	--	100.0
20002	128	01-0403	75	----	128	157	----	A	--	A	--	--	100.0
20003	081	01-1201	----	110	136	----	135	--	A	A	--	--	100.0
20004	081	01-1201	77	110	----	----	135	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	01-0403	75	----	127	----	124	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	01-1201	77	108	----	----	136	A	A	--	--	--	100.0
22010	006	01-0403	75	----	128	----	124	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	01-1201	78	----	139	----	137	A	--	A	--	--	100.0

[10]LDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
22019	006	01-0403	75	-----	128	157	-----	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	01-1201	-----	109	135	-----	133	--	A	A	--	--	100.0
23002	172	01-0403	75	-----	128	157	-----	A	--	A	--	--	100.0
23005	002	01-0403	-----	105	128	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
23006	088	01-0403	74	105	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	01-0403	-----	104	127	-----	122	--	A	A	--	--	100.0
23009	088	01-0403	74	-----	128	157	-----	A	--	A	--	--	100.0
23012	083	01-0403	-----	106	129	158	-----	--	A	A	--	--	100.0
23018	008	01-1201	77	111	-----	-----	134	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	01-0403	75	105	-----	-----	124	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	01-0403	-----	105	128	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
23030	088	01-0403	-----	105	128	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
23032	083	01-0403	75	-----	129	158	-----	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	01-0403	74	-----	128	-----	123	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	01-0403	-----	105	127	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
23039	169	01-0403	75	-----	128	156	-----	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	01-1201	77	113	-----	-----	136	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	01-0403	-----	105	127	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
23051	169	01-0403	74	105	-----	-----	123	A	A	--	--	--	100.0
24001	169	01-0403	75	105	-----	-----	123	A	A	--	--	--	100.0
24002	122	01-1201	78	-----	138	-----	137	A	--	A	--	--	100.0
25001	122	01-1201	-----	112	138	-----	137	--	A	A	--	--	100.0
25002	126	01-0403	75	-----	128	-----	124	A	--	A	--	--	100.0
26002	024	01-1201	76	109	-----	161	-----	A	A	--	--	--	100.0
26005	009	01-1201	78	-----	136	-----	135	A	--	A	--	--	100.0
26012	068	01-0403	-----	105	127	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
27001	029	01-1201	-----	109	135	-----	133	--	A	A	--	--	100.0
27002	008	01-1201	-----	111	136	163	-----	--	A	A	--	--	100.0
27003	068	01-0403	74	-----	127	-----	124	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	01-1201	78	-----	138	165	-----	A	--	A	--	--	100.0
27006	068	01-0403	-----	105	127	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
27007	009	01-1201	78	111	-----	163	-----	A	A	--	--	--	100.0
27009	008	01-1201	77	111	-----	166	-----	A	A	--	--	--	100.0
27010	094	01-0403	-----	106	128	157	-----	--	A	A	--	--	100.0
27018	060	01-1201	78	-----	138	-----	137	A	--	A	--	--	100.0
27023	090	01-0403	-----	107	130	-----	125	--	A	A	--	--	100.0
27031	090	01-0403	75	107	-----	-----	125	A	A	--	--	--	100.0
27037	068	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
27038	009	01-1201	78	-----	137	163	-----	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	01-1201	77	110	-----	164	-----	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	01-0403	-----	105	127	-----	123	--	A	A	--	--	100.0
27045	068	01-0403	74	105	-----	-----	124	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	01-0403	74	-----	127	156	-----	A	--	A	--	--	100.0
27051	002	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	01-0403	-----	105	127	156	-----	--	A	A	--	--	100.0
28001	090	01-0403	-----	107	130	-----	125	--	A	A	--	--	100.0
28007	197	01-1201	-----	108	135	-----	133	--	A	A	--	--	100.0
28008	090	01-0403	75	-----	130	157	-----	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	01-1201	-----	111	137	164	-----	--	A	A	--	--	100.0
28015	002	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
28018	102	01-0403	-----	104	127	-----	124	--	A	A	--	--	100.0
28019	002	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	01-1201	-----	109	136	165	-----	--	A	A	--	--	100.0
28024	006	01-0403	75	105	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	01-0403	74	105	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	01-0403	75	106	-----	158	-----	A	A	--	--	--	100.0

[10]LDLコレステロール 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
31002	008	01-1201	78	112	-----	-----	136	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	01-1201	-----	112	139	-----	136	--	A	A	--	--	100.0
33002	065	01-1201	78	112	-----	168	-----	A	A	--	--	--	100.0
33004	008	01-1201	78	-----	139	-----	137	A	--	A	--	--	100.0
33014	112	01-0403	-----	107	130	-----	127	--	A	A	--	--	100.0
34001	008	01-1201	-----	112	139	-----	136	--	A	A	--	--	100.0
34002	008	01-1201	78	112	-----	165	-----	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	01-1201	78	-----	137	165	-----	A	--	A	--	--	100.0
34005	112	01-0403	76	-----	130	-----	126	A	--	A	--	--	100.0
34013	112	01-0403	-----	107	130	159	-----	--	A	A	--	--	100.0
35006	109	01-0403	73	-----	127	153	-----	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	01-0403	75	107	-----	-----	126	A	A	--	--	--	100.0
37001	058	01-1201	76	-----	134	-----	134	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	01-1201	-----	112	137	163	-----	--	A	A	--	--	100.0
38006	054	01-0403	74	-----	125	156	-----	A	--	A	--	--	100.0
38008	006	01-0403	-----	105	128	-----	124	--	A	A	--	--	100.0
40001	193	01-1201	78	-----	139	-----	137	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	01-1201	79	-----	139	166	-----	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	01-1201	77	-----	137	-----	135	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	01-1201	76	-----	137	163	-----	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	01-0403	-----	105	127	-----	121	--	A	A	--	--	100.0
40015	008	01-1201	77	-----	137	-----	135	A	--	A	--	--	100.0
40022	165	01-1201	76	-----	137	163	-----	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	01-0403	74	-----	127	155	-----	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	01-1201	77	111	-----	163	-----	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	01-0403	74	-----	127	-----	124	A	--	A	--	--	100.0
40029	069	01-1201	-----	112	138	-----	137	--	A	A	--	--	100.0
40030	109	01-0403	73	105	-----	-----	121	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	01-2302	83	-----	142	158	-----	A	--	A	--	--	100.0
40034	193	01-1201	78	112	-----	166	-----	A	A	--	--	--	100.0
40035	165	01-1201	76	110	-----	-----	135	A	A	--	--	--	100.0
41001	073	01-0403	74	-----	127	156	-----	A	--	A	--	--	100.0
41002	008	01-1201	77	-----	138	-----	134	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	01-1201	76	110	-----	164	-----	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	01-1201	77	-----	137	-----	135	A	--	A	--	--	100.0
43004	146	01-1201	77	108	-----	-----	134	A	A	--	--	--	100.0
43007	095	01-2302	84	-----	142	163	-----	A	--	A	--	--	100.0
44002	193	01-1201	-----	112	139	-----	137	--	A	A	--	--	100.0
46001	193	01-1201	78	-----	139	-----	137	A	--	A	--	--	100.0
47002	109	01-0403	74	-----	127	-----	121	A	--	A	--	--	100.0

[11]HbA1C 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01002	008	02-0401	-----	6.7	8.2	-----	-----	--	A	A	--	--	100.0
01007	130	02-2401	-----	6.6	7.9	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
01019	052	02-0401	5.5	6.7	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
01027	052	02-0401	5.5	6.7	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
02001	008	02-0401	5.6	6.8	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
02003	110	01-2901	-----	6.5	7.8	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
03004	002	03-2701	-----	6.4	7.6	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
04001	185	03-2701	5.3	6.2	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	01-2701	-----	6.2	7.4	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
04012	002	03-2701	5.2	6.2	-----	6.0	5.1	B	A	--	--	--	92.9
06001	008	02-0401	5.6	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
06004	008	02-0401	-----	6.7	8.1	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
07004	062	03-0401	-----	6.4	7.6	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
07007	174	02-0401	5.5	6.7	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
08002	008	02-0401	-----	6.8	8.2	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
09004	075	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
09007	168	02-2401	5.4	-----	7.9	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
09008	062	03-0401	-----	6.4	7.6	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
09009	008	02-0401	5.6	6.7	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
09010	002	03-2701	5.4	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
09011	002	03-2701	5.4	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
10001	002	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
10002	002	03-2701	5.4	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
11002	008	01-2901	-----	6.4	7.7	6.2	5.2	--	A	A	--	--	100.0
11004	160	01-2901	5.4	6.4	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
11005	175	01-2701	5.3	6.2	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
11007	008	02-0401	5.6	6.8	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
11021	176	03-0401	-----	6.4	7.8	5.9	5.1	--	A	A	--	--	100.0
11025	100	03-0401	5.4	-----	7.6	5.8	4.9	A	--	A	--	--	100.0
12003	006	03-0401	-----	6.3	7.6	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
12006	008	02-0401	5.6	6.8	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
12010	122	02-0401	5.5	6.7	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
12011	111	02-0403	5.5	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
12012	008	02-0401	5.5	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
12013	087	03-0401	5.5	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
12014	075	03-2701	-----	6.3	7.6	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
12015	041	02-2401	-----	6.6	7.9	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
12018	041	02-2401	5.4	6.7	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
13001	050	02-2401	-----	6.6	7.9	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
13004	068	03-0401	-----	6.4	7.7	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13005	002	03-2701	-----	6.4	7.6	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
13006	002	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13007	002	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13008	002	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13010	008	02-0401	5.6	6.8	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	02-0403	5.5	6.7	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
13014	008	02-0401	-----	6.8	8.2	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13015	008	02-0401	-----	6.7	8.2	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
13016	041	02-2401	5.5	-----	7.9	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	03-2701	-----	6.4	7.6	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
13022	008	02-0401	5.6	6.8	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13028	041	02-2401	-----	6.6	7.9	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13033	087	02-0403	5.5	6.6	-----	5.9	4.9	A	A	--	--	--	100.0
13035	008	02-0401	5.6	-----	8.2	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0

[11]HbA1C 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13036	006	03-0401	----	6.3	7.7	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
13038	002	03-2701	5.4	----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13039	002	03-2701	5.4	6.4	----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
13045	002	03-2701	----	6.4	7.6	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
13049	002	03-2701	----	6.4	7.6	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
13051	008	02-0401	----	6.7	8.2	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13055	002	03-2701	5.4	----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
13056	012	03-2701	----	6.3	7.5	6.0	5.2	--	A	A	--	--	100.0
13063	050	02-2401	5.5	----	7.9	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	02-0401	----	6.7	8.2	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13071	075	03-2701	5.4	6.3	----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
13077	008	02-0401	5.6	----	8.2	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	03-0401	5.5	6.3	----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
13079	041	02-2401	----	6.6	8.0	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13080	008	02-0401	----	6.8	8.2	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13082	008	02-0401	5.6	----	8.2	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
13083	008	02-0401	5.6	6.8	----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	03-0401	----	6.4	7.7	5.8	5.0	--	A	A	--	--	100.0
13089	002	03-2701	5.4	6.4	----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
13090	008	02-0401	5.6	----	8.1	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
13101	002	03-2701	----	6.4	7.6	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
13107	050	02-2401	5.5	----	7.9	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
13108	008	02-0401	5.6	----	8.2	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
13109	008	02-0401	5.6	6.8	----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
13115	041	02-2401	----	6.6	7.9	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
13123	008	02-0401	5.6	6.7	----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
14002	008	02-0401	5.6	6.8	----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
14004	008	02-0401	5.6	6.8	----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
14005	137	03-0401	----	6.4	7.8	6.2	5.2	--	A	A	--	--	100.0
14006	006	03-0401	----	6.3	7.6	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
14007	041	02-2401	5.4	----	7.9	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
14018	008	02-0401	5.6	----	8.2	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
14022	006	03-0401	----	6.3	7.6	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
14023	006	03-0401	5.4	6.3	----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
14024	008	02-0401	5.6	----	8.2	----	----	A	--	A	--	--	100.0
14025	006	03-0401	5.5	6.3	----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
14026	008	02-0401	5.6	----	8.2	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
14029	041	02-2401	----	6.6	7.9	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
14034	006	03-0401	5.5	----	7.6	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	02-0401	5.6	----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
15008	002	03-2701	5.4	----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
15010	002	03-2701	5.4	6.4	----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
16004	171	02-0401	5.5	6.7	----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
16005	006	03-0401	5.4	6.3	----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
16008	089	02-0402	5.6	6.7	----	5.9	5.1	A	A	--	--	--	100.0
17003	190	03-2701	----	6.2	7.5	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
18003	008	02-0401	5.6	6.8	----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
20001	006	03-0401	----	6.3	7.6	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
20002	128	02-0404	5.5	6.6	----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
20003	081	02-2401	----	6.6	7.9	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
20004	081	01-2901	5.4	6.5	----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	02-0401	5.5	----	8.0	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	02-2401	----	6.6	7.9	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
22010	006	03-0401	----	6.3	7.6	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
22015	008	02-0401	5.5	6.8	----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
22019	006	03-0401	5.5	----	7.7	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0

[11]HbA1C 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
23001	057	01-2701	5.4	-----	7.5	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
23002	172	02-0401	-----	6.7	8.0	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
23005	002	03-2701	5.4	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
23006	088	02-0403	5.5	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
23007	169	03-0401	5.5	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
23009	088	02-0403	-----	6.7	8.1	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
23012	083	03-0401	-----	6.3	7.6	6.0	4.9	--	A	A	--	--	100.0
23018	008	02-0401	5.6	-----	8.2	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
23022	006	03-0401	5.5	6.3	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	02-0403	-----	6.7	8.1	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
23029	172	02-0401	5.5	-----	8.0	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
23030	088	02-0403	5.5	6.7	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
23032	083	03-0401	5.4	-----	7.6	6.0	4.9	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	02-0403	5.5	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	03-0401	5.5	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
23039	169	02-0403	-----	6.6	8.1	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
23040	008	02-0401	-----	6.8	8.2	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
23042	068	03-0401	-----	6.4	7.7	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
24001	169	03-0401	5.5	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
24002	122	02-0401	5.5	6.7	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
25001	122	02-0401	5.5	-----	8.1	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
25002	126	02-0403	-----	6.7	8.1	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
26002	024	03-2701	-----	6.4	7.7	6.1	5.2	--	A	A	--	--	100.0
26005	009	02-2401	-----	6.6	7.9	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
26012	068	03-0401	5.5	-----	7.7	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
27001	029	03-0401	5.4	-----	7.6	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
27002	008	02-0401	-----	6.7	8.1	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
27003	068	03-0401	5.5	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
27005	122	02-0401	5.5	6.7	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
27006	068	03-0401	5.5	-----	7.7	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
27007	009	02-2401	-----	6.6	7.9	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
27009	008	02-0401	5.6	-----	8.2	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
27010	094	02-0403	-----	6.6	8.0	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
27018	060	02-0401	-----	6.7	8.1	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
27023	090	03-0401	-----	6.4	5.5	6.2	5.1	--	A	D	--	--	50.0
27031	090	03-0401	-----	6.4	7.7	6.2	5.1	--	A	A	--	--	100.0
27037	068	03-0401	-----	6.4	7.7	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
27038	009	02-2401	-----	6.6	7.9	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
27041	029	03-0401	5.4	-----	7.7	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
27042	102	03-0401	5.5	-----	7.6	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
27045	068	03-0401	5.5	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	03-0401	5.5	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
27051	002	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
27052	068	03-0401	5.5	-----	7.7	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
28001	090	03-0401	5.5	6.4	-----	6.2	5.1	A	A	--	--	--	100.0
28007	197	01-2901	5.4	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
28008	090	03-0401	5.5	-----	7.7	6.2	5.1	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	02-0401	5.6	6.8	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
28015	002	03-2701	5.4	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
28018	102	03-0401	-----	6.3	7.6	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
28019	002	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
28022	198	03-2701	5.4	-----	7.6	6.1	5.2	A	--	A	--	--	100.0
28024	006	03-0401	5.4	-----	7.7	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
28029	068	03-0401	5.5	6.4	-----	6.0	5.1	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	02-0403	5.5	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
31002	008	02-0401	5.6	-----	8.1	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0

[11]HbA1C 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
31003	008	02-0401	5.6	6.7	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
33002	065	03-2701	5.4	6.4	-----	6.1	5.2	A	A	--	--	--	100.0
33004	008	02-0401	5.6	-----	8.2	5.9	5.1	A	--	A	--	--	100.0
33014	112	02-0401	5.5	6.7	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
34001	008	02-0401	-----	6.8	8.2	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
34002	008	02-0401	5.6	-----	8.2	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
34003	008	02-0401	-----	6.7	8.2	6.0	5.0	--	A	A	--	--	100.0
34005	112	02-0401	5.5	-----	8.0	5.9	4.9	A	--	A	--	--	100.0
34013	112	02-0401	-----	6.7	8.0	5.8	4.9	--	A	A	--	--	100.0
35006	109	03-0401	-----	6.3	7.6	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
36002	161	03-0401	5.5	-----	7.7	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
37001	058	03-2701	-----	6.2	7.5	5.9	5.1	--	A	A	--	--	100.0
37004	008	02-0401	-----	6.7	8.1	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
38006	054	02-0404	-----	6.6	8.0	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
38008	006	03-0401	-----	6.3	7.6	5.9	5.0	--	A	A	--	--	100.0
40001	193	02-0403	5.6	6.8	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
40002	193	02-0403	5.5	-----	8.2	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	02-2401	5.5	6.6	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
40006	165	02-2401	5.5	-----	7.9	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	03-0401	-----	6.3	7.6	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
40015	008	02-0401	5.5	-----	8.1	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
40022	165	02-2401	5.5	6.6	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
40025	109	02-0403	-----	6.3	7.6	5.9	5.1	--	C	C	--	--	42.9
40026	165	02-2401	-----	6.6	7.9	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100.0
40028	068	03-0401	5.5	-----	7.7	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
40029	069	02-0403	5.6	6.8	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
40030	109	03-0401	5.5	6.3	-----	6.0	5.0	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	02-0404	5.4	6.4	-----	5.8	5.0	A	B	--	--	--	92.9
40034	193	02-0403	5.6	-----	8.2	6.0	5.0	A	--	A	--	--	100.0
40035	165	02-2401	5.5	6.6	-----	6.1	5.1	A	A	--	--	--	100.0
41001	073	02-0404	5.6	-----	8.1	6.0	5.2	A	--	A	--	--	100.0
41002	008	02-0401	-----	6.7	8.1	6.0	5.1	--	A	A	--	--	100.0
42001	165	02-2401	5.5	-----	7.9	6.1	5.1	A	--	A	--	--	100.0
42002	008	02-0401	5.5	-----	8.1	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0
43004	146	01-2901	5.5	-----	7.7	6.1	5.0	A	--	A	--	--	100.0
43007	095	01-2901	-----	6.5	7.8	6.2	5.1	--	A	A	--	--	100.0
44002	193	02-0403	5.5	6.8	-----	5.9	5.0	A	A	--	--	--	100.0
46001	193	02-0403	5.6	-----	8.2	5.9	5.0	A	--	A	--	--	100.0
47002	109	03-0401	5.5	-----	7.6	6.0	5.1	A	--	A	--	--	100.0

[12] 尿糖 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
01007	130	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
02001	008	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09004	075	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13013	111	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13071	075	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13089	002	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
17003	190	1	1	4	----	4	----	5	1	----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
22007	144	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23026	088	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23030	088	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23037	088	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
25002	126	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
26002	024	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27009	008	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27048	068	2	1	3	3	----	4	----	1	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27052	068	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28022	198	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
36002	161	2	1	3	----	3	4	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40004	165	2	1	3	3	----	4	----	----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
40013	109	2	1	3	----	3	----	4	1	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
40026	165	2	1	3	----	3	----	4	----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
42001	165	2	1	3	3	----	----	4	1	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0

[13]尿蛋白 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
01007	130	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
02001	008	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09004	075	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
13013	111	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13071	075	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13089	002	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
17003	190	1	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
22007	144	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23026	088	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23030	088	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23037	088	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
25002	126	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
26002	024	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27009	008	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27048	068	2	3	1	3	----	3	----	4	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27052	068	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28022	198	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
36002	161	2	3	1	----	4	3	----	----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
40004	165	2	3	1	3	----	3	----	----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
40013	109	2	3	1	----	4	----	4	4	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
40026	165	2	3	1	----	4	----	4	----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
42001	165	2	3	1	3	----	----	4	4	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0

[14]尿潜血 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値								試料NO別判定値								総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	
01007	130	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
02001	008	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
09004	075	2	1	1	----	3	1	----	----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
13013	111	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
13071	075	2	1	1	4	----	1	----	3	----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
13089	002	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
17003	190	1	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
22007	144	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
23026	088	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
23030	088	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
23037	088	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
25002	126	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
26002	024	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
27009	008	2	1	1	----	2	1	----	----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100.0
27048	068	2	1	1	3	----	1	----	2	----	A	A	A	--	A	--	A	--	100.0
27052	068	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0
28022	198	2	1	1	----	2	1	----	----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
36002	161	2	1	1	----	2	1	----	----	4	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
40004	165	2	1	1	3	----	1	----	----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100.0
40013	109	2	1	1	----	2	----	2	2	----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0
40026	165	2	1	1	----	2	----	2	----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100.0
42001	165	2	1	1	3	----	----	2	2	----	A	A	A	--	--	A	A	--	100.0

[15]ヘモグロビン 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01007	130	2	13.4	-----	17.5	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
01019	052	2	13.3	-----	17.5	9.3	11.8	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	2	13.3	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
02001	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
02003	110	2	13.3	-----	17.5	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
03004	002	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
04001	185	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
04012	002	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
06001	136	2	13.2	7.5	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
06004	008	2	13.2	-----	17.4	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
07007	174	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
08002	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
09004	075	2	13.5	7.5	-----	9.5	11.9	A	A	--	--	--	100.0
09007	168	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
09008	062	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
09009	008	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
09010	002	2	13.5	7.5	-----	9.6	11.8	A	A	--	--	--	100.0
09011	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.9	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
10002	002	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	2	13.2	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
11004	160	2	13.5	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
11005	175	2	13.5	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
11007	008	2	13.2	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
11021	176	2	13.3	-----	17.6	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	2	13.2	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
12003	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
12006	008	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
12010	122	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	2	13.5	7.5	-----	9.6	12.0	A	A	--	--	--	100.0
12012	008	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
12013	087	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
12014	075	2	13.5	-----	17.7	9.5	11.9	A	--	A	--	--	100.0
12015	041	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
12018	041	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13001	050	2	13.4	7.4	-----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	2	13.4	-----	17.5	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13007	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13010	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	2	13.5	-----	17.7	9.6	12.0	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	2	13.4	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13022	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.9	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13035	008	2	13.4	-----	17.5	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13036	006	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0

[15]ヘモグロビン 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13038	002	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13039	002	2	13.5	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13045	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13049	002	2	13.5	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13055	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
13063	050	2	13.5	-----	17.6	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	2	13.5	7.5	-----	9.5	11.9	A	A	--	--	--	100.0
13077	008	2	13.4	-----	17.5	9.5	11.7	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
13079	041	2	13.3	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
13082	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13089	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13090	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13107	050	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
13108	008	2	13.3	7.4	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	2	13.4	7.4	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
13115	041	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
13123	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
14002	008	2	13.4	7.4	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
14004	008	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
14005	137	2	13.4	-----	17.5	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
14006	006	2	13.3	-----	17.6	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
14007	041	2	13.4	7.4	-----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
14018	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
14022	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
14023	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
14025	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
14026	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	2	13.4	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	2	13.2	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
15008	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
16005	006	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
16008	089	2	13.2	-----	17.3	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
17003	190	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
18003	008	2	13.2	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
20001	006	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
20002	128	2	13.3	7.4	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
20003	081	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
20004	081	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	2	13.5	-----	17.6	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
22010	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	2	13.2	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
22019	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	2	13.5	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23002	172	2	13.5	7.4	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0

[15]ヘモグロビン 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
23005	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
23006	088	2	13.5	7.5	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	2	13.4	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
23009	088	2	13.4	7.4	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23012	083	2	13.5	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23018	008	2	13.3	7.5	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
23029	172	2	13.4	-----	17.7	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
23030	088	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
23032	083	2	13.5	-----	17.7	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	2	13.4	-----	17.5	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	2	13.4	-----	17.5	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
23039	169	2	13.4	-----	17.5	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
24001	169	2	13.4	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
24002	122	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
25001	122	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
25002	126	2	13.4	7.4	-----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
26002	024	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
26005	009	2	13.4	7.6	-----	9.6	11.9	A	B	--	--	--	92.9
26012	068	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27002	008	2	13.3	7.4	-----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27003	068	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27006	068	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
27007	009	2	13.4	-----	17.4	9.6	11.8	A	--	A	--	--	100.0
27009	008	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.8	A	--	A	--	--	100.0
27010	094	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27018	060	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27023	090	2	13.2	-----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27031	090	2	13.5	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27037	068	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27038	057	2	13.5	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
27045	068	2	13.4	7.5	-----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	2	13.4	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
27051	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	2	13.4	-----	17.6	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
28001	090	2	13.4	7.5	-----	9.3	11.8	A	A	--	--	--	100.0
28007	197	2	13.4	-----	17.6	9.5	11.7	A	--	A	--	--	100.0
28008	090	2	13.4	-----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
28015	002	2	13.5	-----	17.7	9.5	11.9	A	--	A	--	--	100.0
28018	102	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
28019	002	2	13.4	7.5	-----	9.5	11.9	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	2	13.5	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
28024	006	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	2	13.4	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	2	13.3	7.4	-----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
31002	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	2	13.2	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0
33002	065	9	13.4	-----	17.5	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
33004	008	2	13.2	-----	17.5	9.3	11.6	A	--	A	--	--	100.0

[15]ヘモグロビン 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定法	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
33014	112	2	13.3	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
34001	008	2	13.2	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
34002	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
34005	112	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.6	A	A	--	--	--	100.0
34013	112	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
35006	109	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
37001	058	2	13.3	-----	17.5	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	2	13.3	-----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
38006	054	1	13.1	-----	17.1	9.3	11.5	A	--	B	--	--	92.9
38008	006	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40001	193	2	13.3	-----	17.4	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	2	13.3	-----	17.4	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	2	13.3	-----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	2	13.4	-----	17.6	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	2	13.4	-----	17.7	9.4	11.8	A	--	A	--	--	100.0
40015	008	2	13.3	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
40022	165	2	13.4	-----	17.5	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	2	13.4	-----	17.7	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	2	13.5	7.5	-----	9.4	11.8	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	2	13.3	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
40029	069	2	13.3	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
40030	109	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
40034	193	2	13.3	-----	17.4	9.3	11.7	A	--	A	--	--	100.0
40035	165	2	13.5	-----	17.6	9.4	11.6	A	--	A	--	--	100.0
41001	073	2	13.4	7.5	-----	9.4	11.9	A	A	--	--	--	100.0
41002	008	2	13.3	-----	17.5	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	2	13.4	7.4	-----	9.3	11.7	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	2	13.3	7.4	-----	9.5	11.7	A	A	--	--	--	100.0
43004	146	2	13.4	-----	17.6	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0
43007	095	2	13.5	7.5	-----	9.5	11.8	A	A	--	--	--	100.0
44002	193	2	13.2	7.4	-----	9.4	11.7	A	A	--	--	--	100.0
46001	193	2	13.3	7.4	-----	9.3	11.6	A	A	--	--	--	100.0
47002	109	2	13.5	-----	17.7	9.4	11.7	A	--	A	--	--	100.0

[16]赤血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01007	130	JAB512	457	-----	531	349	364	A	--	A	--	--	100.0
01019	052	JAB512	456	-----	533	355	369	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	JAB512	458	-----	531	354	364	A	--	A	--	--	100.0
02001	008	JAB512	456	293	-----	355	367	A	A	--	--	--	100.0
02003	110	JAB517	448	-----	529	348	358	A	--	A	--	--	100.0
03004	002	JAB512	457	293	-----	350	362	A	A	--	--	--	100.0
04001	185	JAB512	455	294	-----	351	366	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	JAB512	456	295	-----	355	363	A	A	--	--	--	100.0
04012	002	JAB512	455	-----	533	353	364	A	--	A	--	--	100.0
06001	136	JAB514	454	293	-----	355	368	A	A	--	--	--	100.0
06004	008	JAB512	458	-----	530	355	363	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	JAB512	458	293	-----	353	365	A	A	--	--	--	100.0
07007	174	JAB512	460	-----	537	354	365	A	--	A	--	--	100.0
08002	008	JAB512	456	295	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
09004	075	JAB517	454	284	-----	352	362	A	A	--	--	--	100.0
09007	168	JAB512	455	293	-----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
09008	062	JAB512	456	294	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
09009	008	JAB512	454	-----	530	357	366	A	--	A	--	--	100.0
09010	002	JAB512	456	294	-----	354	362	A	A	--	--	--	100.0
09011	002	JAB512	457	293	-----	352	366	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	JAB517	452	283	-----	350	362	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	JAB512	457	-----	533	354	367	A	--	A	--	--	100.0
10002	002	JAB512	457	-----	532	354	363	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	JAB512	456	296	-----	355	363	A	A	--	--	--	100.0
11004	160	JAB512	455	-----	536	354	365	A	--	A	--	--	100.0
11005	175	JAB512	455	293	-----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
11007	008	JAB512	454	-----	529	351	362	A	--	A	--	--	100.0
11021	176	JAB512	461	-----	538	352	367	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	JAB512	457	-----	535	357	364	A	--	A	--	--	100.0
12003	006	JAB512	456	-----	533	355	365	A	--	A	--	--	100.0
12006	008	JAB512	457	-----	533	354	366	A	--	A	--	--	100.0
12010	122	JAB512	457	-----	533	355	366	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	JAB517	459	290	-----	352	369	A	A	--	--	--	100.0
12012	008	JAB512	457	-----	532	355	365	A	--	A	--	--	100.0
12013	087	JAB512	458	294	-----	353	365	A	A	--	--	--	100.0
12014	075	JAB517	451	-----	531	351	362	A	--	A	--	--	100.0
12015	041	JAB512	454	-----	531	352	364	A	--	A	--	--	100.0
12018	041	JAB512	455	-----	531	354	363	A	--	A	--	--	100.0
13001	050	JAB512	456	294	-----	353	366	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	JAB512	458	-----	527	354	365	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	JAB512	457	-----	531	353	365	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	JAB512	456	-----	532	353	366	A	--	A	--	--	100.0
13007	002	JAB512	457	293	-----	352	363	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	JAB512	456	293	-----	352	363	A	A	--	--	--	100.0
13010	008	JAB512	456	293	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	JAB517	459	-----	531	353	371	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	JAB512	457	-----	530	356	367	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	JAB512	457	292	-----	355	368	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	JAB512	455	-----	533	350	366	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	JAB512	456	-----	532	352	362	A	--	A	--	--	100.0
13022	008	JAB512	456	295	-----	352	367	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	JAB512	456	293	-----	354	365	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	JAB512	457	292	-----	354	365	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	JAB512	458	-----	534	353	365	A	--	A	--	--	100.0
13035	008	JAB512	456	-----	535	355	364	A	--	A	--	--	100.0
13036	006	JAB512	456	294	-----	353	364	A	A	--	--	--	100.0

[16]赤血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13038	002	JAB512	456	-----	531	351	365	A	--	A	--	--	100.0
13039	002	JAB512	456	-----	531	355	365	A	--	A	--	--	100.0
13045	002	JAB512	456	294	-----	350	361	A	A	--	--	--	100.0
13049	002	JAB512	457	-----	531	352	366	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	JAB512	456	292	-----	357	365	A	A	--	--	--	100.0
13055	002	JAB512	457	294	-----	350	366	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	JAB512	455	294	-----	355	362	A	A	--	--	--	100.0
13063	050	JAB512	456	-----	534	353	365	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	JAB512	458	294	-----	359	367	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	JAB517	451	285	-----	350	362	A	A	--	--	--	100.0
13077	008	JAB512	456	-----	529	354	367	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	JAB512	457	-----	533	354	365	A	--	A	--	--	100.0
13079	041	JAB512	457	292	-----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	JAB512	459	-----	532	355	368	A	--	A	--	--	100.0
13082	008	JAB512	456	295	-----	354	364	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	JAB512	458	295	-----	355	368	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	JAB512	457	296	-----	357	368	A	A	--	--	--	100.0
13089	002	JAB512	457	293	-----	351	363	A	A	--	--	--	100.0
13090	008	JAB512	456	296	-----	356	369	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	JAB512	456	294	-----	354	363	A	A	--	--	--	100.0
13107	050	JAB512	454	-----	533	354	364	A	--	A	--	--	100.0
13108	008	JAB512	454	293	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	JAB512	458	295	-----	354	363	A	A	--	--	--	100.0
13115	041	JAB512	456	293	-----	350	363	A	A	--	--	--	100.0
13123	008	JAB512	457	293	-----	358	368	A	A	--	--	--	100.0
14002	008	JAB512	458	293	-----	358	367	A	A	--	--	--	100.0
14004	008	JAB512	457	297	-----	356	367	A	A	--	--	--	100.0
14005	137	JAB512	458	-----	535	355	365	A	--	A	--	--	100.0
14006	006	JAB512	455	-----	533	355	365	A	--	A	--	--	100.0
14007	041	JAB512	455	291	-----	353	369	A	A	--	--	--	100.0
14018	008	JAB512	456	293	-----	356	366	A	A	--	--	--	100.0
14022	006	JAB512	457	-----	534	354	364	A	--	A	--	--	100.0
14023	006	JAB512	455	-----	533	355	364	A	--	A	--	--	100.0
14025	006	JAB512	457	-----	533	356	364	A	--	A	--	--	100.0
14026	008	JAB512	458	292	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	JAB512	459	291	-----	355	365	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	JAB512	456	-----	534	354	364	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	JAB512	457	295	-----	353	366	A	A	--	--	--	100.0
15008	002	JAB512	456	295	-----	351	365	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	JAB512	458	-----	531	354	363	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	JAB512	459	-----	535	357	367	A	--	A	--	--	100.0
16005	006	JAB512	456	294	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
16008	089	JAB514	452	-----	531	352	364	A	--	A	--	--	100.0
17003	190	JAB512	458	-----	535	354	364	A	--	A	--	--	100.0
18003	008	JAB512	459	294	-----	351	363	A	A	--	--	--	100.0
20001	006	JAB512	457	294	-----	355	365	A	A	--	--	--	100.0
20002	128	JAB512	458	295	-----	356	365	A	A	--	--	--	100.0
20003	081	JAB512	456	293	-----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
20004	081	JAB512	456	293	-----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	JAB512	459	-----	536	355	366	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	JAB512	454	-----	533	352	365	A	--	A	--	--	100.0
22010	006	JAB512	457	-----	533	356	365	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	JAB512	458	-----	532	353	366	A	--	A	--	--	100.0
22019	006	JAB512	455	-----	533	354	365	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	JAB512	454	294	-----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
23002	172	JAB512	458	295	-----	356	366	A	A	--	--	--	100.0

[16]赤血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
23005	002	JAB512	456	293	-----	354	362	A	A	--	--	--	100.0
23006	088	JAB512	457	296	-----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	JAB512	457	292	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
23009	088	JAB512	458	294	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
23012	083	JAB512	457	294	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
23018	008	JAB512	455	294	-----	355	365	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	JAB512	457	294	-----	356	366	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	JAB512	459	296	-----	354	364	A	A	--	--	--	100.0
23029	172	JAB512	458	-----	537	356	366	A	--	A	--	--	100.0
23030	088	JAB512	457	-----	535	353	364	A	--	A	--	--	100.0
23032	083	JAB512	457	-----	534	355	364	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	JAB512	458	-----	536	355	364	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	JAB512	457	-----	533	353	364	A	--	A	--	--	100.0
23039	169	JAB512	460	-----	532	354	365	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	JAB512	455	294	-----	354	364	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	JAB512	455	-----	531	357	365	A	--	A	--	--	100.0
24001	169	JAB512	457	-----	533	353	365	A	--	A	--	--	100.0
24002	122	JAB512	457	294	-----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
25001	122	JAB512	457	294	-----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
25002	126	JAB512	456	294	-----	353	365	A	A	--	--	--	100.0
26002	024	JAB512	459	295	-----	355	369	A	A	--	--	--	100.0
26005	009	JAR408	446	284	-----	348	361	--	--	--	--	--	=====
26012	068	JAB512	455	-----	531	355	364	A	--	A	--	--	100.0
27002	008	JAB512	457	297	-----	356	366	A	A	--	--	--	100.0
27003	068	JAB512	454	-----	532	353	367	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	JAB512	457	294	-----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
27006	068	JAB512	456	295	-----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
27007	009	JAR408	448	-----	526	351	361	--	--	--	--	--	=====
27009	008	JAB512	455	-----	536	354	368	A	--	A	--	--	100.0
27010	094	JAB512	458	294	-----	354	364	A	A	--	--	--	100.0
27018	060	JAB512	457	294	-----	355	366	A	A	--	--	--	100.0
27023	090	JAB512	459	-----	533	351	364	A	--	A	--	--	100.0
27031	090	JAB512	455	296	-----	352	365	A	A	--	--	--	100.0
27037	068	JAB512	456	-----	533	353	364	A	--	A	--	--	100.0
27038	057	JAB512	456	-----	534	355	363	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	JAB512	458	294	-----	355	369	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	JAB512	459	-----	536	355	366	A	--	A	--	--	100.0
27045	068	JAB512	450	292	-----	354	364	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	JAB512	456	292	-----	354	363	A	A	--	--	--	100.0
27051	002	JAB512	456	293	-----	349	364	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	JAB512	452	-----	534	353	362	A	--	A	--	--	100.0
28001	090	JAB512	457	294	-----	352	366	A	A	--	--	--	100.0
28007	197	JAB512	457	-----	531	353	365	A	--	A	--	--	100.0
28008	090	JAB512	457	-----	535	354	366	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	JAB512	454	296	-----	356	363	A	A	--	--	--	100.0
28015	002	JAB512	456	-----	531	351	366	A	--	A	--	--	100.0
28018	102	JAB512	459	-----	536	355	365	A	--	A	--	--	100.0
28019	002	JAB512	458	293	-----	354	366	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	JAB512	458	294	-----	356	365	A	A	--	--	--	100.0
28024	006	JAB512	457	294	-----	355	364	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	JAB512	452	295	-----	351	362	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	JAB512	460	294	-----	354	363	A	A	--	--	--	100.0
31002	008	JAB512	455	293	-----	353	363	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	JAB512	456	-----	532	355	364	A	--	A	--	--	100.0
33002	065	JAB512	464	-----	534	354	363	A	--	A	--	--	100.0
33004	008	JAB512	458	-----	535	355	366	A	--	A	--	--	100.0

[16]赤血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
33014	112	JAB512	460	296	-----	358	369	A	A	--	--	--	100.0
34001	008	JAB512	456	294	-----	354	363	A	A	--	--	--	100.0
34002	008	JAB512	454	293	-----	354	366	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	JAB512	457	292	-----	356	364	A	A	--	--	--	100.0
34005	112	JAB512	460	296	-----	360	368	A	A	--	--	--	100.0
34013	112	JAB512	460	-----	536	359	369	A	--	A	--	--	100.0
35006	109	JAB512	458	-----	535	357	368	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	JAB512	457	-----	532	355	364	A	--	A	--	--	100.0
37001	058	JAB512	455	-----	531	354	366	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	JAB512	458	-----	533	359	368	A	--	A	--	--	100.0
38006	054	JAB512	453	-----	541	353	362	A	--	A	--	--	100.0
38008	006	JAB512	456	-----	533	355	365	A	--	A	--	--	100.0
40001	193	JAB512	454	-----	532	357	367	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	JAB512	456	-----	534	356	369	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	JAB512	453	-----	524	351	364	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	JAB512	455	-----	528	353	362	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	JAB512	457	-----	537	355	368	A	--	A	--	--	100.0
40015	008	JAB512	458	296	-----	358	367	A	A	--	--	--	100.0
40022	165	JAB512	454	-----	536	351	362	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	JAB512	456	-----	537	354	365	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	JAB512	455	295	-----	351	360	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	JAB512	454	294	-----	354	363	A	A	--	--	--	100.0
40029	069	JAB512	456	293	-----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
40030	109	JAB512	457	294	-----	354	366	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	JAB512	460	297	-----	356	366	A	A	--	--	--	100.0
40034	193	JAB512	456	-----	531	355	367	A	--	A	--	--	100.0
40035	165	JAB512	455	-----	531	353	362	A	--	A	--	--	100.0
41001	073	JAB512	455	294	-----	354	368	A	A	--	--	--	100.0
41002	008	JAB512	453	-----	530	356	368	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	JAB512	453	292	-----	353	364	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	JAB512	460	293	-----	354	366	A	A	--	--	--	100.0
43004	146	JAB512	456	-----	533	534	365	A	--	A	--	--	100.0
43007	095	JAB516	449	286	-----	349	358	--	--	--	--	--	=====
44002	193	JAB512	458	293	-----	356	368	A	A	--	--	--	100.0
46001	193	JAB512	456	295	-----	351	366	A	A	--	--	--	100.0
47002	109	JAB512	457	-----	538	355	367	A	--	A	--	--	100.0

[17]白血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01007	130	JAB512	58	-----	151	74	37	A	--	A	--	--	100.0
01019	052	JAB512	57	-----	150	72	36	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	JAB512	57	-----	150	72	36	A	--	A	--	--	100.0
02001	008	JAB512	59	29	-----	76	38	A	A	--	--	--	100.0
02003	110	JAB517	56	-----	154	74	36	A	--	A	--	--	100.0
03004	002	JAB512	57	28	-----	74	36	A	A	--	--	--	100.0
04001	185	JAB512	59	30	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	JAB512	58	29	-----	72	33	A	A	--	--	--	100.0
04012	002	JAB512	58	-----	153	70	33	A	--	A	--	--	100.0
06001	136	JAB514	58	28	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
06004	008	JAB512	57	-----	154	74	38	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	JAB512	57	28	-----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
07007	174	JAB512	57	-----	151	75	38	A	--	A	--	--	100.0
08002	008	JAB512	58	30	-----	71	37	A	A	--	--	--	100.0
09004	075	JAB517	55	27	-----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
09007	168	JAB512	57	29	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
09008	062	JAB512	57	28	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
09009	008	JAB512	59	-----	153	74	37	A	--	A	--	--	100.0
09010	002	JAB512	57	29	-----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
09011	002	JAB512	58	29	-----	74	36	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	JAB517	56	27	-----	72	35	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	JAB512	58	-----	151	74	36	A	--	A	--	--	100.0
10002	002	JAB512	57	-----	152	73	36	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	JAB512	58	29	-----	73	38	A	A	--	--	--	100.0
11004	160	JAB512	58	-----	155	73	38	A	--	A	--	--	100.0
11005	175	JAB512	57	28	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
11007	008	JAB512	57	-----	153	71	36	A	--	A	--	--	100.0
11021	176	JAB512	57	-----	155	73	35	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	JAB512	58	-----	152	75	37	A	--	A	--	--	100.0
12003	006	JAB512	57	-----	153	73	36	A	--	A	--	--	100.0
12006	008	JAB512	59	-----	157	74	36	A	--	A	--	--	100.0
12010	122	JAB512	58	-----	153	74	37	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	JAB517	57	28	-----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
12012	008	JAB512	59	-----	156	77	38	A	--	A	--	--	100.0
12013	087	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
12014	075	JAB517	56	-----	152	73	35	A	--	A	--	--	100.0
12015	041	JAB512	57	-----	149	72	36	A	--	A	--	--	100.0
12018	041	JAB512	57	-----	151	72	36	A	--	A	--	--	100.0
13001	050	JAB512	57	28	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	JAB512	58	-----	153	71	36	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	JAB512	58	-----	152	72	34	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	JAB512	57	-----	152	69	33	A	--	A	--	--	100.0
13007	002	JAB512	57	29	-----	73	35	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	JAB512	56	29	-----	72	35	A	A	--	--	--	100.0
13010	008	JAB512	58	29	-----	72	37	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	JAB517	57	-----	158	74	38	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	JAB512	59	-----	155	76	37	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	JAB512	58	30	-----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	JAB512	56	-----	149	72	37	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	JAB512	57	-----	153	74	35	A	--	A	--	--	100.0
13022	008	JAB512	59	30	-----	71	37	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	JAB512	57	29	-----	73	38	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	JAB512	56	29	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	JAB512	57	-----	152	73	36	A	--	A	--	--	100.0
13035	008	JAB512	58	-----	154	74	37	A	--	A	--	--	100.0
13036	006	JAB512	56	28	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0

[17]白血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13038	002	JAB512	58	-----	151	72	32	A	--	A	--	--	100.0
13039	002	JAB512	59	-----	151	72	35	A	--	A	--	--	100.0
13045	002	JAB512	56	29	-----	72	34	A	A	--	--	--	100.0
13049	002	JAB512	58	-----	152	72	36	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	JAB512	58	30	-----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
13055	002	JAB512	57	29	-----	73	35	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
13063	050	JAB512	57	-----	153	73	36	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	JAB512	59	30	-----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	JAB517	56	27	-----	72	35	A	A	--	--	--	100.0
13077	008	JAB512	59	-----	155	75	36	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	JAB512	56	-----	152	75	37	A	--	A	--	--	100.0
13079	041	JAB512	58	28	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	JAB512	58	-----	155	77	38	A	--	A	--	--	100.0
13082	008	JAB512	59	30	-----	76	37	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	JAB512	59	30	-----	76	38	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	JAB512	59	29	-----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
13089	002	JAB512	57	29	-----	70	36	A	A	--	--	--	100.0
13090	008	JAB512	59	30	-----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	JAB512	57	29	-----	70	34	A	A	--	--	--	100.0
13107	050	JAB512	58	-----	153	72	36	A	--	A	--	--	100.0
13108	008	JAB512	58	29	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	JAB512	59	30	-----	76	38	A	A	--	--	--	100.0
13115	041	JAB512	58	29	-----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
13123	008	JAB512	59	30	-----	76	38	A	A	--	--	--	100.0
14002	008	JAB512	59	28	-----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
14004	008	JAB512	58	30	-----	76	37	A	A	--	--	--	100.0
14005	137	JAB512	57	-----	151	72	37	A	--	A	--	--	100.0
14006	006	JAB512	56	-----	152	74	36	A	--	A	--	--	100.0
14007	041	JAB512	57	29	-----	69	34	A	A	--	--	--	100.0
14018	008	JAB512	57	29	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
14022	006	JAB512	56	-----	151	75	37	A	--	A	--	--	100.0
14023	006	JAB512	58	-----	151	73	37	A	--	A	--	--	100.0
14025	006	JAB512	56	-----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
14026	008	JAB512	57	28	-----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	JAB512	56	28	-----	74	36	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	JAB512	56	-----	151	75	36	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	JAB512	59	29	-----	73	38	A	A	--	--	--	100.0
15008	002	JAB512	57	30	-----	71	35	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	JAB512	58	-----	151	73	36	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	JAB512	57	-----	154	72	36	A	--	A	--	--	100.0
16005	006	JAB512	56	29	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
16008	089	JAB514	58	-----	159	73	35	A	--	A	--	--	100.0
17003	190	JAB512	57	-----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
18003	008	JAB512	58	29	-----	74	38	A	A	--	--	--	100.0
20001	006	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
20002	128	JAB512	58	29	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
20003	081	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
20004	081	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	JAB512	57	-----	152	74	37	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	JAB512	57	-----	151	74	37	A	--	A	--	--	100.0
22010	006	JAB512	57	-----	151	75	37	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	JAB512	58	-----	155	74	37	A	--	A	--	--	100.0
22019	006	JAB512	56	-----	151	74	37	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
23002	172	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0

[17]白血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
23005	002	JAB512	58	29	----	71	37	A	A	--	--	--	100.0
23006	088	JAB512	58	29	----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	JAB512	57	29	----	72	37	A	A	--	--	--	100.0
23009	088	JAB512	57	29	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
23012	083	JAB512	56	28	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
23018	008	JAB512	59	30	----	75	38	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	JAB512	57	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	JAB512	58	29	----	74	38	A	A	--	--	--	100.0
23029	172	JAB512	57	----	152	73	36	A	--	A	--	--	100.0
23030	088	JAB512	56	----	152	73	38	A	--	A	--	--	100.0
23032	083	JAB512	56	----	150	73	37	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	JAB512	58	----	153	75	38	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	JAB512	57	----	151	72	37	A	--	A	--	--	100.0
23039	169	JAB512	56	----	151	72	36	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	JAB512	58	29	----	73	38	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	JAB512	55	----	154	72	37	A	--	A	--	--	100.0
24001	169	JAB512	56	----	151	71	36	A	--	A	--	--	100.0
24002	122	JAB512	58	29	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
25001	122	JAB512	58	29	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
25002	126	JAB512	57	29	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
26002	024	JAB512	57	28	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
26005	009	JAR408	56	29	----	72	37	--	--	--	--	--	=====
26012	068	JAB512	57	----	150	71	37	A	--	A	--	--	100.0
27002	008	JAB512	58	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
27003	068	JAB512	56	----	150	72	37	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	JAB512	58	29	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
27006	068	JAB512	56	28	----	71	36	A	A	--	--	--	100.0
27007	009	JAR408	55	----	148	73	36	--	--	--	--	--	=====
27009	008	JAB512	59	----	156	76	38	A	--	A	--	--	100.0
27010	094	JAB512	57	29	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
27018	060	JAB512	58	29	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
27023	090	JAB512	57	----	152	74	37	A	--	A	--	--	100.0
27031	090	JAB512	55	29	----	70	36	A	A	--	--	--	100.0
27037	068	JAB512	57	----	149	72	36	A	--	A	--	--	100.0
27038	057	JAB512	57	----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	JAB512	57	28	----	71	35	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	JAB512	58	----	156	75	37	A	--	A	--	--	100.0
27045	068	JAB512	57	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	JAB512	58	28	----	71	37	A	A	--	--	--	100.0
27051	002	JAB512	57	28	----	71	33	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	JAB512	56	----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
28001	090	JAB512	58	29	----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
28007	197	JAB512	57	----	151	72	36	A	--	A	--	--	100.0
28008	090	JAB512	58	----	153	73	37	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	JAB512	58	30	----	76	37	A	A	--	--	--	100.0
28015	002	JAB512	58	----	152	71	35	A	--	A	--	--	100.0
28018	102	JAB512	58	----	155	76	37	A	--	A	--	--	100.0
28019	002	JAB512	57	28	----	71	35	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	JAB512	57	29	----	74	38	A	A	--	--	--	100.0
28024	006	JAB512	57	28	----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	JAB512	56	28	----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	JAB512	58	28	----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
31002	008	JAB512	58	29	----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	JAB512	58	----	152	74	38	A	--	A	--	--	100.0
33002	065	JAB512	57	----	151	74	37	A	--	A	--	--	100.0
33004	008	JAB512	57	----	154	74	38	A	--	A	--	--	100.0

[17]白血球 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
33014	112	JAB512	57	28	-----	72	37	A	A	--	--	--	100.0
34001	008	JAB512	59	29	-----	74	36	A	A	--	--	--	100.0
34002	008	JAB512	58	28	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	JAB512	57	29	-----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
34005	112	JAB512	57	28	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
34013	112	JAB512	57	-----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
35006	109	JAB512	56	-----	150	67	30	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	JAB512	56	-----	151	71	31	A	--	A	--	--	100.0
37001	058	JAB512	57	-----	154	72	36	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	JAB512	58	-----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
38006	054	JAB512	61	-----	161	73	36	A	--	A	--	--	100.0
38008	006	JAB512	56	-----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
40001	193	JAB512	58	-----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	JAB512	59	-----	155	72	36	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	JAB512	57	-----	155	72	34	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	JAB512	57	-----	154	70	35	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	JAB512	56	-----	151	72	37	A	--	A	--	--	100.0
40015	008	JAB512	58	29	-----	74	37	A	A	--	--	--	100.0
40022	165	JAB512	56	-----	156	72	37	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	JAB512	56	-----	150	72	37	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	JAB512	57	28	-----	70	35	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	JAB512	57	27	-----	57	26	A	A	--	--	--	100.0
40029	069	JAB512	59	29	-----	73	37	A	A	--	--	--	100.0
40030	109	JAB512	57	29	-----	72	37	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	JAB512	58	29	-----	72	36	A	A	--	--	--	100.0
40034	193	JAB512	58	-----	154	73	37	A	--	A	--	--	100.0
40035	165	JAB512	58	-----	155	72	35	A	--	A	--	--	100.0
41001	073	JAB512	57	29	-----	74	38	A	A	--	--	--	100.0
41002	008	JAB512	57	-----	152	72	37	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	JAB512	57	29	-----	73	36	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	JAB512	58	29	-----	74	38	A	A	--	--	--	100.0
43004	146	JAB512	57	-----	152	73	37	A	--	A	--	--	100.0
43007	095	JAB516	60	28	-----	73	36	--	--	--	--	--	=====
44002	193	JAB512	57	29	-----	75	37	A	A	--	--	--	100.0
46001	193	JAB512	57	30	-----	74	36	A	A	--	--	--	100.0
47002	109	JAB512	56	-----	150	72	37	A	--	A	--	--	100.0

[18]ヘマトクリット 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01007	130	JAB512	38.4	-----	48.8	30.5	35.1	A	--	A	--	--	100.0
01019	052	JAB512	38.4	-----	48.9	30.7	35.2	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	JAB512	38.3	-----	48.7	30.7	34.8	A	--	A	--	--	100.0
02001	008	JAB512	37.9	22.2	-----	30.6	35.1	A	A	--	--	--	100.0
02003	110	JAB517	37.4	-----	48.0	30.0	34.0	A	--	A	--	--	100.0
03004	002	JAB512	38.4	22.3	-----	30.0	34.5	A	A	--	--	--	100.0
04001	185	JAB512	38.4	22.4	-----	29.7	34.7	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	JAB512	38.6	22.3	-----	30.0	34.4	A	A	--	--	--	100.0
04012	002	JAB512	38.4	-----	48.4	30.1	34.4	A	--	A	--	--	100.0
06001	136	JAB514	38.5	21.8	-----	30.7	35.3	A	A	--	--	--	100.0
06004	008	JAB512	38.0	-----	48.0	30.1	34.3	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	JAB512	38.1	22.2	-----	29.9	34.0	A	A	--	--	--	100.0
07007	174	JAB512	38.0	-----	48.7	29.8	34.4	A	--	A	--	--	100.0
08002	008	JAB512	37.7	22.2	-----	30.3	34.4	A	A	--	--	--	100.0
09004	075	JAB517	38.0	21.8	-----	30.5	34.8	A	A	--	--	--	100.0
09007	168	JAB512	37.9	22.1	-----	29.7	34.2	A	A	--	--	--	100.0
09008	062	JAB512	38.2	22.3	-----	30.0	34.2	A	A	--	--	--	100.0
09009	008	JAB512	37.4	-----	47.8	30.6	35.0	A	--	A	--	--	100.0
09010	002	JAB512	38.0	22.4	-----	31.0	35.2	A	A	--	--	--	100.0
09011	002	JAB512	38.4	22.4	-----	30.7	35.4	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	JAB517	38.0	21.5	-----	30.3	34.7	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	JAB512	38.4	-----	49.0	30.4	34.9	A	--	A	--	--	100.0
10002	002	JAB512	38.4	-----	49.0	30.4	35.0	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	JAB512	37.6	22.1	-----	30.1	34.4	A	A	--	--	--	100.0
11004	160	JAB512	38.0	-----	48.9	29.9	34.5	A	--	A	--	--	100.0
11005	175	JAB512	38.2	22.1	-----	29.7	34.1	A	A	--	--	--	100.0
11007	008	JAB512	37.4	-----	47.8	29.8	34.3	A	--	A	--	--	100.0
11021	176	JAB512	38.2	-----	48.7	30.2	35.1	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	JAB512	38.4	-----	49.2	30.2	34.4	A	--	A	--	--	100.0
12003	006	JAB512	38.0	-----	48.5	29.7	34.4	A	--	A	--	--	100.0
12006	008	JAB512	37.7	-----	48.2	30.2	34.8	A	--	A	--	--	100.0
12010	122	JAB512	37.9	-----	48.2	30.3	34.8	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	JAB517	37.8	21.7	-----	30.3	35.1	A	A	--	--	--	100.0
12012	008	JAB512	37.7	-----	48.0	30.5	34.8	A	--	A	--	--	100.0
12013	087	JAB512	39.0	22.7	-----	30.4	34.5	A	A	--	--	--	100.0
12014	075	JAB517	37.8	-----	48.5	30.6	34.6	A	--	A	--	--	100.0
12015	041	JAB512	38.0	-----	48.6	29.3	34.0	A	--	A	--	--	100.0
12018	041	JAB512	38.0	-----	48.6	29.5	33.8	A	--	A	--	--	100.0
13001	050	JAB512	38.2	22.5	-----	29.4	33.8	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	JAB512	38.3	-----	48.3	30.4	34.9	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	JAB512	38.3	-----	48.8	30.5	35.1	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	JAB512	38.2	-----	48.9	30.7	35.5	A	--	A	--	--	100.0
13007	002	JAB512	38.3	22.3	-----	30.7	35.2	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	JAB512	38.3	22.4	-----	30.3	34.8	A	A	--	--	--	100.0
13010	008	JAB512	37.7	21.9	-----	30.4	34.8	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	JAB517	37.7	-----	47.5	30.8	35.7	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	JAB512	37.7	-----	47.8	30.6	35.1	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	JAB512	37.8	21.8	-----	30.6	35.3	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	JAB512	37.9	-----	48.5	29.2	34.0	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	JAB512	38.1	-----	48.8	30.4	34.8	A	--	A	--	--	100.0
13022	008	JAB512	37.5	22.0	-----	30.3	35.1	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	JAB512	38.1	22.3	-----	30.8	35.1	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	JAB512	38.4	22.1	-----	29.6	34.2	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	JAB512	39.0	-----	49.2	30.4	34.5	A	--	A	--	--	100.0
13035	008	JAB512	37.6	-----	48.3	30.3	34.8	A	--	A	--	--	100.0
13036	006	JAB512	38.0	22.2	-----	30.0	34.4	A	A	--	--	--	100.0

[18]ヘマトクリット 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13038	002	JAB512	38.1	-----	48.7	30.4	35.0	A	--	A	--	--	100.0
13039	002	JAB512	38.3	-----	48.7	30.7	35.2	A	--	A	--	--	100.0
13045	002	JAB512	38.1	22.3	-----	30.2	34.6	A	A	--	--	--	100.0
13049	002	JAB512	38.3	-----	48.7	30.5	35.3	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	JAB512	37.6	21.9	-----	30.7	35.0	A	A	--	--	--	100.0
13055	002	JAB512	38.4	22.5	-----	30.5	35.2	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	JAB512	38.3	22.4	-----	30.2	34.3	A	A	--	--	--	100.0
13063	050	JAB512	38.3	-----	49.2	29.5	33.7	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	JAB512	37.7	22.1	-----	30.9	35.0	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	JAB517	38.1	21.7	-----	30.5	34.9	A	A	--	--	--	100.0
13077	008	JAB512	37.8	-----	47.8	30.5	35.2	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	JAB512	38.0	-----	48.5	29.7	34.0	A	--	A	--	--	100.0
13079	041	JAB512	38.2	22.2	-----	29.4	33.8	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	JAB512	37.8	-----	48.1	30.6	35.3	A	--	A	--	--	100.0
13082	008	JAB512	37.8	22.3	-----	30.5	34.9	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	JAB512	37.7	22.1	-----	30.6	35.3	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	JAB512	38.4	22.5	-----	30.0	34.7	A	A	--	--	--	100.0
13089	002	JAB512	38.3	22.3	-----	30.7	35.0	A	A	--	--	--	100.0
13090	008	JAB512	37.5	22.1	-----	30.3	35.3	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	JAB512	38.1	22.2	-----	30.8	35.2	A	A	--	--	--	100.0
13107	050	JAB512	38.4	-----	48.8	29.5	33.8	A	--	A	--	--	100.0
13108	008	JAB512	37.4	21.9	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	JAB512	37.8	22.2	-----	30.5	34.6	A	A	--	--	--	100.0
13115	041	JAB512	38.1	22.3	-----	29.2	33.8	A	A	--	--	--	100.0
13123	008	JAB512	37.7	22.0	-----	30.8	35.1	A	A	--	--	--	100.0
14002	008	JAB512	37.7	22.1	-----	30.8	34.9	A	A	--	--	--	100.0
14004	008	JAB512	37.6	22.2	-----	30.7	35.0	A	A	--	--	--	100.0
14005	137	JAB512	38.4	-----	49.1	30.1	34.4	A	--	A	--	--	100.0
14006	006	JAB512	38.1	-----	48.5	29.7	34.1	A	--	A	--	--	100.0
14007	041	JAB512	38.0	22.0	-----	29.5	34.4	A	A	--	--	--	100.0
14018	008	JAB512	37.6	21.9	-----	30.6	34.9	A	A	--	--	--	100.0
14022	006	JAB512	38.2	-----	48.7	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
14023	006	JAB512	38.0	-----	48.5	29.9	34.2	A	--	A	--	--	100.0
14025	006	JAB512	38.1	-----	48.5	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
14026	008	JAB512	37.7	21.8	-----	30.3	34.4	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	JAB512	38.3	22.0	-----	29.6	33.7	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	JAB512	38.0	-----	48.6	29.8	34.0	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	JAB512	37.8	22.1	-----	30.4	34.7	A	A	--	--	--	100.0
15008	002	JAB512	37.9	22.5	-----	30.4	35.0	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	JAB512	38.3	-----	48.6	30.7	35.0	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	JAB512	38.4	-----	48.9	30.3	34.6	A	--	A	--	--	100.0
16005	006	JAB512	38.0	22.2	-----	29.8	34.2	A	A	--	--	--	100.0
16008	089	JAB514	37.0	-----	47.4	29.6	34.0	A	--	A	--	--	100.0
17003	190	JAB512	38.3	-----	49.2	29.7	34.1	A	--	A	--	--	100.0
18003	008	JAB512	37.9	22.0	-----	29.8	34.3	A	A	--	--	--	100.0
20001	006	JAB512	38.0	22.1	-----	29.9	34.2	A	A	--	--	--	100.0
20002	128	JAB512	38.2	22.4	-----	29.9	34.0	A	A	--	--	--	100.0
20003	081	JAB512	38.2	22.3	-----	29.7	34.1	A	A	--	--	--	100.0
20004	081	JAB512	38.2	22.3	-----	29.7	34.1	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	JAB512	38.2	-----	49.0	29.8	34.3	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	JAB512	38.2	-----	49.2	29.9	34.5	A	--	A	--	--	100.0
22010	006	JAB512	38.0	-----	48.5	30.0	34.2	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	JAB512	37.9	-----	48.0	29.9	34.6	A	--	A	--	--	100.0
22019	006	JAB512	38.0	-----	48.6	29.7	34.3	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	JAB512	38.4	22.6	-----	29.7	34.3	A	A	--	--	--	100.0
23002	172	JAB512	38.3	22.4	-----	30.2	34.4	A	A	--	--	--	100.0

[18]ヘマトクリット 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
23005	002	JAB512	38.1	22.3	----	30.9	35.3	A	A	--	--	--	100.0
23006	088	JAB512	38.2	22.5	----	30.2	34.6	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	JAB512	38.8	22.4	----	30.0	34.2	A	A	--	--	--	100.0
23009	088	JAB512	38.4	22.4	----	30.3	34.6	A	A	--	--	--	100.0
23012	083	JAB512	38.2	22.4	----	30.1	34.5	A	A	--	--	--	100.0
23018	008	JAB512	37.6	22.0	----	30.5	35.0	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	JAB512	38.0	22.1	----	29.9	34.4	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	JAB512	38.5	22.5	----	30.2	34.7	A	A	--	--	--	100.0
23029	172	JAB512	38.2	----	48.9	30.0	34.2	A	--	A	--	--	100.0
23030	088	JAB512	38.4	----	49.0	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
23032	083	JAB512	38.2	----	49.0	30.1	34.5	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	JAB512	38.5	----	49.2	30.1	34.7	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	JAB512	38.7	----	49.3	30.1	34.3	A	--	A	--	--	100.0
23039	169	JAB512	38.9	----	49.2	29.8	34.1	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	JAB512	37.6	22.0	----	30.0	34.6	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	JAB512	38.6	----	48.9	30.5	35.0	A	--	A	--	--	100.0
24001	169	JAB512	38.7	----	49.2	29.8	34.5	A	--	A	--	--	100.0
24002	122	JAB512	37.9	22.1	----	30.3	34.8	A	A	--	--	--	100.0
25001	122	JAB512	37.9	22.1	----	30.3	34.8	A	A	--	--	--	100.0
25002	126	JAB512	38.4	22.4	----	30.3	34.6	A	A	--	--	--	100.0
26002	024	JAB512	38.8	22.7	----	30.7	34.9	A	A	--	--	--	100.0
26005	009	JAR408	35.9	20.5	----	29.9	35.2	--	--	--	--	--	=====
26012	068	JAB512	38.3	----	48.9	30.7	34.8	A	--	A	--	--	100.0
27002	008	JAB512	37.6	22.2	----	30.2	34.5	A	A	--	--	--	100.0
27003	068	JAB512	38.3	----	49.1	30.4	35.1	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	JAB512	37.9	22.1	----	30.3	34.8	A	A	--	--	--	100.0
27006	068	JAB512	38.5	22.6	----	30.5	34.8	A	A	--	--	--	100.0
27007	009	JAR408	36.1	----	46.9	30.3	35.5	--	--	--	--	--	=====
27009	008	JAB512	37.7	----	48.4	30.3	35.3	A	--	A	--	--	100.0
27010	094	JAB512	38.8	22.4	----	29.9	34.2	A	A	--	--	--	100.0
27018	060	JAB512	37.9	22.1	----	30.3	34.8	A	A	--	--	--	100.0
27023	090	JAB512	38.7	----	49.2	30.1	34.5	A	--	A	--	--	100.0
27031	090	JAB512	39.8	23.2	----	30.6	34.9	A	A	--	--	--	100.0
27037	068	JAB512	38.4	----	49.1	30.5	35.2	A	--	A	--	--	100.0
27038	057	JAB512	38.4	----	48.6	29.7	34.3	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	JAB512	38.1	22.3	----	30.5	35.3	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	JAB512	38.5	----	49.2	29.8	34.2	A	--	A	--	--	100.0
27045	068	JAB512	37.7	22.2	----	30.7	35.0	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	JAB512	38.4	22.4	----	30.7	35.0	A	A	--	--	--	100.0
27051	002	JAB512	38.2	22.3	----	30.3	35.1	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	JAB512	37.9	----	49.0	30.5	35.1	A	--	A	--	--	100.0
28001	090	JAB512	39.0	22.8	----	30.4	34.9	A	A	--	--	--	100.0
28007	197	JAB512	38.6	----	49.2	29.8	34.6	A	--	A	--	--	100.0
28008	090	JAB512	38.8	----	49.8	30.5	34.7	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	JAB512	37.8	22.4	----	30.5	34.6	A	A	--	--	--	100.0
28015	002	JAB512	38.0	----	48.5	31.0	35.8	A	--	A	--	--	100.0
28018	102	JAB512	38.5	----	49.2	29.8	34.2	A	--	A	--	--	100.0
28019	002	JAB512	38.2	22.3	----	31.4	35.4	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	JAB512	38.7	22.7	----	30.2	34.5	A	A	--	--	--	100.0
28024	006	JAB512	38.0	22.2	----	29.8	34.2	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	JAB512	38.2	22.6	----	30.5	34.9	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	JAB512	38.6	22.4	----	30.7	34.8	A	A	--	--	--	100.0
31002	008	JAB512	37.5	21.9	----	29.9	34.3	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	JAB512	37.8	----	48.1	30.1	34.9	A	--	A	--	--	100.0
33002	065	JAB512	38.9	----	49.2	30.2	34.6	A	--	A	--	--	100.0
33004	008	JAB512	37.8	----	48.3	30.1	34.8	A	--	A	--	--	100.0

[18]ヘマトクリット 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
33014	112	JAB512	38.3	22.4	-----	29.8	34.2	A	A	--	--	--	100.0
34001	008	JAB512	37.8	22.1	-----	30.2	34.5	A	A	--	--	--	100.0
34002	008	JAB512	37.7	22.1	-----	30.0	34.9	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	JAB512	37.8	22.1	-----	30.1	34.8	A	A	--	--	--	100.0
34005	112	JAB512	38.4	22.4	-----	29.9	34.1	A	A	--	--	--	100.0
34013	112	JAB512	38.4	-----	49.1	29.9	34.0	A	--	A	--	--	100.0
35006	109	JAB512	38.3	-----	49.3	31.0	35.2	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	JAB512	38.6	-----	49.0	30.6	35.0	A	--	A	--	--	100.0
37001	058	JAB512	37.6	-----	48.0	29.8	33.8	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	JAB512	37.7	-----	48.2	30.6	35.1	A	--	A	--	--	100.0
38006	054	JAB512	38.5	-----	51.2	28.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0
38008	006	JAB512	38.0	-----	48.5	29.7	34.2	A	--	A	--	--	100.0
40001	193	JAB512	37.6	-----	48.2	30.9	35.2	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	JAB512	37.8	-----	48.5	30.8	35.2	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	JAB512	38.3	-----	48.6	29.7	34.4	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	JAB512	38.5	-----	49.0	29.9	34.1	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	JAB512	38.5	-----	49.3	29.8	34.4	A	--	A	--	--	100.0
40015	008	JAB512	37.7	22.2	-----	30.3	34.7	A	A	--	--	--	100.0
40022	165	JAB512	38.2	-----	49.5	29.5	34.1	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	JAB512	38.5	-----	49.4	29.8	34.3	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	JAB512	38.3	22.6	-----	29.3	33.8	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	JAB512	37.9	22.3	-----	30.8	35.2	A	A	--	--	--	100.0
40029	069	JAB512	37.9	22.1	-----	30.2	34.7	A	A	--	--	--	100.0
40030	109	JAB512	38.5	22.5	-----	29.8	34.1	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	JAB512	38.1	22.4	-----	29.3	34.0	A	A	--	--	--	100.0
40034	193	JAB512	38.2	-----	48.7	30.2	34.8	A	--	A	--	--	100.0
40035	165	JAB512	38.7	-----	49.4	29.7	33.9	A	--	A	--	--	100.0
41001	073	JAB512	38.4	22.5	-----	29.9	34.6	A	A	--	--	--	100.0
41002	008	JAB512	37.4	-----	47.9	30.3	34.7	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	JAB512	38.3	22.4	-----	30.0	34.4	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	JAB512	37.9	22.0	-----	30.0	34.6	A	A	--	--	--	100.0
43004	146	JAB512	38.3	-----	49.1	29.8	34.2	A	--	A	--	--	100.0
43007	095	JAB516	36.6	21.5	-----	28.9	33.2	--	--	--	--	--	=====
44002	193	JAB512	38.3	22.2	-----	30.2	35.2	A	A	--	--	--	100.0
46001	193	JAB512	38.1	22.3	-----	30.1	34.8	A	A	--	--	--	100.0
47002	109	JAB512	38.6	-----	49.4	29.9	34.3	A	--	A	--	--	100.0

[19]血小板 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01007	130	JAB512	25.6	-----	69.9	29.0	19.5	A	--	A	--	--	100.0
01019	052	JAB512	25.4	-----	70.7	29.0	19.4	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	JAB512	26.4	-----	71.6	28.5	19.8	A	--	A	--	--	100.0
02001	008	JAB512	26.0	10.2	-----	29.4	20.0	A	A	--	--	--	100.0
02003	110	JAB517	26.8	-----	73.4	28.0	20.3	A	--	A	--	--	100.0
03004	002	JAB512	26.0	10.3	-----	29.5	20.2	A	A	--	--	--	100.0
04001	185	JAB512	26.7	10.5	-----	29.9	20.1	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	JAB512	26.6	10.2	-----	28.7	19.4	A	A	--	--	--	100.0
04012	002	JAB512	27.6	-----	69.5	28.5	19.9	A	--	A	--	--	100.0
06001	136	JAB514	26.0	10.4	-----	28.8	19.5	A	A	--	--	--	100.0
06004	008	JAB512	26.2	-----	71.4	29.4	20.1	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	JAB512	26.0	10.7	-----	29.4	20.5	A	A	--	--	--	100.0
07007	174	JAB512	26.0	-----	72.1	28.1	19.8	A	--	A	--	--	100.0
08002	008	JAB512	26.5	10.5	-----	29.1	19.9	A	A	--	--	--	100.0
09004	075	JAB517	26.1	8.8	-----	27.6	19.1	A	B	--	--	--	85.7
09007	168	JAB512	26.0	10.4	-----	28.3	19.5	A	A	--	--	--	100.0
09008	062	JAB512	26.2	10.5	-----	29.3	21.0	A	A	--	--	--	100.0
09009	008	JAB512	25.5	-----	68.4	29.2	19.6	A	--	A	--	--	100.0
09010	002	JAB512	25.9	10.7	-----	29.6	20.2	A	A	--	--	--	100.0
09011	002	JAB512	26.5	10.2	-----	30.6	20.4	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	JAB517	26.1	9.1	-----	27.6	19.0	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	JAB512	26.6	-----	71.0	29.5	21.0	A	--	A	--	--	100.0
10002	002	JAB512	25.6	-----	71.1	28.7	21.1	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	JAB512	25.9	10.5	-----	29.1	20.5	A	A	--	--	--	100.0
11004	160	JAB512	26.3	-----	70.9	29.7	19.4	A	--	A	--	--	100.0
11005	175	JAB512	26.7	11.8	-----	29.6	20.2	A	C	--	--	--	71.4
11007	008	JAB512	25.9	-----	70.3	29.6	20.1	A	--	A	--	--	100.0
11021	176	JAB512	25.6	-----	70.5	28.2	20.4	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	JAB512	26.0	-----	71.9	29.7	19.9	A	--	A	--	--	100.0
12003	006	JAB512	26.3	-----	71.3	29.0	19.8	A	--	A	--	--	100.0
12006	008	JAB512	26.2	-----	68.9	29.0	19.7	A	--	A	--	--	100.0
12010	122	JAB512	26.1	-----	70.3	29.1	20.0	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	JAB517	26.0	8.5	-----	28.2	19.9	A	B	--	--	--	78.6
12012	008	JAB512	25.9	-----	68.7	28.8	19.6	A	--	A	--	--	100.0
12013	087	JAB512	26.4	10.2	-----	29.8	20.4	A	A	--	--	--	100.0
12014	075	JAB517	25.5	-----	72.3	27.7	19.1	A	--	A	--	--	100.0
12015	041	JAB512	25.6	-----	70.7	28.1	20.1	A	--	A	--	--	100.0
12018	041	JAB512	26.1	-----	69.5	28.5	19.1	A	--	A	--	--	100.0
13001	050	JAB512	26.4	10.2	-----	28.1	20.1	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	JAB512	27.0	-----	72.9	30.1	20.2	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	JAB512	25.7	-----	70.9	29.4	20.1	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	JAB512	26.3	-----	71.1	29.5	20.2	A	--	A	--	--	100.0
13007	002	JAB512	26.4	10.3	-----	29.8	20.2	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	JAB512	25.6	9.9	-----	29.6	20.4	A	A	--	--	--	100.0
13010	008	JAB512	25.9	10.6	-----	29.4	20.5	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	JAB517	26.1	-----	71.8	28.6	19.9	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	JAB512	26.3	-----	69.4	28.9	19.9	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	JAB512	26.7	10.4	-----	28.7	19.9	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	JAB512	26.6	-----	68.8	28.3	18.8	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	JAB512	25.4	-----	71.7	29.9	19.9	A	--	A	--	--	100.0
13022	008	JAB512	26.0	10.3	-----	28.9	19.7	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	JAB512	26.0	10.9	-----	29.6	20.2	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	JAB512	26.0	10.0	-----	28.4	19.4	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	JAB512	26.4	-----	72.2	29.8	20.4	A	--	A	--	--	100.0
13035	008	JAB512	25.5	-----	69.5	29.1	20.0	A	--	A	--	--	100.0
13036	006	JAB512	26.1	10.1	-----	28.8	20.0	A	A	--	--	--	100.0

[19]血小板 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13038	002	JAB512	25.6	-----	70.8	28.8	19.8	A	--	A	--	--	100.0
13039	002	JAB512	25.7	-----	71.4	30.2	20.3	A	--	A	--	--	100.0
13045	002	JAB512	26.0	10.4	-----	29.7	20.3	A	A	--	--	--	100.0
13049	002	JAB512	25.8	-----	70.8	30.1	20.1	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	JAB512	25.6	10.4	-----	28.8	20.2	A	A	--	--	--	100.0
13055	002	JAB512	25.6	9.8	-----	29.6	20.6	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	JAB512	25.7	10.1	-----	28.9	20.1	A	A	--	--	--	100.0
13063	050	JAB512	26.2	-----	69.6	28.2	19.8	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	JAB512	25.8	10.4	-----	29.3	19.9	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	JAB517	26.5	8.6	-----	27.3	19.1	A	B	--	--	--	78.6
13077	008	JAB512	26.1	-----	70.4	28.5	20.0	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	JAB512	26.4	-----	71.9	29.2	20.0	A	--	A	--	--	100.0
13079	041	JAB512	25.4	10.2	-----	28.2	19.7	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	JAB512	26.2	-----	69.0	29.0	19.7	A	--	A	--	--	100.0
13082	008	JAB512	25.5	10.3	-----	29.2	20.0	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	JAB512	26.0	10.2	-----	29.5	20.3	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	JAB512	26.7	10.0	-----	29.4	20.2	A	A	--	--	--	100.0
13089	002	JAB512	25.7	9.9	-----	29.9	20.3	A	A	--	--	--	100.0
13090	008	JAB512	25.7	10.4	-----	28.9	20.2	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	JAB512	26.0	10.5	-----	28.9	20.7	A	A	--	--	--	100.0
13107	050	JAB512	25.6	-----	70.3	28.6	19.5	A	--	A	--	--	100.0
13108	008	JAB512	26.0	10.6	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	JAB512	25.7	10.3	-----	29.0	20.0	A	A	--	--	--	100.0
13115	041	JAB512	25.2	10.2	-----	27.2	19.7	A	A	--	--	--	100.0
13123	008	JAB512	26.2	10.3	-----	29.4	20.4	A	A	--	--	--	100.0
14002	008	JAB512	26.1	10.4	-----	29.0	19.9	A	A	--	--	--	100.0
14004	008	JAB512	26.0	10.5	-----	28.9	19.6	A	A	--	--	--	100.0
14005	137	JAB512	26.2	-----	72.0	30.7	20.5	A	--	A	--	--	100.0
14006	006	JAB512	26.1	-----	71.6	29.2	20.2	A	--	A	--	--	100.0
14007	041	JAB512	26.4	10.1	-----	27.6	20.3	A	A	--	--	--	100.0
14018	008	JAB512	26.1	10.3	-----	29.5	20.0	A	A	--	--	--	100.0
14022	006	JAB512	26.1	-----	71.1	28.9	19.3	A	--	A	--	--	100.0
14023	006	JAB512	26.1	-----	71.5	29.0	19.9	A	--	A	--	--	100.0
14025	006	JAB512	26.0	-----	71.5	29.8	20.4	A	--	A	--	--	100.0
14026	008	JAB512	26.1	10.5	-----	29.1	20.3	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	JAB512	26.0	10.4	-----	28.1	19.6	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	JAB512	26.0	-----	71.5	29.2	19.9	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	JAB512	25.4	10.4	-----	29.6	20.5	A	A	--	--	--	100.0
15008	002	JAB512	26.1	10.5	-----	29.6	20.7	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	JAB512	26.3	-----	71.0	30.2	20.1	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	JAB512	26.3	-----	70.5	28.5	19.5	A	--	A	--	--	100.0
16005	006	JAB512	26.1	10.2	-----	26.5	19.8	A	A	--	--	--	100.0
16008	089	JAB514	27.0	-----	69.9	28.0	19.0	A	--	A	--	--	100.0
17003	190	JAB512	26.2	-----	71.0	29.1	20.0	A	--	A	--	--	100.0
18003	008	JAB512	26.1	10.2	-----	29.5	19.8	A	A	--	--	--	100.0
20001	006	JAB512	26.8	10.1	-----	29.7	19.7	A	A	--	--	--	100.0
20002	128	JAB512	26.1	10.6	-----	29.6	20.4	A	A	--	--	--	100.0
20003	081	JAB512	26.0	10.1	-----	28.3	19.6	A	A	--	--	--	100.0
20004	081	JAB512	26.0	10.1	-----	28.3	19.6	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	JAB512	26.4	-----	72.0	29.5	20.0	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	JAB512	26.2	-----	69.6	28.3	19.4	A	--	A	--	--	100.0
22010	006	JAB512	26.4	-----	71.6	29.2	20.3	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	JAB512	26.3	-----	70.4	29.5	20.2	A	--	A	--	--	100.0
22019	006	JAB512	26.1	-----	71.2	28.9	19.9	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	JAB512	26.0	10.2	-----	27.6	19.8	A	A	--	--	--	100.0
23002	172	JAB512	26.5	10.6	-----	29.4	20.1	A	A	--	--	--	100.0

[19]血小板 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
23005	002	JAB512	26.9	10.5	----	31.0	20.7	A	A	--	--	--	100.0
23006	088	JAB512	26.0	10.0	----	29.4	19.9	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	JAB512	27.5	10.0	----	30.9	20.9	A	A	--	--	--	100.0
23009	088	JAB512	25.8	10.2	----	29.0	20.0	A	A	--	--	--	100.0
23012	083	JAB512	25.7	10.0	----	29.1	20.1	A	A	--	--	--	100.0
23018	008	JAB512	25.8	10.2	----	29.1	20.0	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	JAB512	26.3	10.2	----	29.3	19.7	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	JAB512	26.0	10.2	----	29.5	19.9	A	A	--	--	--	100.0
23029	172	JAB512	26.6	----	72.3	29.6	20.2	A	--	A	--	--	100.0
23030	088	JAB512	25.9	----	71.5	29.0	20.0	A	--	A	--	--	100.0
23032	083	JAB512	25.7	----	71.8	29.1	20.1	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	JAB512	25.9	----	71.0	29.4	20.4	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	JAB512	26.7	----	72.1	30.2	20.4	A	--	A	--	--	100.0
23039	169	JAB512	26.6	----	72.0	30.4	20.4	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	JAB512	26.0	10.2	----	29.4	20.2	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	JAB512	26.8	----	73.7	29.8	21.0	A	--	A	--	--	100.0
24001	169	JAB512	26.5	----	71.9	30.3	20.8	A	--	A	--	--	100.0
24002	122	JAB512	26.1	10.4	----	29.1	20.0	A	A	--	--	--	100.0
25001	122	JAB512	26.1	10.4	----	29.1	20.0	A	A	--	--	--	100.0
25002	126	JAB512	26.5	10.8	----	29.7	20.5	A	A	--	--	--	100.0
26002	024	JAB512	26.3	10.4	----	29.0	20.1	A	A	--	--	--	100.0
26005	009	JAR408	26.0	11.4	----	28.2	19.6	--	--	--	--	--	=====
26012	068	JAB512	26.9	----	73.0	30.3	20.9	A	--	A	--	--	100.0
27002	008	JAB512	26.4	10.6	----	29.6	20.3	A	A	--	--	--	100.0
27003	068	JAB512	26.8	----	72.5	30.2	20.7	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	JAB512	26.1	10.4	----	29.1	20.0	A	A	--	--	--	100.0
27006	068	JAB512	27.5	10.5	----	29.6	21.0	A	A	--	--	--	100.0
27007	009	JAR408	26.1	----	67.1	28.0	19.3	--	--	--	--	--	=====
27009	008	JAB512	25.9	----	69.8	29.0	20.2	A	--	A	--	--	100.0
27010	094	JAB512	26.2	10.6	----	29.3	20.3	A	A	--	--	--	100.0
27018	060	JAB512	26.1	10.4	----	29.1	20.0	A	A	--	--	--	100.0
27023	090	JAB512	26.6	----	71.7	27.5	18.9	A	--	A	--	--	100.0
27031	090	JAB512	25.8	10.0	----	27.8	19.5	A	A	--	--	--	100.0
27037	068	JAB512	27.4	----	72.9	30.5	20.7	A	--	A	--	--	100.0
27038	057	JAB512	26.0	----	69.6	27.9	19.8	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	JAB512	26.1	10.1	----	29.6	20.3	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	JAB512	26.2	----	71.4	28.6	19.9	A	--	A	--	--	100.0
27045	068	JAB512	27.3	10.4	----	29.7	20.8	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	JAB512	27.0	10.5	----	29.9	20.3	A	A	--	--	--	100.0
27051	002	JAB512	26.5	10.0	----	28.9	20.7	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	JAB512	27.0	----	73.1	30.1	21.2	A	--	A	--	--	100.0
28001	090	JAB512	26.6	9.9	----	27.9	19.2	A	A	--	--	--	100.0
28007	197	JAB512	26.2	----	70.9	29.6	20.0	A	--	A	--	--	100.0
28008	090	JAB512	25.4	----	70.0	27.8	19.6	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	JAB512	26.5	10.3	----	28.7	19.7	A	A	--	--	--	100.0
28015	002	JAB512	26.8	----	72.0	29.7	20.1	A	--	A	--	--	100.0
28018	102	JAB512	26.2	----	71.6	28.7	19.9	A	--	A	--	--	100.0
28019	002	JAB512	25.9	10.3	----	29.9	20.8	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	JAB512	25.8	10.0	----	28.4	19.3	A	A	--	--	--	100.0
28024	006	JAB512	26.2	10.2	----	29.2	20.3	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	JAB512	27.7	10.1	----	30.0	20.7	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	JAB512	26.2	10.7	----	29.4	20.6	A	A	--	--	--	100.0
31002	008	JAB512	26.9	10.2	----	29.3	19.9	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	JAB512	26.1	----	71.3	29.0	20.1	A	--	A	--	--	100.0
33002	065	JAB512	26.4	----	70.4	28.4	19.8	A	--	A	--	--	100.0
33004	008	JAB512	25.9	----	71.7	29.3	20.5	A	--	A	--	--	100.0

[19]血小板 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
33014	112	JAB512	26.4	9.9	-----	29.6	20.1	A	A	--	--	--	100.0
34001	008	JAB512	25.7	10.3	-----	29.4	20.5	A	A	--	--	--	100.0
34002	008	JAB512	26.8	10.2	-----	29.5	20.0	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	JAB512	25.7	10.2	-----	29.1	19.9	A	A	--	--	--	100.0
34005	112	JAB512	26.6	9.9	-----	29.6	20.1	A	A	--	--	--	100.0
34013	112	JAB512	25.4	-----	72.8	29.2	20.0	A	--	A	--	--	100.0
35006	109	JAB512	26.8	-----	73.4	27.6	17.6	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	JAB512	26.6	-----	72.4	26.9	17.9	A	--	A	--	--	100.0
37001	058	JAB512	26.0	-----	73.0	29.8	20.0	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	JAB512	26.8	-----	71.3	29.3	19.9	A	--	A	--	--	100.0
38006	054	JAB512	23.3	-----	61.2	25.1	18.2	A	--	A	--	--	100.0
38008	006	JAB512	26.2	-----	71.6	28.9	20.2	A	--	A	--	--	100.0
40001	193	JAB512	26.8	-----	70.0	28.8	20.0	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	JAB512	26.3	-----	70.3	28.8	20.0	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	JAB512	25.8	-----	68.6	27.9	19.7	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	JAB512	25.2	-----	69.5	27.7	19.1	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	JAB512	26.8	-----	73.1	29.2	20.2	A	--	A	--	--	100.0
40015	008	JAB512	26.6	10.6	-----	29.0	19.6	A	A	--	--	--	100.0
40022	165	JAB512	25.3	-----	70.9	27.3	19.5	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	JAB512	26.7	-----	73.4	30.0	20.7	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	JAB512	25.4	10.3	-----	27.8	18.9	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	JAB512	27.2	10.5	-----	27.0	19.6	A	A	--	--	--	100.0
40029	069	JAB512	26.5	10.3	-----	28.9	20.3	A	A	--	--	--	100.0
40030	109	JAB512	26.7	10.5	-----	29.5	20.2	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	JAB512	26.7	10.3	-----	27.8	19.8	A	A	--	--	--	100.0
40034	193	JAB512	25.3	-----	69.4	28.8	19.7	A	--	A	--	--	100.0
40035	165	JAB512	26.2	-----	69.9	28.0	19.8	A	--	A	--	--	100.0
41001	073	JAB512	26.2	10.0	-----	28.2	19.6	A	A	--	--	--	100.0
41002	008	JAB512	26.8	-----	70.3	29.6	19.9	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	JAB512	26.4	10.3	-----	27.5	19.2	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	JAB512	26.5	10.6	-----	28.9	20.3	A	A	--	--	--	100.0
43004	146	JAB512	26.6	-----	70.9	29.3	19.7	A	--	A	--	--	100.0
43007	095	JAB516	26.0	10.6	-----	26.5	18.5	--	--	--	--	--	=====
44002	193	JAB512	25.9	10.1	-----	28.9	20.2	A	A	--	--	--	100.0
46001	193	JAB512	25.8	10.3	-----	28.8	20.3	A	A	--	--	--	100.0
47002	109	JAB512	26.7	-----	73.4	29.6	20.6	A	--	A	--	--	100.0

[20]平均赤血球容積 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
01007	130	JAB512	84.0	-----	91.9	87.4	96.4	A	--	A	--	--	100.0
01019	052	JAB512	84.2	-----	91.7	86.5	95.4	A	--	A	--	--	100.0
01027	052	JAB512	83.6	-----	91.7	86.7	95.6	A	--	A	--	--	100.0
02001	008	JAB512	83.1	75.8	-----	86.2	95.6	A	A	--	--	--	100.0
02003	110	JAB517	83.5	-----	90.6	85.6	95.0	A	--	A	--	--	100.0
03004	002	JAB512	84.0	76.1	-----	85.7	95.3	A	A	--	--	--	100.0
04001	185	JAB512	84.4	76.2	-----	84.6	94.8	A	A	--	--	--	100.0
04006	185	JAB512	84.6	75.6	-----	84.5	94.8	A	A	--	--	--	100.0
04012	002	JAB512	84.4	-----	90.8	85.3	94.5	A	--	A	--	--	100.0
06001	136	JAB514	84.8	74.4	-----	86.5	95.9	B	B	--	--	--	78.6
06004	008	JAB512	83.0	-----	90.6	84.8	94.5	A	--	A	--	--	100.0
07004	062	JAB512	83.2	75.8	-----	84.7	93.2	A	A	--	--	--	100.0
07007	174	JAB512	82.6	-----	90.7	84.2	94.2	A	--	A	--	--	100.0
08002	008	JAB512	82.7	75.3	-----	85.4	94.5	A	A	--	--	--	100.0
09004	075	JAB517	83.7	76.8	-----	86.6	96.1	A	A	--	--	--	100.0
09007	168	JAB512	83.3	75.4	-----	84.1	94.2	A	A	--	--	--	100.0
09008	062	JAB512	83.8	75.9	-----	84.5	94.0	A	A	--	--	--	100.0
09009	008	JAB512	82.4	-----	90.2	85.7	95.6	A	--	A	--	--	100.0
09010	002	JAB512	83.3	76.2	-----	87.6	97.2	A	A	--	--	--	100.0
09011	002	JAB512	84.0	76.5	-----	87.2	96.7	A	A	--	--	--	100.0
09014	075	JAB517	84.1	76.0	-----	86.6	95.9	A	A	--	--	--	100.0
10001	002	JAB512	84.0	-----	91.9	85.9	95.1	A	--	A	--	--	100.0
10002	002	JAB512	84.0	-----	92.1	85.9	96.4	A	--	A	--	--	100.0
11002	008	JAB512	82.5	74.7	-----	84.8	94.8	A	A	--	--	--	100.0
11004	160	JAB512	83.5	-----	91.2	84.5	94.5	A	--	A	--	--	100.0
11005	175	JAB512	84.0	75.4	-----	84.1	93.7	A	A	--	--	--	100.0
11007	008	JAB512	82.4	-----	90.4	84.6	94.8	A	--	A	--	--	100.0
11021	176	JAB512	82.9	-----	90.5	85.8	95.6	A	--	A	--	--	100.0
11025	100	JAB512	84.0	-----	92.0	84.6	94.5	A	--	A	--	--	100.0
12003	006	JAB512	83.3	-----	91.0	83.7	94.2	A	--	A	--	--	100.0
12006	008	JAB512	82.5	-----	90.4	85.3	95.1	A	--	A	--	--	100.0
12010	122	JAB512	82.9	-----	90.4	85.4	95.1	A	--	A	--	--	100.0
12011	111	JAB517	82.3	74.8	-----	86.1	95.0	A	A	--	--	--	100.0
12012	008	JAB512	82.5	-----	90.2	85.9	95.3	A	--	A	--	--	100.0
12013	087	JAB512	85.2	77.2	-----	86.1	94.5	A	A	--	--	--	100.0
12014	075	JAB517	83.8	-----	91.3	87.2	95.6	A	--	A	--	--	100.0
12015	041	JAB512	83.7	-----	91.5	83.2	93.4	A	--	A	--	--	100.0
12018	041	JAB512	83.5	-----	91.5	83.3	93.1	A	--	A	--	--	100.0
13001	050	JAB512	83.8	76.5	-----	83.3	92.3	A	A	--	--	--	100.0
13004	068	JAB512	83.6	-----	91.7	85.9	95.6	A	--	A	--	--	100.0
13005	002	JAB512	83.8	-----	91.9	86.4	96.2	A	--	A	--	--	100.0
13006	002	JAB512	83.8	-----	91.9	87.0	97.0	A	--	A	--	--	100.0
13007	002	JAB512	83.8	76.1	-----	87.2	97.0	A	A	--	--	--	100.0
13008	002	JAB512	84.0	76.4	-----	86.1	95.9	A	A	--	--	--	100.0
13010	008	JAB512	82.7	74.7	-----	85.6	95.6	A	A	--	--	--	100.0
13013	111	JAB517	82.1	-----	89.5	87.3	96.1	A	--	A	--	--	100.0
13014	008	JAB512	82.5	-----	90.2	86.0	95.6	A	--	A	--	--	100.0
13015	008	JAB512	82.7	74.7	-----	86.2	95.9	A	A	--	--	--	100.0
13016	041	JAB512	83.3	-----	91.0	83.4	92.9	A	--	A	--	--	100.0
13021	002	JAB512	83.6	-----	91.7	86.4	96.1	A	--	A	--	--	100.0
13022	008	JAB512	82.2	74.6	-----	86.1	95.6	A	A	--	--	--	100.0
13024	002	JAB512	83.6	76.1	-----	87.0	96.2	A	A	--	--	--	100.0
13028	041	JAB512	84.0	75.7	-----	83.6	93.7	A	A	--	--	--	100.0
13033	087	JAB512	85.2	-----	92.1	86.1	94.5	A	--	A	--	--	100.0
13035	008	JAB512	82.5	-----	90.3	85.4	95.6	A	--	A	--	--	100.0
13036	006	JAB512	83.3	75.5	-----	85.0	94.5	A	A	--	--	--	100.0

[20]平均赤血球容積 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
13038	002	JAB512	83.6	-----	91.7	86.6	95.9	A	--	A	--	--	100.0
13039	002	JAB512	84.0	-----	91.7	86.5	96.4	A	--	A	--	--	100.0
13045	002	JAB512	83.6	75.9	-----	86.3	95.8	A	A	--	--	--	100.0
13049	002	JAB512	83.8	-----	91.7	86.6	96.4	A	--	A	--	--	100.0
13051	008	JAB512	82.5	75.0	-----	86.0	95.9	A	A	--	--	--	100.0
13055	002	JAB512	84.0	76.5	-----	87.1	96.2	A	A	--	--	--	100.0
13056	012	JAB512	84.2	76.2	-----	85.1	94.8	A	A	--	--	--	100.0
13063	050	JAB512	84.0	-----	92.1	83.6	92.3	A	--	A	--	--	100.0
13067	008	JAB512	82.3	75.2	-----	86.1	95.4	A	A	--	--	--	100.0
13071	075	JAB517	84.5	76.1	-----	87.1	96.4	A	A	--	--	--	100.0
13077	008	JAB512	82.9	-----	90.4	86.2	95.9	A	--	A	--	--	100.0
13078	006	JAB512	83.2	-----	91.0	83.9	93.2	A	--	A	--	--	100.0
13079	041	JAB512	83.6	76.0	-----	83.3	93.1	A	A	--	--	--	100.0
13080	008	JAB512	82.4	-----	90.4	86.2	95.9	A	--	A	--	--	100.0
13082	008	JAB512	82.9	75.6	-----	86.2	95.9	A	A	--	--	--	100.0
13083	008	JAB512	82.3	74.9	-----	86.2	95.9	A	A	--	--	--	100.0
13088	154	JAB512	84.0	76.0	-----	84.0	94.3	A	A	--	--	--	100.0
13089	002	JAB512	83.8	76.1	-----	87.5	96.4	A	A	--	--	--	100.0
13090	008	JAB512	82.2	74.7	-----	85.1	95.7	A	A	--	--	--	100.0
13101	002	JAB512	83.6	75.5	-----	87.0	97.0	A	A	--	--	--	100.0
13107	050	JAB512	84.6	-----	91.6	83.3	92.9	A	--	A	--	--	100.0
13108	008	JAB512	82.4	74.7	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100.0
13109	008	JAB512	82.5	75.3	-----	86.2	95.3	A	A	--	--	--	100.0
13115	041	JAB512	83.6	76.1	-----	83.4	93.1	A	A	--	--	--	100.0
13123	008	JAB512	82.5	75.1	-----	86.0	95.4	A	A	--	--	--	100.0
14002	008	JAB512	82.3	75.4	-----	86.0	95.1	A	A	--	--	--	100.0
14004	008	JAB512	82.3	74.7	-----	86.2	95.4	A	A	--	--	--	100.0
14005	137	JAB512	83.8	-----	91.8	84.8	94.2	A	--	A	--	--	100.0
14006	006	JAB512	83.7	-----	91.0	83.7	93.4	A	--	A	--	--	100.0
14007	041	JAB512	83.5	75.6	-----	83.6	93.2	A	A	--	--	--	100.0
14018	008	JAB512	82.5	74.7	-----	86.0	95.4	A	A	--	--	--	100.0
14022	006	JAB512	83.6	-----	91.2	84.5	94.2	A	--	A	--	--	100.0
14023	006	JAB512	83.5	-----	91.0	84.2	94.0	A	--	A	--	--	100.0
14025	006	JAB512	83.4	-----	91.0	84.0	94.2	A	--	A	--	--	100.0
14026	008	JAB512	82.3	74.7	-----	85.4	94.5	A	A	--	--	--	100.0
14029	041	JAB512	83.4	75.6	-----	83.4	92.3	A	A	--	--	--	100.0
14034	006	JAB512	83.3	-----	91.0	84.2	93.4	A	--	A	--	--	100.0
15007	008	JAB512	82.7	74.9	-----	86.1	94.8	A	A	--	--	--	100.0
15008	002	JAB512	83.1	76.3	-----	86.6	95.9	A	A	--	--	--	100.0
15010	002	JAB512	83.6	-----	91.5	86.7	96.4	A	--	A	--	--	100.0
16004	171	JAB512	83.7	-----	91.4	84.9	94.3	A	--	A	--	--	100.0
16005	006	JAB512	83.3	75.5	-----	83.9	94.0	A	A	--	--	--	100.0
16008	089	JAB514	81.9	-----	89.3	84.1	93.4	A	--	A	--	--	100.0
17003	190	JAB512	83.6	-----	92.0	83.9	93.7	A	--	A	--	--	100.0
18003	008	JAB512	82.6	74.8	-----	84.9	94.5	A	A	--	--	--	100.0
20001	006	JAB512	83.2	75.2	-----	84.2	93.7	A	A	--	--	--	100.0
20002	128	JAB512	83.4	75.9	-----	84.0	93.2	A	A	--	--	--	100.0
20003	081	JAB512	83.8	76.1	-----	84.1	93.7	A	A	--	--	--	100.0
20004	081	JAB512	83.8	76.1	-----	84.1	93.7	A	A	--	--	--	100.0
21001	172	JAB512	83.2	-----	91.4	83.9	93.7	A	--	A	--	--	100.0
22007	144	JAB512	84.1	-----	92.3	84.9	94.5	A	--	A	--	--	100.0
22010	006	JAB512	83.2	-----	91.0	84.3	93.7	A	--	A	--	--	100.0
22015	008	JAB512	82.8	-----	90.2	84.7	94.5	A	--	A	--	--	100.0
22019	006	JAB512	83.5	-----	91.2	83.9	94.0	A	--	A	--	--	100.0
23001	057	JAB512	84.5	76.8	-----	84.1	94.2	A	A	--	--	--	100.0
23002	172	JAB512	83.6	75.9	-----	84.8	94.0	A	A	--	--	--	100.0

[20] 平均赤血球容積 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
23005	002	JAB512	83.6	76.1	----	87.3	97.5	A	A	--	--	--	100.0
23006	088	JAB512	83.6	76.0	----	85.1	94.5	A	A	--	--	--	100.0
23007	169	JAB512	84.9	76.7	----	84.5	94.0	A	A	--	--	--	100.0
23009	088	JAB512	83.8	76.2	----	85.4	95.1	A	A	--	--	--	100.0
23012	083	JAB512	83.6	76.2	----	84.8	94.8	A	A	--	--	--	100.0
23018	008	JAB512	82.6	74.8	----	85.9	95.9	A	A	--	--	--	100.0
23022	006	JAB512	83.2	75.2	----	84.0	94.0	A	A	--	--	--	100.0
23026	088	JAB512	83.9	76.0	----	85.3	95.3	A	A	--	--	--	100.0
23029	172	JAB512	83.4	----	91.1	84.3	93.4	A	--	A	--	--	100.0
23030	088	JAB512	84.0	----	91.6	84.7	94.2	A	--	A	--	--	100.0
23032	083	JAB512	83.6	----	91.8	84.8	94.8	A	--	A	--	--	100.0
23037	088	JAB512	84.1	----	91.8	84.8	95.3	A	--	A	--	--	100.0
23038	169	JAB512	84.7	----	92.5	85.3	94.2	A	--	A	--	--	100.0
23039	169	JAB512	84.6	----	92.5	84.2	93.4	A	--	A	--	--	100.0
23040	008	JAB512	82.6	74.8	----	84.7	95.1	A	A	--	--	--	100.0
23042	068	JAB512	84.8	----	92.1	85.4	95.9	A	--	A	--	--	100.0
24001	169	JAB512	84.7	----	92.3	84.4	94.5	A	--	A	--	--	100.0
24002	122	JAB512	82.9	75.2	----	85.4	95.1	A	A	--	--	--	100.0
25001	122	JAB512	82.9	75.2	----	85.4	95.1	A	A	--	--	--	100.0
25002	126	JAB512	84.2	76.2	----	85.8	94.8	A	A	--	--	--	100.0
26002	024	JAB512	84.5	76.9	----	86.5	94.6	A	A	--	--	--	100.0
26005	009	JAR408	80.6	72.3	----	86.0	97.5	--	--	--	--	--	=====
26012	068	JAB512	84.2	----	92.1	86.5	95.6	A	--	A	--	--	100.0
27002	008	JAB512	82.3	74.7	----	84.8	94.3	A	A	--	--	--	100.0
27003	068	JAB512	84.4	----	92.3	86.1	95.6	A	--	A	--	--	100.0
27005	122	JAB512	82.9	75.2	----	85.4	95.1	A	A	--	--	--	100.0
27006	068	JAB512	84.4	76.6	----	86.4	95.9	A	A	--	--	--	100.0
27007	009	JAR408	80.5	----	89.1	86.2	98.4	--	--	--	--	--	=====
27009	008	JAB512	82.9	----	90.3	85.6	95.9	A	--	A	--	--	100.0
27010	094	JAB512	84.7	76.2	----	84.5	94.0	A	A	--	--	--	100.0
27018	060	JAB512	82.9	75.2	----	85.4	95.1	A	A	--	--	--	100.0
27023	090	JAB512	84.3	----	92.3	85.8	94.8	A	--	A	--	--	100.0
27031	090	JAB512	87.5	78.4	----	86.9	95.6	C	B	--	--	--	57.1
27037	068	JAB512	84.2	----	92.1	86.4	96.7	A	--	A	--	--	100.0
27038	057	JAB512	83.9	----	91.7	83.6	94.4	A	--	A	--	--	100.0
27041	029	JAB512	83.2	75.8	----	85.9	95.7	A	A	--	--	--	100.0
27042	102	JAB512	83.9	----	91.8	83.9	93.4	A	--	A	--	--	100.0
27045	068	JAB512	83.8	76.0	----	86.7	96.2	A	A	--	--	--	100.0
27048	068	JAB512	84.2	76.7	----	86.7	96.4	A	A	--	--	--	100.0
27051	002	JAB512	83.8	76.1	----	86.8	96.4	A	A	--	--	--	100.0
27052	068	JAB512	83.8	----	91.8	86.4	97.0	A	--	A	--	--	100.0
28001	090	JAB512	85.3	77.6	----	86.4	95.4	A	A	--	--	--	100.0
28007	197	JAB512	84.5	----	92.7	84.4	94.8	A	--	A	--	--	100.0
28008	090	JAB512	84.9	----	93.1	86.2	94.8	A	--	A	--	--	100.0
28014	008	JAB512	83.3	75.7	----	85.7	95.3	A	A	--	--	--	100.0
28015	002	JAB512	83.3	----	91.3	88.3	97.8	A	--	A	--	--	100.0
28018	102	JAB512	83.9	----	91.8	83.9	93.7	A	--	A	--	--	100.0
28019	002	JAB512	83.4	76.1	----	88.7	96.7	A	A	--	--	--	100.0
28022	198	JAB512	84.9	77.2	----	84.3	94.5	A	A	--	--	--	100.0
28024	006	JAB512	83.2	75.5	----	83.9	94.0	A	A	--	--	--	100.0
28029	068	JAB512	84.5	76.6	----	86.9	96.4	A	A	--	--	--	100.0
30006	173	JAB512	83.9	76.2	----	86.7	95.9	A	A	--	--	--	100.0
31002	008	JAB512	82.4	74.7	----	84.7	94.5	A	A	--	--	--	100.0
31003	008	JAB512	82.9	----	90.4	84.8	95.9	A	--	A	--	--	100.0
33002	065	JAB512	83.8	----	92.1	85.3	95.3	A	--	A	--	--	100.0
33004	008	JAB512	82.5	----	90.3	84.8	95.1	A	--	A	--	--	100.0

[20]平均赤血球容積 外部施設測定結果一覧

施設 コード	外部機関 コード	測定装置 コード	測 定 値					試料NO別判定値					総合 評価点
			試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	
33014	112	JAB512	83.3	75.7	-----	83.2	92.7	A	A	--	--	--	100.0
34001	008	JAB512	82.9	75.2	-----	85.3	95.0	A	A	--	--	--	100.0
34002	008	JAB512	83.0	75.4	-----	84.7	95.4	A	A	--	--	--	100.0
34003	008	JAB512	82.7	75.7	-----	84.6	95.6	A	A	--	--	--	100.0
34005	112	JAB512	83.5	75.7	-----	83.1	92.7	A	A	--	--	--	100.0
34013	112	JAB512	83.5	-----	91.6	83.3	92.1	A	--	A	--	--	100.0
35006	109	JAB512	83.6	-----	92.1	86.8	95.7	A	--	A	--	--	100.0
36002	161	JAB512	84.1	-----	92.2	86.2	96.2	A	--	A	--	--	100.0
37001	058	JAB512	82.6	-----	90.4	84.2	92.3	A	--	A	--	--	100.0
37004	008	JAB512	82.3	-----	90.4	85.2	95.4	A	--	A	--	--	100.0
38006	054	JAB512	84.9	-----	94.7	81.9	94.8	A	--	A	--	--	100.0
38008	006	JAB512	83.3	-----	91.0	83.7	93.7	A	--	A	--	--	100.0
40001	193	JAB512	82.8	-----	90.6	85.4	96.5	A	--	A	--	--	100.0
40002	193	JAB512	82.9	-----	90.8	86.5	95.9	A	--	A	--	--	100.0
40004	165	JAB512	84.5	-----	92.7	84.6	94.5	A	--	A	--	--	100.0
40006	165	JAB512	84.6	-----	92.8	84.7	94.2	A	--	A	--	--	100.0
40013	109	JAB512	84.2	-----	91.8	83.9	93.5	A	--	A	--	--	100.0
40015	008	JAB512	82.3	75.0	-----	84.6	94.6	A	A	--	--	--	100.0
40022	165	JAB512	84.1	-----	92.4	84.0	94.2	A	--	A	--	--	100.0
40025	109	JAB512	84.4	-----	92.0	84.2	94.0	A	--	A	--	--	100.0
40026	165	JAB512	84.2	76.6	-----	83.5	93.9	A	A	--	--	--	100.0
40028	068	JAB512	83.5	75.9	-----	87.0	97.0	A	A	--	--	--	100.0
40029	069	JAB512	83.1	75.4	-----	85.6	95.3	A	A	--	--	--	100.0
40030	109	JAB512	84.2	76.5	-----	84.2	93.2	A	A	--	--	--	100.0
40031	151	JAB512	82.8	75.4	-----	82.3	92.9	A	A	--	--	--	100.0
40034	193	JAB512	83.8	-----	91.7	85.1	94.8	A	--	A	--	--	100.0
40035	165	JAB512	85.1	-----	93.0	84.1	93.6	A	--	A	--	--	100.0
41001	073	JAB512	84.3	76.6	-----	84.4	94.0	A	A	--	--	--	100.0
41002	008	JAB512	82.6	-----	90.4	85.1	94.3	A	--	A	--	--	100.0
42001	165	JAB512	84.5	76.7	-----	85.0	94.5	A	A	--	--	--	100.0
42002	008	JAB512	82.4	75.1	-----	84.7	94.5	A	A	--	--	--	100.0
43004	146	JAB512	84.0	-----	92.1	84.2	93.7	A	--	A	--	--	100.0
43007	095	JAB516	81.5	75.2	-----	82.8	92.7	--	--	--	--	--	=====
44002	193	JAB512	83.6	75.8	-----	84.8	95.7	A	A	--	--	--	100.0
46001	193	JAB512	83.6	75.6	-----	85.8	95.1	A	A	--	--	--	100.0
47002	109	JAB512	84.5	-----	91.8	84.2	93.5	A	--	A	--	--	100.0

VIII. 補助調査・臨床検査の基準範囲に関する調査

集計結果

- I 調査の概要
- II 補助調査票集計結果（健診施設）
- III 補助調査票集計結果（登録衛生検査所）
- IV 基準範囲に関する調査集計結果

I 調査の概要

1 調査の目的

健診施設等の臨床検査の実情と精度管理実施状況等を把握し、臨床検査精度管理調査参加施設等の業務の参考に供することを目的とする。

2 調査実施時期

平成27年10月～11月

3 調査対象期間

実施件数については平成26年度の実績、その他は調査日現在の状況。

4 調査対象施設

臨床検査精度管理調査参加施設 365施設（うち健康診断施設 329施設）。

5 調査事項

健康診断施設等における臨床検査の実施状況および精度管理実施状況、臨床検査の基準範囲に関する現状調査。

（添付資料（平成27年度補助調査票、臨床検査の基準範囲に関する調査票）参照）。

6 調査票の回収率

調査対象施設のうち調査票に回答があったのは329施設、回収率は90.1%）であった。

Ⅱ 査票集計結果（健診施設）

1 精度管理実施体制等の状況について

(1) 精度管理責任者、精度管理担当者等の精度管理の実施体制健診施設の精度管理の実施体制は表1-1のとおりである。

表1-1 臨床検査精度管理実施体制（回答:297施設） -平成27年度(第24回)-

選 任			職 種				職 位 ・ 職 制					受 講 済 研 修 会 名			
精度管理 責任者	有	264 88.9%	医師	臨床検査技師	その他	無回答	所長・局長	部長・次長	科長・補佐	その他	無回答	検体検査	労働衛生	臨床検査	無回答
	無	26	128	121	24	24	127	48	72	27	23	36	33	45	183
	無回答	7	43.1%	40.7%	8.1%	8.1%	42.8%	16.2%	24.2%	9.1%	7.7%	12.1%	11.1%	15.2%	61.6%
精度管理 担当者	有	259 87.2%	医師	臨床検査技師	その他	無回答	所長・局長	部長・次長	科長・補佐	その他	無回答	検体検査	労働衛生	臨床検査	無回答
	無	20	2	235	32	28	6	24	112	128	27	75	31	67	124
	無回答	18	0.6%	79.1%	10.8%	9.4%	2.0%	8.1%	37.7%	43.1%	9.1%	25.3%	10.4%	22.6%	41.8%
全衛連以外の外部 精度管理調査参加			日本医師会		検査技師会		検査所協会		都道府県		日本総合健診 医学会	試薬メーカー等		その他	
			154		117		7		100		99	109		46	
			51.9%		39.4%		2.4%		33.7%		33.3%	36.7%		15.5%	

① 精度管理責任者の選任状況等

精度管理責任者を選任している施設は264施設（88.9%）、その主たる資格は医師128名、臨床検査技師121名、職位は、所長・局長クラスで127名である。

自施設で検査する場合は当然であるが、外部委託する場合でも精度管理責任者の選任が求められていることから、未選任の施設26施設の速やかな選任が求められるところである。

② 精度管理担当者の選任状況等

精度管理担当者を選任している施設は259施設（87.2%）、その主たる資格は臨床検査技師235名、職位は、課長・課長補佐クラスが最も多く112名となる。

精度管理担当者未選任の20施設には、同担当者の選任等の精度管理体制の明確化を求めたい。また、精度管理責任者選任264施設で精度管理に関連する研修の延べ受講者数は、臨床・労働衛生関係研修会、検体検査研修会併せて114名、精度管理担当者で延べ173名とあるが、これら研修会の未受講者には「全衛連検体検査研修会」への積極的な受講を勧めたい。

③ 全衛連以外の外部精度管理調査参加状況

外部精度管理調査参加では、日本医師会の精度管理調査に参加している施設154施設と最も多く、次いで検査技師会の精度管理調査参加117施設であった。

(2) 自施設検査時の内部精度管理の状況

自施設検査時の内部精度管理調査の状況は表1-2のとおりである。

表1-2 臨床検査精度管理実施体制（回答：297施設）（平成27年度（第24回））

検査項目+A5・L35		実施の有無		実施頻度			コントロール試料				
				1/毎回以上	その他	無回答	市販品		自家製	濃度数	
生化学	酵素	有	143 48.1%	123 86.0%	12 8.4%	8 5.6%	凍結血清	110	9	2濃度	123
							凍結乾燥血清	15			
		無	83 27.9%	—	—	—	液状血清	13		その他	13
							その他	2			
	脂質	無回答	71	174	285	—	無回答	157	9	無回答	161
		有	142 47.8%	126 88.7%	11 7.7%	5 3.5%	凍結血清	108		2濃度	121
							凍結乾燥血清	16			
		無	84 28.3%	—	—	—	液状血清	14		その他	14
	血糖						その他	2			
		無回答	71	171	286	—	無回答	157	9	無回答	162
		有	143 48.1%	127 88.8%	12 8.4%	4 2.8%	凍結血清	108		2濃度	122
							凍結乾燥血清	14			
		無	83 27.9%	—	—	—	液状血清	14		その他	14
							その他	3			
血液	血算	無回答	71	170	285	—	無回答	158	1	無回答	161
		有	141 47.5%	130 92.1%	3 2.1%	8 5.7%	メーカー指定 標準試料	107		2濃度	64
		無	87 29.3%	—	—	—	その他	2		その他	65
尿	糖・蛋白	無回答	69	167	294	—	無回答	158	20	無回答	168
		有	198 66.7%	119 60.1%	46 23.2%	33 16.7%	メーカー指定 標準試料	155		2濃度	109
		無	70 23.6%	—	—	—	その他	16		その他	49
		無回答	29	178	251	—	無回答	126		無回答	139

「精度管理標準作業書」の有無	有	無	無回答
	150 50.5%	44 14.8%	103 34.7%

内部精度管理調査は、尿関係の検査項目を実施する施設においては6割以上の施設66.7%で実施されているが、生化学および血液の項目を実施する施設では、半数弱48%台の実施率と、昨年度調査から改善が進んでいない。

内部精度管理調査未実施の施設については、精度管理調査体制の整備、内部精度管理調査の速やかな実施を求めたい。

実施施設のうち、尿関係を除く検査項目を実施する各施設においては、約90%の施設で毎回あるいは毎日精度管理調査を実施しているが、尿関係の項目では本年度調査でも67%にとどまっている。

コントロール試料の市販品、自家製の使用状況では、市販品の比率が圧倒的に高くコントロール試料の濃度数は2濃度が主流となっている。

自施設検査に係る精度管理標準作業書は今年度も150施設（50.5%）での策定にとどまっている。

(3) 外部委託先への精度管理調査の状況

外部委託先への精度管理調査の状況は表1-3のとおりである。

表1-3 臨床検査精度管理実施体制（回答:297施設）（平成27年度（第24回））

検体検査		実施の有無		実施の頻度			実施の方法			
							同一検体ブラインド挿入		既知試料挿入	
生化学	酵素	有	146	1/年	57	19.2%	実施	106	実施	38
			49.2%	1/半年	18	6.1%		35.6%		12.8%
		無	86	1/月	31	10.4%	未実施	25	未実施	46
			29.0%	その他	30	10.1%		8.4%		15.5%
		無回答	65	無回答	161	54.2%	無回答	166	無回答	213
	脂質	有	147	1/年	57	19.2%	実施	107	実施	38
			49.5%	1/半年	18	6.1%		36.0%		12.6%
		無	85	1/月	31	10.4%	未実施	25	未実施	47
			28.6%	その他	31	10.4%		8.4%		15.8%
		無回答	65	無回答	160	53.9%	無回答	165	無回答	212
	血糖	有	145	1/年	57	19.2%	実施	105	実施	38
			48.8%	1/半年	17	5.7%		35.3%		12.7%
		無	87	1/月	31	10.4%	未実施	26	未実施	47
			29.3%	その他	30	10.1%		8.8%		15.6%
		無回答	65	無回答	162	54.5%	無回答	166	無回答	212
血液	血算	有	142	1/年	56	18.9%	実施	105	実施	29
			47.8%	1/半年	18	6.1%		35.3%		9.8%
		無	90	1/月	29	9.8%	未実施	24	未実施	54
			30.3%	その他	29	9.8%		8.1%		18.2%
		無回答	65	無回答	165	55.6%	無回答	168	無回答	214
尿	糖・蛋白	有	46	1/年	23	7.7%	実施	20	実施	19
			15.5%	1/半年	5	1.7%		6.7%		6.4%
		無	163	1/月	6	2.0%	未実施	34	未実施	27
			54.9%	その他	11	3.7%		11.4%		9.1%
		無回答	88	無回答	252	84.8%	無回答	243	無回答	251

外部委託先に係る「精度管理標準作業書」の有無	有	無	無回答
	136	70	91
	45.8%	23.6%	30.6%

外部委託先への精度管理調査は、生化学および血液の項目を実施する施設において今年度調査でも回答のあった298施設のうち50%に満たない数字となった。尿検査では15.5%にとどまっている。また、外部委託先に係る「精度管理標準作業書」の整備された施設は同じく297施設のうち136施設（45.8%）にとどまっている。

実施頻度は尿検査を除いて約半数の施設が年1回実施している。

実施方法は、生化学および血液の項目を実施する施設で同一検体ブラインド挿入を採用している施設が35～36%、既知試料挿入方法を採用している施設が9～12%であった。

健診結果の報告は、外部委託している場合であっても健診実施施設の責任においてなされることから、全衛連では外部委託先機関が適正な検査を実施していること

の担保として、「同一検体ブラインド挿入」、「既知試料挿入」等を推奨しているところであり、今後、外部委託先機関に対する精度管理調査の実施が改善されることを期待したい。

(4) 外部委託先との契約・管理等の状況

外部委託先との契約・管理等の状況は表1-4のとおりである。

表1-4 外部委託先との契約・確認等（回答施設：297）

確 認 の 項 目	確認の有無		確 認 の 内 容
外部委託先との有効期限が明記された契約書	有	234 (96.3 %)	「有」：有効な契約書原本又は控えがあること
	無	9	
外部委託先における内部精度管理結果の確認	有	200 (82.0 %)	「有」：結果控、若しくは委託先への訪問・確認記録があること
	無	44	
外部委託先における外部精度管理結果の確認	有	215 (88.1 %)	「有」：結果控、若しくは委託先への訪問・確認記録があること
	無	29	
外部委託先についての情報の公開	有	119 (49.8 %)	「有」：ホームページ等で外部委託の項目、委託先等の情報を公開していること
	無	120	

注1) () 内は回答施設に対する割合（整数以下四捨五入）である。

注2) 数字の不整合は無回答の施設があることによる。

外部委託先との有効期限が明記された契約書を交わしている施設は234施設（96.3%）、外部委託先における内部精度管理結果を確認している施設は200施設（82.0%）、外部委託先における外部精度管理結果を確認している215施設88.1%であった。また、外部委託先についての情報を公開している施設は119施設（49.8%）であった。

外部委託先との契約・管理等状況は昨年度調査では改善が見られたが、本年度調査では昨年度とほとんど変わらない状況だった。

2 標準作業書・個人情報保護管理・廃棄物管理状況について

標準作業書・個人情報保護管理・廃棄物管理状況は表2のとおりである。

表2 標準作業書・個人情報保護管理・廃棄物処理（回答：297施設）

担当業務別標準作業書			個人情報管理体制			廃棄物処理管理体制		
有	無	無回答	有	無	無回答	有	無	無回答
272	21	4	293	0	4	291	2	4
91.6%	7.1%	1.3%	98.7%	0.0%	1.3%	98.0%	0.7%	1.3%

担当業務別標準作業書を有する施設は272施設、(91.6%)である。同標準作業書を未作製の施設は、速やかな対応が求められる。

個人情報保護、廃棄物処理の管理体制については、ほとんどの施設(98.7%)が体制を有している。プライバシーマーク取得の際の要求事項であることが係わっていると思われる。

3 臨床検査実施数及び実施状況(平成26年度実績)について

平成26年度の臨床検査精度管理調査各項目における年間臨床検査実施数は表3のとおりである。

表3. 臨床検査実施数及び実施状況(平成26年度実績)

表3. 臨床検査実施数及び実施状況（平成20年度実績）												
検査項目	実施施設数	年間総実施数	1施設平均実施件数	施設数			施設内検査件数	施設内検査の実態（重複あり）			外部委託検査件数	
				施設内	外部委託	両方		自施設職員で実施している施設	FMS方式の施設	ブランチャラボの施設		
生化学検査	総コレステロール	290	10,404,006 件	35,540 件	126	155	32	4,421,825 件（約 42.5 %）	94 施設	11 施設	21 施設	5,188,732 件（約 49.9 %）
	中性脂肪	291	19,965,900 件	68,611 件	118	185	32	7,705,220 件（約 38.6 %）	94 施設	11 施設	21 施設	10,416,001 件（約 52.2 %）
	尿酸	290	13,912,351 件	47,974 件	117	184	31	5,708,125 件（約 41.0 %）	94 施設	11 施設	21 施設	7,074,398 件（約 50.9 %）
	クレアチニン	289	12,896,703 件	44,625 件	117	184	32	5,473,501 件（約 42.4 %）	95 施設	11 施設	21 施設	6,204,484 件（約 48.1 %）
	AST	292	20,534,412 件	70,323 件	119	185	33	8,086,064 件（約 39.4 %）	95 施設	11 施設	21 施設	10,556,610 件（約 51.4 %）
	ALT	292	20,398,387 件	69,857 件	119	185	33	7,948,113 件（約 39.0 %）	95 施設	11 施設	21 施設	10,567,566 件（約 51.8 %）
	γ-GT	292	20,157,257 件	69,032 件	118	185	32	7,765,589 件（約 38.5 %）	94 施設	11 施設	21 施設	10,526,893 件（約 52.2 %）
	血糖	290	16,533,564 件	47,012 件	119	182	31	6,507,966 件（約 39.4 %）	96 施設	10 施設	21 施設	8,710,665 件（約 52.7 %）
	HDLコレステロール	291	19,606,478 件	67,376 件	118	184	32	7,376,404 件（約 37.6 %）	94 施設	11 施設	21 施設	10,372,607 件（約 52.9 %）
	LDLコレステロール	291	19,635,513 件	7,404,533 件	117	184	31	7,404,533 件（約 37.7 %）	94 施設	11 施設	21 施設	10,358,590 件（約 52.8 %）
血液検査	HbA1c	291	14,372,826 件	49,391 件	118	184	30	5,456,503 件（約 38.0 %）	94 施設	11 施設	21 施設	7,578,676 件（約 52.7 %）
	ヘモグロビン	292	19,995,528 件	67,725 件	133	148	35	7,764,987 件（約 38.8 %）	101 施設	12 施設	20 施設	10,002,113 件（約 50.0 %）
	赤血球数	291	19,591,662 件	67,325 件	132	182	34	7,670,046 件（約 39.2 %）	101 施設	12 施設	20 施設	10,003,923 件（約 51.1 %）
	白血球数	290	15,557,760 件	53,647 件	132	181	34	6,164,592 件（約 39.6 %）	101 施設	12 施設	20 施設	7,608,568 件（約 48.9 %）
	ヘマトクリット	291	17,063,278 件	7,009,594 件	132	182	34	7,009,594 件（約 41.1 %）	101 施設	12 施設	20 施設	8,268,605 件（約 48.5 %）
	血小板数	288	10,768,693 件	37,391 件	132	179	34	4,653,692 件（約 43.2 %）	101 施設	12 施設	20 施設	4,855,626 件（約 45.1 %）
尿検査	尿糖	290	24,292,687 件	83,349 件	265	17	50	20,016,403 件（約 82.4 %）	250 施設	4 施設	11 施設	1,798,308 件（約 7.4 %）
	尿蛋白	291	24,731,641 件	84,988 件	265	17	50	19,934,667 件（約 80.6 %）	250 施設	4 施設	11 施設	1,809,483 件（約 7.3 %）
	尿潜血	288	16,798,566 件	58,328 件	265	17	49	13,665,933 件（約 81.4 %）	250 施設	4 施設	11 施設	1,410,496 件（約 8.4 %）

検査種類のうち実施件数が多い順に尿検査、血液検査、生化学検査となる。検査数の順序は、検体の安定性、検査の容易さ、検査コストなどと相似しているとも言える。検査項目で見ると近年実施件数が少ないのは総コレステロールで、かわりにHDL・LDLコレステロールの検査数が多い。善玉・悪玉コレステロールというように働きに注目して検査項目を選択していると考えられる。

各検査項目の委託状況は、生化学検査および血液検査ともほぼ半数以上の施設で検査が外部委託されている。

尿検査ではまだ17施設から外部委託を行っているとの回答があった。

施設内検査の実態では、生化学検査および血液検査の項目において、施設内受託(FMS方式)で検査していると回答した施設が10~12施設、ブランチラボ施設で検査している施設が20~21施設であった。また、尿検査関係では、FMS方式で検査

している施設が4施設、ブランチラボ施設で検査している施設が11施設であった。

4 検体の採取・搬送等について

血液検体の採取・搬送・授受の状況は表4のとおりである。

表4-1 臨床検査精度管理実施体制（回答:297施設） -平成27年度(第24回)-

	採 取 法	JCCLSガイドライン準拠	ガイドライン未対応	ガイドライン準備中	
		250 0.842	14 0.047	17 0.057	
血 液 検 体	回 収 者	健診スタッフ	施設回収担当者	委託機関回収担当者	巡回健診の担当者
		193 0.65	5 0.017	88 0.296	10 0.034
	回収時の保存方法	室温	アイスボックス	冷蔵庫(携帯冷蔵庫)	
		46 0.155	238 0.801	12 0.04	
	回収時の授受記録	自施設回収記録	委託機関授受記録	依頼伝票(書)	無い
		136 0.458	79 0.266	63 0.212	17 0.057
尿 検 体	採 取 場 所	自宅	健診現場		
		63 0.212	222 0.747		
	検 査 場 所	健診現場	自施設検査室	外部委託検査	
		194 0.653	77 0.259	13 0.044	
	回 収 者	健診スタッフ	施設回収担当者	委託機関回収担当者	巡回健診の担当者
		202 0.68	12 0.04	28 0.094	13 0.044
	回収時の保存方法	室温	アイスボックス	冷蔵庫(携帯冷蔵庫)	
		80 0.269	165 0.556	5 0.017	
	回収時の授受記録	自施設回収記録	委託機関授受記録	依頼伝票(書)	無い
		140 0.471	36 0.121	47 0.158	29 0.098

注) 重複回答があるため回答施設数297を超えているものもある

血液検体の採取方法は、JCCLSガイドライン準拠採血法が250施設（84.2％）となった。同ガイドライン未対応または準備中との回答が合わせて31施設（10.4％）であった。

血液検体の回収時の保存方法は室温と回答した46施設（15.5％）、アイスボックス・冷蔵庫の使用が合わせて250施設（84％）であった。

尿検体では80施設（26.9％）が室温と回答。これは尿の採取場所を自宅としている63施設（21.2％）あるためと考えられる。

検体の回収記録、授受記録について「なし」と回答した施設数は血液・尿検体それぞれ17施設（5.70％）、29施設（9.8％）であった。

先にも述べているが、外部委託している場合であっても健診実施施設の責任において結果報告がなされることから、外部委託する場合は、検体の保存状況、検体回収時の授受記録の管理徹底を強く求めたい。

Ⅲ 補助調査票集計結果（登録衛生検査所）

集計結果を以下に掲載する。

1. 精度管理等の実施

表1-1 臨床検査精度管理実施体制（回答施設：32）

	選 任		資 格			職 位 ・ 職 制				受 講 者 研 修 会 名				
精度管理 責任者	有	30 (93.8 %)	医 師	臨床検査 技師	その他	a	b	c	d	a	b	c		
	無	0 (0 %)	0 (48.4 %)	30 (51.6 %)	32 (66.7 %)	0 (0 %)	7 (23.3 %)	8 (26.7 %)	15 (50 %)	2 (22.2 %)	1 (11.1 %)	6 (66.7 %)		
精度管理 担当者	有	29 (90.6 %)	医 師	臨床検査 技師	その他	a	b	c	d	a	b	c		
	無	0 (0 %)	0 (93.3 %)	28 (6.7 %)	2 (100 %)	0 (0 %)	1 (3.6 %)	13 (46.4 %)	14 (50 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	6 (100 %)		
全衛連以外 の外部精度 管理調査参 加の有無	日本医師会		検査技師会		検査所協会	都道府県		日本総合 検診医学会		試薬等 メーカー主催		そ の 他		
	有	31 (96.9 %)	有	29 (90.6 %)	有	29 (90.6 %)	有	30 (93.8 %)	有	9 (28.1 %)	有	19 (59.4 %)	() 一覧表で出力	有

表1-2 内部制度管理の実施（回答：32施設）

検査項目		実施の有無 (%)	実施頻度		コ ン ト ロ ー ル 試 料							
			毎回 毎日	その他	市販品	品 名		自家製	濃 度 数			
生化学	酵素	有 (90.6 %)	29 (75.9 %)	3	25 (92.6 %)	a.凍結コントロール血清	25 (100 %)	2 (7.4 %)	a.2濃度	30 (100 %)		
						b.凍結乾燥コントロール血清	0 (0 %)					
						c.液状コントロール血清	5 (20 %)		b.その他	0 (0 %)		
						d.その他	0 (0 %)					
	脂質	有 (90.6 %)	29 (75.9 %)	3	30 (93.8 %)	a.凍結コントロール血清	25 (83.3 %)	2 (6.3 %)	a.2濃度	30 (100 %)		
						b.凍結乾燥コントロール血清	0 (0 %)					
						c.液状コントロール血清	5 (16.7 %)		b.その他	0 (0 %)		
						d.その他	0 (0 %)					
	血糖	有 (90.6 %)	29 (75.9 %)	3	30 (96.8 %)	a.凍結コントロール血清	25 (83.3 %)	1 (3.2 %)	a.2濃度	30 (100 %)		
b.凍結乾燥コントロール血清						0 (0 %)						
c.液状コントロール血清						5 (16.7 %)	b.その他		0 (0 %)			
d.その他						0 (0 %)						
血液	血算	有 (93.8 %)	30 (76.7 %)	1	31 (93.9 %)	a.メーカー指定のコントロール試料	31 (100 %)	2 (6.1 %)	a.2濃度	28 (96.6 %)		
						b.その他	0 (0 %)		b.その他	1 (3.4 %)		
尿	糖・ 蛋白等	有 (87.5 %)	28 (82.1 %)	2	28 (93.3 %)	a.メーカー指定のコントロール試料	25 (89.3 %)	2 (6.7 %)	a.2濃度	27 (93.1 %)		
						b.その他	3 (10.7 %)		b.その他	2 (6.9 %)		
自 施 設 検 査 に 係 る 「 精 度 管 理 標 準 作 業 書 」 策 定 の 有 無									有	23 (100 %)	無	0 (0 %)

注1) 実施の有無の()書きは回答施設に対する比率(整数以下は四捨五入)である。

注2) 実施頻度・コントロール試料の()書きは実施有の施設に対する比率(整数以下は四捨五入)である。

注3) 数字の不整合は無回答の施設があることによる。

2. 標準作業書・個人情報保護管理・廃棄物管理

表2. 標準作業書・個人情報保護管理・廃棄物管理（回答：32施設）

担当業務別標準作業書の有無				個人情報保護管理体制の有無				廃棄物(感染性廃棄物) 処理管理体制の有無			
有	32 (100.0 %)	無	0	有	32 (100.0 %)	無	0	有	32 (100.0 %)	無	0

注1) ()内は回答施設に対する割合である(整数以下は四捨五入)。

3. 臨床検査実施数及び実施状況（平成26年度実績）

表3. 臨床検査実施数及び実施状況（平成26年度実績）

検 査 項 目		実施施設数	年間総実施数	1施設平均実施件数	施設数			施設内検査件数	施設内検査の実態(重複あり)			外部委託検査件数
					施設内	外部委託	両方		自施設職員で実施している施設	FMS方式の施設	ブランチラボの施設	
生化学検査	総コレステロール	32	28,651,903 件	895,372 件	26	2	0	26,428,373 件(約 92.2 %)	26 施設	0 施設	0 施設	26,139 件(約 0.1 %)
	中 性 脂 肪	32	47,724,165 件	1,491,380 件	26	2	0	44,272,007 件(約 92.8 %)	26 施設	0 施設	0 施設	33,386 件(約 0.1 %)
	尿 酸	32	41,586,688 件	1,341,506 件	26	1	0	38,349,645 件(約 92.2 %)	27 施設	0 施設	0 施設	30,482 件(約 0.1 %)
	クレアチニン	31	44,389,898 件	1,431,932 件	26	1	0	40,881,086 件(約 92.1 %)	26 施設	0 施設	0 施設	87,529 件(約 0.2 %)
	AST	32	52,877,193 件	1,652,412 件	26	2	0	48,951,873 件(約 92.6 %)	26 施設	0 施設	0 施設	44,329 件(約 0.1 %)
	ALT	32	52,890,632 件	1,652,832 件	26	2	0	48,960,666 件(約 92.6 %)	26 施設	0 施設	0 施設	44,903 件(約 0.1 %)
	γ-GT	32	48,543,252 件	1,516,977 件	26	2	0	44,922,664 件(約 92.5 %)	26 施設	0 施設	0 施設	35,334 件(約 0.1 %)
	血 糖	31	44,135,054 件	1,423,711 件	26	1	0	36,538,691 件(約 82.8 %)	26 施設	0 施設	0 施設	46,531 件(約 0.1 %)
	HDLコレステロール	32	43,262,018 件	1,351,938 件	26	2	0	39,936,637 件(約 92.3 %)	26 施設	0 施設	0 施設	35,268 件(約 0.1 %)
	LDLコレステロール	32	40,182,400 件	1,255,700 件	26	2	0	37,190,342 件(約 92.6 %)	26 施設	0 施設	0 施設	39,585 件(約 0.1 %)
HbA1c	31	29,832,740 件	962,346 件	26	1	0	27,838,211 件(約 93.3 %)	26 施設	0 施設	0 施設	48,569 件(約 0.2 %)	
血液検査	ヘモグロビン	32	48,862,611 件	1,526,957 件	27	1	0	46,459,622 件(約 95.1 %)	27 施設	0 施設	0 施設	16,313 件(約 0.0 %)
	赤 血 球 数	32	48,857,379 件	1,526,793 件	27	1	0	46,453,741 件(約 95.1 %)	27 施設	0 施設	0 施設	16,313 件(約 0.0 %)
	白 血 球 数	32	46,650,112 件	1,457,816 件	27	1	0	44,331,937 件(約 95.0 %)	27 施設	0 施設	0 施設	16,313 件(約 0.0 %)
	ヘマトクリット	32	47,265,000 件	1,477,031 件	27	1	0	44,940,865 件(約 95.1 %)	27 施設	0 施設	0 施設	16,313 件(約 0.0 %)
	血 小 板 数	32	43,927,746 件	1,372,742 件	27	1	0	41,707,579 件(約 94.9 %)	27 施設	0 施設	0 施設	16,313 件(約 0.0 %)
尿検査	尿 糖	31	7,261,654 件	234,247 件	26	2	0	6,970,878 件(約 96.0 %)	26 施設	0 施設	0 施設	12,195 件(約 0.2 %)
	尿 蛋 白	31	7,306,901 件	235,706 件	26	2	0	7,015,976 件(約 96.0 %)	26 施設	0 施設	0 施設	12,195 件(約 0.2 %)
	尿 潜 血	31	6,786,874 件	218,931 件	25	2	0	6,508,374 件(約 95.9 %)	26 施設	0 施設	0 施設	12,195 件(約 0.2 %)

4. 検体の採取・搬送・授受

表4-1 血液検体（生化学・血液検査）の採取・搬送・授受（回答：32施設・複数回答）

検体の採取法	a.JCCLS ガイドライン準拠	0 (0.0 %)	b.ガイドライン 未対応	0 (0.0 %)	c.ガイドライン 採血法準備中	0 (0.0 %)		
検体の回収者	a.健診スタッフ	3 (9.4 %)	b.健診施設 回収担当者	2 (6.3 %)	c.検査機関 回収担当者	26 (81.3 %)	d.出張健診 現場の担当者	0 (0.0 %)
検体回収時の保存方法	a.室 温	0 (0.0 %)	b.アイス ボックス	28 (87.5 %)	c.冷蔵庫 (簡易型携帯冷蔵 庫を含む)	3 (9.4 %)		
検体回収時の授受記録	a.な い	0 (0.0 %)	b.自施設 回収記録	16 (50.0 %)	c.委託検査機関 授受記録	5 (15.6 %)	依頼書 (伝票)	10 (31.3 %)

注) ()内は回答数に対する比率(整数以下は四捨五入)

表4-2 尿検体（尿検査）の採取・回収・授受（回答：32施設・複数回答）

検体の採取法	a. 自宅採尿	0 (0.0 %)	b. 健診会場で採尿 (健診現場・自施)	0 (0.0 %)				
検査の実施場所	a. 出張健診現場の担当者	0 (0.0 %)	b. 自施設検査室	1 (3.1 %)	c. 外部委託	0 (0.0 %)		
検体の回収者	a. 健診スタッフ	3 (9.4 %)	b. 健診施設回収担当者	2 (6.3 %)	c. 検査機関の回収担当者	25 (78.1 %)	d. 出張健診現場の担当者	0 (0.0 %)
検体回収時の保存法	a. 室温	0 (0.0 %)	b. アイスボックス	27 (84.4 %)	c. 冷蔵庫 (簡易型携帯冷蔵庫を含む)	3 (9.4 %)		
検体回収の授受記録	a. な い	0 (0.0 %)	b. 自施設回収記録	15 (46.9 %)	c. 委託検査機関授受記録	5 (15.6 %)	d. 依頼書 (伝票) 控	10 (31.3 %)

注) ()内は回答施設に対する割合である(整数以下四捨五入)。

Ⅳ 基準範囲調査結果

基準範囲を3年ごとに調査することとし、初回調査を23年度に実施した。

2回目調査を平成23年調査以降の実績を基に26年に実施、報告していただいた。

26年度の調査実施後に全衛連臨床検査専門委員会にて検討した結果、3年ごとの調査から、毎回実施に変更する事が決定され本年度も調査を行った。

今回27年度調査は、26年度における基準範囲の変更の有無と、使用している基準範囲の報告となる。

1. 基準範囲の決め方について

今回「基準範囲の決め方」について27年度は質問項目を以下のa～fの6項目とした。

- a : 学術文献から引用
- b : 日本人間ドック学会から引用
- c : 日本臨床検査標準協議会（JCCLS）から引用
- d : 使用試薬の添付説明書記載の値を引用
- e : 多数の健康者を実測して自機関で作成
- f : その他（単位表示など具体的に記述してください）

回答で最も多かったものは各項目とも「a 学術文献から引用」で、次には「人間ドック学会」から引用であった。集計結果を表1の基準範囲の決め方に示す。なお、以下に「その他」に記入されていた基準値の引用先機関等を記載する。重複して記入されているもの、同種と思われるものはまとめて記載した。

[fのその他に記入された参考とした規準値の主なもの]

- ・ 各地域の医師会・技師会等
- ・ 測定依頼先検査所
- ・ 協会けんぽ
- ・ 全国健康保健協会
- ・ 船員保健会
- ・ 項目ごと関連学会のガイドライン

表1 基準範囲の決め方

項目	根拠													
	学術文献から引用		日本人間ドック学会から引用		日本臨床検査標準協議会(JCCLS)から引用		使用試薬の添付説明文書記載の値を引用		多数の健康者を実測し自機関で作成		その他		Blank	
総コレステロール	139	45.9%	85	28.1%	6	2.0%	9	2.9%	11	3.6%	43	14.2%	10	3.3%
中性脂肪	135	44.4%	89	29.3%	5	1.6%	9	2.9%	14	4.6%	42	13.8%	10	3.3%
HDLコレステロール	131	42.7%	89	29.0%	10	3.3%	10	3.2%	14	4.6%	45	14.7%	8	2.6%
LDLコレステロール	136	44.7%	84	27.6%	6	2.0%	10	3.2%	14	4.6%	44	14.5%	10	3.3%
AST (GOT)	118	38.9%	77	25.4%	9	3.0%	12	3.8%	34	11.2%	44	14.5%	9	3.0%
ALT (GPT)	118	38.9%	77	25.4%	9	3.0%	12	3.8%	34	11.2%	44	14.5%	9	3.0%
γ-GT (γ-GTP)	111	36.6%	77	25.4%	14	4.6%	12	3.8%	34	11.2%	45	14.9%	10	3.3%
尿酸	139	45.4%	75	24.5%	6	2.0%	10	3.2%	15	4.9%	49	16.0%	12	3.9%
クレアチニン	128	42.4%	74	24.5%	8	2.6%	11	3.5%	28	9.3%	43	14.2%	10	3.3%
血糖	141	46.4%	77	25.3%	7	2.3%	10	3.2%	17	5.6%	44	14.5%	8	2.6%
HbA1c	146	48.5%	76	25.2%	8	2.7%	8	2.6%	13	4.3%	39	13.0%	11	3.7%
ヘモグロビン	126	41.7%	68	22.5%	10	3.3%	8	2.6%	43	14.2%	37	12.3%	10	3.3%
赤血球数	124	41.2%	70	23.3%	10	3.3%	8	2.6%	43	14.3%	36	12.0%	10	3.3%
白血球数	124	41.1%	67	22.2%	11	3.6%	8	2.6%	47	15.6%	35	11.6%	10	3.3%
血小板数	128	42.4%	66	21.9%	10	3.3%	8	2.6%	43	14.2%	36	11.9%	11	3.6%
ヘマトクリット	125	41.4%	68	22.5%	11	3.6%	8	2.6%	45	14.9%	35	11.6%	10	3.3%
MCV	126	41.7%	38	12.6%	10	3.3%	8	2.6%	52	17.2%	37	12.3%	31	10.3%

2. 基準範囲の変更について

「基準範囲の変更」理由として以下の 0～5 の 6 項目を設定した。

- 0 : 変更なし
- 1 : 検査方法の変更
- 2 : 使用機器の変更
- 3 : 試薬の変更
- 4 : 基準値引用の変更
- 5 : その他（具体的に記述してください）

前回 26 年度調査時では HbA1c 国際標準化に沿って表記の見直しがあったため、今年度は当該 HbA1c 以外 90%以上が「変更なし」の回答であった。

「5 その他」の記入では、検査委託先変更による基準範囲の変更との回答があった。表 2 に集計結果を示す。

表2 基準範囲の変更

項目	根拠													
	変更なし		検査方法の変更		使用機器の変更		試薬の変更		基準値引用の変更		その他		Blank	
総コレステロール	274	91.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	10	3.3%	2	0.7%	11	3.7%
中性脂肪	275	91.7%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	10	3.3%	2	0.7%	10	3.3%
HDLコレステロール	274	91.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	10	3.3%	3	1.0%	10	3.3%
LDLコレステロール	274	91.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	11	3.7%	2	0.7%	10	3.3%
AST (GOT)	275	91.7%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.7%	9	3.0%	1	0.3%	11	3.7%
ALT (GPT)	275	91.7%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.7%	9	3.0%	1	0.3%	11	3.7%
γ-GT (γ-GTP)	275	91.7%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	9	3.0%	2	0.7%	11	3.7%
尿酸	273	91.0%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	11	3.7%	1	0.3%	12	4.0%
クレアチニン	273	91.0%	2	0.7%	1	0.3%	1	0.3%	12	4.0%	1	0.3%	10	3.3%
血糖	275	91.7%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	11	3.7%	0	0.0%	11	3.7%
HbA1c	259	86.3%	1	0.3%	2	0.7%	1	0.3%	23	7.7%	2	0.7%	12	4.0%
ヘモグロビン	270	90.0%	1	0.3%	3	1.0%	1	0.3%	11	3.7%	1	0.3%	13	4.3%
赤血球数	273	91.0%	1	0.3%	3	1.0%	1	0.3%	9	3.0%	0	0.0%	13	4.3%
白血球数	273	91.0%	1	0.3%	3	1.0%	1	0.3%	9	3.0%	0	0.0%	13	4.3%
血小板数	270	90.0%	1	0.3%	3	1.0%	1	0.3%	9	3.0%	1	0.3%	15	5.0%
ヘマトクリット	272	90.7%	1	0.3%	3	1.0%	1	0.3%	9	3.0%	1	0.3%	13	4.3%
MCV	248	82.7%	1	0.3%	3	1.0%	1	0.3%	7	2.3%	2	0.7%	38	12.7%

3. 各項目の基準範囲の集計結果

対象は、精度管理調査参加施設 364 施設。回収施設数は 297 施設。

項目	(単位)		項目	(単位)	
総コレステロール	(mg/dL)		ヘモグロビン	(g/dL)	男女
中性脂肪	(mg/dL)		赤血球数	($10^4 \mu\text{L}$)	男女
HDL コレステロール	(mg/dL)	男女	白血球数	($10^2 \mu\text{L}$)	
LDL コレステロール	(mg/dL)	男女	血小板数	($10^4 \mu\text{L}$)	
AST (GOT)	(U/L)		ヘマトクリット	(%)	男女
ALT (GPT)	(U/L)		MCV	(fL)	男女
γ -GT	(U/L)				
尿酸	(mg/dL)	男女			
クレアチニン	(mg/dL)				
血糖	(mg/dL)				
HbA1c	(%)				

総コレステロール(無性差) (mg/dL) 回答数297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	6 (2.0%)	130 ～ 119	1 (0.3%)
～ 219	4 (1.3%)	130 ～ 219	48 (16.2%)
～ 220	1 (0.3%)	130 ～ 220	15 (5.1%)
100 ～ 219	1 (0.3%)	135 ～ 219	1 (0.3%)
100 ～ 220	2 (0.7%)	140 ～ 199	107 (36.0%)
101 ～ 219	1 (0.3%)	140 ～ 219	24 (8.1%)
104 ～ 199	1 (0.3%)	140 ～ 220	2 (0.7%)
120 ～ 219	29 (9.8%)	142 ～ 248	1 (0.3%)
120 ～ 220	1 (0.3%)	145 ～ 219	1 (0.3%)
120 ～	1 (0.3%)	150 ～ 199	2 (0.7%)
125 ～ 219	2 (0.7%)	150 ～ 219	23 (7.7%)
125 ～ 220	1 (0.3%)	219 219	1 (0.3%)
128 ～ 219	21 (7.1%)		

中性脂肪(無性差) (mg/ dL) 回答数297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	8 (2.7%)	35 ～ 199	1 (0.3%)
～ 149	27 (9.1%)	36 ～ 130	1 (0.3%)
～ 150	3 (1.0%)	40 ～ 149	26 (8.8%)
0 ～ 149	11 (3.7%)	40 ～ 150	2 (0.7%)
1 ～ 149	1 (0.3%)	40 ～ 234	1 (0.3%)
1 ～ 150	1 (0.3%)	45 ～ 149	3 (1.0%)
30 ～ 148	1 (0.3%)	50 ～ 149	28 (9.4%)
30 ～ 149	142 (47.8%)	50 ～ 150	2 (0.7%)
30 ～ 150	6 (2.0%)	65 ～ 120	1 (0.3%)
30 ～ 160	1 (0.3%)	130 ～ 149	2 (0.7%)
35 ～ 149	25 (8.4%)	20 ～ 149	1 (0.3%)
35 ～ 150	3 (1.0%)	～	(0.0%)

HDL（男性）（mg/dL）回答数297					
基準範囲		機関数	基準範囲		機関数
未記入		11 （ 3.7% ）	40 ～ 96	17 （ 5.7% ）	
～ 39		1 （ 0.3% ）	40 ～ 99	33 （ 11.1% ）	
～ 40		2 （ 0.7% ）	40 ～ 99.9	3 （ 1.0% ）	
1 ～ 40		1 （ 0.3% ）	40 ～ 100	3 （ 1.0% ）	
19 ～ 40		1 （ 0.3% ）	40 ～ 119	87 （ 29.3% ）	
35 ～ 75		1 （ 0.3% ）	40 ～ 119.9	2 （ 0.7% ）	
35 ～ 85		2 （ 0.7% ）	40 ～ 120	1 （ 0.3% ）	
37 ～ 71		1 （ 0.3% ）	40 ～ 129	1 （ 0.3% ）	
37 ～ 86		1 （ 0.3% ）	40 ～ 149	1 （ 0.3% ）	
38 ～ 63		1 （ 0.3% ）	40 ～ 199	1 （ 0.3% ）	
38 ～ 90		1 （ 0.3% ）	40 ～ 999	3 （ 1.0% ）	
40 ～ 60		1 （ 0.3% ）	40 ～	38 （ 12.8% ）	
40 ～ 70		4 （ 1.3% ）	40 ～ 67	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 75		4 （ 1.3% ）	40 ～ 80	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 77		4 （ 1.3% ）	40 ～ 85	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 79		5 （ 1.7% ）	40 ～ 96	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 80		16 （ 5.4% ）	40 ～ 99	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 83		1 （ 0.3% ）	40 ～ 100	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 85		14 （ 4.7% ）	40 ～ 119	3 （ 1.0% ）	
40 ～ 86		16 （ 5.4% ）	41 ～ 100	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 89		1 （ 0.3% ）	41 ～ 99	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 90		4 （ 1.3% ）	44 ～ 102	1 （ 0.3% ）	
40 ～ 95		1 （ 0.3% ）	44 ～ 75	1 （ 0.3% ）	

HDL (女性) (mg/dL) 回答数297					
基準範囲		機関数	基準範囲		機関数
未記入		169 (56.9%)	40 ~ 999	2 (0.7%)	
~ 40		1 (0.3%)	40 ~	16 (5.4%)	
40 ~ 75		1 (0.3%)	41 ~ 90	1 (0.3%)	
40 ~ 79		1 (0.3%)	41 ~ 100	1 (0.3%)	
40 ~ 80		1 (0.3%)	41 ~ 102	1 (0.3%)	
40 ~ 83		4 (1.3%)	42 ~ 77	1 (0.3%)	
40 ~ 85		1 (0.3%)	43 ~ 78	1 (0.3%)	
40 ~ 89		2 (0.7%)	44 ~	1 (0.3%)	
40 ~ 90		17 (5.7%)	45 ~ 75	2 (0.7%)	
40 ~ 95		13 (4.4%)	45 ~ 95	1 (0.3%)	
40 ~ 96		20 (6.7%)	48 ~ 103	1 (0.3%)	
40 ~ 99		5 (1.7%)	49 ~ 74	1 (0.3%)	
40 ~ 100		4 (1.3%)	50 ~ 70	1 (0.3%)	
40 ~ 119		21 (7.1%)	50 ~ 99	1 (0.3%)	
40 ~ 120		2 (0.7%)	50 ~ 109	1 (0.3%)	
40 ~ 129		1 (0.3%)	53 ~ 87	1 (0.3%)	
40 ~ 149		1 (0.3%)	~	(0.0%)	

LDL コレステロール (男性) (mg/dL) 回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	11 (3.7%)	50 ~ 139	3 (1.0%)
~ 119	13 (4.4%)	58 ~ 139	1 (0.3%)
~ 120	2 (0.7%)	60 ~ 119	99 (33.3%)
~ 139	11 (3.7%)	60 ~ 129	1 (0.3%)
~ 139.9	1 (0.3%)	60 ~ 139	12 (4.0%)
~ 140	1 (0.3%)	60 ~ 149	1 (0.3%)
~ 159	1 (0.3%)	60 ~ 199	1 (0.3%)
~ 199	1 (0.3%)	65 ~ 119	1 (0.3%)
0 ~ 119	4 (1.3%)	65 ~ 139	21 (7.1%)
0 ~ 120	4 (1.3%)	65 ~ 163	1 (0.3%)
0 ~ 139	7 (2.4%)	70 ~ 119	9 (3.0%)
0 ~ 140	2 (0.7%)	70 ~ 129	2 (0.7%)
0 ~ 199	1 (0.3%)	70 ~ 129.9	1 (0.3%)
1 ~ 139	2 (0.7%)	70 ~ 139	75 (25.3%)
15 ~ 119	1 (0.3%)	70 ~ 139.9	1 (0.3%)
20 ~ 140	1 (0.3%)	70 ~ 140	3 (1.0%)
50 ~ 120	1 (0.3%)	100 ~ 139	1 (0.3%)

LDL (女性) (mg/dL) 回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	221 (83.7%)	50 ~ 139	1 (0.4%)
~ 119	4 (1.5%)	60 ~ 119	22 (8.3%)
~ 120	1 (0.4%)	60 ~ 139	3 (1.1%)
~ 139	3 (1.1%)	65 ~ 119	1 (0.4%)
~ 140	1 (0.4%)	65 ~ 139	5 (1.9%)
~ 199	1 (0.4%)	65 ~ 163	1 (0.4%)
0 ~ 139	2 (0.8%)	70 ~ 129	1 (0.4%)
0 ~ 199	1 (0.4%)	70 ~ 139	20 (6.7%)
1 ~ 119	1 (0.4%)	70 ~ 139.9	1 (0.3%)
1 ~ 139	2 (0.8%)	100 ~ 139	1 (0.4%)
15 ~ 119	1 (0.4%)	120 ~	1 (0.3%)
20 ~ 140	1 (0.4%)	139 ~	1 (0.3%)

AST（無性差）（U/L）回答数 297									
基準範囲			機関数		基準範囲			機関数	
未記入			5 （ 1.7% ）		5 ～ 36			2 （ 0.7% ）	
～ 34			21 （ 7.1% ）		5 ～ 40			6 （ 2.0% ）	
～ 31			2 （ 0.7% ）		7 ～ 38			2 （ 0.7% ）	
～ 39			14 （ 4.7% ）		8 ～ 30			6 （ 2.0% ）	
～ 38			2 （ 0.7% ）		8 ～ 34			2 （ 0.7% ）	
～ 40			9 （ 3.0% ）		8 ～ 35			3 （ 1.0% ）	
0	～	30	1 （ 0.3% ）		8 ～ 38			10 （ 3.4% ）	
0	～	31	63 （ 21.2% ）		8 ～ 40			7 （ 2.4% ）	
0	～	33	2 （ 0.7% ）		10 ～ 30			2 （ 0.7% ）	
0	～	35	4 （ 1.3% ）		10 ～ 35			11 （ 3.7% ）	
0	～	39	2 （ 0.7% ）		10 ～ 40			51 （ 17.2% ）	
0	～	39	1 （ 0.3% ）		12 ～ 31			1 （ 0.3% ）	
0	～	40	17 （ 5.7% ）		12 ～ 32			1 （ 0.3% ）	
0	～	42	2 （ 0.7% ）		13 ～ 30			6 （ 2.0% ）	
0	～	45	3 （ 1.0% ）		13 ～ 33			20 （ 6.7% ）	
1	～	30	3 （ 1.0% ）		30 ～ 30			4 （ 1.3% ）	
1	～	35	2 （ 0.7% ）		35 ～ 33			4 （ 1.3% ）	
1	～	42	1 （ 0.3% ）		38 ～			1 （ 0.3% ）	
3	～	40	1 （ 0.3% ）		40 ～			1 （ 0.3% ）	
5	～	35	1 （ 0.3% ）		31 ～ 60			1 （ 0.3% ）	

ALT（無性差）（U/L）回答数 297								
基準範囲			機関数		基準範囲		機関数	
未記入			8 （ 2.8% ）		5	～	30	9 （ 3.1% ）
～	30		29 （ 10.1% ）		5	～	35	11 （ 3.8% ）
～	31		1 （ 0.3% ）		5	～	40	5 （ 1.7% ）
～	35		21 （ 7.3% ）		5	～	42	1 （ 0.3% ）
～	40		11 （ 3.8% ）		5	～	43	1 （ 0.3% ）
～	43		2 （ 0.7% ）		5	～	45	44 （ 15.3% ）
～	44		2 （ 0.7% ）		6	～	27	2 （ 0.7% ）
～	45		2 （ 0.7% ）		6	～	30	13 （ 4.5% ）
0	～	30	65 （ 22.6% ）		6	～	32	1 （ 0.3% ）
0	～	35	5 （ 1.7% ）		6	～	35	2 （ 0.7% ）
0	～	39	1 （ 0.3% ）		6	～	40	3 （ 1.0% ）
0	～	40	13 （ 4.5% ）		7		39	1 （ 0.3% ）
0	～	45	10 （ 3.5% ）		7	～	42	1 （ 0.3% ）
3	～	35	1 （ 0.3% ）		8	～	40	1 （ 0.3% ）
4	～	39	1 （ 0.3% ）		8	～	42	4 （ 1.4% ）
4	～	40	1 （ 0.3% ）		10	～	35	1 （ 0.3% ）
4	～	41	2 （ 0.7% ）		10		40	5 （ 1.7% ）
4	～	43	6 （ 2.1% ）		10	～	42	1 （ 0.3% ）
4	～	44	7 （ 2.4% ）		31	～	60	1 （ 0.3% ）
4	～	45	2 （ 0.7% ）					

γ -GT (男性) (U/L) 回答数 297					
基準範囲		機関数	基準範囲		機関数
未記入		12 (4.0%)	0 ~ 84	1 (0.3%)	
~	49	1 (0.3%)	0 ~ 85	5 (1.7%)	
~	50	34 (11.4%)	0 ~ 86	1 (0.3%)	
~	51	1 (0.3%)	0 ~ 88	1 (0.3%)	
~	55	12 (4.0%)	1 ~ 50	3 (1.0%)	
~	60	1 (0.3%)	1 ~ 55	1 (0.3%)	
~	67	2 (0.7%)	1 ~ 60	1 (0.3%)	
~	70	3 (1.0%)	1 ~ 70	1 (0.3%)	
~	73	3 (1.0%)	1 ~ 79	1 (0.3%)	
~	75	5 (1.7%)	3 ~ 84	1 (0.3%)	
~	76	1 (0.3%)	5 ~ 55	5 (1.7%)	
~	79	8 (2.7%)	5 ~ 60	6 (0.3%)	
~	80	25 (8.4%)	6 ~ 55	1 (0.3%)	
~	85	1 (0.3%)	6 ~ 64	1 (0.3%)	
~	86	3 (1.0%)	6 ~ 85	1 (0.3%)	
~	90	2 (0.7%)	7 ~ 60	1 (0.3%)	
~	95	1 (0.3%)	7 ~ 74	1 (0.7%)	
0 ~	47	1 (0.3%)	8 ~ 58	2 (0.3%)	
0 ~	49	1 (0.3%)	8 ~ 60	1 (0.3%)	
0 ~	50	64 (21.5%)	9 ~ 70	1 (0.3%)	
0 ~	55	4 (1.3%)	9 ~ 101	1 (0.3%)	
0 ~	59	1 (0.3%)	10 ~ 47	21 (7.1%)	
0 ~	60	4 (1.3%)	10 ~ 50	1 (0.3%)	
0 ~	67	2 (0.7%)	10 ~ 68	1 (0.3%)	
0 ~	70	6 (2.0%)	11 ~ 73	1 (0.3%)	
0 ~	73	1 (0.3%)	12 ~ 72	2 (0.7%)	
0 ~	74	1 (0.3%)	13 ~ 64	1 (0.3%)	
0 ~	75	10 (3.4%)	16 ~ 73	2 (0.7%)	
0 ~	79	6 (2.0%)	16 ~ 84	1 (0.3%)	
0 ~	80	12 (4.0%)	18 ~ 66	2 (0.7%)	

γ -GT (女性) (U/L) 回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	146 (49.2%)	0 ~ 65	1 (0.3%)
~ 30	18 (6.1%)	1 ~ 35	1 (0.3%)
~ 35	2 (0.7%)	1 ~ 48	1 (0.3%)
~ 40	3 (1.0%)	1 ~ 55	1 (0.3%)
~ 45	6 (2.0%)	2 ~ 40	1 (0.3%)
~ 48	11 (3.7%)	3 ~ 40	1 (0.3%)
~ 49	1 (0.3%)	3 ~ 48	1 (0.3%)
~ 50	14 (4.7%)	4 ~ 40	1 (0.3%)
~ 55	3 (1.0%)	5 ~ 37	1 (0.3%)
~ 66	1 (0.3%)	5 ~ 40	5 (1.7%)
~ 70	1 (0.3%)	7 ~ 32	1 (0.3%)
~ 73	1 (0.3%)	7 ~ 38	2 (0.7%)
~ 80	2 (0.7%)	8 ~ 40	1 (0.3%)
0 ~ 30	5 (1.7%)	8 ~ 65	1 (0.3%)
0 ~ 35	2 (0.7%)	9 ~ 32	1 (0.3%)
0 ~ 40	3 (1.0%)	9 ~ 49	1 (2.4%)
0 ~ 45	10 (3.4%)	10 ~ 47	7 (0.3%)
0 ~ 48	10 (3.4%)	10 ~ 50	1 (0.7%)
0 ~ 49	1 (0.3%)	10 ~ 55	2 (0.7%)
0 ~ 50	18 (6.1%)	11 ~ 45	2 (0.3%)
0 ~ 55	4 (1.3%)	12 ~ 48	1 (0.0%)
0 ~ 60	1 (0.3%)	~	()

尿酸(男性) (mg/dL)回答数 297					
基準範囲		機関数	基準範囲		機関数
未記入		14 (4.7%)	2.9 ~ 6.5	1 (0.3%)	
～ 6.9		4 (1.3%)	3.0 ~ 6.9	6 (2.0%)	
～ 7.0		34 (11.4%)	3.0 ~ 7.0	6 (2.0%)	
～ 7.2		1 (0.3%)	3.0 ~ 7.5	1 (0.3%)	
～ 7.5		1 (0.3%)	3.1 ~ 6.5	2 (0.7%)	
～ 70.0		1 (0.3%)	3.3 ~ 7.0	1 (0.3%)	
0.0	～ 7.0	19 (6.4%)	3.5 ~ 6.9	1 (0.3%)	
0.0	～ 7.5	2 (0.7%)	3.5 ~ 7.0	3 (1.0%)	
0.1	～ 7.0	1 (0.3%)	3.5 ~ 7.5	2 (0.7%)	
1.0	～ 7.0	1 (0.3%)	3.5 ~ 7.9	1 (0.3%)	
1.6	～ 7.0	1 (0.3%)	3.6 ~ 7.0	43 (14.4%)	
2.0	～ 6.9	3 (1.0%)	3.6 ~ 7.6	1 (0.3%)	
2.0	～ 7.0	21 (7.0%)	3.7 ~ 7.0	15 (5.0%)	
2.0	～ 7.5	1 (0.3%)	3.7 ~ 7.6	1 (0.3%)	
2.1	～ 6.9	4 (1.3%)	3.7 ~ 7.8	1 (0.3%)	
2.1	～ 7.0	64 (21.5%)	3.8 ~ 7.0	17 (5.7%)	
2.1	～ 70.0	1 (0.3%)	3.8 ~ 7.5	1 (0.3%)	
2.3	～ 7.5	1 (0.3%)	4.0 ~ 6.9	1 (0.3%)	
2.5	～ 6.9	1 (0.3%)	4.0 ~ 7.0	3 (1.0%)	
2.5	～ 7.0	12 (4.0%)	4.5 ~ 7.0	1 (0.3%)	
2.6	～ 7.0	1 (0.3%)	7.0 ~ 21.0	1 (0.3%)	

尿酸(男性) (mg/dL) 回答数 297					
基準範囲		機関数	基準範囲		機関数
未記入		14 (4.7%)	2.9 ~ 6.5	1 (0.3%)	
~ 6.9		4 (1.3%)	3.0 ~ 6.9	6 (2.0%)	
~ 7.0		34 (11.4%)	3.0 ~ 7.0	6 (2.0%)	
~ 7.2		1 (0.3%)	3.0 ~ 7.5	1 (0.3%)	
~ 7.5		1 (0.3%)	3.1 ~ 6.5	2 (0.7%)	
~ 70.0		1 (0.3%)	3.3 ~ 7.0	1 (0.3%)	
0.0 ~ 7.0		19 (6.4%)	3.5 ~ 6.9	1 (0.3%)	
0.0 ~ 7.5		2 (0.7%)	3.5 ~ 7.0	3 (1.0%)	
0.1 ~ 7.0		1 (0.3%)	3.5 ~ 7.5	2 (0.7%)	
1.0 ~ 7.0		1 (0.3%)	3.5 ~ 7.9	1 (0.3%)	
1.6 ~ 7.0		1 (0.3%)	3.6 ~ 7.0	43 (14.4%)	
2.0 ~ 6.9		3 (1.0%)	3.6 ~ 7.6	1 (0.3%)	
2.0 ~ 7.0		21 (7.0%)	3.7 ~ 7.0	15 (5.0%)	
2.0 ~ 7.5		1 (0.3%)	3.7 ~ 7.6	1 (0.3%)	
2.1 ~ 6.9		4 (1.3%)	3.7 ~ 7.8	1 (0.3%)	
2.1 ~ 7.0		64 (21.5%)	3.8 ~ 7.0	17 (5.7%)	
2.1 ~ 70.0		1 (0.3%)	3.8 ~ 7.5	1 (0.3%)	
2.3 ~ 7.5		1 (0.3%)	4.0 ~ 6.9	1 (0.3%)	
2.5 ~ 6.9		1 (0.3%)	4.0 ~ 7.0	3 (1.0%)	
2.5 ~ 7.0		12 (4.0%)	4.5 ~ 7.0	1 (0.3%)	
2.6 ~ 7.0		1 (0.3%)	7.0 ~ 21.0	1 (0.3%)	

クレアチニン(男性) (mg/dL) 回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	4 (1.3%)	0.40 ~ 1.00	1 (0.3%)
~ 0.70	1 (0.3%)	0.40 ~ 1.10	1 (0.3%)
~ 1.00	47 (15.8%)	0.40 ~ 1.14	3 (1.0%)
~ 1.04	2 (0.7%)	0.42 ~ 1.11	1 (0.3%)
~ 1.05	1 (0.3%)	0.45 ~ 1.14	1 (0.3%)
~ 1.07	1 (0.3%)	0.50 ~ 1.00	2 (0.7%)
~ 1.09	12 (4.0%)	0.50 ~ 1.09	1 (0.3%)
~ 1.10	12 (4.0%)	0.50 ~ 1.10	6 (2.0%)
~ 1.14	1 (0.3%)	0.50 ~ 1.20	2 (0.7%)
~ 1.19	2 (0.7%)	0.53 ~ 1.02	2 (0.7%)
~ 1.20	2 (0.7%)	0.56 ~ 1.06	3 (1.0%)
0.00 ~ 1.00	34 (11.4%)	0.57 ~ 1.04	1 (0.3%)
0.00 ~ 1.04	1 (0.3%)	0.60 ~ 1.00	2 (0.7%)
0.00 ~ 1.09	9 (3.0%)	0.60 ~ 1.10	38 (12.8%)
0.00 ~ 1.10	2 (0.7%)	0.60 ~ 1.15	1 (0.3%)
0.00 ~ 1.14	4 (1.3%)	0.60 ~ 1.20	2 (0.7%)
0.00 ~ 1.15	1 (0.3%)	0.60 ~ 1.29	3 (1.0%)
0.00 ~ 1.19	2 (0.7%)	0.61 ~ 1.04	50 (16.8%)
0.00 ~ 1.59	1 (0.3%)	0.61 ~ 1.08	1 (0.3%)
0.01 ~ 1.00	1 (0.3%)	0.61 ~ 1.09	3 (1.0%)
0.01 ~ 1.00	1 (0.3%)	0.65 ~ 1.00	1 (0.3%)
0.10 ~ 1.00	1 (0.3%)	0.65 ~ 1.07	1 (0.3%)
0.10 ~ 1.10	2 (0.7%)	0.65 ~ 1.09	16 (5.4%)
0.20 ~ 1.00	1 (0.3%)	0.66 ~ 1.20	1 (0.3%)
0.30 ~ 1.10	2 (0.7%)	0.66 ~ 1.13	1 (0.3%)
0.35 ~ 1.14	2 (0.7%)	0.70 ~ 1.30	1 (0.3%)
0.40 ~ 1.09	2 (0.7%)	1.10 ~ 1.29	1 (0.3%)

クレアチニン(女性) (mg/dL) 回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	15 (5.1%)	0.40 ~ 0.70	19 (6.4%)
~ 0.70	47 (15.8%)	0.40 ~ 0.79	1 (0.3%)
~ 0.79	9 (3.0%)	0.40 ~ 0.80	19 (6.4%)
~ 0.80	14 (4.7%)	0.40 ~ 0.89	1 (0.3%)
~ 0.81	1 (0.3%)	0.40 ~ 0.90	4 (1.3%)
~ 0.82	2 (0.7%)	0.40 ~ 0.99	1 (0.3%)
~ 0.84	1 (0.3%)	0.40 ~ 1.00	1 (0.3%)
~ 0.89	3 (1.0%)	0.40 ~ 1.09	1 (0.3%)
~ 0.90	1 (0.3%)	0.41 ~ 0.76	3 (1.0%)
~ 1.00	1 (0.3%)	0.43 ~ 0.72	1 (0.3%)
0.00 ~ 0.70	32 (10.8%)	0.43 ~ 0.82	1 (0.3%)
0.00 ~ 0.79	8 (2.7%)	0.45 ~ 0.80	2 (0.7%)
0.00 ~ 0.80	2 (0.7%)	0.45 ~ 0.85	1 (0.3%)
0.00 ~ 0.82	2 (0.7%)	0.46 ~ 0.70	1 (0.3%)
0.00 ~ 0.84	4 (1.3%)	0.46 ~ 0.79	2 (0.7%)
0.00 ~ 0.85	1 (0.3%)	0.46 ~ 0.80	1 (0.3%)
0.00 ~ 0.89	2 (0.7%)	0.46 ~ 0.82	19 (6.4%)
0.01 ~ 0.70	1 (0.3%)	0.47 ~ 0.79	49 (16.5%)
0.10 ~ 0.70	1 (0.3%)	0.48 ~ 0.85	1 (0.3%)
0.10 ~ 0.80	2 (0.7%)	0.50 ~ 0.80	2 (0.7%)
0.20 ~ 0.80	1 (0.3%)	0.50 ~ 0.90	1 (0.3%)
0.22 ~ 0.91	1 (0.3%)	0.50 ~ 1.09	1 (0.3%)
0.30 ~ 0.79	1 (0.3%)	0.50 ~ 1.10	1 (0.3%)
0.30 ~ 0.80	2 (0.7%)	0.58 ~ 0.90	1 (0.3%)
0.31 ~ 0.88	3 (1.0%)	0.60 ~ 1.00	1 (0.3%)
0.35 ~ 0.84	2 (0.7%)	0.60 ~ 1.20	1 (0.3%)
0.35 ~ 0.94	1 (0.3%)	0.80 ~ 0.99	1 (0.3%)

血糖（無性差）（mg/dL）回答数297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	7 (2.4%)	60 ～ 110	3 (1.0%)
～ 99	28 (9.4%)	65 ～ 99	7 (2.4%)
～ 109	12 (4.0%)	65 ～ 105	2 (0.7%)
～ 110	3 (1.0%)	65 ～ 109	2 (0.7%)
0 ～ 99	24 (8.1%)	69 ～ 99	1 (0.3%)
0 ～ 109	6 (2.0%)	69 ～ 109	2 (0.7%)
1 ～ 109	1 (0.3%)	70 ～ 99	43 (14.9%)
40 ～ 99	2 (0.7%)	70 ～ 109	75 (26.0%)
50 ～ 99	4 (1.3%)	70 ～ 110	11 (3.8%)
50 ～ 109	1 (0.3%)	70 ～ 139	2 (0.7%)
50 ～ 140	1 (0.3%)	75 ～ 99	1 (0.3%)
51 ～ 99	2 (0.7%)	75 ～ 109	1 (0.3%)
51 ～ 109	4 (1.3%)	75 ～ 110	1 (0.3%)
60 ～ 99	24 (8.1%)	77 ～ 110	1 (0.3%)
60 ～ 100	1 (0.3%)	78 ～ 99	1 (0.3%)
60 ～ 109	24 (8.1%)	～	(0.0%)

HbA1c（無性差）（%）回答数297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	6 (2.0%)	3.3 ～ 5.5	1 (0.3%)
～ 5.1	2 (0.7%)	3.9 ～ 5.5	1 (0.3%)
～ 5.2	1 (0.3%)	4.3 ～ 5.5	12 (4.2%)
～ 5.4	1 (0.3%)	4.3 ～ 5.6	1 (0.3%)
～ 5.5	54 (18.2%)	4.3 ～ 5.8	3 (1.0%)
～ 5.6	1 (0.3%)	4.3 ～ 5.9	4 (1.4%)
～ 5.8	4 (1.3%)	4.3 ～ 6.2	2 (0.7%)
～ 5.9	7 (2.4%)	4.4 ～ 5.5	2 (0.7%)
～ 6.0	2 (0.7%)	4.4 ～ 5.9	2 (0.7%)
～ 6.2	5 (1.7%)	4.4 ～ 6.4	1 (0.3%)
～ 6.3	1 (0.3%)	4.5 ～ 6.2	1 (0.3%)
0 ～ 5.1	1 (0.3%)	4.6 ～ 5.5	30 (10.4%)
0 ～ 5.4	1 (0.3%)	4.6 ～ 5.8	2 (0.7%)
0 ～ 5.5	33 (11.1%)	4.6 ～ 5.9	7 (2.4%)
0 ～ 6.2	5 (1.7%)	4.6 ～ 6.2	92 (31.9%)
0.1 ～ 5.5	2 (0.7%)	4.7 ～ 5.5	1 (0.3%)
0.1 ～ 5.8	1 (0.3%)	4.7 ～ 5.9	1 (0.3%)
0.1 ～ 5.9	1 (0.3%)	4.7 ～ 6.2	3 (1.0%)
2.4 ～ 5.5	1 (0.3%)	4.9 ～ 5.5	2 (0.7%)

ヘモグロビン(男性) (g/dL) 回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	4 (1.3%)	13.3 ~ 17.0	1 (0.3%)
~ 13.5	1 (0.3%)	13.4 ~ 17.9	1 (0.3%)
11.0 ~	1 (0.3%)	13.5 ~ 17.0	2 (0.7%)
12.0 ~ 18.9	1 (0.3%)	13.5 ~ 17.5	18 (6.1%)
12.4 ~ 16.6	1 (0.3%)	13.5 ~ 17.6	34 (11.4%)
12.4 ~ 17.6	1 (0.3%)	13.5 ~ 17.7	1 (0.3%)
12.6 ~ 17.6	1 (0.3%)	13.5 ~ 18.0	6 (2.0%)
13.0 ~ 16.6	19 (6.4%)	13.5 ~ 18.3	2 (0.7%)
13.0 ~ 16.9	1 (0.3%)	13.5 ~ 18.7	1 (0.3%)
13.0 ~ 17.0	24 (8.1%)	13.5 ~ 18.9	1 (0.3%)
13.0 ~ 17.5	2 (0.7%)	13.5 ~	1 (0.3%)
13.0 ~ 17.6	4 (1.3%)	13.6 ~ 17.0	1 (0.3%)
13.0 ~ 17.9	1 (0.3%)	13.6 ~ 17.4	2 (0.7%)
13.0 ~ 18.0	8 (2.7%)	13.6 ~ 17.6	1 (0.3%)
13.0 ~ 18.3	1 (0.3%)	13.6 ~ 18.0	1 (0.3%)
13.0 ~	1 (0.3%)	13.6 ~ 18.3	18 (6.1%)
13.1 ~ 16.6	73 (24.6%)	13.6 ~	1 (0.3%)
13.1 ~ 16.8	1 (0.3%)	13.7 ~ 16.8	1 (0.3%)
13.1 ~ 16.9	1 (0.3%)	13.7 ~ 17.4	3 (1.0%)
13.1 ~ 17.6	4 (1.3%)	13.8 ~ 17.2	1 (0.3%)
13.1 ~ 17.9	11 (3.7%)	14.0 ~ 16.5	2 (0.7%)
13.1 ~ 18.0	7 (2.4%)	14.0 ~ 18.0	21 (7.1%)
13.1 ~ 18.3	1 (0.3%)	14.8 ~ 18.0	2 (0.7%)
13.2 ~ 17.0	5 (1.7%)	~	(0.0%)
13.2 ~ 17.6	1 (0.3%)	~	(0.0%)
~	(0.0%)	~	(0.0%)
~	(0.0%)	~	(0.0%)

ヘモグロビン（女性）(g/dL) 回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	3 (1.0%)	11.5 ～ 14.5	2 (0.7%)
～ 11.3	1 (0.3%)	11.5 ～ 15.0	19 (6.4%)
9.0 ～	1 (0.3%)	11.5 ～ 15.2	2 (0.7%)
9.5 ～ 10.9	2 (0.7%)	11.5 ～ 15.5	7 (2.4%)
10.5 ～ 16.0	1 (0.3%)	11.5 ～ 16.0	7 (2.4%)
10.7 ～ 15.1	1 (0.3%)	11.5 ～ 16.5	1 (0.3%)
10.9 ～ 15.2	1 (0.3%)	11.5 ～ 16.9	1 (0.3%)
11.0 ～ 15.0	17 (5.7%)	11.5 ～	2 (0.7%)
11.0 ～ 15.2	2 (0.7%)	11.6 ～ 14.6	1 (0.3%)
11.0 ～ 15.9	1 (0.3%)	11.6 ～ 14.8	1 (0.3%)
11.0 ～ 16.0	3 (1.0%)	11.6 ～ 15.1	2 (0.7%)
11.2 ～ 14.6	1 (0.3%)	11.6 ～ 16.0	1 (0.3%)
11.2 ～ 14.7	1 (0.3%)	12.0 ～ 14.6	1 (0.3%)
11.2 ～ 14.9	1 (0.3%)	12.0 ～ 14.7	1 (0.3%)
11.2 ～ 15.2	20 (6.7%)	12.0 ～ 14.9	1 (0.3%)
11.2 ～ 16.0	1 (0.3%)	12.0 ～ 15.2	1 (0.3%)
11.3 ～ 14.9	1 (0.3%)	12.0 ～ 15.5	2 (0.7%)
11.3 ～ 15.0	5 (1.7%)	12.0 ～ 15.9	2 (0.7%)
11.3 ～ 15.1	1 (0.3%)	12.0 ～ 16.0	27 (9.1%)
11.3 ～ 15.2	28 (9.4%)	12.1 ～ 14.6	71 (23.9%)
11.3 ～ 15.3	1 (0.3%)	12.1 ～ 14.9	3 (1.0%)
11.3 ～ 15.4	1 (0.3%)	12.1 ～ 15.0	1 (0.3%)
11.3 ～ 15.9	2 (0.7%)	12.1 ～ 15.2	3 (1.0%)
11.3 ～ 16.0	1 (0.3%)	12.1 ～ 15.5	1 (0.3%)
11.3 ～ 16.3	1 (0.3%)	12.1 ～ 15.9	10 (3.4%)
11.4 ～ 14.6	18 (6.1%)	12.1 ～ 16.0	3 (1.0%)
11.4 ～ 15.5	5 (1.7%)	12.1 ～ 17.0	1 (0.3%)
11.4 ～ 16.9	1 (0.3%)	12.5 ～ 15.0	1 (0.3%)

赤血球数（男性）（10 ⁴ /μL）回答数297								
基準範囲			機関数		基準範囲		機関数	
未記入			6（ 2.0% ）		418 ～ 555		1（ 0.3% ）	
360	～	550	1（ 0.3% ）		420	～	540	1（ 0.3% ）
370	～	609	1（ 0.3% ）		420	～	549	1（ 0.3% ）
390	～	540	1（ 0.3% ）		420	～	550	4（ 1.3% ）
400	～	530	1（ 0.3% ）		420	～	559	1（ 0.3% ）
400	～	539	91（ 30.6% ）		420	～	560	4（ 1.3% ）
400	～	540	1（ 0.3% ）		420	～	570	16（ 5.4% ）
400	～	550	18（ 6.1% ）		420	～	600	1（ 0.3% ）
400	～	560	2（ 0.7% ）		423	～	559	1（ 0.3% ）
400	～	570	8（ 2.7% ）		425	～	577	1（ 0.3% ）
400	～	577	1（ 0.3% ）		427	～	500	28（ 9.4% ）
400	～	579	4（ 1.3% ）		427	～	570	5（ 1.7% ）
400	～	580	6（ 2.0% ）		427	～	600	1（ 0.3% ）
400	～	599	1（ 0.3% ）		427	～	606	1（ 0.3% ）
401	～	540	5（ 1.7% ）		430	～	530	3（ 1.0% ）
405	～	543	1（ 0.3% ）		430	～	560	1（ 0.3% ）
410	～	520	1（ 0.3% ）		430	～	562	1（ 0.3% ）
410	～	530	6（ 2.0% ）		430	～	570	31（ 10.4% ）
410	～	540	1（ 0.3% ）		430	～	577	1（ 0.3% ）
410	～	550	3（ 1.0% ）		430	～	599	1（ 0.3% ）
410	～	556	1（ 0.3% ）		431	～	565	2（ 0.7% ）
410	～	560	1（ 0.3% ）		438	～	577	20（ 6.7% ）
410	～	570	2（ 0.7% ）		438	～	539	1（ 0.3% ）
410	～	600	1（ 0.3% ）		440	～	560	1（ 0.3% ）
412	～	554	1（ 0.3% ）		440	～	590	1（ 0.3% ）
415	～	550	1（ 0.3% ）		450	～	550	1（ 0.3% ）
415	～	563	1（ 0.3% ）		～	～	～	（ 0.0% ）

赤血球数（女性）（ $10^4/\mu\text{L}$ ）回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	8 (2.7%)	373 ～ 503	1 (0.3%)
330 ～ 500	1 (0.3%)	375 ～ 500	1 (0.3%)
345 ～ 535	1 (0.3%)	375 ～ 510	1 (0.3%)
350 ～ 500	7 (2.4%)	376 ～ 489	1 (0.3%)
350 ～ 516	1 (0.3%)	376 ～ 493	1 (0.3%)
350 ～ 549	2 (0.7%)	376 ～ 500	34 (11.4%)
351 ～ 480	1 (0.3%)	376 ～ 516	21 (7.1%)
355 ～ 475	1 (0.3%)	376 ～ 530	1 (0.3%)
360 ～ 480	1 (0.3%)	376 ～ 533	1 (0.3%)
360 ～ 489	91 (30.6%)	378 ～ 497	2 (0.7%)
360 ～ 490	2 (0.7%)	379 ～ 488	1 (0.3%)
360 ～ 500	2 (0.7%)	380 ～ 480	14 (4.7%)
360 ～ 519	2 (0.7%)	380 ～ 489	1 (0.3%)
360 ～ 520	4 (1.3%)	380 ～ 490	2 (0.7%)
368 ～ 490	1 (0.3%)	380 ～ 500	38 (12.8%)
368 ～ 491	1 (0.3%)	380 ～ 510	3 (1.0%)
370 ～ 490	2 (0.7%)	380 ～ 519	1 (0.3%)
370 ～ 500	21 (7.1%)	380 ～ 520	3 (1.0%)
370 ～ 510	3 (1.0%)	380 ～ 549	2 (0.7%)
370 ～ 520	2 (0.7%)	380 ～ 550	1 (0.3%)
370 ～ 540	1 (0.3%)	385 ～ 480	1 (0.3%)
370 ～ 549	1 (0.3%)	390 ～ 500	2 (0.7%)
373 ～ 490	1 (0.3%)	390 ～ 520	1 (0.3%)

白血球数（無性差）（ $10^2/\mu\text{L}$ ） 297回収					
基準範囲		機関数	基準範囲		機関数
未記入		20（ 6.7% ）	35 ～ 91	1（ 0.3% ）	
30 ～ 90		9（ 3.0% ）	35 ～ 92	1（ 0.3% ）	
30 ～ 95		1（ 0.3% ）	35 ～ 93	1（ 0.3% ）	
31 ～ 93		1（ 0.3% ）	35 ～ 94	1（ 0.3% ）	
31.01 ～ 97		1（ 0.3% ）	35 ～ 95	5（ 1.7% ）	
32 ～		1（ 0.3% ）	35 ～ 97	17（ 5.7% ）	
32 ～ 85		57（ 19.2% ）	35 ～ 97.99	1（ 0.3% ）	
32 ～ 85.9		2（ 0.7% ）	35 ～ 98	5（ 1.7% ）	
32 ～ 85.99		3（ 1.0% ）	35 ～ 99	6（ 2.0% ）	
32 ～ 89		2（ 0.7% ）	35 ～ 100	1（ 0.3% ）	
32 ～ 89.99		3（ 1.0% ）	36 ～ 90	1（ 0.3% ）	
32 ～ 90		2（ 0.7% ）	36 ～ 92	1（ 0.3% ）	
32 ～ 98		1（ 0.3% ）	37 ～ 85	1（ 0.3% ）	
32 ～ 109.99		1（ 0.3% ）	38 ～ 89	1（ 0.3% ）	
33 ～ 69.99		1（ 0.3% ）	38 ～ 90	5（ 1.7% ）	
33 ～ 86		1（ 0.3% ）	38 ～ 93	1（ 0.3% ）	
33 ～ 86.4		1（ 0.3% ）	38 ～ 98	1（ 0.3% ）	
33 ～ 89		15（ 5.1% ）	39 ～ 63	1（ 0.3% ）	
33 ～ 89.99		2（ 0.7% ）	39 ～ 97	2（ 0.7% ）	
33 ～ 90		20（ 6.7% ）	39 ～ 90	2（ 0.7% ）	
33 ～ 91		1（ 0.3% ）	39 ～ 98	20（ 6.7% ）	
33 ～ 95		1（ 0.3% ）	39 ～ 100	7（ 2.4% ）	
33 ～ 96		1（ 0.3% ）	40 ～ 80	6（ 2.0% ）	
33 ～ 97.9		1（ 0.3% ）	40 ～ 85	8（ 2.7% ）	
33 ～ 98		2（ 0.7% ）	40 ～ 89	2（ 0.7% ）	
34 ～ 84		1（ 0.3% ）	40 ～ 90	21（ 7.1% ）	
34 ～ 94		1（ 0.3% ）	40 ～ 95	3（ 1.0% ）	
34 ～ 95		1（ 0.3% ）	40 ～ 99.99	1（ 0.3% ）	
35 ～ 81		1（ 0.3% ）	40 ～ 100	2（ 0.7% ）	
35 ～ 85		4（ 1.3% ）	45 ～ 85	1（ 0.3% ）	
35 ～ 90		13（ 4.4% ）	～	（ 0.0% ）	

血小板数（無性差）（ $10^4/\mu\text{L}$ ）回答数 297					
基準範囲		機関数	基準範囲		機関数
未記入		12（ 4.0% ）	13.1 ～ 36.2		12（ 4.0% ）
10.0 ～ 40.0		2（ 0.7% ）	13.1 ～ 36.5		3（ 1.0% ）
11.0 ～ 34.0		1（ 0.3% ）	13.5 ～ 30.5		1（ 0.3% ）
12.0 ～ 14.4		1（ 0.3% ）	14.0 ～ 31.0		1（ 0.3% ）
12.0 ～ 32.0		3（ 1.0% ）	14.0 ～ 34.0		22（ 7.4% ）
12.0 ～ 34.0		3（ 1.0% ）	14.0 ～ 34.9		1（ 0.3% ）
12.0 ～ 35.0		3（ 1.0% ）	14.0 ～ 35.0		4（ 1.3% ）
12.0 ～ 35.9		1（ 0.3% ）	14.0 ～ 35.9		15（ 5.1% ）
12.0 ～ 36.0		1（ 0.3% ）	14.0 ～ 36.0		3（ 1.0% ）
12.0 ～ 37.0		1（ 0.3% ）	14.0 ～ 37.9		24（ 8.1% ）
12.0 ～ 38.0		3（ 1.0% ）	14.0 ～ 38.0		2（ 0.7% ）
12.0 ～ 40.0		4（ 1.3% ）	14.0 ～ 40.0		1（ 0.3% ）
12.0 ～ 41.0		1（ 0.3% ）	14.0 ～ 44.9		1（ 0.3% ）
12.0 ～ 45.0		1（ 0.3% ）	14.0 ～		4（ 1.3% ）
12.5 ～ 37.5		1（ 0.3% ）	14.5 ～ 35.0		2（ 0.7% ）
13.0 ～ 32.0		2（ 0.7% ）	14.5 ～ 37.0		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 34.0		6（ 2.0% ）	15.0 ～ 33.0		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 34.9		74（ 24.9% ）	15.0 ～ 34.0		2（ 0.7% ）
13.0 ～ 35.0		8（ 2.7% ）	15.0 ～ 35.0		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 36.0		11（ 3.7% ）	15.0 ～ 35.1		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 36.9		21（ 7.1% ）	15.0 ～ 36.0		4（ 1.3% ）
13.0 ～ 37.0		12（ 4.0% ）	15.0 ～ 37.0		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 37.9		1（ 0.3% ）	15.0 ～ 38.0		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 38.0		2（ 0.7% ）	15.0 ～ 40.0		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 39.9		4（ 1.3% ）	15.7 ～ 38.4		1（ 0.3% ）
13.0 ～ 40.0		4（ 1.3% ）	15.8 ～ 34.8		2（ 0.7% ）
13.0 ～ 43.0		1（ 0.3% ）	31.0 ～ 36.0		1（ 0.3% ）

ヘマトクリット（男性）（％）回答数 297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	4（ 1.3% ）	39.0 ～	1（ 0.3% ）
32.0 ～ 39.0	1（ 0.3% ）	39.2 ～ 51.8	1（ 0.3% ）
35.4 ～ 38.8	1（ 0.3% ）	39.5 ～ 51.9	5（ 1.7% ）
36.0 ～ 52.0	1（ 0.3% ）	39.7 ～ 52.4	16（ 5.4% ）
36.0 ～ 53.0	2（ 0.7% ）	39.8 ～ 51.8	32（ 10.8% ）
36.0 ～ 54.9	1（ 0.3% ）	39.8 ～ 54.0	1（ 0.3% ）
37.0 ～ 50.0	1（ 0.3% ）	39.8 ～ 57.8	1（ 0.3% ）
37.0 ～ 52.0	1（ 0.3% ）	40.0 ～ 48.0	7（ 2.4% ）
37.9 ～ 49.2	4（ 1.3% ）	40.0 ～ 49.9	1（ 0.3% ）
38.0 ～ 48.0	1（ 0.3% ）	40.0 ～ 50.0	6（ 2.0% ）
38.0 ～ 48.9	23（ 7.7% ）	40.0 ～ 51.0	2（ 0.7% ）
38.0 ～ 50.0	4（ 1.3% ）	40.0 ～ 51.1	1（ 0.3% ）
38.0 ～ 51.9	1（ 0.3% ）	40.0 ～ 51.5	1（ 0.3% ）
38.0 ～ 52.0	7（ 2.4% ）	40.0 ～ 51.9	1（ 0.3% ）
38.0 ～ 53.9	1（ 0.3% ）	40.0 ～ 52.0	16（ 5.4% ）
38.0 ～ 54.0	1（ 0.3% ）	40.0 ～ 53.0	2（ 0.7% ）
38.0 ～ 54.9	1（ 0.3% ）	40.0 ～ 54.0	2（ 0.7% ）
38.0 ～ 55.0	2（ 0.7% ）	40.0 ～ 54.9	1（ 0.3% ）
38.1 ～ 54.0	1（ 0.3% ）	40.0 ～ 55.0	1（ 0.3% ）
38.1 ～ 55.0	1（ 0.3% ）	40.2 ～ 51.5	2（ 0.7% ）
38.2 ～ 49.2	1（ 0.3% ）	40.4 ～ 51.1	1（ 0.3% ）
38.5 ～ 48.9	60（ 20.2% ）	40.4 ～ 51.9	21（ 7.1% ）
38.5 ～ 51.8	2（ 0.7% ）	41.0 ～ 51.0	1（ 0.3% ）
38.5 ～ 52.8	2（ 0.7% ）	41.0 ～ 52.0	6（ 2.0% ）
38.7 ～ 49.0	1（ 0.3% ）	41.0 ～ 53.0	1（ 0.3% ）
38.9 ～ 50.2	4（ 1.3% ）	41.0 ～ 63.0	1（ 0.3% ）
39.0 ～ 50.0	1（ 0.3% ）	42.0 ～ 49.8	1（ 0.3% ）
39.0 ～ 51.0	2（ 0.7% ）	42.0 ～ 53.0	3（ 1.0% ）
39.0 ～ 52.0	20（ 6.7% ）	43.0 ～ 52.0	1（ 0.3% ）
39.0 ～ 52.5	1（ 0.3% ）	48.9 ～ 38.5	6（ 2.0% ）
39.0 ～ 53.0	1（ 0.3% ）	48.9 ～ 40.4	1（ 0.3% ）

ヘマトクリット（女性）（％）回答数297			
基準範囲	機関数	基準範囲	機関数
未記入	6（ 2.0% ）	34.0 ～ 45.0	13（ 4.4% ）
～ 32.0	1（ 0.3% ）	34.0 ～ 45.9	1（ 0.3% ）
11.0 ～ 15.2	1（ 0.3% ）	34.0 ～ 46.0	6（ 2.0% ）
12.1 ～ 14.6	1（ 0.3% ）	34.0 ～ 46.5	5（ 1.7% ）
29.5 ～ 33.1	1（ 0.3% ）	34.0 ～ 47.0	1（ 0.3% ）
30.1 ～ 48.0	1（ 0.3% ）	34.0 ～ 47.9	1（ 0.3% ）
31.0 ～ 45.0	1（ 0.3% ）	34.0 ～ 48.0	2（ 0.7% ）
32.0 ～ 50.0	2（ 0.7% ）	34.0 ～ 48.5	1（ 0.3% ）
32.1 ～ 43.6	1（ 0.3% ）	34.0 ～ 51.9	1（ 0.3% ）
32.8 ～ 45.1	1（ 0.3% ）	34.3 ～ 43.9	1（ 0.3% ）
33.0 ～ 43.0	1（ 0.3% ）	34.3 ～ 45.2	22（ 7.4% ）
33.0 ～ 44.5	1（ 0.3% ）	34.8 ～ 45.0	15（ 5.1% ）
33.0 ～ 45.0	13（ 4.4% ）	35.0 ～ 44.9	1（ 0.3% ）
33.0 ～ 46.0	3（ 1.0% ）	35.0 ～ 45.0	5（ 1.7% ）
33.0 ～ 47.9	1（ 0.3% ）	35.0 ～ 46.0	3（ 1.0% ）
33.1 ～ 50.0	1（ 0.3% ）	35.0 ～ 46.5	1（ 0.3% ）
33.2 ～ 44.4	4（ 1.3% ）	35.0 ～ 47.0	3（ 1.0% ）
33.2 ～ 46.7	1（ 0.3% ）	35.0 ～ 48.0	9（ 3.0% ）
33.4 ～ 44.9	34（ 11.4% ）	35.0 ～ 49.9	1（ 0.3% ）
33.4 ～ 46.9	1（ 0.3% ）	35.1 ～ 44.4	1（ 0.3% ）
33.4 ～ 47.0	1（ 0.3% ）	35.5 ～ 43.9	63（ 21.2% ）
33.4 ～ 47.8	1（ 0.3% ）	35.5 ～ 46.9	1（ 0.3% ）
33.4 ～ 47.9	1（ 0.3% ）	36.0 ～ 42.0	1（ 0.3% ）
33.5 ～ 43.5	1（ 0.3% ）	36.0 ～ 43.5	1（ 0.3% ）
33.5 ～ 43.9	2（ 0.7% ）	36.0 ～ 44.1	1（ 0.3% ）
33.5 ～ 44.5	1（ 0.3% ）	36.0 ～ 46.0	3（ 1.0% ）
33.5 ～ 45.0	1（ 0.3% ）	36.0 ～ 47.0	6（ 2.0% ）
33.5 ～ 46.0	1（ 0.3% ）	36.0 ～ 48.0	2（ 0.7% ）
33.6 ～ 44.6	2（ 0.7% ）	37.0 ～ 47.0	3（ 1.0% ）
33.7 ～ 46.0	4（ 1.3% ）	37.0 ～ 50.0	1（ 0.3% ）
34.0 ～ 42.0	6（ 2.0% ）	43.3 ～ 45.2	1（ 0.3% ）
34.0 ～ 43.9	24（ 8.1% ）	～	（ 0.0% ）

MCV (男性) (fL)回答数 297					
基準範囲			機関数		
未記入			33 (11.1%)		
8.3	～	99.0	1	(0.3%)	
40.4	～	51.9	2	(0.7%)	
70.1	～	107.9	1	(0.3%)	
76.0	～	101.0	6	(2.0%)	
77.0	～	100.0	1	(0.3%)	
77.0	～	104.0	1	(0.3%)	
78.0	～	101.0	2	(0.7%)	
78.0	～	101.9	1	(0.3%)	
78.0	～	102.0	3	(1.0%)	
79.0	～	101.6	1	(0.3%)	
79.0	～	102.0	1	(0.3%)	
79.0	～	105.0	1	(0.3%)	
80.0	～	94.0	2	(0.7%)	
80.0	～	96.0	2	(0.7%)	
80.0	～	99.0	4	(1.3%)	
80.0	～	99.9	1	(0.3%)	
80.0	～	100.0	14	(4.7%)	
80.0	～	101.0	1	(0.3%)	
80.0	～	102.0	1	(0.3%)	
80.0	～	103.0	5	(1.7%)	
80.0	～	105.0	1	(0.3%)	
81.0	～	98.0	3	(1.0%)	
81.0	～	99.0	2	(0.7%)	
81.0	～	100.0	1	(0.3%)	
82.0	～	92.0	1	(0.3%)	
82.0	～	98.0	2	(0.7%)	
82.0	～	99.0	1	(0.3%)	
82.0	～	100.0	1	(0.3%)	
82.0	～	101.0	2	(0.7%)	
82.0	～	102.0	3	(1.0%)	
82.6	～	103.0	1	(0.3%)	
82.7	～	101.6	35	(11.8%)	
82.9	～	101.2	1	(0.3%)	
83.0	～	93.0	2	(0.7%)	
83.0	～	93.9	1	(0.3%)	
83.0	～	96.0	1	(0.3%)	
83.0	～	97.0	2	(0.7%)	
83.0	～	98.0	1	(0.3%)	
83.0	～	99.0	6	(2.0%)	
83.0	～	100.0	3	(1.0%)	
83.0	～	101.0	42	(14.1%)	
83.0	～	101.5	2	(0.7%)	
83.0	～	101.9	2	(0.7%)	
83.0	～	102.0	23	(7.7%)	
83.0	～	103.0	1	(0.3%)	
83.5	～	100.7	1	(0.3%)	
83.6	～	98.2	1	(0.3%)	
84.0	～	98.0	1	(0.3%)	
84.0	～	99.0	1	(0.3%)	
84.0	～	100.0	3	(1.0%)	
84.0	～	101.0	3	(1.0%)	
84.0	～	104.0	1	(0.3%)	
85.0	～	90.0	1	(0.3%)	
85.0	～	99.0	7	(2.4%)	
85.0	～	100.0	4	(1.3%)	
85.0	～	100.9	2	(0.7%)	
85.0	～	102.0	19	(6.4%)	
85.0	～	102.9	1	(0.3%)	
85.0	～	103.0	2	(0.7%)	
85.0	～	104.0	1	(0.3%)	
85.0	～	105.0	2	(0.7%)	
85.0	～		1	(0.3%)	
86.0	～	100.0	1	(0.3%)	
86.0	～	101.0	1	(0.3%)	
86.0	～	101.9	1	(0.3%)	
86.0	～	102.0	1	(0.3%)	
86.0	～	104.0	1	(0.3%)	
86.3	～	101.6	1	(0.3%)	
87.0	～	97.0	1	(0.3%)	
87.0	～	100.0	2	(0.7%)	
87.0	～	101.0	1	(0.3%)	
87.0	～	102.0	3	(1.0%)	
88.0	～	99.0	1	(0.3%)	
89.0	～	95.0	1	(0.3%)	
89.0	～	99.0	6	(2.0%)	
92.9	～	95.0	1	(0.3%)	
	～			(0.0%)	

MCV（女性）（fL）回答数 297			
基準範囲		機関数	
未記入		133（44.8%）	
8.0	～ 101.0	1（0.3%）	
34.3	～ 45.2	2（0.7%）	
70.1	～ 107.9	1（0.3%）	
76.0	～ 101.0	1（0.3%）	
78.0	～ 96.0	1（0.3%）	
78.0	～ 102.0	1（0.3%）	
79.0	～ 98.0	1（0.3%）	
79.0	～ 99.0	7（2.4%）	
79.0	～ 99.2	1（0.3%）	
79.0	～ 100.0	61（20.5%）	
79.0	～ 101.0	6（2.0%）	
80.0	～ 94.0	2（0.7%）	
80.0	～ 96.0	1（0.3%）	
80.0	～ 99.0	2（0.7%）	
80.0	～ 99.9	1（0.3%）	
80.0	～ 100.0	2（0.7%）	
80.0	～ 101.0	27（9.1%）	
80.0	～ 101.9	2（0.7%）	
81.0	～ 98.0	1（0.3%）	
81.0	～ 99.0	1（0.3%）	
81.0	～ 100.0	1（0.3%）	
81.0	～ 102.0	2（0.7%）	
81.9	～ 99.1	1（0.3%）	
82.0	～ 100.0	1（0.3%）	
82.0	～ 102.1	1（0.3%）	
83.0	～ 98.0	2（0.7%）	
83.0	～ 99.0	1（0.3%）	
83.0	～ 100.0	1（0.3%）	
83.0	～ 101.0	1（0.3%）	
83.1	～ 97.7	1（0.3%）	
83.6	～ 98.2	1（0.3%）	
84.0	～ 98.0	1（0.3%）	
84.0	～ 99.0	1（0.3%）	
84.0	～ 100.0	3（1.0%）	
84.0	～ 100.9	1（0.3%）	
84.0	～ 102.0	1（0.3%）	
85.0	～ 99.0	5（1.7%）	
85.0	～ 100.0	3（1.0%）	
85.0	～ 102.0	7（2.4%）	
87.0	～ 91.0	1（0.3%）	
87.0	～ 100.0	1（0.3%）	
87.0	～ 102.0	2（0.7%）	
88.0	～ 99.0	1（0.3%）	
89.0	～ 99.0	1（0.3%）	
89.2	～ 92.0	1（0.3%）	

Ⅸ. 参考資料

1. 第24回全衛連臨床検査精度管理調査参加施設一覧
2. 第24回全衛連臨床検査精度管理調査参加外部機関一覧
3. 第24回全衛連臨床検査精度管理調査回答票
4. 第24回全衛連臨床検査精度管理調査票（控用）
5. 平成27年度臨床検査精度管理調査実施要領
6. 平成27年度 臨床検査精度管理調査 補助調査票
7. 平成27年度 臨床検査の基準範囲に関する調査票

1. 第24回 全衛連臨床検査精度管理調査参加施設一覧

都道府県名	施設名
北海道	(公財)北海道労働保健管理協会 (公財)北海道結核予防会 (公財)パブリックヘルスリサーチセンター 北海道支部札幌商工診療所 (医社)慶友会 吉田病院 (株)エスアールエル 北海道ラボラトリー 第一岸本臨床検査センター 札幌 (一社)日本健康倶楽部北海道支部 (公財)北海道労働保健管理協会 札幌総合健診センター 札幌臨床検査センター(株) (医)新産健会 スマイル健康クリニック
青森県	(一財)全日本労働福祉協会 青森県支部 (公財)八戸市総合健診センター (公財)シルバーリハビリテーション協会 八戸西健診プラザ
岩手県	(公財)岩手県予防医学協会 (社医)啓愛会 健診センター 盛岡臨床検査センター
宮城県	(一財)杜の都産業保健会 (一財)宮城県予防医学協会 (公財)宮城厚生協会 (一財)宮城県成人病予防協会 市名坂診療所 (一財)宮城県成人病予防協会 中央診療所 (医社)進興会 せんだい総合健診クリニック (一財)杜の都産業保健会 一番町健診クリニック (医)仁泉会 みやぎ健診プラザ
山形県	(一財)全日本労働福祉協会 東北支部 (一財)日本健康管理協会 山形健康管理センター
福島県	(公財)福島県労働保健センター (医)創仁会 東日本診療所 (医)郡山病院 (公財)福島県保健衛生協会
茨城県	(公財)日立メディカルセンター (一財)全日本労働福祉協会 茨城県支部 (一財)茨城県メディカルセンター (公財)茨城県総合健診協会 (株)江東微生物研究所 微研中央研究所つくば (公社)取手市医師会 取手北相馬 保健医療センター医師会病院
栃木県	(公財)栃木県保健衛生事業団 (医)北斗会 宇都宮東病院 (医社)福田会 福田記念病院 (公財)宇都宮市医療保健事業団 健診センター

都道府県名	施 設 名
栃木県	(社医)中山会 宇都宮記念病院 総合健診センター (医)宇都宮健康クリニック 宇都宮巡回診療所 さくら診療所 (株)昭和メディカルサイエンス総合研究所 (医社)亮仁会 那須中央病院 総合健診センター (医社)健暉会 清原診療所 巡回健診部 栄研化学(株)野木事業所
群馬県	(一財)日本健康管理協会 北関東支部 (一財)全日本労働福祉協会 群馬県支部 (公財)群馬慈恵会 松井田病院 (医社)三愛会 三愛クリニック (一社)伊勢崎佐波医師会病院 成人病検診センター (株)群馬臨床検査センター
埼玉県	(公財)埼玉県健康づくり事業団 (医社)愛友会 上尾中央総合病院 (医財)健隆会 戸田中央総合健康管理センター (株)ビー・エム・エル BML総合研究所 (社医)刀仁会 坂戸中央病院 (株)保健科学 東日本 総合研究所 (公社)東松山医師会病院 (株)メディアース・ビケン (医)クレモナ会 ティーエムクリニック (医社)紘智会籠原病院 (医財)新生会 大宮共立病院 (一社)日本健康倶楽部 浦和支部
千葉県	(一財)君津健康センター (公財)ちば県民保健予防財団 (医社)福生会 斎藤労災病院 (医社)誠馨会 新東京病院 (株)サンリツ (医社)廣生会 関東予防医学診療所 (一財)柏戸記念財団 (医社)青山会 (医社)圭春会 小張総合病院 健診センター (一社)日本健康倶楽部 千葉支部 (一社)千葉衛生福祉協会 千葉診療所 (社福)聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 健診センター (医社)報徳会 報徳千葉診療所
東京都	(一財)全日本労働福祉協会 (一財)健康医学協会 (公財)東京都予防医学協会

都道府県名	施 設 名
東京都	(一財)日本予防医学協会 本部・東日本事業部 (一社)労働保健協会 (一財)産業保健協会 (一財)労働衛生協会 (一財)労働医学研究会 (医社)新町クリニック健康管理センター (医社)日健会 日健クリニック (医財)福音医療会 (医社)同友会 (株)エスアールエル エスアールエル 八王子ラボラトリー (株)LSIメディエンス 中央総合ラボラトリー (公財)愛世会 愛誠病院 (医社)俊秀会 エヌ・ケイ・クリニック (医社)松英会 (医財)立川中央病院 附属健康クリニック (医社)潮友会 うしお病院 (一財)近畿健康管理センター東京事業部 (医社)七星会 カサガメディカルクリニック (公財)河野臨床医学研究所 附属北品川クリニック (一財)産業保健研究財団 (医社)朋翔会 弥生診療所 (一財)日本健康増進財団 (医社)幸楽会 幸楽メディカルクリニック (一財)近藤記念医学財団 富坂診療所 (一財)日本健康管理協会 東京支部 (医社)こころとからだの元気プラザ (公財)結核予防会 第一健康相談所 総合健診センター (医社)康生会 シーエスケー・クリニック (医財)南葛勤医協 芝健診センター (一財)東京保健会 病体生理研究所 (公財)パブリックヘルスリサーチセンター 東京本部パブリック診療所 (株)昭和メディカルサイエンス (医財)三友会 深川ギャザリアクリニック (医財)京映会 京橋健診センター エスアールエル MUQSラボラトリー (一財)日本がん知識普及協会 (医社)多摩医療会 原町田診療所 (医社)友好会 目黒メディカルクリニック (医財)東友会 (一社)衛生文化協会 城西病院 (医財)綜友会 (一財)健康医学協会 霞が関ビル診療所

都道府県名	施 設 名
東京都	(医社)明芳会 イムス板橋健診クリニック (医社)予防会 新宿クリニック (医社)あさひ会 西早稲田クリニック (株)ファルコバイオシステムズ東京研究所 (医社)成山会楠樹記念クリニック (株)エスアールエル練馬ラボラトリー (医財)綜友会 第二臨海クリニック (医社)せいおう会 鷺谷健診センター (公財)パブリックヘルスリサーチセンター東京本部 リバーサイド読売ビル診療所 (医社)生光会 新宿追分クリニック (医社)生光会 新宿追分クリニック 板橋分院 (医社)友好会秋葉原メディカルクリニック (一財)健康予防医学財団 みなと健診クリニック 東京大学医学部附属病院検査部
神奈川県	(公財)神奈川県予防医学協会 中央診療所 (一財)神奈川県労働衛生福祉協会 (一財)ヘルス・サイエンス・センター (医社)相和会 (一財)京浜保健衛生協会 (医)興生会 相模台健診クリニック (公財)神奈川県結核予防会 (株)保健科学研究所 (社医)石心会 川崎健診クリニック (医社)成澤会 清水橋クリニック (一社)日本健康倶楽部 横浜支部 (株)北里大塚バイオメディカルアッセイ 研究所 (一社)日本厚生団 長津田厚生総合病院 (医社)優和会 湘南健診クリニック 湘南健康管理センター 船員保険健康管理センター (医社)藤順会 藤沢総合健診センター (公財)神奈川県予防医学協会 集団検診センター 藤沢市保健医療センター診療所
新潟県	(一社)新潟県労働衛生医学協会 (一社)新潟県健康管理協会 (公財)新潟県保健衛生センター (一社)上越医師会 上越地域総合健康管理センター (一財)健康医学予防協会 (一財)健康医学予防協会 長岡健康管理センター (一社)新潟県労働衛生医学協会 附属アクアール長岡健康増進センター (一社)新潟県労働衛生医学協会 附属佐渡検診センター
富山県	(一財)北陸予防医学協会 (公財)友愛健康医学センター

都道府県名	施 設 名
富山県	(一社)日本健康倶楽部 北陸支部 (公財)富山県健康づくり財団 富山県健康増進センター (医社)若葉会 高重記念クリニック 予防医療センター
石川県	(一財)石川県予防医学協会 (医社)洋和会 未病医学センター
福井県	(公財)福井県予防医学協会 (公財)福井県労働衛生センター
長野県	(一社)長野県労働基準協会連合会 松本健診所 (一財)労働衛生協会 長野県支部 (一財)全日本労働福祉協会 長野県支部 (公財)長野県健康づくり事業団 (一財)中部公衆医学研究所 (株)メディック 長野ラボ
岐阜県	(一財)岐阜県産業保健センター (一社)ぎふ総合健診センター (一財)岐阜健康管理センター (株)メディック 岐阜ラボ (一財)総合保健センター
静岡県	(一財)東海検診センター (社福)聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター (公財)静岡県予防医学協会 (公財)静岡県産業労働福祉協会 (一財)芙蓉協会聖隷沼津第一クリニック 聖隷沼津健康診断センター (一社)静岡市静岡医師会健診センター (医社)清風会 芹沢病院 (社福)聖隷福祉事業団 聖隷予防検診センター (株)メディック 静岡ラボ (医社)駿栄会 御殿場石川病院 (社福)聖隷福祉事業団 聖隷健康 サポートセンター-Shizuoka (医)弘遠会 すずかけセントラル病院 (医)豊岡会 浜松とよおか病院
愛知県	(一社)瀬戸健康管理センター (一財)公衆保健協会 (一財)愛知健康増進財団 (一財)全日本労働福祉協会 東海支部 (医)豊昌会 豊田健康管理クリニック (一財)名古屋公衆医学研究所 (一社)オリエンタル労働衛生協会 (医社)卓和会 しらゆりクリニック (社医)宏潤会 だいどうクリニック 健診センター (医)東海予防医学クリニック (医)光生会 光生会病院

都道府県名	施 設 名
愛知県	(一社)半田市医師会 健康管理センター (一社)碧南市医師会 臨床検査センター (医)愛知集団検診協会 (公財)豊田地域医療センター (一社)岡崎市医師会 公衆衛生センター (医)豊岡会 豊橋元町病院 健康管理センター (株)エスアールエル エスアールエル 愛知ラボラトリー (医)名翔会 名古屋セントラルクリニック (公財)愛知県健康づくり振興事業団 (医)松柏会 国際セントラルクリニック (医)九愛会 中京サテライトクリニック (医)名翔会 和合セントラルクリニック 三河安城クリニック (一財)近畿健康管理センター 名古屋事業部 (一財)全日本労働福祉協会 東海診療所 (一財)日本予防医学協会 東海事業部 ロイヤルベルクリニック
三重県	(一財)三重県産業衛生協会 (一財)近畿健康管理センター三重事業部 (医)尚豊会 四日市健診クリニック
滋賀県	(一財)近畿健康管理センター 滋賀事業部 (一財)滋賀保健研究センター (株)メディック(滋賀)
京都府	(一財)京都工場保健会 (公財)京都健康管理研究会 中央診療所 (一財)京都労災援護財団 京都市城南診療所 (一財)京都予防医学センター ファルコバイオシステムズ総合研究所 (医社)洛和会 洛和会音羽病院 健診センター (一財)京都工場保健会 診療所 宇治支所
大阪府	(公社)関西労働衛生技術センター (医)崇孝会 北摂クリニック (一財)日本予防医学協会 西日本事業部 (一財)関西労働保健協会 (一財)近畿健康管理センター大阪事業部 パナソニック健康保険組合 産業衛生科学センター 大阪健康倶楽部 関山診療所 (社医)寿楽会 m.o クリニック (医)いなぎレディースクリニック 集検部 (株)エスアールエル エスアールエル関西ラボラトリー (株)大阪血清微生物研究所 (医)緑地会 赤尾クリニック

都道府県名	施 設 名
大阪府	(株)メディック メディック堺 (医)恵生会 多根総合病院健診部診療所 (医)あけぼの会 (公財)パブリックヘルス リサーチセンター 関西支部 (医)健人会 那須クリニック (医)厚生会 厚生会クリニック (医)樫本会 樫本病院 (特医)渡辺医学会 桜橋渡辺病院 附属駅前第三ビル診療所 (社医)愛仁会 愛仁会総合健康センター (医)一翠会 一翠会千里中央健診センター (一財)関西労働保健協会 附属千里LC健診センター (一社)オリエンタル労働衛生協会 大阪支部 メディカルクリニック (医)愛悠会 ますむらクリニック
兵庫県	(一財)順天厚生事業団 (公財)兵庫県予防医学協会 (一社)姫路市医師会 (医社)泰志会 島田クリニック (医社)坂上田病院 (一社)西宮市医師会 (医社)尚仁会 平島病院 (社医)神鋼記念会 神鋼記念病院 健診センター (公財)兵庫県健康財団 (公財)加古川総合保健センター (一社)日本健康倶楽部 兵庫支部診療所 (医社)河合医院 (一社)神戸市医師会 医療センター診療所 (一社)日本健康倶楽部 和田山診療所 (一財)京都工場保健会 神戸健診クリニック (社医)明石医療センター カーム尼崎健診プラザ (株)LSIメディエンス 関西ラボラトリー (株)LSIメディエンス 神戸市医師会ラボラトリー
和歌山県	(社医)黎明会 健診センター・キタデ (一財)NSメディカル・ヘルスケアサービス (医)南労会 紀和病院
鳥取県	(公財)中国労働衛生協会 鳥取検診所 (公財)中国労働衛生協会 米子検診所 (公財)鳥取県保健事業団
島根県	(公財)島根県環境保健公社 (医社)創健会 松江記念病院 (医社)日立記念病院
岡山県	(一財)淳風会 健康管理センター

都道府県名	施 設 名
岡山県	(一社)岡山県労働基準協会 労働衛生センター (公財)中国労働衛生協会 津山検診所 (一財)倉敷成人病センター 倉敷成人病健診センター (公財)岡山県健康づくり財団 大ケ池診療所 (医)養寿会 ウェル・ビーイング・メディカ保健クリニック
広島県	(一財)広島県集団検診協会 (公財)中国労働衛生協会 (公財)中国労働衛生協会 尾道検診所 (一財)広島県環境保健協会 (公財)広島県地域保健医療推進機構 (社医)里仁会 興生総合病院 (医)健康倶楽部 健康倶楽部健診クリニック (医)広島健康会 アルパーク 検診クリニック (医)あかね会 中島土谷クリニック 健診センター (医社)仁恵会 福山検診所 (株)福山臨床検査センター
山口県	(公財)山口県予防保健協会 (一社)日本健康倶楽部 山口支部
徳島県	(一社)徳島県労働基準協会連合会 健診部
香川県	(一社)香川労働基準協会 (一社)瀬戸健康管理研究所 (医社)重仁 麻田総合病院 (公財)香川成人医学研究所 (医社)青冥会 ミタニ藤田病院
愛媛県	(社)今治市医師会診療所 (医)菅井内科 (医)順風会 健診センター (一社)日本健康倶楽部エヒメ支部
高知県	(公財)高知県総合保健協会 (医)健会 高知検診クリニック 高知西病院 高知県厚生農業協同組合連合会 JA高知病院 JA高知健診センター
福岡県	(一財)西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所 (一財)西日本産業衛生会 北九州健診診療所 (公財)福岡県すこやか健康事業団 福岡国際総合健診センター (公財)福岡労働衛生研究所 (一財)日本予防医学協会 九州事業部 (一社)北九州市小倉医師会 小倉医師会健診センター (一財)九州健康総合センター (社医)雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター (医)心愛 小倉中央放射線科

都道府県名	施 設 名
福岡県	(一財)医療情報健康財団 (医)原三信病院 健康管理センター (医社)高邦会 高木病院 (一社)日本健康倶楽部 福岡支部 (公財)パブリックヘルスリサーチセンター 西日本支部 (株)シー・アール・シー総合研究所 (一社)日本健康倶楽部 北九州支部診療所 (医社)生光会 ヘルスポートクリニック (公財)福岡県結核予防会 福岡結核予防センター (公社)北九州市門司区医師会 門司区医師会診療所 (一財)西日本産業衛生会 福岡健診診療所 (公財)福岡県すこやか健康事業団 総合健診センター診療所
佐賀県	(一財)佐賀県産業医学協会 (医社)如水会 今村病院
長崎県	(公財)長崎県健康事業団 (医)西九州健康診断本部診療所
熊本県	(公財)熊本県総合保健センター 日本赤十字社 熊本健康管理センター (医)室原会 菊南病院 熊本県厚生農業協同組合連合会
大分県	(一財)大分健康管理協会 大分総合健診センター (一財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター
宮崎県	(公財)宮崎県健康づくり協会
鹿児島県	(公社)鹿児島県労働基準協会 (公財)鹿児島県民総合保健センター
沖縄県	(一財)沖縄県健康づくり財団 (一社)日本健康倶楽部 沖縄支部 (一社)中部地区医師会 検診センター (一財)琉球生命済生会琉生病院 (一社)那覇市医師会 生活習慣病検診センター

2. 第24回精度管理外部機関一覧

外部機関コード	外部機関名
002	(株)LSIメディエンス
006	(株)保健科学研究所
008	(株)ビー・エム・エル BML総研
009	(株)エスアールエル関西ラボラトリー
012	(一財)東京保健会 病体生理研究所
024	(一社)京都微生物研究所
029	(株)大阪血清微生物研究所
041	(株)エスアールエルMUQSラボラトリー
050	(株)エスアールエル練馬ラボラトリー
052	(株)第一岸本臨床検査センター
054	(株)愛媛臨検
057	(株)エスアールエル愛知ラボラトリー
058	(株)四国中検
060	(株)中央微生物検査所
062	(株)昭和メディカルサイエンス 総合研究所
065	(株)岡山医学検査センター
068	(株)いかがく
069	(株)協同医学研究所
073	(有)久留米臨床検査センター
075	(株)サンリツ
081	(株)北信臨床
083	(株)ナゴヤ医学学術センター
087	(株)ファルコバイオシステムズ東京
088	(一社)半田市医師会 健康管理センター
089	(株)ビー・エム・エル BML北陸
090	(株)ファルコバイオシステムズ総合研究所
094	(株)メディック堺
095	(株)CIS熊本研究所
100	(株)保健科学 東日本
102	日本医学(株)
109	(株)シー・アール・シー
110	八戸市医師会臨床検査センター
111	(株)江東微生物研究所 微研中央研究所つくば
112	(株)福山臨床検査センター
122	(株)近畿予防医学研究所
126	(株)メディック滋賀ラボ
128	(株)メディック長野ラボ
130	(株)エスアールエル北海道ラボラトリー
136	(株)ビー・エム・エル BML山形
137	(株)京浜予防医学研究所

144	(株)エスアールエル静岡ラボラトリー
146	熊本市医師会検査センター
151	(社)北九州小倉医師会北九州中央臨床検査センター
154	板橋中央臨床研究所
160	上尾中央臨床検査研究所
161	(株)ファルコバイオシステムズ岡山研究所
165	(株)エスアールエル福岡ラボラトリー
168	(株)エスアールエル宇都宮ラボラトリー
169	(株)ファルコバイオシステムズ東海中央研究所
171	(株)日研医学
172	(株)メディック愛知ラボ
173	株式会社メディック奈良ラボ
174	(株)江東微生物研究所 微研東北中央研究所
175	(株)戸田中央臨床検査研究所
176	(株)武蔵臨床検査所
185	(社)宮城県医師会健康センター
190	(株)アルプ
193	QOLセントラルラボラトリーズ
197	(株)LSIメディエンス関西
198	(株)LSIメディエンス神戸

第24回全衛連臨床検査精度管理調査回答票(平成28年2月)

I 施設(機関)の名称、所在地等

名 称		所在地	TEL:	—	—	施 設 コ ー ド					
			作成責任者氏 名								

II 測定装置コード等記入表(注参照)

項目番号	調 査 項 目	測定装置コード					その他の場合のみ記入		試薬キットの正式名称	検量用試料(キャリブレータ)の種類	トレーサビリティの確認メーカーコード
							使用装置名	メーカー名			
1	総コレステロール										
2	中性脂肪										
3	尿 酸										
4	クレアチニン										
5	AST										
6	ALT										
7	γ-GT										
8	血 糖										
9	HDLコレステロール										
10	LDLコレステロール										
11	HbA1c										

項目番号	調 査 項 目	測定装置コード					その他の場合のみ記入	
							使用装置名	メーカー名
12	尿糖半定量 *							
13	尿蛋白半定量 *							
14	尿潜血半定量 *							

* 12～14について用手法の場合はAAZ901と記載してください。

項目番号	調 査 項 目	測定装置コード					その他の場合のみ記入	
							使用装置名	メーカー名
15	ヘモグロビン							
16	赤血球数							
17	白血球数							
18	ヘマトクリット							
19	血小板数							

注1:測定装置コードの記入について

- ①調査項目のすべてについて添付の測定装置コード表から該当するコードを記入してください。
その他(999)の場合には使用装置名とメーカー名を記入してください。
②調査項目1～11は試薬キットの正式名称を記入してください。

注2:「検量用試料の種類・トレーサビリティの確認」欄の記入について

- ①調査項目1～4および8、9は「検量用試料(キャリブレータ)の種類」及び「トレーサビリティの確認」をコード番号で記入してください。
②調査項目5～7はトレーサビリティの確認をコード番号で記入してください(「検量用試料の種類」は表Ⅲの「検量法」に記入してください。)
③調査項目10は「検量用試料(キャリブレータ)の種類」をコード番号で記入してください。
④調査項目11は「標準液(キャリブレータ)および検量方法の種類」を番号で記入してください。

III 測定結果等記入表(注参照)

委託先が同じの場合も、全ての欄に記載して下さい。

調 査 項 目	測定法・単位・測定温度等						測 定 値					測定	外部機関コード	委託外部機関名	
1. 総コレステロール	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
2. 中性脂肪	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
3. 尿 酸	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
4. クレアチニン	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
5. AST	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
6. ALT	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
7. γ-GT	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
8. 血 糖	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	単位	自・外	委託先	— —
9. HDLコレステロール	測定法	試薬キットの製造元	単位	測定温度	検量法	その他の製造販売元・検量法	試料6	試料7	試料8			単位	自・外	委託先	— —

注3:測定法、試薬キットに係る記入について

- ①調査項目1～15は測定法の番号(10は試薬キット名)を記入してください。調査項目5～7は国際単位、測定温度、検量法を番号で記入してください。
②調査項目1～8は試薬キットの製造元の番号を記入してください。その他(99)の場合は製造販売元を記入してください。
③調査項目11はHPLC法分析装置の製造売元、標準品による校正に関する調査を番号で記入してください。また、試料18、19の残余試料でHbA1cを測定し、その測定値も記入してください。また、測定できなかった場合には、その理由も番号で記入してください。
④調査項目12～14は試験紙の製造元を番号で記入してください。その他(99)の場合は製造販売元を記入してください。

										施設コード					
調査項目	測定法・単位・測定温度等				測定値					測定	外部機関コード	委託外部機関名			
10. LDLコレステロール	試薬キット名 (その他)				試料6 試料7 試料8 単位 mg/dL					自・外		委託先Tel. — —			
11. HbA1c	測定法・試薬キット名 試料18・19が測定できなかった理由 (その他)				NGSP値 試料9 試料10 試料18 試料19 単位 %					自・外		委託先Tel. — —			
12. 尿糖半定量	測定法 試験紙の製造元 (その他)				試料11 試料12 試料13 試料14 試料15 					自・外		委託先Tel. — —			
13. 尿蛋白半定量	測定法 試験紙の製造元 (その他)				試料11 試料12 試料13 試料14 試料15 					自・外		委託先Tel. — —			
14. 尿潜血半定量	測定法 試験紙の製造元 (その他)				試料11 試料12 試料13 試料14 試料15 					自・外		委託先Tel. — —			
血球検査の測定委託先が同じ場合は最初のみ記入で結構です。															
15. ヘモグロビン(Hb)	測定法 (その他)				試料16 試料17 試料18 試料19 単位 g/dL					自・外		委託先Tel. — —			
16. 赤血球数(RBC)					試料16 試料17 試料18 試料19 単位 ×10 ⁴ /μL					自・外		委託先Tel. — —			
17. 白血球数(WBC)	試料8および試料16～19についての測定上の注意 (測定日時の指定)にご注意ください。				試料16 試料17 試料18 試料19 単位 ×10 ² /μL					自・外		委託先Tel. — —			
18. ヘマトクリット(Hct)					試料16 試料17 試料18 試料19 単位 %					自・外		委託先Tel. — —			
19. 血小板(PLT)					試料16 試料17 試料18 試料19 単位 ×10 ⁴ /μL					自・外		委託先Tel. — —			
20. 平均赤血球容積(MCV)					試料16 試料17 試料18 試料19 単位 fL					自・外		委託先Tel. — —			
右欄に注意書①～③をよく読んで 試料8および試料18、19の 受領日・測定日を記入してください。	試料8は、測定施設に到着後、なるべく早く測定してください。② 通常検体と同様のモードで測定してください(精度管理(QC)モードは使用しないでください)。 試料16、17(加工血)、18、19(生血)については以下の点に注意してください。③ 溶血の有無について、静置時の血球および血漿の分離状態、測定時の粒度分布図の状態などを参考にして ① 測定までは試料を冷蔵庫(2～8℃)で保存し、測定時は室温に約15分間放置して(室温にもどして)から測定してく ださい。試料16、17は、到着当日か翌日には測定してください。確認し、下記の選択肢から回答してください。試料に中等度または強度の溶血が認められた場合は事務局に 試料18、19の測定は、できるだけ平成28年2月4日午前11時から12時の間に測定してください。試料到着が遅れた 場合には、午後3時から4時の間に測定してください。下欄に測定時間をご記入下さい。ご連絡ください。その他気のついた点はコメント欄にご記入ください。 測定を外部に委託している場合も可能な限り同日時に測定できるよう依頼して下さい。 同日時に測定できない場合は、下欄に測定日、測定時間をご記入下さい。 試料16 試料17 試料18 試料19 溶血認められず・・・1 軽度の溶血あり・・・2 中等度の溶血あり・・・3 強度の溶血あり・・・4														
試料8の受領日・測定日	受領日:平成28年2月 日 測定日:平成28年2月 日														
試料18・19を2月4日に測定した。 午前、午後に○をして下さい。	測定日:平成28年2月4日 午前 11 ～ 12 時に測定 ■ 午後 3 ～ 4 時に測定														
試料18・19を2月4日に測定せず。 午前、午後に○をして下さい。	受領日:平成28年2月 日 測定日:平成28年2月 日 午前 ■ 午後 時														

注4:調査票全体の記入についてのお願い

①調査票記入に際しては、調査票(控)の「記入上の注意事項」を必ず読んだ後、調査票(控用)に記入したデータから間違いのないよう記入してください。

②「測定」欄は、自機関で測定した場合は「自」に、外部機関に委託した場合は「外」に○印をつけてください。外部機関に委託した場合は、添付の「平成27年度 臨床検査精度管理調査外部機関一覧」から実際に測定を実施した外部機関コードを「外部機関コード」の欄に記入し、委託外部機関名および電話番号を「委託外部機関名」の欄に記入してください。

③調査用試料8(生血清)、試料18、19(生血液)は、今回も参考試料として配付します。

施設コード

控 用

平成27年度第24回全衛連臨床検査精度管理調査票

平成28年2月

1. この「調査票」は貴機関の控用です。別添の「回答票」を返送してください。

2. 回答票の返送期限は厳守してください。

返送期限 平成28年2月12日(金) 午後5時必着

3. 調査の対象項目

総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、 γ -GT、血糖、HDLコレステロール、LDLコレステロール、HbA1c、尿糖(半定量)、尿蛋白(半定量)、尿潜血(半定量)、ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積
以上20項目です。

4. 送付する試料 (試料8および試料18、19は参考調査試料です。)

① 総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、 γ -GT、血糖測定用	(試料1~5)	1.5mLサンプル	凍結品
② HDLコレステロール、LDLコレステロール測定用	(試料6、7)	1.0mLサンプル	凍結乾燥品
	(試料8)	0.5mLサンプル	冷蔵品 (生血清)
③ HbA1c測定用	(試料9、10)	0.2mLサンプル	凍結乾燥品
④ 尿糖、尿蛋白、尿潜血 半定量用	(試料11~15)	5 mLサンプル	凍結乾燥品
⑤ ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積測定用	(試料16、17)	1.5mLサンプル	冷蔵品
	(試料18、19)	1.0mLサンプル	冷蔵品 (生血液)

注) ⑤の試料18、19においてヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積を測定した後、残余の血液により、HbA1cの測定をお願いします。

5. 測定

測定は、次ページの「Ⅱ 試料取扱い上の注意」を順守して行ってください。特に試料18、19の測定は指定する測定日時(次頁Ⅱ-5に記載)に行ってください。

測定結果は日常検体と同じ扱い(1回測定)で得られた結果を回答してください。

測定結果については実測値での回答をお願いします。

外部機関に測定を委託している場合は、送付された試料を通常の方法で確認し、通常委託している検査機関に測定させ、当該検査機関からの報告を確認後、所定の様式に記入のうえ報告してください。

なお、尿検査は外注することなく、自施設で測定してください。

6. 調査票

本調査票は、日本医師会の許可を得て測定法分類、試薬キット(試験紙)の製造元、単位、温度測定などのコードを日本医師会と同一としました。

施設名			
調査票記入者名		役職名	

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

I 回答期限、回答送付先、結果の発表

平成 28 年 2 月 12 日（金）午後 5 時必着で下記に返送してください（必ず原本を郵送して下さい）。

（公社）全国労働衛生団体連合会 注 27 年 5 月に住所が変わりました。

〒108-0014 東京都港区芝 4 丁目 11 番 5 号 田町ハラビル 5 階

電話 03-5442-5934 FAX 03-5442-5937

評価結果通知書は平成 28 年 3 月下旬頃に各参加施設宛に送付を予定しております。

II 試料取扱い上の注意

1 試料 1～5（ヒト凍結血清）について

- ① 試料は到着後、直ちに凍結保管（-40℃以下）して下さい。-40℃の冷凍庫がない場合は、-20℃を担保できる冷凍庫に保管して下さい。保管期間は到着日から 7 日間です。
- ② 試料は流水中で融解して下さい。試料が完全に融解するまでに 5～10 分程度かかります。融解の際、ラベルが剥がれる場合がありますので注意して下さい。
- ③ 測定する際は、試料融解後、静かに転倒混和（20 回程度）し、1 時間以内に測定して下さい。
- ④ 試料はヒト血清を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱いして下さい。
- ⑤ 試料の測定を外部機関に委託する場合は、凍結状態のまま委託して下さい。
委託先では、-40℃の冷凍庫に保管して下さい。（-40℃の冷凍庫がない場合は、-20℃を担保できる冷凍庫に保管し、なるべく早めに測定して下さい。）

2 試料 6、7（ヒト凍結乾燥血清）および試料 8（ヒト生血清）について

- ① 試料 6、7 は到着後、冷蔵保管（2～8℃）して下さい。
- ② 試料 6、7 を溶解する際は、バイアルを回転しながら軽く叩き、蓋や内壁面に付着した粉末を落としてから開栓し、精製水（室温）をホールピペットで 1.0mL 添加して下さい。
- ③ 試料 6、7 は、溶解を確認後、静かに転倒混和（20 回程度）し、室温で 1 時間程度静置して下さい。
- ④ 試料 6、7 を測定する際は、再度、静かに転倒混和（数回）して下さい（**試料 6、7 の調製後の安定性は冷蔵保存（2～8℃）で 1 週間です。**保管する場合は冷蔵してください。）。
- ⑤ 試料 8 は凍結厳禁です。可能な限り到着当日中に速やかに測定して下さい。
- ⑥ 試料 8 を測定する際は、室温に 10 分放置後、静かに転倒混和（20 回程度）して下さい。
- ⑦ 試料 6～8 はヒト血清を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱いして下さい。
- ⑧ 試料の測定を外部機関に委託する場合、試料 6～7 は溶解後冷蔵（2～8℃）して、試料 8 は冷蔵状態（2～8℃）のまま委託して下さい。

3 試料 9、10（ヒトヘモグロビン凍結乾燥品）について

- ① 試料は到着後、冷蔵保管（2～8℃）して下さい。
- ② 試料はバイアルを回転しながら軽く叩いてバイアルの蓋及び内壁面に付着した粉末を落としてから開栓して下さい。
- ③ 試料開栓後、室温の精製水またはメーカー指定の溶解液 0.2mL を静かに添加し、栓をして 10 分程度室温で静置して下さい。
- ④ 試料は、静置後、バイアルを静かに転倒混和し、約 10 分間ローテーターにかける手でゆっくり 20～30 回静かに転倒混和を繰り返すなどして、内容物を完全に溶解して下さい（注意：決して振とうしないで下さい。）。
- ⑤ 試料の測定は、溶解後、冷蔵庫に 45 分以上静置してから行って下さい。
- ⑥ 試料の測定は、それぞれの機関で使用されている試薬(または装置)の取扱説明書に従って適切な希釈を行い、希釈後直ちに測定を行ってください。
なお、溶解後の総ヘモグロビン量は約 10g/dL です。
- ⑦ 試料はヒト血液を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱って下さい。
- ⑧ 試料の測定を外部機関に委託する場合は、溶解後冷蔵状態（2～8℃）で委託して下さい。

4 試料 11～15（ヒト凍結乾燥尿）について

- ① 試料は到着後、冷蔵保管（2～8℃）して下さい。
- ② 試料は、バイアルを回転しながら軽く叩いてバイアルの蓋及び内壁面に付着した粉末を落としてから開栓して下さい。
- ③ 試料開栓後、室温の精製水 5.0mL を静かに添加し、栓をして約 5 分室温で静置して下さい。
- ④ 試料は、静置後、バイアルを静かに転倒混和し、5 分間ローテーターにかけるか、手でゆっくり、10～15 回静かに転倒混和を繰り返すなどして、内容物を完全に溶解して下さい（注意：決して振とうしないで下さい。）。
- ⑤ 試料は、溶解後、室温に放置して、3 時間以内に測定して下さい。測定前には必ず試料を静かに転倒混和して下さい。
- ⑥ 試料はヒト尿を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱って下さい。
- ⑦ 試料の測定は必ず自施設で行って下さい。

5 試料 16、17（ヒト加工血液）、試料 18、19（新鮮ヒト血液）について

- ① 試料 16、17 は、到着後、冷蔵保管（2～8℃）し、到着当日か翌日には測定して下さい。
- ② 試料 18、19 は、測定日時を統一するため、平成 28 年 2 月 4 日 午前 11 時から 12 時の間に測定して下さい。

試料到着が遅れた場合には、平成 28 年 2 月 4 日 午後 3 時から 4 時の間に測定して下さい。

測定を外部機関に委託している場合は、試料が施設に到着後速やかに測定を依頼し、可能な限り 2 月 4 日午前 11 時から 12 時の間、または 2 月 4 日午後 3 時から 4 時の間に測定してください。

もしも 2 月 4 日午後 3 時から 4 時の間に測定できなかった場合は、受領日・測定日のほかに測定時間も必ずお書きください。

- ③ 試料 16～19 は、冷蔵庫から取り出した後室温で約 15 分放置し、両手で挟み、擦り合わせるようにして 10 回程度攪拌し、容器の天地を逆にして同様に 10 回程度攪拌してください。
- ④ 試料 16、17（加工血）については、容器の底に塊がないことを確認してから測定して下さい。容器の底に塊がある場合は上記③の要領で再度攪拌して下さい。
- ⑤ 試料は、劣化を防ぐため、室温に戻してから測定までの室温放置時間をできる限り短くして下さい。
- ⑥ 試料はヒト血液ですので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱いして下さい。

Ⅲ 回答票の記入についての注意

- ① 調査票（控用）各頁の左側記入上の注意事項を必ず読んだ後、右側の記入欄に記入し、そのデータを回答票に間違いなく記入して下さい。
- ② 外部機関に委託している場合は、送付された試料のうち、尿試料等の自施設で測定すべき試料を分別した後、外注する試料を通常の方法で確認し、通常測定委託している検査機関に測定させ、当該検査機関からの報告を確認後、この調査票及び回答票に記入して下さい。
- ③ 測定法や試薬（キット名）は評価に影響しますので、測定装置、測定法、単位、温度等間違いなく、空欄のないように記入して下さい。また、小数点の位置についても十分注意して下さい。
- ④ 訂正する場合は、赤線で消去した後、該当欄のすぐ上か、または同じ位置に、訂正した測定値またはコード等を記入して下さい。
- ⑤ 記入の際は、黒のボールペンを使用して下さい。

《配布試料一覧》

試料番号	1～5	6・7	8	9・10	11～15	16・17	18・19
試料形状	凍結品	凍結 乾燥品	冷蔵品 (生血清)	凍結 乾燥品	凍結 乾燥品	冷蔵品	冷蔵品 (生血液)
試料数量	1.5mL 5本	1.0mL 2本	0.5mL 1本	0.2mL 2本	5.0mL 5本	1.5mL 2本	1.0mL 2本
保存条件	凍結 (-40℃以下)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)
調査項目							
コレステロール	○						
中性脂肪	○						
尿酸	○						
クレアチニン	○						
AST	○						
ALT	○						
γ-GT	○						
血糖	○						
HDLコレステロール		○	△注 2)				
LDLコレステロール		○	△注 2)				
HbA1c				○			△注 4)
尿糖(半定量)					○		
尿蛋白(半定量)					○		
尿潜血(半定量)					○		
ヘモグロビン						○	△注 3)
赤血球数						○	△注 3)
白血球数						○	△注 3)
ヘマトクリット						○	△注 3)
血小板数						○	△注 3)
平均赤血球容積						△注 1)	△注 3)

注 1) 平均赤血球容積は参考調査です（評価の対象とはなりません。）。

注 2) 試料 8（生血清）による HDL コレステロールおよび LDL コレステロールの調査は参考調査です（評価の対象とはなりません。）。

注 3) 試料 18、19（生血液）によるヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数および平均赤血球容積までの調査は参考調査です（評価の対象とはなりません。）。

注 4) 試料 18、19（生血液）により **HbA1c** の測定をお願いします。

この場合、ヘモグロビン～平均赤血球容積を測定した後の残余の血液により、**HbA1c** の測定をお願いします。この調査も参考調査となります（評価の対象とはなりません。）。

平成27年度精度管理調査外部機関一覧

《本表の掲載機関は、全衛連が平成26年度に実施した精度管理調査において受託機関となった検査施設及び新規登録機関です。》

外部機関 コード	機 関 名	外部機関 コード	機 関 名
001	中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター	100	(株)保健科学 東日本
002	(株)LSIメディエンス	102	日本医学(株)
006	(株)保健科学研究所	105	(一財)労働衛生協会
008	(株)ビー・エム・エル BML総研	106	(一財)労働衛生協会 長野県支部
009	(株)エスアールエル 関西ラボラトリーズ	109	(株)シー・アール・シー
010	(公社)関西労働衛生技術センター	110	八戸市医師会臨床検査センター
012	(一財)東京保健会 病体生理研究所	111	(株)江東微生物研究所 微研中央研究所つくば
013	岐阜労働基準協会連合会	112	(株)福山臨床検査センター
015	東京労災病院 健康診断センター	113	パナソニック産業衛生科学センター
017	(公財)岩手県予防医学協会	114	(株)第一臨床検査センター
024	(一社)京都微生物研究所	120	(株)和歌山医化学研究所
028	(公財)東京都予防医学協会	122	(株)近畿予防医学研究所
029	(株)大阪血清微生物研究所	126	(株)メディック滋賀ラボ
030	中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター	127	(株)メディック岐阜ラボ
033	(公財)福岡県すこやか健康事業団	128	(株)メディック長野ラボ
035	(一財)京都工場保健会	129	(株)メディック静岡ラボ
036	(公財)神奈川県予防医学協会	130	(株)エスアールエル 北海道ラボラトリー
037	(一社)瀬戸健康管理センター	133	(一財)全日本労働福祉協会
040	(医)豊田健康管理クリニック	134	(社福)聖隷健康診断センター
041	(株)エスアールエルMUQSラボラトリー	136	(株)ビー・エム・エル BML 山形
042	(一財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター	137	(株)京浜予防医学研究所
046	(一財)東海検診センター	138	(株)サカイ生化学研究所
048	(株)フジモトバイオメディカルラボラトリーズ	140	(株)エスアールエル 八王子ラボラトリー
049	(公財)兵庫県予防医学協会	141	(株)昭和メディカルサイエンス総合研究所
052	(株)第一岸本臨床検査センター	142	(株)メディック横浜ラボ
054	(株)愛媛臨検	143	(株)メディック富士ラボ
057	(株)エスアールエル 愛知ラボラトリー	144	(株)エスアールエル静岡ラボラトリー
058	(株)四国中検	146	熊本市医師会検査センター
059	(株)新日化環境エンジニアリング	151	(社)北九州小倉医師会北九州中央臨床検査センター
060	(株)中央微生物検査所	152	(財)東京顕微鏡院
062	(株)昭和メディカルサイエンス 総合研究所	154	板橋中央臨床研究所
065	(株)岡山医学検査センター	160	上尾中央臨床検査研究所
068	(株)いかがく	162	(株)近畿エコサイエンス
069	(株)協同医学研究所	164	(株)兵庫県登録衛生検査センター和田山
073	(有)久留米臨床検査センター	165	(株)エスアールエル福岡ラボラトリー
075	(株)サンリツ	167	
079	中国労災病院 健康診断部(健康診断センター)	168	(株)エスアールエル 宇都宮ラボラトリー
080	(公財)中国労働衛生協会 福山本部	169	(株)ファルコバイオシステムズ東海中央研究所
081	(株)北信臨床	171	(株)日研医学
083	(株)ナゴヤ医学学術センター	172	(株)メディック愛知ラボ
085	(株)日本医学臨床検査研究所	197	(株)LSIメディエンス関西
087	(株)ファルコバイオシステムズ東京	198	(株)LSIメディエンス神戸
088	(一社)半田市医師会 健康管理センター	199	(株)LSIメディエンス宮城
090	(株)ファルコバイオシステムズ総合研究所		
094	(株)メディック堺	999	コード表に無い受託施設または追加および不明の場合は、
097	(一財)近畿健康管理センター		コード番号999を調査票にご記入ください。
098	(一財)西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所		

◎測定装置コード記入について

測定装置コードは評価上大変重要です。

項目によっては評価できなくなりますので、必ず間違いのないように記入してください。

記入に際しては測定装置コード表をよく確認し、安易に「その他」としないでください。

〔記入方法〕

- ▶ 用手法の場合には、検査の分野に関係なく「AAZ901」と測定装置コード記入表に記入してください。
- ▶ 測定装置コード表から、使用した測定装置名に該当するコードを測定装置コード記入表に記入してください。
- ▶ もし、調査項目に関連した分類の中に該当する装置が見つからない場合には、装置コード表に示してある関連分野の中から測定装置コードを選んでください。
- ▶ その他の場合には、使用装置名ならびに装置メーカー名を必ず記入してください。
- ▶ 自己血糖測定装置(SMBG)につきましては評価対象外です。該当する機器は、測定装置コード表に「S」と示しております。
- ▶ POCT機器につきましては評価対象外です。該当する機器は、測定装置コード表に「P」と示しております。

測定装置コード記入表

調 査 項 目		測定装置コード	その他の場合のみ記入	
			使用装置名	メーカー名
1	総コレステロール			
2	中性脂肪			
3	尿酸			
4	クレアチニン			
5	AST			
6	ALT			
7	γ -GT (γ -GTP)			
8	血糖			
9	HDLコレステロール			
10	LDLコレステロール			
11	HbA1c			
12	尿糖(半定量)			
13	尿蛋白(半定量)			
14	尿潜血(半定量)			
15	ヘモグロビン			
16	赤血球数			
17	白血球数			
18	ヘマトクリット			
19	血小板数			
20	MCV			

◎ 測定装置コード表

簡易	コード	企業名	測定装置名
A. 用手法			
A) (なし)			
	AAZ901		用手法
B. 臨床化学自動分析装置			
A) フロー方式			
	BAZ999		その他のフロー方式臨床化学自動分析装置
B) ディスクリット方式			
	BBA301	エイアンドティ	502X
	BBA302	エイアンドティ	504X
	BBA501	大塚電子, アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-Plus C, C15, C30
	BBA502	大塚電子, アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-Prime
	BBA604	ベックマン・コールター	AU510, 560
	BBA605	ベックマン・コールター	AU400, 480, 600, 640, 680
	BBA610	ベックマン・コールター	AU2700, 5400, 5800
	BBA611	ベックマン・コールター	測定項目 Na, K, Cl のみを対象として AU400, 480, 600, 640, 680 : ベックマン・コールター電極
	BBA612	ベックマン・コールター	測定項目 Na, K, Cl のみを対象として AU2700, 5400, 5800 : ベックマン・コールター電極
	BBB005	島津製作所	CL-8000
	BBB806	東芝	TBA-20R, 20FR, 30R, 30FR
	BBB808	東芝	TBA-80FR, 80FR NEO, 80FR NEO2
	BBB809	東芝	TBA-200FR, 200FR NEO, TBA-2000FR
	BBB810	東芝	TBA-120FR, 40FR Accute, 25FR
	BBB812	東芝	TBA-c16000, c8000, c4000, Architect c8000
	BBB813	東芝	TBA-FX8
	BBC105	日本電子	JCA-HR シリーズ (2100, 2200, 2300, 2400)
	BBC106	日本電子	JCA-BM シリーズ (8, 12, 1250, 1650, 2250, 6010, 6050, 6070, 8020, 8030, 8040, 8060, 9010, 9020, 9030, 9130)
	BBC503	日立ハイテクノロジー	7020, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080
	BBC504	日立ハイテクノロジー	7140, 7150, 7170, 7170S, 7180
	BBC505	日立ハイテクノロジー	7250, 7350, 7450
	BBC506	日立ハイテクノロジー	7600 シリーズ P モジュール

簡易	コード	企業名	測定装置名
	BBC507	日立ハイテクノロジー	7600 シリーズ D モジュール
	BBC513	日立ハイテクノロジー	7600 シリーズ用電解質測定ユニット
	BBC514	日立ハイテクノロジー	7700 シリーズ P モジュール
	BBC515	日立ハイテクノロジー	7700 シリーズ D モジュール
	BBC516	日立ハイテクノロジー	7700 シリーズ用電解質測定ユニット
	BBC517	日立ハイテクノロジー	9000 シリーズ
	BBC518	日立ハイテクノロジー	LABOSPECT 003
	BBC519	日立ハイテクノロジー	LABOSPECT 008
	BBC520	日立ハイテクノロジー, 積水メディカル	積水メディカル EV800
	BBC521	日立ハイテクノロジー	LABOSPECT 006
	BBC522	日立ハイテクノロジー	3100
	BBC701	ヒロセ電子, 富士フイルム, 富士フイルムメディカル	富士フイルム ポイントケム P60
	BBJ702	ロシュ・ダイアグノス ティックス	COBAS-INTEGRA700, 800
	BBJ703	ロシュ・ダイアグノス ティックス	COBAS-INTEGRA 400, 400Plus
	BBJ704	ロシュ・ダイアグノス ティックス	モジュラーアナリティクス D モジュール
	BBJ705	ロシュ・ダイアグノス ティックス	モジュラーアナリティクス P モジュール
	BBJ706	ロシュ・ダイアグノス ティックス	モジュラーアナリティクス用電解質測定ユニット
	BBJ707	ロシュ・ダイアグノス ティックス	コバス 8000 c502, 6000 c501
P	BBJ708	ロシュ・ダイアグノス ティックス	コバス b101
	BBJ709	ロシュ・ダイアグノス ティックス	コバス 8000 c702
	BBJ710	ロシュ・ダイアグノス ティックス	コバス 8000 用 電解質測定ユニット
	BBN701	古野電気, カイノス	CA-400
	BBN702	古野電気, カイノス	CA-180
	BBN703	古野電気	CA-90
	BBN704	古野電気, カイノス	CA-400plus
	BBN705	古野電気, カイノス	CA-270, CA-270plus
	BBP201	日立化成, 積水メディカル	日立クリニカルアナライザ S40, M40, E40
	BBP501	エル・エム・エス	スーパー-Z 818
	BBR501	シーメンス HCD	ディメンション AR, RxL, ARx, RxL MAX
	BBR502	シーメンス HCD	ディメンション Xpand, Xpand Plus
	BBR503	シーメンス HCD	Viva-E システム
	BBR504	シーメンス HCD	ディメンション RxL-HM, RxL MAX-HM
	BBR505	シーメンス HCD	ディメンション Xpand-HM, Xpand Plus-HM
	BBR506	シーメンス HCD	ディメンション ビスタ 500, 1000T, 1500, 3000T

簡易	コード	企業名	測定装置名
	BBR507	シーメンス HCD	ディメンション ExL, ExL LM 200
	BBS701	日本テクトロ	U-240, 240 PLUS
	BBT403	バックマン・コールター	シンクロン CX4 (CE, デルタ, PRO 含む)
	BBT404	バックマン・コールター	シンクロン CX5 (CE, デルタ, PRO 含む)
	BBT405	バックマン・コールター	シンクロン LX20, LX20 PRO
	BBT406	バックマン・コールター	シンクロン LXi725
	BBT407	バックマン・コールター	ユニセル Dx C 600 PRO, 800 PRO
	BBW201	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	TMS-1024/1024H
	BBW202	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	ビオリス 24i (旧プレステージ 24i)
	BBW203	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	ビオリス 12i
	BBW204	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	ビオリス 24i プレミアム
	BBW206	東京貿易メディシス, 東京貿易機械	ビオリス 50i スペリア
	BBW401	古野電気, ニプロ	Compolyse-450
	BDP704	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	ビトロス 5,1FS
	BDP705	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	ビトロス 5600
	BDP706	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	ビトロス 4600
	BBS301	日本光電	CHM-4100, 4120
	FAD004	LSI メディエンス (三菱化学メディエンス)	STACIA
	BBZ999		その他のディスクリット方式臨床 化学自動分析装置
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分 野を検索してください	
		関連分野：FA/FB. 免疫血清検査装置（ラテック ス免疫測定装置および免疫比濁測定装置）	
C) 遠心方式			
	BCU801	ローム, 三和化学	パナリスト エース
	BCQ901	セントラル科学貿易	Piccolo, Piccolo xpress
	BCZ999		その他の遠心方式臨床化学自動分 析装置
D) ドライケミストリー方式			

簡易	コード	企業名	測定装置名
	BDA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム SP-4410
	BDA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム SP-4420
	BDA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム EZ SP-4430
	BDA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム D-Concept D-02 (SD-4810)
	BDA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム D-Concept D-03 (SD-4820)
	BDC701	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 3000, 3030
	BDC702	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 5000, 5500
	BDC704	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 3500, 3500p, 3500i, 3500s
	BDC705	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 7000, 7000i, 7000s, 7000「Z」シリーズ
	BDC706	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 4000, 4000i, 4000s
	BDC707	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム NX500, NX500i, NX500s
	BDC708	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム NX500V, NX500sV
	BDP701	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	ビトロス 250, 350
	BDP704	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	ビトロス 5,1FS
	BDP705	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	ビトロス 5600
	BDP706	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	ビトロス 4600
P	BDT201	ロシュ・ダイアグノ スティックス	レフロトロン S, プラス
	FZT201	ロシュ・ダイアグノ スティックス, 三和化学	カーディアックリーダー
	BDZ999		その他のドライケミストリー方式 臨床化学自動分析装置
E) バック方式			
	BEZ999		その他のバック方式臨床化学自動 分析装置
Z) その他の方式			
	DBU002	ロシュ・ダイアグノ スティックス	AVL 9180, 9181
	HAK304	ラジオメータ	ABL 505
	HAK310	ラジオメータ	ABL 555
	HAK312	ラジオメータ	ABL 700 シリーズ
	HAR603	テクノメディカ	GASTAT-3
	HAR604	テクノメディカ	GASTAT-mini

簡易	コード	企業名	測定装置名
	HAR605	テクノメディカ	GASTAT-5
	HAU002	ロシュ・ダイアグノスティックス	OMNI シリーズ, OMNI EX シリーズ
P	HAV203	扶桑薬品	アイスタット 1
	BZZ999		その他の臨床化学自動分析装置

G. 専用臨床化学分析装置			
A) グルコース分析装置			
	GAA301	エイアンドティー	GA03R, GA03T, GA03U, GA02U, GA04, GA05, GA06, GA08, GA08 II, GA08 III
	GAA303	エイアンドティー, シノテスト	グルコローダー GXR, GXT, NE
	GAA304	旭テクネイオン, シノテスト	グルコローダー MAX
	GAA305	エイアンドティー	GA09
	GAA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オート & スタット GA-1140
	GAA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オート & スタット GA-1160
	GAA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オート & スタット GA-1120, 1122
S	GAA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	グルコカード GT-1650, 1660
	GAA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスグルコース GA-1170, GA-1171
	GAA708	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスグルコース GA-1150, 1151, 1152
S	GAA709	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	グルコカード ダイアメーター, ダイアメーター a, マイダイア
S	GAA710	パナソニックヘルスケア, アークレイマーケティング	グルコカード G+ メーター
S	GAA711	パナソニックヘルスケア, アークレイマーケティング	グルコカード G ブラック
	GAA712	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ポケットケム BG PG-7320
	GAB601	東亜ディーケーケー	GLU-2
	GAB602	東亜ディーケーケー	GLU-1
	GAC901	堀場製作所	アントセンス II
	GAC902	堀場製作所, フクダ電子	アントセンス III
	GAC903	堀場製作所	アントセンス ロゼ
	GAC904	堀場製作所, フクダ電子, 榮研化学	アントセンス デュオ
S	GAJ704	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック コンパクト, アキュチェック コンパクトプラス, アキュチェック コンパクト黒
S	GAJ705	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック アビバ, アビバ ナノ
P	GAJ706	堀場製作所	ケアシスト
S	GAJ707	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェックコンフォート
P	GAJ708	堀場製作所	ケアシスト II
S	GAJ709	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック モバイル
S	GAJ710	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック ST メーター
P	GAK101	アムコ	ヘモキュー Glu
	GAK301	ラジオメーター	HemoCue Glucose201DMRT アナライザ
	GAK302	ラジオメーター	HemoCue Glucose201RT アナライザ
	GAK303	ラジオメーター	HemoCue Glucose201DM アナライザ
	GAK304	ラジオメーター	HemoCue Glucose+ アナライザ
S	GAL901	ゲンゼ, エーディア (三光純薬)	ライフチェック

簡易	コード	企業名	測定装置名
S	GAN405	バイエル薬品	アセンシア プリーズ 2
	GAQ201	協和メデックス	DM-JACK, DM-JACK II, DM-JACK Ex
	GAQ901	セントラル科学貿易	APEC グルコースアナライザー
S	GAR405	アボットジャパン, オムロンヘルスケア	プレシジョン エクシード
	GAR406	アボットジャパン	プレシジョン エクシード プロ
S	GAR407	アボットジャパン	フリースタイルプレシジョンネオ
S	GAR408	アボットジャパン	フリースタイルフリーダム ライト
	GAR409	アボットジャパン	プレシジョン エクシード H
	GAR410	アボットジャパン	フリースタイルプレシジョンプロ
S	GAR702	テルモ	メディセーフボイス GRV-1
S	GAR703	テルモ	メディセーフミニ GR-102
	GAR704	テルモ	メディセーフフィットプロ
S	GAR705	テルモ	メディセーフフィット
S	GAR706	テルモ	メディセーフフィットボイス
S	GAR707	テルモ	メディセーフフィットスマイル
S	GAS101	ニプロ	ニプロ フリースタイルメーター
S	GAS102	ニプロ	ニプロ フリースタイルメーターフラッシュ
S	GAS103	ニプロ	ニプロ フリースタイルメーターフリーダム
S	GAS104	ニプロ	ニプロ ケアファストメーター
	GAS105	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロ スタットストリップ XP
	GAS106	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロ スタットストリップ CT
S	GAS107	アボットジャパン, ニプロ	ニプロ フリースタイル フリーダムライト
S	GAS108	ニプロ	ニプロ ケアファスト C
S	GAS109	ニプロ	ニプロ トゥルーピコ
S	GAS401	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンタッチ ウルトラビュー
S	GAS402	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンタッチ ウルトラ
	GAU101	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ エクスプレス
	GAU102	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ コネクティブティ
S	GAU103	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロ スタットストリップ XP2
	GAU104	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロスタットストリップ CT2
	GAU105	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップエクスプレス EJ
	GAU106	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップエクスプレス 900
	GAV001	日科機バイオス	YSI-2300 STAT PLUS
	GAV301	ジャイマ	コピーライトエージェント
S	GAV501	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテスト エース

簡易	コード	企業名	測定装置名
S	GAV502	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテスト エース R
S	GAV503	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテスト PRO R
S	GAV505	パナソニックヘルスケア, 三和化学	グルテスト Neo スーパー
S	GAV506	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテストエブリ
	GAV507	パナソニックヘルスケア, 三和化学	グルテストミント
S	GAV508	パナソニックヘルスケア, 三和化学, アークレイマーケティング	グルテスト NEO アルファ
	GBA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスハイブリッド AH-8280
	GBA708	アークレイファクトリー, アークレイ	アダムスハイブリッド AH-8290
P	GBK401	塩野義製薬	チェッカートリーダー
	HAR603	テクノメディカ	GASTAT-3
	HAR604	テクノメディカ	GASTAT-mini
	HAR609	テクノメディカ	GASTAT-603ie
	HAR615	テクノメディカ	GASTAT-1830
	HAR616	テクノメディカ	GASTAT-1835
P	HAV203	扶桑薬品	アイスタット 1
P	BDU301	テラメックス	BBx
	GAZ999		その他のグルコース分析装置
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野：B. 臨床化学自動分析装置、 ~~IX 血糖測定装置~~ 、 ~~IX 血糖測定装置~~	

簡易	コード	企業名	測定装置名
B) HbA1c 測定装置			
	GBA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ハイオート A1c HA-8150
	GBA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムス A1c HA-8160, HA-8170
	GBA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムス A1c HA-8180
	GBA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスハイブリッド AH-8280
	GBA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムス A1c HA-8181
	GBA708	アークレイファクトリー, アークレイ	アダムスハイブリッド AH-8290
	GBA709	積水メディカル, アークレイマーケティング	アダムス A1c ミニ HA-8410
	GBA710	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムス A1c ライト HA-8380
	GBB501	バイオ・ラッドラボラトリーズ	Variant II, Variant II Turbo
	GBB502	バイオ・ラッドラボラトリーズ	D-10 システム
	GBB906	東ソー 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723G7
	GBB907	東ソー 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723G8
	GBB908	東ソー 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723G9
	GBB909	東ソー 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723GX
	GBB910	東ソー 栄研化学	HLC-723G11
	GBC501	日立ハイテクノロジーズ	L-9100
	GBR201	積水メディカル	RC20
P	BBJ708	ロシュ・ダイアグノス ティックス	コバス b101
P	GBJ801	シーメンス HCD	DCA2000, DCA2000+, DCA パンテージ
P	GBK401	塩野義製薬	チェッカー トリーダー
	GBN601	サカエ, 協和メデックス	A1c GEAR K
P	GBN602	サカエ, 協和メデックス	A1c iGEAR K
	GBV501	サカエ, 三和化学	A1c GEAR S
P	GBV502	サカエ, 三和化学	A1c iGEAR S
	GBN401	バイエル薬品	A1CNow プラスモニタ
	GAQ201	協和メデックス	DM-JACK, DM-JACK II, DM-JACK Ex
	FAA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム IM SI-3511
P	FZW801	エル・エム・エス, 東洋紡	ニコカードリーダー II

簡易	コード	企業名	測定装置名
	FAU801	ローム, アークレイマーケティング	スポットケムバナリスト SI-3610
	BCU801	ローム, 三和化学	バナリスト エース
	GBZ999		その他の HbA1c 測定装置
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野：B. 臨床化学自動分析装置	
Z) その他の専用臨床化学分析装置			
	GZA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム BA PA-4130, PA-4140
	GZA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ラクテートプロ LT-1710, 1730
	GZA705	アルファテクノ, アークレイマーケティング	エムシーファン HR300
	GZA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム IL SL-4720
	GZB502	シスメックス	ヘモリアス 200
	GZB901	東ソー	HLC-725CA II
	GZB902	東ソー	HLC-726VMA III
	GZB903	東ソー	HLC-729LP II
	GZB904	東ソー	HLC-725CA III
	GZC102	日本電子	JLC-500/V
	GZC501	日立ハイテクノロジーズ	L-8930
P	GZC701	富士フイルム, 富士フイルムメディカル	富士ドライケム 100N
	BDC709	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム NX10N
P	GZC703	富士フイルム	富士ドライケム IMMUNO AG1
	GZC801	富士レビオ	マグストリーム 1000, AS, HT
	GZD101	和光純薬	Quick Run
	FDM401	テカンジャパン, 医学生物学研究所 (MBL)	サンライズ プレートリーダー
	GZD501	資生堂	NANOSPACE GA MD-1
	GZJ701	ロシュ・ダイアグノス ティックス	アクトレンド GCT
	GZJ702	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ シンフォニー (型式：SYM1)
	GZJ703	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ シンフォニー (型式：SYM2)
	GZJ704	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ ベンチマーク ULTRA

簡易	コード	企業名	測定装置名
	GZJ705	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ XT システム ペンチ マークモジュール
	GZJ706	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ XT システム ディスカ バリーモジュール
	GZJ707	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ HX ペンチマークモ ジュール
	GZJ708	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ NX-SS モジュール
	GZJ709	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ ペンチマーク GX
	GZJ710	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ペンタナ ペンチマーク SS
	GZM301	ヒロセ電子, 和光純薬	FOBITWAKO
	GZP304	多摩精機, 栄研化学	便潜血用全自動分析装置 OC セン サー μ
	GZP305	日立アロカ, 栄研化学	便潜血用全自動分析装置 OC セン サー neo
	GZP308	日立アロカ, 栄研化学	OC センサー DIANA
	GZP309	多摩精機, 栄研化学	OC センサー io
	GZP310	日立アロカ, 栄研化学	OC センサー PLEDIA
	GZQ201	協和メデックス	HM-JACK
	GZQ202	協和メデックス	HM-JACK Plus
	GZQ203	協和メデックス	i6000, OptiMax
	GZQ204	協和メデックス	HM-JACK arc
	GZQ205	協和メデックス	HM-JACK SP
	GZR001	ウイスマー研究所, ウイスマー	Free Radical Elective Evaluator
P	GZR601	テクノメディカ	ポケットリピッド
	GZS501	大塚電子, アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-1000
	GZQ502	フクダ産業株式会社, ユーディア (三光純薬)	フォト BH メーター VI
	GZS901	日本ベクトン・ディッキンソン	BD ベリター システム リーダー
	GZS902	日本ベクトン・ディッキンソン	BD トータリス スライドプレッ プ, トータリス マルチプロセッサー
	GZT801	利康商事	フィスケ自動浸透圧計 210
	GZU101	ノバ・バイオメディカル	スタットセンサー i
	GZU102	ノバ・バイオメディカル	スタットセンサー エクスプレス i クレアチニン
	GZU103	ノバ・バイオメディカル	ニプロ スタットストリップ CT3
	GZU104	ノバ・バイオメディカル	ニプロ スタットストリップ XP3
	GZV501	アークレイファクトリー, 三和化学	ケトメータ N
	GZZ999		その他の専用臨床化学分析装置
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分 野を検索してください	
		関連分野：B. 臨床化学自動分析装置	

簡易	コード	企業名	測定装置名
J. 血球計数装置			
A) 全自動 B) 半自動			
	JAA301	エイアンドティー	MYTHIC18 (J)
	JAA302	エイアンドティー	MYTHIC220T (J) , 22CT (J)
	JAA701	バックマン・コールター, アークレイマーケティング	スポットケム BC SB-1410
	JAA702	日本光電, アークレイマーケティング	スポットケム CL SB-1420
	JAA703	日本光電, アークレイマーケティング	スポットケム CL SB-1430
	JAA704	日本光電, アークレイマーケティング	スポットケム CL SB-1440
	JAA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	thinka CB-1010
	JAB502	シスメックス	E シリーズ (2000, 2500, 3000, 4000, 5000)
	JAB504	シスメックス	K-800, 1000, 2000
	JAB505	シスメックス	NE シリーズ (4500, 6000, 7000, 8000)
	JAB507	シスメックス	SE-9000, SE-9000/RAM-1
	JAB508	シスメックス	SF-3000
	JAB509	シスメックス	KX-21, 21N, 21NV
	JAB510	シスメックス	R シリーズ (1000, 2000, 3000, 3500)
	JAB511	シスメックス	K-4500
	JAB512	シスメックス	XE-2100, 2100L, 2100D, 5000
	JAB513	シスメックス	R-500
	JAB514	シスメックス	XT-2000i, 1800i, 4000i
	JAB515	シスメックス	pocH-100i, 100iV
	JAB516	シスメックス	XS-1000i, 800i, 500i
	JAB517	シスメックス	XN-1000, 2000, 3000, 9000
	JAB518	シスメックス	XP-100, 300
	JAB519	シスメックス	XN-350, 450, 550
	JAC501	日立ハイテクノロジー	8200
	JAC901	堀場製作所	LC シリーズ (112, 114, 340, 360)
	JAC905	堀場製作所	MICROS (LC-150, 151) , FL-250 CBC, LC-550
	JAC907	堀場製作所	PENTRA120 (LC-140)
	JAC908	堀場製作所, フクダ電子	LC-170CRP, LC-175CRP, FL- 270CRP, FL-275CRP
	JAC910	堀場製作所	PENTRA 60 (LC-5000) , PENTRA 80 (LC-5501J), PENTRA XL80 (LC-5601J)
	JAC918	堀場製作所, フクダ電子	FL-278CRP, LC-178CRP
	JAC919	堀場製作所, フクダ電子	LC-667CRP, 687CRP, 767CRP
	JAC911	堀場製作所	Pentra MS CRP

簡易	コード	企業名	測定装置名
	JAC912	堀場製作所, フクダ電子	LC-660, LC-661
	JAC916	堀場製作所, (シーメンス HCD)	ADVIA 60
	JAJ005	ベックマン・コールター	マックスエム・シリーズ, コール ター HmX, コールター LH500
	JAJ008	ベックマン・コールター	Gen・S, STKS, Gen・S System 2
	JAJ009	ベックマン・コールター	AcT8, AcT10, AcTdiff
	JAJ010	ベックマン・コールター	コールター AcT5diff A/L, AcT5diff C/P
	JAJ011	ベックマン・コールター	コールター LH700 シリーズ, コールター LH780
	JAJ012	ベックマン・コールター	ユニセル DxH600, ユニセル DxH800
	JAJ803	シーメンス HCD	ADVIA120, 2120, 2120i
P	JAK101	アムコ	ヘモキュー Hb
	JAK301	ラジオメーター	HemoCue Hb201DM アナライザ
	JAK302	ラジオメーター	HemoCue WDC アナライザ
	JAK303	ラジオメーター	HemoCue WDC DIFF アナライ ザ
	JAP602	エルマ販売	PCE-210, 210N
	JAR403	アボットジャパン	セルダイン 3700
	JAR405	アボットジャパン	セルダイン 3200
	JAR408	アボットジャパン	セルダイン サファイア
	JAR409	アボットジャパン	セルダイン ルビー
	JAS301	日本光電	MEK-6108, 6208, 6308
	JAS302	日本光電	MEK-6318, 7222
	JAS303	日本光電	MEK-8222, 6400, 6420, 6500, 6510
	JAS304	日本光電	MEK-7300
	JBP601	エルマ販売	PCE-120, 170
	JBS301	日本光電	MEK-5103, 5105, 5204, 5207, 5216
	JBS302	日本光電	MEK-5108, 5208
	JZZ999		その他の血球計数装置

簡易	コード	企業名	測定装置名
L. 尿検査装置			
A) 全自動 B) 半自動			
	LAA301	エイアンドティー	UM01, UM01 a
	LAA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スーパーオーションアナライザ SA-4230, 4250
	LAA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	PSP AUTO, PSP-3110, 3120
	LAA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションマックス AX-4280, 4030, 4060
	LAA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションマスター UM-3410
	LAA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションアイキュー IQ-5210
	LAA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションハイブリッド AU- 4050
	LAB501	シスメックス	UF-50, 100, 110i
	LAB502	シスメックス	UF-1000i
	LAB504	シスメックス	URISYS 2400
	LAB506	シスメックス	UX-2000
	LAB507	シスメックス	UF-3000, 4000, 5000
	LAC502	日立ハイテクノロジーズ	6700, 6800
	LAC801	富士レビオ	アイキュー 200 スプリント, アイキュー 200 エリート
	LAD101	和光純薬	ZD-401,501,601,RM-7000
	LAD701	TOTO, 大和ハウス工業	尿糖検査機ウエルユー II, TOTO 体温計付き尿糖計
	LAJ501	日立ハイテクノロジーズ, シスメックス	Super UA
	LAJ802	シーメンス HCD	クリニテック アトラス, クリニテック アトラス XL
	LAR602	テクノメディカ	UA・ROBO-700 i
	LAR603	テクノメディカ	UA・ROBO-1000AD
	LAR604	テクノメディカ	UA・ROBO-R250A
	LAR801	ミュキエレックス, 東洋紡 エイアンドティー	U-SCANNER, U-SCANNER II, USCANNER (E)
	LAR802	ミュキエレックス, 東洋紡	USCANNER plus
	LAT801	利康商事	オズモメーター 3250, 3900, 3320, 210
	LAU301	テラメックス, 栄研化学	US-3100, US-3100R, US-3100R Plus, US-3500
	LAU302	テラメックス, 栄研化学	US-3200
	LAU303	テラメックス, 栄研化学	US-3300
	LBA501	大塚電子, 協和メデックス	UR-S600
	LBA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ミニオーションアナライザ MA- 4240
	LBA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	マイクロオーションアナライザ MA-4260
	LBA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションジェット AJ-4270

簡易	コード	企業名	測定装置名
	LBA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーション ミニ AM-4290
	LBA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ポケットケム UA PU-4210, 4010
	LBA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションイレブン AE-4020
	LBB501	シスメックス	UA-1000, 2000
	LBB505	シスメックス	URISYS 1800
	LBD101	和光純薬	プレテスター RM405, 505, 505L, 605, 805, 905, 6050
	LBJ501	ロシュ・ダイアグノス ティックス	Miditron M
	LBJ801	シーメンス HCD	クリニテック 10, 50, 100
	LBJ803	シーメンス HCD	クリニテック 200, 200+
	LBJ804	シーメンス HCD	クリニテック 500
	LBJ805	シーメンス HCD	クリニテック ステータス, クリニテック ステータスプラス
	LBJ806	シーメンス HCD	クリニテック アドバントス
	LBJ807	シーメンス HCD	クリニテック ノーパス
	LBP601	エルマ販売	臨床屈折計, デジタル臨床屈折計 SU-202
	LBT202	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ユリラックス S
	LBT203	ロシュ・ダイアグノス ティックス	ユリシス 1100
	LBU301	テラメックス, 栄研化学	US-2100R, US-2200
	LBU302	テラメックス, 栄研化学	US-1000
	LBU601	アタゴ	アナログ/デジタル尿比重屈折計 (UR-DU, UGD, エリコン: URCSJE, PAL88, MASTER-URC/Ja, MASTER-URC/JM)
	LBU602	アタゴ	臨床用屈折計 SPR-T2, SPR-NE, T2-SE, SUR- JE, MASTER-URC/Ja, MASTER-URC/JM)
	LBU901	和光純薬	ユリベット, ユリベット II D
	LBV501	三和化学	U テスター
	LBV502	三和化学	ビジュアルリーダー
	GZD101	和光純薬	Quick Run
	LZZ999		その他の尿検査装置
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野: B. 臨床化学自動分析装置、 ~~臨床化学~~ ~~分光光度計~~ 、G. 専用臨床化学分析装置	

◎トレーサビリティの確認について

1. トレーサビリティの確認に関する調査

(トレーサビリティの概念は、補足「酵素項目の標準化対応法とトレーサビリティについて」、【トレーサビリティとは】をご参照ください。)

以下の調査項目についてトレーサビリティの調査を行います。

AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GT、総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、血糖、HDLコレステロール。

2. 調査対象となる標準品

各項目共に、標準品の供給元(認証元)を中心に便宜的に分類してあります。次ページの表を参考に、記入してください。

(JCCLSの標準品、NISTの標準品、HECTEFの標準品、ReCCSの標準品、企業の標準品その他の標準品)

3. 標準品の種類

補足「酵素項目の標準化対応法とトレーサビリティについて」の図1に示すように、日常検査法の測定結果から順に上位の標準物質、規準測定操作法に途切れなく遡ることができる事をトレーサビリティが確保されているといえます。各校正物質は以下の通りです。

- ・一次校正物質：高次の標準物質、国際的に認知された標準品などで認証値と不確かさが表記されています。(WHO、IRMM、JCCLS、NISTなどから供給されています。)
- ・二次校正物質：一次校正物質にトレーサビリティがあり、実試料標準物質など(HECTF、ReCCS)があります。
- ・製造業者実用校正物質：メーカーが持つ社内規準物質(高次の校正物質を使用する場合もあります。)で、主に製造業者製品校正物質の値付けに使用されます。
- ・製造業者製品校正物質：日常検査で使用するキャリブレーターです。

4. 調査設問に対する記入上の注意

- ・日常検査において、メーカー指定の製造業者製品校正物質によりキャリブレーションを実施している場合、このキャリブレータを検体として測定した場合(打ち返し)には、企業の標準品にてトレーサビリティを確認したことになりますので、企業の標準品のコード番号(7)を記入してください。
- ・それ以外に上位の一次校正物質、二次校正物質(次ページの表に記載されている標準品)を購入し、実施した場合にはそれぞれ供給元(認証元)の標準品のコード番号を選択して下さい。(この場合、標準品に添付されている認証書を確認することで判別は可能です。)
- ・これらいずれの確認を実施していない場合には、「実施していない」に該当するコード番号(9)を記入してください。

トレーサビリティの確認は、毎日実施する必要はありませんが、年に数回行って内部精度管理でその測定値が厳密に管理されていれば、精度管理調査の直前に確認操作をしていなくても、トレーサビリティがとれていると判断します。

5. 組織の略号

WHO(World Health Organization)

JCCLS (Japanese Committee for Clinical Laboratory Standards、日本臨床検査標準協議会)

NIST (National Institute of Standards and Technology、米国)

IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements、旧BCR、欧州連合)

HECTEF (Health Care Technology Foundation、一般社団法人 HECTEF)

ReCCS (Reference Material Institute for Chemistry Standards、検査医学標準物質機構)

6. 標準品に関する参考資料(本精度管理調査に関連する項目のみ記載)

JCCLSの標準品(供給機関はJCCLSあるいはHCTEFあるいはReCCS)

記号／略号	標準物質名	調査対象項目
JCCLS CRM - 001	常用参照標準物質：JSCC 常用酵素	AST、ALT、 γ -GT

NISTの標準品

記号／略号	標準物質名	調査対象項目
SRM 909	記号／略号と同じ	総コレステロール、中性脂肪、クレアチニン、尿酸
SRM 965	記号／略号と同じ	ブドウ糖
SRM 1951	記号／略号と同じ	総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール
SRM 1952	記号／略号と同じ	総コレステロール

ReCCSの標準品

記号／略号	標準物質名	調査対象項目
JCCRM 223	コレステロール・中性脂肪常用標準物質	総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール
JCCRM 224	脂質測定用常用参照標準物質	中性脂肪、HDLコレステロール
JCCRM 411	IFCC法HbA1c測定用常用参照標準物質	HbA1c
JCCRM 423	HbA1c認証実用標準物質	HbA1c
JCCRM 521	含窒素・グルコース常用標準物質	ブドウ糖、尿酸、クレアチニン
JCCRM 211	コレステロール一次実試料標準物質	総コレステロール
JCCRM 121	イオン電極用認証実用標準物質	ブドウ糖
JCCLS 021	尿酸測定用JCCLS認証標準物質	尿酸

酵素活性値記入上の一般的注意

1. 測定法：標準化対応法については次ページからの補足を読んで、よく理解して下さい。
この概念は、1997 年から利用されており、例えば JSCC 常用基準法で測定した値が検量物質などにより伝達される場合、JSCC 標準化対応法となります。測定キットの説明書を読んで回答して下さい。わからない場合は、是非、該当するメーカーにお問い合わせ下さい。標準化対応法の考え方は、常用参照標準物質：JSCC 常用酵素・ChE JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 もしくは企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）を用いてトレーサビリティを確認している場合だけでなく、勧告法準拠法を使用し実測 K ファクターを利用して 37℃（管理されていること）で測定している場合も含むことに留意して下さい。標準化対応法であるにもかかわらず、それ以外を選んでいる施設が少なくないので、この点に関しては試薬メーカーにおたずね下さい。
2. 単位：標準化対応法、もしくは該当する測定法の国際単位で記載して下さい。
3. 測定温度：標準化対応法は 37℃で測定することが前提です。測定に用いている温度のコード番号を記入して下さい。
4. 検量法、トレーサビリティのチェック：標準化対応法を使用する場合、日常分析でどのようにトレーサビリティをチェックしているかを記載する欄です。国際標準品、国内標準品、企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）などのいずれかを選んで下さい。次ページからの補足資料の図 2 に示したように、トレーサビリティ連鎖上、日常検査法をすぐ上位の製造業者内標準測定操作法にトレースするためには企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）で十分です。ただし、企業の測定試薬が正しい測定体系を示しているかを検証するためにも、JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 でトレーサビリティの確認をすることも必要です。
5. 以上の記載を補足するために、資料として、検量法の確認記入フロー、トレーサビリティの確認記入フロー、分類コード入力のための Q&A を示してあります。さらに各項目の追加資料として、該当酵素の測定法分類記入フローを設けました。ただし、基本骨格について説明しただけですので、概念・考え方の参考に使用するだけにして下さい。また、不足している情報、不明なことは使用している試薬メーカーにおたずね下さい。

補足「酵素項目の標準化対応法とトレーサビリティについて」

【はじめに】

酵素活性測定は、その量を測定するものではなく活性値として測定されるため、使用する測定系により得られる結果は異なる。特にアミラーゼについては、日本国内で十数種の基質が存在し、得られる結果は数倍も異なり混乱を呈していた。したがって、酵素活性測定の標準化を実践するためには、基準測定操作法・標準物質の設定を行い、トレーサビリティ体系を組むことが必須であった。

日本国内では、日本臨床化学会 (JSCC) によってヒト血清中の酵素活性測定の勧告法、および常用酵素標準物質の規格が順次示され、1998 年には日本臨床検査標準協議会 (JCCLS) により、我が国で最初の常用酵素標準物質 (JC・ERM) が作製され、頒布が開始された。現在は常用参照標準物質：JSCC 常用酵素 JCCLS CRM-001 と改名され第 6 ロットまでリリースされ、また、2006 年 5 月よりコリンエステラーゼ常用酵素標準物質 (JC・ERM for pseudo-ChE) (現在の名称：常用参照標準物質：ChE JCCLS CRM-002) の頒布も開始され、我が国の臨床検査における酵素活性測定の標準化は格段の進歩を遂げている。


しかしながら、日本医師会精度管理調査では、毎年、誤記入が後を絶たない。これは JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 の使用方法、用語の解釈など、理解の曖昧さに起因していると考えられる。そこで、トレーサビリティの確認と JSCC 標準化対応法の概念について説明する。

【トレーサビリティとは】

通常各試薬メーカーは、国際的、もしくは国家において、権威ある組織が作成した一次基準測定操作法やそれによって値付けられた一次校正物質を基に、その表示値を製造業者の校正物質に伝達し、最終的には臨床検査室で使用される日常検査法に伝達する。このような場合、最終使用者による測定結果は、製造業者による測定操作法とは逆の方向を経て、標準物質が本来定めた表示値に戻る事が可能となる。これが計測に係わるトレーサビリティであり、これにより日本のみならず国際的にも測定結果の整合性が確保できる。

このトレーサビリティの確保は、図 1 で示すごとく最終的な日常検査法による患者試料の測定結果から最上位の一次校正物質、一次基準測定操作法まで各階層を経て、とぎれなく校正と値付けが繰り返される。

図 1. 校正の階層段階全体と SI 単位への計量学的トレーサビリティ

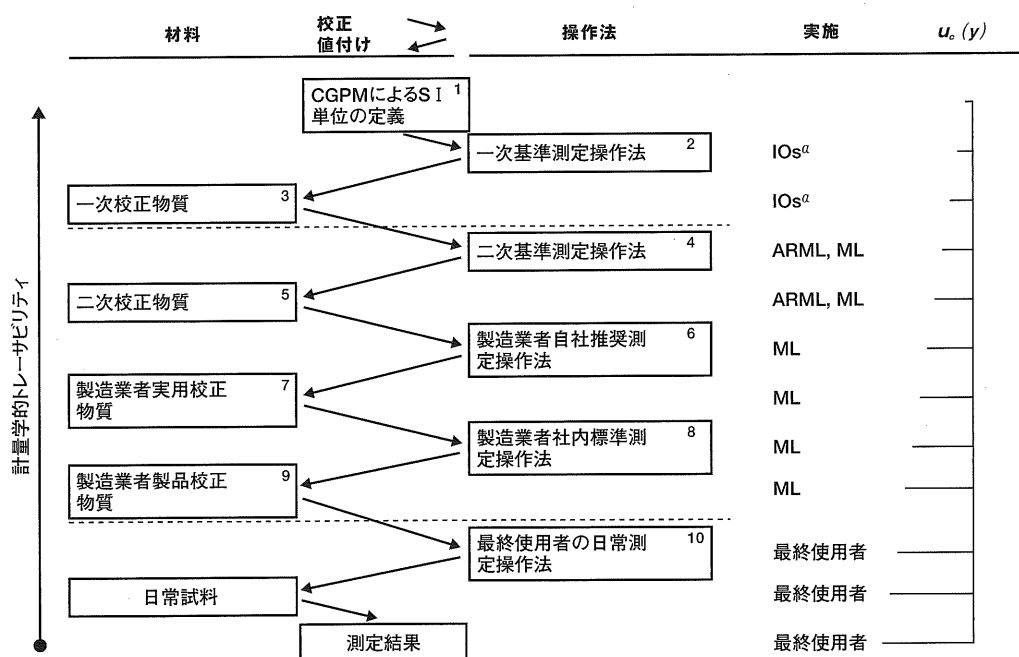

IOS = International Scientific Organization (国際学術団体)


ARML = Accredited Reference Measurement Laboratory (認定標準測定検査室)*

ML = Measurement Laboratory (測定検査室)*

(*本図のARMLとMLは、一般に製造業者の値付けラボを指す)

日本国内における酵素活性測定においては、先述したようにそれぞれ JSCC/JCCLS 常用基準法と JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 が存在するので、トレーサビリティ体系は図2のように示すことができる。このような測定体系中で機能する日常検査法を JSCC 標準化対応法という。

図2. わが国における血清酵素活性測定のトレーサビリティ連鎖

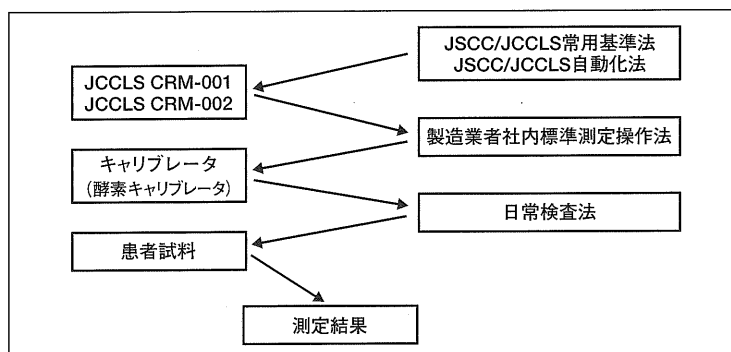

【JSCC 標準化対応法とは】

JSCC 標準化対応法とは、血清酵素活性測定のための日常検査法のうち、その測定法による患者試料（患者血清）の測定値が、JSCC/JCCLS 常用基準法による測定値と比例互換性（コミュニティ）が得られることが保証された測定法である。具体的には、日常検査法の検量をキャリブレーション（酵素キャリブレーション）で行うことで、患者血清の測定値が最終的に JSCC/JCCLS 常用基準法による測定値で表すことができるものをいう。したがって図2のごとく測定体系を組んでいる日常検査法のことである。JSCC 標準化対応法はトレーサビリティがとれていることのバリデーション（妥当性確認）がされていない。通常はメーカーにより JSCC 標準化対応試薬として準備され、かつメーカーが指定した企業のキャリブレーション（酵素キャリブレーション）を用いて、メーカーの SOP（標準操作法）にしたがって実施することになる。

JSCC 標準化対応法は、JSCC/JCCLS 常用基準法の試薬条件（試薬組成、試薬濃度など）の指定はないが、ヒト血清試料の測定値が JSCC/JCCLS 常用基準法による測定値と合致することが保証されなければならない。

一般に日常検査法で得られる測定値のトレーサビリティの取り方は大別して2つある。

- 1) 「ヒト試料と JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 の反応性が同じと確認された日常検査法の検量を、直接 JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 で行い、その値を用いてキャリブレーション（酵素キャリブレーション）へ値付けする方法」である。このとき、ヒト試料と JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002、キャリブレーション（酵素キャリブレーション）が JSCC/JCCLS 標準化対応法に対して、反応性が同じであることが必須条件となる。
- 2) 「日常検査法の検量を実測 K ファクターで行って得られたヒト試料の測定値と、同一試料を JSCC/JCCLS 常用基準法あるいは JSCC/JCCLS 自動化法で得られた測定値を、相関分析によって JSCC/JCCLS 常用基準法あるいは JSCC/JCCLS 自動化法に合わせる（Working Calibrator を使用する方法）」 JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 はヒト由来酵素を使用しているが患者試料中の酵素と特性が同じではないため、日常検査法（試薬キット）によっては JSCC/JCCLS 常用基準法あるいは JSCC/JCCLS 自動化法に対して酵素の反応性が一致しない場合がある。JSCC 標準化対応法は、患者試料（ヒト血清）の測定値を最終的に JSCC/JCCLS 常用基準法の値にトレースするので、ヒト血清の測定値が JSCC/JCCLS 常用基準法に一致していれば、JCCLS CRM-001 および JCCLS CRM-002 の表示値と日常検査法（試薬キット）により直接測定したときの測定値が一致しなくとも許容される。内部・外部精度管理で使用される試料も、試料の特性によっては通常の患者試料と反応性が異なり、ヒト血清と同様な反応性を示さないことがある。このような精度管理用の試料は、厳密にいうと JSCC 標準化対応法でのトレーサビリティを正しく把握することができないことになるが、大規模調査では生血清を使用できないため、代用しているのが現状である。

【参考資料】


- ・財機システム振興協会：医療診断システム構築のための基盤整備に関するフィージビリティスタディ報告書（システム開発 16-F-14）. 2005;03:11-13
- ・日本臨床化学会学術連絡委員会：常用酵素標準物質の規格（1996-02-15）. 臨床化学 1996;25:135-148
- ・日本臨床検査標準協議会認証委員会：日本・常用酵素標準物質（Lot004）使用ガイド（Ver1.0）. 日本臨床検査標準協議会会誌 2004;19:15-16

【分類コード入力のための Q&A】

* 分類コードを入力する前に、必ず使用されている試薬の添付文書、キャリブレータの添付文書、表示値表をよく確認して下さい。


Question	Answer
測定結果に従来法との相関補正式などの係数を設定している場合の測定法分類は？	相関補正などの係数が設定されている場合は、たとえ JSCC 標準化対応法の条件を満たしていても「99. その他」になります。ただし、相関補正式により JSCC 標準化対応法に合わせている場合もありますので、補正係数の由来を確認して下さい。
AST、ALT で、試薬キットに「IFCC 法」「SSCC 法」と記載されているが、検量に JSCC 標準化対応法の値を使用している。この場合の測定法分類は？	IFCC 法の PALP 添加以外の場合では、基本的に「11. JSCC 標準化対応法」を選択で構いません。
AST、ALT で、試薬は PALP を添加した IFCC 法を使用しているが、検量に JSCC 標準化対応法の値を使用している。この場合の測定法分類は？	IFCC 法で PALP を添加している場合は、必ず指定のキャリブレータを使用し、指定の表示値を使用して下さい。また測定法分類も合わせて「12. IFCC 標準化対応法 (PALP 添加)」を選択して下さい。
AST、ALT で、試薬キットは「JSCC 法」と記載された試薬を使用しているが、検量に IFCC の値を使用している。この場合の測定法分類は？	この時使用されている表示値は PALP 無添加であることをご確認下さい。その場合基本的には「13. IFCC 標準化対応法」となります。もし使用する表示値が「PALP 添加」の場合は、速やかに正しい使用方法に変更することをお勧め致します。
γ -GT (γ -GTP) で、試薬キットに「JSCC 法」との記載がない（例えば Szasz 法試薬使用の場合）が、検量に JSCC 標準化対応法の値を使用している。この場合の測定法分類は？	基本的に「11. JSCC 標準化対応法」を選択で構いませんが、試薬キットによっては精度管理試料に対する反応性がヒト試料と異なる場合がありますので、各試薬メーカーにお問い合わせ下さい。
γ -GT (γ -GTP) で、試薬キットは「JSCC 法」と記載された試薬を使用しているが、検量に Szasz の値を使用している。この場合の測定法分類は？	基本的に「22. Szasz の条件」を選択することになりますが、正しい方法ではありませんので、速やかに正しい使用方法に変更されることをお勧め致します。
試薬キット指定のキャリブレータ以外のものを使用している場合の検量法分類は？	標準化対応法という概念は、試薬キットと指定のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）の組み合わせがあって、初めて成立します。したがって、試薬キット指定以外のキャリブレータなどを使用している場合の検量法は、「9-0 その他」を選択して下さい。この場合には速やかに正しい使用方法に変更されることをお勧め致します。
現在、ルーチン測定は、キャリブレーションとしてブランクだけを実施している。ただし「K ファクター」は指定のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）を用いて決定した。この場合の検量用分類は？	基本的には、「11. JSCC 標準化対応法」を選択しますが、ファクターを決定した時期以降の変動要因による影響を確認するために、定期的に検量を取り直す、もしくは企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）によるトレーサビリティの確認を実施して下さい。

【参考】検量法の確認記入フロー

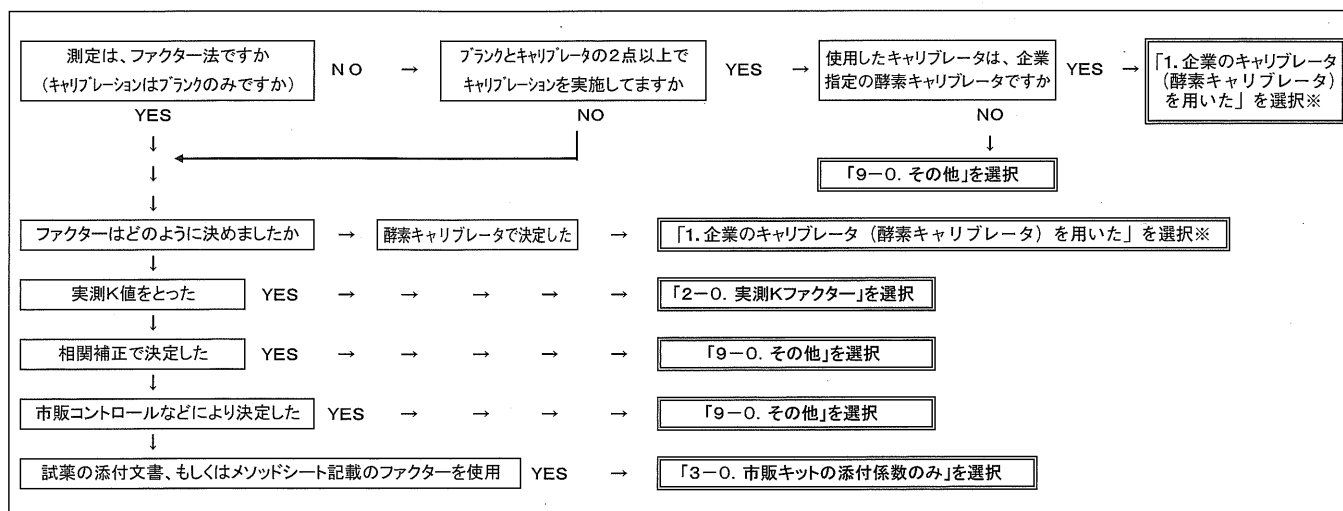

※ 「1. 企業のキャリブレータ (酵素キャリブレータ)」については、製造販売元指定は「1-1」、製造販売元以外は「1-2」を選択して下さい。

【参考】トレーサビリティの確認記入フロー

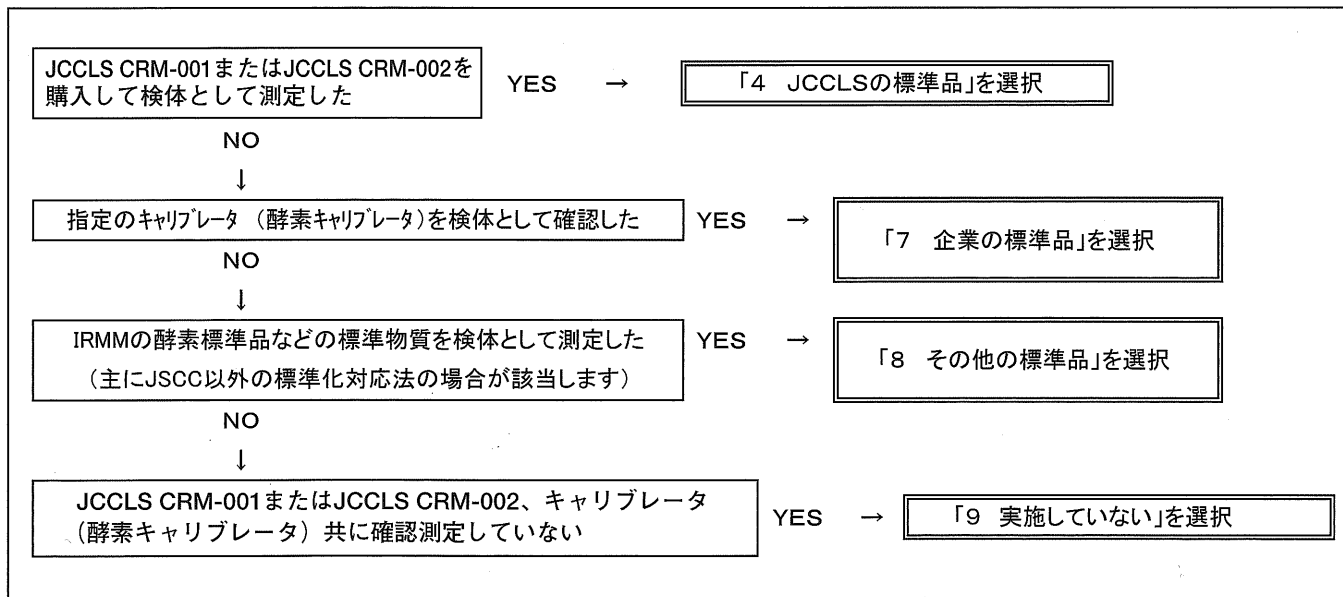

◎記入上の注意事項について

〔調査項目ごとの記入上の注意事項〕

〔調査票記入控〕

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	ユーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスHCD

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニッポーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

1. 20. 総コレステロール

- ▶測定法 1) 11 はコレステロールオキシダーゼを用いる酵素法で、最終的に発色反応に導く比色法および電極法を含みます。
2) 21 はコレステロールデヒドロゲナーゼを用いる酵素法です。
3) 化学法（例えば Abell-Kendall 法）は、その他 99 です。
4) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
5) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。

- ▶測定値 単位はmg/dL で記入して下さい。
小数点以下四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

- ▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

- ▶検量用試料（キャリブレーション）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレーションの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせて下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

1. 総コレステロール

測定法 コレステロール酸化酵素法・・・11 コレステロール脱水素酵素法・・・21 ドライケミストリ法 ビトロス(オーソ)・・・・・・81 富士ドライケム(富士フイルム) 82 スポットケム(アークレイ)・・・83 Dコンセプト(アークレイ)・・・84 その他・・・・・・・・・・99 ()	試薬キットの製造販売元 左ページのコード表から該当する番号を選んで記入してください。	検量用試料(キャリブレータ)の種類 製造販売元指定のもの 溶媒ベース・・・・・・・・・・ 血清ベース・・・・・・・・・・2 製造販売元指定以外のもの 溶媒ベース・・・・・・・・・・3 血清ベース・・・・・・・・・・4 磁気カード・バーコード等 キャリブレーション・・・・・・・・5 その他()・・・9	トレーサビリティーの確認 NISTの標準品・・・5 ReCCSの標準品・・・6 企業の標準品・・・7 その他の標準品・・・8 実施していない・・・9

その他(99)のときの
製造販売元名

使用したキットの名称
 正式名称を省略しないで
 下欄に記入してください。

キットの名称

* 検量用試料の種類で
3, 4, 9を選んだ場合は
製造販売元コード番号を
記入してください。

* 企業の標準品を選んだ場合は、7に続く
2桁の枠内に製造販売
元コード番号を記入し
てください。

Figure 1: Schematic diagram of the measurement system. It shows five identical measurement units, each consisting of a '測定値' (Measurement Value) box and a '試料' (Sample) box. The '測定値' box contains a vertical scale from 0 to 100. The '試料' box contains a vertical scale from 0 to 100. The units are labeled '試料 1' through '試料 5'. Below each unit is a label 'mg/dL'.

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスHCD

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	パイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

2.

21. 中性脂肪

▶測定法 グリセロールを消去する方法としない方法（直接法）の誤登録がまだかなり存在します。測定原理を十分調査して間違いなく記入して下さい。

- 1) 酵素法には UV 法と比色法があり、NADH の 340nm の吸光度変化を測定する方法は UV 法で、最終的に発色反応に導く方法は比色法です。
- 2) グリセロールを消去する方法には、血清盲検をとることにより結果的に遊離グリセロールを消去する方法と、あらかじめ反応の中で遊離グリセロールを消去した後に発色を行う方法の 2 種類があり、その両方が含まれます。グリセロールを消去しない方法（直接法）は、遊離グリセロールを消去することなく測定する直接法です。
- 3) 有機溶媒抽出による化学法（たとえば Hantzsch 反応法）は 99 です。
- 4) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
- 5) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。

▶POCT 機器につきましては、今年度は評価しますが、来年度以降の評価については精度管理検討委員会において検討いたします。該当する機器は、測定装置コード表に「p」と示しております。

▶測定値 単位はmg/dL で記入して下さい。

小数点以下第 1 位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。

測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶検量用試料（キャリブレーション）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。

・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1 成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。

注意：粘性物質を添加したキャリブレーションの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせして下さい。

・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。

・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。

・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。

・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。

・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

2. 中性脂肪

測定法		試薬キットの製造販売元		検量用試料(キャリブレーション)の種類		トレーサビリティの確認	
酵素UV法							
グリセロールを消去する方法……………	11	左ページのコード表から該当する番号を選んで記入してください。		製造販売元指定のもの		NISTの標準品……………	5
酵素比色法				溶媒ベース……………	1	ReCCSの標準品……………	6
グリセロールを消去する方法……………	21			血清ベース……………	2	企業の標準品……………	7
グリセロールを消去しない方法(直接法)……………	22			製造販売元指定以外のもの		その他の標準品……………	8
ドライケミストリ法				溶媒ベース……………	3	実施していない……………	9
ビトロス(オゾン)……………	81			血清ベース……………	4		
富士ドライケム(富士フィルム)……………	82			磁気カード・バーコード等			
スポットケム(アークレイ)……………	83			キャリブレーション……………	5		
Dコンセプト(アークレイ)……………	84			その他……………	9		
その他……………	99						
()							

その他(99)のときの
製造販売元名

* 検量用試料の種類で
3, 4, 9を選んだ場合は
製造販売元コード番号を
記入してください。

* 企業の標準品を選んだ場合は、
7に続く2桁の枠内に製造販売元
コード番号を記入してください。

使用したキットの名称

正式名称を省略しないで
下欄に記入してください。

キットの名称

Figure 1 illustrates the measurement system. It consists of five identical measurement units arranged horizontally. Each unit has a top box labeled '測定値' (Measurement Value) and a bottom box labeled '試料' (Sample). The top boxes contain numerical values 1, 2, 3, 4, and 5 respectively, followed by the unit 'mg/dL'. The bottom boxes are labeled '試料 1', '試料 2', '試料 3', '試料 4', and '試料 5' respectively. The units are connected by a horizontal line.

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名	コード	製造販売元名	コード	製造販売元名
02	栄研化学	30	ミズホメディー	55	岸本医科学研究所
04	カイノス	31	LSIメディエンス	57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
06	関東化学	32	和光純薬	58	合同酒精
07	協和メデックス	33	富士レビオ	59	塩野義製薬
08	極東製薬	34	日本凍結乾燥研究所	60	テルモ
09	シスメックス	36	旭化成	61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
10	エーディア	37	ニッポーボーメディカル	62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
11	シノテスト	38	アークレイ	63	バイエル薬品
12	常光	39	ニプロ	64	三洋化成工業
13	セロテック	40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	65	オリエンタル酵母
14	アボットジャパン	42	日本ケミファ	66	フレイヤ
15	積水メディカル	43	日立	67	日本光電工業
18	デンカ生研	44	東ソー	68	扶桑薬品
19	東洋紡	45	BML	69	日本電子
20	日水製薬	46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	98	自家調製
21	アルフレッサ ファーマ	47	エイ アンド ティー	99	その他
22	ロシュ・ダイアグノスティックス	48	日本ベクトン・ディッキンソン		
26	富士フイルム	49	生化学工業		
27	ベックマン・コールター	53	日立化成		
29	シーメンスHCD	54	堀場製作所		

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

3. 尿酸

- ▶測定法 1) 同じメーカーで異なった種類の製品が発売されていることもあるので、よく調べた上、記入して下さい。
- 2) POD-4AA-フェノール、EMSE、DEAなどを発色試薬に用いるものは31です。
- 3) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
- 4) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。
- ▶測定値 単位はmg/dLで記入して下さい。
- 小数点以下第2位を四捨五入のうえ、小数点以下第1位で記入して下さい。
- 小数点以下0の場合は、0を必ず記入して下さい。
- 測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999.9と記入して下さい。
- ▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。
- ▶検量用試料（キャリブレーション）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
- ・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
 - 注意：粘性物質を添加したキャリブレーションの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせして下さい。
 - ・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
 - ・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
 - ・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
 - ・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
 - ・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

3. 尿酸

測定法 ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 31 ウリカーゼ・UV法…………… 41 ドライケミストリ法 ビトロス(オーソ)…………… 81 富士ドライケム(富士フィルム) 82 スポットケム(アークレイ)…… 83 Dコンセプト(アークレイ)…… 84 その他…………… 99 ()	試薬キットの製造販売元 左ページのコード表から該当する番号を選んで記入してください。	検量用試料(キャリブレーション)の種類 製造販売元指定のもの 溶媒ベース…………… 1 血清ベース…………… 2 製造販売元指定以外のもの 溶媒ベース…………… 3 血清ベース…………… 4 磁気カード・バーコード等 キャリブレーション…………… 5 その他…………… 9	トレーサビリティの確認 NISTの標準品…………… 5 ReCCSの標準品…………… 6 企業の標準品…………… 7 その他の標準品…………… 8 実施していない…………… 9

その他(99)のときの
製造販売元名

* 検量用試料の種類で
3, 4, 9を選んだ場合は
製造販売元コード番号を
記入してください。

* 企業の標準品をを選んだ場合は、7に続く2桁の枠内に製造販売元コード番号を記入してください。

使用したキットの名称
正式名称を省略しないで
下欄に記入してください。

キットの名称

Figure 1 consists of five identical 100-mL graduated cylinders arranged horizontally. Each cylinder has a black frame and a white interior with vertical graduation lines. The top of each cylinder is labeled '測定値' (Measured Value) and '試料' (Sample) followed by a number from 1 to 5. The units 'mg/dL' are written below each cylinder. The liquid level in each cylinder is indicated by a black meniscus. The levels are approximately: 1. 10 mg/dL, 2. 20 mg/dL, 3. 30 mg/dL, 4. 40 mg/dL, 5. 50 mg/dL.

試料	測定値 (mg/dL)
試料 1	10
試料 2	20
試料 3	30
試料 4	40
試料 5	50

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスHCD

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニッポーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

4. クレアチニン

- ▶測定法 1) ピクリン酸による rate 法は 12 と記入して下さい。
2) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
3) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。
- ▶測定値 単位はmg/dL で記入して下さい。
小数点以下第 3 位を四捨五入のうえ、小数点以下第 2 位で記入して下さい。
0 の場合または数値がない場合は、00 を必ず記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、999.99 と記入して下さい。
- ▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。
- ▶検量用試料（キャリブレーション）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1 成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレーションの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせして下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

参考調査

・日常報告している測定値の桁数について、対応するコード番号を記入して下さい。

4. クレアチニン

測定法 Jaffe法 除蛋白しない方法 rate法…………… 12 酵素法…………… 21 ドライケミストリー法 ビトロス(オーソ)…………… 81 富士ドライケム(富士フィルム) 82 スポットケム(アークレイ)…… 83 Dコンセプト(アークレイ)…… 84 その他…………… 99 ()	試薬キットの製造販売元 左ページのコード表から該当する番号を選んで記入してください。	検量用試料(キャリブレーション)の種類 製造販売元指定のもの 溶媒ベース…………… 1 血清ベース…………… 2 製造販売元指定以外のもの 溶媒ベース…………… 3 血清ベース…………… 4 磁気カード・バーコード等 キャリブレーション…………… 5 その他…………… 9	トレーサビリティの確認 NISTの標準品…………… 5 ReCCSの標準品 …… 6 企業の標準品…………… 7 その他の標準品…………… 8 実施していない…………… 9

その他(99)のときの
製造販売元名

* 検量用試料の種類で
3, 4, 9を選んだ場合は
製造販売元コード番号を
記入してください。

* 企業の標準品を選んだ
場合は、7に続く2桁の枠内に
製造販売元コード番号を記入
してください。

使用したキットの名称
正式名称を省略しないで
下欄に記入してください。

キットの名称

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスHCD

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	パイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

5. AST

- ▶測定法 使用している試薬の添付文書をよく読んで記入して下さい。標準化対応法の考え方を基本とします。
- 1) JSCC 標準化対応法は、日本臨床化学会の勧告法の測定値を伝達している測定法です。添付文書に JSCC 標準化対応法と記載されています。測定法の分類は 11 です。
 - 2) IFCC（国際臨床化学連合）の勧告法の測定値を伝達している方法が IFCC 標準化対応法です。この測定法は PALP が添加されています。測定法の分類は 12 です。
 - 3) IFCC の勧告法は基本的に PALP が添加されている測定法です。PALP 添加をしていない IFCC 標準化対応法は現実には存在しません。しかし、そのような試薬をご利用の方は 13 に分類して下さい。
 - 4) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
 - 5) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。
- ▶POCT 機器につきましては、今年度は評価しますが、来年度以降の評価については精度管理検討委員会において検討いたします。該当する機器は、測定装置コード表に「p」と示しております。
- ▶測定値 自動分析装置からは整数で出力されます。用手法で分析した場合でも整数値で記入して下さい。測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。
- ▶測定温度 実際に測定に用いている温度のコード番号を記入して下さい。その他と回答した施設は、（ ）内に温度を記入して下さい。
- ▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。
- ▶検量法 今回、5として「磁気カード・バーコード等キャリブレーション」を加えました。該当する場合は、適切な回答をお願いします。
- ▶記入例 A 社の JSCC 標準化対応法を用いて、37℃で、A 社の酵素キャリブレータを用いて測定した施設の記入例は
測定法——JSCC 標準化対応法（11）を選択し、
試薬キットの製造販売元は A に該当するコード番号（aa）を選択し、
検量法は企業の酵素キャリブレータを用いた（1-1）を選択し、
測定値欄には標準化対応法での測定値を記入します。

5. AST

測定法 標準化対応法	
JSCC標準化対応法	11
IFCC標準化対応法 (PALP添加)	12
IFCC標準化対応法 (PALP無添加)	13
ドライケミストリ法	
富士ドライケム(富士フィルム)	82
スポットケム(アークレイ)	83
Dコンセプト(アークレイ)	84
ビトロスJ(オーソ)	85
その他	99
()	

利用している単位	
標準化対応法の国際単位	1
その他の国際単位	2
Karmen単位	3
その他の単位	9

測定温度	
37℃	1
30℃	2
25℃	3
その他	9
()	

試薬キットの製造販売元	
左ページのコード表から該当する番号を選んで記入してください。	

その他(99)のときの製造販売元名

検量法	
企業の酵素キャリブレーションを用いた	
製造販売元指定	1-1
製造販売元指定以外	1-2
実測Kファクターのみである	2-0
市販キットの添付係数のみである	3-0
磁気カード・バーコード等	
キャリブレーション	5-0
その他	9-0

トレーサビリティの確認	
・実施した	
JCCLSの標準品	4
企業の標準品	7
その他の標準品	8
・実施していない	
	9


* 企業の標準品を選んだ場合は、7に続く2桁の枠内に製造販売元コード番号を記入して下さい。

使用したキットの名称	
正式名称を省略しないで下欄に記入してください。	
キットの名称	

検量法がその他(9)の場合の
具体的検量法

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
U/L	U/L	U/L	U/L	U/L

【参考】測定法分類記入フロー

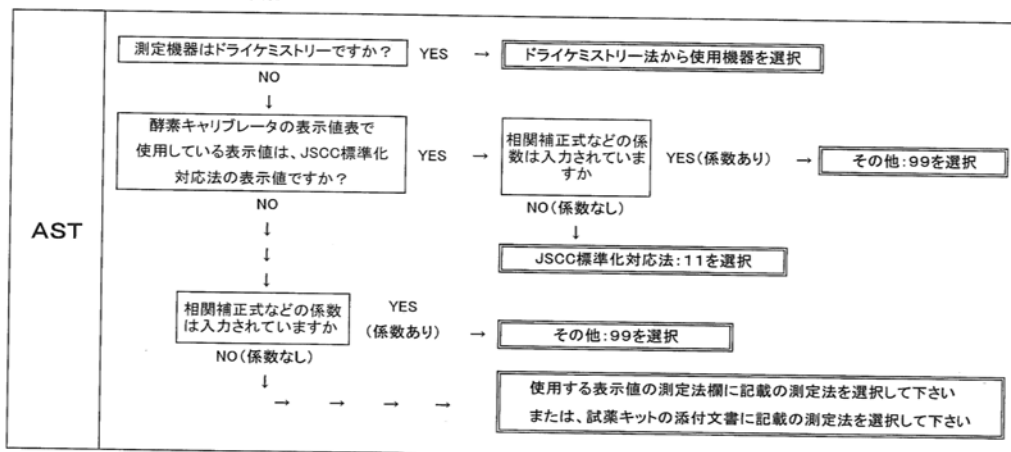

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名	コード	製造販売元名	コード	製造販売元名
02	栄研化学	30	ミズホメディー	55	岸本医科学研究所
04	カイノス	31	LSIメディエンス	57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
06	関東化学	32	和光純薬	58	合同酒精
07	協和メデックス	33	富士レビオ	59	塩野義製薬
08	極東製薬	34	日本凍結乾燥研究所	60	テルモ
09	シスメックス	36	旭化成	61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
10	エーディア	37	ニッポー・ボーメディカル	62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
11	シノテスト	38	アークレイ	63	バイエル薬品
12	常光	39	ニプロ	64	三洋化成工業
13	セロテック	40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス	65	オリエンタル酵母
14	アボットジャパン	42	日本ケミファ	66	フレイヤ
15	積水メディカル	43	日立	67	日本光電工業
18	デンカ生研	44	東ソー	68	扶桑薬品
19	東洋紡	45	BML	69	日本電子
20	日水製薬	46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	98	自家調製
21	アルフレッサ ファーマ	47	エイ アンド ティー	99	その他
22	ロシュ・ダイアグノスティクス	48	日本ベクトン・ディッキンソン		
26	富士フイルム	49	生化学工業		
27	ベックマン・コールター	53	日立化成		
29	シーメンス HCD	54	堀場製作所		

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

6. 13. ALT

- ▶測定法 使用している試薬の添付文書をよく読んで記入して下さい。その他の注意事項はASTと同様です。
その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。
- ▶POCT 機器につきましては、今年度は評価しますが、来年度以降の評価については精度管理検討委員会において検討いたします。該当する機器は、測定装置コード表に「p」と示しております。
- ▶測定値 自動分析装置からは整数で出力されます。用手法で分析した場合でも整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。
- ▶測定温度 ASTと同様です。
- ▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。
- ▶検量法 今回、5として「磁気カード・バーコード等キャリブレーション」を加えました。該当する場合は、適切な回答をお願いします。
- ▶記入例 ASTと同様です。

6. ALT

測定法	
標準化対応法	
JSCC標準化対応法.....	11
IFCC標準化対応法(PALP添加)...	12
IFCC標準化対応法(PALP無添加)	 13
ドライケミストリ法	
富士ドライケム(富士フィルム)...	82
スポットケム(アークレイ)	83
Dコンセプト(アークレイ)	84
ビトロスJ(オーソ)	85
その他	99
()	

利用している単位	
標準化対応法の国際単位...	1
その他の国際単位	2
Karmen単位	3
その他の単位	9

測定温度	
37℃	1
30℃	2
25℃	3
その他	9
()	

試薬キットの製造販売元
左ページのコード表から 該当する番号を選んで記 入してください。

その他(99)のときの
製造販売元名

検量法	
企業の酵素キャリブレータを用いた	
製造販売元指定	1-1
製造販売元指定以外	1-2
実測Kファクターのみである	2-0
市販キットの添付係数のみである ..	3-0
磁気カード・バーコード等	
キャリブレーション	5-0
その他	9-0

トレーサビリティの確認	
・実施した	
JCCLSの標準品	4
企業の標準品	7
その他の標準品	8
・実施していない	9

* 企業の標準
品を選んだ場合
は、7に続く2桁
の枠内に製造
販売元コード番
号を記入して下
さい。

使用したキットの名称
正式名称を省略しないで下欄に
記入してください。

キットの名称

検量法がその他(9)の場合の
具体的検量法

測定値 試料 1
.....
U/L


測定値 試料 2
.....
U/L

測定値 試料 3
.....
U/L

測定値 試料 4
.....
U/L

測定値 試料 5
.....
U/L

【参考】測定法分類記入フロー

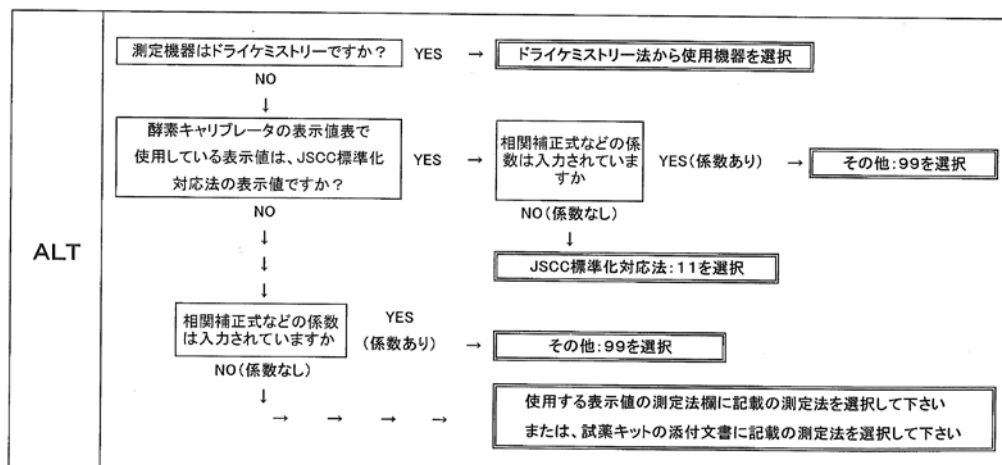

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスHCD

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニッポーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医学研究所
57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

7. 46. γ -GT (γ -GTP)

- ▶測定法 1) 測定法は JSCC 標準化対応法を基本とします。
2) γ -グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド以外の基質を用いても、標準化対応法としての条件がととのえば対応法として考えることは可能です。添付文書をよく読んで、基質にこだわらずに測定法を分類して下さい。
3) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。

▶POCT 機器につきましては、今年度は評価しますが、来年度以降の評価については精度管理検討委員会において検討いたします。該当する機器は、測定装置コード表に「p」と示しております。

- ▶測定値 自動分析装置では計測値は整数で出力されます。用手法で分析しても整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

- ▶測定温度 実際に測定に用いている温度のコード番号を記入して下さい。その他と回答した施設は、（ ）内に温度を記入して下さい。

- ▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

- ▶検量法 今回、5 として「磁気カード・バーコード等キャリブレーション」を加えました。該当する場合は、適切な回答をお願いします。

- ▶記入例 A 社の基質は γ -グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリドではありませんが、JSCC 勧告法と比例互換性が優れているので、A 社では、JSCC 勧告法の測定値を伝達する係数を Y 社の自動分析装置を利用する場合に提示しています。そして、この方法を IFCC 標準化対応法と定義しています。
測定法は、JSCC 標準化対応法として (11)、
試薬キットの製造販売元は A 社に相当する (aa)、
利用している単位の欄は標準化対応法の国際単位 (1) と記載します。

7. γ -GT (γ -GTP)

測定法	
JSCC標準化対応法	#
JSCC標準化対応法(ロシュリキテック)	#
3-カルボキシ-4-ニトロアニリドを基質とする方法	
Szaszの条件	22
ドライケミストリー法	
富士ドライケム(富士フィルム)...	82
スポットケム(アークレイ).....	83
Dコンセプト(アークレイ).....	84
ビトロスJ(オーソ).....	85
その他().....	99

利用している単位	
標準化対応法の国際単位...	1
その他の国際単位	2
Szasz法の条件での単位 ..	3
その他の単位	9

測定温度	
37℃	1
30℃	2
25℃	3
その他	9
()	

試薬キットの製造販売元	
左ページのコード表から 該当する番号を選んで 記入してください。	

その他(99)のときの
製造販売元名

使用したキットの名称	
正式名称を省略しないで下欄に 記入してください。	
キットの名称	

検量法	
企業の酵素キャリブレータを用いた	
製造販売元指定	1-1
製造販売元指定以外	1-2
実測Kファクターのみである	2-0
市販キットの添付係数のみである	3-0
磁気カード・バーコード等	
キャリブレーション	5-0
その他	9-0


トレーサビリティの確認	
・実施した	
JCCLSの標準品	4
企業の標準品	7
その他の標準品	8
・実施していない	9

* 企業の標準品
を選んだ場合
は、7に続く2桁
の枠内に製造販
売元コード番号
を記入して下さ
い。

検量法がその他(9)の場合の
具体的検量法

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
U/L	U/L	U/L	U/L	U/L

【参考】測定法分類記入フロー

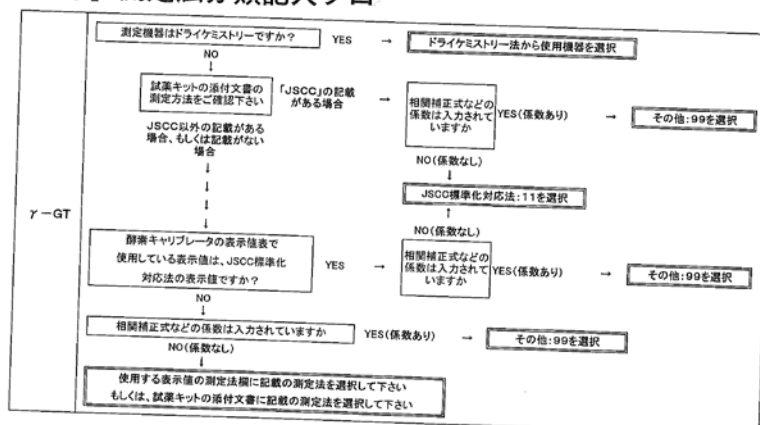

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名	コード	製造販売元名	コード	製造販売元名
02	栄研化学	30	ミズホメディー	55	岸本医科学研究所
04	カイノス	31	LSIメディエンス	57	旧・ユニチカ（現・ニプロ）
06	関東化学	32	和光純薬	58	合同酒精
07	協和メデックス	33	富士レビオ	59	塩野義製薬
08	極東製薬	34	日本凍結乾燥研究所	60	テルモ
09	シスメックス	36	旭化成	61	東洋濾紙（販社：協和メデックス）
10	エーディア	37	ニッポーメディカル	62	東洋濾紙（販社：三和化学研究所）
11	シノテスト	38	アークレイ	63	バイエル薬品
12	常光	39	ニプロ	64	三洋化成工業
13	セロテック	40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	65	オリエンタル酵母
14	アボットジャパン	42	日本ケミファ	66	フレイヤ
15	積水メディカル	43	日立	67	日本光電工業
18	デンカ生研	44	東ソー	68	扶桑薬品
19	東洋紡	45	BML	69	日本電子
20	日水製薬	46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	98	自家調製
21	アルフレッサ ファーマ	47	エイ アンド ティー	99	その他
22	ロシュ・ダイアグノスティックス	48	日本ベクトン・ディッキンソン		
26	富士フイルム	49	生化学工業		
27	ベックマン・コールター	53	日立化成		
29	シーメンスHCD	54	堀場製作所		

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

8. 4. ブギナ糖 血糖

- ▶測定法 1) グルコキナーゼを用いた方法は 21 です。
2) ブドウ糖脱水素酵素（グルコースデヒドロゲナーゼ；GDH）法には UV 法と比色法とがありますが、いずれも 31 と記入して下さい。
3) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
4) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。

▶自己血糖測定装置（SMBG） SMBG につきましては、適切な試料が提供できないため、評価対象外とします。該当する機器は、測定装置コード表に「S」と示しておりますので、ご確認下さい。

- ▶測定値 単位はmg/dL で記入して下さい。
小数点以下第 1 位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶試薬 試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

- ▶検量用試料（キャリブレーション）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1 成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレーションの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせして下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

8. 血糖

測定法 ブドウ糖酸化酵素比色法..... 11 ブドウ糖酸化酵素電極法..... 12 ヘキソキナーゼ・UV法..... 21 ブドウ糖脱水素酵素法..... 31 ドライケミストリ法 ビトロス(オーソ)..... 81 富士ドライケム(富士フィルム)・ 82 スポットケム(アークレイ)..... 83 Dコンセプト(アークレイ) 84 その他 99 ()	試薬キットの製造販売元 左ページのコード表から該当する番号を選んで記入してください。 その他(99)のときの 製造販売元名 	検量用試料(キャリブレーション)の種類 製造販売元指定のもの 溶媒ベース..... 1 血清ベース..... 2 製造販売元指定以外のもの 溶媒ベース..... 3 血清ベース..... 4 磁気カード・バーコード等 キャリブレーション 5 その他 9 	トレーサビリティの確認 NISTの標準品 5 ReCCSの標準品 6 企業の標準品 7 その他の標準品 8 実施していない 9

* 検量用試料の種類で
3, 4, 9を選んだ場合は
製造販売元コード番号を
記入してください。

* 企業の標準品を選んだ
場合は、7に続く2桁の枠内に
製造元(メーカー)コード番号を
記入してください。

使用したキットの名称 正式名称を省略しないで下欄に 記入してください。
キットの名称

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL

mg/dL

◎記入上の注意事項

9 22. HDL コレステロール

- ▶測定法 1) 沈殿操作を行わない方法は、試薬ごとに測定法コードを設定してありますので、自施設の試薬に相当する測定法コードを記入して下さい。
- 2) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
- 3) その他と回答した施設は、その測定法を（ ）内に記入して下さい。

▶POCT 機器につきましては、今年度は評価しますが、来年度以降の評価については精度管理検討委員会において検討いたします。該当する機器は、測定装置コード表に「p」と示しております。

- ▶測定値 単位はmg/dL で記入して下さい。
- 小数点以下第1位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
- 測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

- ▶検量用試料（キャリブレータ）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
- ・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
 - ・製造販売元指定のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
 - ・製造販売元指定以外のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
 - ・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
 - ・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

9. HDLコレステロール

測定法

沈殿操作を行わない方法

関東化学(シカリキッドHDL) 01-0301
 協和メデックス(メタボリード HDL-C).....01-0403
 シスメックス(HDL-C試薬・KL「コクサイ」) ..01-0601
 シノテスト(クイックオート ネオHDL-C).....01-0801
 セロテック (HDL-L) 01-1001
 積水メディカル(コレステストN HDL,クオリジエントHDL,
 エクセライザ'HDL) 01-1201
 デンカ生研(EX N) 01-1301
 東洋紡(ダイヤカラー・HDL) 01-1401
 BCKK(シンクロンシステム HDLコレステロール
 (HDL) 試薬) 01-1901
 シーメンスHCD(ディメンションカートリッジHDL
 コレステロールAHDL)....01-2001
 和光純薬(L タイプワコーHDL-C・M(2))...01-2303
 和光純薬(L タイプワコーHDL-C・M(3))...01-2304
 日立化成(セラテストAMHDL).....01-4601

ドライケミストリ法

富士ドライケム(富士フィルム) 08-1801
 スポットケム(アークレイ) 08-2701
 Dコンセプト(アークレイ) 08-2702
 ビトロス(オーソ) 08-2801

その他 99-9999

(名称)
 (製造販売元)
 (測定法)

検査用試料(キャリブ レータ)の種類

製造販売元指定のもの

血清ベース.....2

製造販売元指定以外のもの

血清ベース.....4

磁気カード・バーコード等

キャリブレーション 5

その他.....9

トレーサビリティの確認

NISTの標準品.....5

ReCCSの標準品.....6

企業の標準品.....7

その他の標準品.....8

実施していない.....9

	-	

測定値 試料6

mg/dl

測定値 試料 7

mg/dL

測定値 試料 8

mg/dL

◎記入上の注意事項

10. 23. LDL コレステロール

- ▶ 試薬
- 1) 試薬ごとにコードを設定してありますので、自施設の試薬に相当するコードを記入して下さい。
 - 2) Friedewald の式 (F 式) により計算している場合は、「Friedewald の式 (F 式) により算出」を選択し、測定装置 (ZZZ999) および検量用試料 (キャリブレータ) の種類はその他を選択して下さい。
 - 3) ドライケミストリについては、試薬を市販していないことから、調査をしないこととしています。
 - 4) その他と回答した施設は、その試薬の名称、製造販売元名を () 内に記入して下さい。

▶ POCT 機器につきましては、今年度は評価しますが、来年度以降の評価については精度管理検討委員会において検討いたします。該当する機器は、測定装置コード表に「p」と示しております。

- ▶ 測定値 単位はmg/dL で記入して下さい。
小数点以下第 1 位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

- ▶ 検量用試料 (キャリブレータ) とは、測定値を得るために標準液 (スタンダード) として測定する試料を指します。
- ・ 血清ベースの検量用試料とは、基材として血清 (またはアルブミンなどの蛋白) をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
 - ・ 製造販売元指定のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
 - ・ 製造販売元指定以外のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
 - ・ キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
 - ・ 検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

10. LDLコレステロール

試薬キット名

関東化学(シカリキッドLDL).....01-0301
 協和メデックス(デタミナ-L LDL-C)....01-0401
 協和メデックス(メタボリード LDL-C)....01-0403
 シスメックス(LDL-C試薬・KL「コクサイ」)・・01-0601
 シノテスト(クイックオート ネオ LDL-C)・・01-0801
 セロテック(LDL-L) 01-1001
 積水メディカル(コレステスLDL、
 クオリシメントLDL、
 エクセライザ[®]LDL) 01-1201
 デンカ生研(LDL-EX N) 01-1301
 デンカ生研(デュアルCHO T&L) 01-1302
 東洋紡(ダイヤカラー・LDL) 01-1401
 ベックマン・コールター(LDLD試薬) ...01-1901
 シーメンスHCD (LDLコレステロールALDL)
 01-2001
 和光純薬(Lタイプ LDL-C M) 01-2302
 オーソ(ビトロス マイクロチップ dLDL) ・01-2801
 日立化成(セラテスタムLDL).....01-4601
 Friedewaldの式(F式)により算出.....03-9999
 その他(名称).....)・99-9999
 (製造販売元).....)

	-	

検量用試料(キャリブレーション)の種類

製造販売元指定のもの

血清ベース..... 2

製造販売元指定以外のもの

血清ベース..... 4

磁気カード・バーコード等

キャリブレーション 5

その他 () 9

測定値 試料6

mg/dL

測定値 試料 7

mg/dL

測定値 試料 8

mg/dL

◎記入上の注意事項

11. 24. HbA1c

- ▶測定法 1) HPLC 法は不安定分画を除去する方法のみコードを設定しました。試薬ではなく分析装置の製造販売元による分類となります。
- 2) 不安定分画を除去しない HPLC 法、イオン交換樹脂などでミニカラムを使用する用手的な方法はその他を記入して下さい。
- 3) 免疫学的方法、酵素法は、試薬の製造販売元ごとにコードを設定しましたので、自施設の試薬に相当するコードを記入して下さい。
- 4) その他と回答した施設は、その測定法または試薬キットの名称、製造販売元名を（ ）内に記入して下さい。

▶POCT 機器につきましては、今年度は評価しますが、来年度以降の評価については精度管理検討委員会において検討いたします。該当する機器は、測定装置コード表に「p」と示しております。

- ▶測定値 単位は%で記入して下さい。

小数点以下第2位を四捨五入のうえ、小数点以下第1位で記入して下さい。

小数点以下0の場合は0を必ず記入して下さい。

測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、999.9と記入して下さい。

測定結果は NGSP 値を記載して下さい。

なお、NGSP 値と JDS 値は以下の式で換算が可能です。

$$\text{NGSP 値 (\%)} = 1.02 \times \text{JDS 値 (\%)} + 0.25 \%$$

- ▶標準液（キャリブレータ）および検量方法の種類については、製造販売元指定の標準液、製造販売元指定以外の標準液、自家製標準液、標準液を用いない、その他の5種類に大別しています。

- ・製造販売元指定の標準液で製造販売元の表示値をそのまま使用している施設は、コード番号「1」を記入して下さい。自施設で独自に値付けを行うなど何らかの形で表示値を変更して使用している施設は、すべてコード番号「2」を記入して下さい。
- ・製造販売元指定以外の標準液で製造販売元の表示値をそのまま使用している施設は、コード番号「3」を記入して下さい。自施設で独自に値付けを行うなど何らかの形で製造販売元の表示値を変更して使用している施設は、すべてコード番号「4」を記入して下さい。
- ・自家製標準液を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
- ・標準液を用いないで装置の係数をそのまま使用している施設は、コード番号「6」を記入して下さい。装置の係数を何らかの形で補正している施設は、コード番号「7」を記入して下さい。
- ・その他の方法で検量を行っている施設は、コード番号「9」を記入し、その方法を（ ）内に記入して下さい。

参考調査

- ▶検体数 貴施設において1ヶ月間に依頼される HbA1c の平均依頼検体数（平均のない場合は、集計のある単月の依頼検体数）を記入して下さい。

分析装置の製造販売元名・試薬キットの製造販売元名

HPLC法

常光	01-0901
アークレイ	01-2701
東ソー	01-2901
バイオ・ラッド	01-3001

免疫学的方法

協和メデックス(汎用自動分析装置)凍乾品	02-0401
協和メデックス(DM-JACKシリーズ)凍乾品	02-0402
協和メデックス(汎用自動分析装置)液状品	02-0403
協和メデックス(DM-JACKシリーズ)液状品	02-0404
ロシュ(コバス試薬HbA1c III)	02-1705
ベックマン・コールター(AU680)	02-1901
シーメンスHCD(DCAシステム)	02-2001
シーメンスHCD	
(ディメンションフレックスカートリッジHB1c)	02-2002
和光純薬	02-2301
富士レビオ	02-2401
アークレイ(スポットケム)	02-2701
オーソ(ビトロス マイクロチップd%A1c)	02-2802
オーソ(ビトロス マイクロチップHbA1c)	02-2803
サカエ(三和化学研究所・協和メデックス)	
(メディダスHbA1c)	02-4501

酵素法

協和メディックス	03-0401
积水メディカル	03-1201
アークレイ	03-2701
日本電子	03-3501

その他(名称)

	99-9999
(製造販売元)	

**標準液(キャリブレータ)及び検量
方法の種類**

製造販売元指定の標準液

表示値をそのまま使用…………… 1

表示値を変更して使用…………… 2

製造販売元指定以外の標準液

表示値をそのまま使用…………… 3

表示値を変更して使用…………… 4

自家製標準液…………… 5

標準液を用いない

装置(または試薬)の係数を
そのまま使用…………… 6

装置(または試薬)の係数を
補正して使用…………… 7

その他 (…………… 9)

注)平成27年度においても生血液2試料において参考調査を行います。

試料18および19において、ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積を測定した残余の血液により、HbA1cの測定値を記入してください。なお、HbA1cを測定できなかった場合その理由を記入して□ください。

試料18、19でヘモグロビンA1cが測定できなかった理由

- 1 試料が少なく測定できなかった。
- 2 参考調査なので不参加。

使用したキットの名称
正式名称を省略しないで下欄に記入してください。
キットの名称

Figure 1 shows four boxes representing different samples. Each box is divided into two sections. The top section contains the text '測定値' (measured value) and '試料' (sample) followed by a number. The bottom section is labeled 'NGSP値' (NGSP value) and shows a percentage on a scale from 0 to 100%.

試料 (Sample)	測定値 (Measured Value)	NGSP値 (NGSP Value)
9	9	9%
10	10	10%
18	18	18%
19	19	19%

◎記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名	コード	製造販売元名	コード	製造販売元名
02	栄研化学	30	ミズホメディー	55	岸本医科学研究所
04	カイノス	31	LSIメディエンス	57	旧・ユニチカ(現・ニプロ)
06	関東化学	32	和光純薬	58	合同酒精
07	協和メデックス	33	富士レビオ	59	塩野義製薬
08	極東製薬	34	日本凍結乾燥研究所	60	テルモ
09	シスメックス	36	旭化成	61	東洋濾紙(販社:協和メデックス)
10	エーディア	37	ニトーボーメディカル	62	東洋濾紙(販社:三和化学研究所)
11	シノテスト	38	アークレイ	63	バイエル薬品
12	常光	39	ニプロ	64	三洋化成工業
13	セロテック	40	オーソ・クリニカル・図イアグノスティックス	65	オリエンタル酵母
14	アボットジャパン	42	日本ケミファ	66	フレイヤ
15	積水メディカル	43	日立	67	日本光電工業
18	デンカ生研	44	東ソー	68	扶桑薬品
19	東洋紡	45	BML	69	日本電子
20	日水製薬	46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	98	自家調製
21	アルフレッサファーマ	47	エイ アンド ティー	99	その他
22	ロシュ・ダイアグノスティックス	48	日本ベクトン・ディッキンソン		
26	富士フイルム	49	生化学工業		
27	ベックマン・コールター	53	日立化成		
29	シーメンスHCD	54	堀場製作所		

製造販売元と販売会社が異なることがあります。販売会社名でなく必ず製造販売元のコード番号を記入してください。
コード番号99のその他の場合は必ず製造販売元を記入してください。

また東洋濾紙は、販売会社によりコードが異なります。販売会社を確認のうえ製造販売元を記入してください。

尿検査の一般的注意

1. 測定項目は尿糖、尿蛋白は定性・半定量検査、尿潜血は定性検査です。

2. 測定法は、日常検診で用いている方法で測定してください。

3. 試験紙を用いる場合、各製品で判定基準、標準色調の濃度表示が異なります。

得られた測定値が右ページの(結果)の表示に一致しない場合は、その測定値に最も近い数値のコード番号を記入して下さい。

12. 尿糖半定量

▶ 結果 試験紙は表示が陰性、±、1+、2+、3+のみになっているものと、濃度表示が併記されているものがありますが、各試験紙の添付文書に従っておおよその濃度に換算して回答してください。

シスメックスのユリス2400、スーパーUA(スーパーアトロン)、ミデイトロンの300mg/dLとロシュ・ダイアグノスティックスのユリラックスS、ユリス1100の300mg/dLは、250mg/dLを選択してください。

アークレイの試験紙において測定結果が30、50mg/dLとなった場合は50mg/dL前後を、70、100、150mg/dLとなった場合は100mg/dL前後を、200、300mg/dLとなった場合は250mg/dL前後を、OVERとなった場合は2,000mg/dL前後を選択して下さい。

13. 尿蛋白半定量

▶ 結果 試験紙は表示が陰性、±、1+、2+、3+のみになっているものと、濃度表示が併記されているものがありますが、各試験紙の添付文書に従っておおよその濃度に換算して回答してください。

アークレイの試験紙において測定結果が10mg/dLとなった場合は15mg前後を、20、30、50mg/dLとなった場合は30mg/dL前後を70、100、200mg/dLとなった場合は100mg/dL前後をOVERとなった場合は1,000mg/dL前後を選択して下さい。テルモの250mg/dLは300mg/dLを選択して下さい。ロシュ・ダイアグノスティックスの25mg/dLの場合には30mg/dLを、75mg/dLと150mg/dLは100mg/dLを選択して下さい。

14. 尿潜血半定量

▶ 結果 試験紙は表示が陰性、±、1+、2+、3+のみになっているものと、濃度表示が併記されているものがありますが、今回の調査では各試験紙の添付文書に従って定性法で回答してください。

12. 尿糖半定量

測定法 試験紙法	
肉眼判定	1
機器測定	2
その他	9
()	

その他(9)のときは()に
測定法を記入してください。

試験紙の製造元	
試験紙の製造元(メーカー)	
コード表から該当する番号を 選んで記入してください。	

その他(99)のときの
メーカー名

結果	
陰性	1
50mg/dL前後	2
100mg/dL前後	3
250mg/dL前後	4
500mg/dL前後	5
1000mg/dL前後	6
2000mg/dL前後	7

試料11

試料12

試料13

試料14

試料15

13. 尿蛋白半定量

測定法 試験紙法	
肉眼判定	1
機器測定	2
その他	9
()	

その他(9)のときは()に
測定法を記入してください。

試験紙の製造元	
試験紙の製造元(メーカー)	
コード表から該当する番号を 選んで記入してください。	

その他(99)のときの
メーカー名

結果	
陰性	1
15mg/dL前後	2
30mg/dL前後	3
100mg/dL前後	4
300mg/dL前後	5
500mg/dL前後	6
1000mg/dL前後	7

試料11

試料12

試料13

試料14

試料15

14. 尿潜血半定量

測定法 試験紙法	
目視判定	1
機器判定	2
その他	9
()	

その他(9)のときは()に
測定法を記入してください。

試験紙の製造元	
試験紙の製造元(メーカー)	
コード表から該当する番号を 選んで記入してください。	

その他(99)のときの
メーカー名

結果	
陰性	1
±	2
1+	3
2+以上	4

試料11

試料12

試料13

試料14

試料15

◎記入上の注意事項

全血算(CBCについて)

本項目(15~19)の評価・評点は機種別に行います。ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、および血小板数を測定するのに用いた機種名を測定装置コード表から選んで記入してください。ただし用手法で実施した場合は「AAZ901」と記

してください。使用機種に該当する測定装置コードが目当てにない場合は、測定装置のメーカーにお問い合わせ

15. ヘモグロビン

- ▶ **測定値** 単位はg/dLで記入してください。
小数点以下が0の場合は0を記入してください。

測定不能の場合は99.9と記入してください。

- ▶ **測定法** メーカーに測定法を確認してから記入してください。

注) SLS(ラウリル硫酸ナトリウム)法、アルキルアミンオキシド法はともに非シアン界面活性剤法です。

16. 赤血球数

- ▶ **測定値** 単位が $\times 10^4/\mu\text{L}$ となっています。桁間違いのないように注意してください。

測定不能の場合は999と記入してください。

17. 白血球数

- ▶ **測定値** 単位が $\times 10^2/\mu\text{L}$ となっています。桁間違いのないように注意してください。

測定不能の場合は999と記入してください。

試料を測定した際に測定装置から測定データの信頼性に配慮が必要なメッセージフラグが付加された場合は、測定装置のメーカーにお問い合わせください。

注1) ベックマン・コールター、ユニセルDxH800、LH750、LH755、LH780、LH785は、UWBCを記入してください。

注2) ADVIA120/2120/2120iはWBCBを記入してください。

WBCB値表示が不明の場合はメーカーにお問い合わせください。

注3) シスメックスXNシリーズはTNC-Nを記入してください。

注4) アボットセルダインサファイヤはWBC測定値において、NRBCの測定値が得られた場合、そのNRBC数値をWBC数値に加えてWBC数報告値としてください。

18. ヘマトクリット

- ▶ **測定値** 単位は%で記入してください。桁間違いのないように注意してください。

小数点以下が0の場合は0を必ず記入してください。

測定不能の場合は99.9と記入してください。

試料を測定した際に測定装置から測定データの信頼性に配慮が必要なメッセージフラグが付加された場合は、測定装置のメーカーにお問い合わせください。

19. 血小板数

- ▶ **測定値** 単位は $\times 10^4/\mu\text{L}$ で記入してください。桁間違いのないように注意してください。

小数点以下が0の場合は0を必ず記入してください。

測定不能の場合は999.9と記入してください。

試料を測定した際に測定装置から測定データの信頼性に配慮が必要なメッセージフラグが付加された場合は、測定装置のメーカーにお問い合わせください。

20. 平均赤血球容積

- ▶ **測定値** 単位はfLで記入してください。桁間違いのないように注意してください。

小数点以下が0の場合は0を記入してください。

小数点以下が2桁表示可能な計数機の場合は少数点2桁目を四捨五入してください。

15. ヘモグロビン

測定法	
シアンメヘモグロビン法.....	1
非シアン界面活性剤法.....	2
その他	9
(測定法)	

その他(9)のときは()に
測定法を記入してください。

測定装置コード

測定値 試料 16
g/dL

測定値 試料 17
g/dL

測定値 試料 18
g/dL

測定値 試料 19
g/dL

16. 赤血球数

測定装置コード

測定値 試料 16
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

測定値 試料 17
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

測定値 試料 18
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

測定値 試料 19
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

17. 白血球数

測定装置コード

測定値 試料 16
$\times 10^2 / \mu\text{L}$

測定値 試料 17
$\times 10^2 / \mu\text{L}$

測定値 試料 18
$\times 10^2 / \mu\text{L}$

測定値 試料 19
$\times 10^2 / \mu\text{L}$

18. ヘマトクリット

測定装置コード

測定値 試料 16
%

測定値 試料 17
%

測定値 試料 18
%

測定値 試料 19
%

19. 血小板数

測定装置コード

測定値 試料 16
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

測定値 試料 17
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

測定値 試料 18
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

測定値 試料 19
$\times 10^4 / \mu\text{L}$

20. 平均赤血球容積

測定値 試料 16
fL

測定値 試料 17
fL

測定値 試料 18
fL

測定値 試料 19
fL

平成27年度（第24回） 臨床検査精度管理調査 補助調査票

施設コード					
施設名					記載者氏名

1. 精度管理等の実施

1-1 臨床検査精度管理実施体制 ◆ 該当するものに「○」印を記入してください。（ ）内にはメーカー名を記入してください。

	選任	職種				職位・職制(注1)				受講済研修会名(注2)		
精度管理責任者	有・無	医師	臨床検査技師	その他		a	b	c	d	a	b	c
精度管理担当者	有・無	医師	臨床検査技師	その他		a	b	c	d	a	b	c
全衛連以外の外部精度管理調査参加の有無	日本医師会	検査技師会	検査所協会	都道府県市	日本総合健診医学会	試薬等メーカー主催		その他				
	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	()		有・無				

注1) 職位・職制は、a: 所長・局長クラス b: 部長・次長クラス c: 課長・補佐クラス d: その他とします。

注2) 研修会は、全衛連主催の a: 検体検査の研修会、b: 労働衛生検査の研修会、c: 臨床検査の研修会とします。

1-2 内部精度管理の実施 ◆ 該当するもの、空欄に「○」を記入してください。その他の場合（ ）に具体的に記載してください。

検査項目		実施の有無	実施頻度		コントロール試料		
			毎回又は毎日1回以上	その他	市販品	自家製	濃度数
生化学	酵素	有・無	()		a. 凍結コントロール血清 b. 凍結乾燥コントロール血清 c. 液状コントロール血清 d. その他()		a. 2濃度 b. その他
	脂質	有・無	()		a. 凍結コントロール血清 b. 凍結乾燥コントロール血清 c. 液状コントロール血清 d. その他()		a. 2濃度 b. その他
	血糖	有・無	()		a. 凍結コントロール血清 b. 凍結乾燥コントロール血清 c. 液状コントロール血清 d. その他()		a. 2濃度 b. その他
血液	血算	有・無	()		a. メーカー指定のコントロール試料 b. その他()		a. 2濃度 b. その他
尿	糖・蛋白等	有・無	()		a. メーカー指定のコントロール試料 b. その他()		a. 2濃度 b. その他
自施設測定に係る「精度管理標準作業書」策定の有無					有・無		

◇ 以下の 1-3, 1-4 については、検査機関は回答の必要はありません。

1-3 外部委託先への精度管理調査 ◆ 該当するものに「○」を記入してください。

検査項目		実施の有無	実施頻度	実施の方法	
				同一検体ブラインド挿入(注)	既知試料挿入
生化学	酵素	有・無	年1回 半年1回 月1回 その他	有・無	有・無
	脂質	有・無	年1回 半年1回 月1回 その他	有・無	有・無
	血糖	有・無	年1回 半年1回 月1回 その他	有・無	有・無
血液	血算	有・無	年1回 半年1回 月1回 その他	有・無	有・無
尿	糖・蛋白等	有・無	年1回 半年1回 月1回 その他	有・無	有・無
外部委託先に係る「精度管理標準作業書」				有・無	

注) 「同一検体ブラインド挿入」とは、同じ検体を2分割以上にして、2人分以上の検体として測定を依頼することをいいます。

1-4 外部委託先との契約・確認等 ◆ 確認内容欄の「有」の内容を確認のうえ、有無欄に「○」を記入してください。

確認の項目	確認の有無	確認の内容
外部委託先との有効期限が明記された契約書	有・無	「有」：有効な契約書原本又は控えがある
外部委託先における内部精度管理結果の確認	有・無	「有」：結果控、若しくは委託先への訪問・確認記録がある
外部委託先における外部精度管理結果の確認	有・無	「有」：結果控、若しくは委託先への訪問・確認記録がある
健診受託先への外部委託についての情報公開	有・無	「有」：業務案内書等に、外部委託先・項目等を明記している

2. 標準作業書・個人情報保護管理・廃棄物管理

◆ 有無欄に「○」印を記載してください。

担当業務別標準作業書の有無	個人情報保護管理体制の有無	廃棄物(感染性廃棄物)処理管理体制の有無
有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無

◆ 未実施・非該当項目は項目欄には斜線（／）を記載してください。

3. 臨床検査実施数及び実施状況（平成26年度実績）

◆ 施設内測定を、自施設・職員が実施、運営委託(FMS方式)で実施、ブランチラボで実施別に「○印」を記載してください。

検 査 項 目		年間実施数	施設内測定件数	施設内測定の実態「○印」			外部委託測定件数
				自施設・職員	FMS方式	ブランチラボ	
生化学項目	総コレステロール	件	件				件
	中 性 脂 肪	件	件				件
	HDLコレステロール	件	件				件
	LDLコレステロール	件	件				件
	AST(GOT)	件	件				件
	ALT(GPT)	件	件				件
	γ-GT(γ-GTP)	件	件				件
	尿 酸	件	件				件
	クレアチニン	件	件				件
	血 糖	件	件				件
血液項目	HbA1c	件	件				件
	ヘモグロビン	件	件				件
	赤 血 球 数	件	件				件
	白 血 球 数	件	件				件
	血 小 板 数	件	件				件
尿項目	ヘマトクリット値	件	件				件
	尿 糖	件	件				件
	尿 蛋 白	件	件				件
	尿 潜 血	件	件				件

4. 検体の採取・搬送・授受

4-1 血液検体（生化学・血液検査） ◆該当欄のa,b,c,d.のいずれかに○印を記入してください。
◆複数の手法を採用している場合は、主たる手法(最も件数の多い手法)を記入してください。

検体の採取法 (検査機関は回答不要)	a. JCCLSガイド ライン準拠	b. ガイドライン未対応	c. ガイドライン準備中	
検体の回収者	a. 健診スタッフ	b. 健診施設回収担当者 (a 以外の担当者)	c. 測定機関の回収担当者	d. 出張健診現場担当者
検体回収時の保存方法	a. 室 温	b. アイスボックス	c. 冷蔵庫 (簡易型携帯冷蔵庫を含む)	
検体搬送時の温度管理	a. 実施して いない	b. 実施しているが 記録はない	c. 実施して記録はある	
検体回収時の授受記録	a. な い	b. 自施設回収記録	c. 委託測定機関授受記録	d. 依頼書(伝票)控

4-2 尿検体（尿糖・蛋白等検査） ◆該当欄のa,b,c,d.のいずれかに○印を記入してください。
◆複数の手法を採用している場合は、主たる手法(最も件数の多い手法)を記入してください。

検体の採取法 (検査機関は回答不要)	a. 自宅採尿	b. 健診会場で採尿 (健診現場・自施設)		
検査の実施場所 (検査機関は回答不要)	a. 出張健診 現場	b. 自施設検査室	c. 外部委託検査	
検体の回収者	a. 健診スタッフ	b. 健診施設回収担当者 (a 以外の担当者)	c. 測定機関の回収担当者	d. 出張健診現場担当者
検体回収時の保存法	a. 室 温	b. アイスボックス	c. 冷蔵庫 (簡易型携帯冷蔵庫を含む)	
検体搬送時の温度管理	a. 実施して いない	b. 実施しているが 記録はない	c. 実施して記録はある	
検体回収の授受記録	a. な い	b. 自施設回収記録	c. 委託測定機関授受記録	d. 依頼書(伝票)控

施設コード					
施設名					記載者氏名

臨床検査の基準範囲に関する調査票（平成27年度）

下記事項をお読みの上、検査基準範囲に関してご回答ください。

1. 「基準範囲」欄には、貴施設としてデータを判定する尺度として使用している基準範囲を記入してください（健診依頼先の要請による基準範囲等は除外）。
2. 男女別に基準範囲を設定していない場合は、項目欄の「男」を抹消してその欄に基準範囲を記入してください。
また、男女別に基準範囲を設定している場合であって、記入欄が男女に区分されていない場合は、備考欄に女性の基準範囲を記入してください。
3. 「基準範囲の決め方」と、「基準範囲の変更」欄は、該当するアルファベット若しくは数字を○で囲んでください。
4. HbA1cについては、NGSP値で記入してください。
5. 血液学項目で標記単位が異なる場合は、単位を抹消し、新たに備考欄に使用単位を記入してください。
6. 「その他」<f>または<5>を選択した場合は、出来るだけ具体的に備考欄に記入してください。

（平成26年度以降の変更について記入してください。）

【基準範囲の決め方】

- a : 学術文献から引用
- b : 日本人間ドック学会から引用
- c : 日本臨床検査標準協議会（JCCLS）から引用
- d : 使用試薬の添付説明書記載の値を引用
- e : 多数の健康者を実測して自機関で作成
- f : その他（単位表示など具体的に記述してください）

【基準範囲の変更】

- 0 : 変更なし
- 1 : 検査方法の変更
- 2 : 使用機器の変更
- 3 : 試薬の変更
- 4 : 基準値引用の変更
- 5 : その他（具体的に記述してください）

項 目（単位）		基準範囲（下限～上限）	基準範囲の決め方	基準範囲の変更	備 考
総コレステロール	(mg/dL)	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
中 性 脂 肪	(mg/dL)	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
H D L コレステロール	(mg/dL)	男	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女			
L D L コレステロール	(mg/dL)	男	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女			
A S T (GOT)	(U/L)	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
A L T (GPT)	(U/L)	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	

項 目 (単位)			基準範囲 (下限～上限)	基準範囲の決め方	基準範囲の変更	備 考
γ-GT	(U/L)	男	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
尿 酸	(mg/dL)	男	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
クレアチニン	(mg/dL)	男	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
血 糖	(mg/dL)		～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
HbA1c	(%)		～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
ヘモグロビン	(g/dL)	男	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
赤 血 球 数	$(10^4/\mu\text{L})$	男	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
白 血 球 数	$(10^2/\mu\text{L})$		～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
血 小 板 数	$(10^4/\mu\text{L})$		～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
ヘマトクリット	(%)	男	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
M C V	(fL)	男	～	a b c d e f	0 1 2 3 4 5	
		女	～			